



Вузловий турнікет JETT

Junctional Emergency Treatment Tool (JETT) Tourniquet

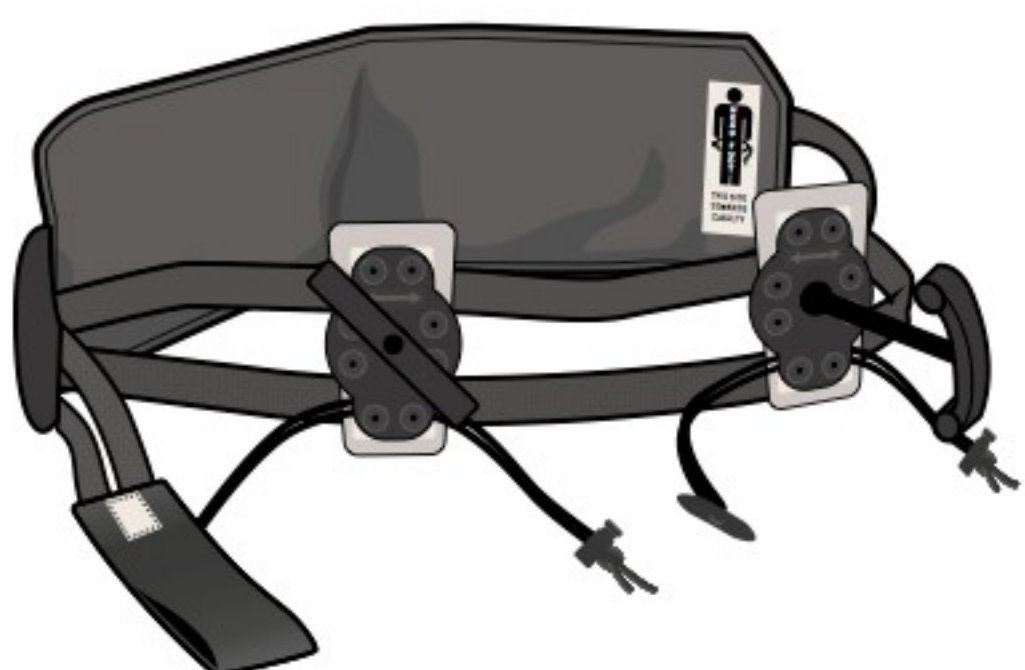
ВАЖЛИВО. Вузловий турнікет JETT наносити тільки після належної перев'язки рани.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

01

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.

**02**

Якщо можливо, застосовуйте прямий тиск на рану під час підготовки джгута.

**03**

Спорожніть кишені пораненого та вийміть усі предмети навколо талії.

**04**

Почніть із пораненого на спині, не завдаючи подальших травм.

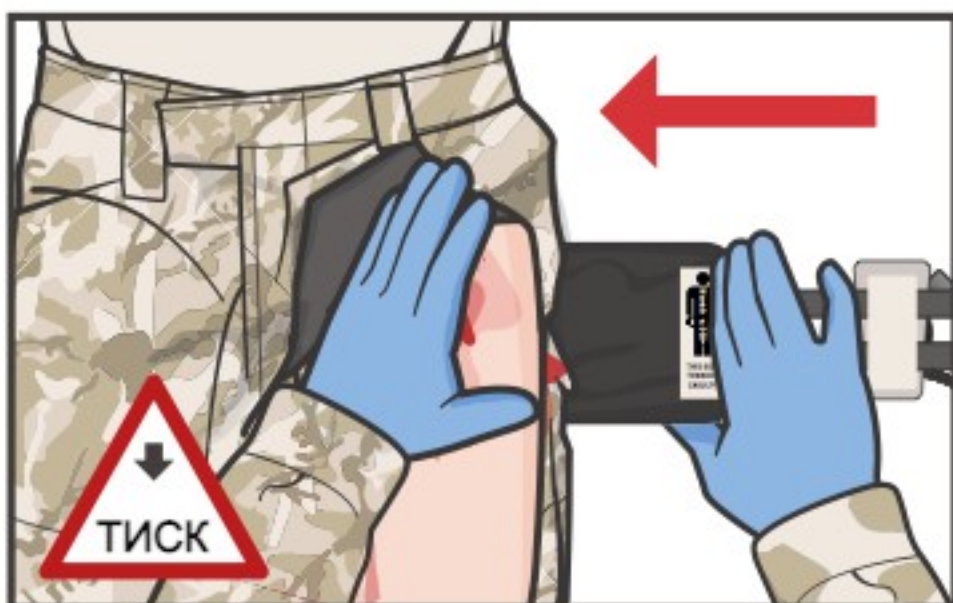
**05**

Застосуйте прямий тиск на стегнову артерію.

06

Відкрийте, розгорніть свій пристрій і готуйтеся застосувати до пораненого.

ВАЖЛИВО «This Side Toward Casualty» має стояти обличчям до пораненого.

**07**

Просуньте ремінь під поперек або сідниці пораненого.

**08**

Знайдіть стегнову артерію трохи нижче пахової зв'язки, яка проходить від верхнього гребеня клубової кістки до лобкової кістки.

Використовуйте це, щоб правильно розташувати пристрій.

**09**

Використовуйте рух вперед-назад, щоб розташувати ремінь під сідницями, зосередивши його на пораненому, забезпечуючи належне положення притискних подушечок на стегновій артерії.

продовження на наступній сторінці...