











Інструкція до гемостатичного засобу XSTAT®



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: XSTAT не показаний для використання в ділянці грудної клітки, плевральній порожнині, середостінні, черевній порожнині, заочеревинному та крижовому просторі, вище пахової зв'язки та над ключицею.




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.


РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі. ПРИМІТКА: Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.




ЗАСТОСОВУЙТЕ прямий тиск на рану, поки збираєте та готуєте аплікатор.

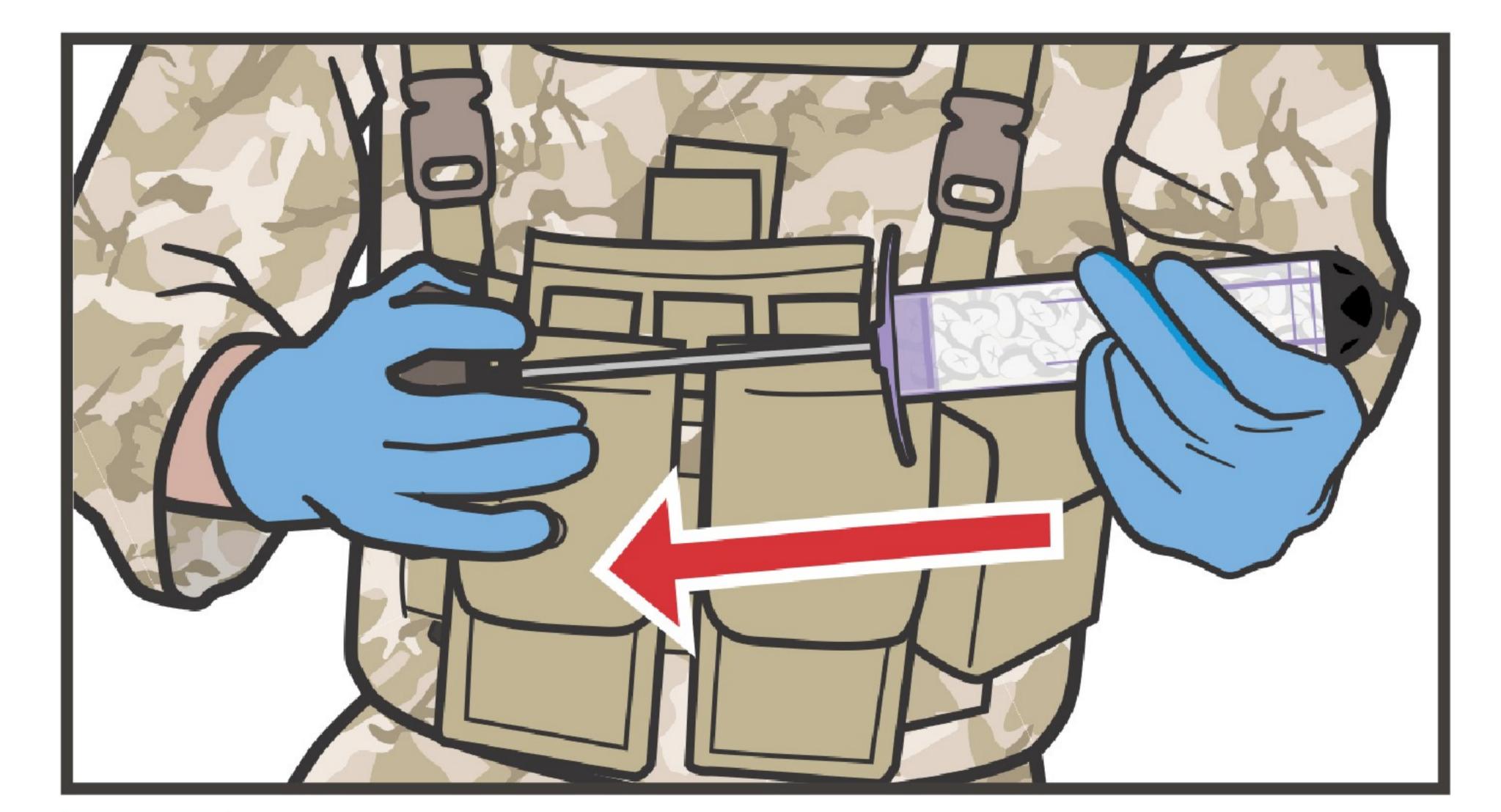

Під час використання XSTAT 30 ТЯГНІТЬ поршень назовні, допоки він не зупиниться і не

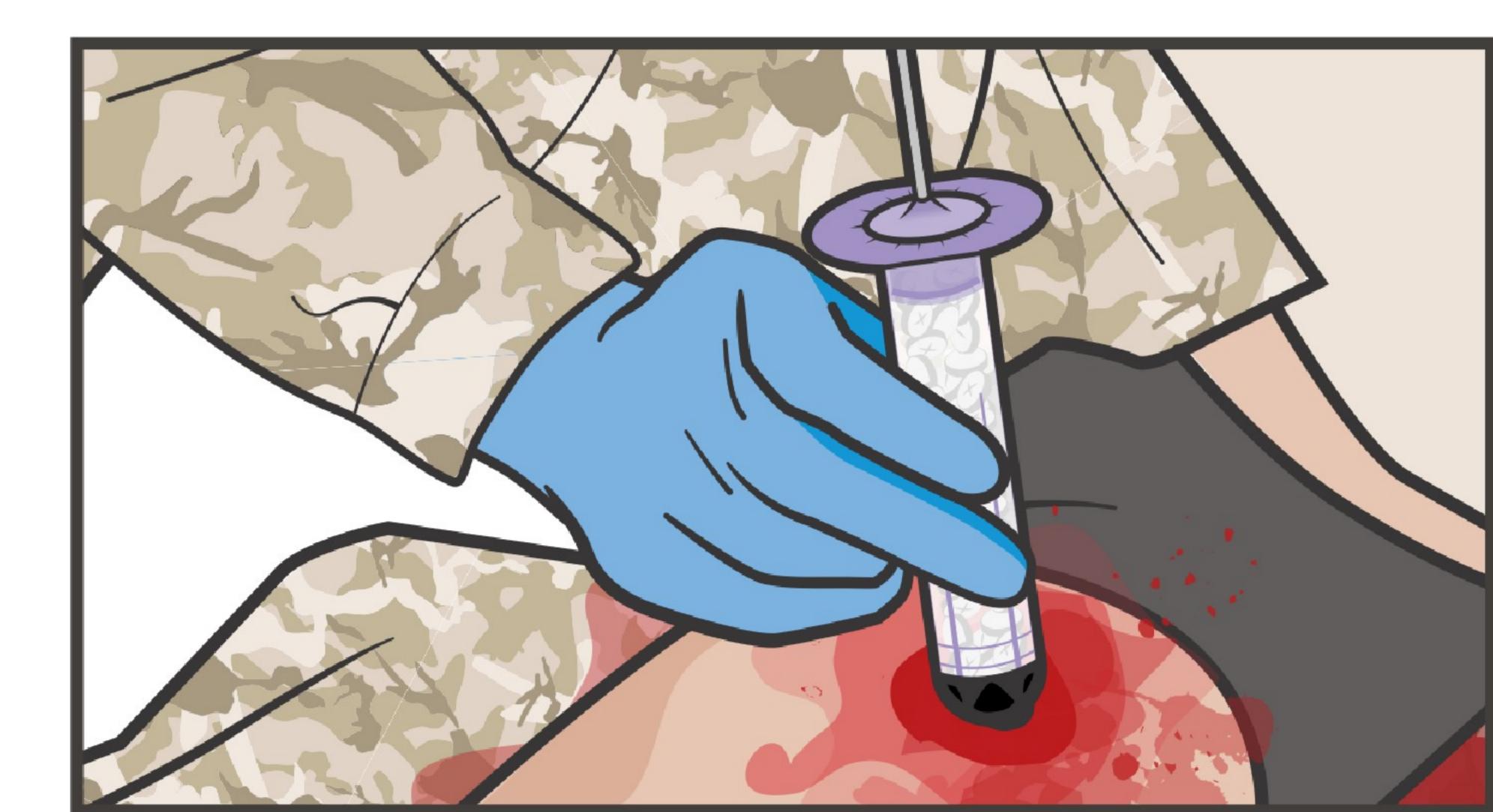

ВСТАВТЕ кінчик аплікатора в рановий канал якомога ближче до джерела кровотечі.

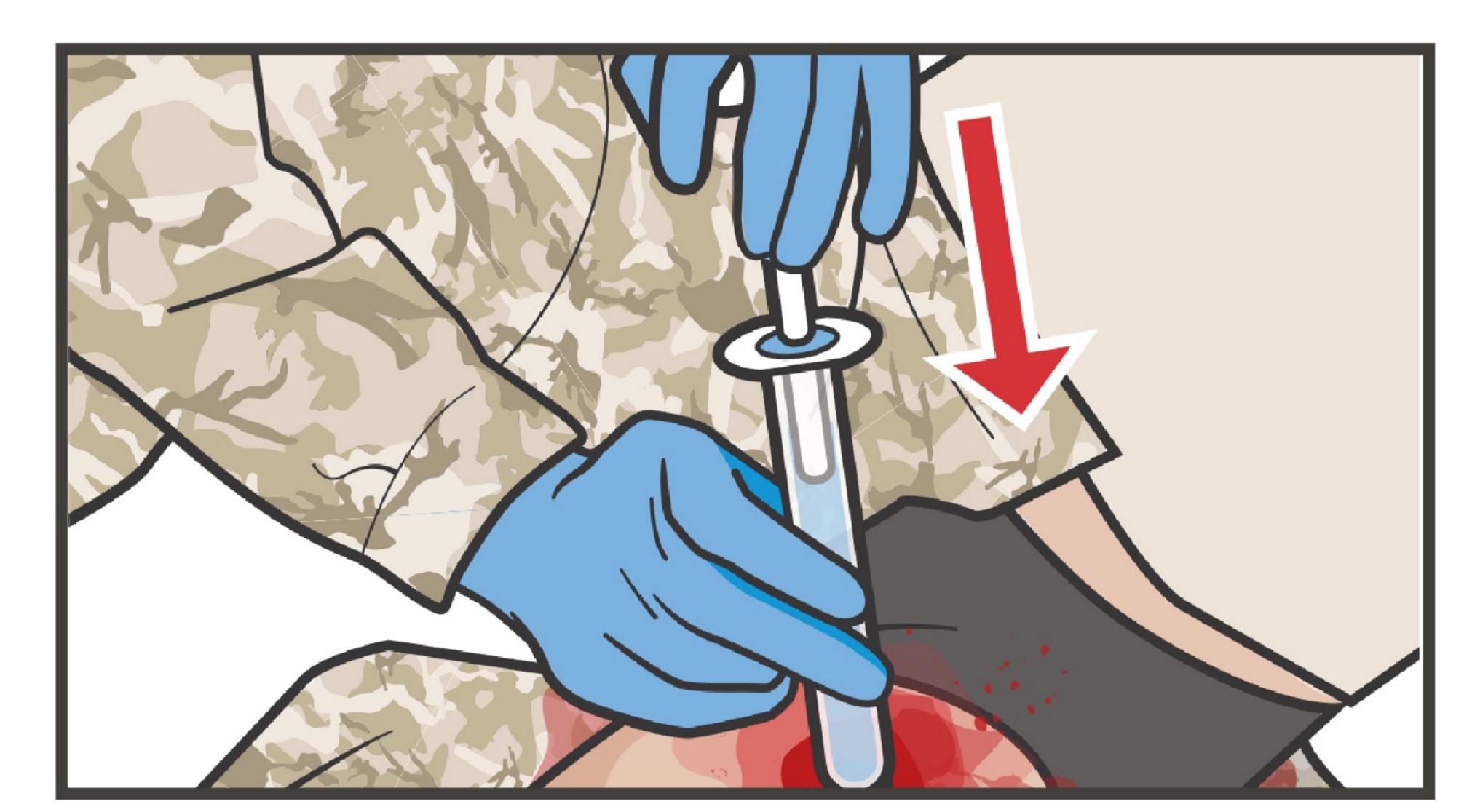


ВСТАВТЕ поршень у пристрій, якщо використовуєте XSTAT 12.




СИЛЬНО НАТИСНІТЬ на ручку поршня, щоб ввести міні-спонжі у рановий канал чи порожнину.

ПРИМІТКА: Якщо є опір, злегка потягніть аплікатор на себе, щоб створити додатковий простір для тампонування, після чого продовжуйте натискати на ручку. **ПРИМІТКА:** Не намагайтеся силоміць виштовхнути матеріал з аплікатора.

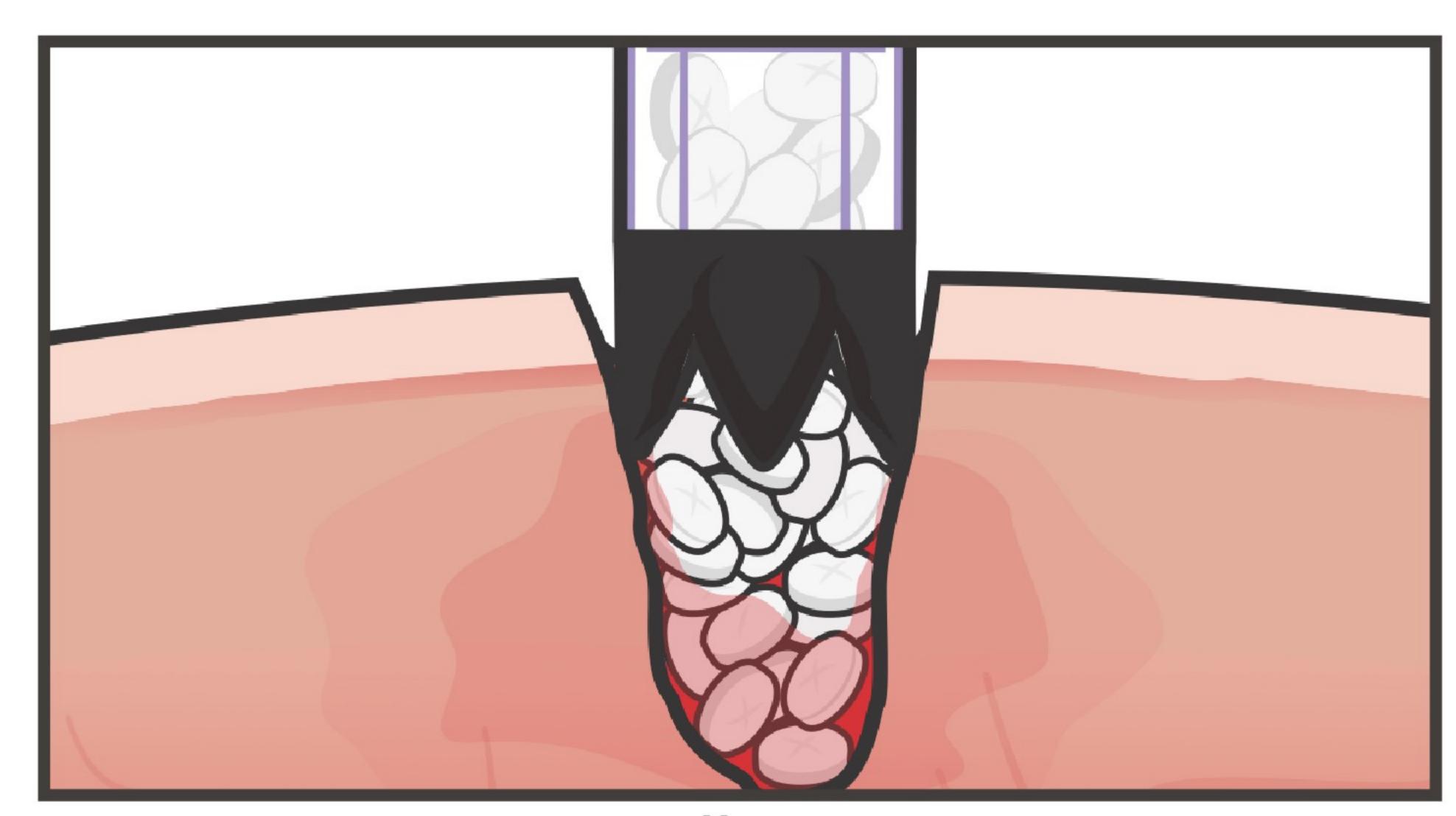

ЗАТАМПОНУЙТЕ рану міні-спонжами, використовуючи додаткові аплікатори за потреби.

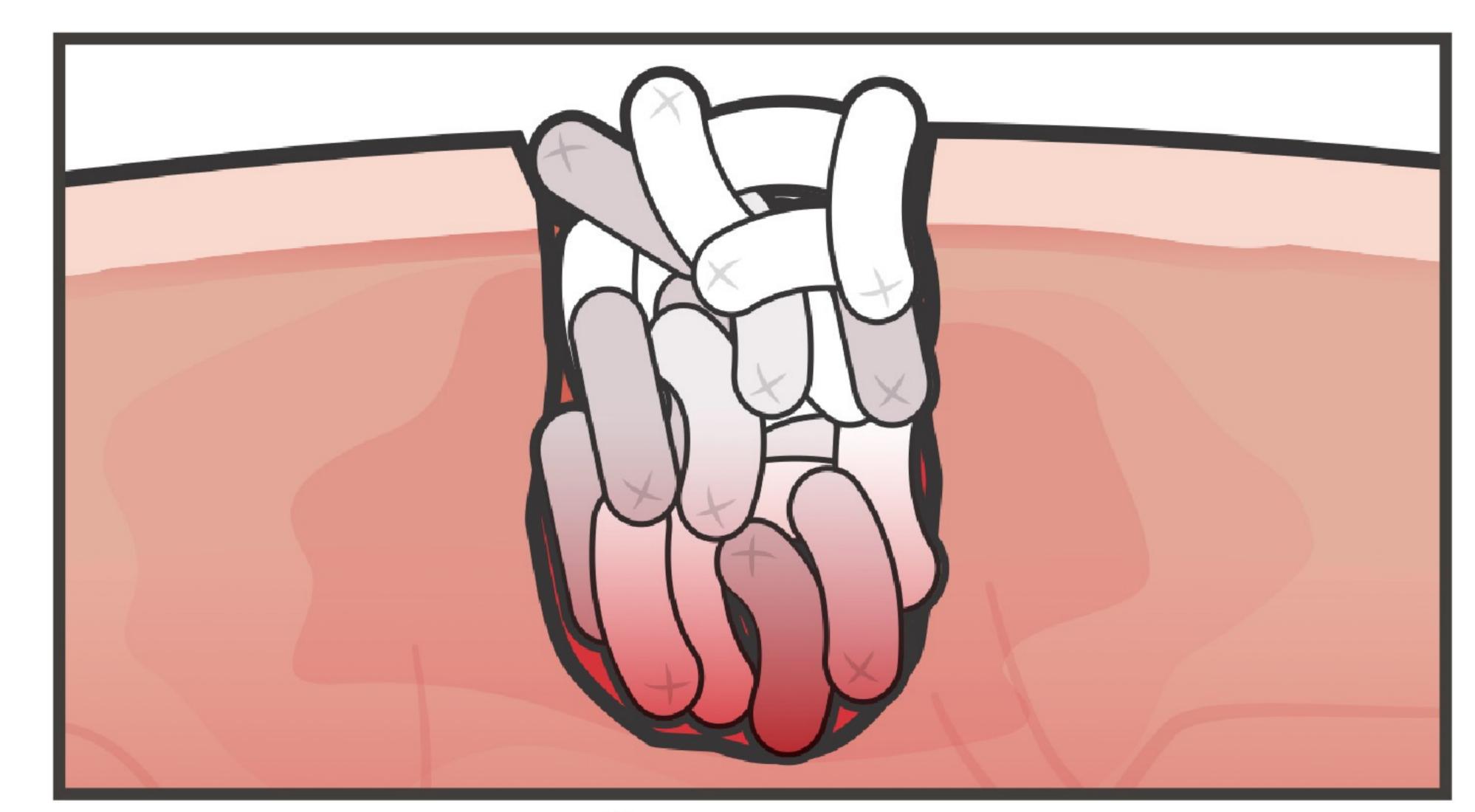


ЗАТАМПОНУЙТЕ рану за допомогою XSTAT так само щільно, як би ви це робили за допомогою марлі (2,5-5 см над раною).



3АСТОСУЙТЕ прямий тиск на рану за допомогою рук протягом 3 хв. ПРИМІТКА: Ніколи не робіть спроб

видалити міні-спонжі з рани.

ПРИМІТКА: Чим щільніше розміщені спонжі, тим більший тиск вони спричиняють на пошкоджену судину.

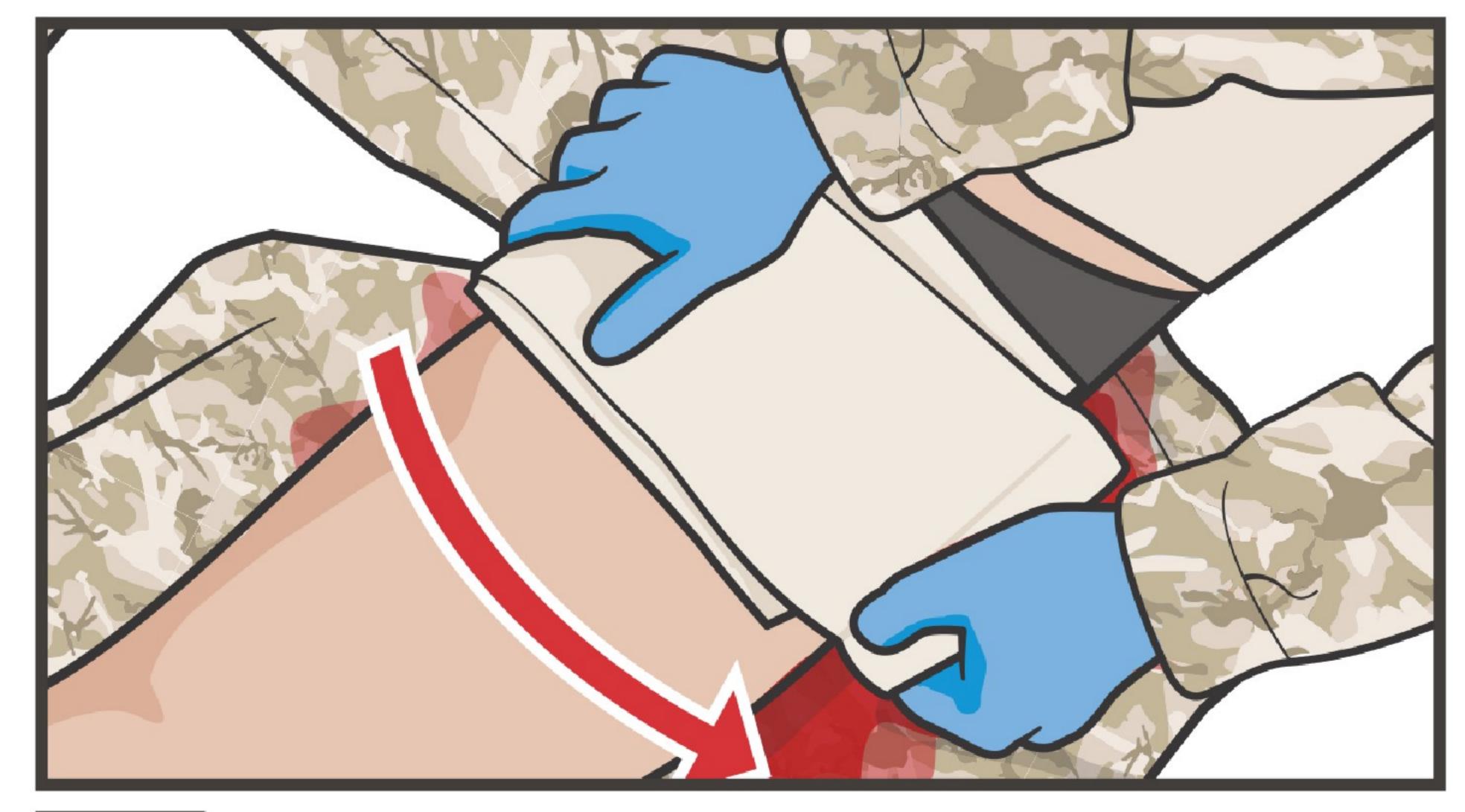

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.

НАКЛАДІТЬ на рану тиснучу пов'язку та спостерігайте, чи не відновлюється у пораненого кровотеча.