

Одноручне застосування джгута - Важельний пристрій (Ratchet) Догляд під вогнем



01 ЗНЯТИ джгут із набору або сумки для транспортування.



02 ПРОВЕДІТЬ поранену кінцівку через петлю джгута.



03 РОЗТАШУЙТЕ джгут над місцем кровотечі, високо на кінцівці, поверх одягу.



04 УТРИМАЙТЕ петлю джгута зубцями або притуліть до твердої поверхні, щоб запобігти ковзанню під час затягування.




05 НАТЯГНІТЬ стрічку джгута якомога сильніше.



06 ПІДНІМТЕ важіль пряжки з храповим механізмом і затягніть його храповим рухом, доки кровотеча не припиниться. ВИКОНАЙТЕ кроки 1–6 менше 1 хвилини.



07 ЗАМОК тріскачки на собі.

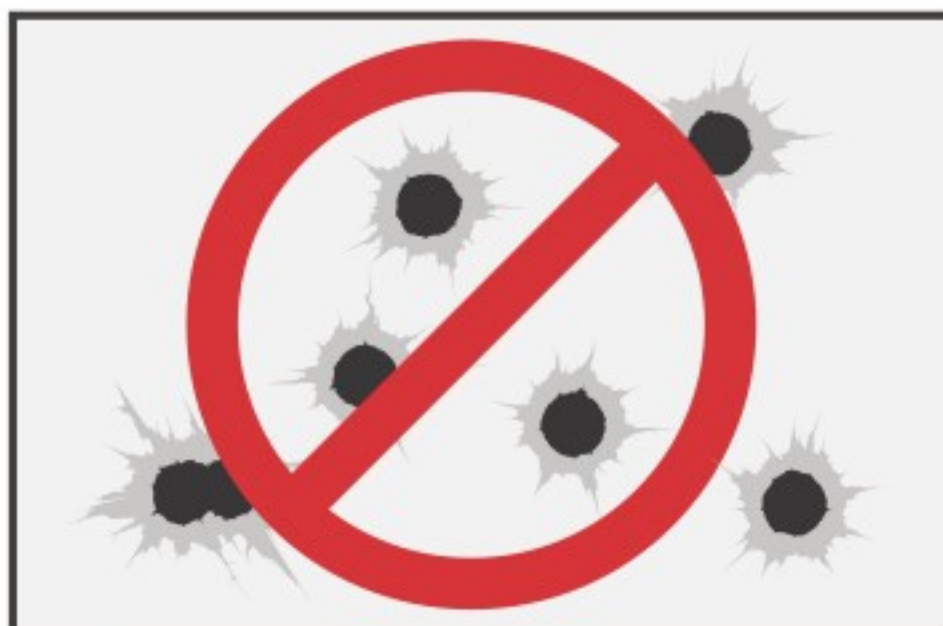

08 Якщо іншої великої кровотечі немає, ПЕРЕМІСТІТЬСЯ В УКРИТТЯ.

ПРИМІТКА. Якщо кровотечу НЕ вдалося зупинити, продовжуйте затискати пристрій, доки кровотеча не припиниться.

ПРИМІТКА. НЕ документуйте час накладення джгута до етапу польової медицини.