



Вузловий турнікет CRoC

Combat Ready Clamp Junctional Tourniquet - CRoC

ВАЖЛИВО. Вузловий турнікет CRoC наносити тільки після належної перев'язки рани.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.


01

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



02

Якщо можливо, застосовуйте прямий тиск на рану під час підготовки джгута.

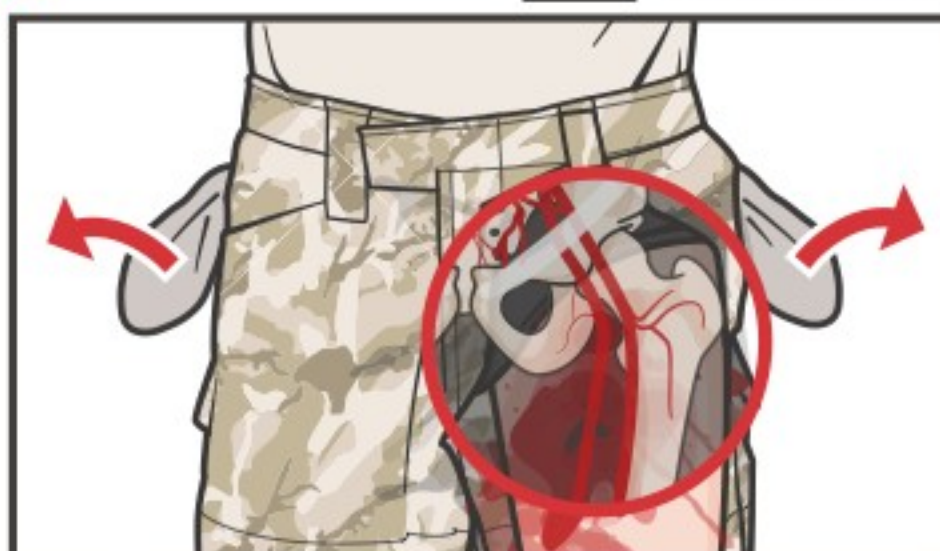

03

Спорожніть кишені пораненого та вийміть усі предмети навколо талії.



04

Почніть із пораненого на спині, не завдаючи подальших травм.

05

Застосовуйте прямий тиск під час підготовки CRoC.



06

Вийміть з упаковки та зберіть частини CRoC.



07

Підніміть вертикальну руку до фіксації, повертаючи її на 90 градусів, щоб зафіксувати фіксуючий штифт.

08

Потягніть штифт, розташований у верхній частині вертикального кронштейна, вставляючи горизонтальний кронштейн. Відпускання шпильки зафіксує горизонтальну руку.



09

Вставте Т-подібну ручку в горизонтальний кронштейн і повертайте за годинниковою стрілкою, поки він не пройде крізь кронштейн на кілька см і не стане стабільним.



10

Міцно натисніть натискний диск на Т-подібну ручку, доки він не стане на місце зі клацанням.



11

Знайдіть точну область для використання стиснення CRoC.

Якщо рана знаходиться безпосередньо в зоні компресії і ще не була перев'язана, зробіть це зараз перед використанням CRoC.

Знайдіть стегнову артерію трохи нижче пахової зв'язки, яка проходить від верхнього гребеня клубової кістки до лобкової кістки.