



# Вузловий турнікет CRoC

## Combat Ready Clamp Junctional Tourniquet - CRoC

**ВАЖЛИВО.** Вузловий турнікет CRoC наносити тільки після належної перев'язки рани.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.


01

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



02

Якщо можливо, застосовуйте прямий тиск на рану під час підготовки джгута.

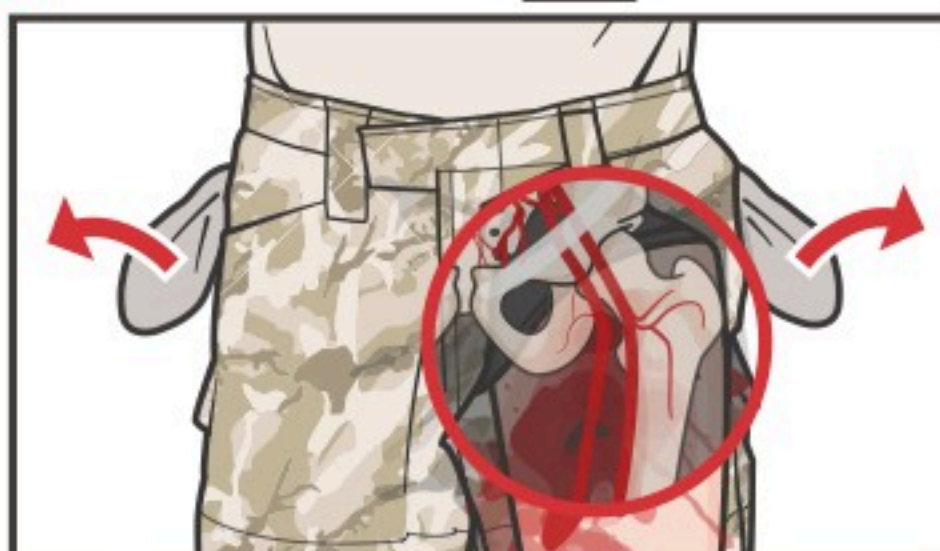

03

Спорожніть кишені пораненого та вийміть усі предмети навколо талії.



04

Почніть із пораненого на спині, не завдаючи подальших травм.

05

Застосовуйте прямий тиск під час підготовки CRoC.



06

Вийміть з упаковки та зберіть частини CRoC.



07

Підніміть вертикальну руку до фіксації, повертаючи її на 90 градусів, щоб зафіксувати фіксуючий штифт.

08

Потягніть штифт, розташований у верхній частині вертикального кронштейна, вставляючи горизонтальний кронштейн. Відпускання шпильки зафіксує горизонтальну руку.




09

Вставте Т-подібну ручку в горизонтальний кронштейн і повертайте за годинниковою стрілкою, поки він не пройде крізь кронштейн на кілька см і не стане стабільним.



10

Міцно натисніть натискний диск на Т-подібну ручку, доки він не стане на місце зі клацанням.

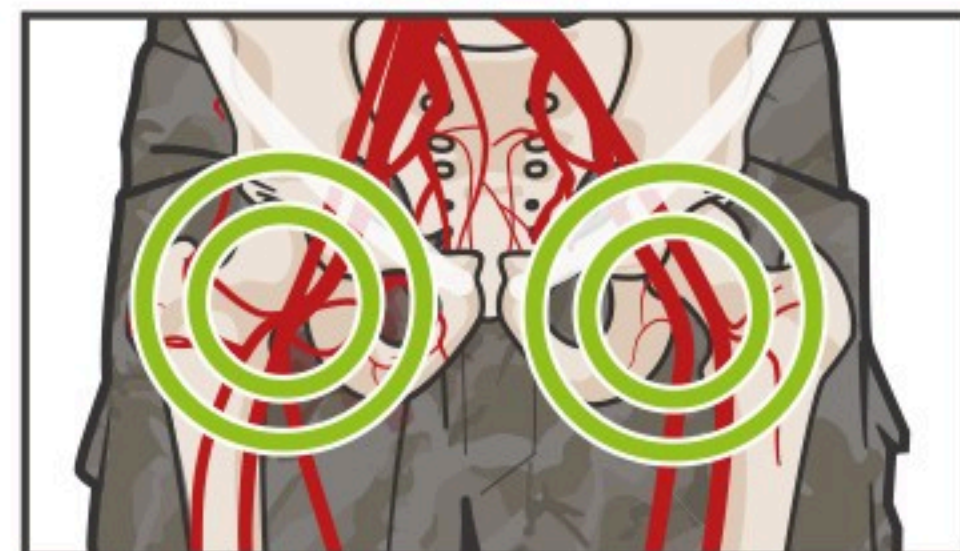

11

Знайдіть точну область для використання стиснення CRoC.

**Якщо рана знаходиться безпосередньо в зоні компресії і ще не була перев'язана, зробіть це зараз перед використанням CRoC.**

Знайдіть стегнову артерію трохи нижче пахової зв'язки, яка проходить від верхнього гребеня клубової кістки до лобкової кістки.






# Combat Ready Clamp Junctional Tourniquet - CRoC


## Вузловий турнікет CRoC

### Продовження зі сторінки 1

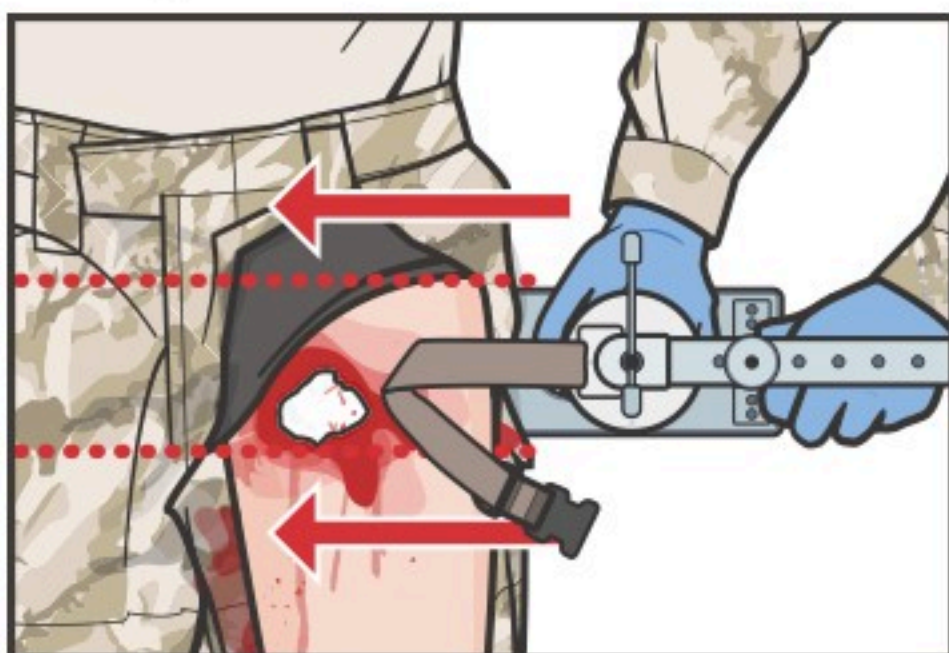


- 12** Покладіть базову пластину під пораненого, нижче бажаної точки стиснення.


**ПРИМІТКА.** Якщо можливо, просуньте нижній пластинчастий ремінь під сідниці жертви для подальшого використання.

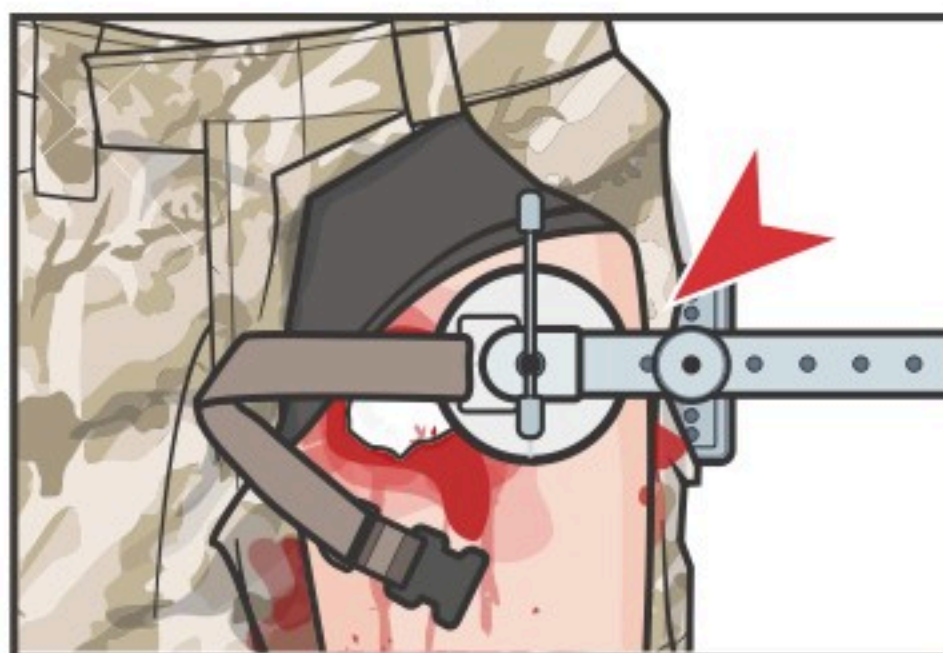


- 13** Переконайтесь, що вертикальна рука торкається пораненого з пораненого боку, близько до місця рани.

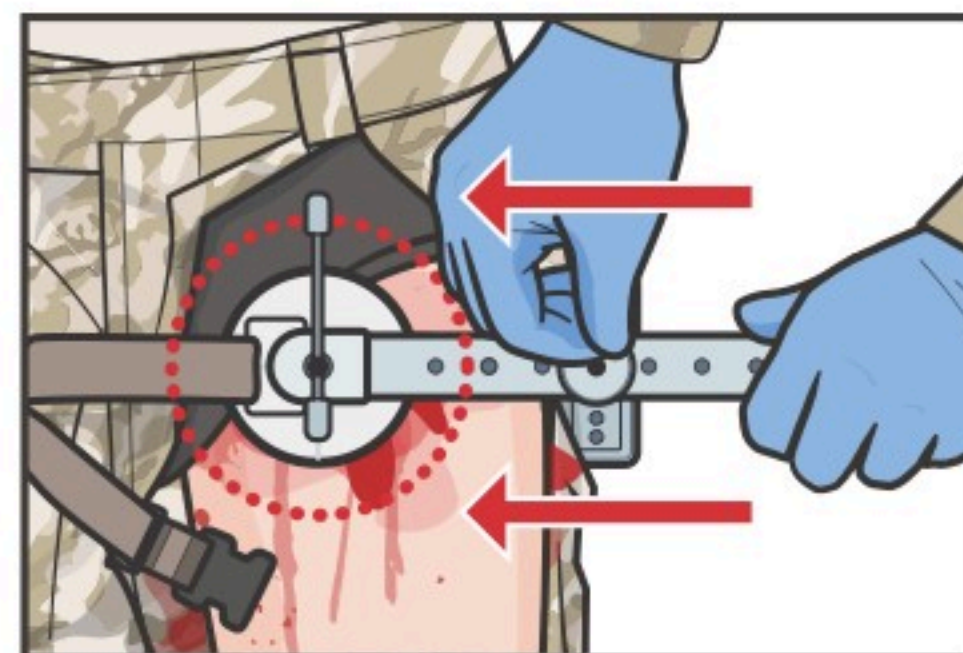

- 14** Відрегулюйте вертикальне плече пристрою та положення над точкою стиснення.

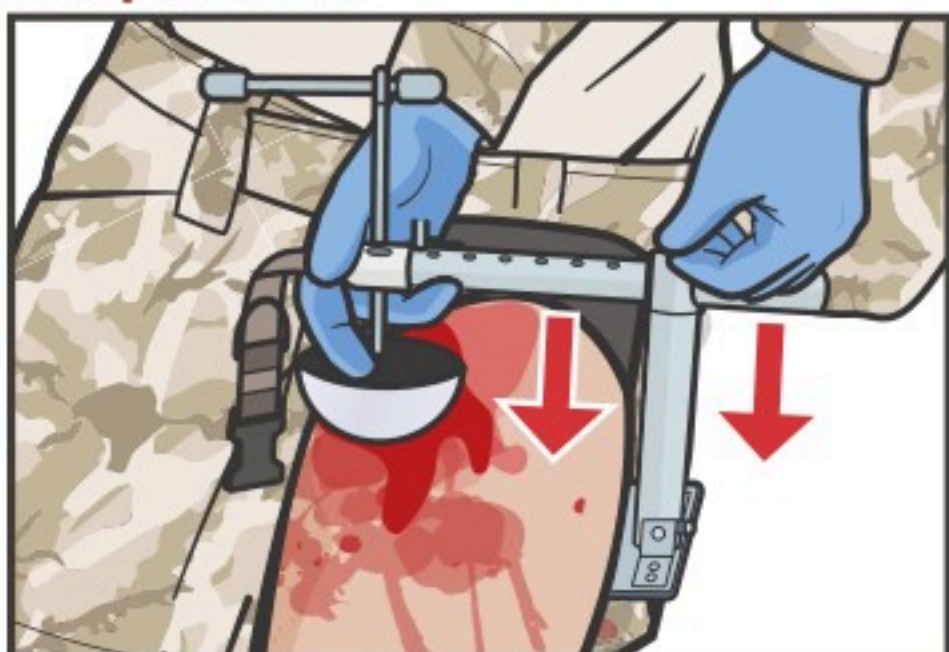

- 15** Тепер відрегулюйте вертикальне плече пристрою так, щоб натискний диск торкався пораненої людини в місці стиснення.

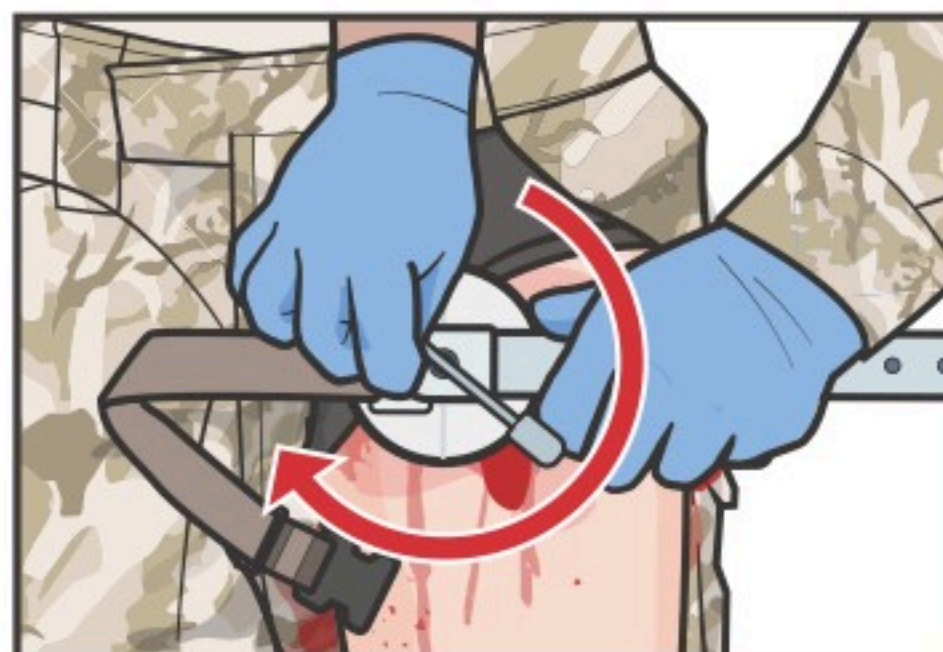

- 16** Поверніть Т-подібну ручку за годинниковою стрілкою, щоб натиснути на бинт. Продовжуйте обертати, поки кровотеча не зупиниться.

**ВАЖЛИВО.** Якщо кровотеча не зупинилася після 20 обертань, подумайте про зміну положення натискного диска.




- 17** Коли кровотеча зупиниться, прикріпіть кріпильний ремінь.

**ВАЖЛИВО** – часто **МОНІТОРУЙТЕ** пацієнта під час транспортування, щоб переконатися, що пристрій і натискний диск залишаються на місці. Відрегулюйте відповідно, щоб контролювати кровотечу.



- 18** ДОКУМЕНТУВАТИ час накладання джгута на обличчя пораненого.

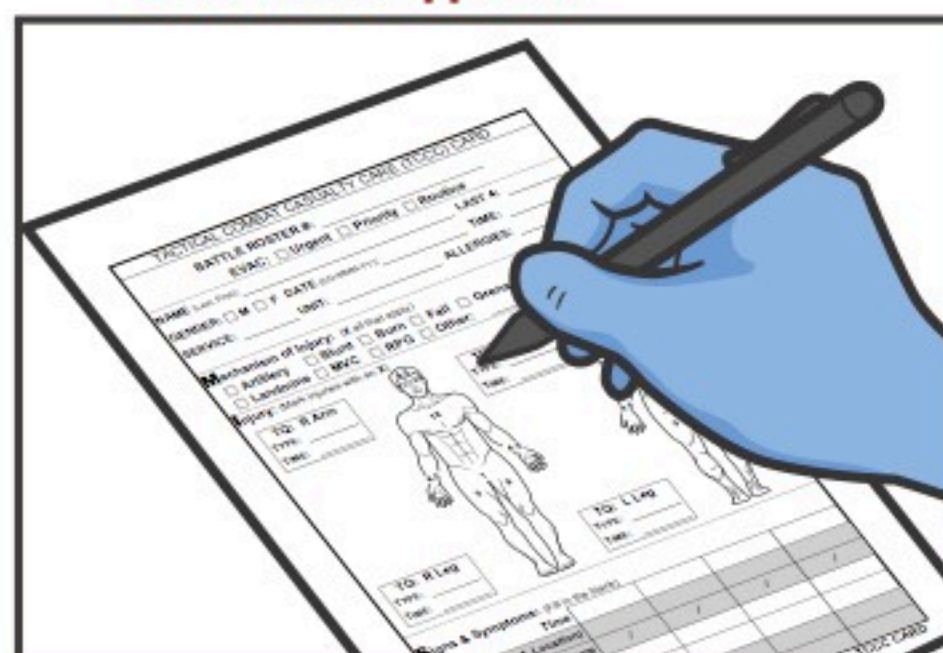

- 19** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.