







## ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.


ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.




ПІДГОТУЙТЕ НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ:

(1.) Джерело води (наприклад, фляга з водою); (2.) Набір для визначення групи крові (наприклад, EldonCard): ланцет, спиртова серветка, піпетка, інструкція (таблиця EldonCard), палички для забору та переносу крові (4 або більше) та захисна плівка; (3.) відповідні засоби індивідуального захисту (наприклад, рукавички).


- ПЕРЕВІРТЕ, чи має картка для визначення групи крові/ набір EldonCard належний:
  - 1.) Зовнішній вигляд
  - (2.) Строк придатності
  - (3.) Вміст

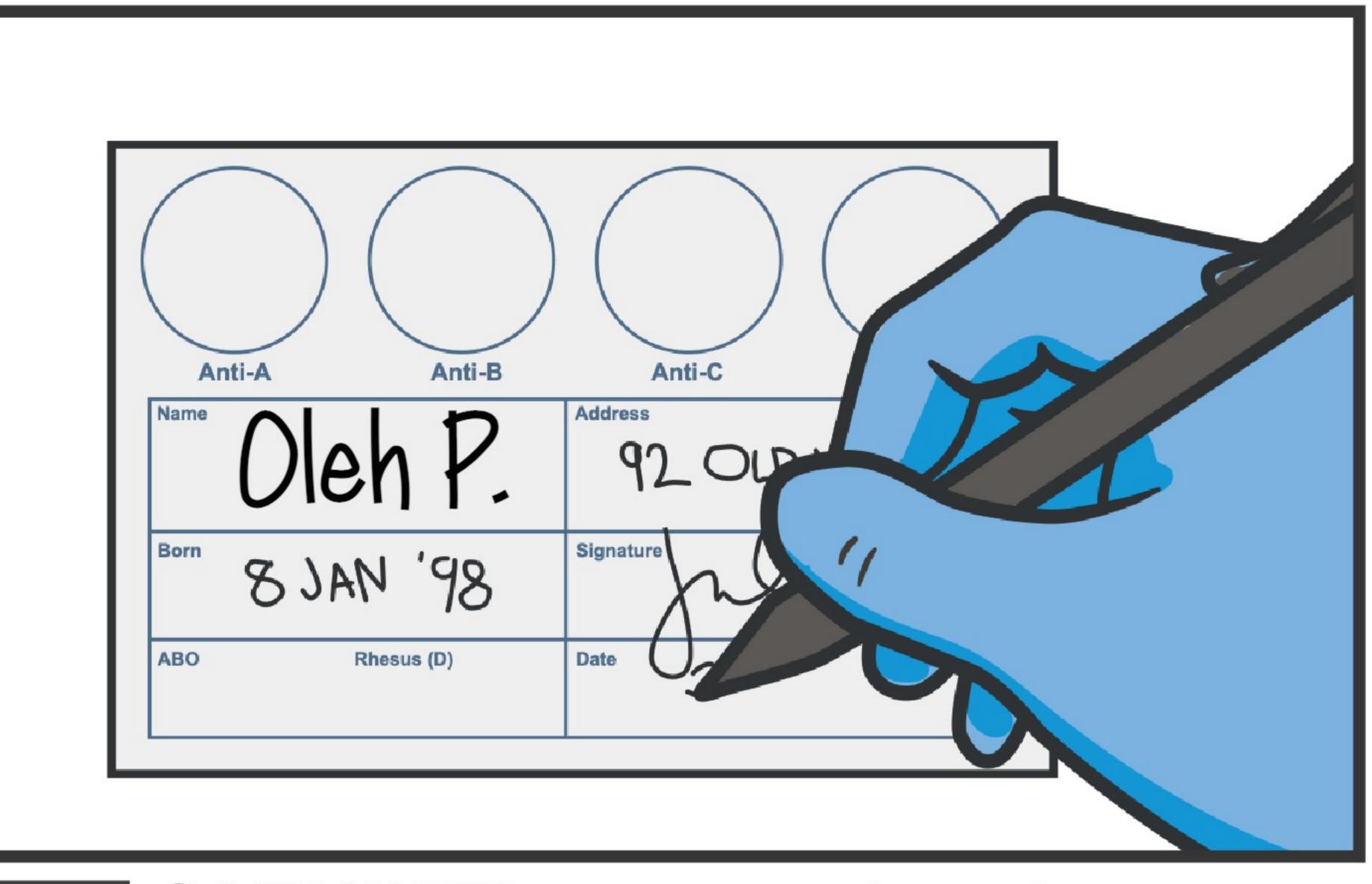


- ЗАПИШІТЬ на картці дані донора та/або реципієнта:
  - (1.) Ім'я
  - Адресу проживання
  - Дату народження
  - Дату проведення тестування
  - (5.) Підпис донора/реципієнта

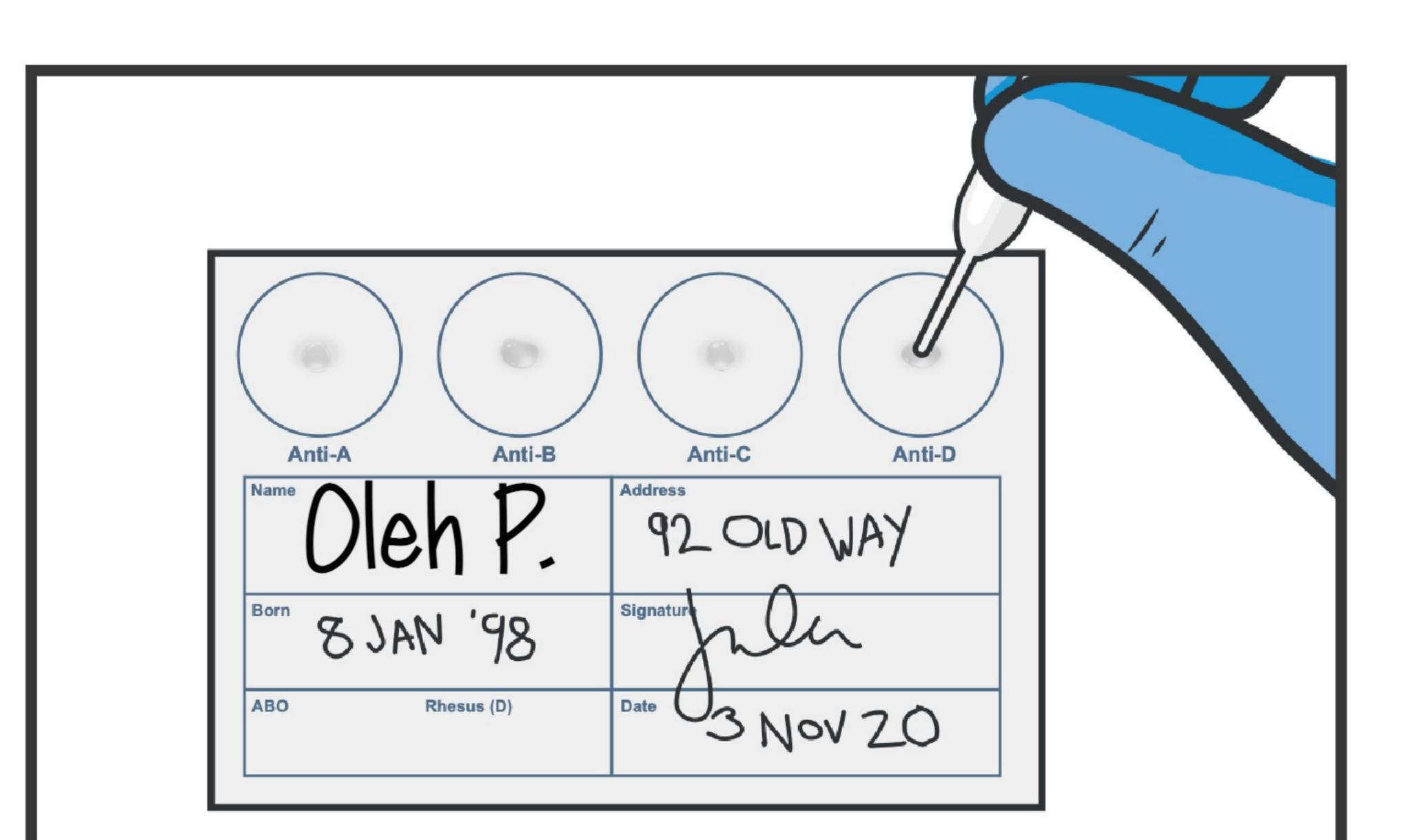


- ВІЗЬМІТЬ піпетку та наповніть ії водою.
- ДОДАЙТЕ по одній краплі води до кожної лунки на картці.

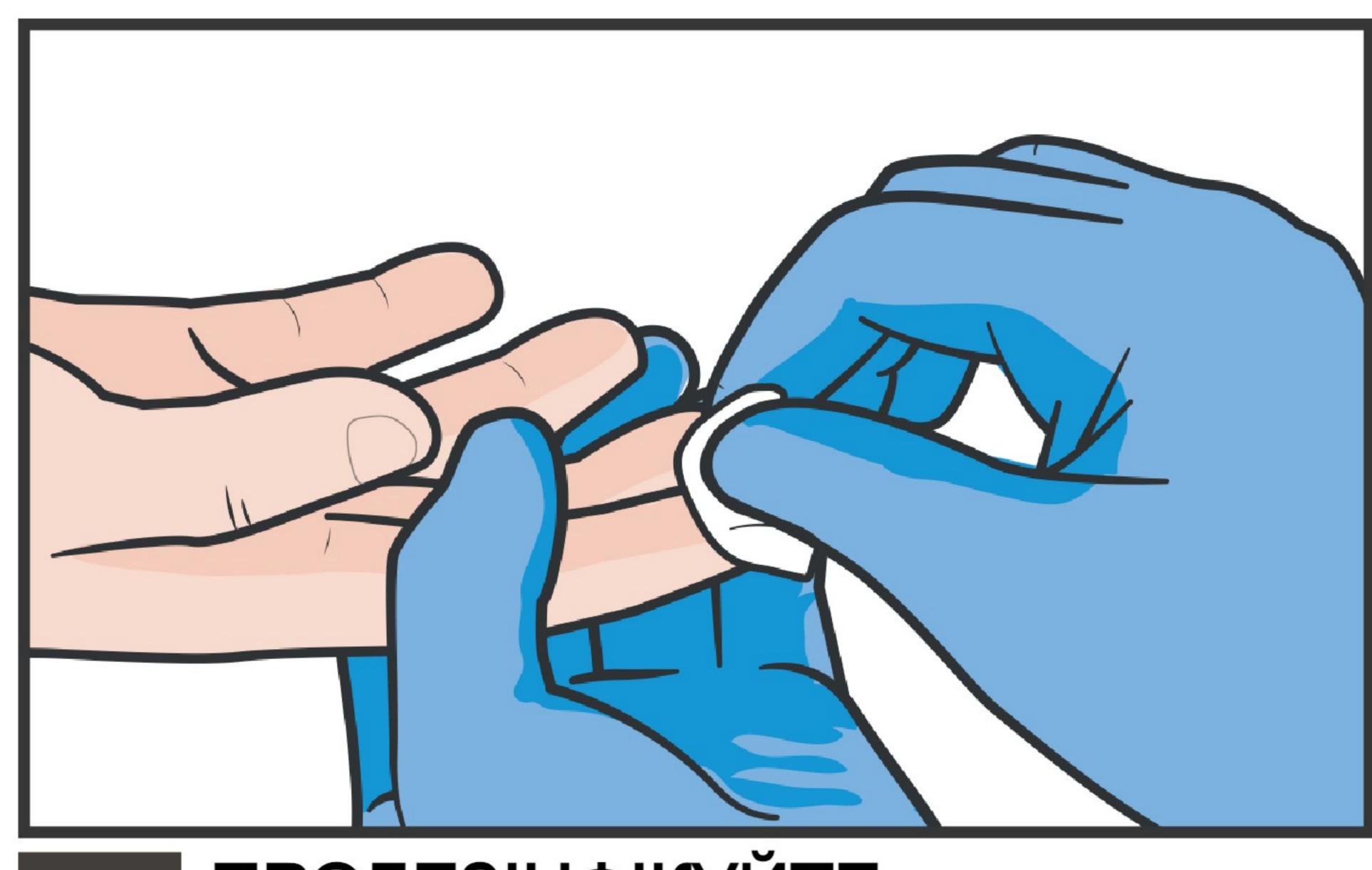


ПРОДЕЗІНФІКУЙТЕ подушечку пальця донора/реципієнта (краще на недомінантній руці) за допомогою спиртової серветки.

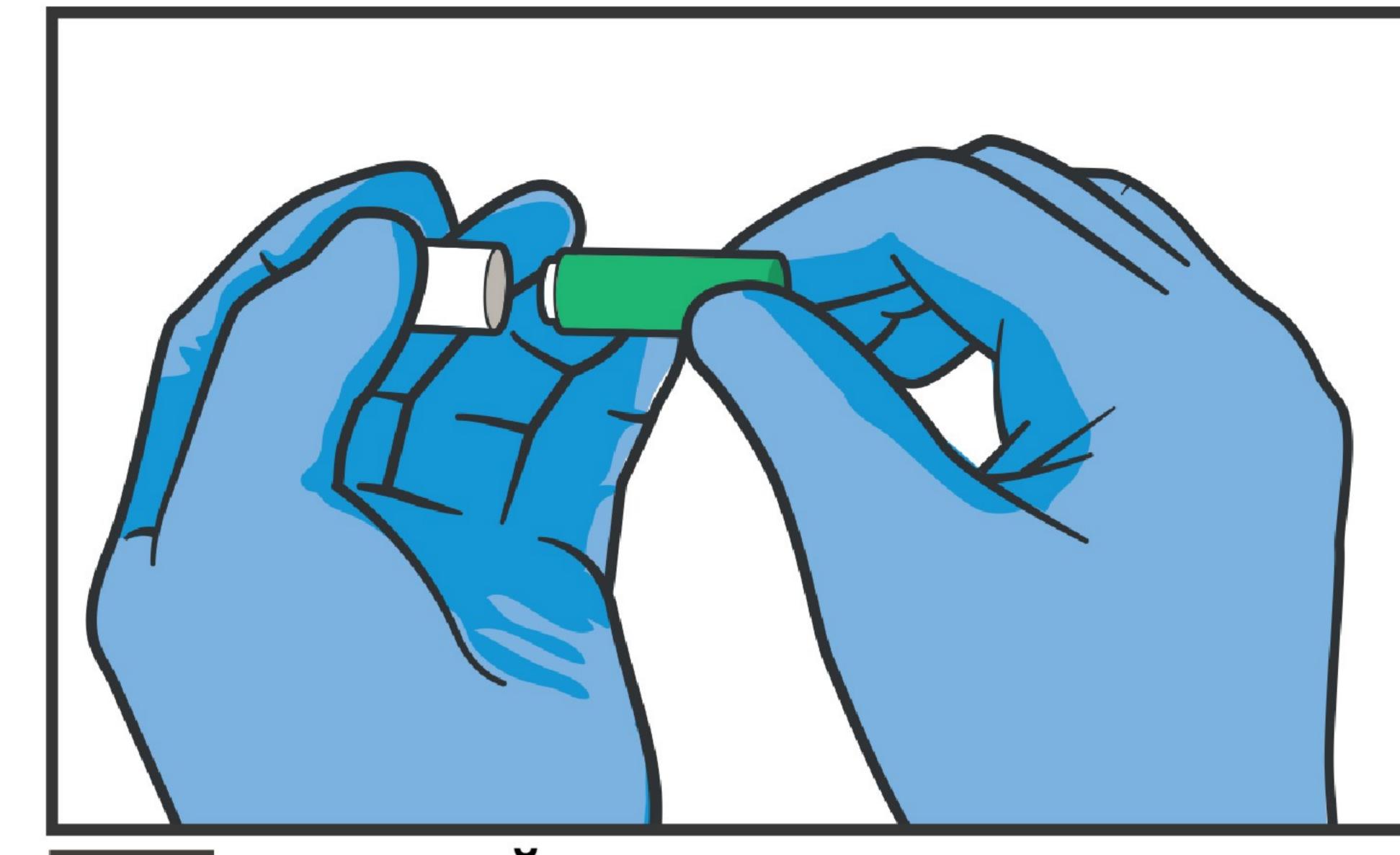


ВІДКРИЙТЕ ланцет, відкрутивши захисний ковпачок.

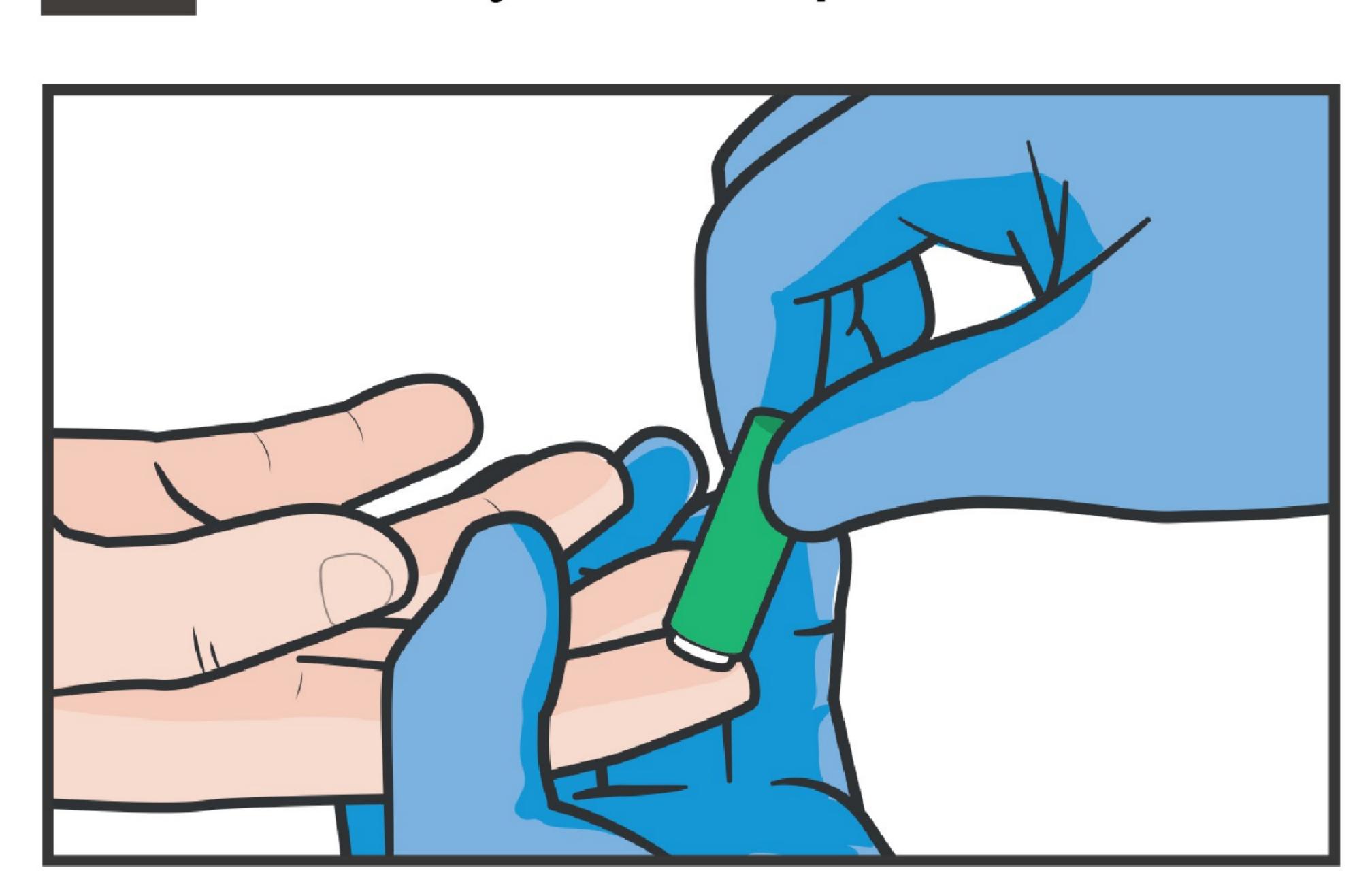

Для взяття крові МІЦНО ПРИТИСНІТЬ ланцет до подушечки пальця донора/реципієнта, проколюючи, щоб виступила кров, після чого викиньте ланцет у контейнер для утилізації гострих предметів.

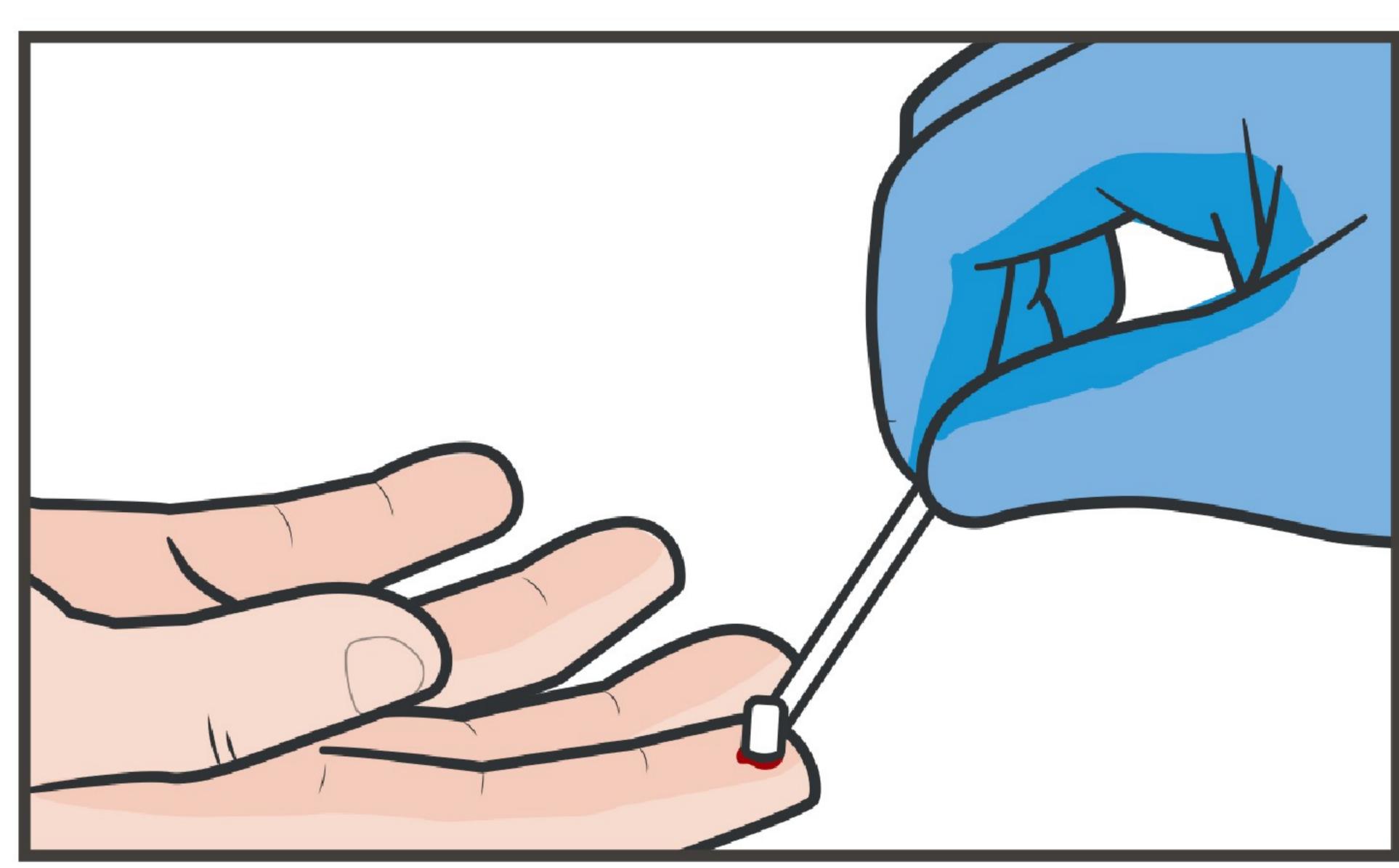

СТИСНІТЬ ПОДУШЕЧКУ 09 ПАЛЬЦЯ в місці проколу, використайте одну з паличок для забору невеликої кількості крові донора.

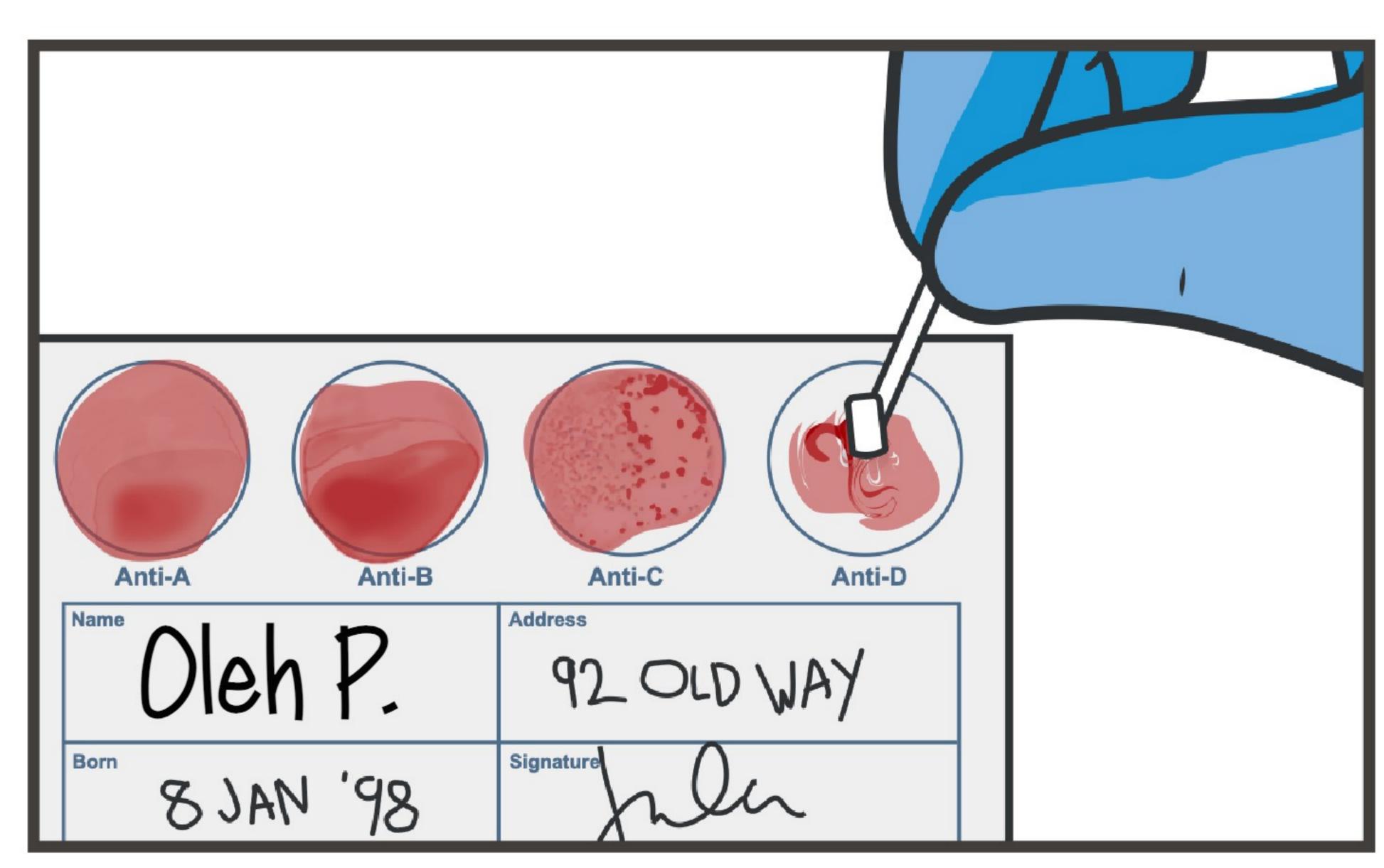

ПОМІСТІТЬ кров із палички в першу лунку на картці. Змішайте кров з краплею води, розподіляючи її по всій площині ЛУНКИ.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Змішуйте приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Повторіть кроки 9-10 тричі, по одному разу для кожної лунки на картці.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Щоразу використовуйте нову паличку для кожної лунки. Не використовуйте палички повторно, бо це призведе до неправильних результатів тесту через змішування реагентів, що є на картці та мають знаходитись у відповідних окремих лунках. https://github.com/farrellgraymond/TCCC-Pixlr LAST UPDATED: 2023-10-09T18:14:44Z