



Використання XSTAT - XSTAT 12 і XSTAT 30



ОБЕРЕЖНО - Не для використання в грудній клітці, плевральній порожнині, середостінні, черевній порожнині, заочеревинному просторі, крижовому просторі, над паховою зв'язкою або тканиною над ключицею.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

01

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



02

Застосовуйте прямий тиск до рани, готуючи аплікатор.




03

XSTAT 30 - Витягніть ручку зі стовбура, доки вона не зупиниться та не зафіксується.



04

Обидва - Вставте кінчик аплікатора в рану якомога ближче до джерела кровотечі.

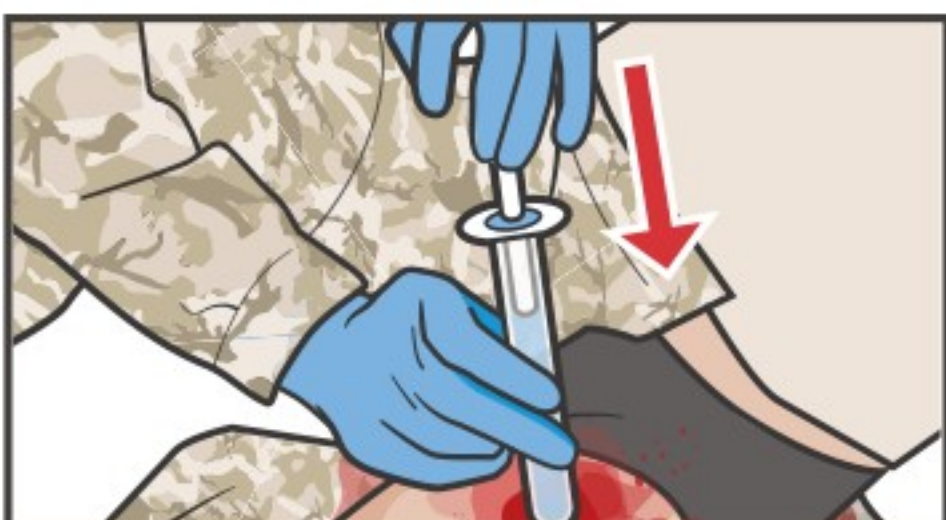

05


XSTAT 12 - Вставте кінчик поршня в корпус пристрою.



06


Обидва - міцно натисніть на поршень, щоб розгорнути міні-губки в порожнині рани. Якщо виникне опір, злегка потягніть назовні, щоб створити додатковий простір, а потім продовжуйте натискати на поршень.

ВАЖЛИВО - НЕ вставляйте матеріал у рану з силою, будьте обережні.

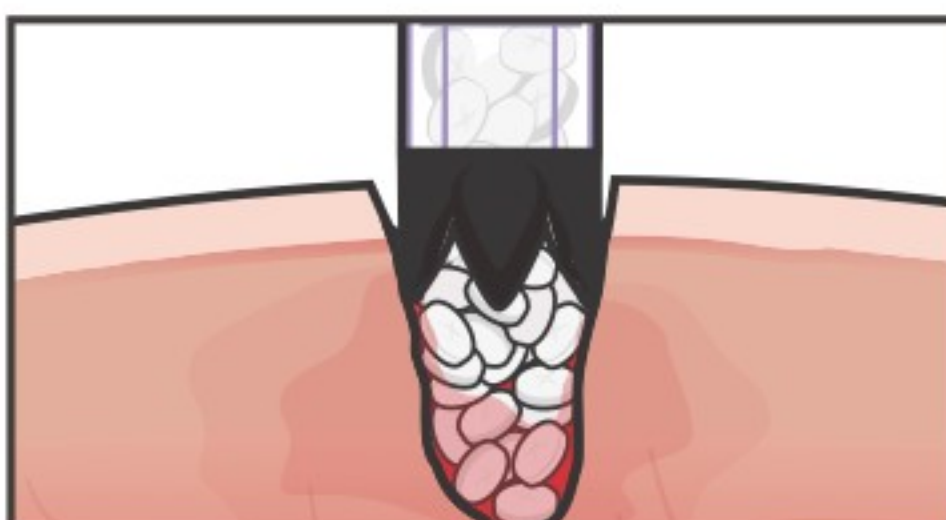

07

Заповніть порожнину рани губками, за потреби використовуйте додаткові аплікатори.

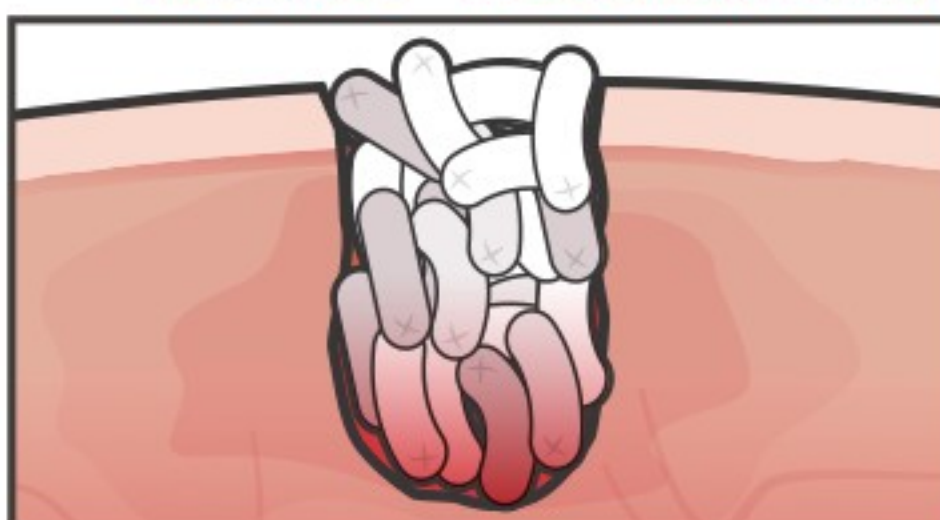

08

Упакуйте XSTAT такої ж щільності, як якщо б ви використовували марлю, витягнувши її на 3-5 см над поверхнею, щоб створити тиск. Більша щільність губки дорівнює більшому тиску.



09

Після наповнення губкою тримайте тиск - МІНІМУМ 3 хвилини.

ВАЖЛИВО - НІКОЛИ не видаляйте губки XSTAT, це хірургічна процедура.



10

Повністю закрийте рану пов'язкою, що давить. Слідкуйте за ознаками кровотечі.



11

ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.