

# Шина для іммобілізації таза

## Pelvic Compression Device (PCD)



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

Важливо. Використання Шина для іммобілізації таза не перешкоджає використанню Вузловий турнікет.



**01** Спорожніть кишені пораненого та вийміть усі предмети навколо талії.


Якщо можливо, направте помічника стабілізувати зону вручну.




**02** Почніть із пораненого на спині, не завдаючи подальших травм.



**03** ШУКАЙТЕ, чи немає деформацій, синців, саден, проколів, опіків, рваних ран. ВАЖЛИВО, обережно ПОМАЦАТИ на предмет болючості, нестійкості, кріпачі.

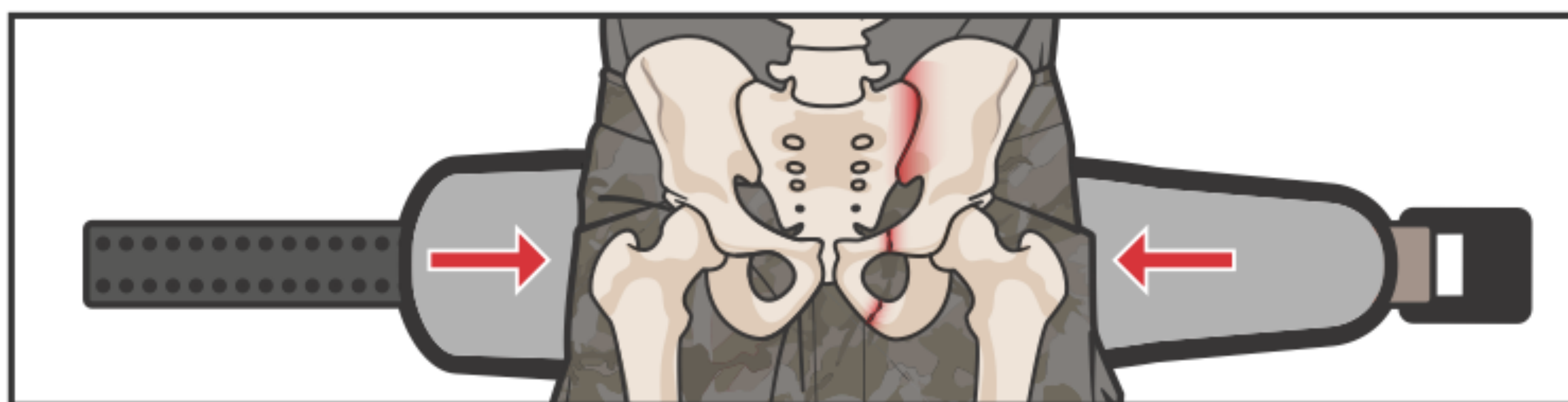

**04** Розмістіть Шина для іммобілізації таза позаду ніг і підніміть його до рівня верхньої зовнішньої стегнової кістки.

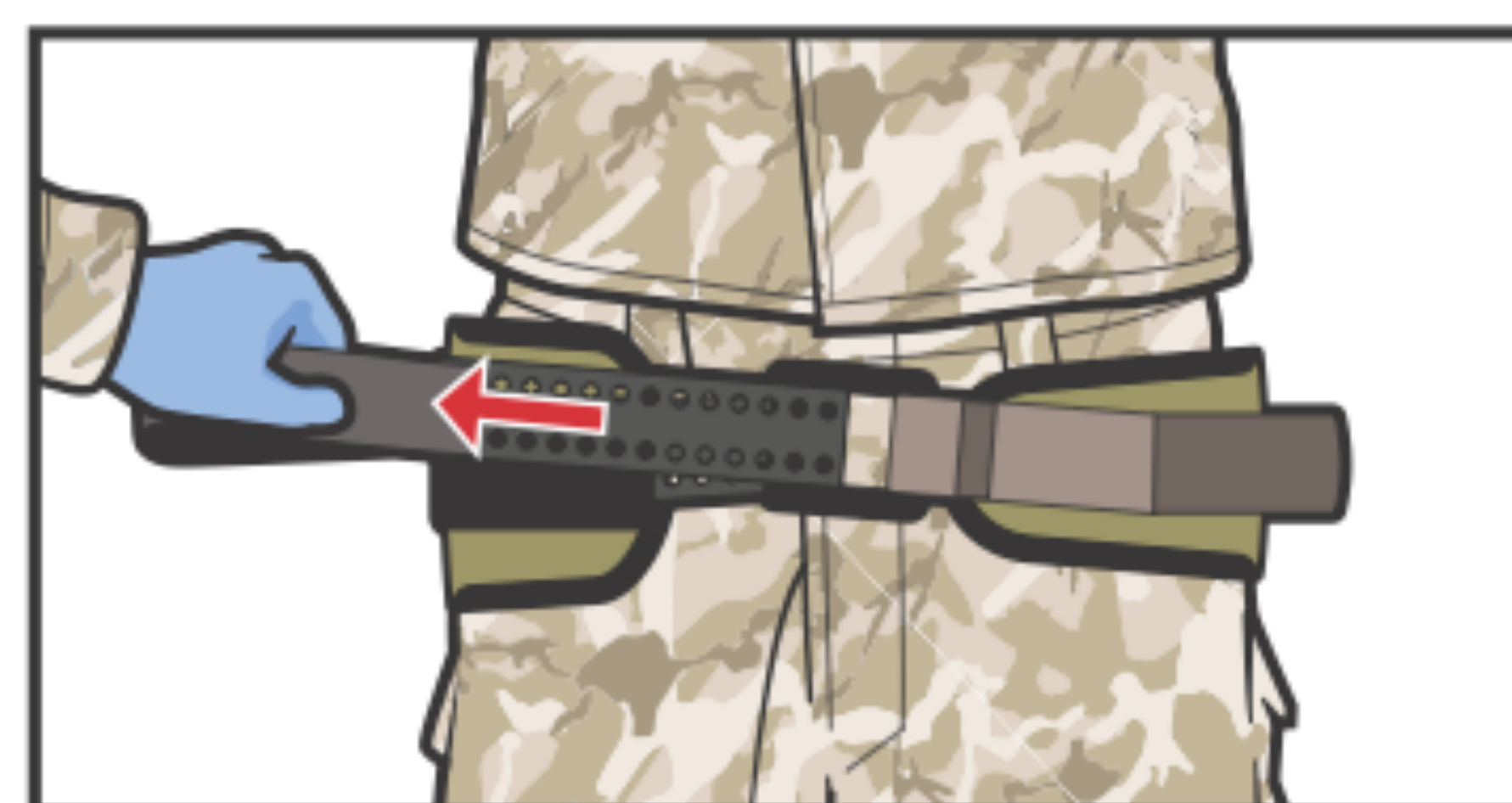

**05** Пропустіть ремінь через пряжку та протягніть, усуньте будь-яку слабину.




**06** Потягніть обидва реміні в протилежних напрямках, доки не почуєте та не відчуєте фіксацію пряжки.

Примітка. Навіть при правильному накладенні пряжка не завжди клацає.



**07** Підтримуйте натяг і притисніть реміні до поверхні Шина для іммобілізації таза щоб закріпити.

Примітка. Коли реміні закріплені, може відбутися другий клацання, це нормально.

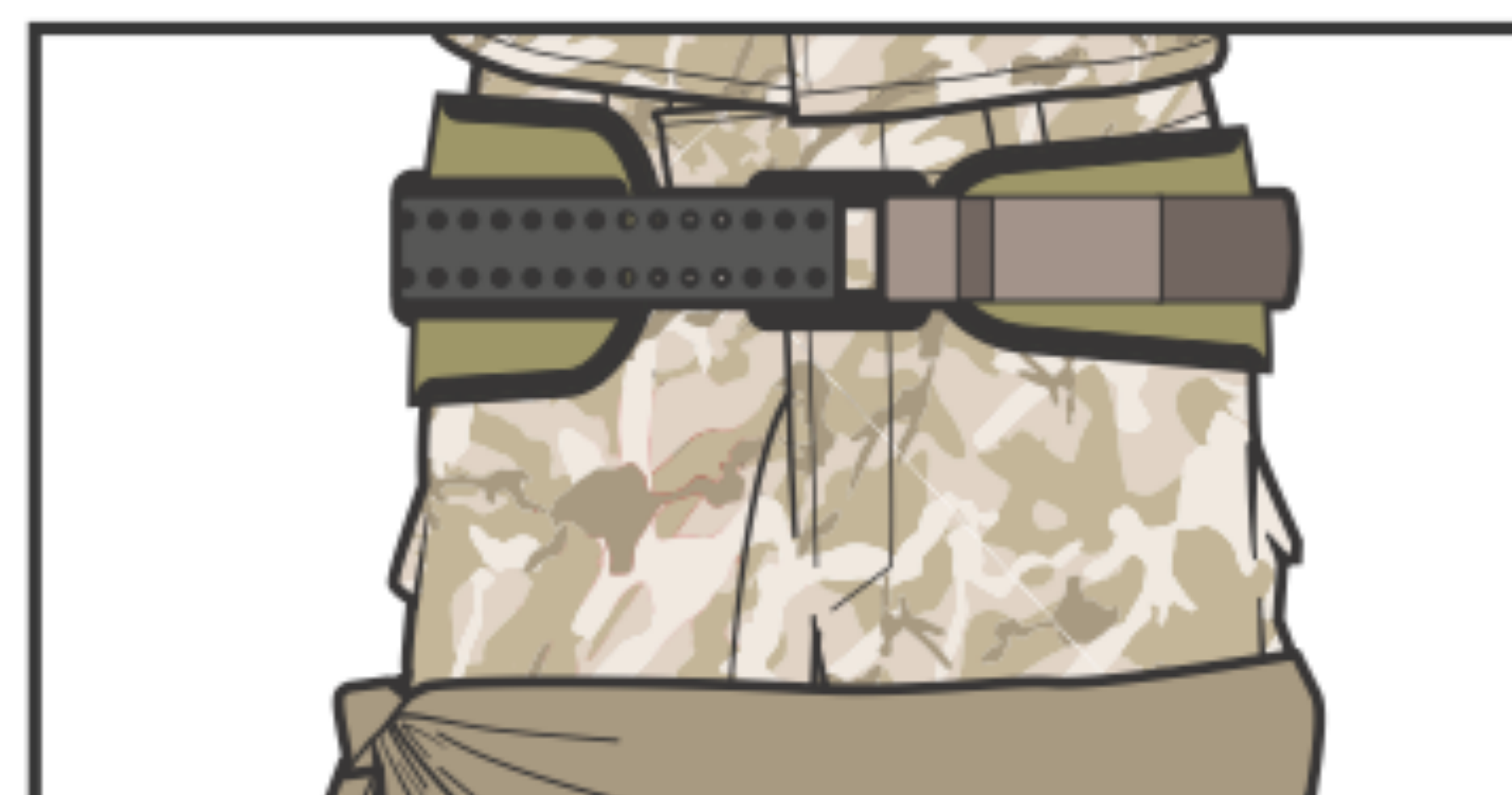


**08** Зв'яжіть верхню частину ніг пораненого разом, щоб мінімізувати зовнішню ротацію стегон



**06** Спостерігайте за пораненим на наявність кровотечі, спостерігаючи за ознаками шоку (змінений психічний стан без травми голови та/або слабкий радіальний пульс). Внутрішньої кровотечі не видно.

Примітка. Якщо є ознаки шоку/внутрішньої кровотечі, змініть положення шини, щоб знерухомити таз, якщо це дозволяє тактична ситуація.

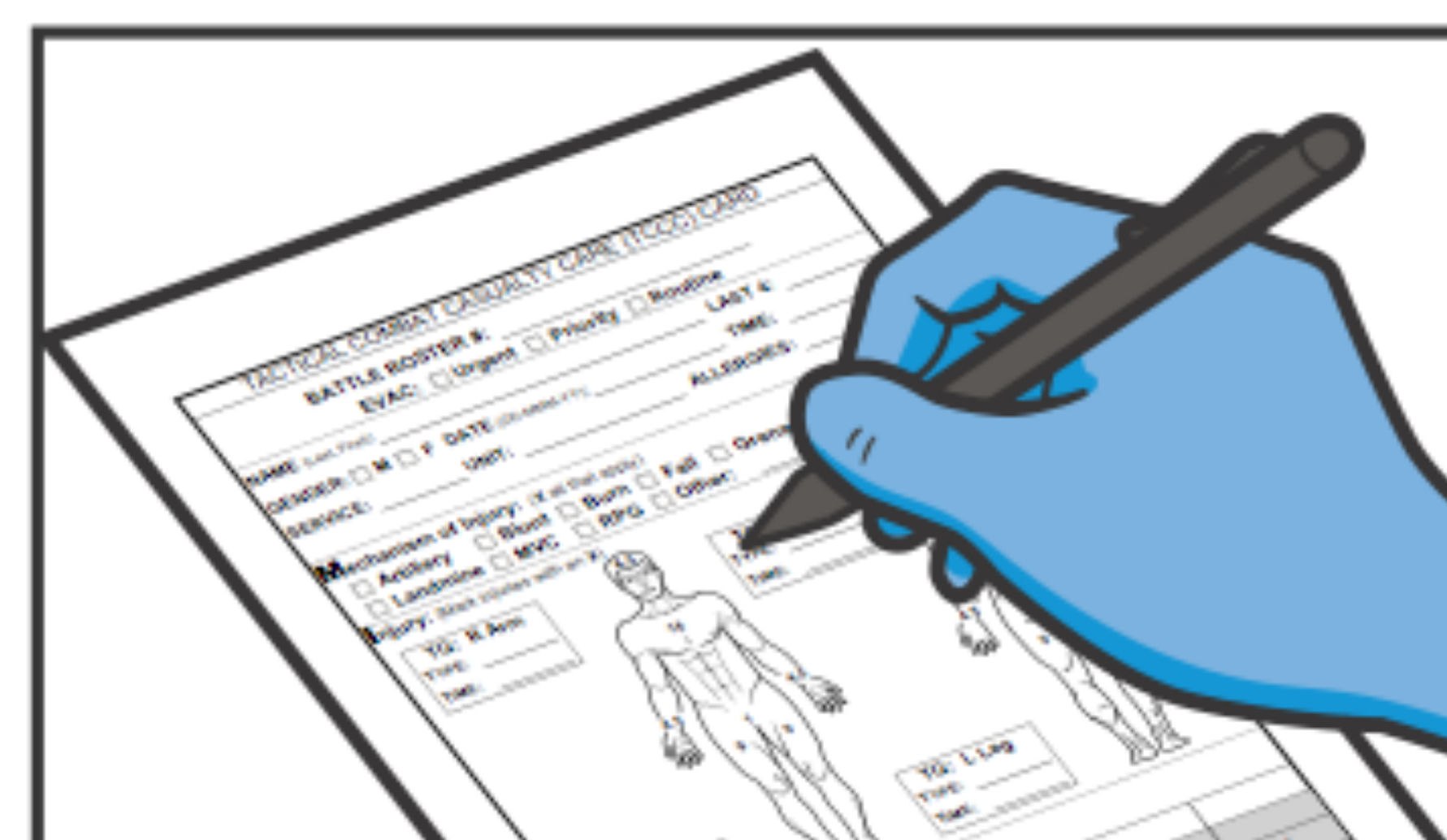

**07** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.