



Вузловий турнікет JETT

Junctional Emergency Treatment Tool (JETT) Tourniquet


ВАЖЛИВО. Вузловий турнікет JETT наносити тільки після належної перев'язки рани.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

01

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.

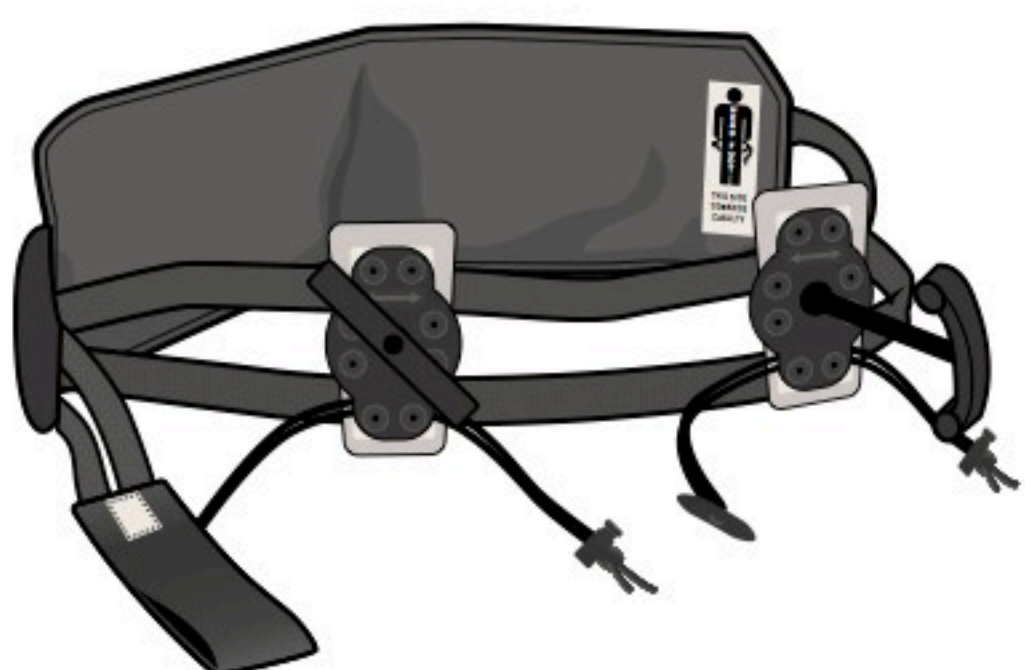**02**

Якщо можливо, застосовуйте прямий тиск на рану під час підготовки джгута.

**03**

Спорожніть кишені пораненого та вийміть усі предмети навколо талії.

**04**

Почніть із пораненого на спині, не завдаючи подальших травм.

**05**

Застосуйте прямий тиск на стегнову артерію.

06

Відкрийте, розгорніть свій пристрій і готуйтеся застосувати до пораненого.

ВАЖЛИВО «This Side Toward Casualty» має стояти обличчям до пораненого.

**07**

Просуньте ремінь під поперек або сідниці пораненого.

**08**

Знайдіть стегнову артерію трохи нижче пахової зв'язки, яка проходить від верхнього гребеня клубової кістки до лобкової кістки.

Використовуйте це, щоб правильно розташувати пристрій.

**09**

Використовуйте рух вперед-назад, щоб розташувати ремінь під сідницями, зосередивши його на пораненому, забезпечуючи належне положення притискних подушечок на стегновій артерії.

продовження на наступній сторінці...




Вузловий турнікет JETT

Junctional Emergency Treatment Tool (JETT) Tourniquet

Продовження зі сторінки 1




10 На ремінцях відрегулюйте дві подушечки до верхньої частини стегнової артерії, трохи нижче пахових зв'язок.

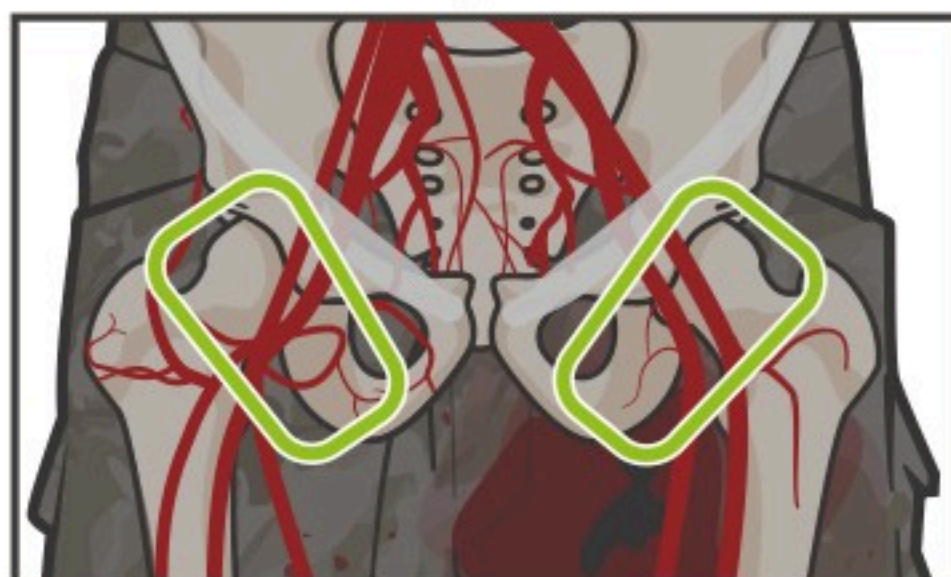

11 Відрегулюйте притисні подушечки так, щоб їх довгий охоплення було вирівняно паралельно пахвинній борозні. Це буде прибіл. під кутом 30 градусів назовні, щоб статеві органи були вільними.



12 Приєднайте жіночий кінець до чоловічого кінця з'єднувача ременя. Пролунає клацання.

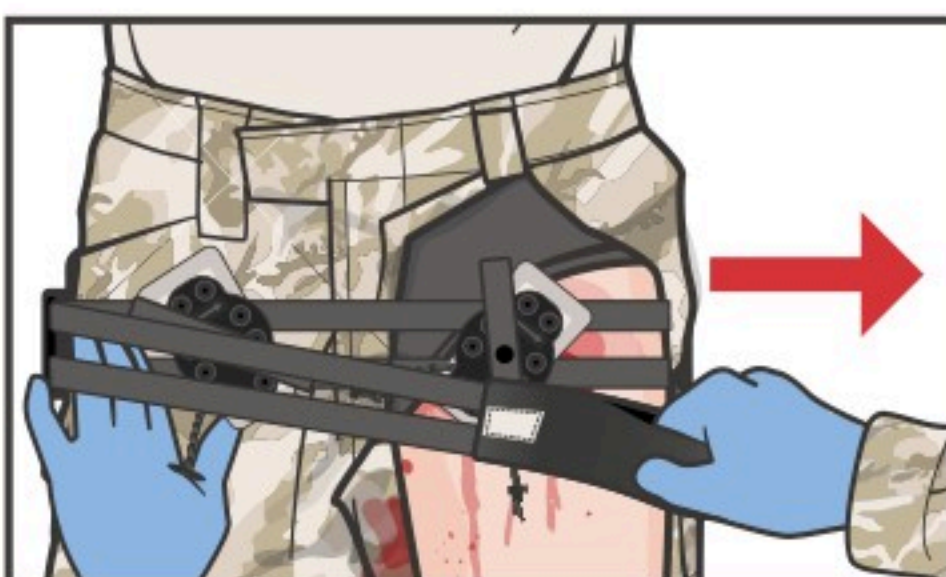


13 Потягніть вільний кінець ремінця за допомогою ручки-петлі, щоб усунути провисання.

ПРИМІТКА. Під час затягування стабілізуйте ремінь іншою рукою.




14 Переоцініть розміщення прокладки, щоб переконалися в її правильному розташуванні над стегною артерією трохи нижче пахової зв'язки під кутом 30 градусів.

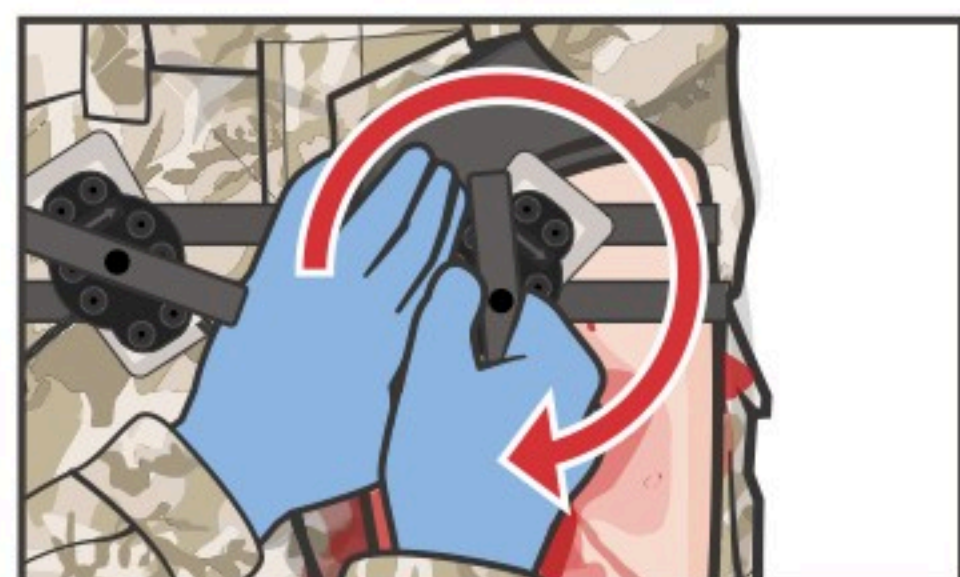

15 Затягніть різбову ручку, повертаючи її за годинниковою стрілкою, а іншою рукою стабілізуйте колодку, утримуючи її на місці. Затягніть, поки не зупиниться кровотеча.

КРОК 15. При інтактній кінцівці підтвердити відсутність дистального пульсу.

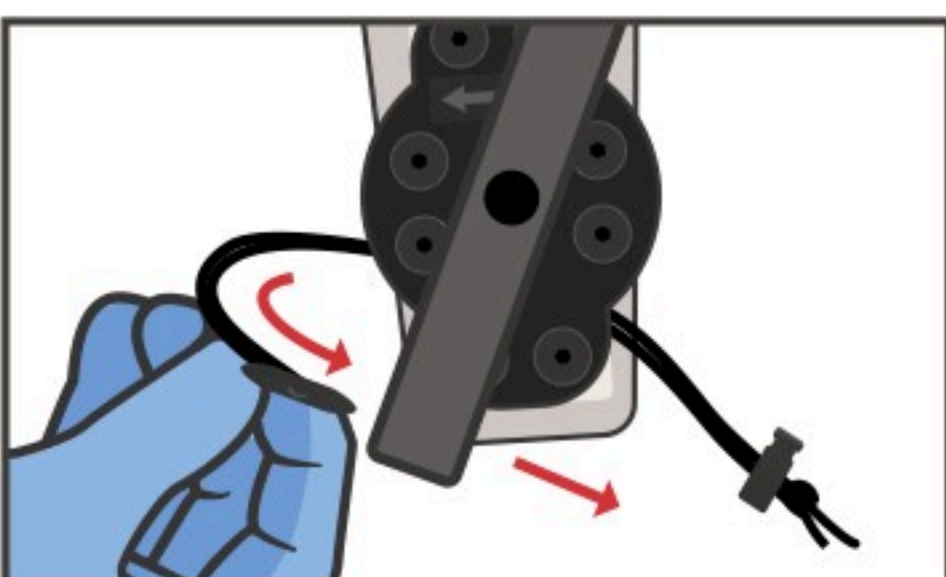


16 Вставте затискач через отвір у різбовій ручці та міцно затягніть його на базовій пластині, щоб закріпити ручку на місці.

КРОК 16. Якщо травма двостороння, повторіть процес з іншого боку.



17 Задokumentуйте час застосування на петлі ручки або на обличчі пораненого.

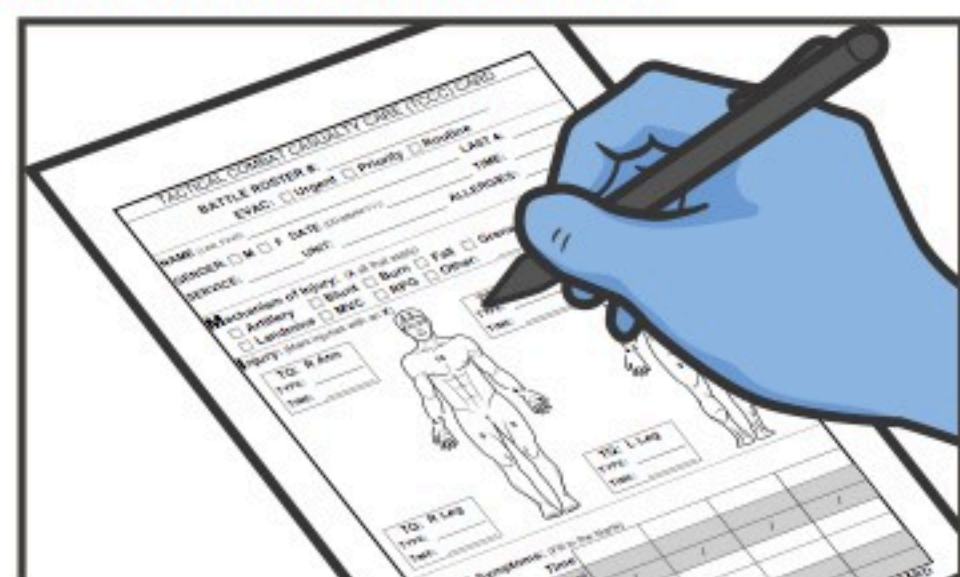

18 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.

ВАЖЛИВО – часто **МОНІТОРУЙТЕ** пацієнта під час транспортування, щоб переконалися, що пристрій і накладки для тиску залишаються на місці. Відрегулюйте відповідно, щоб контролювати кровотечу.