

















ВУЗЛОВИЙ ТУРНІКЕТ COMBAT READY CLAMP (CROC)

ПРИМІТКА: Вузлові турнікети мають застосовуватись після належного тампонування рани.



Подбайте про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник,

скеруйте його вам на допомогу.



■ РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі. ПРИМІТКА: Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.



За можливості, ЗАСТОСУЙТЕ прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі.



ВИЙМІТЬ все з кишень пораненого та приберіть всі речі з ділянки таза.




ПОКЛАДІТЬ пораненого на спину.




08


Утримуйте прямий тиск на рану під час підготовки вузлового турнікету CROC до застосування.

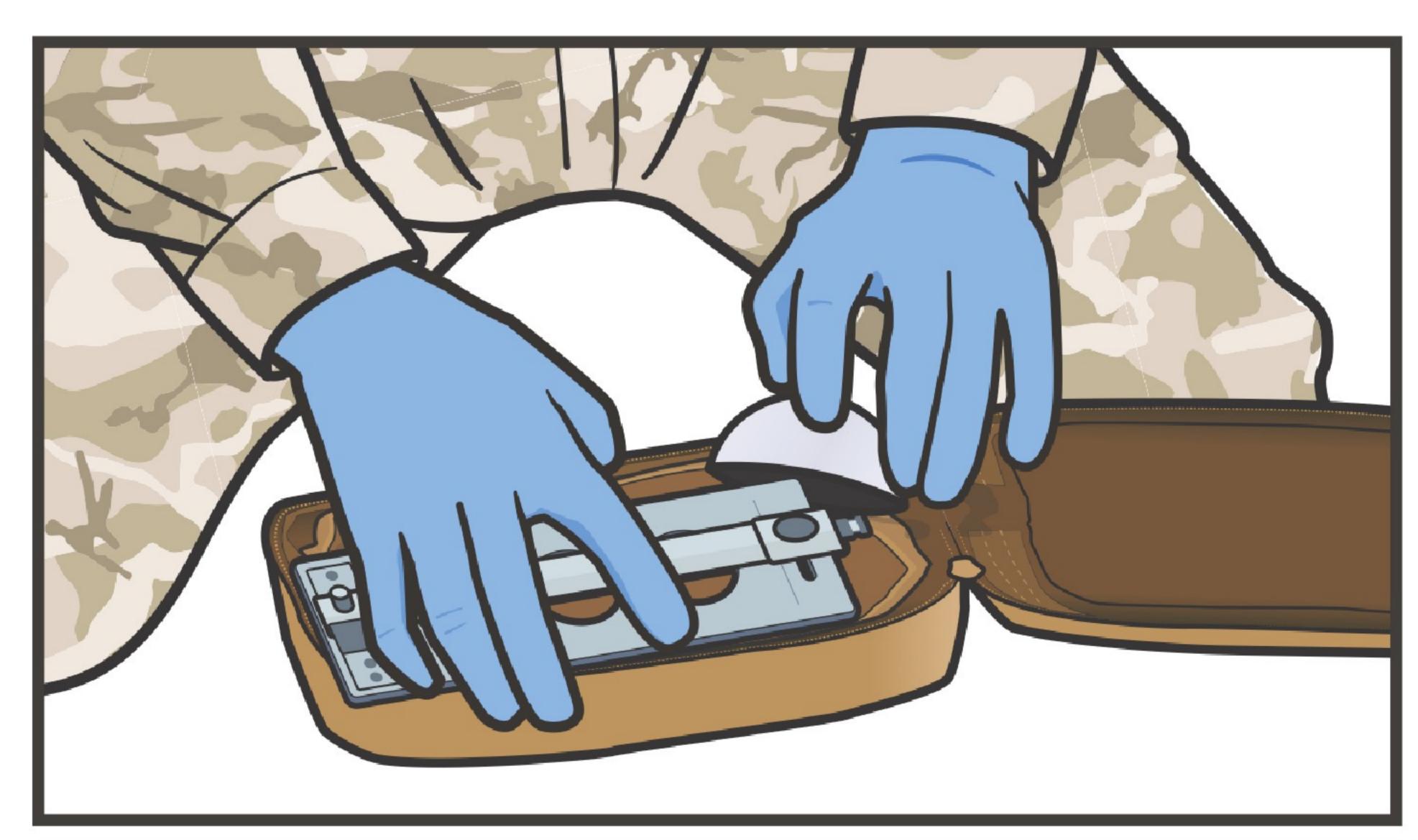


Дістаньте з упаковки та зберіть вузловий турнікет CROC.

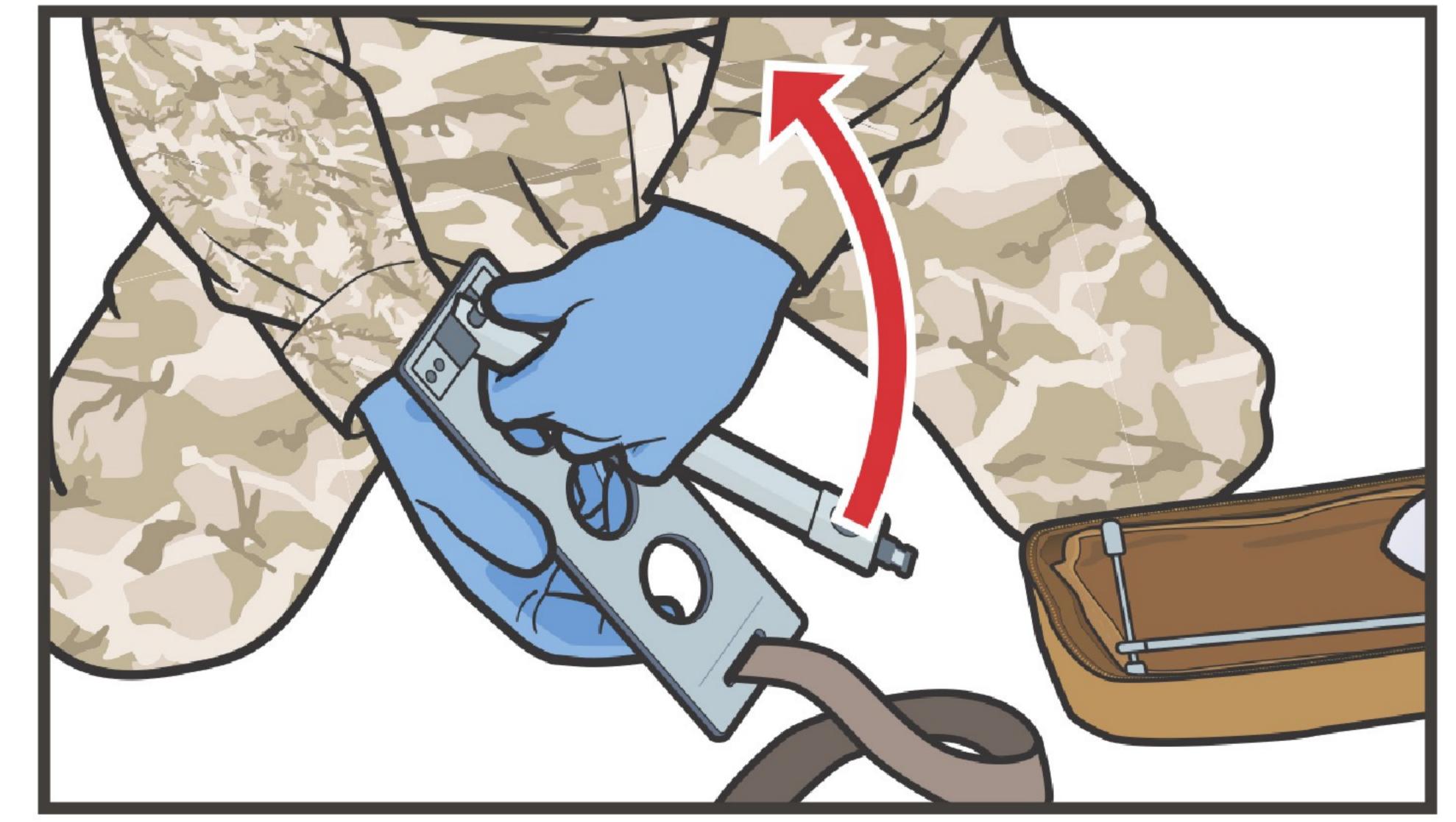


ПІДНІМАЙТЕ вертикальну ручку вгору, поки вона не зафіксується, одночасно обертаючи її на 90 градусів, доки не спрацює олокування.

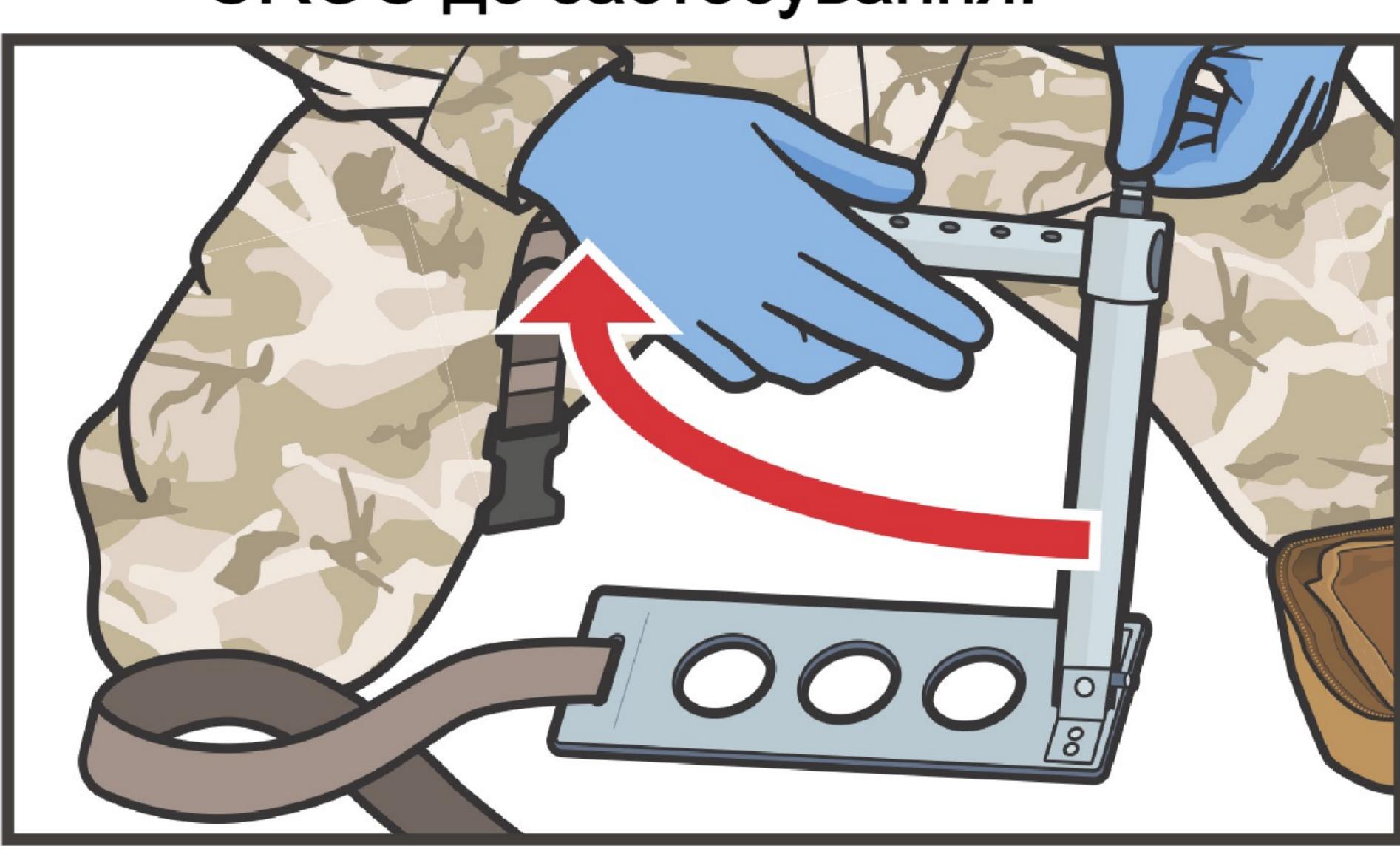


ПОТЯГНІТЬ вгору за вертикальний фіксатор (утримуючий штифт) та приєднайте горизонтальну ручку. Відпустіть утримуючий штифт та вводьте горизонтальну ручку, доки не спрацює блокування.

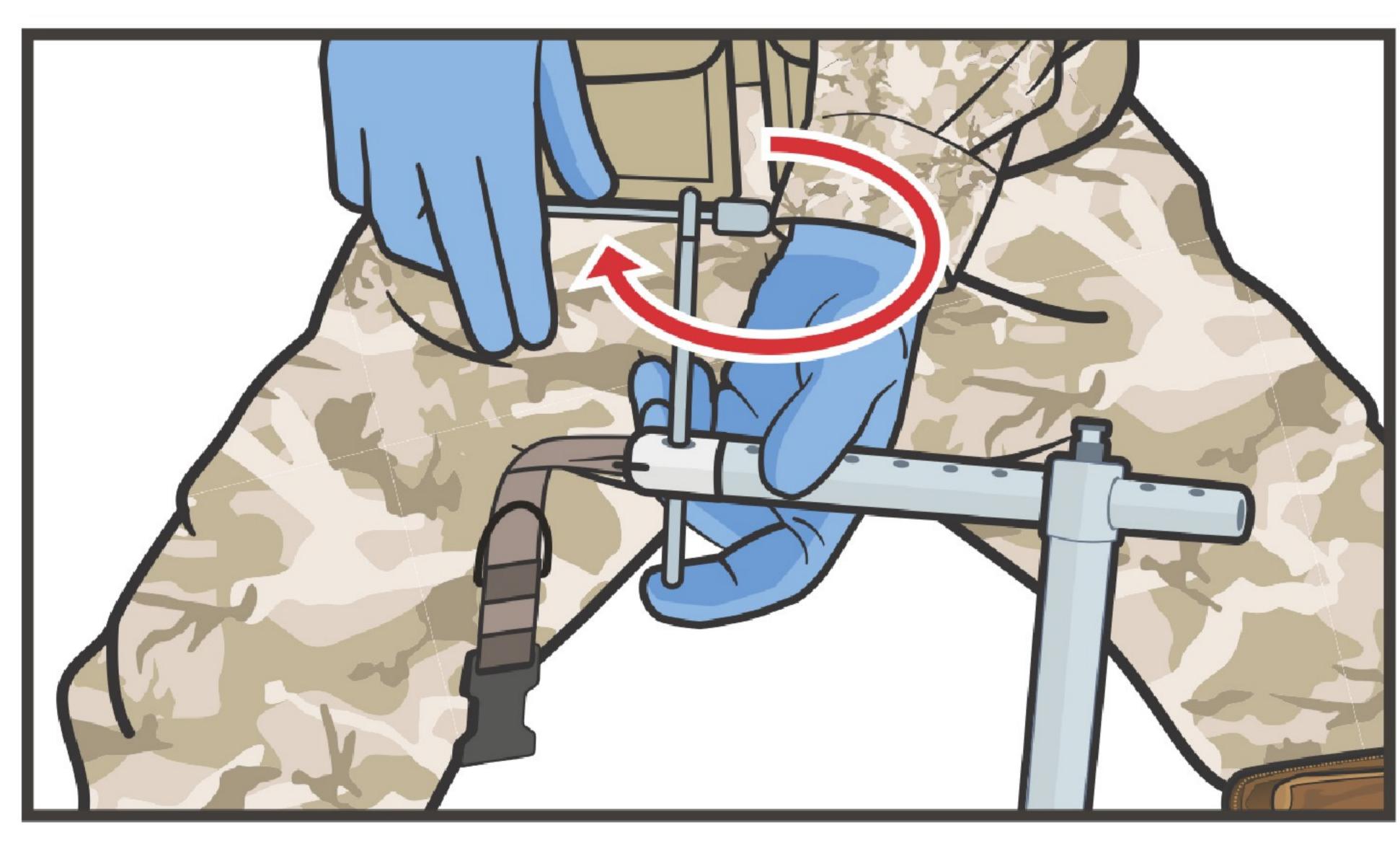

ВСТАВТЕ Т-подібну ручку в горизонтальну ручку та повертайте за годинниковою стрілкою, доки вона не стабілізується, а її кінець не виглядатиме знизу горизонтальної ручки.

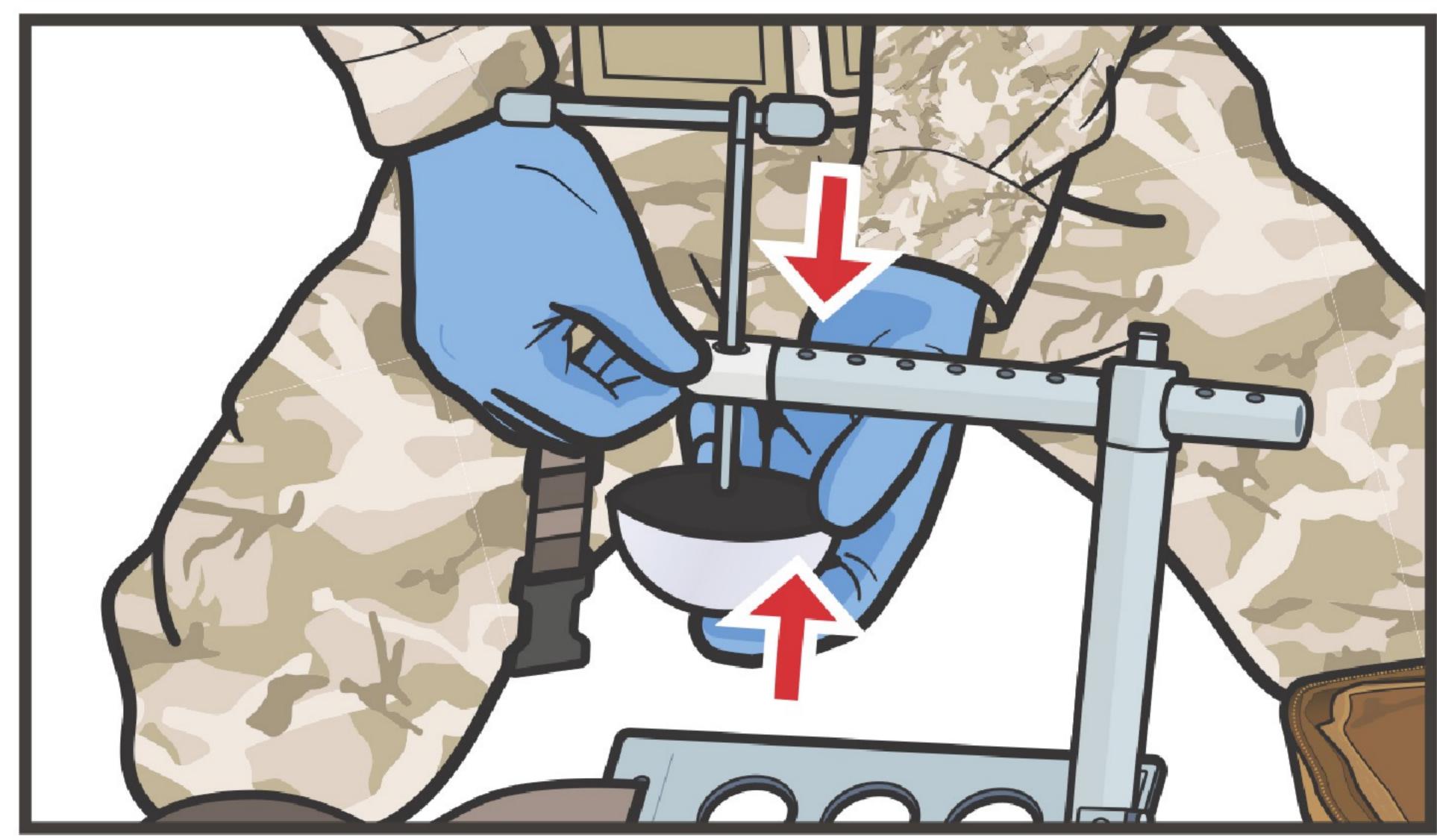

МІЦНО ПРИТИСНІТЬ диск для створення тиску до Т-подібної ручки, доки диск не зафіксується, клацнувши, на місці.

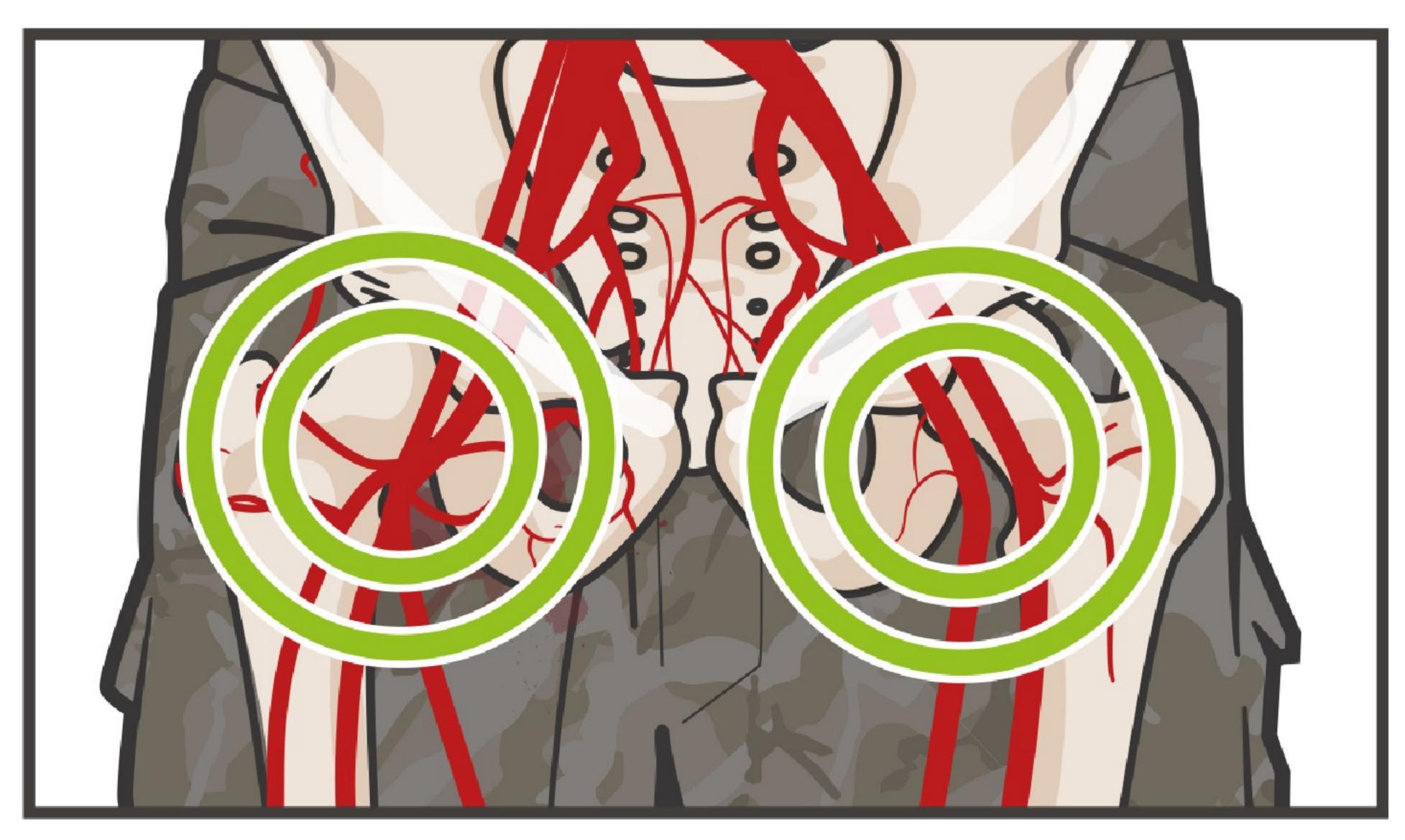

Визначте точне місце, до якого слід прикласти тиск:

1. На місце пальпації пульсу на стегні, одразу під паховою зв'язкою.

ПРИМІТКА: Якщо попередньо не було проведено тампонування рани використайте бинт або гемостатичну пов'язку, якщо ви збираєтесь розташувати диск для створення тиску над відкритою раною.

2. Трохи нижче середини уявної лінії між верхньою передньою клубовою остю та лобковим горбком (якщо пульс не пальпується).

Продовження на наступній сторінці...