



# Вузловий турнікет CROc

## Combat Ready Clamp Junctional Tourniquet - CROc

**ВАЖЛИВО.** Вузловий турнікет CROc наносити тільки після належної перев'язки рани.




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

**01** ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



**02** Якщо можливо, застосуйте прямий тиск на рану під час підготовки джгута.

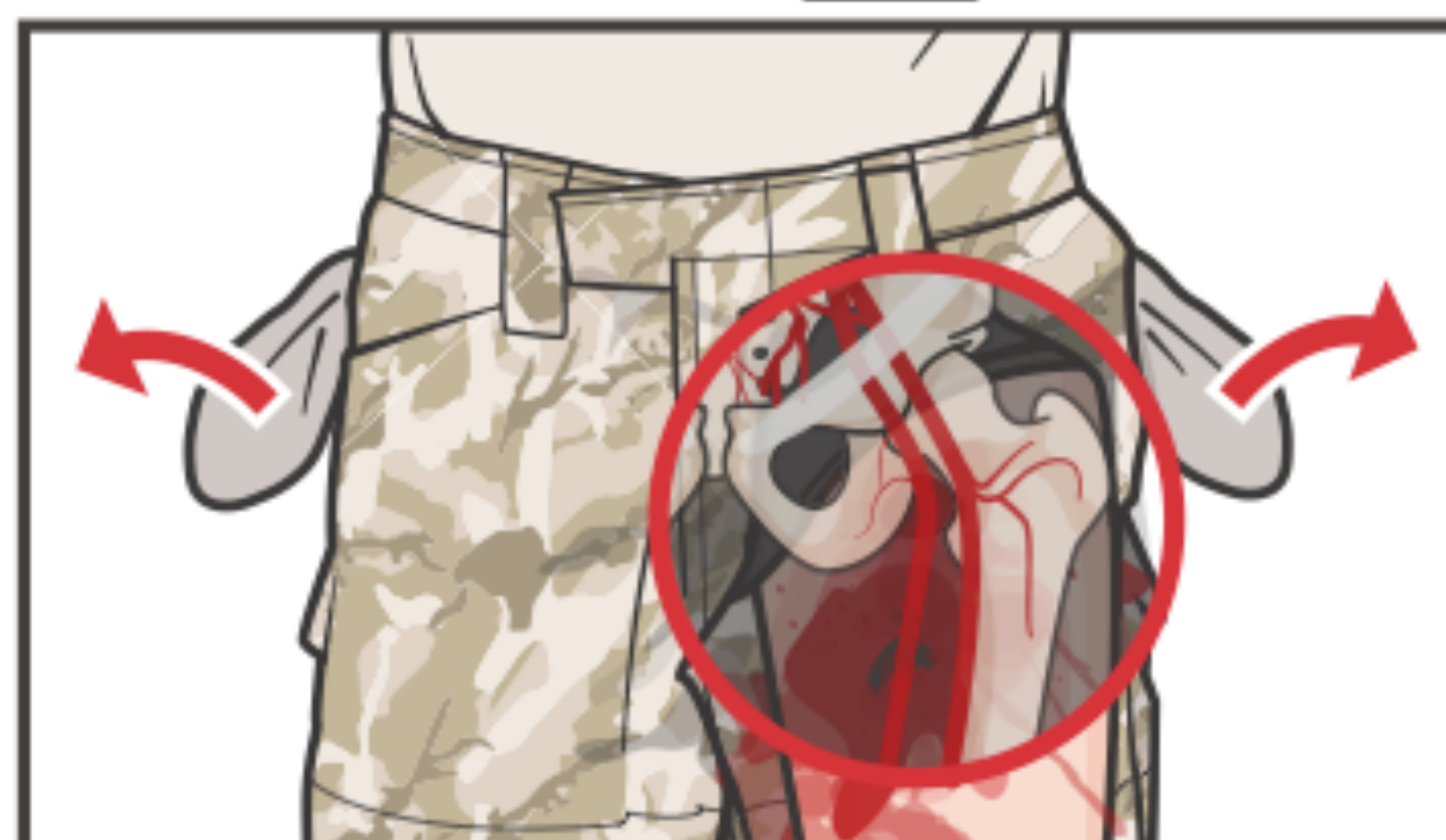

**03** Спорожніть кишені пораненого та вийміть усі предмети навколо талії.



**04** Почніть із пораненого на спині, не завдаючи подальших травм.

**05** Застосовуйте прямий тиск під час підготовки CROc.



**06** Вийміть з упаковки та зберіть частини CROc.



**07** Підніміть вертикальну руку до фіксації, повертаючи її на 90 градусів, щоб зафіксувати фіксуючий штифт.



**08** Потягніть штифт, розташований у верхній частині вертикального кронштейна, вставляючи горизонтальний кронштейн. Відпускання шпильки зафіксує горизонтальну руку.



**09** Вставте Т-подібну ручку в горизонтальний кронштейн і повертайте за годинниковою стрілкою, поки він не пройде крізь кронштейн на кілька см і не стане стабільним.



**10** Міцно натисніть натискний диск на Т-подібну ручку, доки він не стане на місце зі клацанням.



**11** Знайдіть точну область для використання стиснення CROc.

**Якщо рана знаходиться безпосередньо в зоні компресії і ще не була перев'язана, зробіть це зараз перед використанням CROc.**

Знайдіть стегнову артерію трохи нижче пахової зв'язки, яка проходить від верхнього гребеня клубової кістки до лобкової кістки.