



# Внутрішньокістковий великогомілковий EZ-IO

## Tibia Intraosseous EZ-IO


### Продовження зі сторінки 1

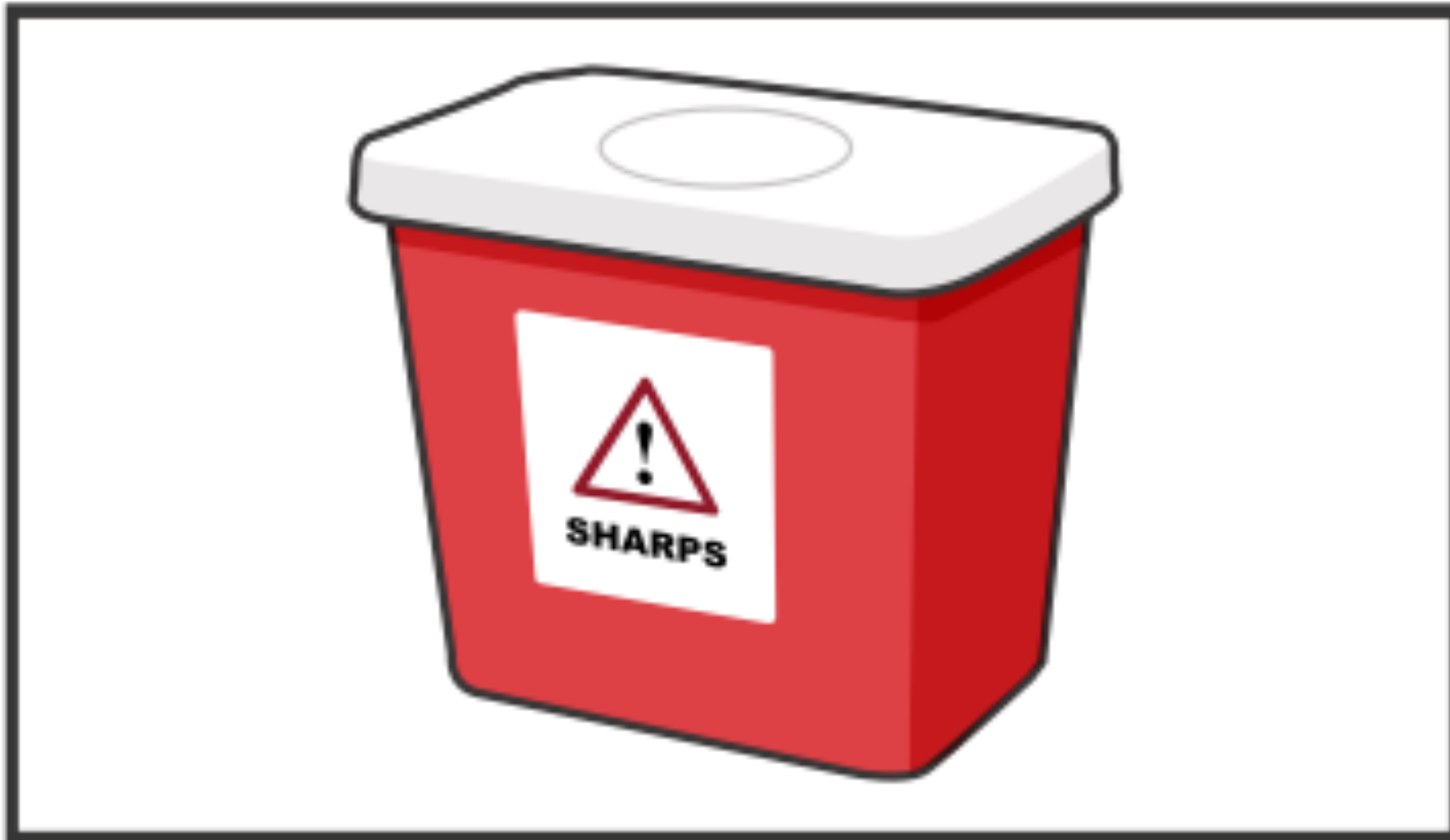


**13** Утилізуйте аплікатор у тому ж контейнері, що й гострі предмети.

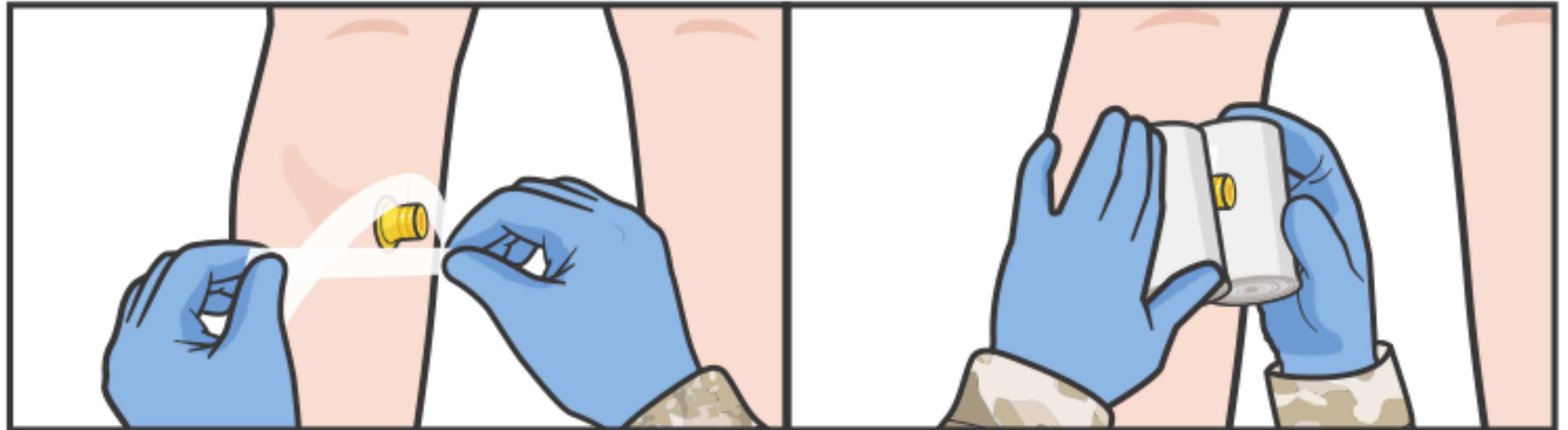

**14** Захистіть сайт стабілізатором EZ-IO, якщо він є.  
**Якщо стабілізатор EZ-IO недоступний, закріпіть ділянку декількома згорнутими бинтами та стрічкою, щоб запобігти зсуву піднятих труб під час транспортування пораненого.**

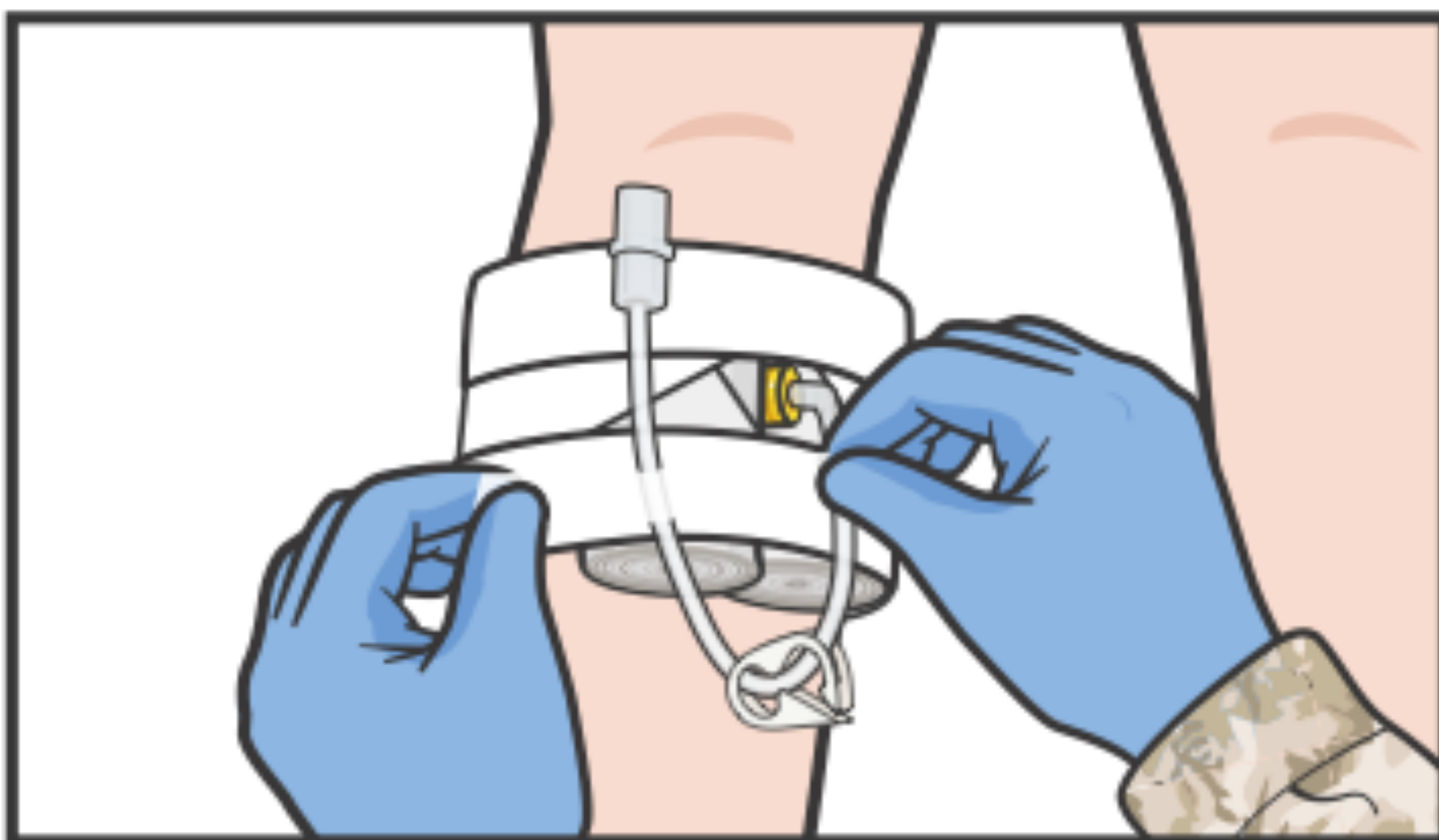


**15** З'єднайте подовжувач, попередньо заповнений (заправлений) внутрішньовенним розчином.

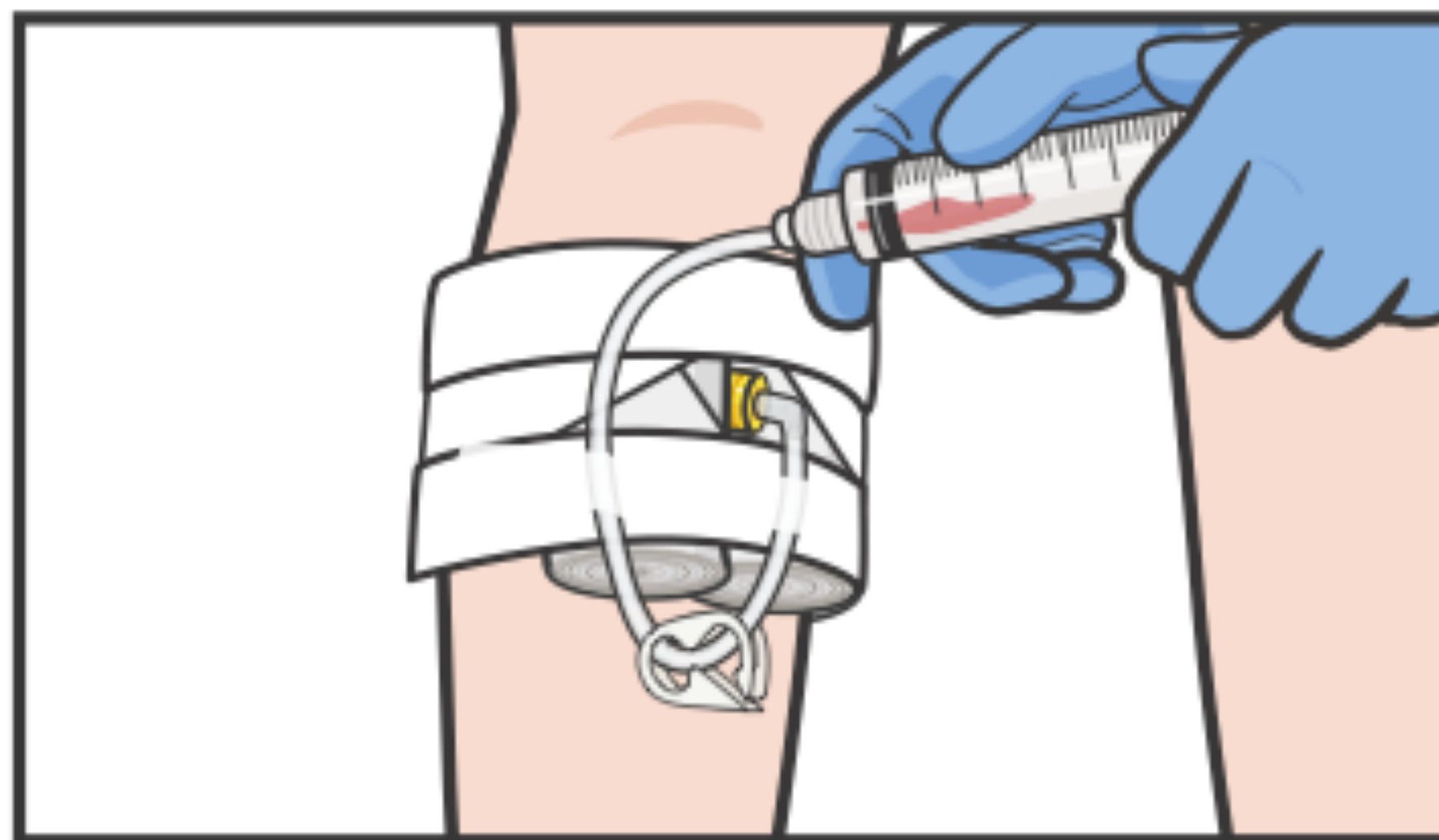


**16** Під'єднайте шприц і аспіруйте, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку – має бути спалах матеріалу з відтинком крові.

**Промийте катетер швидкою інфузією 10 мл.**

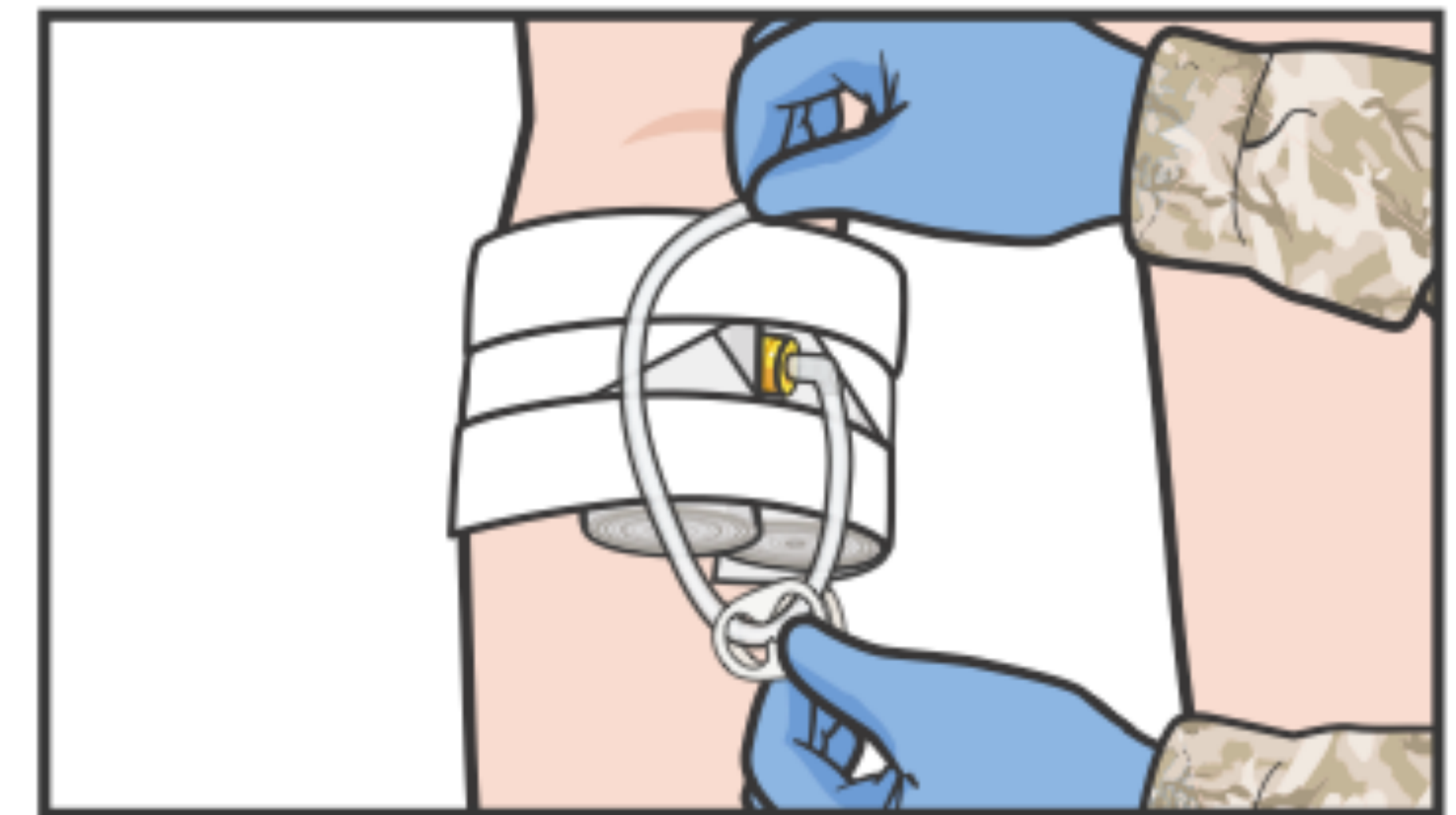

**17** Оцініть наявність ознак інфільтрації або ускладнень.

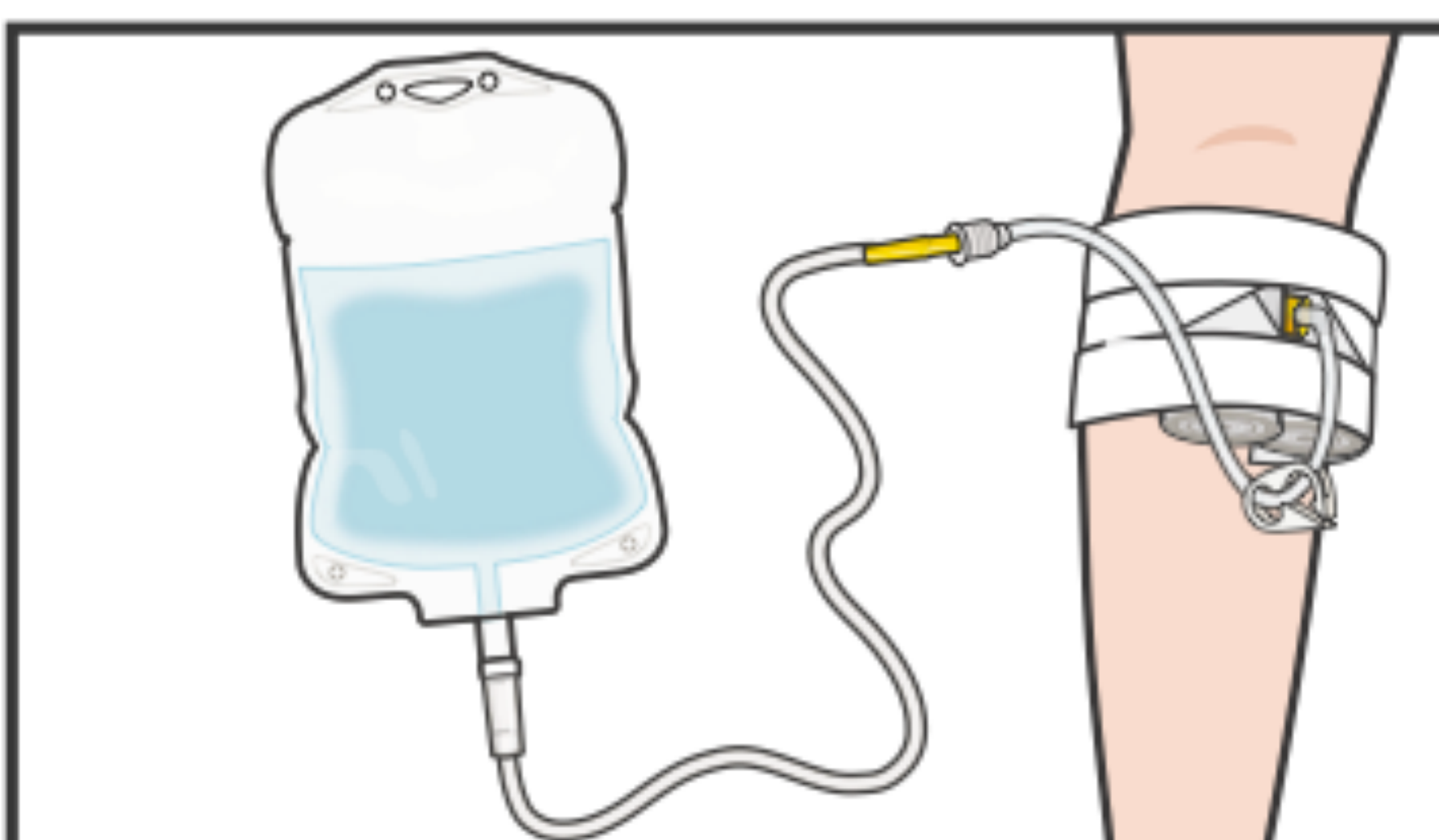

**18** Будьте готові надати рідину або ліки за потреби.



**19** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.