




НАКЛАДАННЯ ТУРНИКЕТА З ВОРОТКОМ І ПРЯЖКОЮ ДВОМА РУКАМИ (ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ, CUF)




Дистаньте турнікет з тактичної індивідуальної аптечки (IFAK) та/або підсумка.

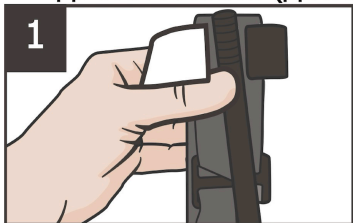

Просуньте поранену кінцівку крізь петлю, яку утворює самоклеюча стрічка (турнікет у вигляді замкнутої петлі).



Обгорніть ремінь навколо кінцівки; просуньте його кінець крізь отвір пряжки.

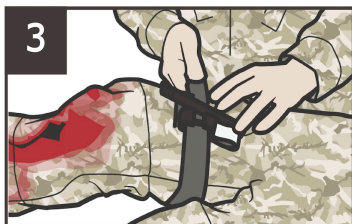

Розмістіть турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці поверх одягу/уніформи.



Перед затягуванням турнікета та закручуванням воротка переконайтеся, що стрічка протягнута крізь пряжку без провисань.



Зафіксуйте самоклеючу стрічку по всій довжині навколо кінцівки, але не над скобами, які фіксують вороток.




Закручуйте вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться (кроки 1-5 слід виконати менш, ніж за 1 хв).



Закріпіть вороток за допомогою фіксатора.



Проведіть самоклеючу стрічку навколо воротка та між фіксуючими скобами.

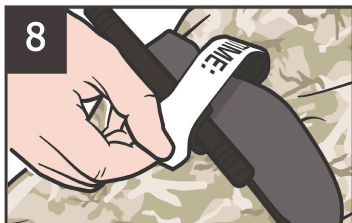

Закріпіть усе фіксуючою стрічкою.

ПРИМІТКА: Не документуйте час накладання турнікета до переходу в фазу Допомоги в польових умовах.



Якщо відсутні ознаки інших масивних кровотеч, перемістіть пораненого в укриття.

