











СИСТЕМА EZ-IO® ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ У ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ

Продовження...

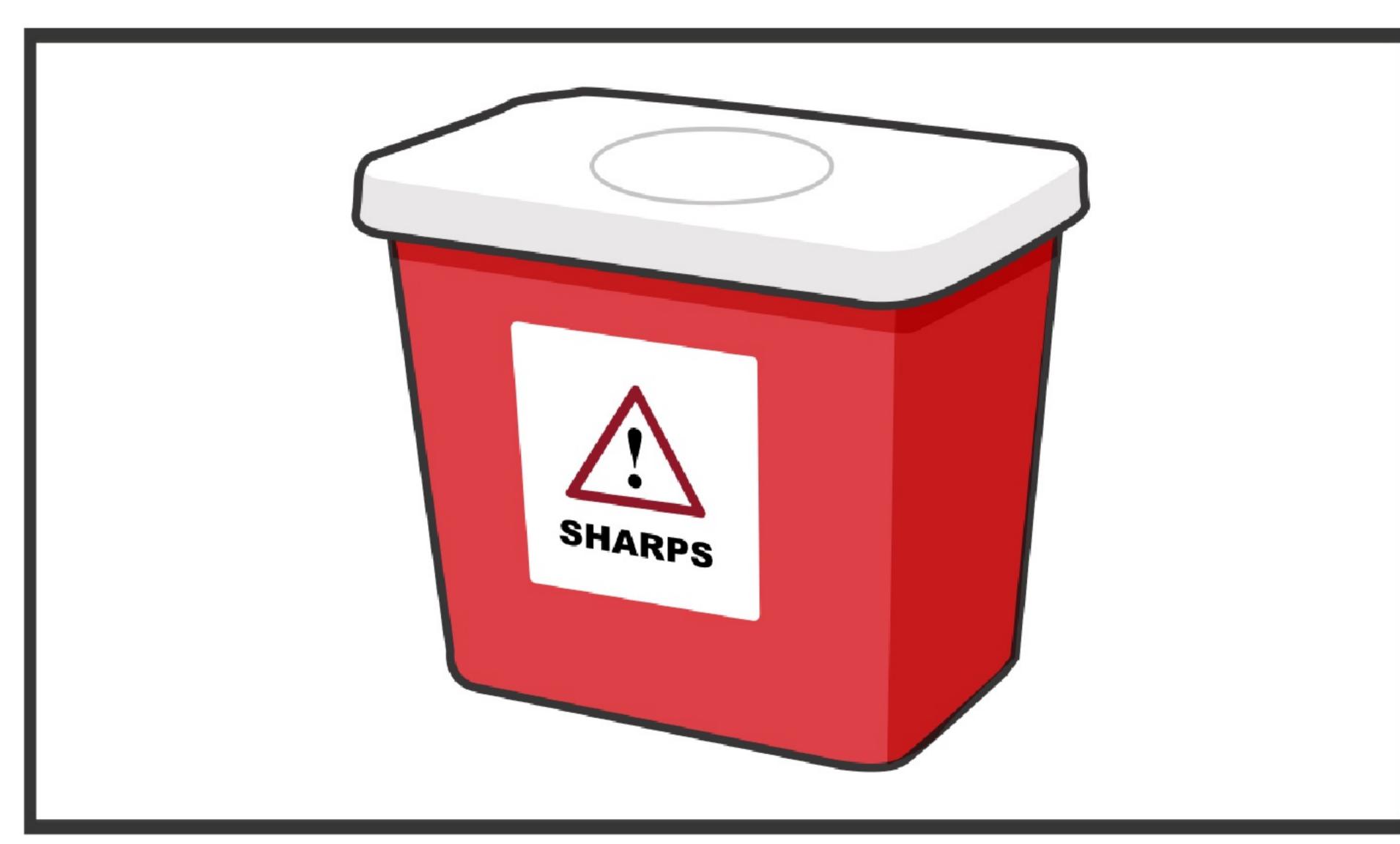


13 ПОМІСТІТЬ стилет у контейнер для гострих предметів.

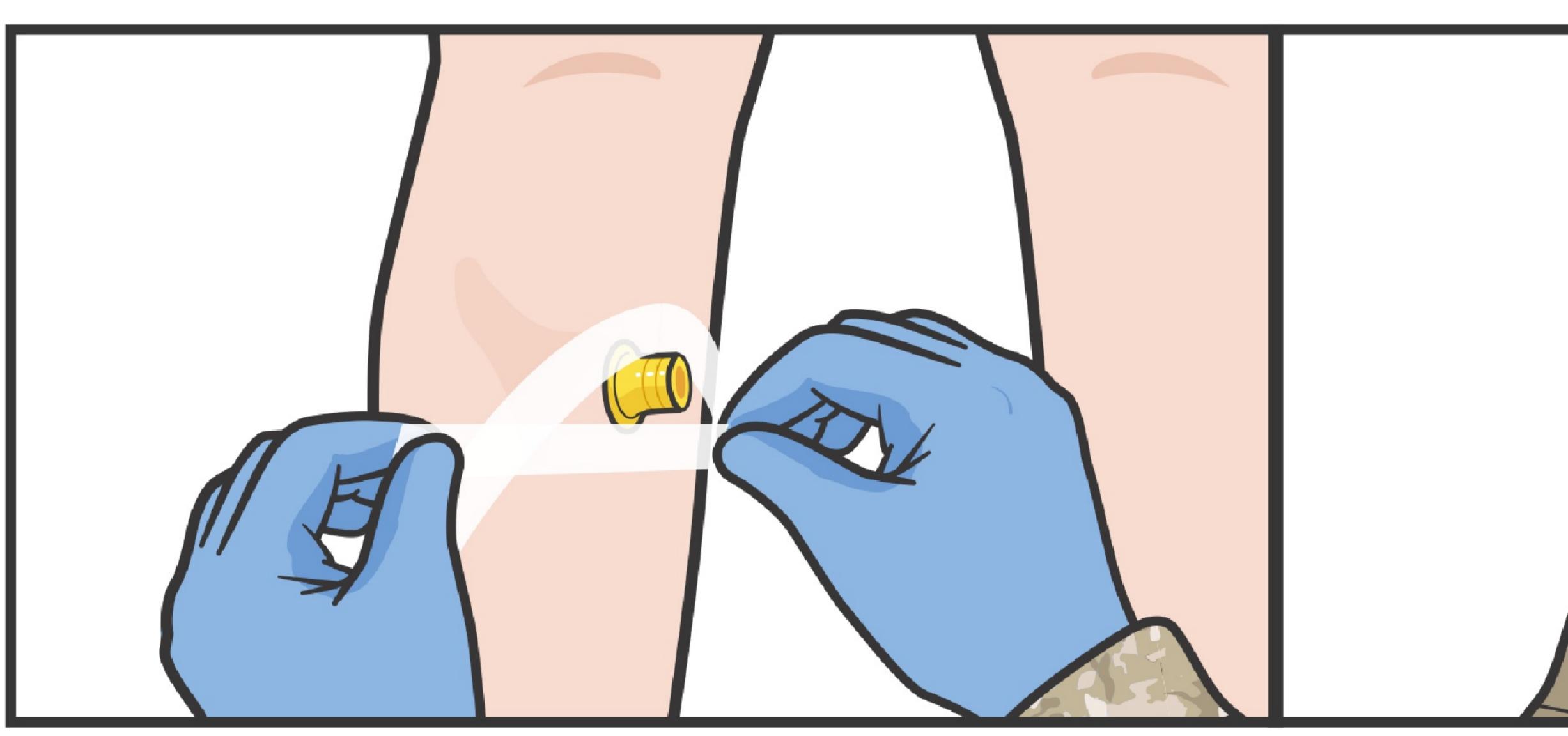


3АФІКСУЙТЕ ВК катетер за допомогою стабілізатора EZ-IO, якщо він є в комплекті.


ПРИМІТКА: За відсутності стабілізатора зафіксуйте ВК катетер за допомогою об'ємної пов'язки і лейкопластиру, щоб запобігти зміщенню виступаючої частини подовжувача ВК катетера під час надання допомоги або переміщення пораненого.

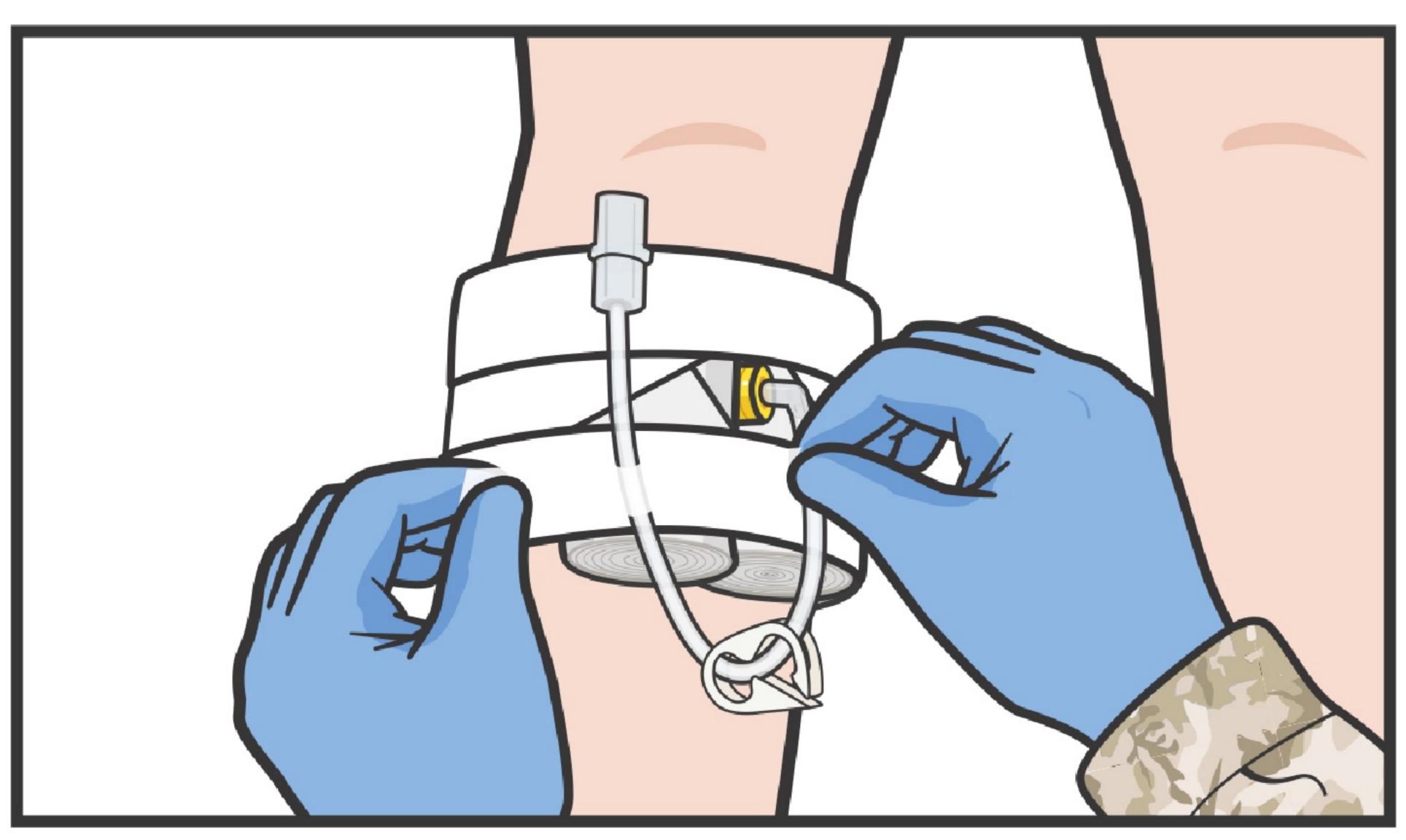


15 ПІД'ЄДНАЙТЕ заповнений ВВ розчином подовжувач, прямокутним кінцем до роз'єму Люер-Лок (Luer-Lock) ВК катетера.

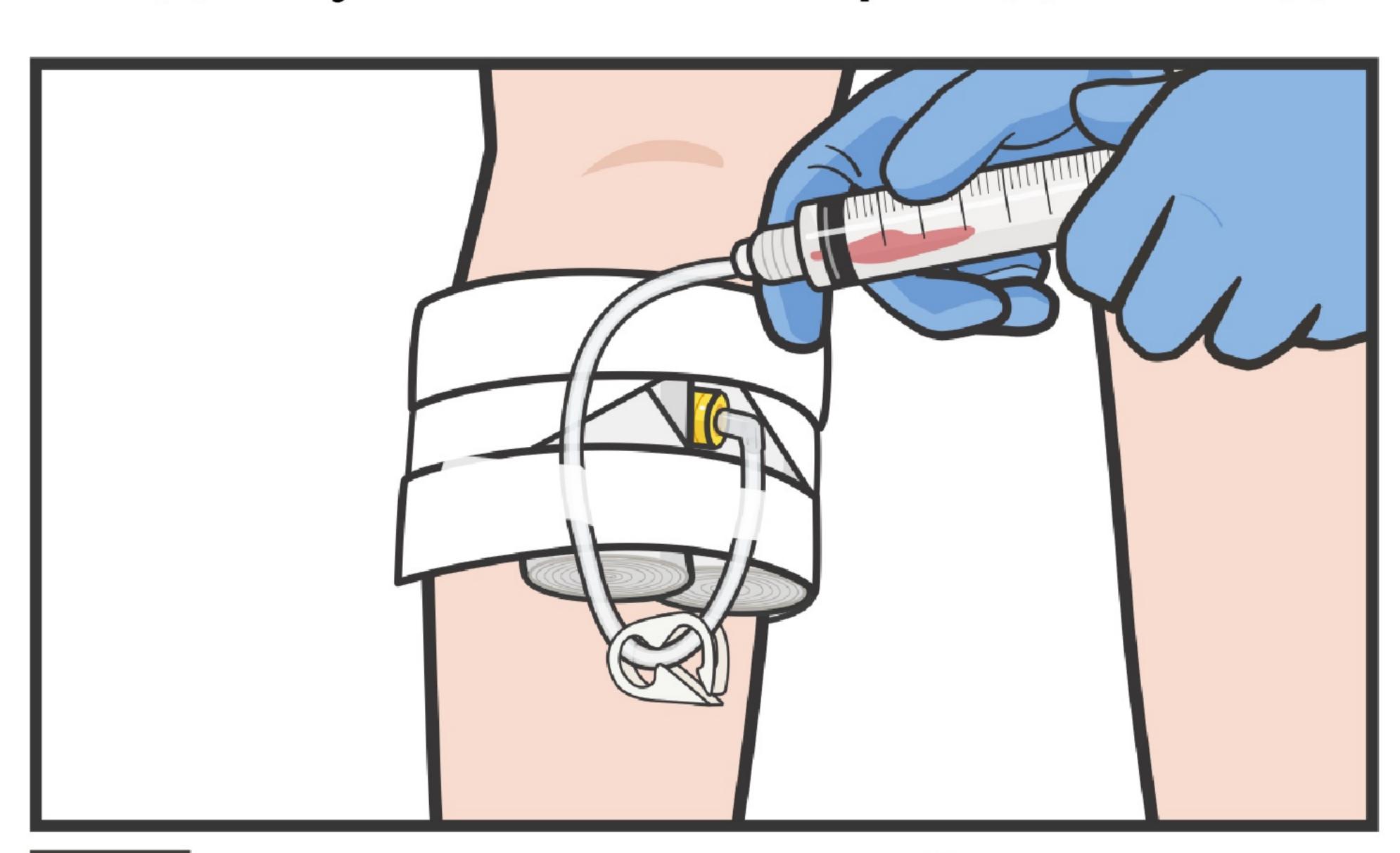


Виконайте АСПІРАЦІЙНУ пробу, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку (повинен аспіруватися кров'янистий вміст). Промийте катетер 10 мл розчину методом швидкої інфузії.

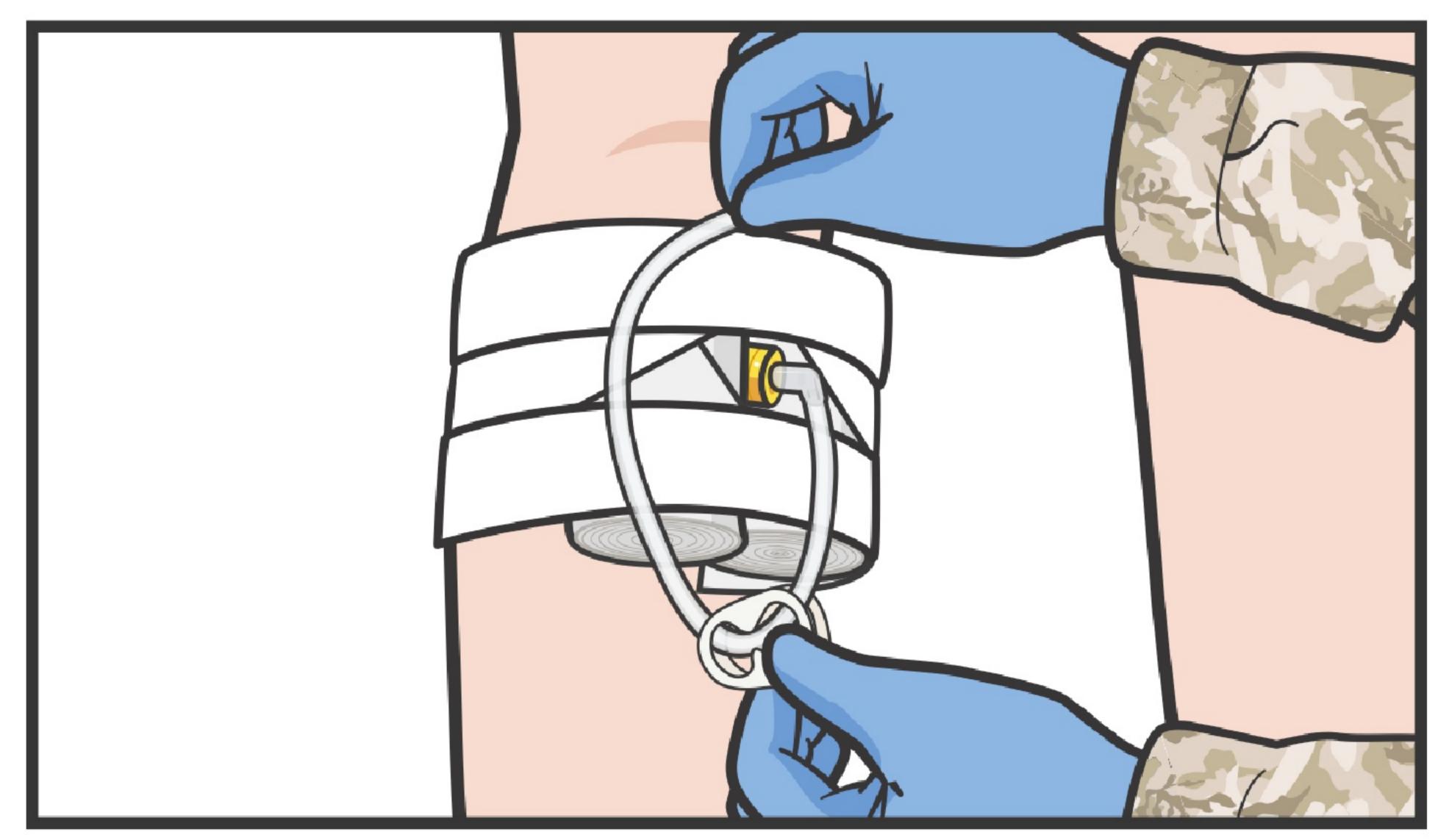

17 ОЦІНІТЬ на наявність ознак інфільтрації або ускладнень.

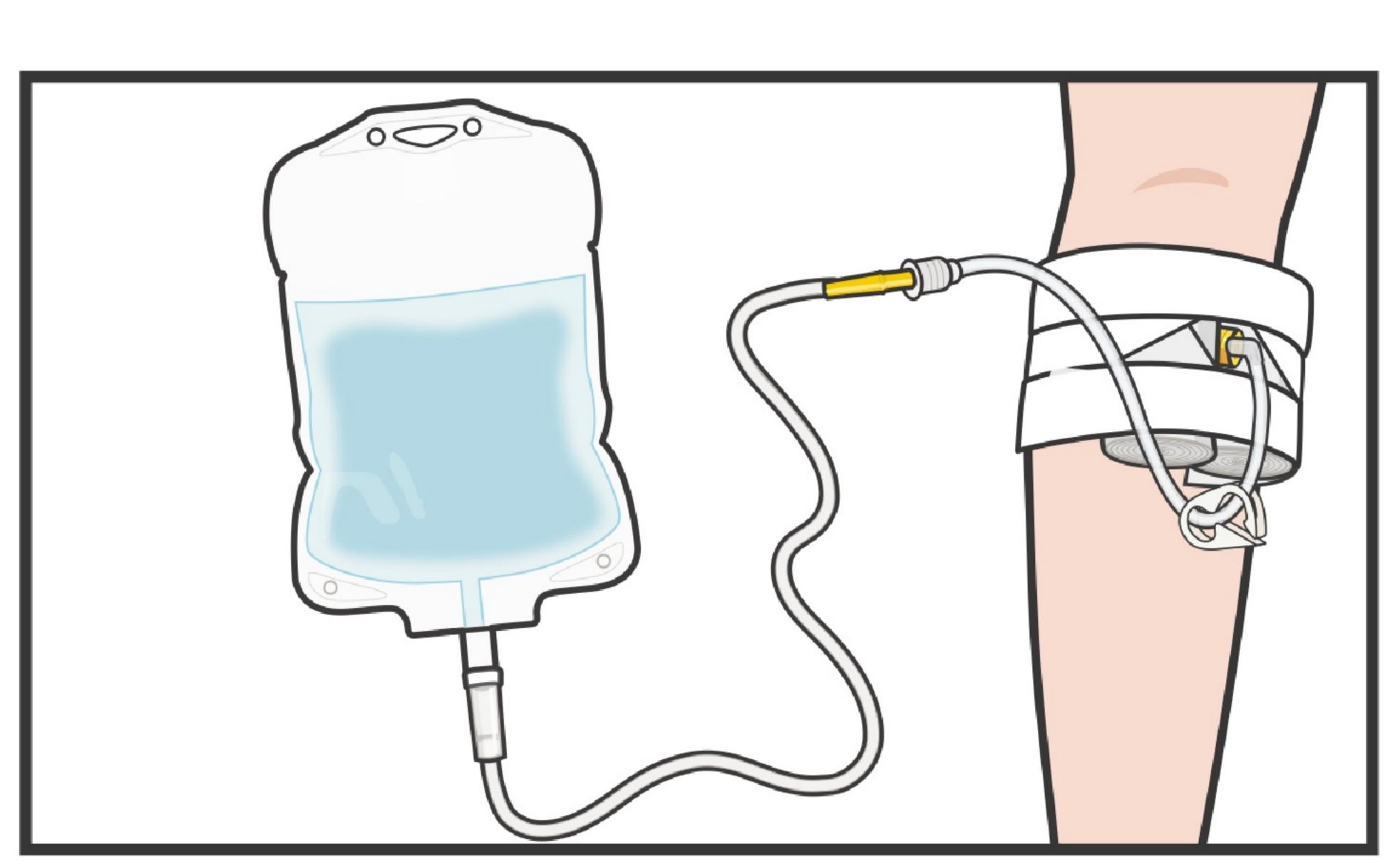

18 ПІДГОТУЙТЕСЯ до введення розчинів або медикаментів.

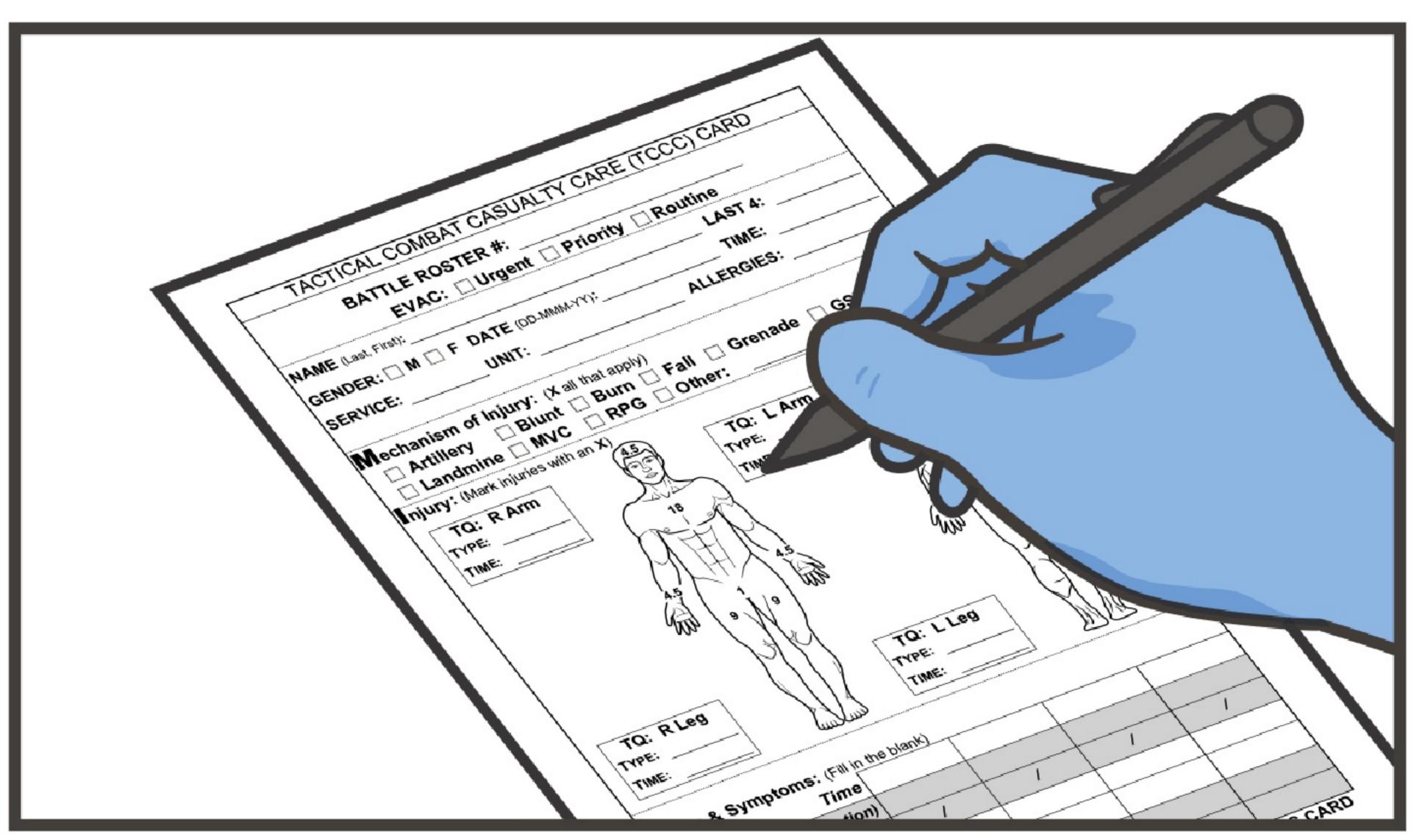

3АДОКУМЕНТУЙТЕ всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.