




# Combat Ready Clamp Junctional Tourniquet - CRoC


## Вузловий турнікет CRoC

### Продовження зі сторінки 1

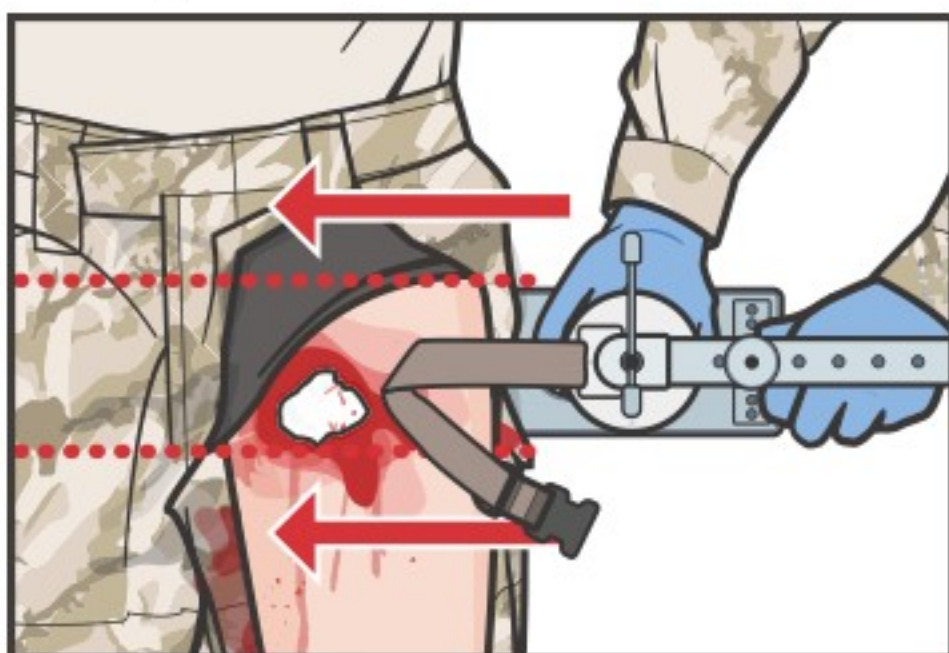


- 12** Покладіть базову пластину під пораненого, нижче бажаної точки стиснення.


**ПРИМІТКА.** Якщо можливо, просуньте нижній пластинчастий ремінь під сідниці жертви для подальшого використання.

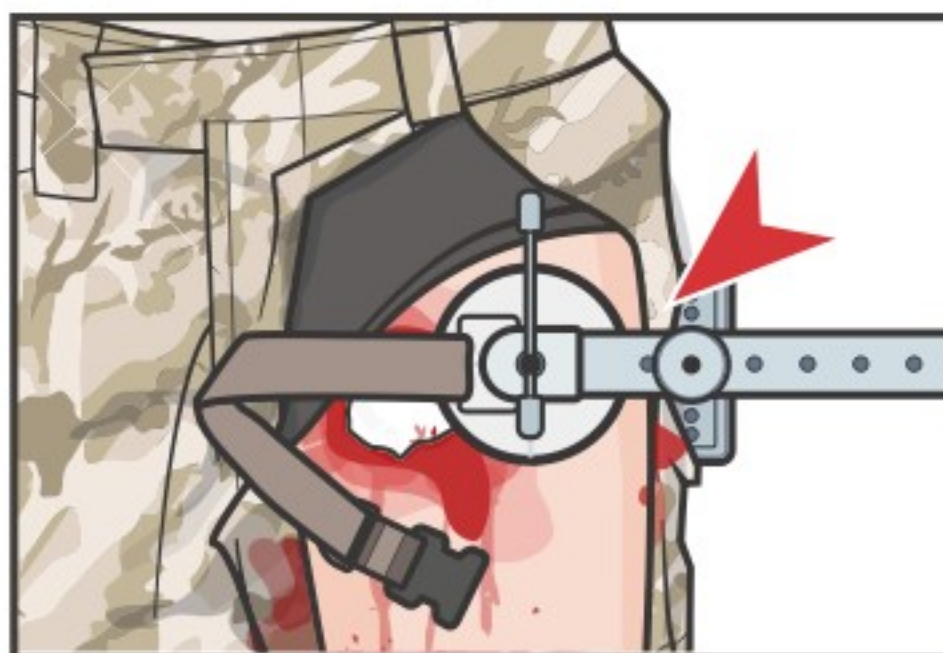


- 13** Переконайтесь, що вертикальна рука торкається пораненого з пораненого боку, близько до місця рани.

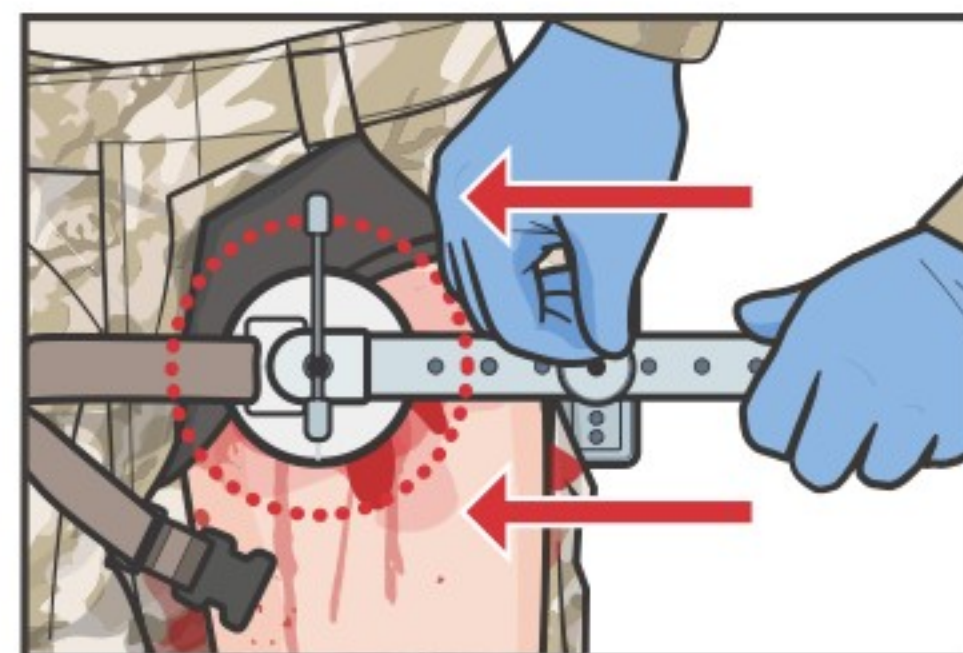

- 14** Відрегулюйте вертикальне плече пристрою та положення над точкою стиснення.

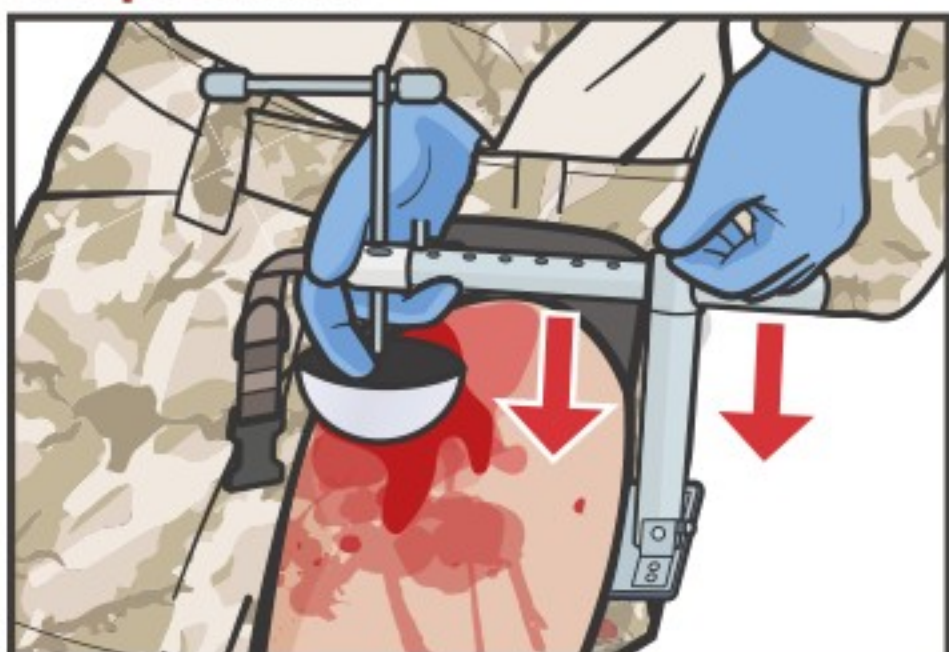

- 15** Тепер відрегулюйте вертикальне плече пристрою так, щоб натискний диск торкався пораненої людини в місці стиснення.

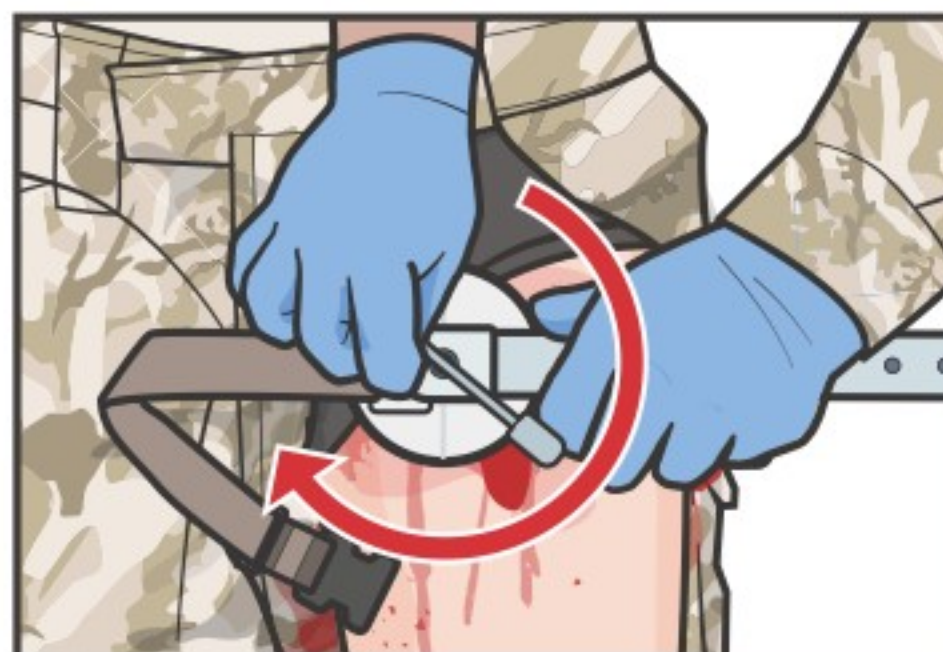

- 16** Поверніть Т-подібну ручку за годинниковою стрілкою, щоб натиснути на бинт. Продовжуйте обертати, поки кровотеча не зупиниться.

**ВАЖЛИВО.** Якщо кровотеча не зупинилася після 20 обертань, подумайте про зміну положення натискного диска.




- 17** Коли кровотеча зупиниться, прикріпіть кріпильний ремінь.

**ВАЖЛИВО** – часто **МОНІТОРУЙТЕ** пацієнта під час транспортування, щоб переконатися, що пристрій і натискний диск залишаються на місці. Відрегулюйте відповідно, щоб контролювати кровотечу.



- 18** ДОКУМЕНТУВАТИ час накладання джгута на обличчя пораненого.

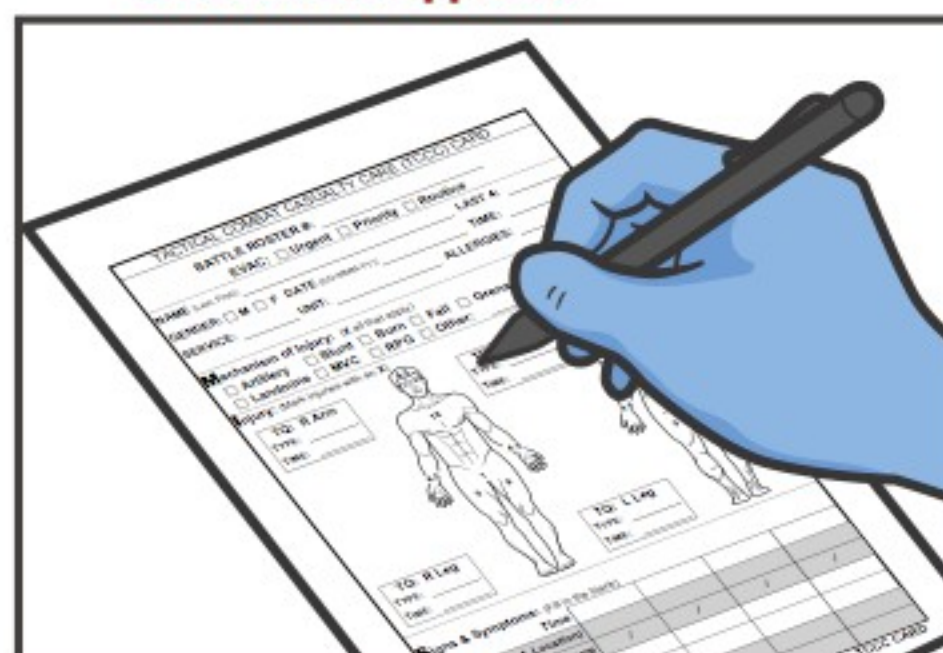

- 19** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.