














## НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТА З ВОРОТКОМ І ПРЯЖКОЮ ДВОМА РУКАМИ


## ДОПОМОГА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (TFC)



РОЗКРИЙТЕ та ОГЛЯНЬТЕ місце поранення.

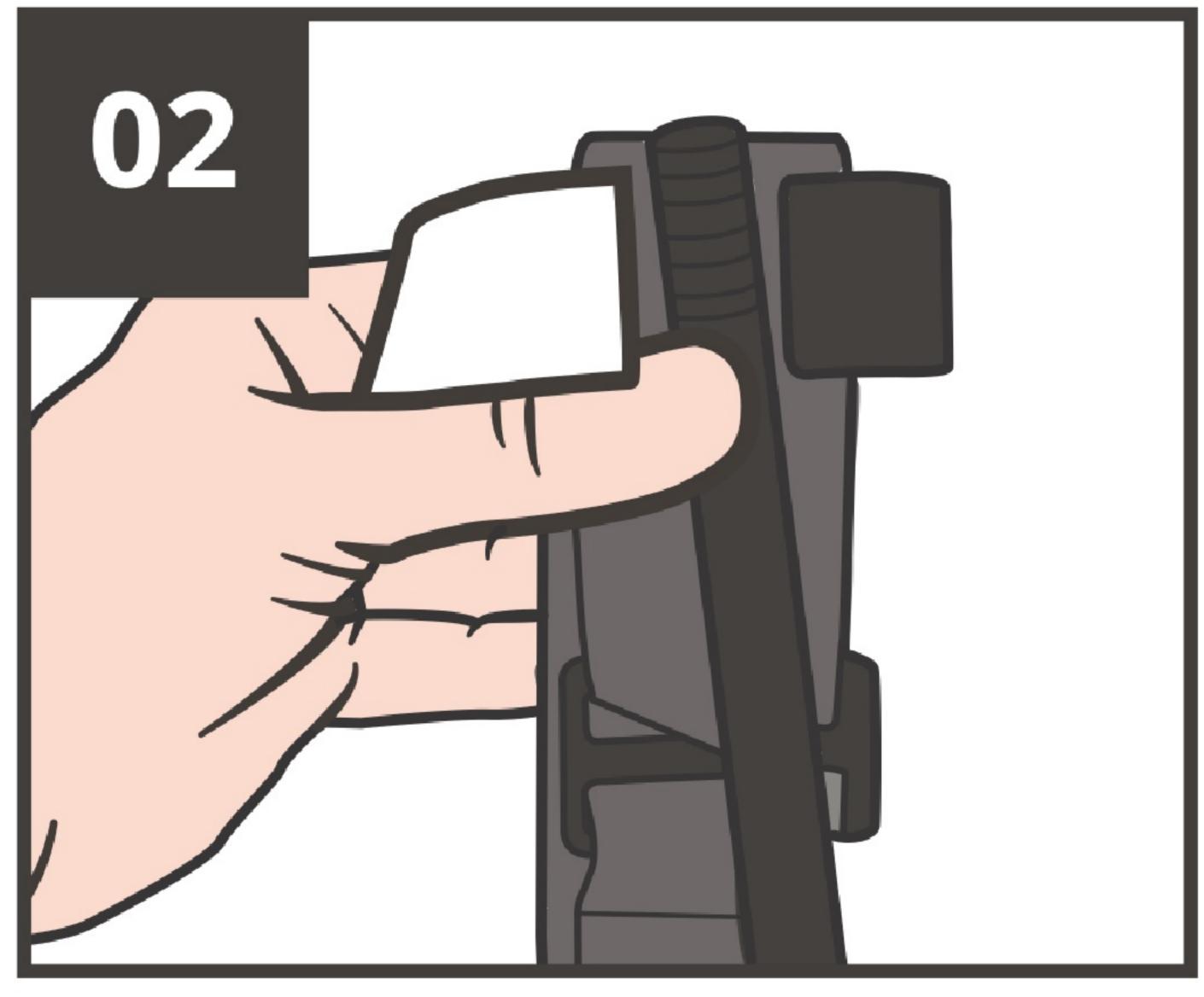


ДІСТАНЬТЕ турнікет із тактичної індивідуальної аптечки пораненого та/або з підсумка.

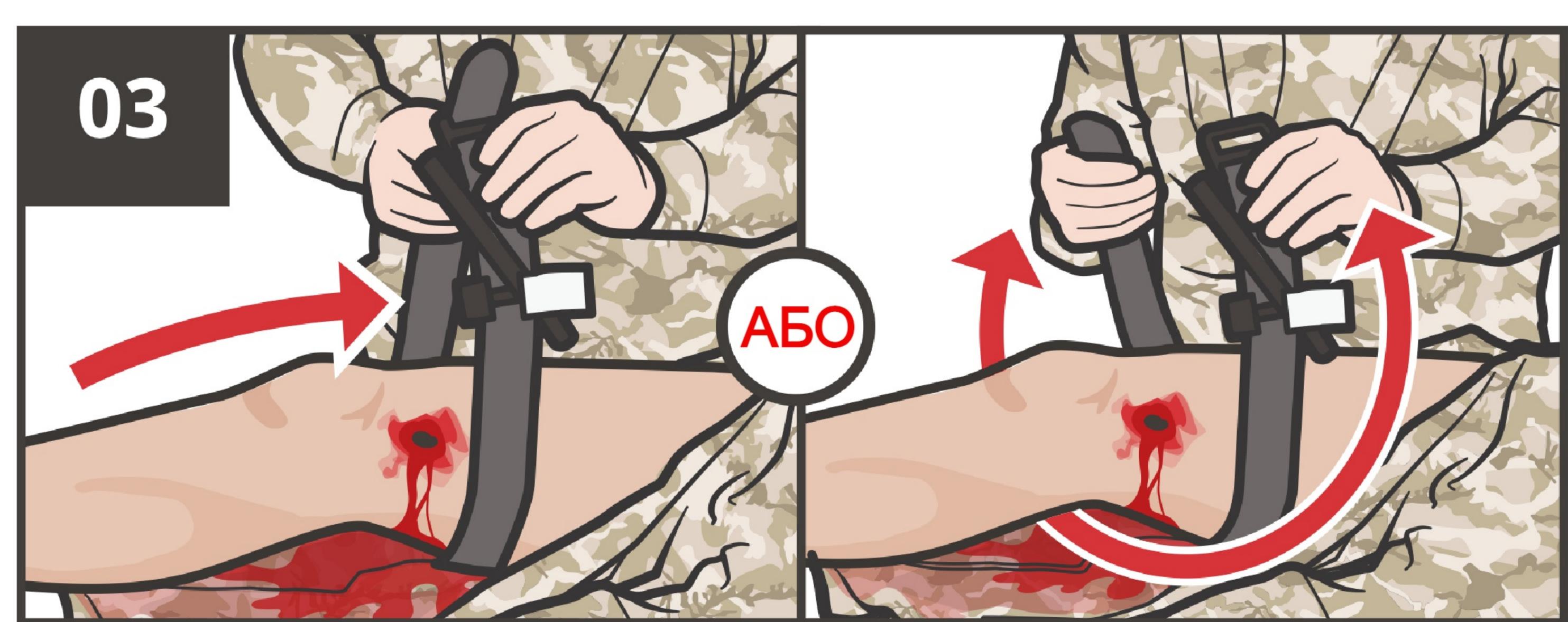


ПРОСУНЬТЕ поранену кінцівку крізь петлю ременя турнікета (турнікет у вигляді замкнутої петлі).


ОБГОРНІТЬ ремінь навколо кінцівки і протягніть крізь отвір пряжки.

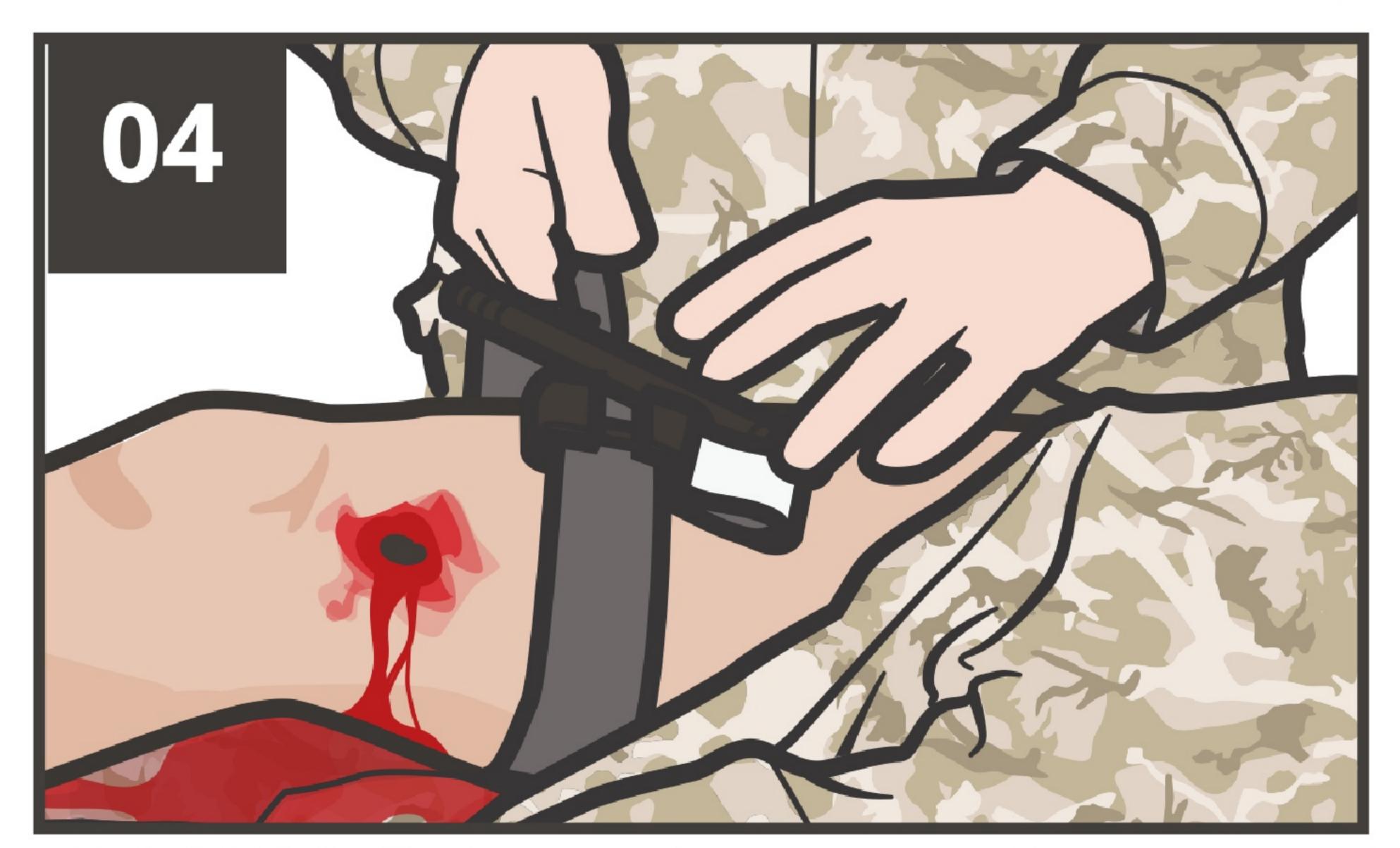


РОЗМІСТІТЬ турнікет на 5 - 8 см вище від рани безпосередньо на шкірі.

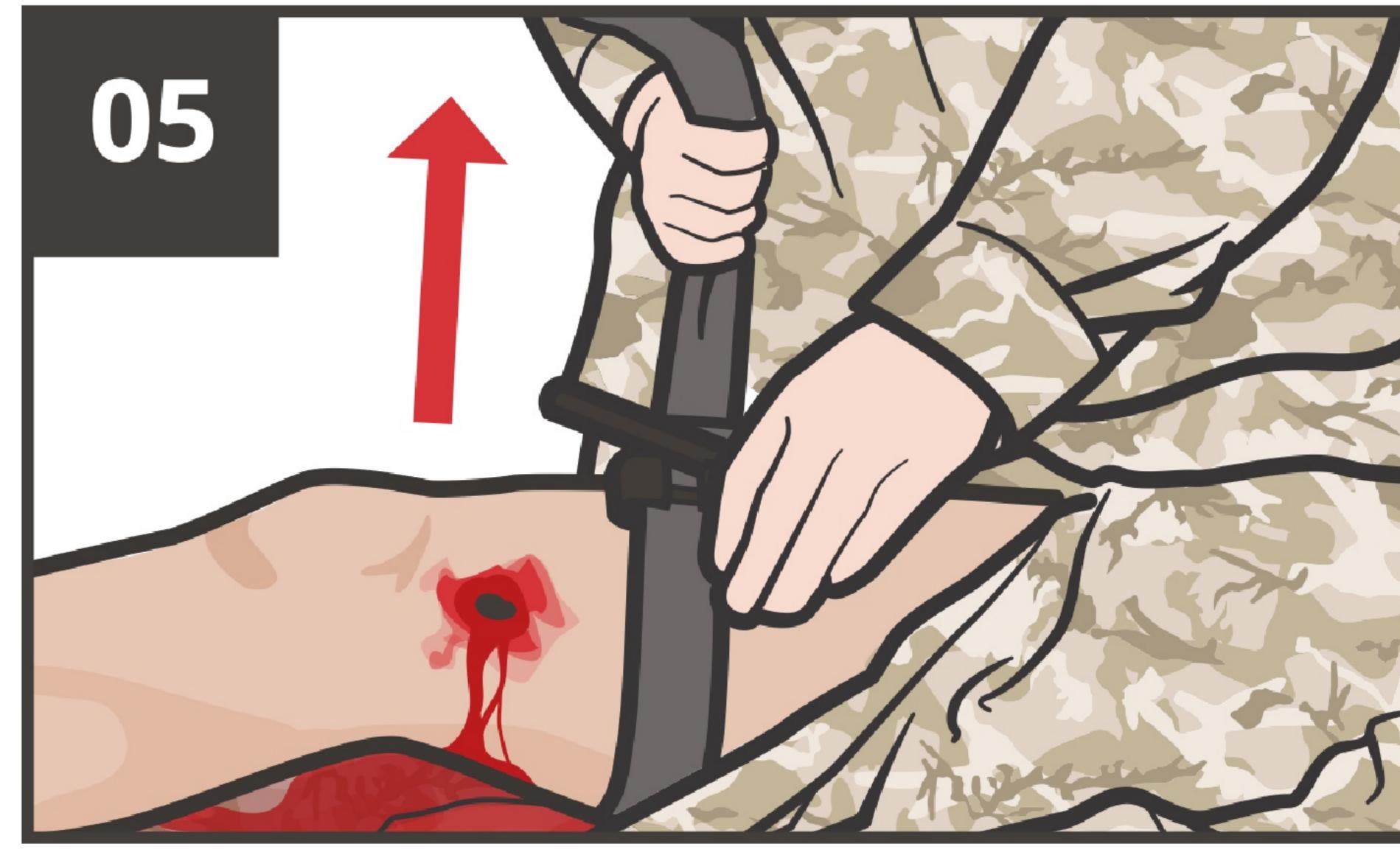


ЩІЛЬНО ЗАТЯГНІТЬ самоклеючу стрічку, наскільки це можливо.

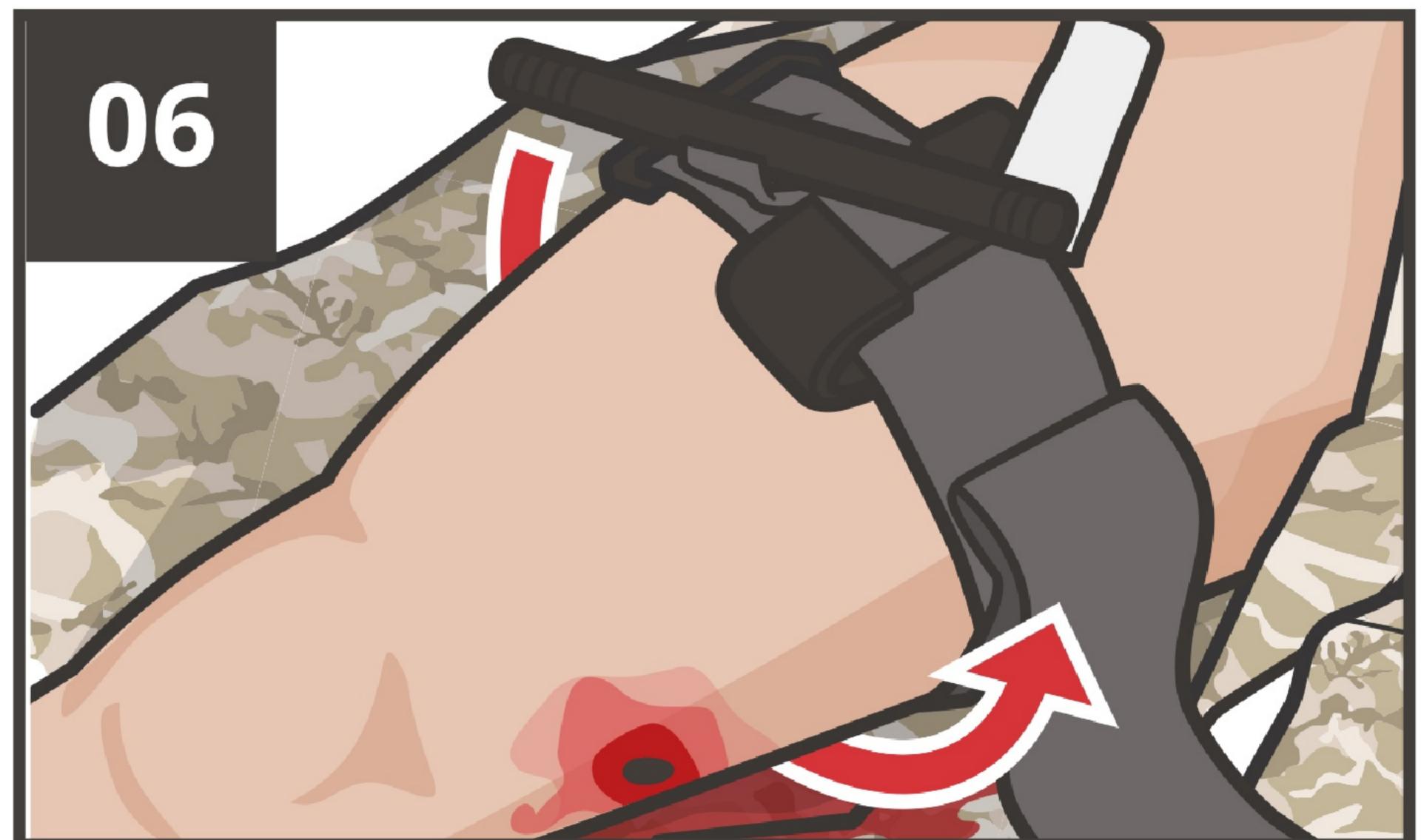

ЗАФІКСУЙТЕ самоклеючу стрічку по всій довжині навколо кінцівки.

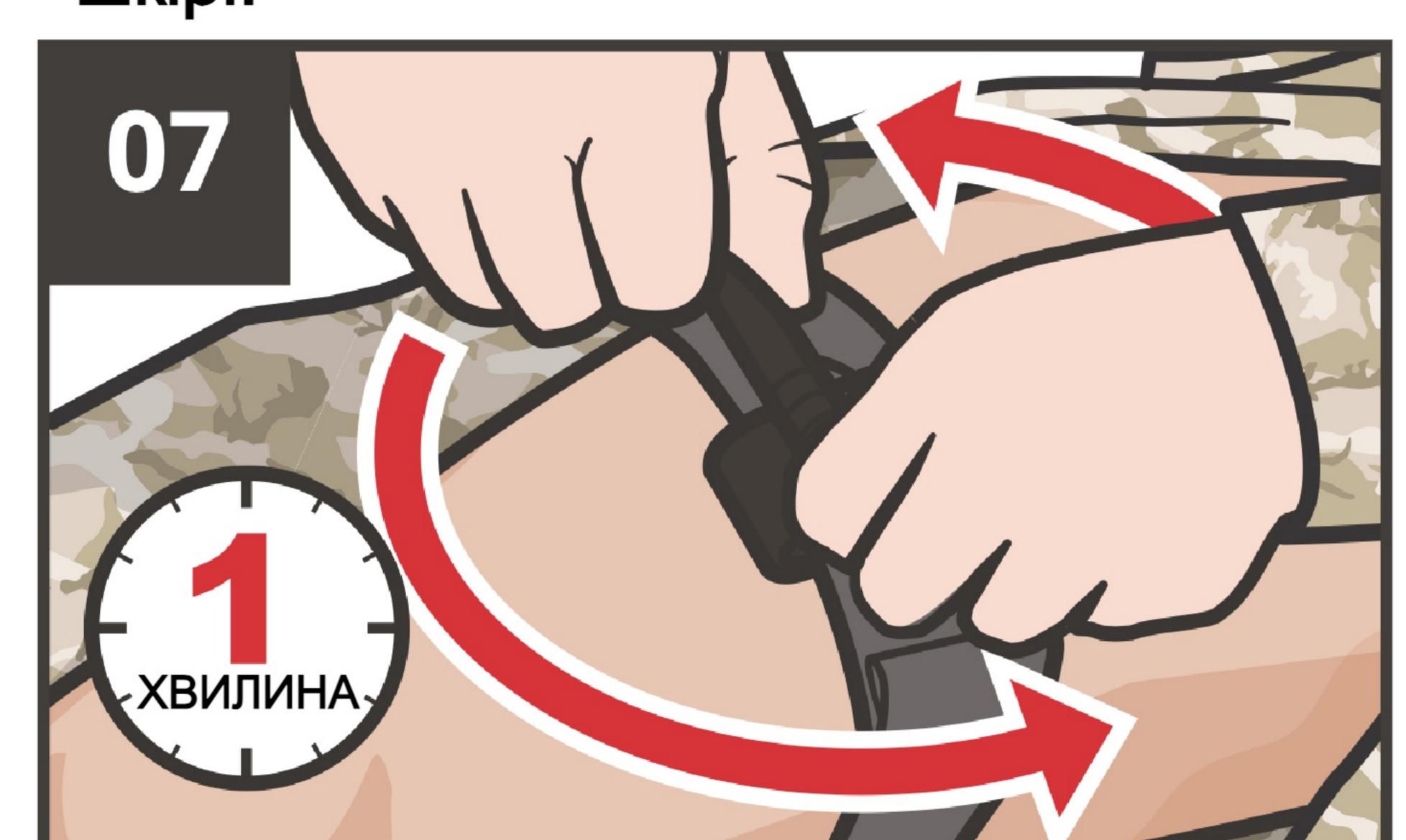


ЗАКРУЧУЙТЕ вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться (Кроки 1-6 слід виконати менш ніж за 1 хв).

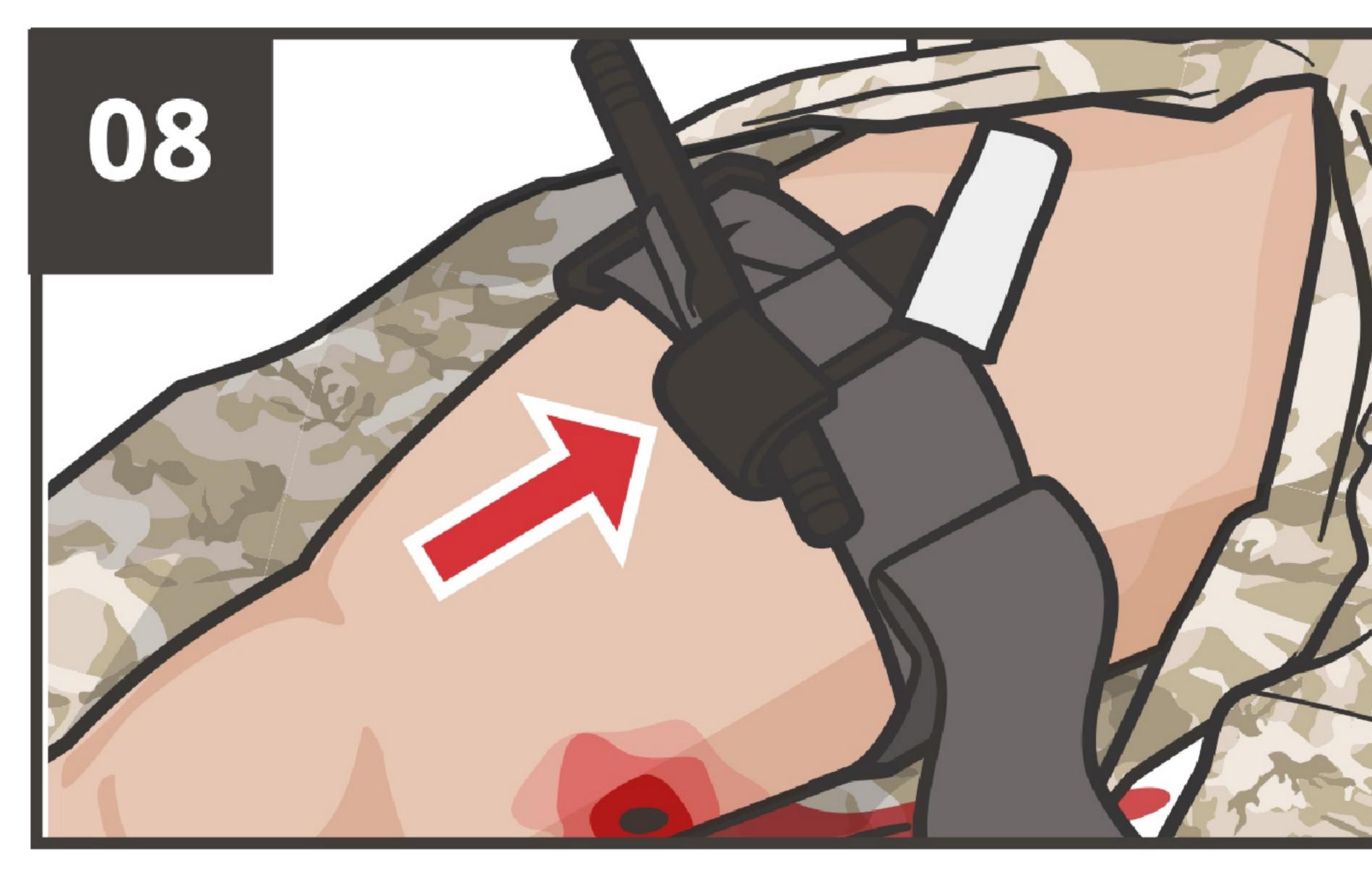


ЗАКРІПІТЬ вороток за допомогою фіксатора.




ОБГОРНІТЬ самоклеючу стрічку навколо воротка та між фіксуючими скобами.

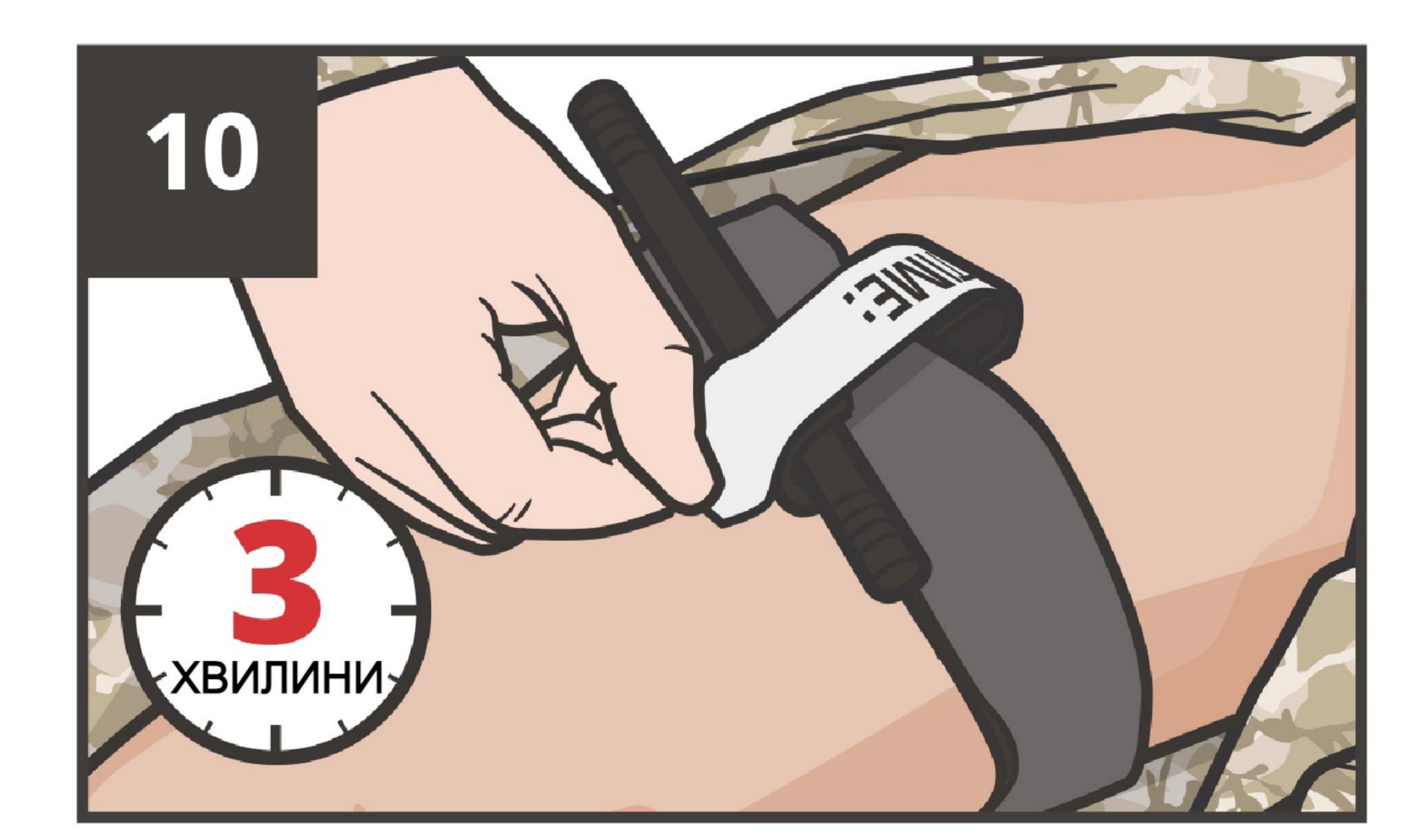

ЗАКРІПІТЬ усе фіксуючою стрічкою.

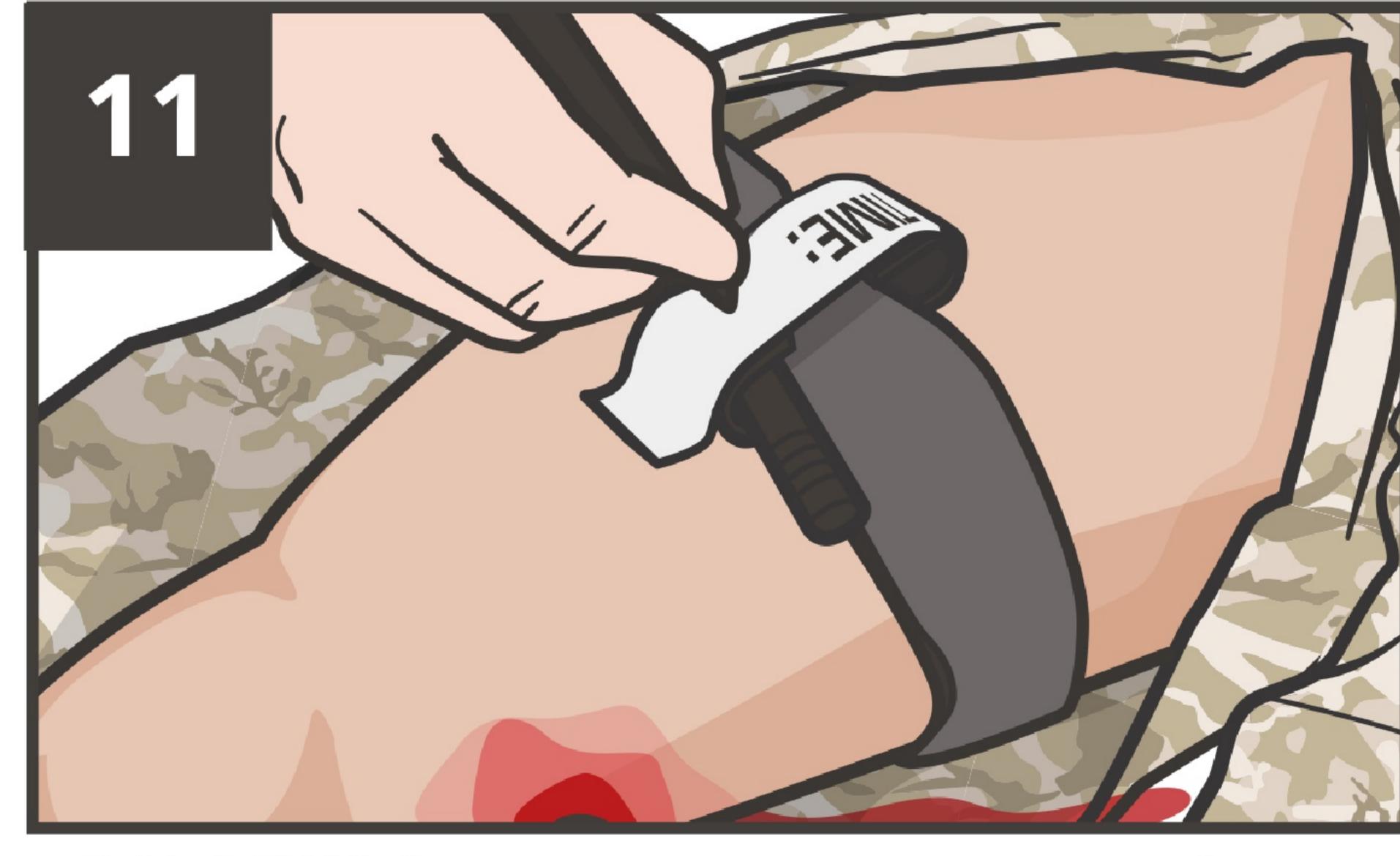

ЗАПИШІТЬ час накладання турнікета на білій стрічці.

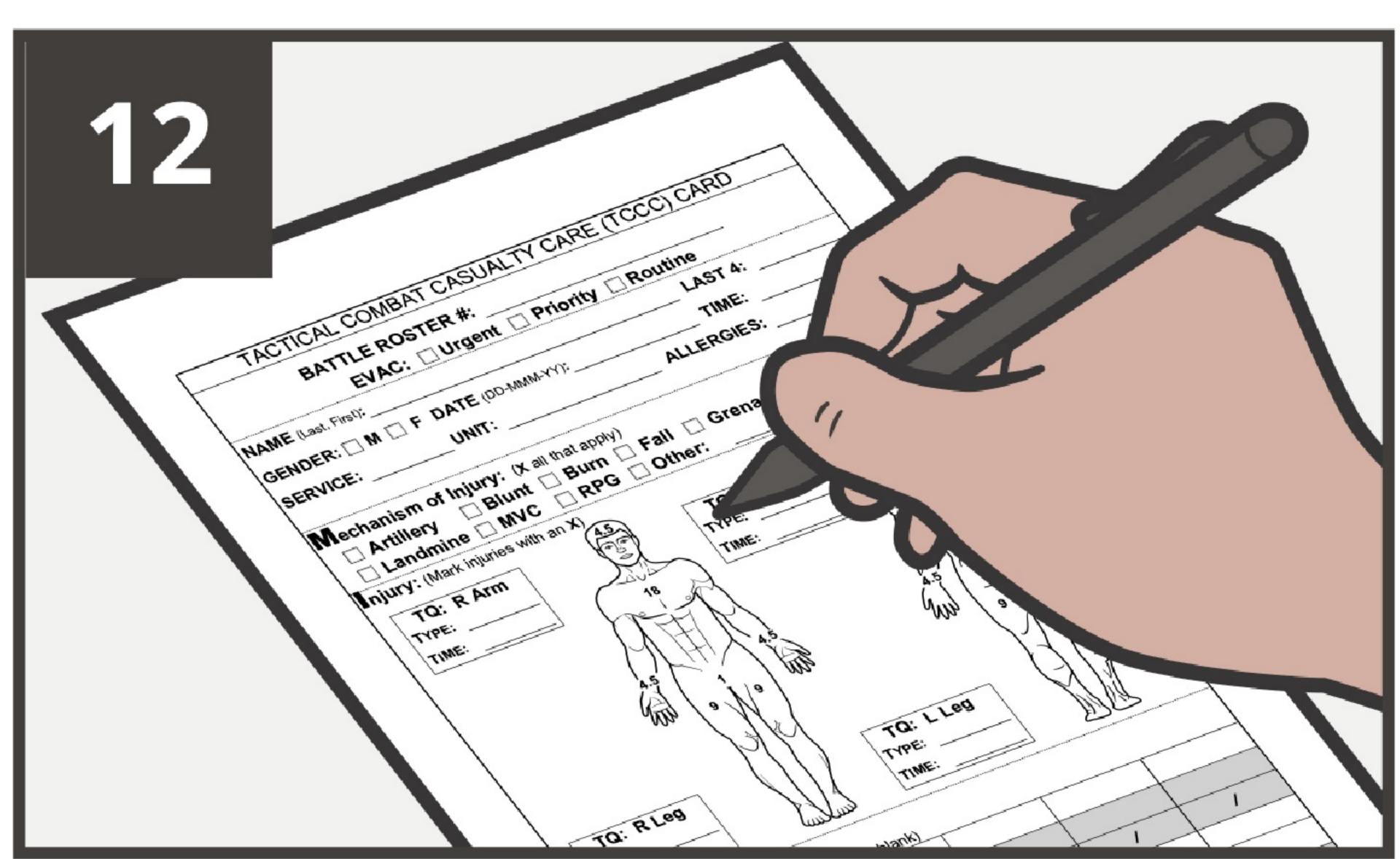

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 і прикріпіть до її до постраждалого.