











СИСТЕМА FAST1®IO ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ В ГРУДНИНУ




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

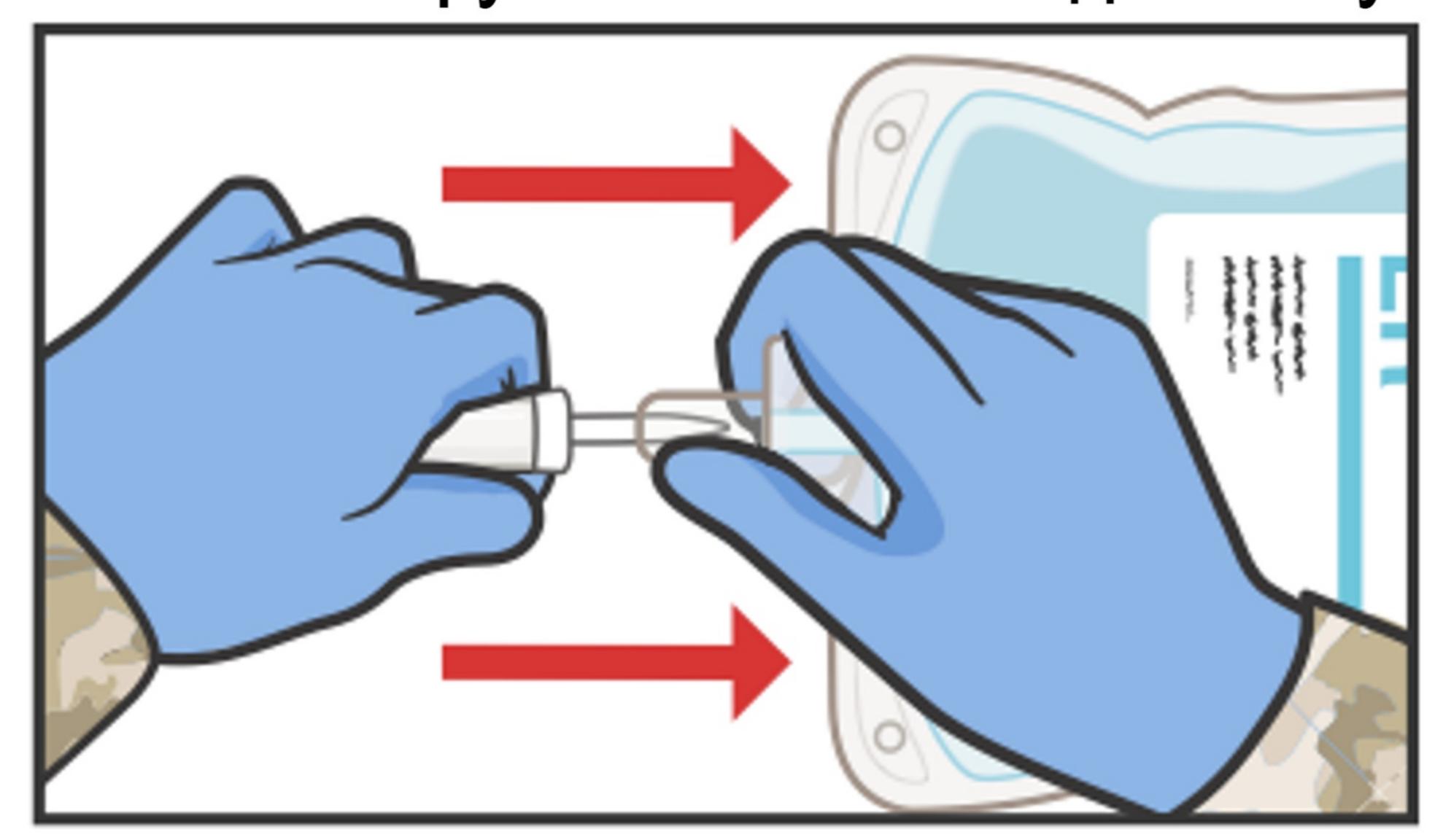

ПД'ЄДНАЙТЕ контейнер/пакет з розчином для внутрішньовенної (ВВ) інфузії до належно підготовленої системи для ВВ інфузій.

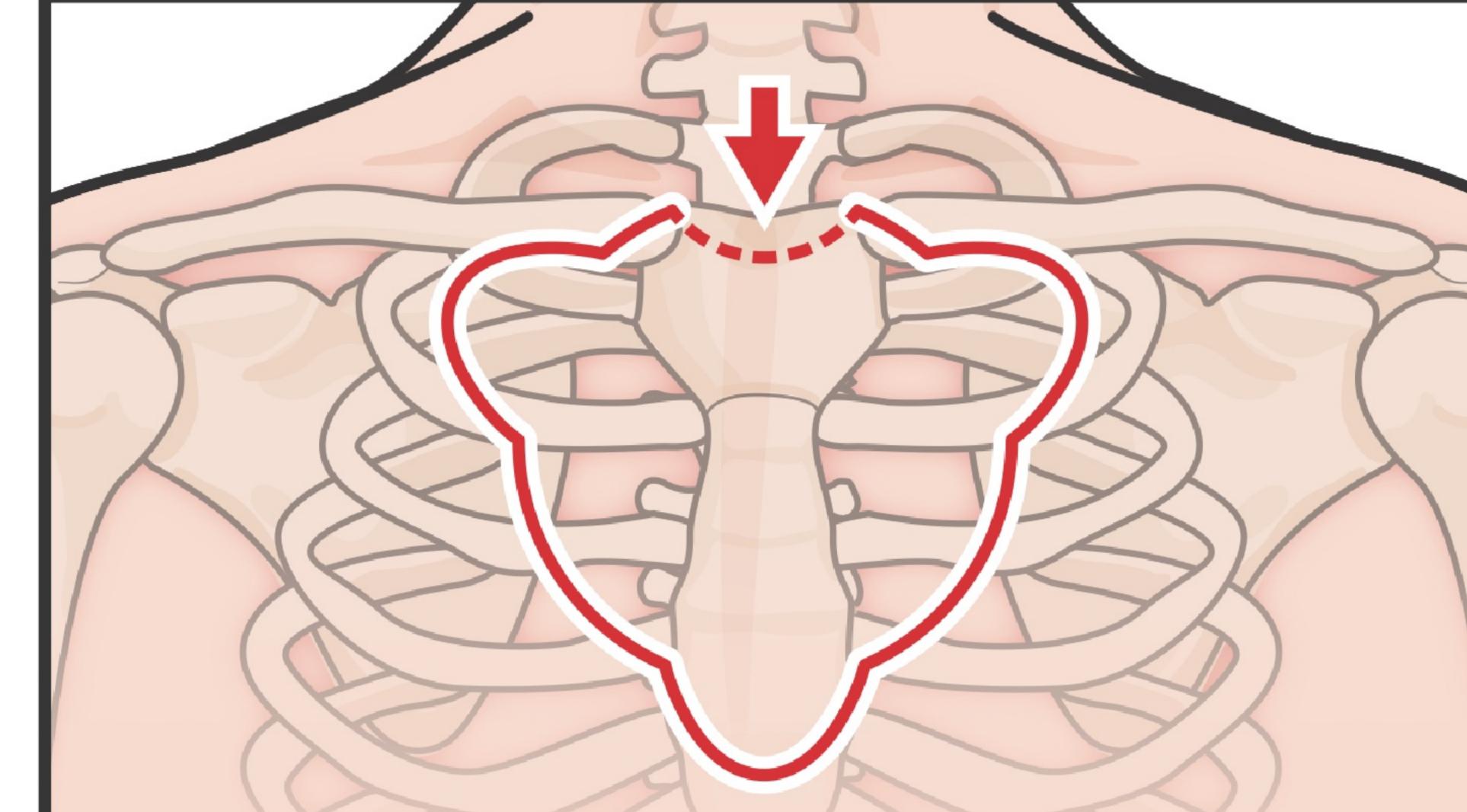


3НАЙДІТЬ орієнтир — яремну вирізку.

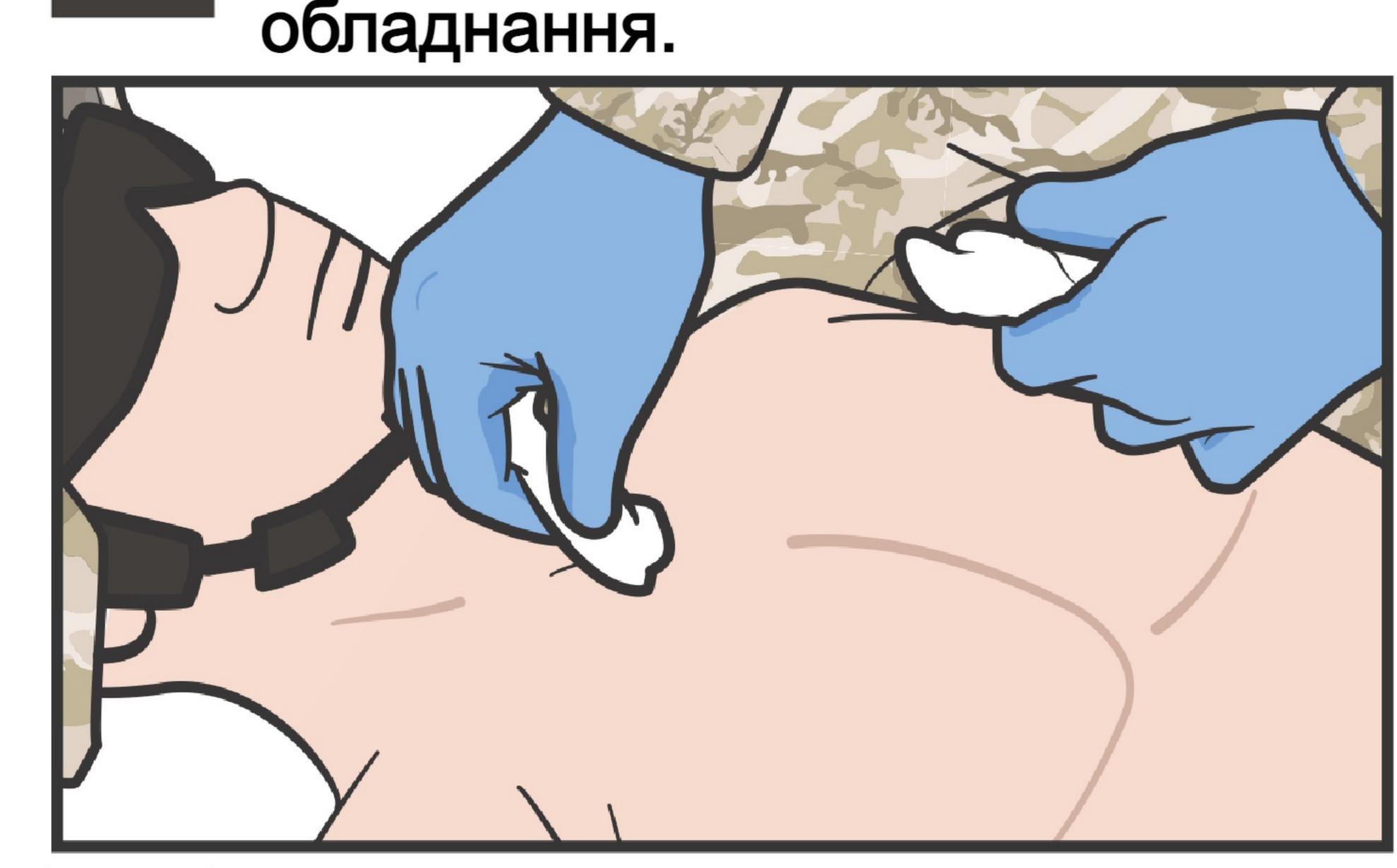


ЗБЕРІТЬ, ПІДГОТУЙТЕ та ПЕРЕВІРТЕ необхідне


ПРОТРІТЬ ділянку серветкою, змоченою спиртом або повідон-йодом.

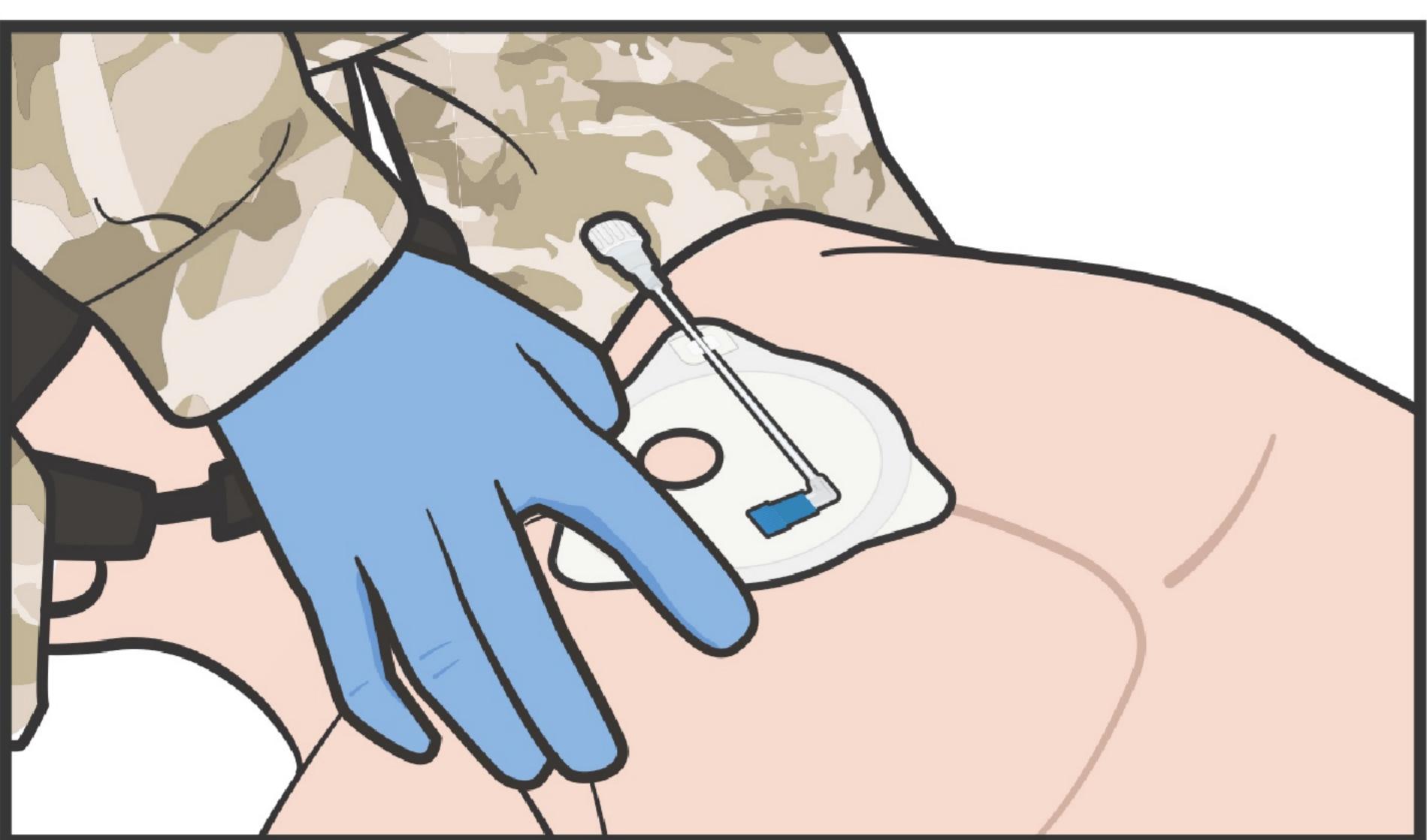


Спочатку ЗНІМІТЬ верхню частину захисного покриття наліпки-орієнтира, прикладіть наліпку-орієнтир до яремної вирізки та зніміть нижню половину захисного покриття наліпки, повністю приклеївши її.

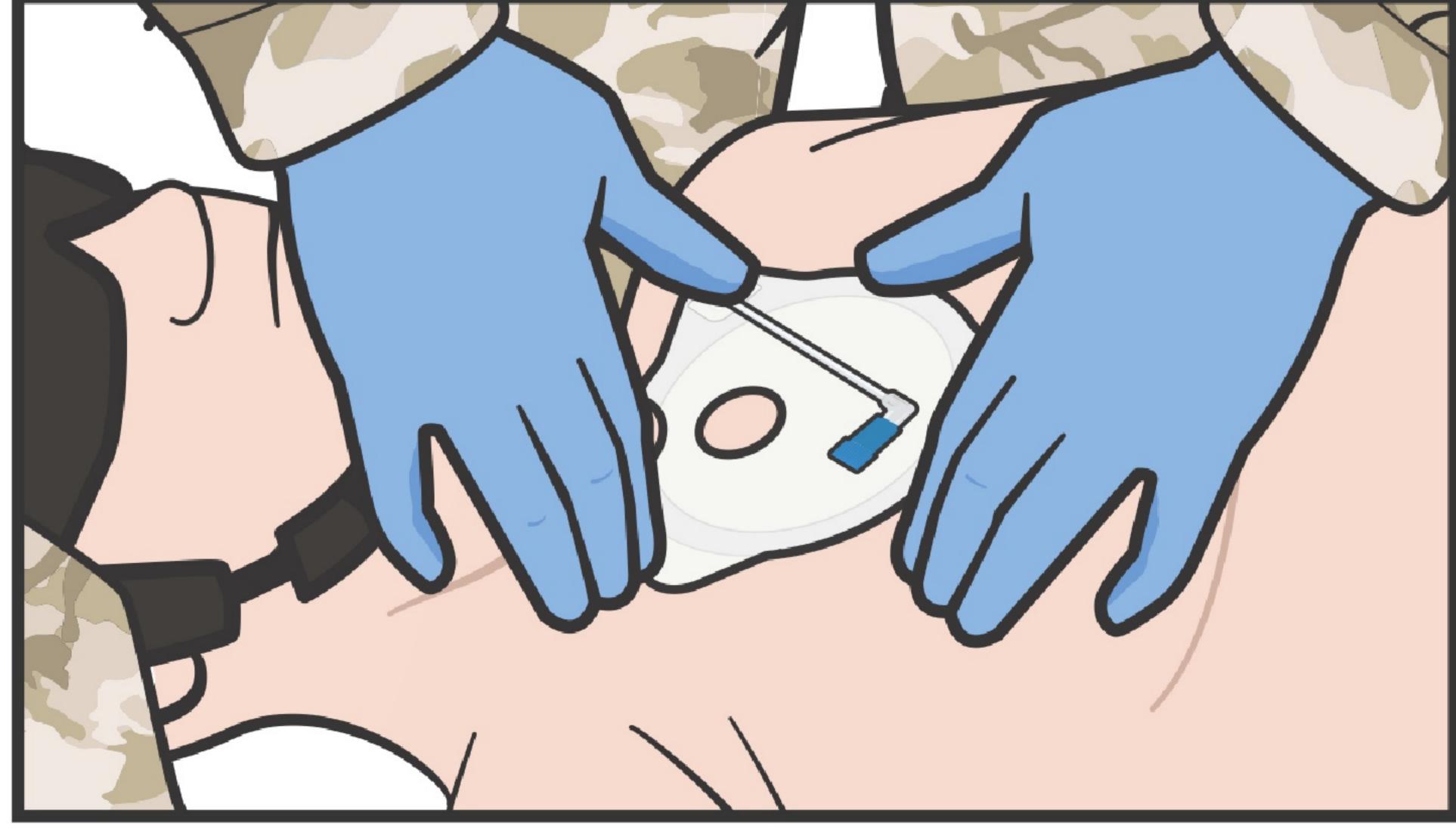


ПЕРЕВІРТЕ розташування наліпки-орієнтира, переконавшись, що цільова зона знаходиться по серединній лінії над рукояткою груднини.

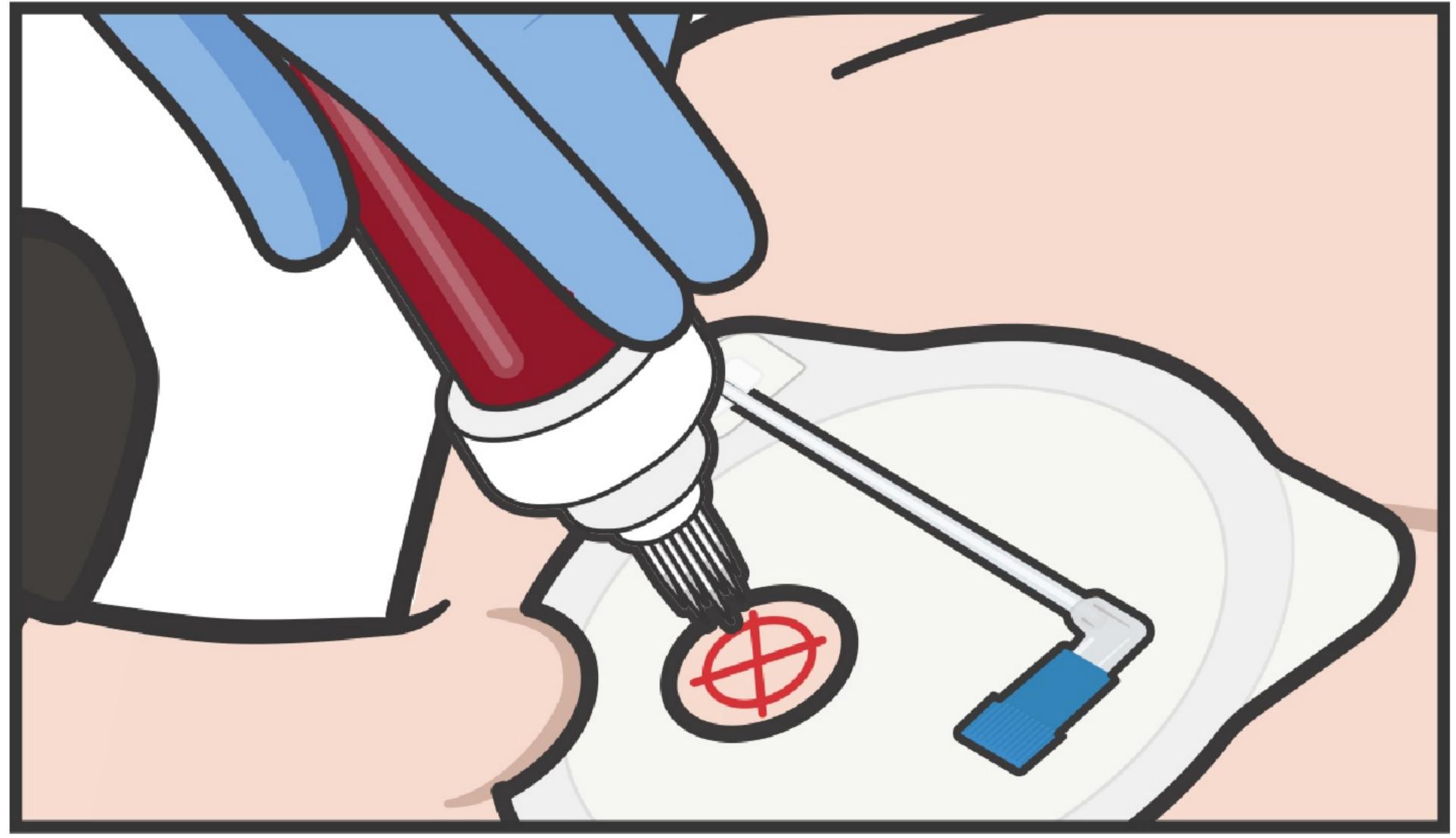


3HIMITЬ ковпачок із пристрою FAST1 і розташуйте пристрій, спрямувавши кінець з голками в цільову зону наліпки-орієнтира.

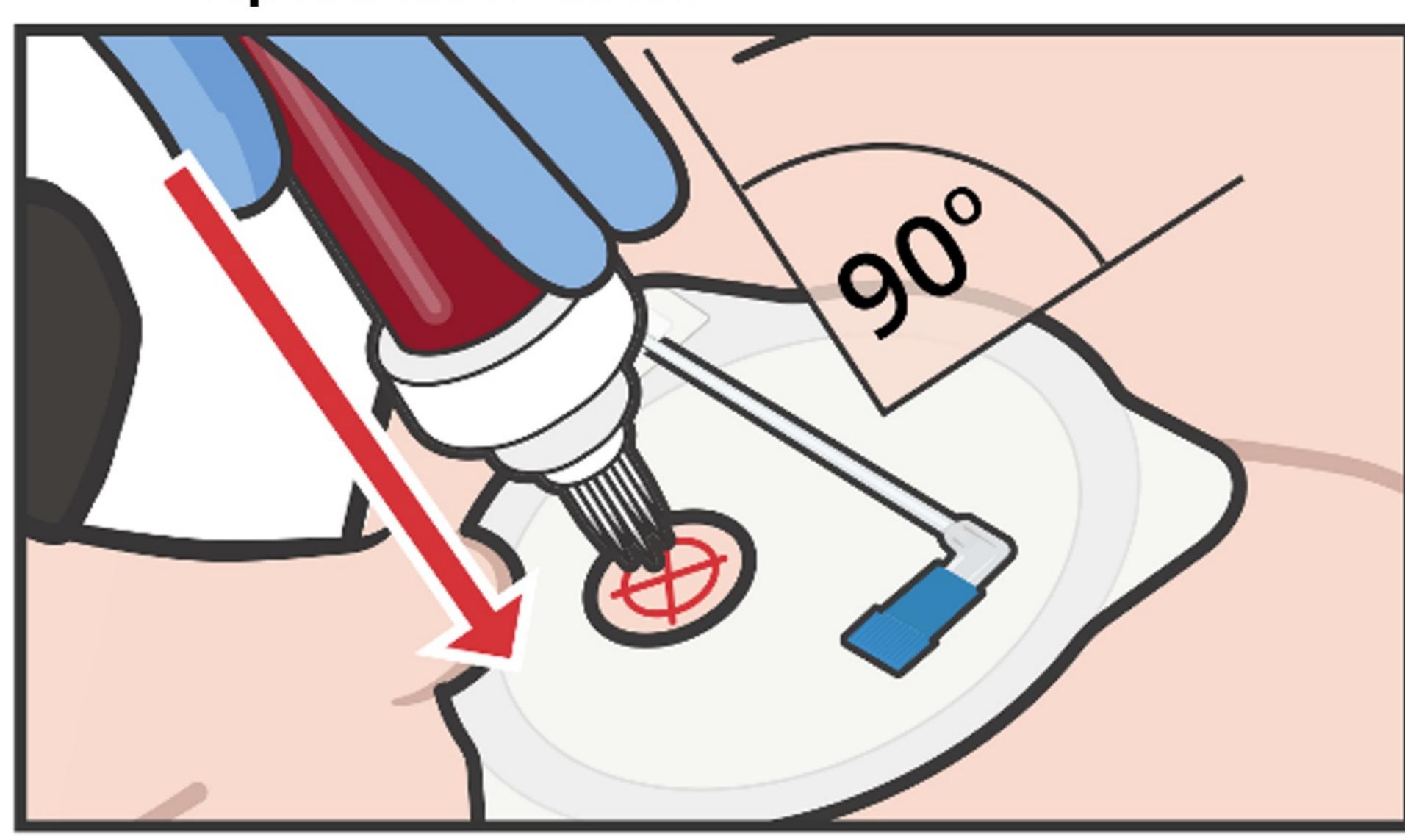


108 ТРИМАЙТЕ пристрій перпендикулярно до поверхні груднини.

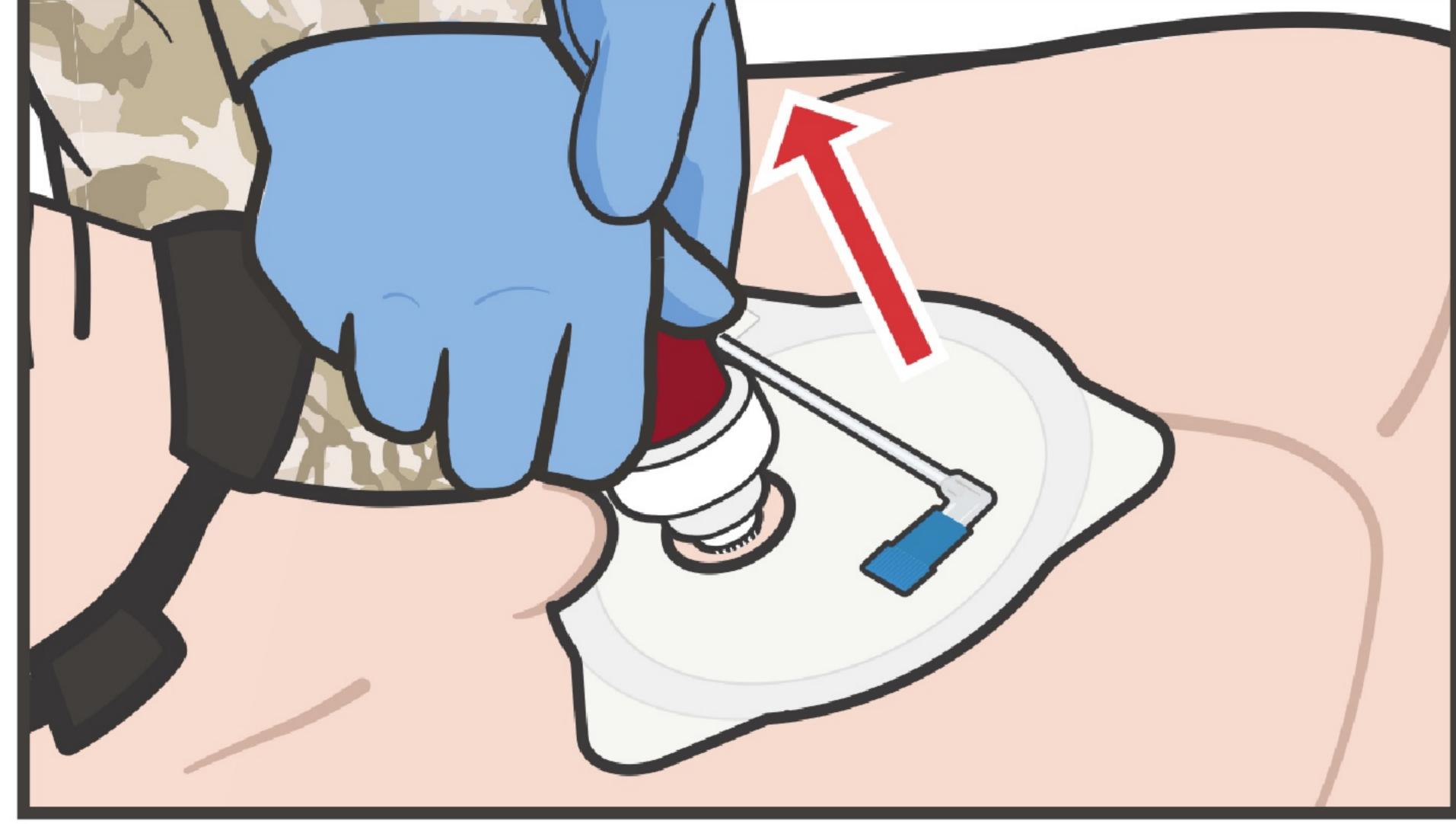

ЗАСТОСУЙТЕ наростаючий тиск вздовж осі введення, доки не відчуєте та не почуєте втрату опору.

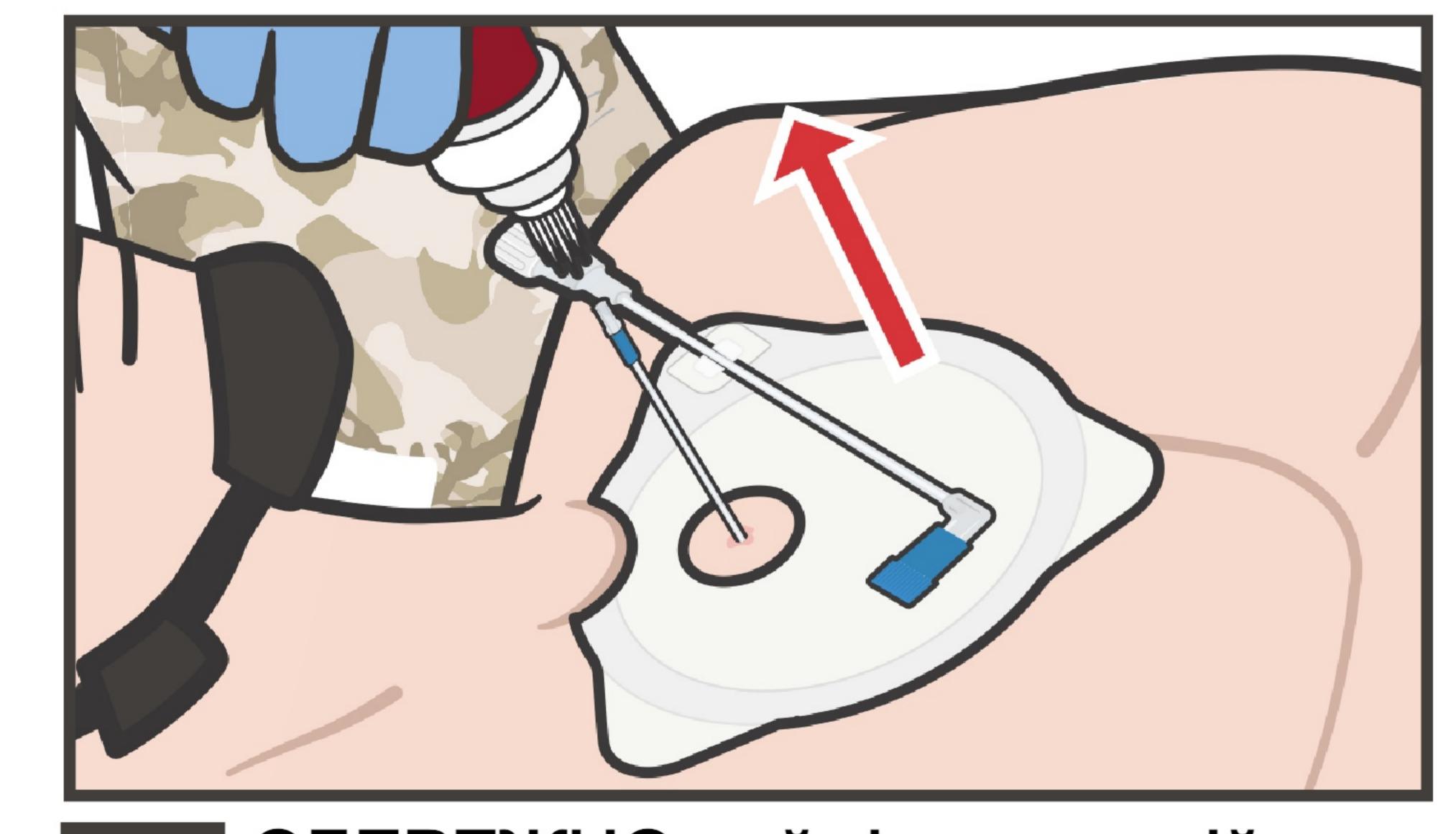

10 ОБЕРЕЖНО вийміть пристрій, потягнувши його прямо назад.

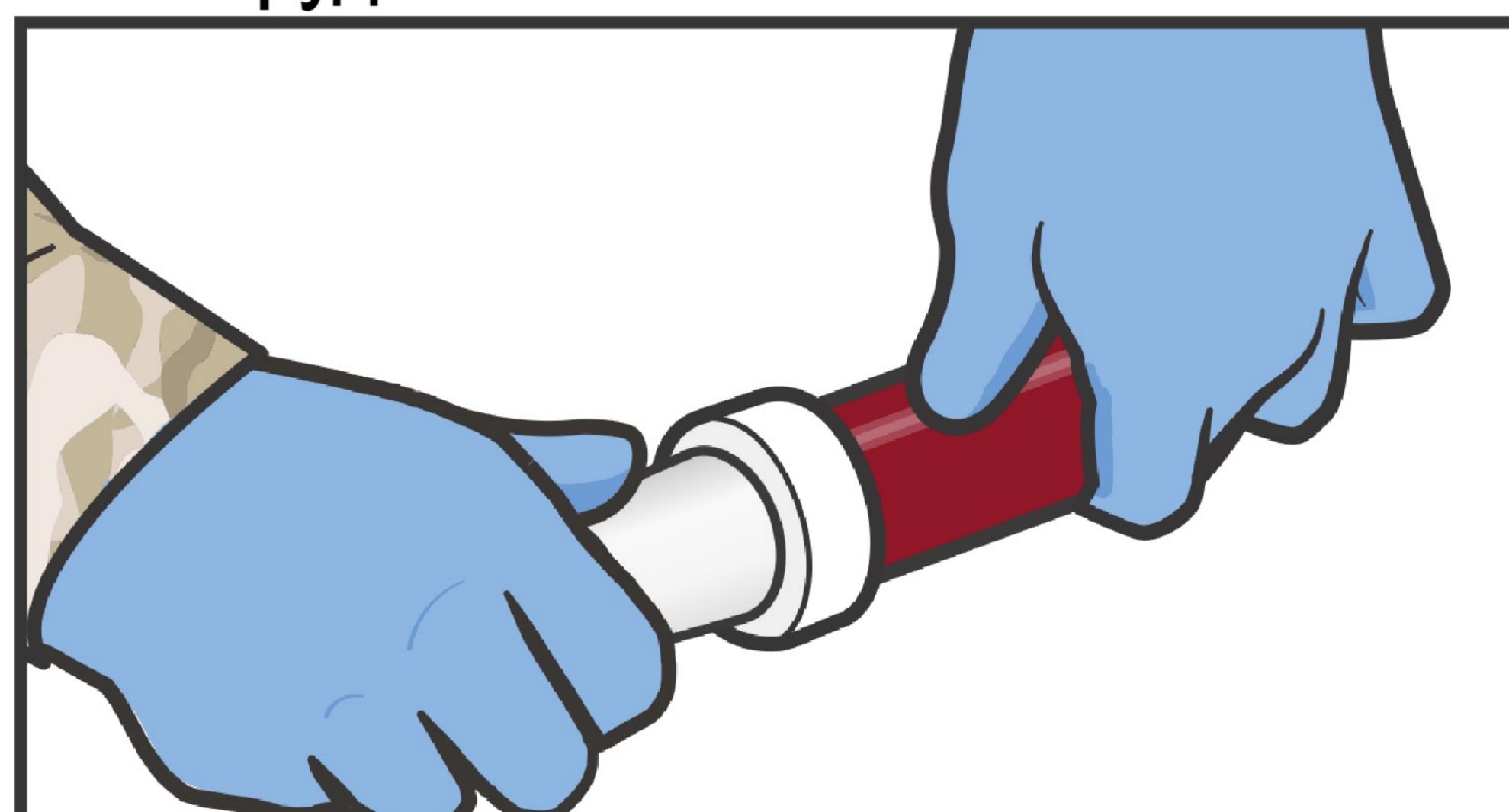

ВСТАВТЕ голки пристрою в пінопластову заглушку, яка додається до набору, одягніть захисний ковпачок для запобігання контакту з голками. Викиньте у контейнер для утилізації гострих предметів.



12 ПІД'ЄДНАЙТЕ подовжувач для інфузії до прямокутного перехідника на наліпці-орієнтирі.