







ПРИМІТКА: Повторно огляньте кожен

турнікет, накладений у фазі Допомоги

накладання, сильніше затягніть (якщо

під вогнем, і, за неефективності його

можливо) та накладіть другий

кровотеча не зупинилась.

турнікет поруч з першим, якщо



Накладання турнікета з воротком і пряжкою двома руками під час надання допомоги в польових умовах.

(Допомога в польових умовах, ТFC)



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.


ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.


ПРИМІТКА: Можливо, вам прийдеться розрізати одяг, щоб належним чином оглянути рану.



3АСТОСУЙТЕ прямий тиск, щоб зупинити кровотечу.

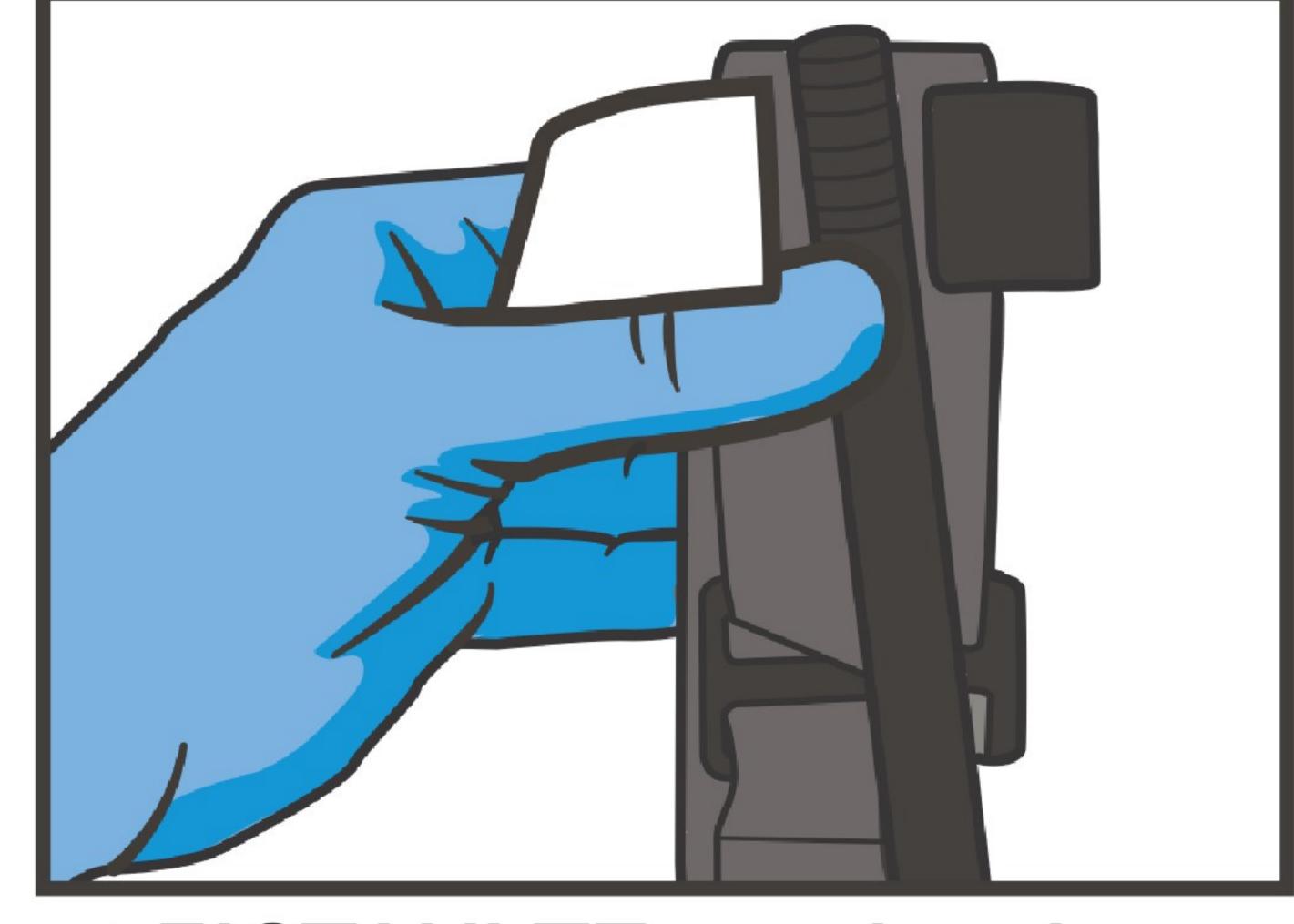


ДІСТАНЬТЕ турнікет із тактичної індивідуальної аптечки пораненого та/або з підсумка.

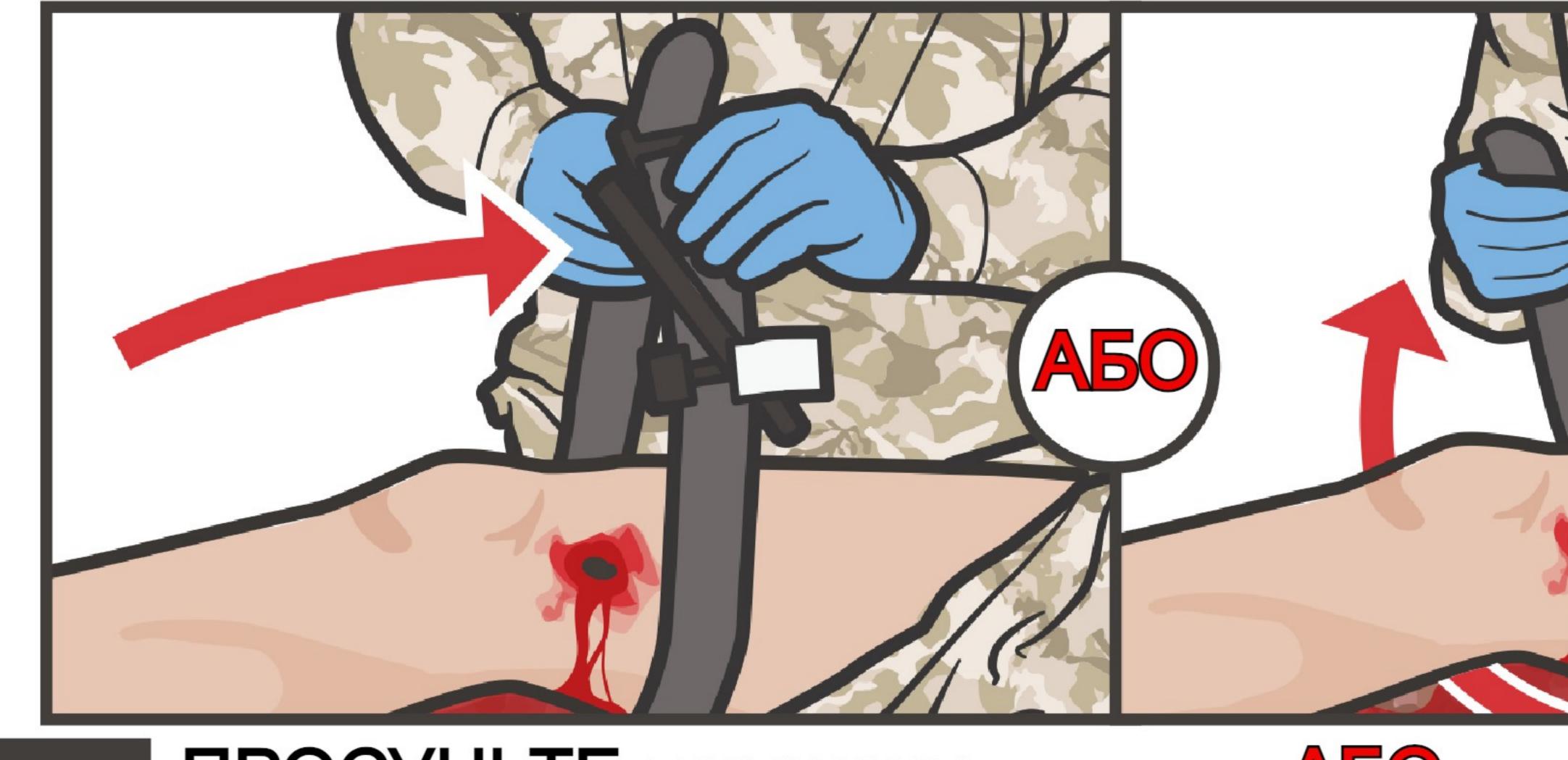


ПРОСУНЬТЕ поранену кінцівку крізь петлю ременя турнікета (турнікет у вигляді замкнутої петлі).

АБО ОБГОРНІТЬ ремінь навколо кінцівки і протягніть крізь отвір пряжки.

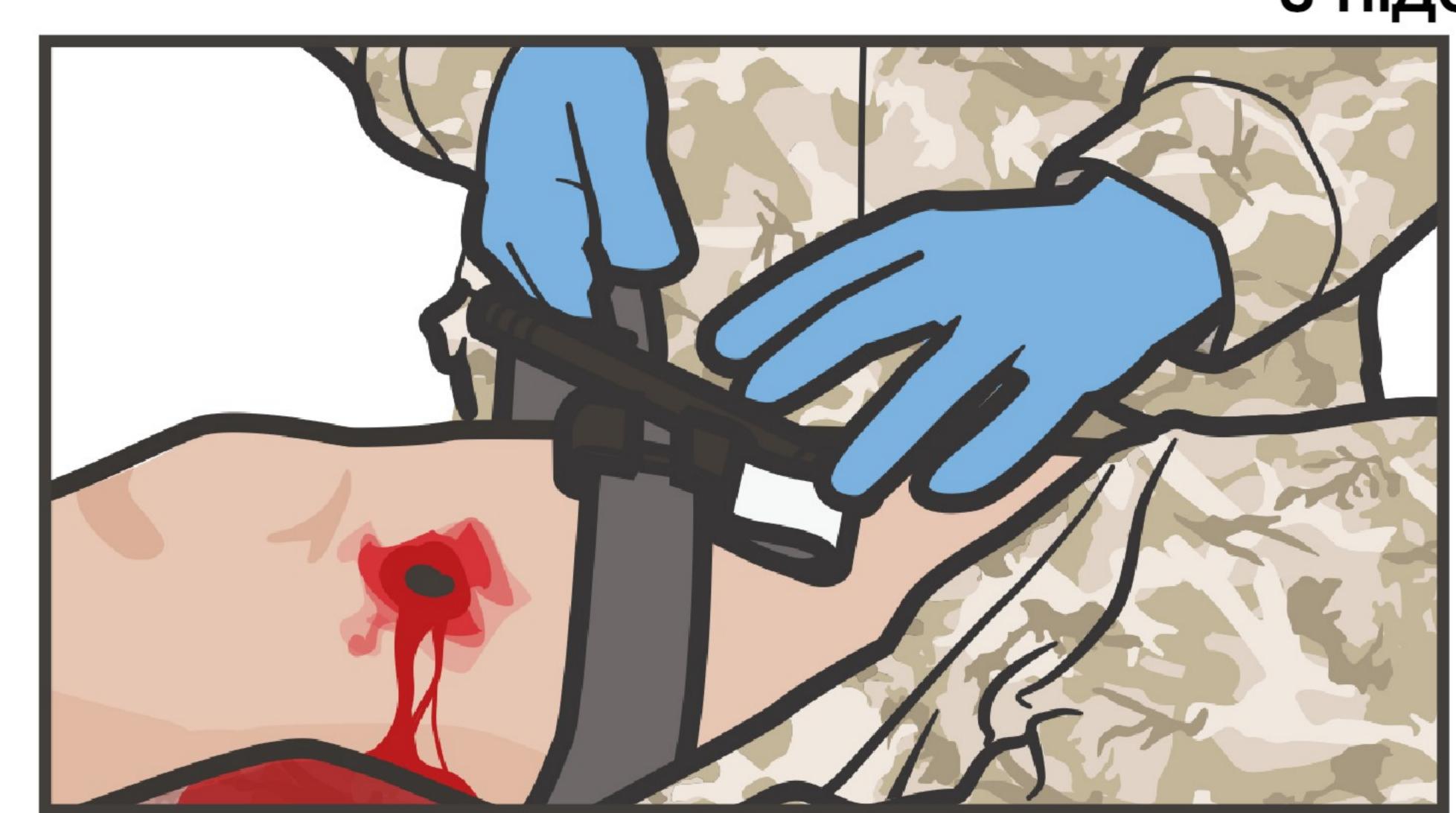

РОЗМІСТІТЬ турнікет на 5 - 8 см вище від рани безпосередньо на шкірі.

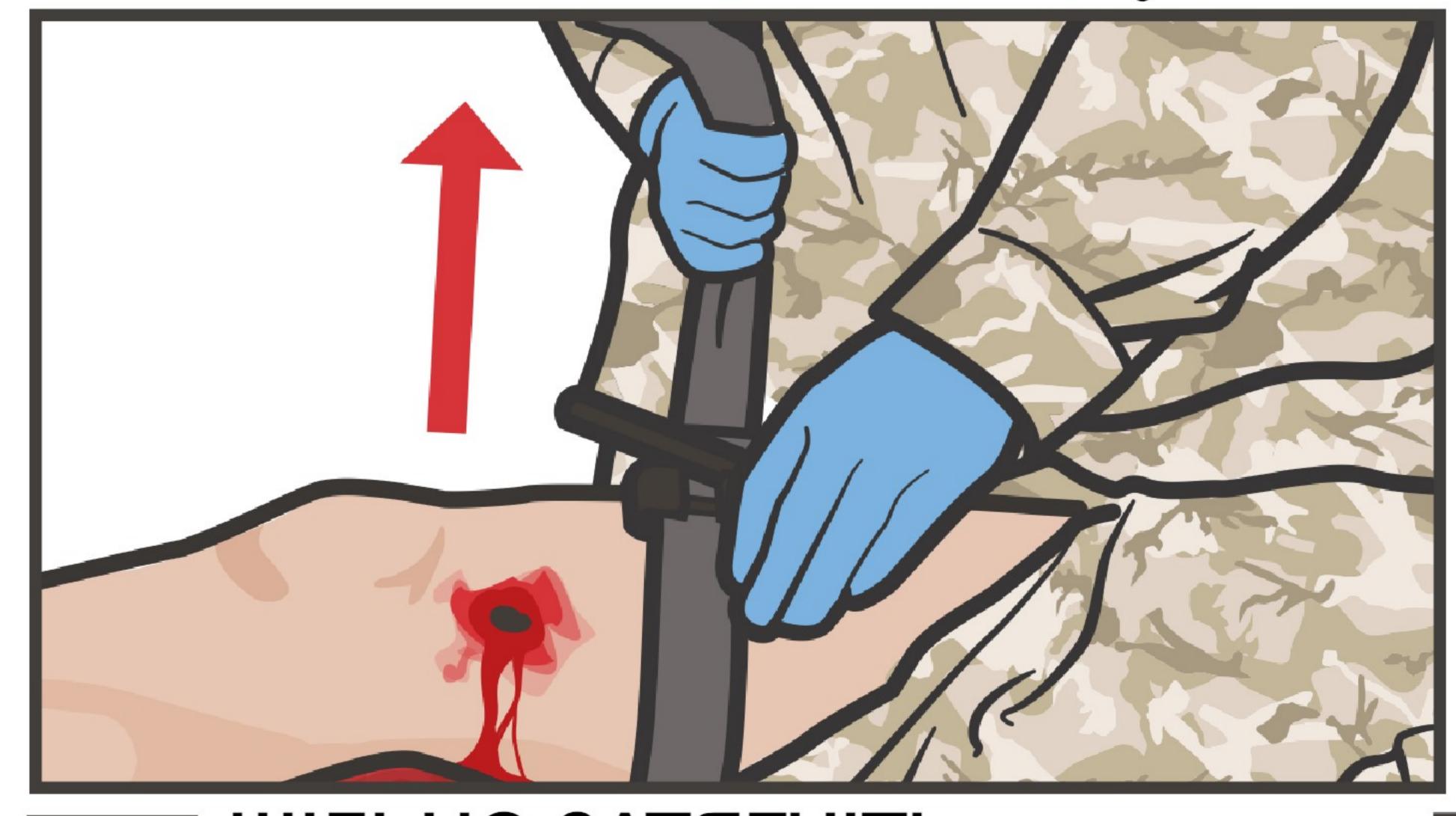


04


ЩІЛЬНО ЗАТЯГНІТЬ самоклеючу стрічку, аби усунути будь-які провисання.



ЗАФІКСУЙТЕ самоклеючу стрічку по всій довжині навколо кінцівки (але не над скобами, які фіксують вороток).

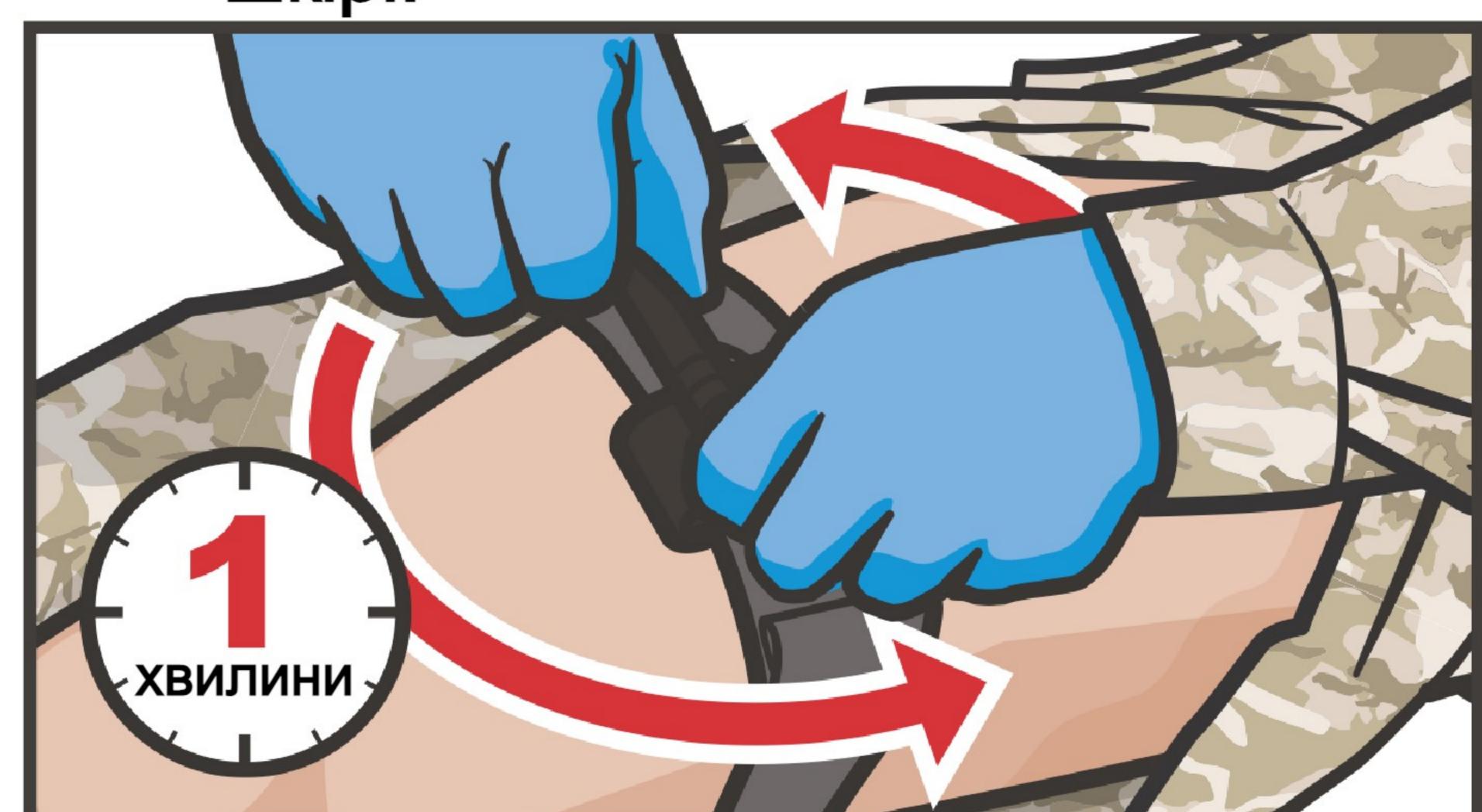

3АКРУЧУЙТЕ вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться (Кроки 1-8 слід виконати менш ніж за 1 хв).

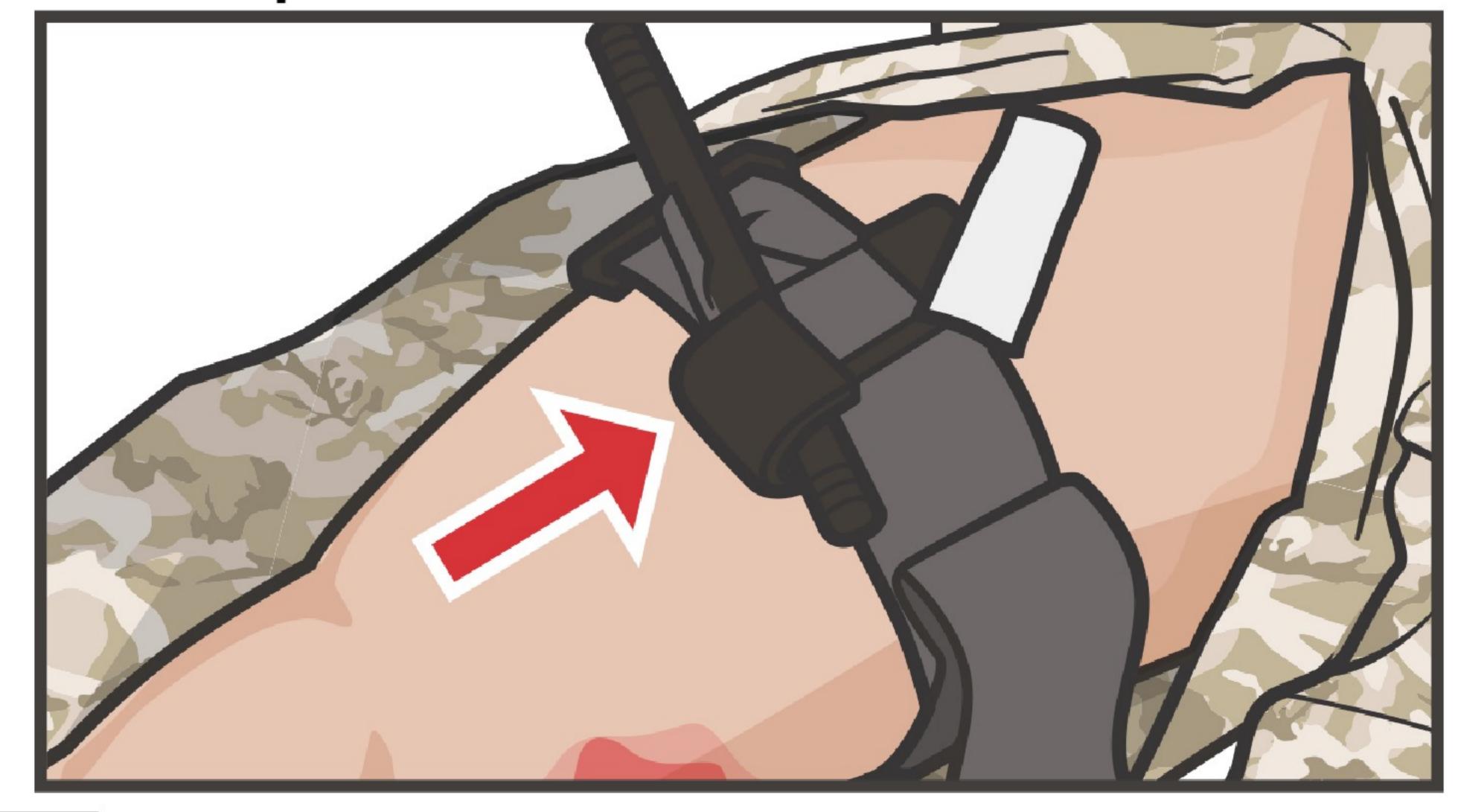


3АКРІПІТЬ вороток за допомогою фіксатора.




ОБГОРНІТЬ самоклеючу стрічку навколо воротка та між фіксуючими скобами.


ПРИМІТКА ДО 9 КРОКУ: Якщо кровотеча не зупинилась та/або наявний дистальний пульс, продовжуйте закручувати вороток чи накладіть другий турнікет вище місця накладання першого.

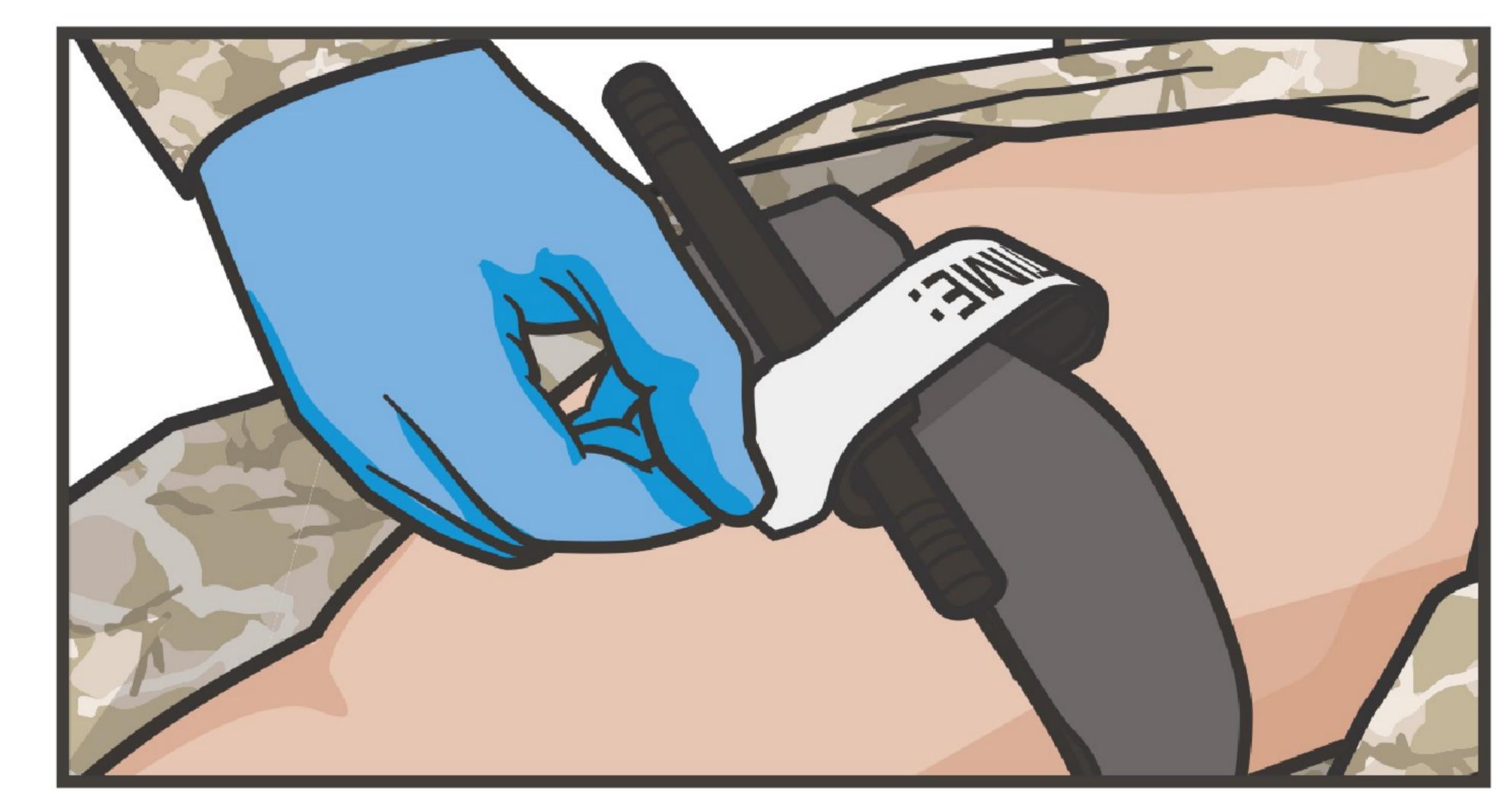

11 ЗАКРІПІТЬ усе фіксуючою стрічкою.

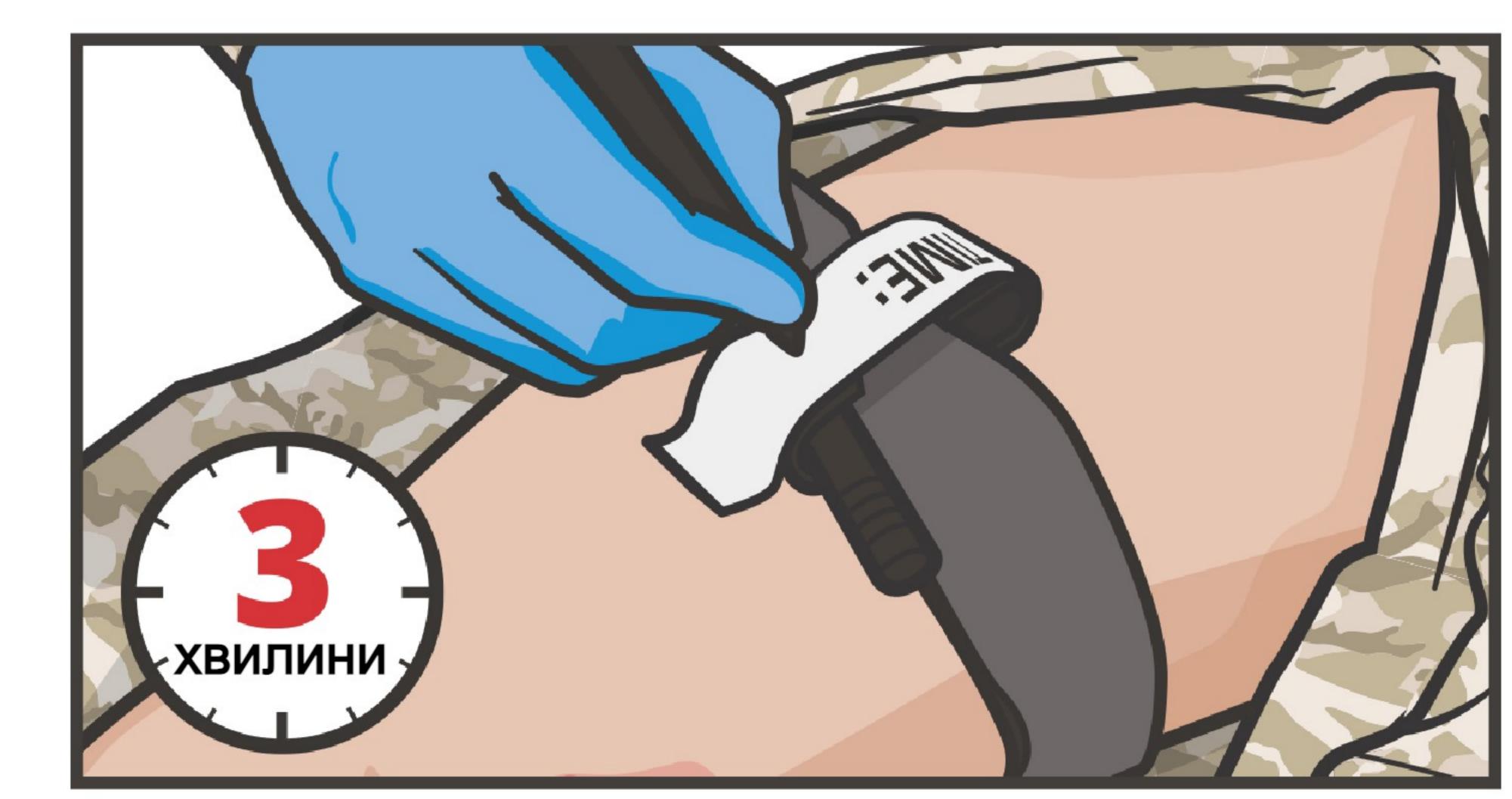

3АПИШІТЬ час накладання турнікета на білій стрічці (чи лобі пораненого), завершивши виконання всього процесу за 3 хвилини.

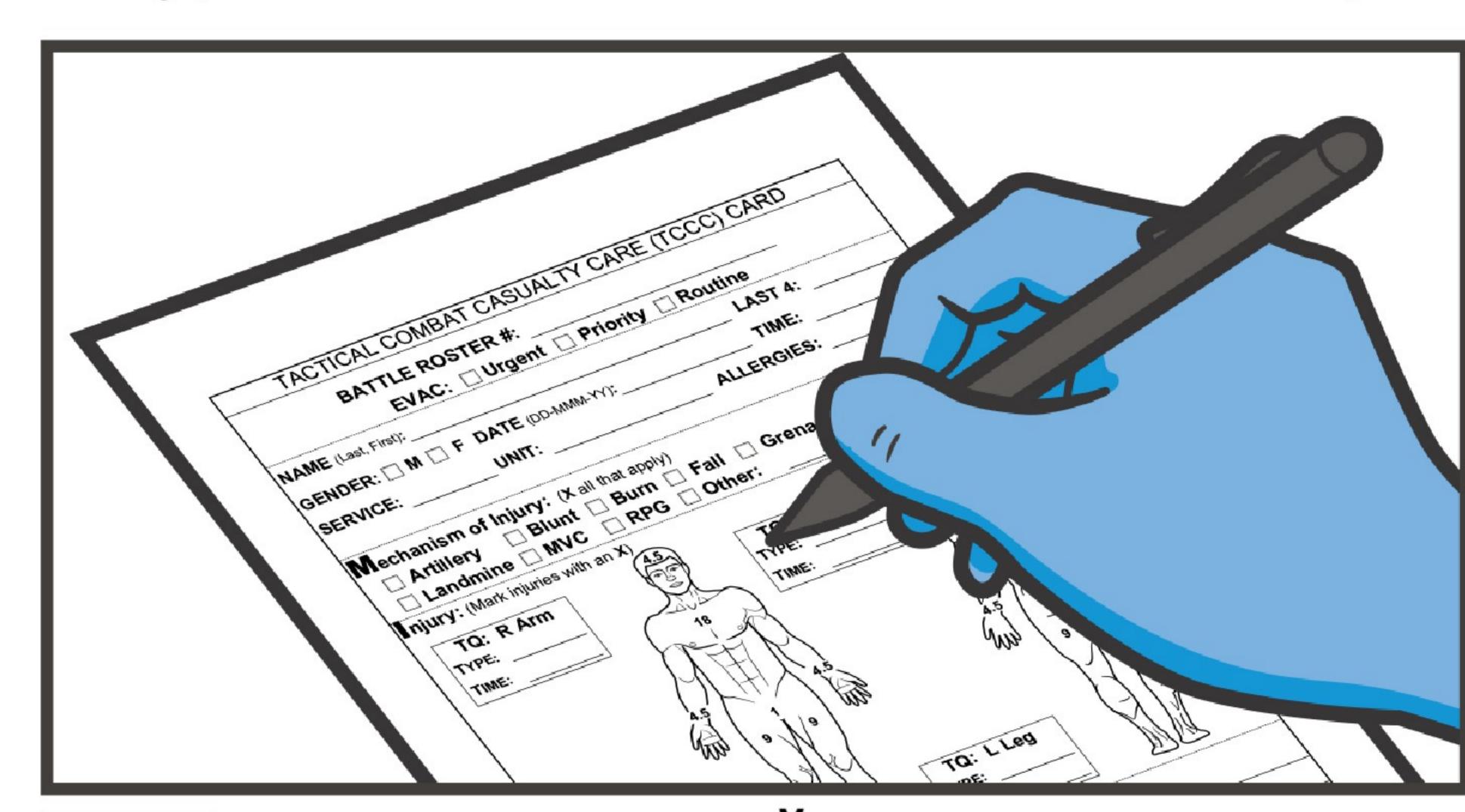

АДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 і прикріпіть до її до постраждалого.