

# iTClamp - гемостатичного затискача

**ПРИМІТКА.** Кровоспинний захим може використовуватися в поєднанні з іншими засобами контролю кровотечі.

1. Упаковка ран - Перед застосуванням пристрою можна запакувати рану.
2. Кровоспинні засоби - Апарат можна використовувати на ранах, оброблених кровоспинними засобами.
3. Остаточна перев'язка рани - За бажанням поверх пристрою можна накласти додаткові компресійні пов'язки та обгортку. Це захистить пристрій і може створити додатковий тиск на рану.




**Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.**




**УВАГА - НЕ використовуйте біля очей.**

**01** ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.


**02** Якщо можливо, застосовуйте прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі.

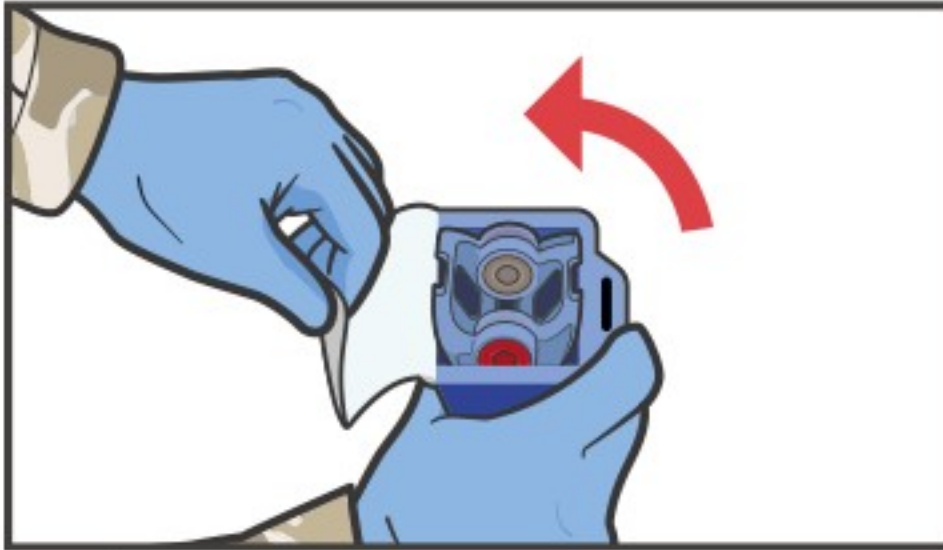


**03** Обережно відкрийте стерильну упаковку, щоб уникнути забруднення.

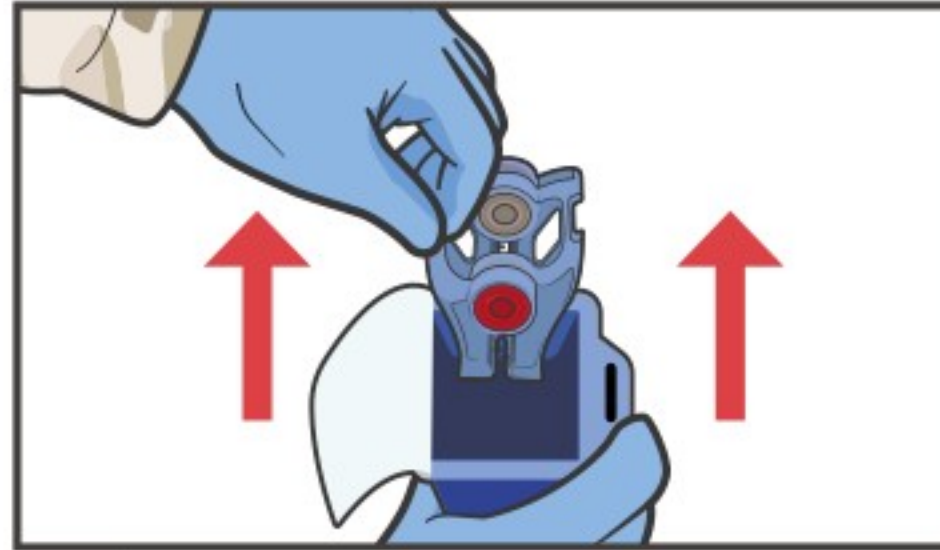


**04** Зніміть пристрій, піднявши прямо вгору, уникаючи забруднення.

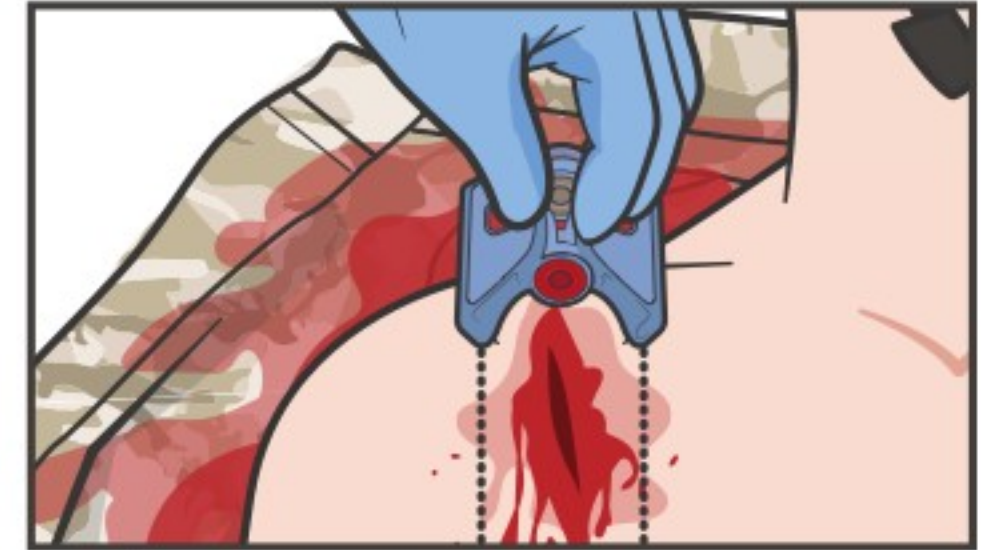

**05** Вирівняйте голки пристрою для закриття паралельно краям рани.

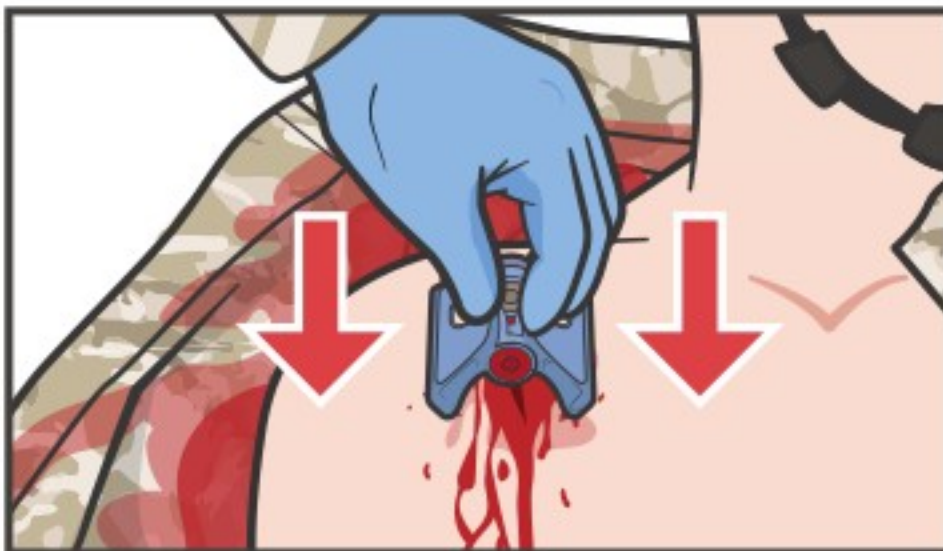


**06** Розмістіть голки на відстані 1-2 см від краю рани з обох боків.

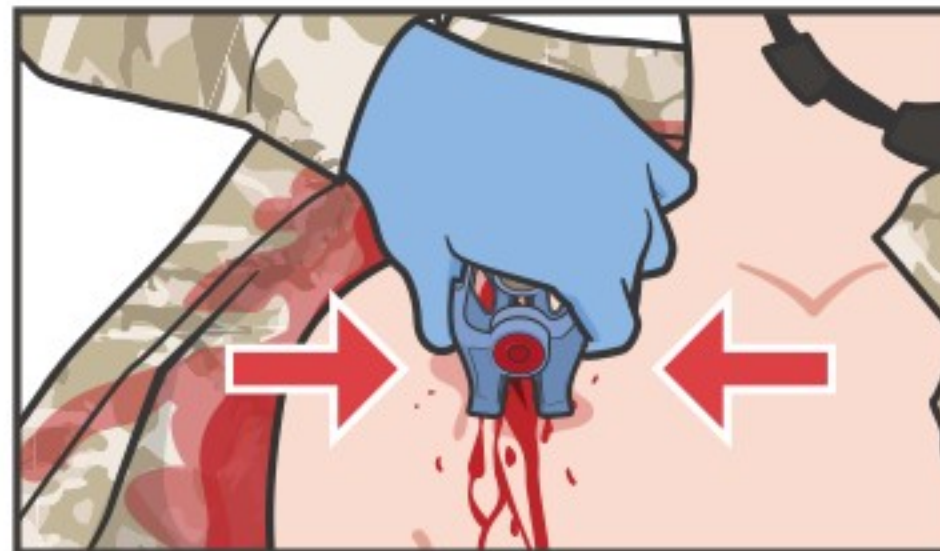


**07** Обережно вставте голки та закрийте пристрій, стиснувши важелі разом.


**ПРИМІТКА.** Пломба пристрою зруйнується під час застосування тиску.

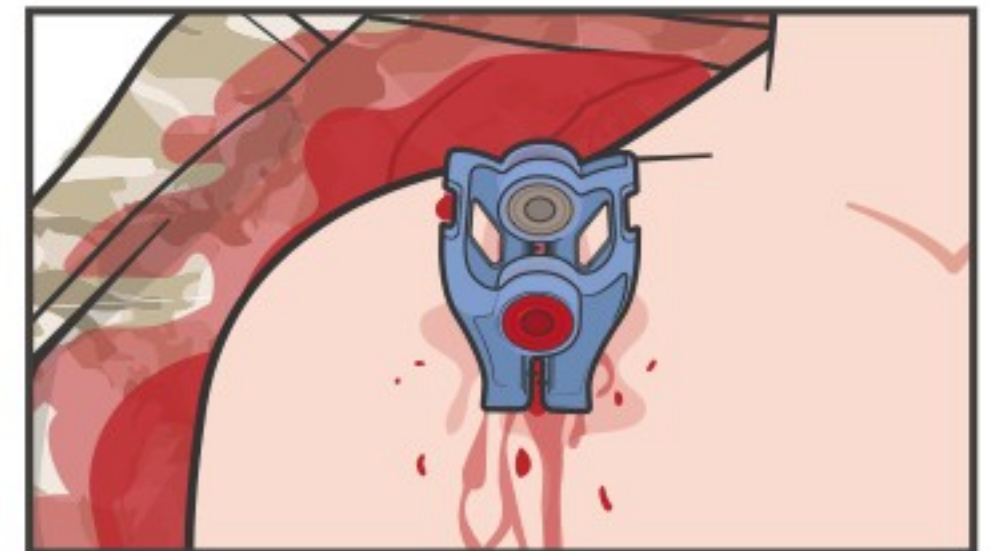

**08** Після закриття пристрій автоматично фіксується на місці. Компресійні планки забезпечують щільне ущільнення.

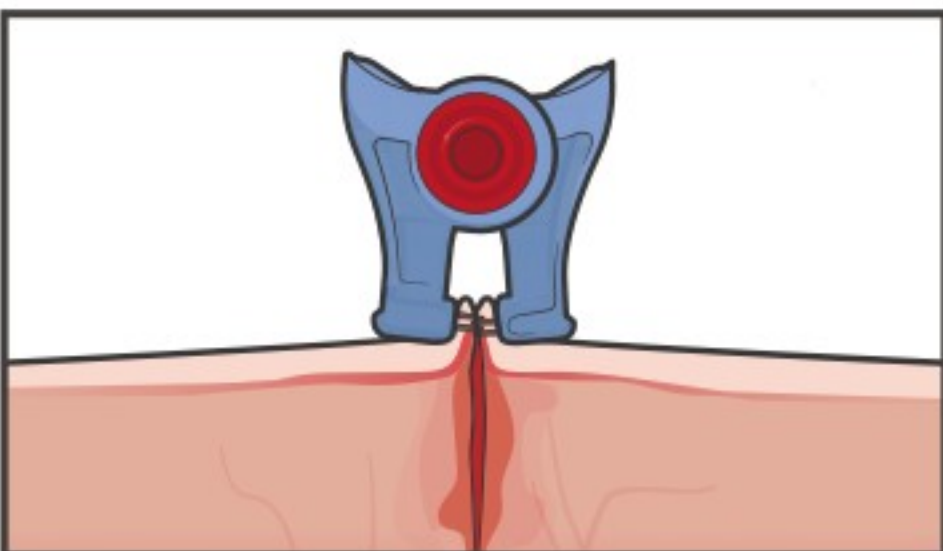

**09** Переконайтеся, що рана закрита, немає відкритих ділянок і кровотеча зупинилася.

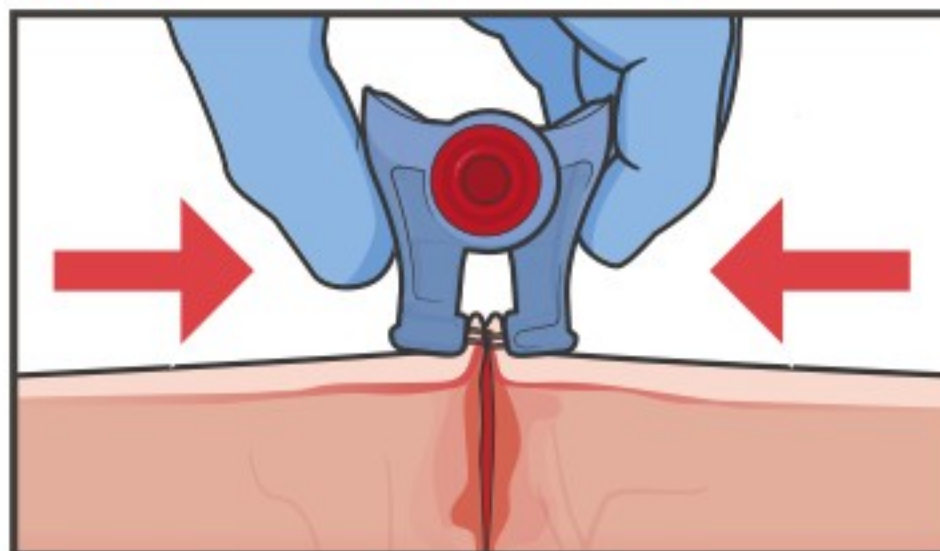

**10** Якщо кровотеча продовжується, закрийте пристрій щільніше. Також можна видалити та змінити положення пристрою, використовувати більше ніж один пристрій або обробити область кровоспинним засобом. Також рекомендується XSTAT.



**11** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.

**Дивіться наступну частину - Як видалити пристрій**