

ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ НАДГЛОТКОВОГО ТИПУ



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

EXTRAGLOTTIC AIRWAY

ВАЖЛИВО: Існують незначні відмінності між багатьма дихальними пристроями. Переконайтеся, що ви використовуєте правильний тип.



01 ПЕРЕВІРТЕ порожнину рота та дихальні шляхи на наявність обструкції.



02 ПОЗИЦІЯ. Голова пораненого нахилена, ніби приношується.


Альтернатива — нейтральне положення, підкладка під плечима з підголовником.




03 Відкрити рот / дихальні шляхи.



04 Гіпервентилюйте пораненого протягом щонайменше 30 секунд, використовуючи маску та кисень, якщо є.

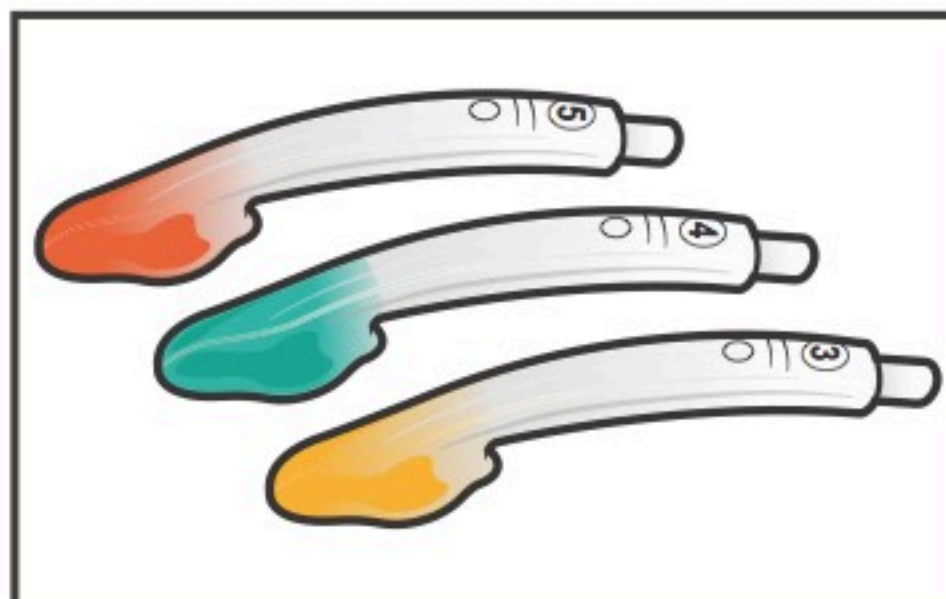


05 ОБЕРІТЬ відповідний пристрій залежно від ваги пораненого. Часто розмір 4 підходить для більшості військових.

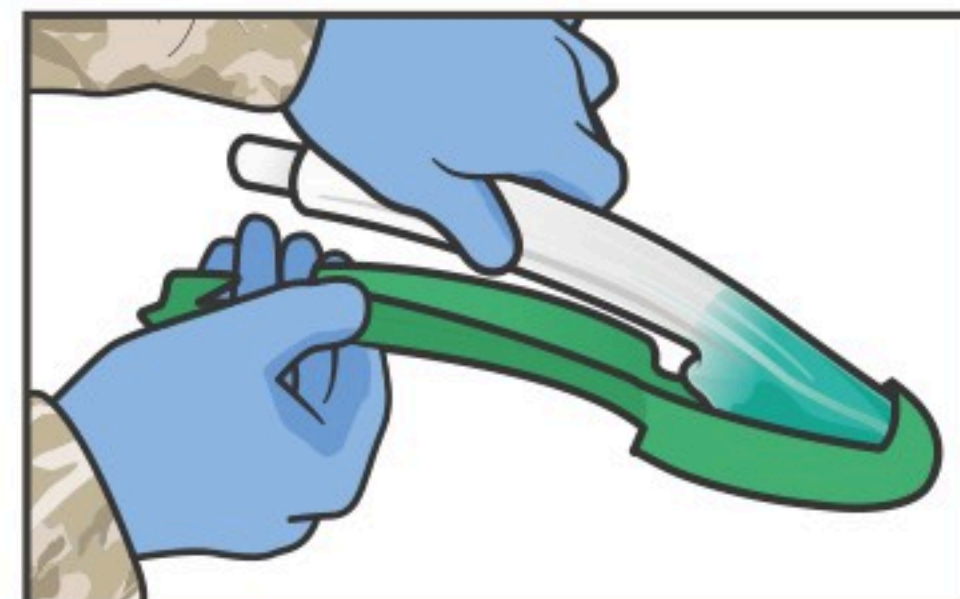


06 ПЕРЕВІРТЕ та випробуйте обладнання.



07 ЗМАЩІТЬ дистальний кінець (нижню частину) стерильним мастильним гелем на водній основі.

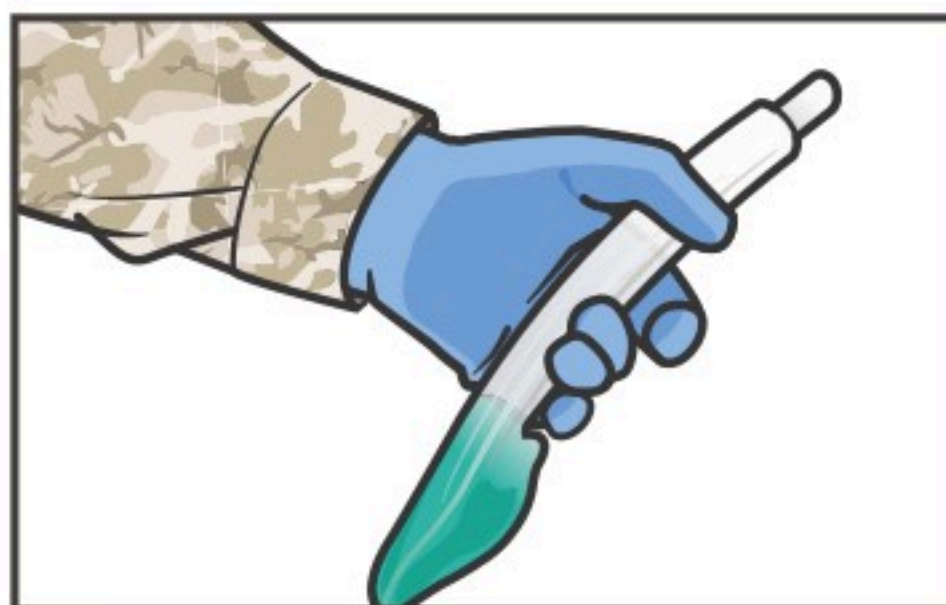

08 МІЦНО ТРИМАЙТЕ трубку дихальних шляхів основною рукою. Дотримуйтесь інтегрованого блокування прикусу.

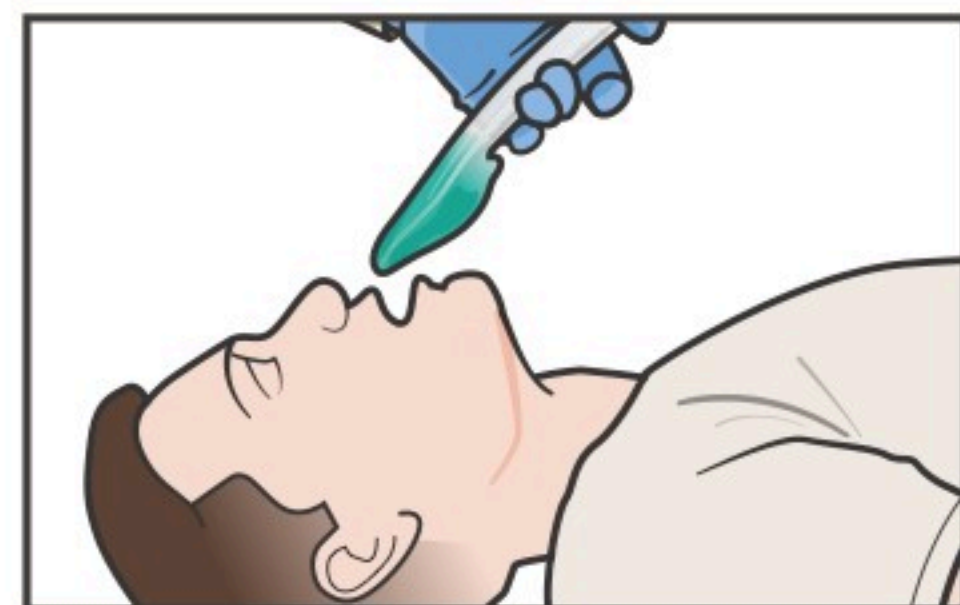

09 РОЗТАШУЙТЕ повітропровідну трубку так, щоб манжета була спрямована до підборіддя пораненого.


продовження на наступній сторінці...

ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ НАДГЛОТКОВОГО ТИПУ


Продовження зі сторінки 1

EXTRAGLOTTIC AIRWAY


ВАЖЛИВО: Існують незначні відмінності між багатьма дихальними пристроями. Переконайтеся, що ви використовуєте правильний тип.

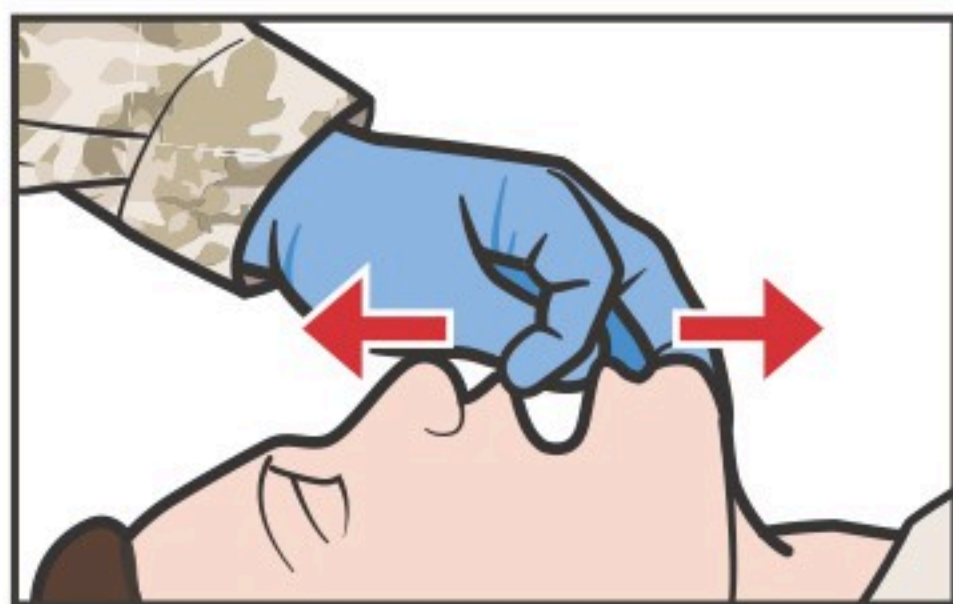

10 ВІДКРИТИ рот за допомогою техніки ножиць.

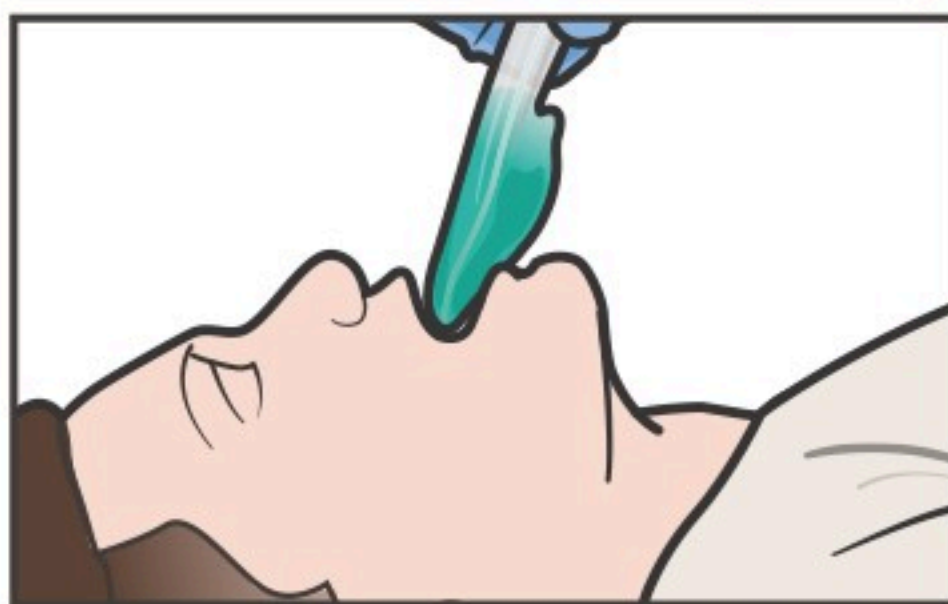

11 Обережно введіть м'який наконечник направляючої в рот пораненого, направляючи його в бік твердого піднебіння.

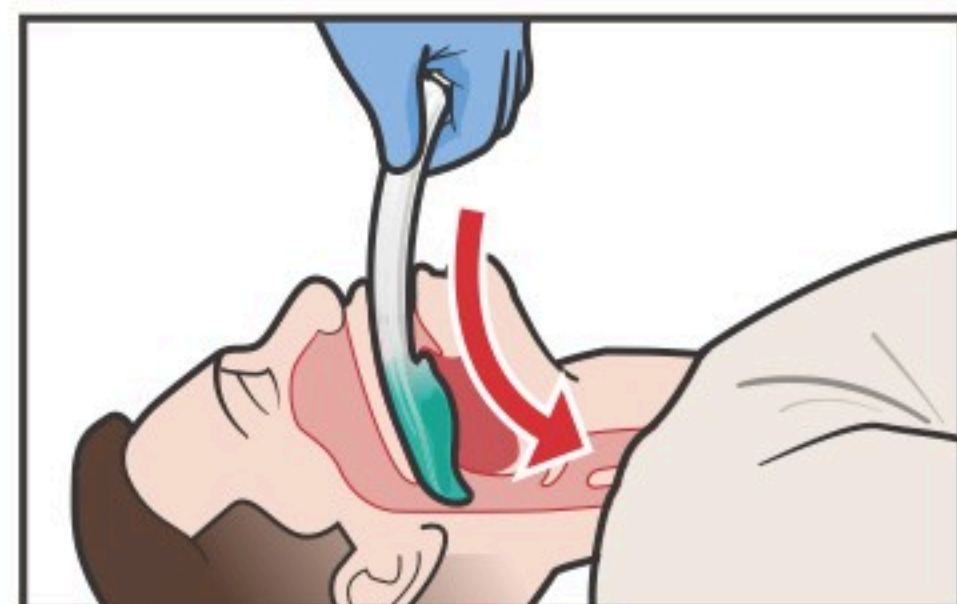


12 Безперервно й обережно КОВЗАЙТЕ пристроєм вниз і назад по твердому піднебінню, поки не відчуєте остаточний опір.

КРОК 12. Якщо під час введення відчувається початковий опір, витягніть трубку та переконайтеся, що дихальні шляхи відкриті.

КРОК 12 УВАГА. НЕ прикладайте надмірних зусиль під час введення.

ПРИМІТКА. Наконечник розташований у верхньому отворі стравоходу, а манжета прилягає до каркаса гортані.

КРОК 12. Пристрій встановлено правильно, коли передні зуби прилягають до горизонтальної лінії прикусного блоку.

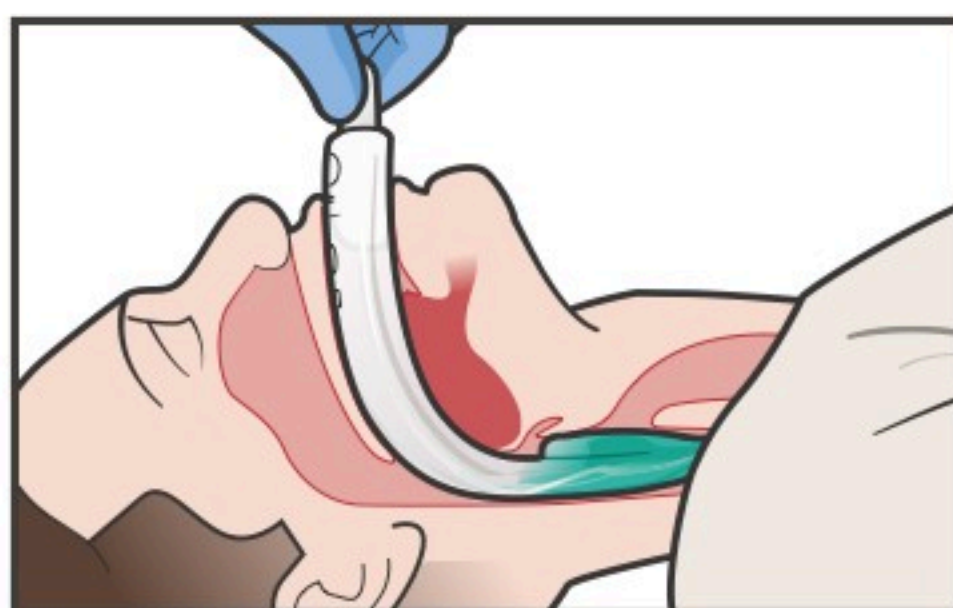


13 Щоб уникнути зісковзування пристрою, НЕОБХІДНО ТРИМАТИ його до закріплення.



14 Приєднайте вентиляційний мішок (мішок Амбу) до дихального апарату та розпочніть вентиляцію пораненого.



15 ОЦІНИТИ вентиляцію.
1. - вислухати звуки грудної клітини (стетоскоп).
2. - стежити за підняттям і опусканням грудної клітки.
3. - прослухати живіт (стетоскопом).

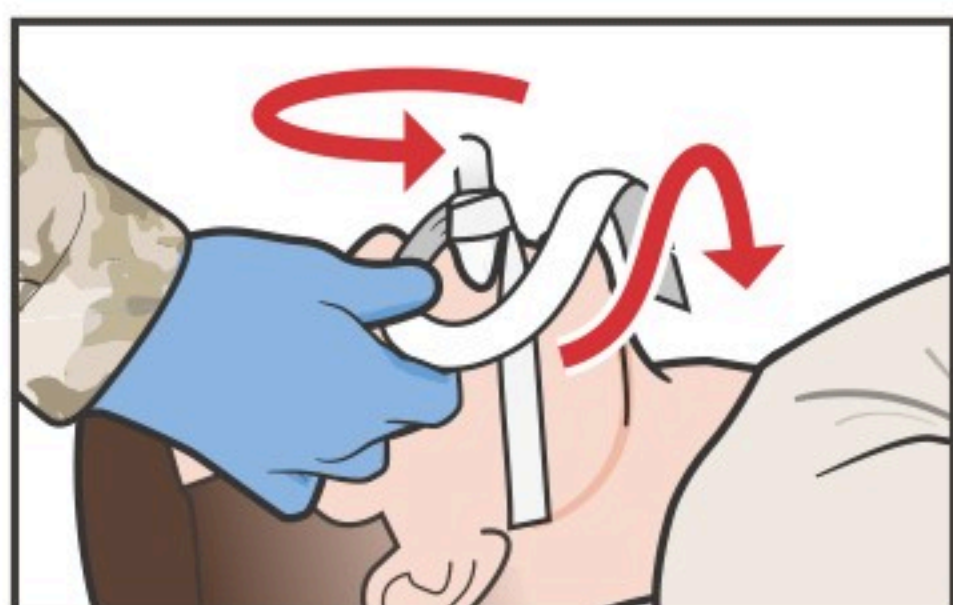

16 ЗАКРІПНІТЬ пристрій за допомогою стрічки від верхньої щелепи до щелепи.



17 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.