



# ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ - EldonCard®


## Продовження зі сторінки 1

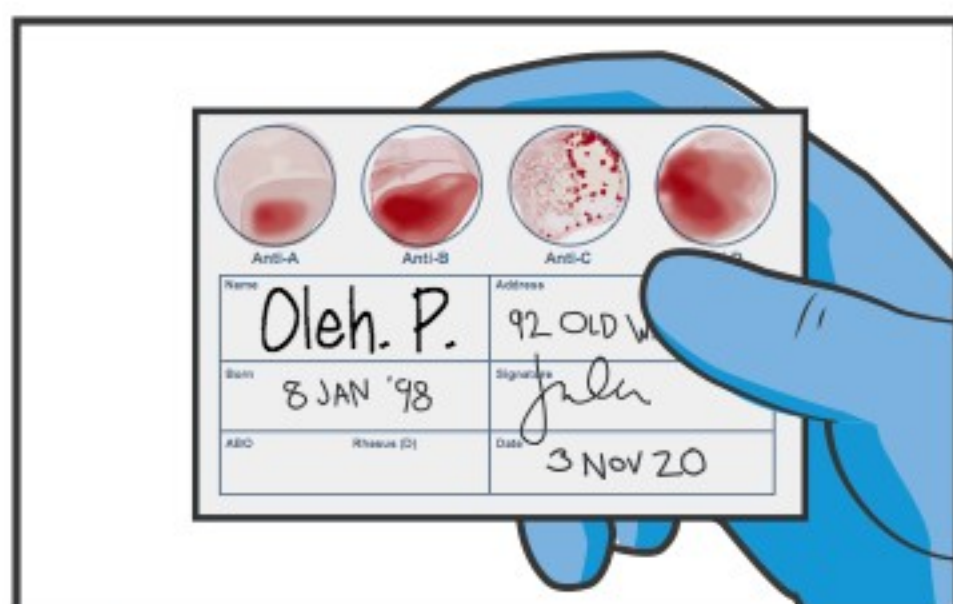

- 11** Обережно нахиляйте картку в кожній площині протягом 10 секунд. Усі 4 площини картки будуть нахилені протягом 40 секунд, щоб максимізувати змішування/аглютинацію.

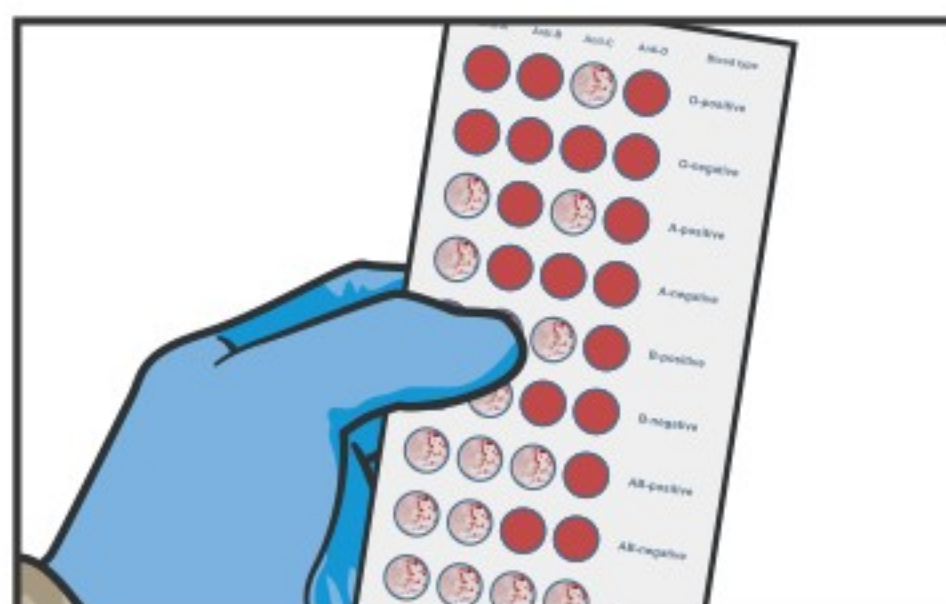


- 12** Використавши всі 4 EldonSticks® і кров змішавши з агентами на EldonCard®, знайдіть таблицю порівняння крові.

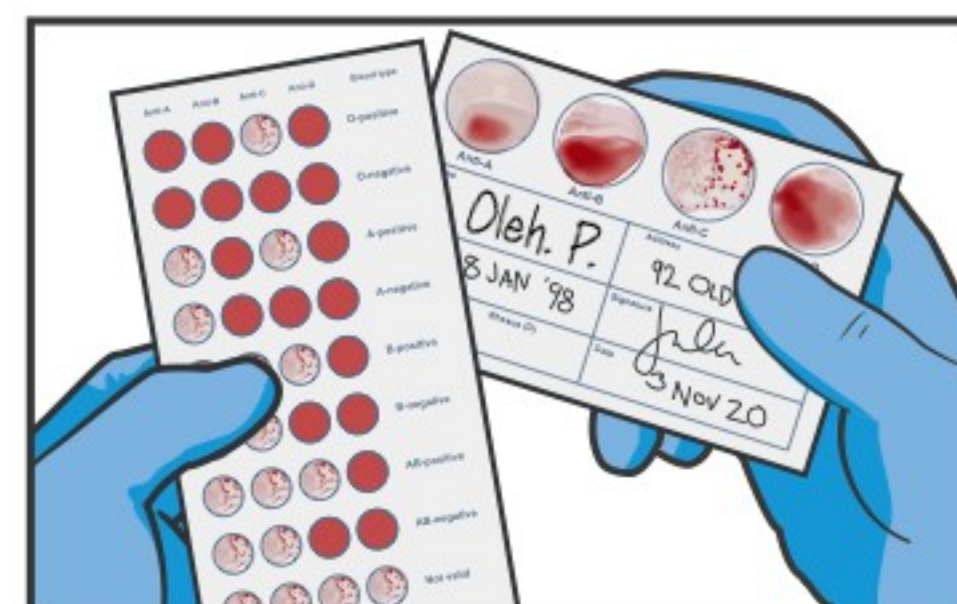


- 13** Порівняйте 4 кола на EldonCard® з таблицею, наданою в наборі EldonCard® ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ (anti-A, anti-B, anti-C, control). Спостерігати за наявністю або відсутністю аглютинації.

**КРОК 13 ПРИМІТКА -** Спробуйте прочитати EldonCard®, поки вона ще волога.


**КРОК 13 ПРИМІТКА.** Контрольне коло **НЕ ПОВИННО МАТИ** аглютинації, інакше тест буде недійсним. Якщо шаблон збігається з шаблоном для недійсного тесту, тест слід повторити за допомогою іншого **ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ - EldonCard®**

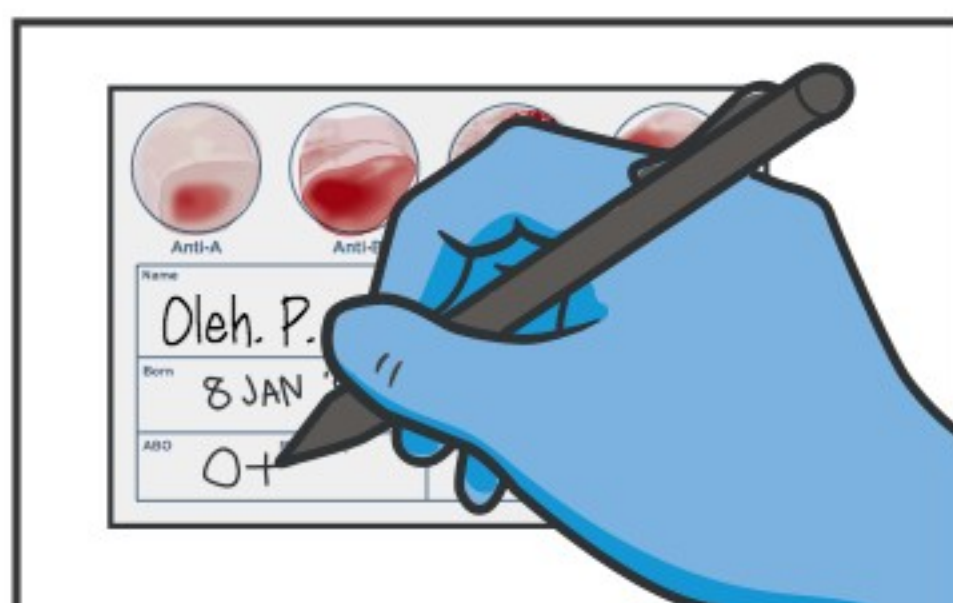

- 14** Напишіть групу крові, A, B, O та Rh на EldonCard®.

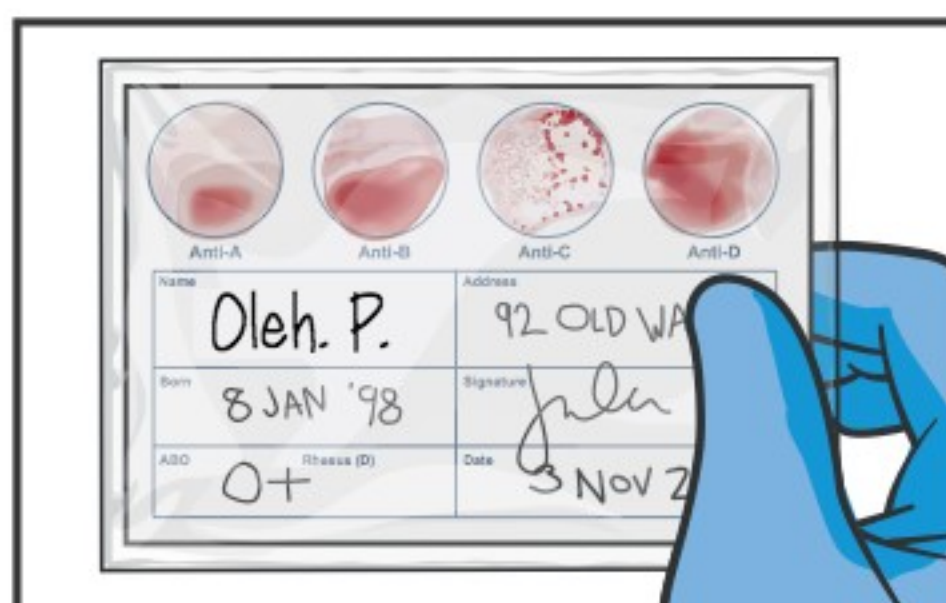

- 15** Помістіть пластикову кришку на EldonCard® і переконайтеся, що вона супроводжує пораненого в документації.

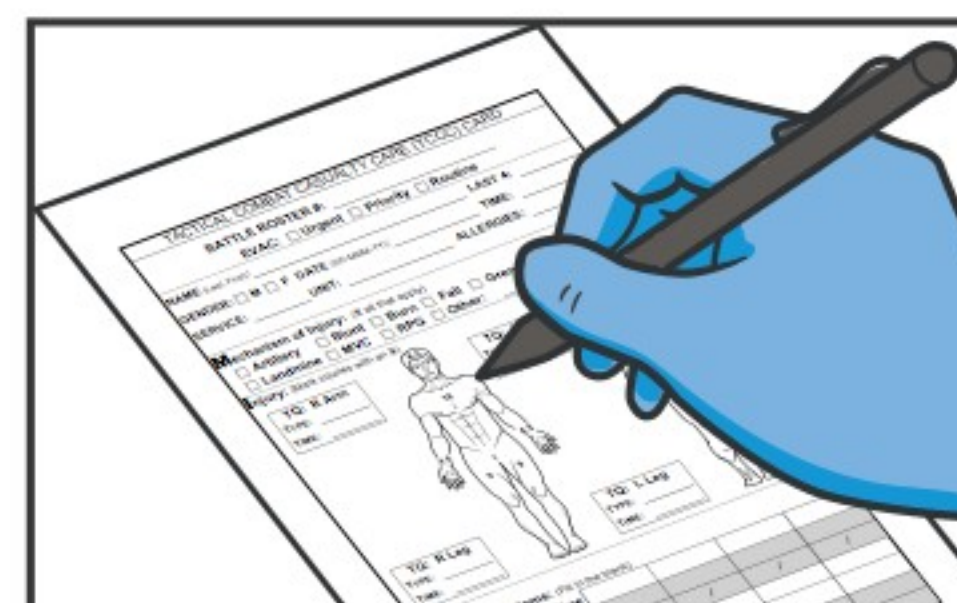

- 16** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.