


# Оклюзійна пов'язка на грудну клітку



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

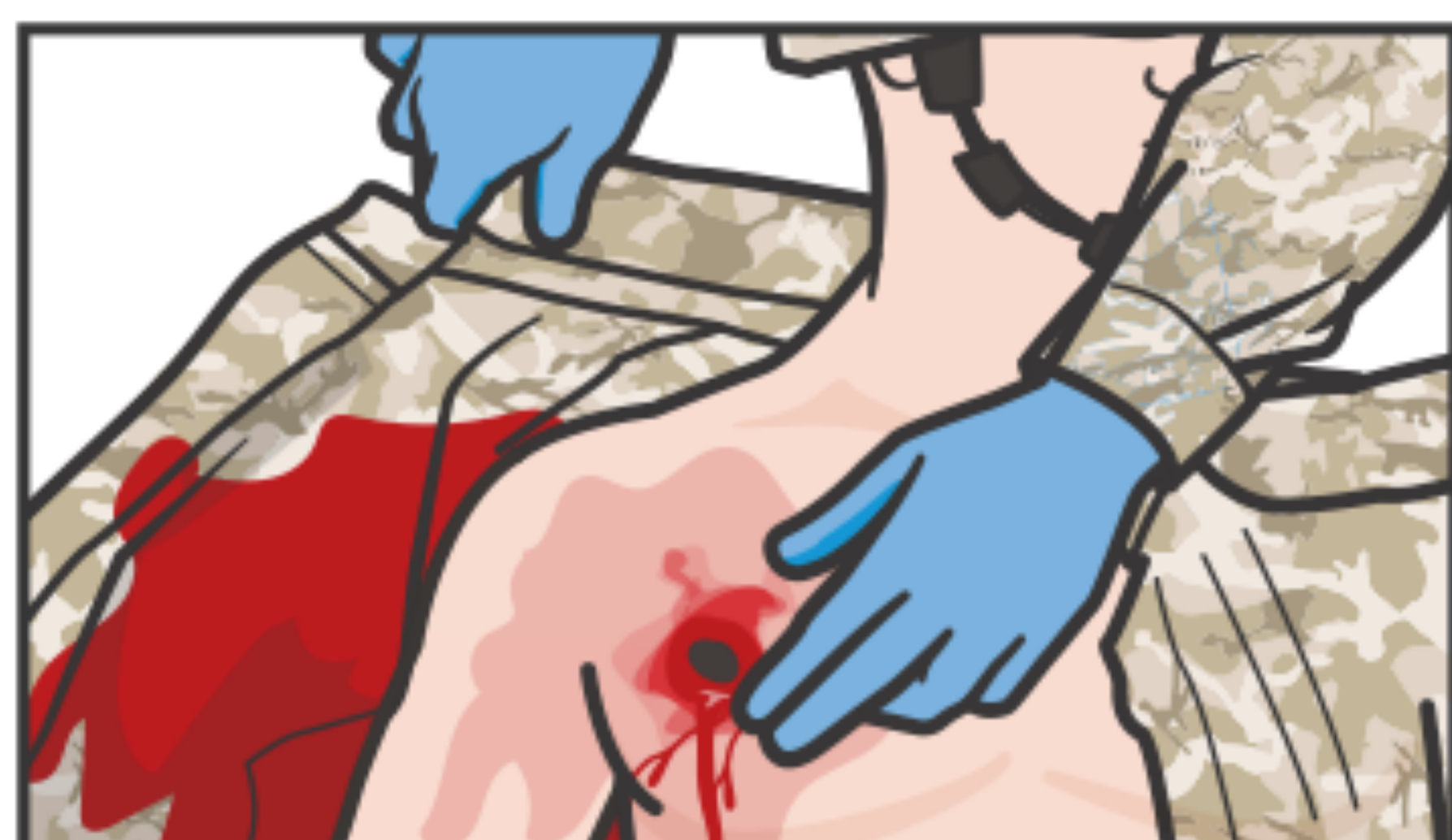

**01** ВИКРИТИ будь-які рани грудей, задню та передню.

**ПРИМІТКА.** Якщо виявлено кілька ран, обробіть їх у тому порядку, в якому вони були знайдені.



**02** Перевірте наявність ознак відкритих ран грудей.

Якщо ви не впевнені, що рана повністю проходить через стінку грудної клітки, розглядайте як відкритий пневмоторакс.



**03** МІСЦЕ покладіть руку на відкриту рану грудної клітки, щоб сформувати тимчасове ущільнення.



**04** ВІДКРИТИ упаковку, тримаючи вентилявану нагрудну прокладку.


Якщо вентилявана нагрудна прокладка недоступна, використовуйте неventильаційну прокладку.




**05** Використовуючи марлю з упаковки грудного бинта або іншу марлю, очистіть ділянку від будь-якого бруду або рідини.



**06** ВИКРИТИ клейку частину герметизуючої пов'язки.

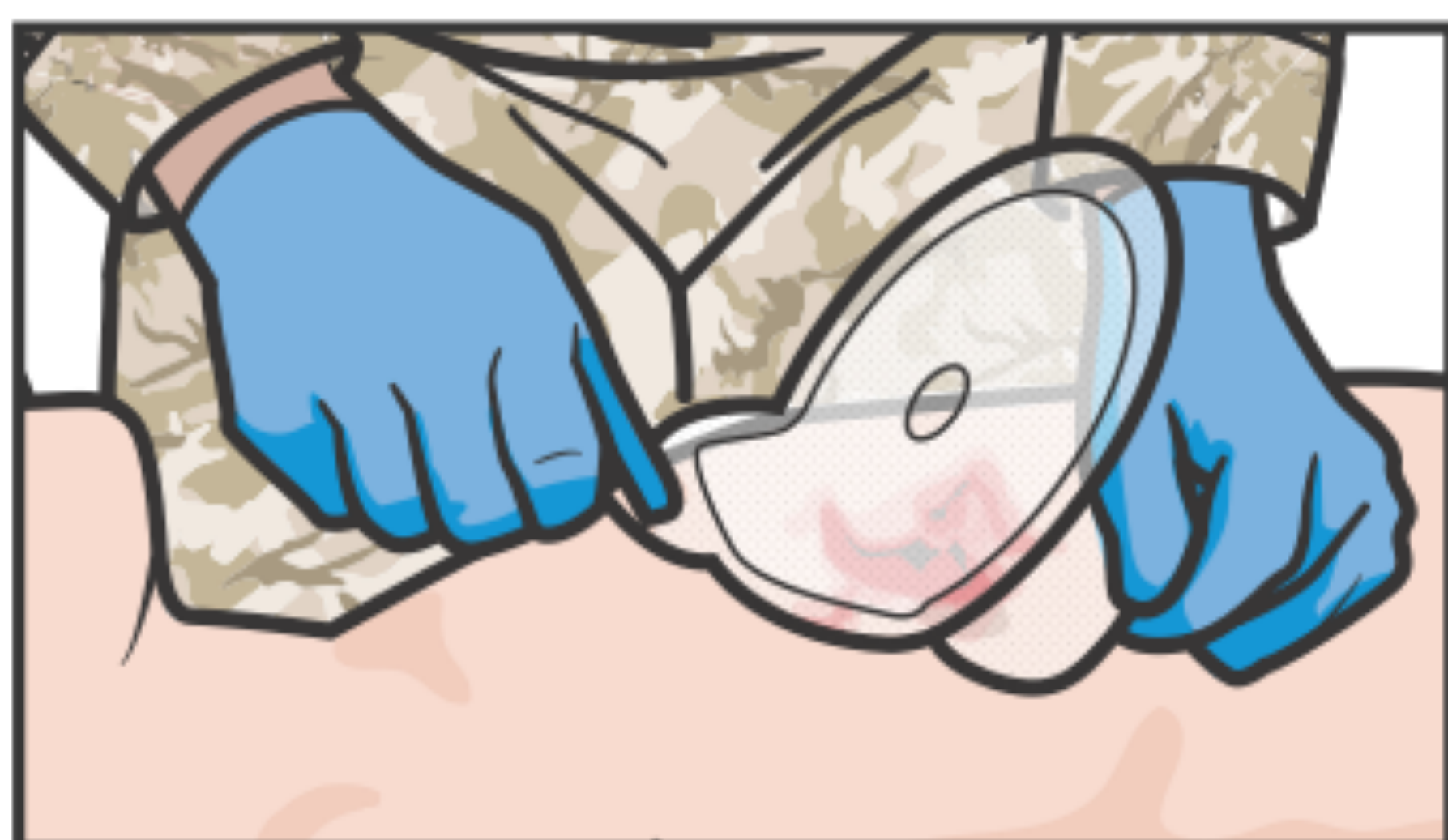


**07** РОЗМІСТІТЬ клейку сторону безпосередньо над отвором, коли поранений видихає, міцно натискаючи, щоб закріпити пов'язку. Латка повинна закривати отвір на 5 см.

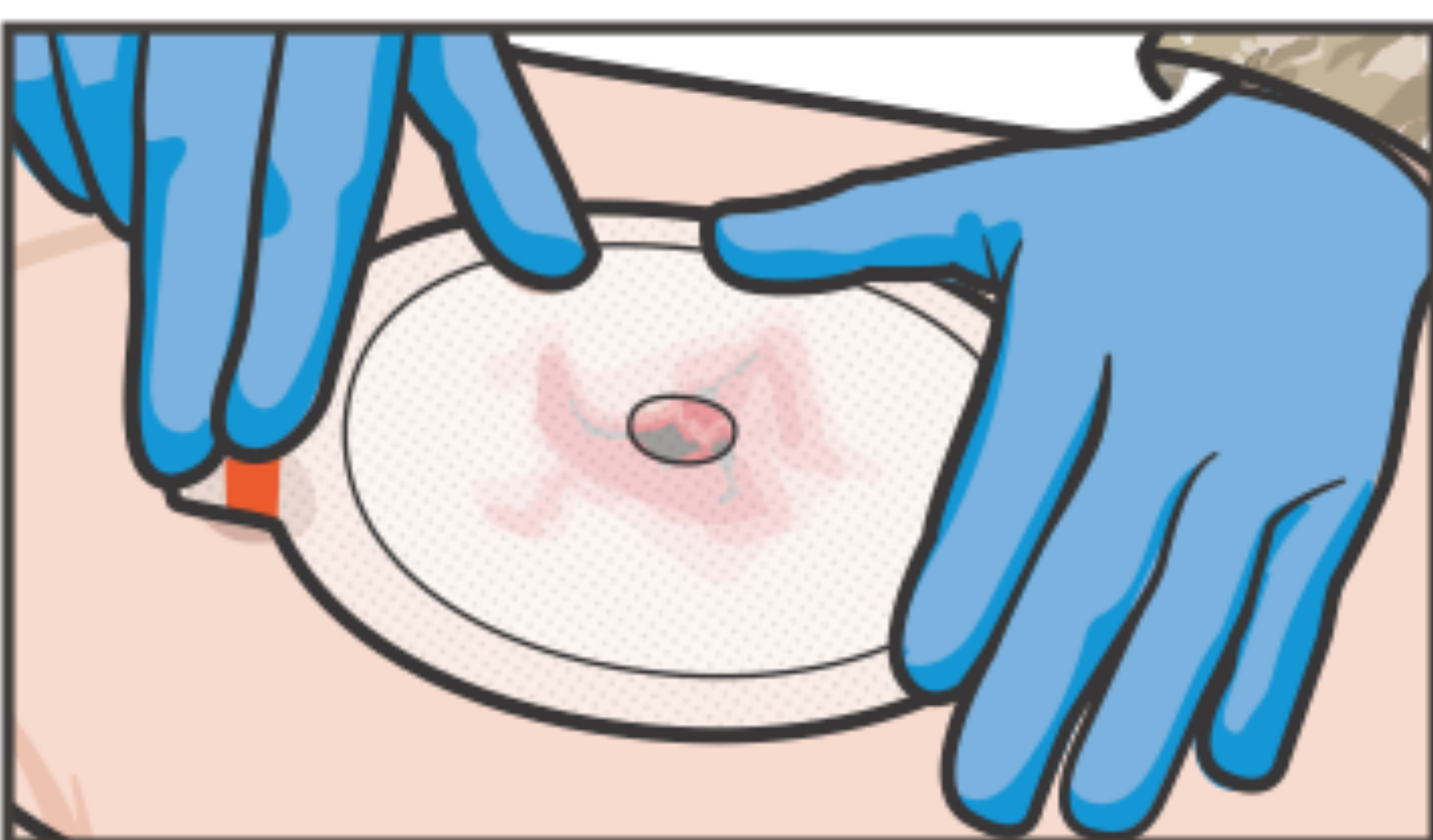

**08** ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО клейкий край повністю прикріплений до шкіри.

**ПРИМІТКА.** Стрічка може бути використана для кріплення вентиляваної перев'язної подушечки, якщо це необхідно.

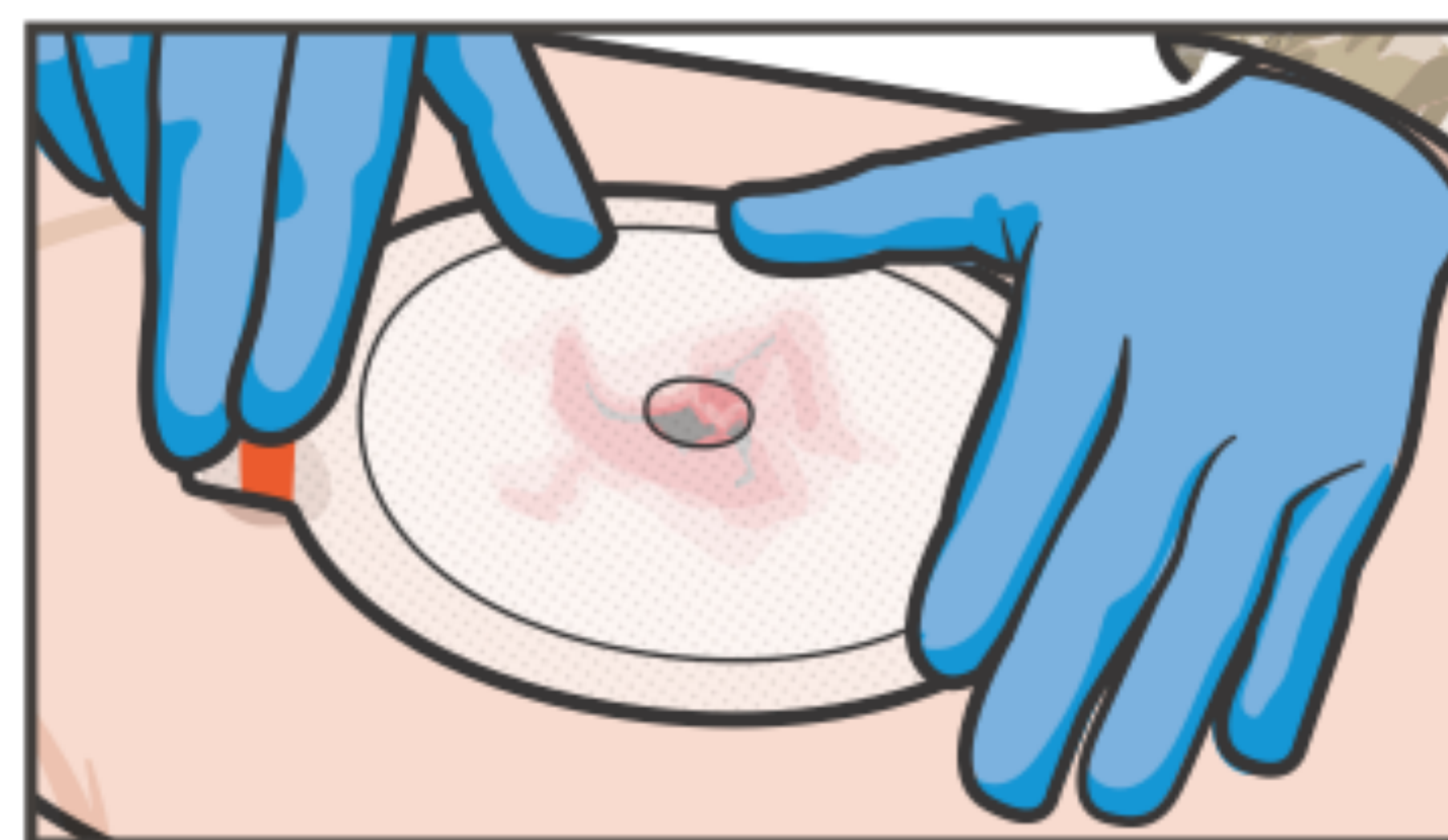

**09** ОЦІНИТИ ефективність вентиляваної пов'язки під час дихання пораненого.

**КРОК 9. ДИВІТЬСЯ ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ НИЖЧЕ.**

**КРОК 9 ВАЖЛИВО.** Вентилювана прокладка повинна перешкоджати проникненню повітря в грудну клітку під час вдиху та дозволяти повітрю виходити під час видиху.

продовження на наступній сторінці...