


# ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ НАДГЛОТКОВОГО ТИПУ


Продовження зі сторінки 1

## EXTRAGLOTTIC AIRWAY


**ВАЖЛИВО:** Існують незначні відмінності між багатьма дихальними пристроями. Переконайтеся, що ви використовуєте правильний тип.

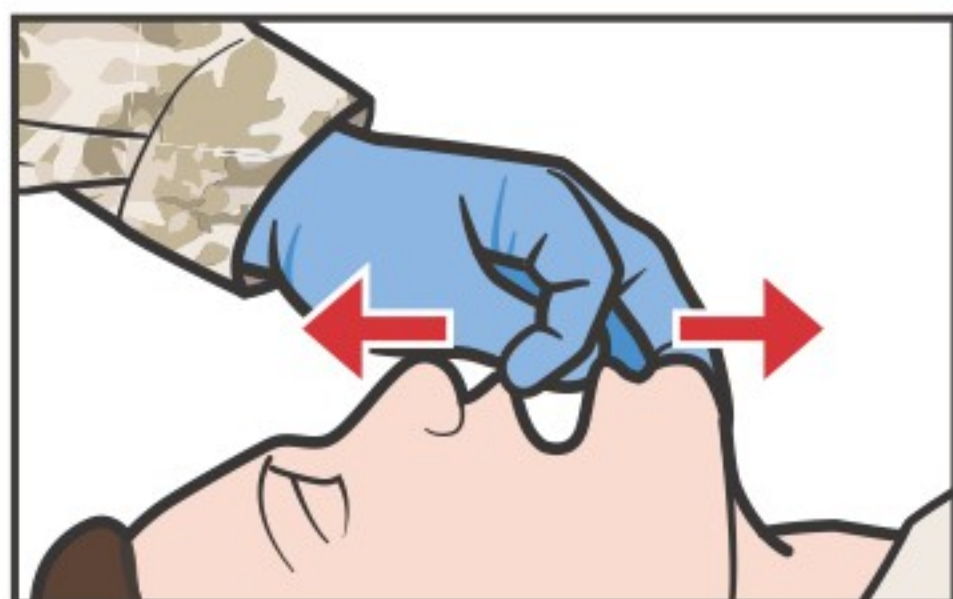

**10** ВІДКРИТИ рот за допомогою техніки ножиць.

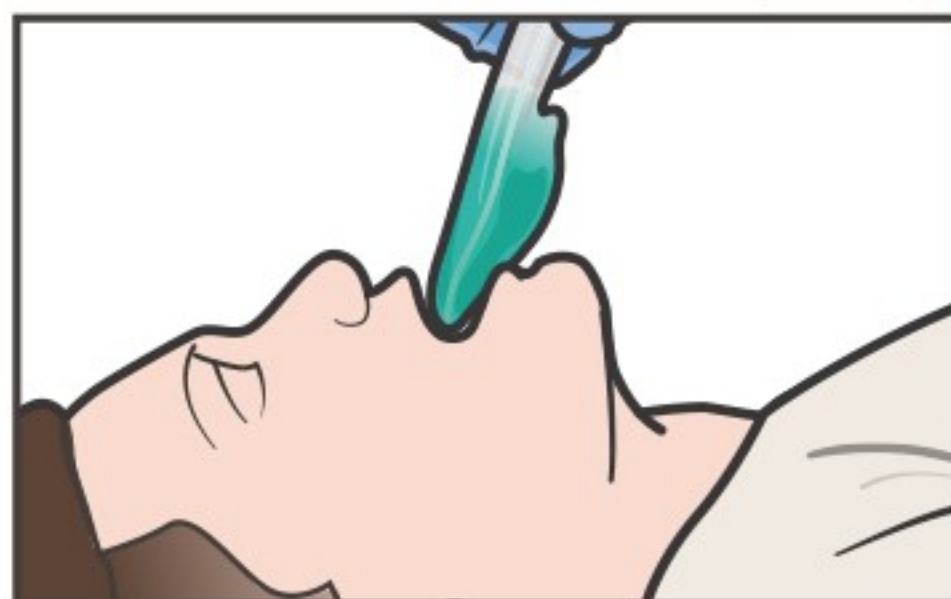

**11** Обережно введіть м'який наконечник направляючої в рот пораненого, направляючи його в бік твердого піднебіння.

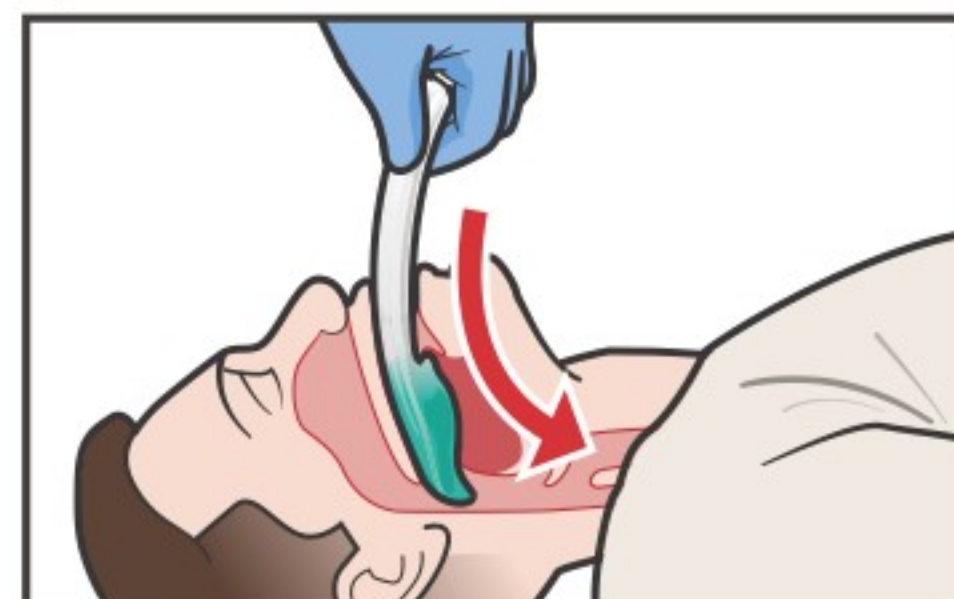

**12** Безперервно й обережно КОВЗАЙТЕ пристроєм вниз і назад по твердому піднебінню, поки не відчуєте остаточний опір.

**КРОК 12.** Якщо під час введення відчувається початковий опір, витягніть трубку та переконайтеся, що дихальні шляхи відкриті.

**КРОК 12 УВАГА.** НЕ прикладайте надмірних зусиль під час введення.

**ПРИМІТКА.** Наконечник розташований у верхньому отворі стравоходу, а манжета прилягає до каркаса гортані.

**КРОК 12.** Пристрій встановлено правильно, коли передні зуби прилягають до горизонтальної лінії прикусного блоку.




**13** Щоб уникнути зісковзування пристрою, НЕОБХІДНО ТРИМАТИ його до закріплення.




**14** Приєднайте вентиляційний мішок (мішок Амбу) до дихального апарату та розпочніть вентиляцію пораненого.



**15** ОЦІНИТИ вентиляцію.  
1. - вислухати звуки грудної клітини (стетоскоп).  
2. - стежити за підняттям і опусканням грудної клітки.  
3. - прослухати живіт (стетоскопом).

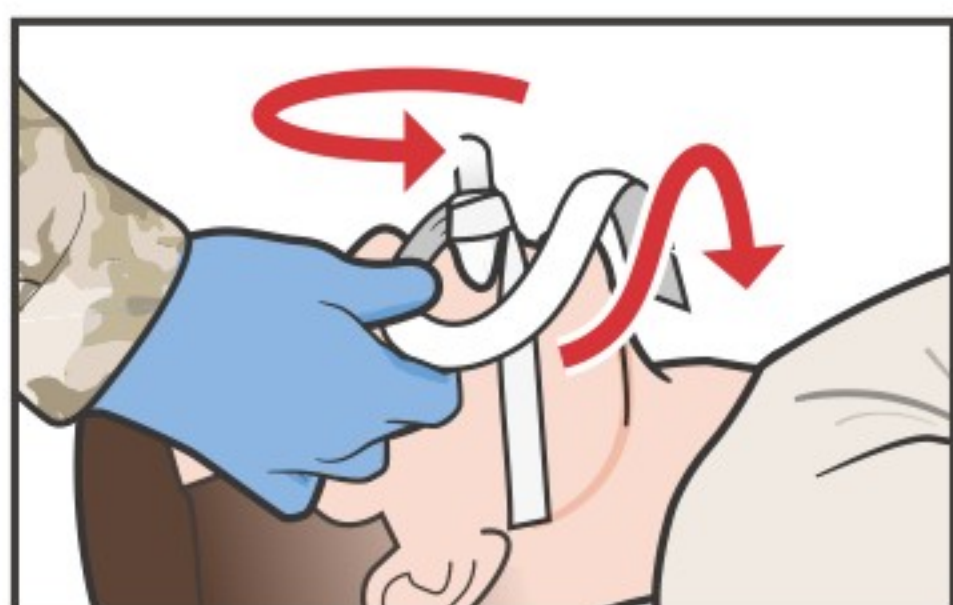

**16** ЗАКРІПНІТЬ пристрій за допомогою стрічки від верхньої щелепи до щелепи.

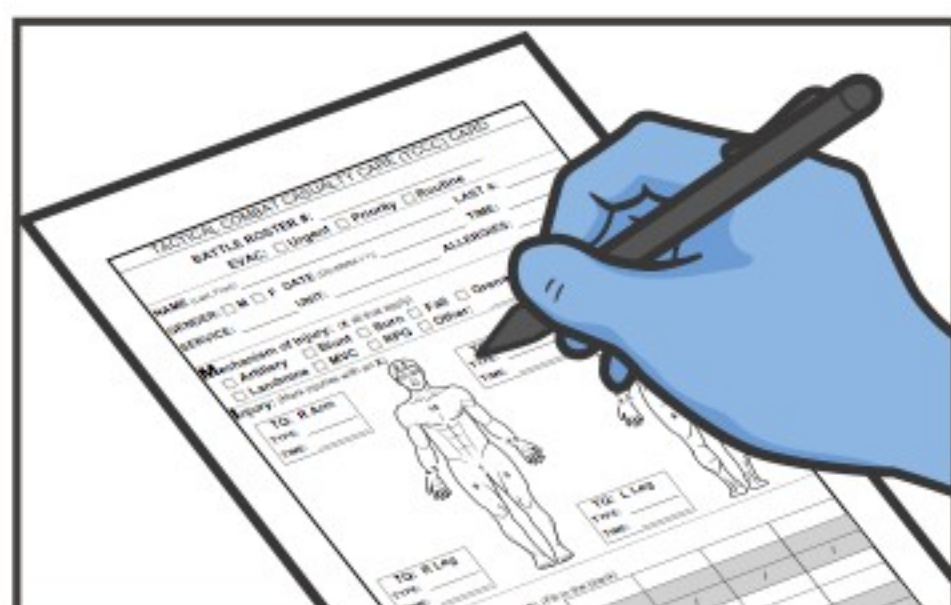

**17** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.