













ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ ТАЗА (ПКТ)



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

ПРИМІТКА: Використання ПКТ не виключає накладання вузлового турнікету, якщо є покази.




ВИЙМІТЬ все з кишень пораненого та приберіть всі речі з ділянки таза.

ПОКЛАДІТЬ пораненого в положення лежачи на спині.




ОГЛЯНЬТЕ пораненого на наявність ознак деформації, забоїв, саден, колотих ран, опіків, рваних ран або набряку; а також при пальпації визначте, чи є болісність, нестабільність чи крепітація.


ПРИМІТКА: Накажіть бійцю-рятувальнику руками стабілізувати тазову ділянку (якщо це можливо).

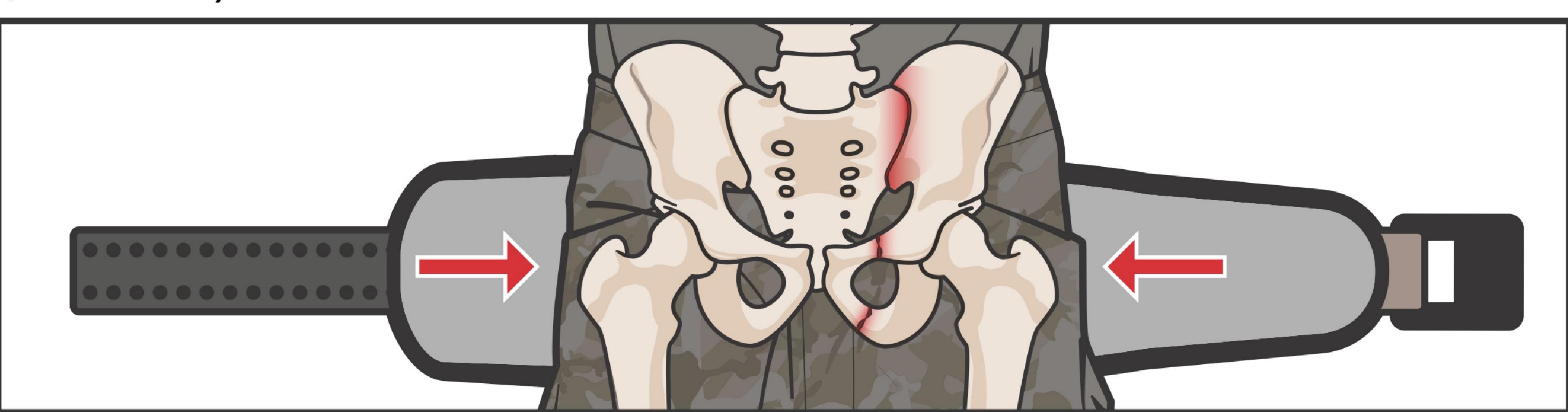

ПРОТЯГНІТЬ ПКТ позаду стегон та посуньте його вгору для розміщення на рівні великих вертлюгів.

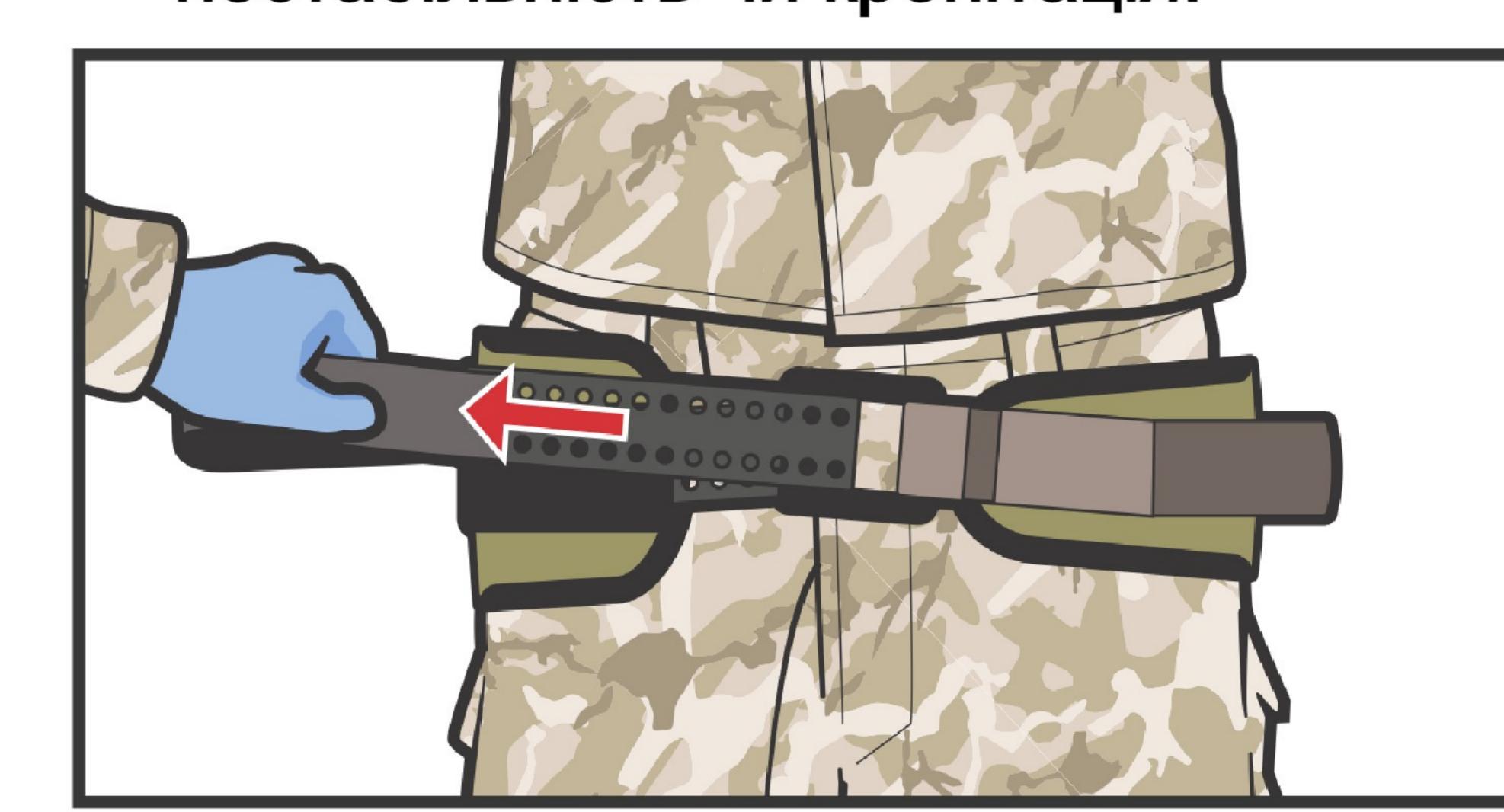


ПРОСУНЬТЕ ремінь крізь пряжку та повністю затягніть.

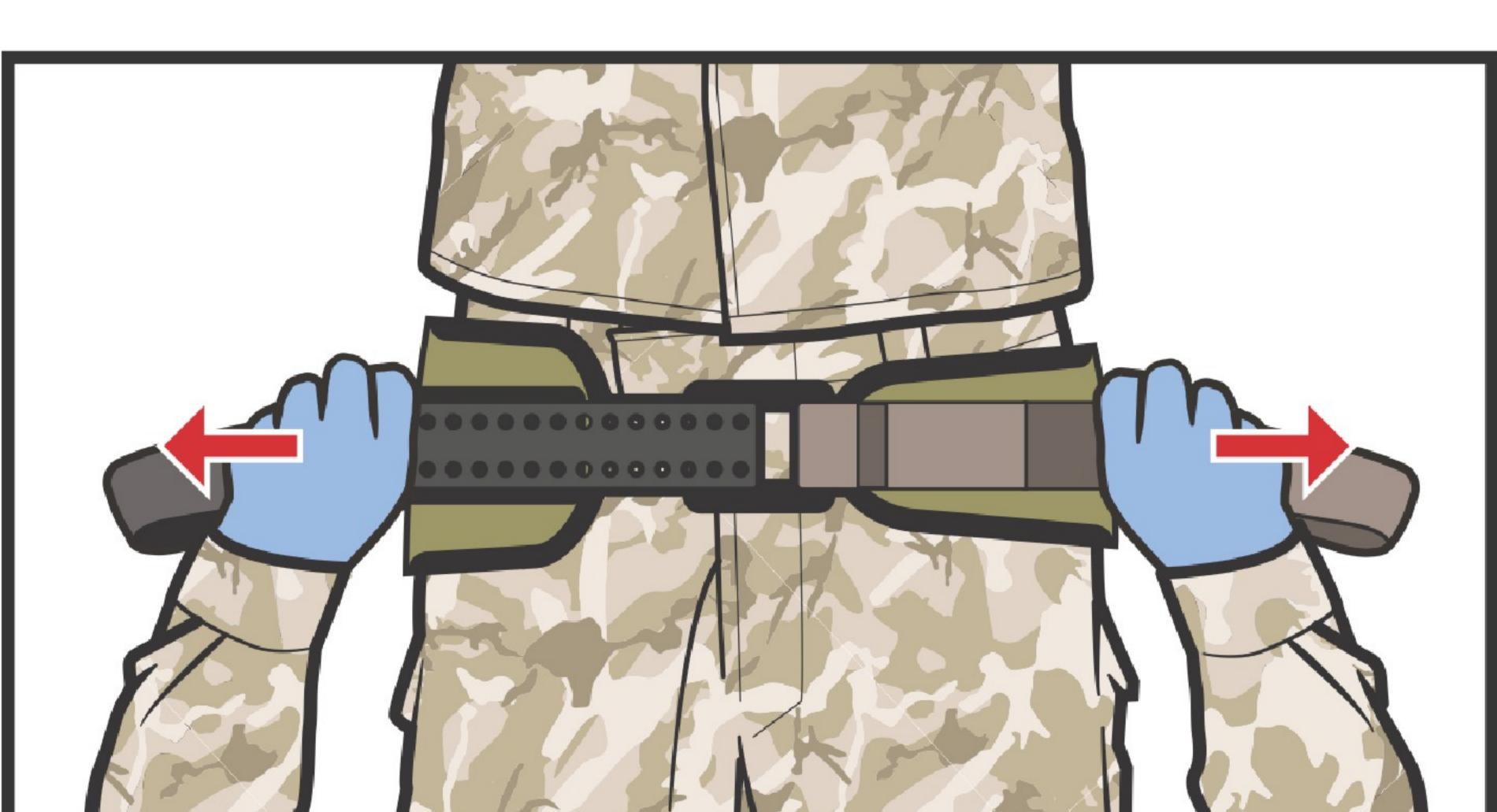

Сильно ПОТЯГНІТЬ протилежні ремені у протилежних напрямках до моменту, поки не почуєте та не відчуєте характерне клацання пряжки.

ЗбЕРІГАЙТЕ натяг та негайно притисніть вільний кінець ремінця до поверхні ПКТ.

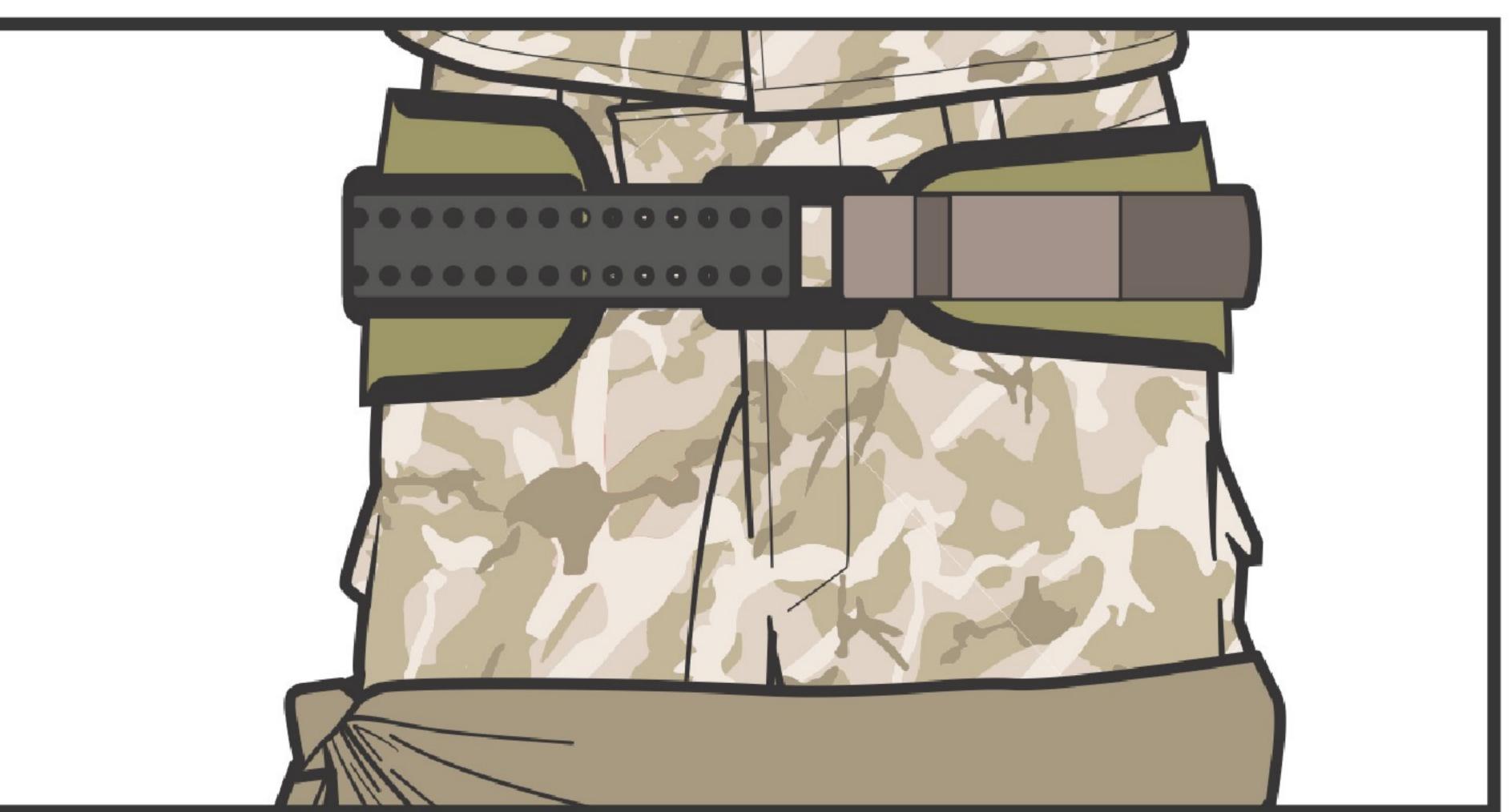


ЗАФІКСУЙТЕ обидві ноги одна до 08 одної, щоб зменшити обертання стегон назовні.

ПРИМІТКА: Пристрій може не завжди клацати при правильному використанні. ПРИМІТКА: Не хвилюйтеся, якщо почуєте клацання вдруге після закріплення пристрою.



СЛІДКУЙТЕ за ефективністю зупинки кровотечі шляхом оцінки на наявність ознак шоку (зміна психічного стану за відсутності черепно-мозкової травми та/або слабкість чи відсутність пульсу на променевій артерії), оскільки вони також є ознаками внутрішньої кровотечі, яка може бути непомітною.

ПРИМІТКА: При появі або посиленні симптомів шоку накладіть ПКТ повторно, якщо ситуація на полі бою дозволяє це здійснити.

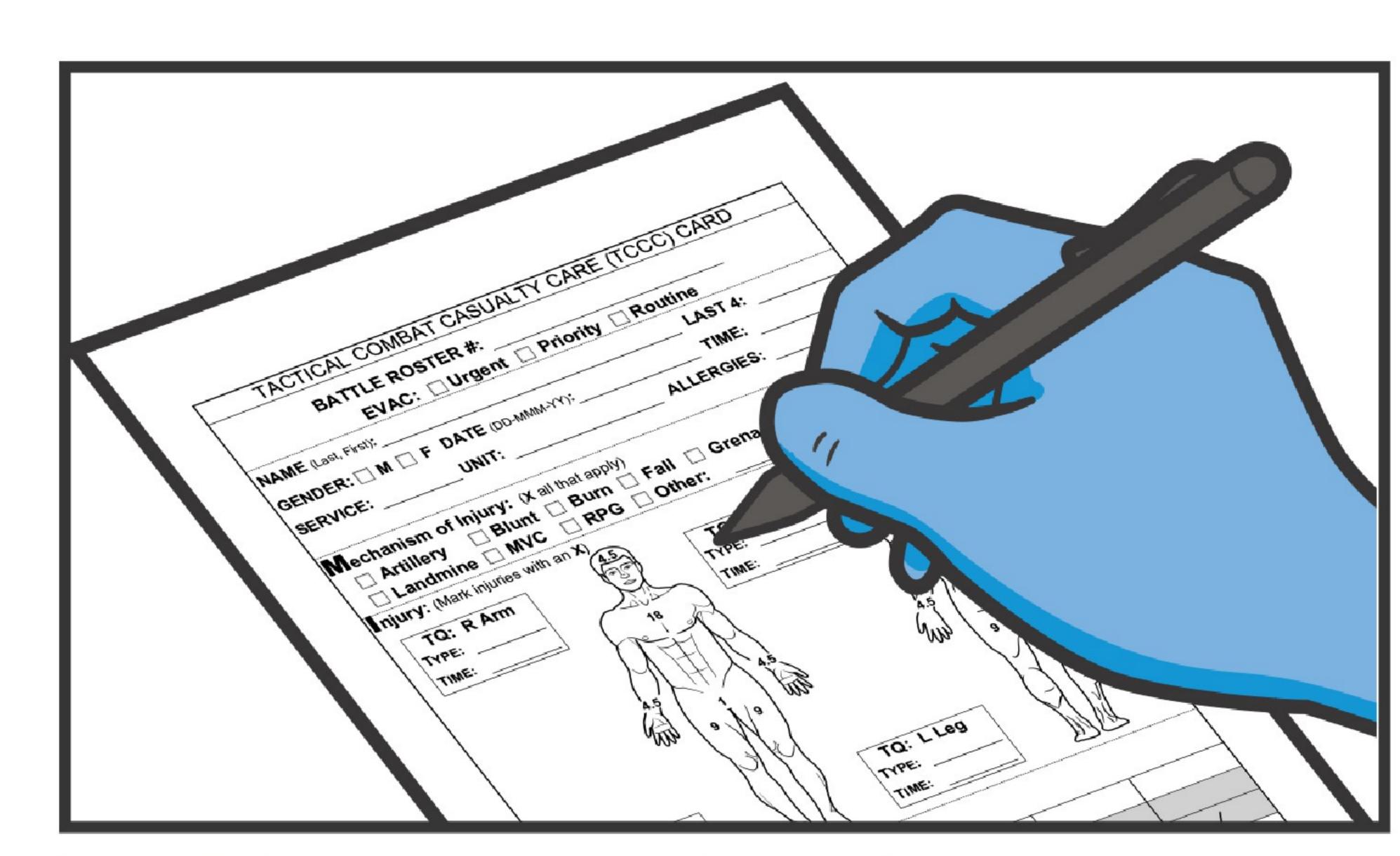

Задокументуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.