








## Торакальна оклюзійна наліпка



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

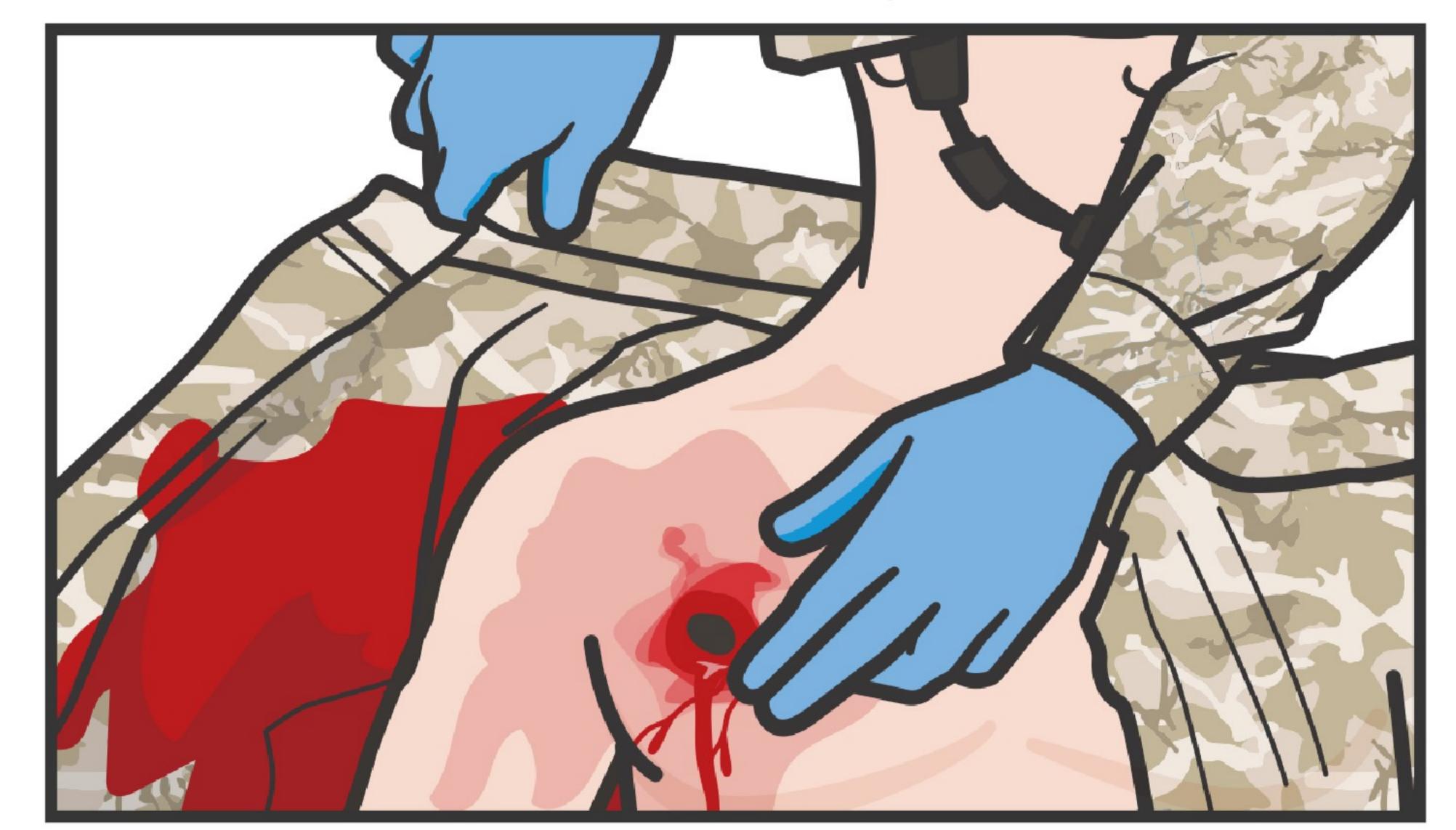


ВІДКРИЙТЕ та ОГЛЯНЬТЕ всі поранення на передній та задній поверхні грудної клітки, а також у ділянках під руками.

**ПРИМІТКА:** Якщо виявлено множинні поранення, надавайте допомогу в порядку їх виявлення.




ВІДКРИЙТЕ повністю зовнішню упаковку торакальної оклюзійної наліпки з клапаном або іншого повітронепроникного матеріалу з індивідуальної тактичної аптечки пораненого.

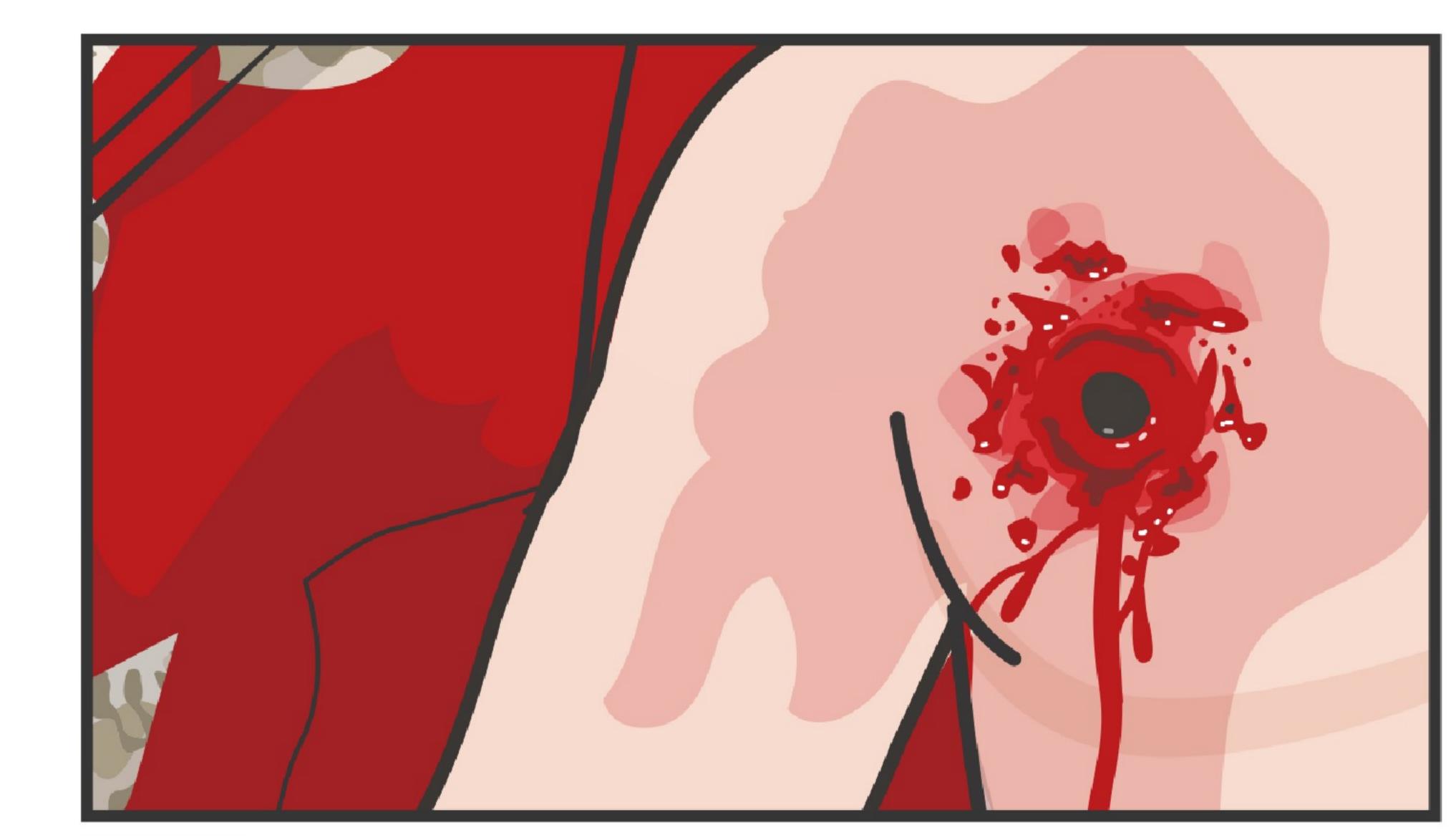


ПЕРЕВІРТЕ наявність ознак відкритого поранення грудної клітки та/або рани, що всмоктує повітря.


**ПРИМІТКА:** Якщо ви не впевнені, чи рана проникаюча, надавайте допомогу так, як при відкритій рані грудної клітки.

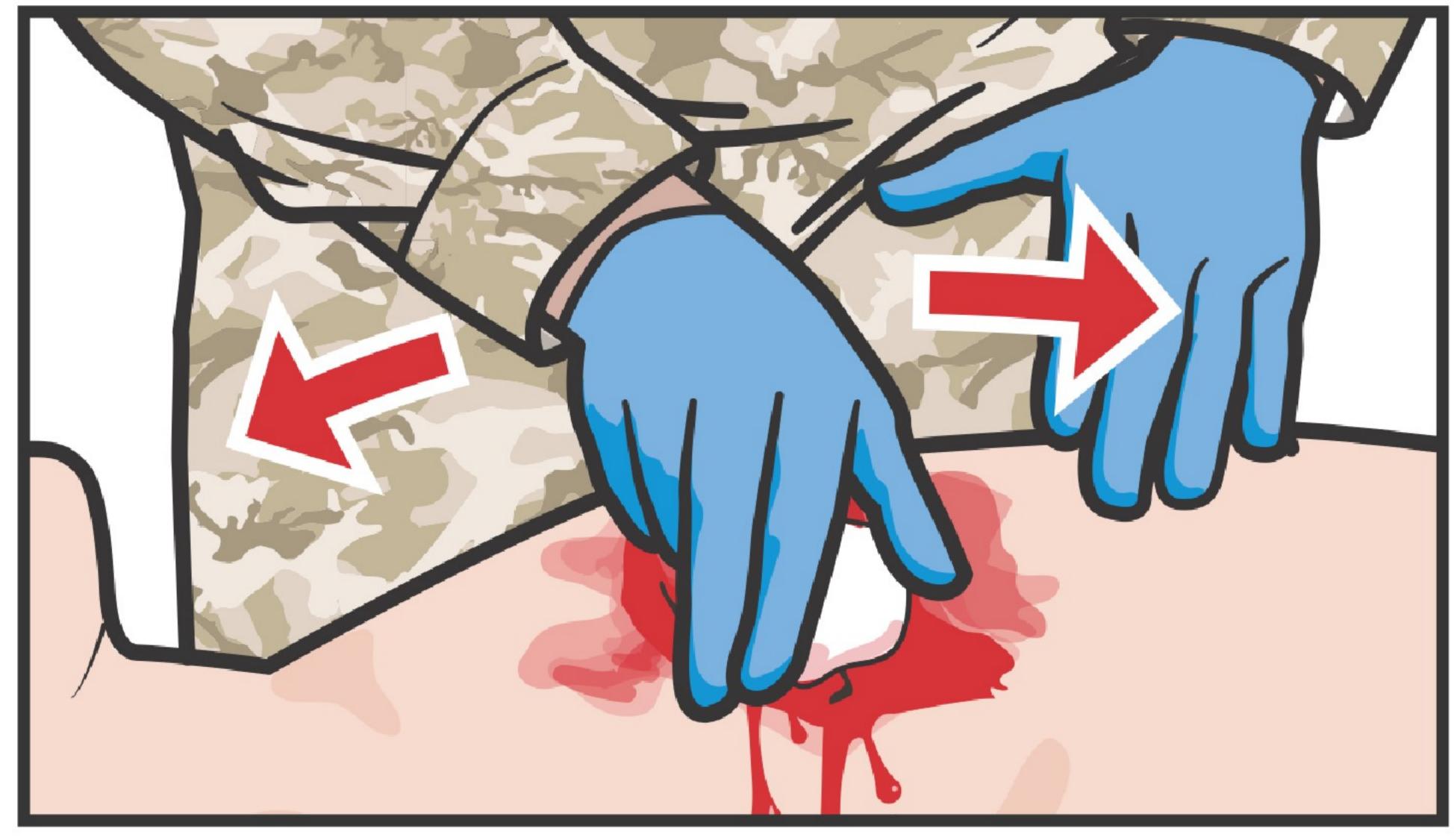

BI3ЬМІТЬ марлеву серветку з упаковки (або будь-яку іншу), щоб витерти бруд, кров та інші рідини з ділянки рани.

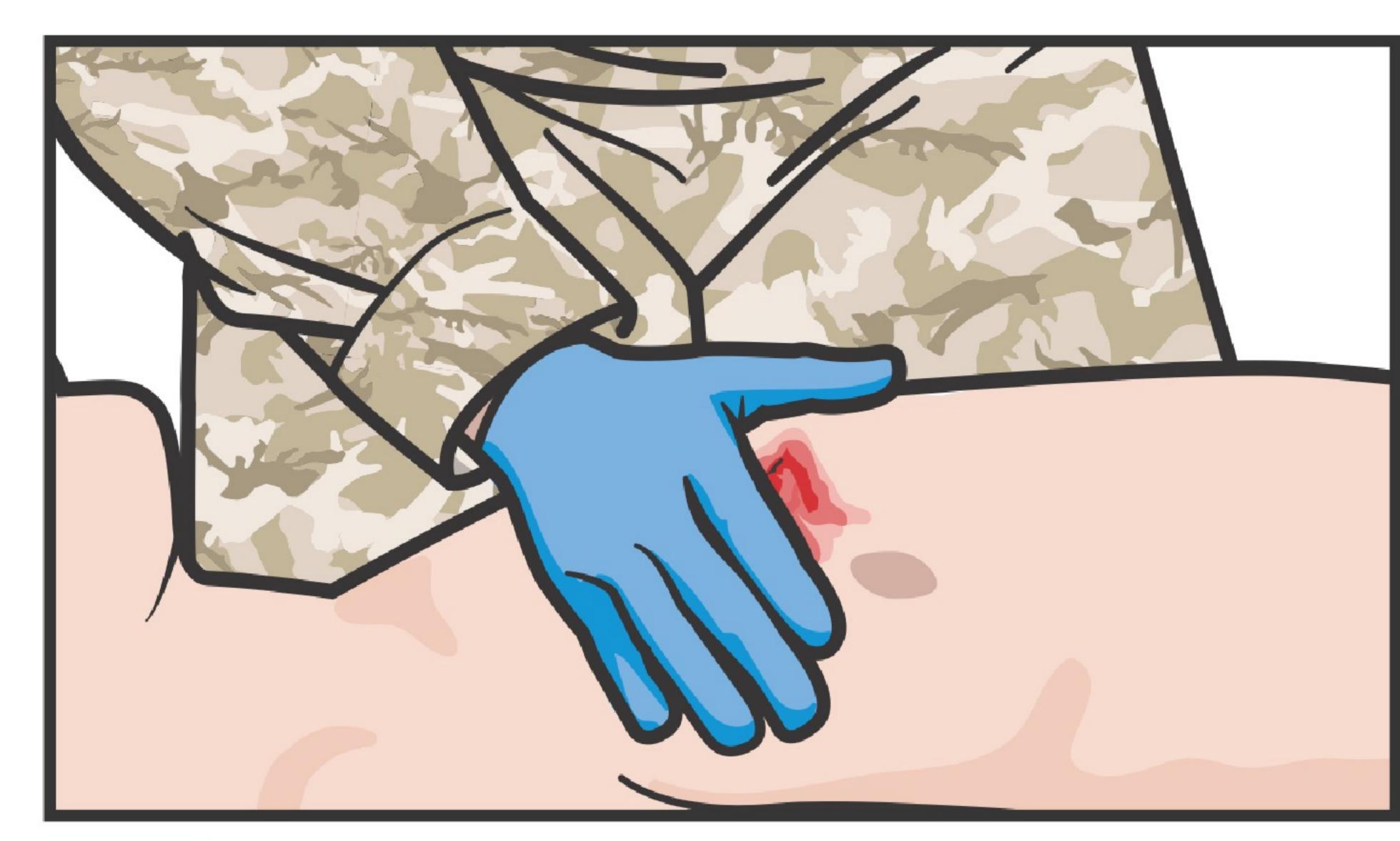


ПОКЛАДІТЬ долоню або тильну сторону кисті на відкриту рану грудної клітки для створення тимчасового її щільного закриття.

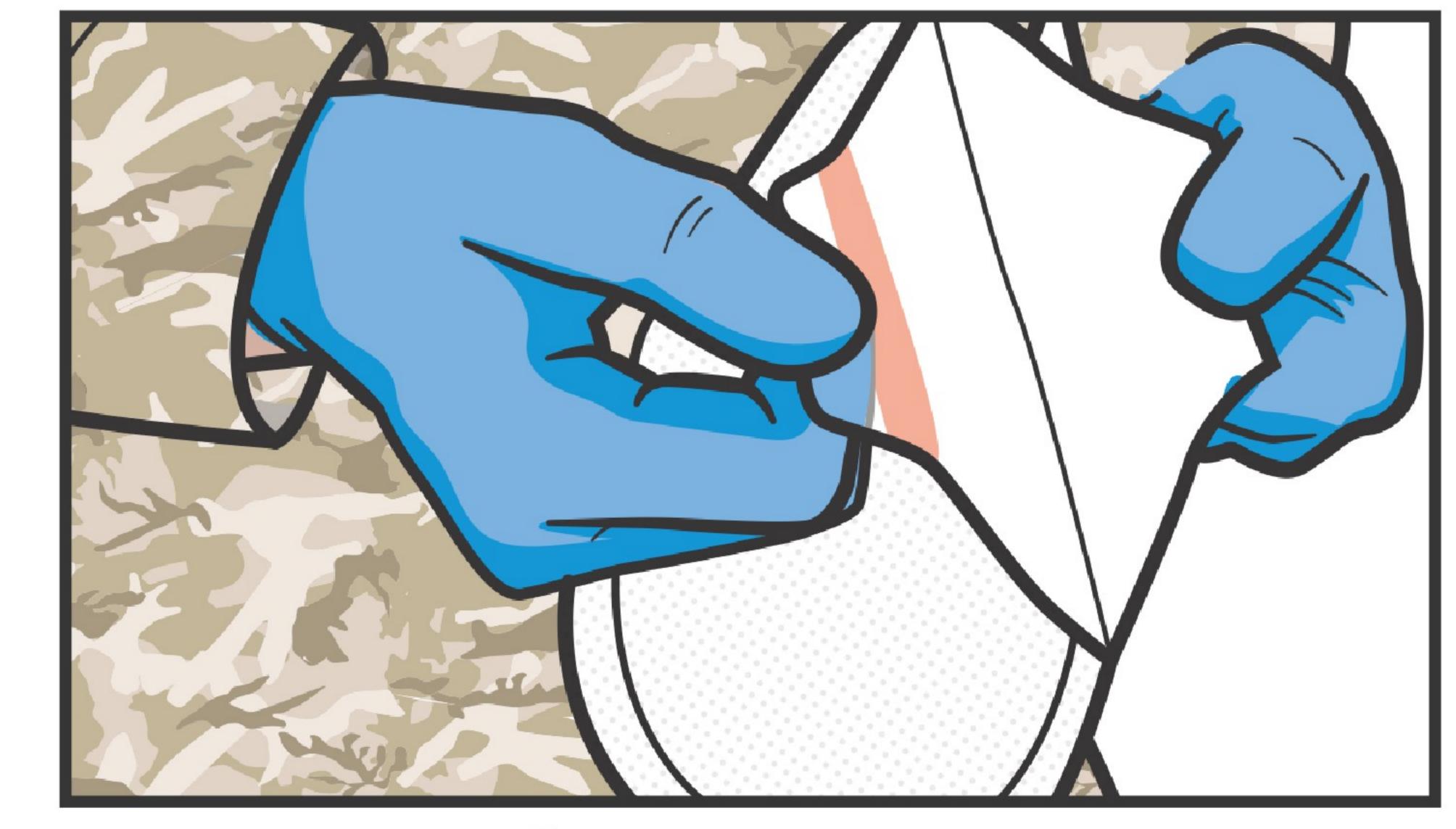


ВІДКЛЕЙТЕ захисне покриття з клейкої сторони наліпки.

**ПРИМІТКА:** Якщо немає наліпки з клапаном, використовуйте наліпку без клапана.

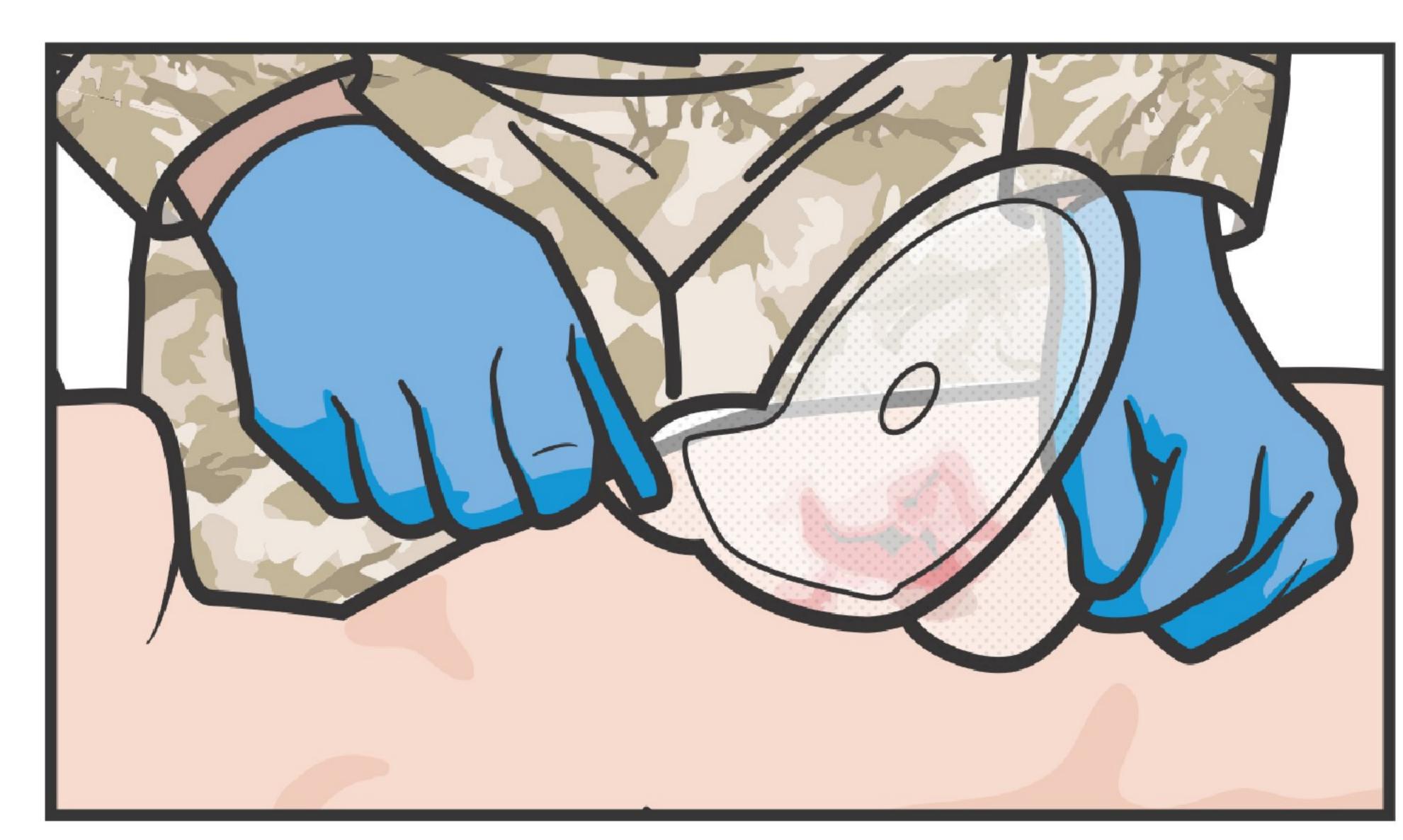


НАКЛАДІТЬ наліпку клейкою стороною донизу безпосередньо на отвір рани, під час видиху пораненого, міцно притиснувши.

ПРИМІТКА: Перевірте, щоб краї оклюзійної наліпки виходили за межі рани на 5 см.

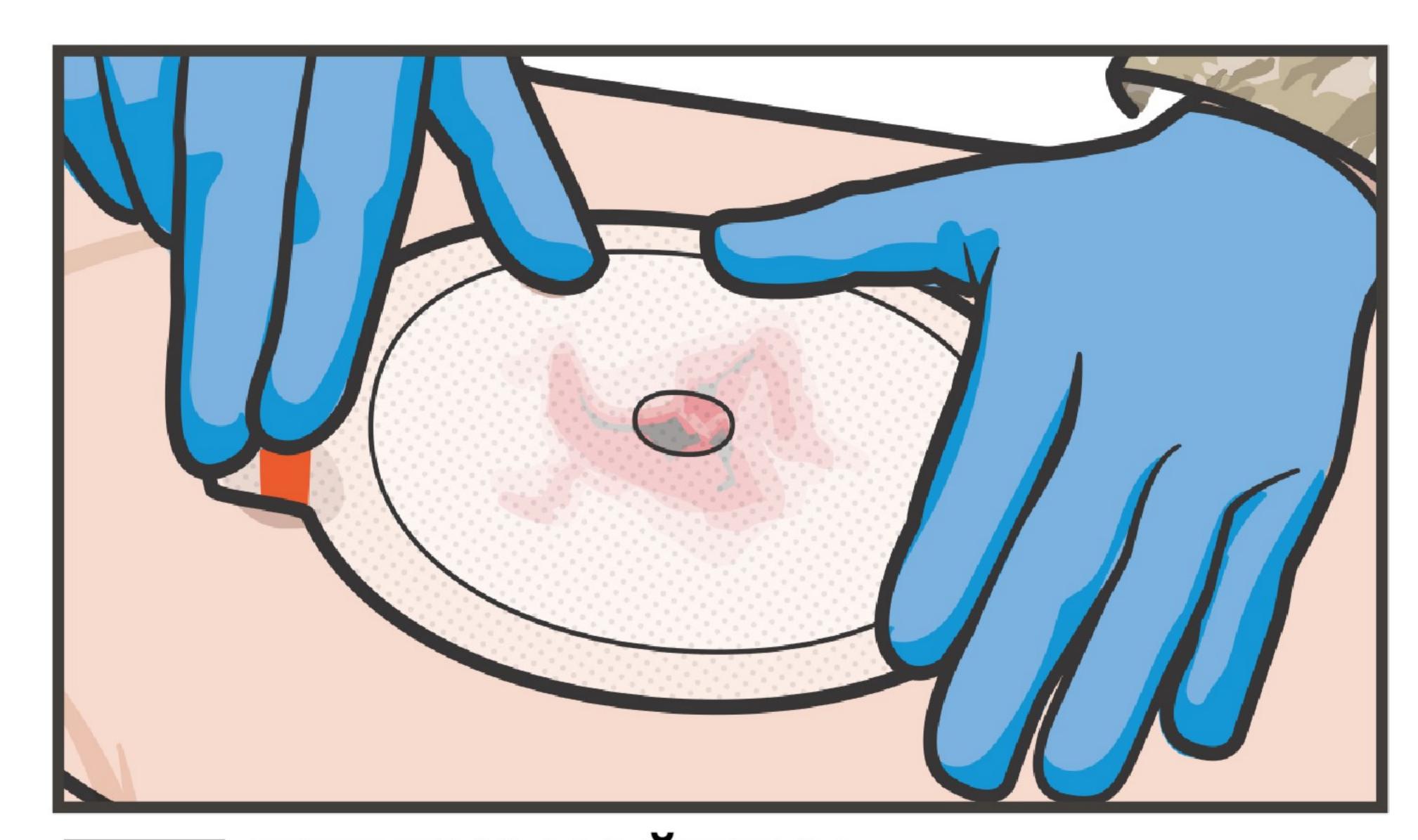

ОВ ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, що вся клейка поверхня наліпки щільно прилягає до шкіри.

**ПРИМІТКА:** За потреби можна зафіксувати краї оклюзійної наліпки пластиром.

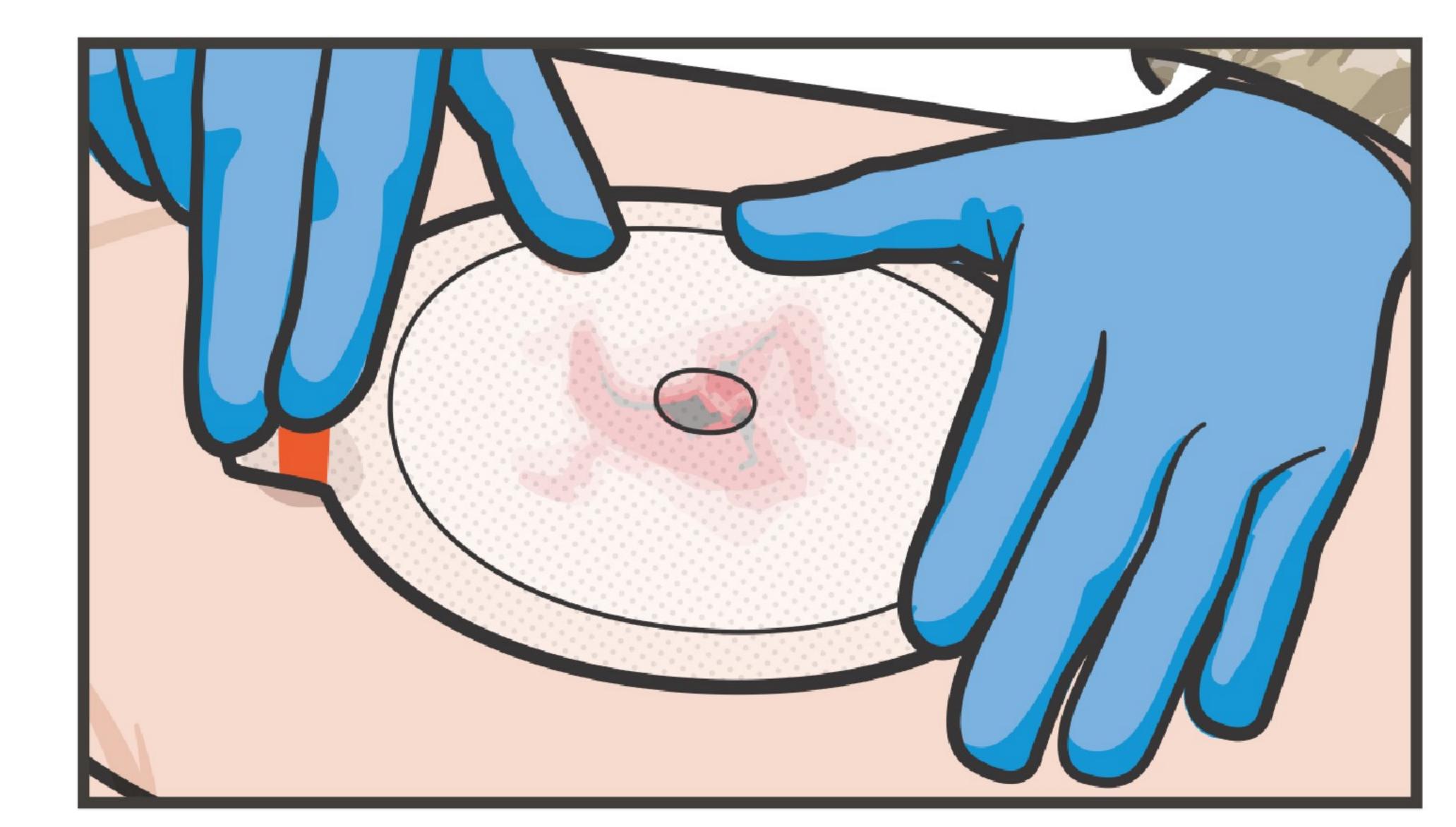

ПЕРЕВІРТЕ ефективність торакальної оклюзійної наліпки з клапаном під час дихання пораненого.

**ПРИМІТКА ДО КРОКУ 9:** Під час вдиху пораненого наліпка має втягуватися в рану, запобігаючи входу повітря.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 9: Під час видиху пораненого, повітря, яке накопичилося в порожнині грудної клітки, повинне виходити з рани через клапан наліпки.

Продовження на наступній сторінці...