

iTClamp - гемостатичного затискача

ПРИМІТКА. Кровоспинний зажим може використовуватися в поєднанні з іншими засобами контролю кровотечі.

1. Упаковка ран - Перед застосуванням пристрою можна запакувати рану.
2. Кровоспинні засоби - Апарат можна використовувати на ранах, оброблених кровоспинними засобами.
3. Остаточна перев'язка рани - За бажанням поверх пристрою можна накласти додаткові компресійні пов'язки та обгортку. Це захистить пристрій і може створити додатковий тиск на рану.






Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.



УВАГА - НЕ використовуйте біля очей.

01 ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.




02 Якщо можливо, застосовуйте прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі.

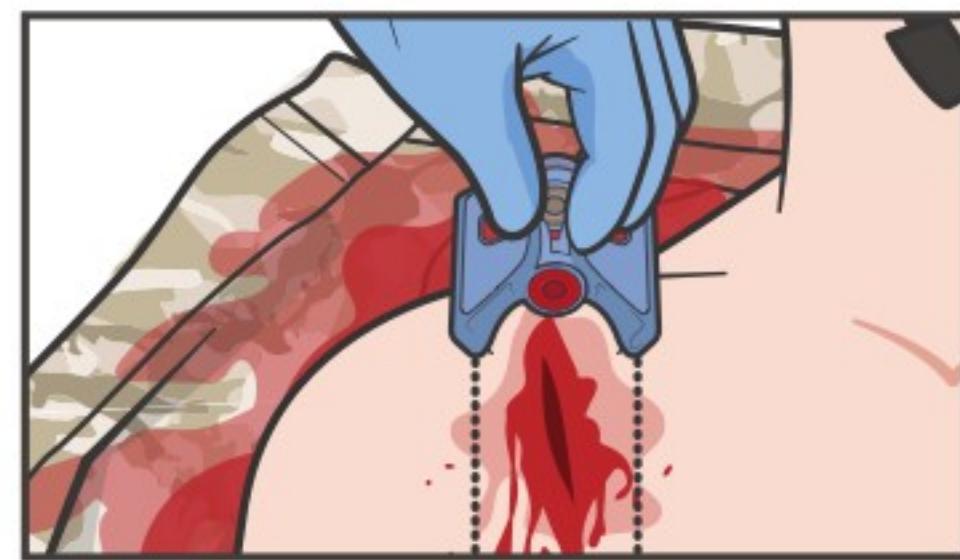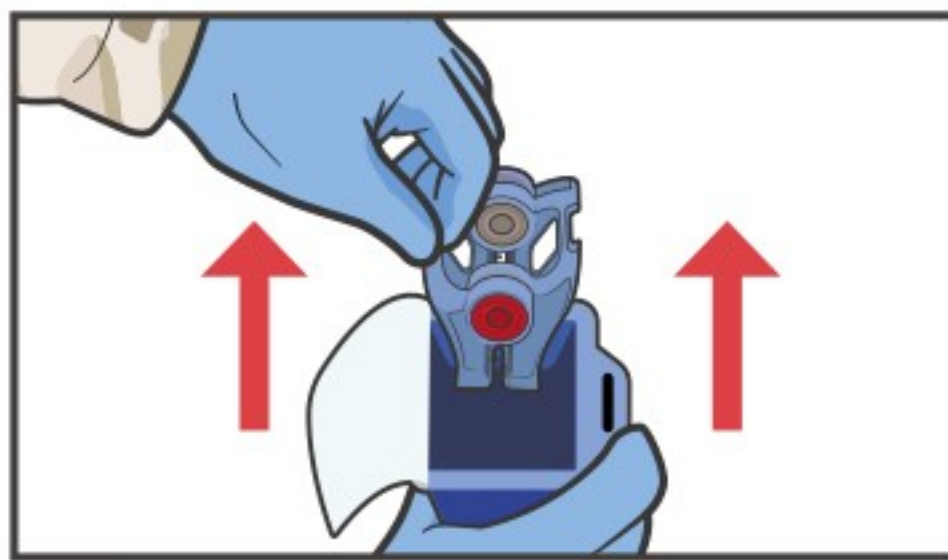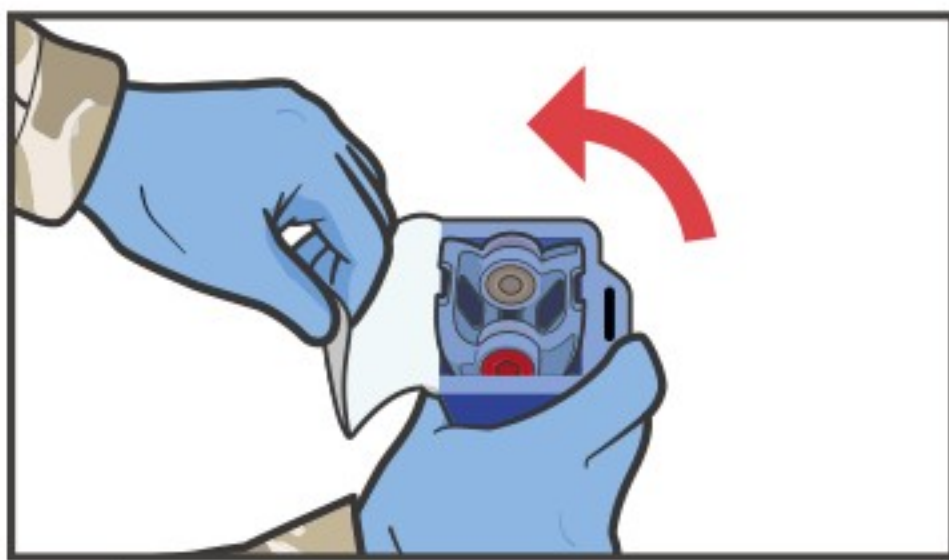

03 Обережно відкрийте стерильну упаковку, щоб уникнути забруднення.

04 Зніміть пристрій, піднявши прямо вгору, уникаючи забруднення.

05 Вирівняйте голки пристрою для закриття паралельно краям рани.

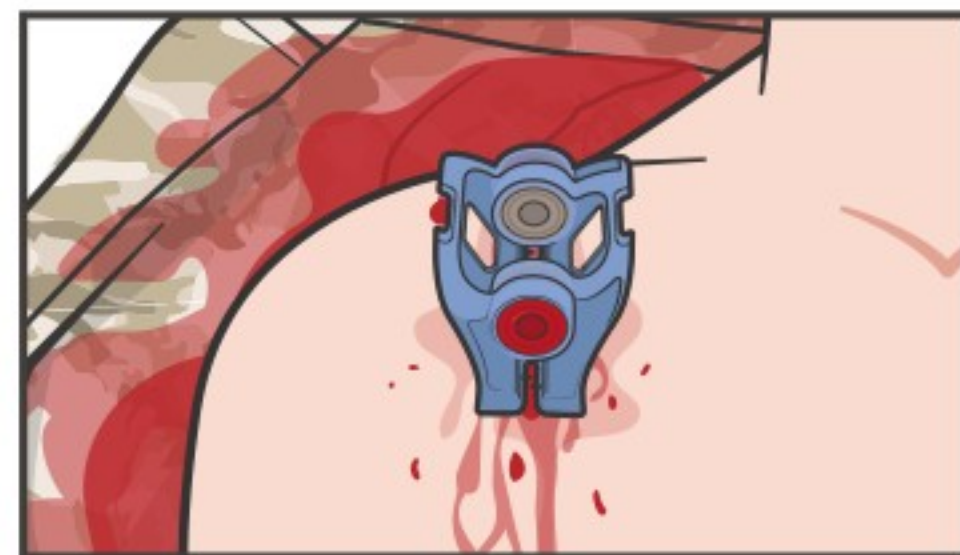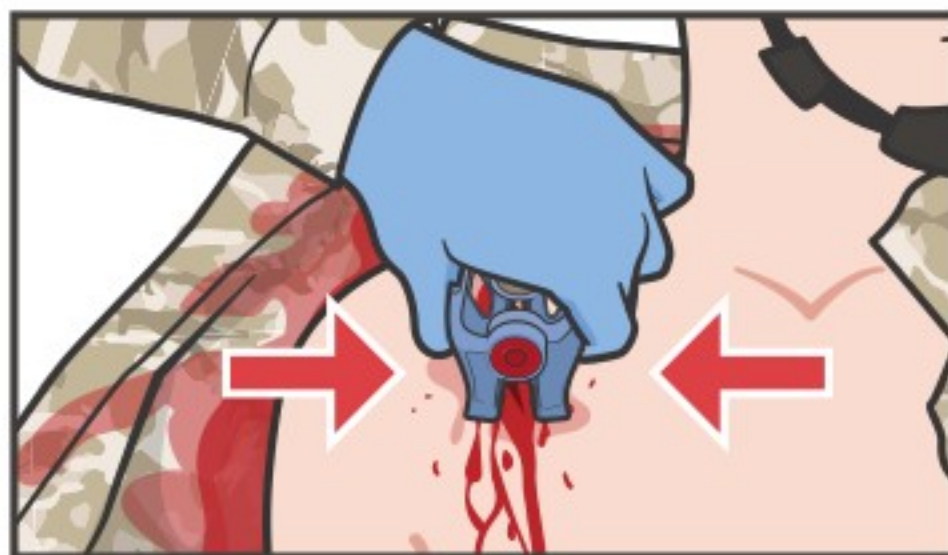
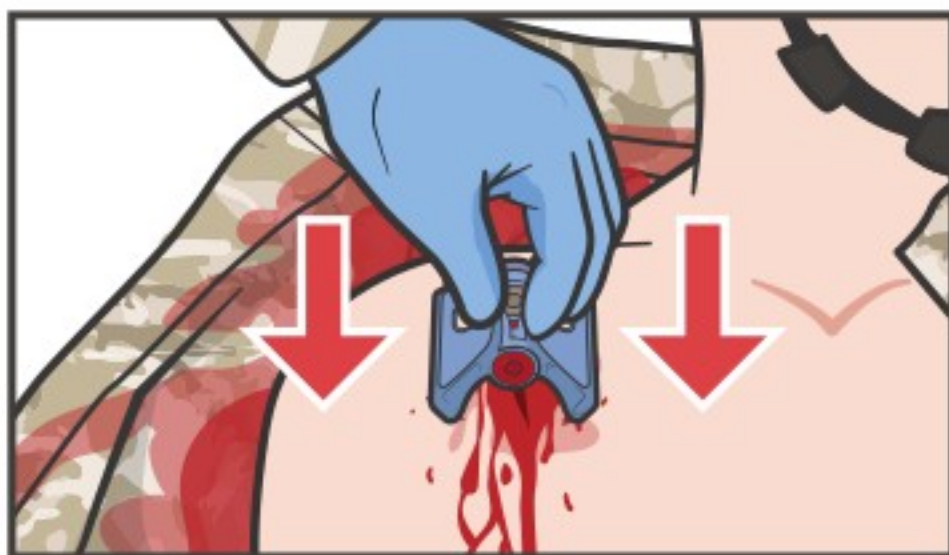


06 Розмістіть голки на відстані 1-2 см від краю рани з обох боків.

07 Обережно вставте голки та закрийте пристрій, стиснувши важелі разом.

08 Після закриття пристрій автоматично фіксується на місці. Компресійні планки забезпечують щільне ущільнення.

ПРИМІТКА. Пломба пристрою зруйнується під час застосування тиску.

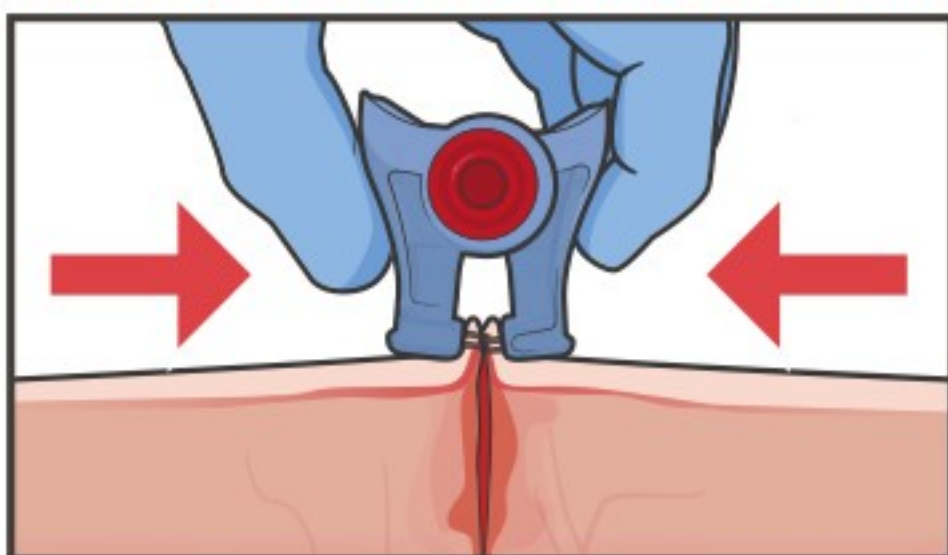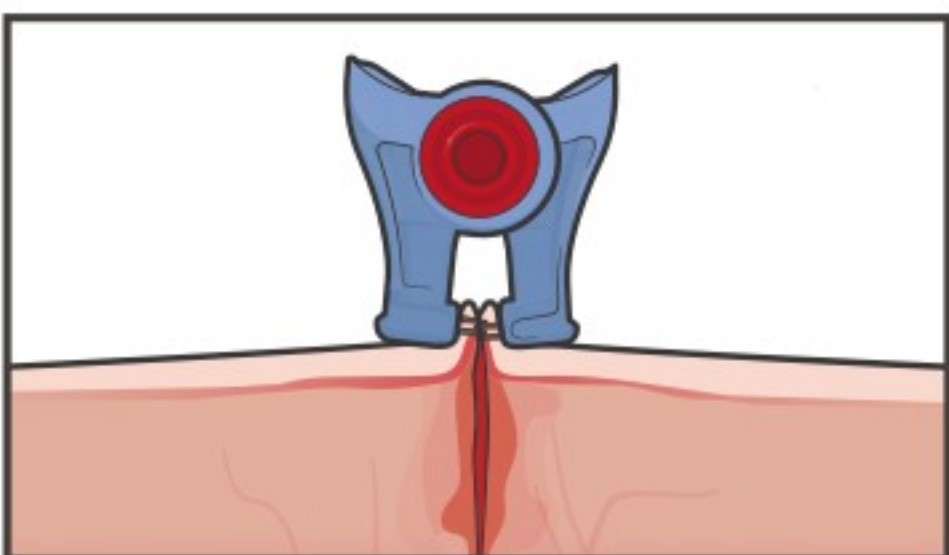

09 Переконайтеся, що рана закрита, немає відкритих ділянок і кровотеча зупинилася.

10 Якщо кровотеча продовжується, закрийте пристрій щільніше. Також можна видалити та змінити положення пристрою, використовувати більше ніж один пристрій або обробити область кровоспинним засобом. Також рекомендується XSTAT.

11 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.