




Одноручне застосування джгута - брашпиль (Windlass)

Догляд під вогнем

Лікуйте лише негайно небезпечні для життя рани. Решта допомоги призначена для етапу тактичної польової медицини.

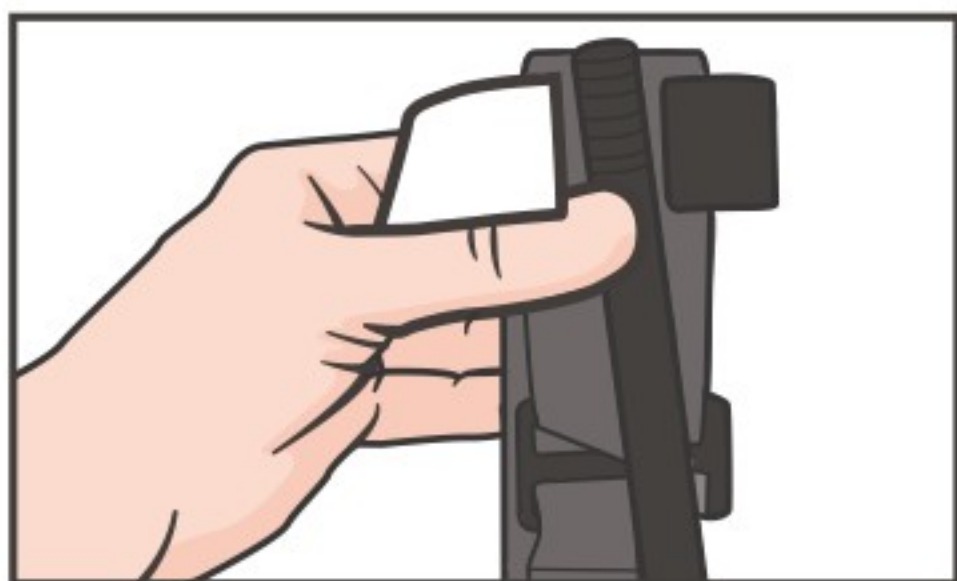


01 ЗНЯТИ джгут із набору або сумки для транспортування.



02 ВСТАВТЕ поранену кінцівку через петлю самоклеїться стрічки.



03 РОЗТАШУЙТЕ джгут над місцем кровотечі, високо на кінцівці, поверх одягу.

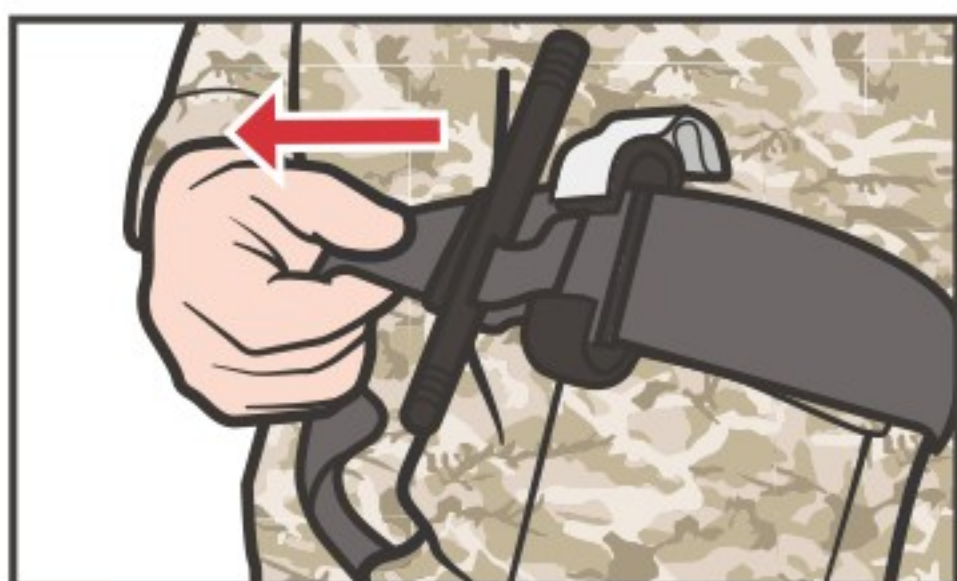

04a ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЧИ ВСЯ слабина джгута знята, перш ніж знову покласти липучку на підкладку.




04b Поверніть липучку назад на себе навколо кінцівки, але НЕ на затискачах стрижня брашпиля.



05 КРУТИТЬ стрижень, поки кровотеча не зупиниться. ВИКОНАЙТЕ кроки 1-5 менш ніж за 1 хвилину.




06 ЗАфіксуйте стрижень брашпиля за допомогою затискача брашпиля.

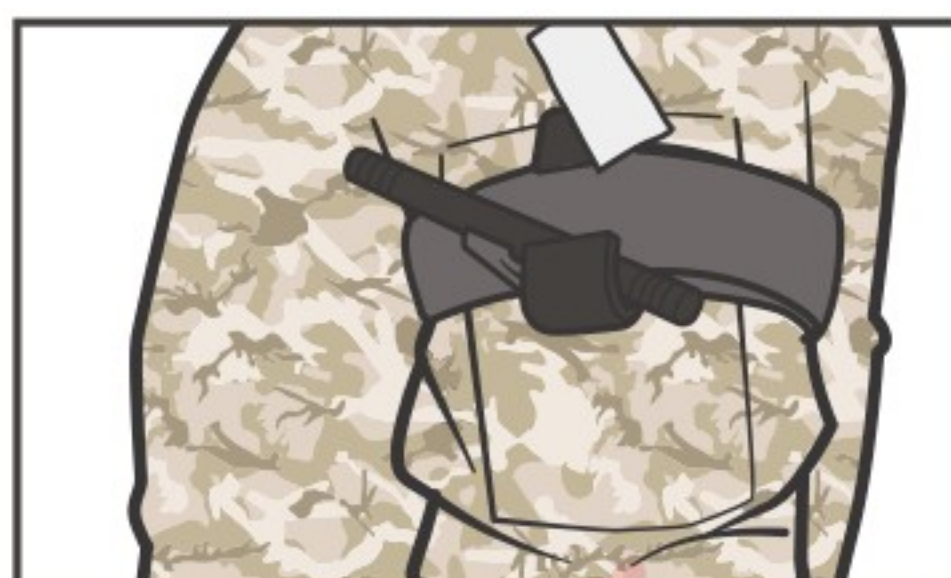

07 Проведіть липучку навколо стрижня та між затискачами.



08 ЗАКРІПНІТЬ запобіжний ремінь брашпиля.

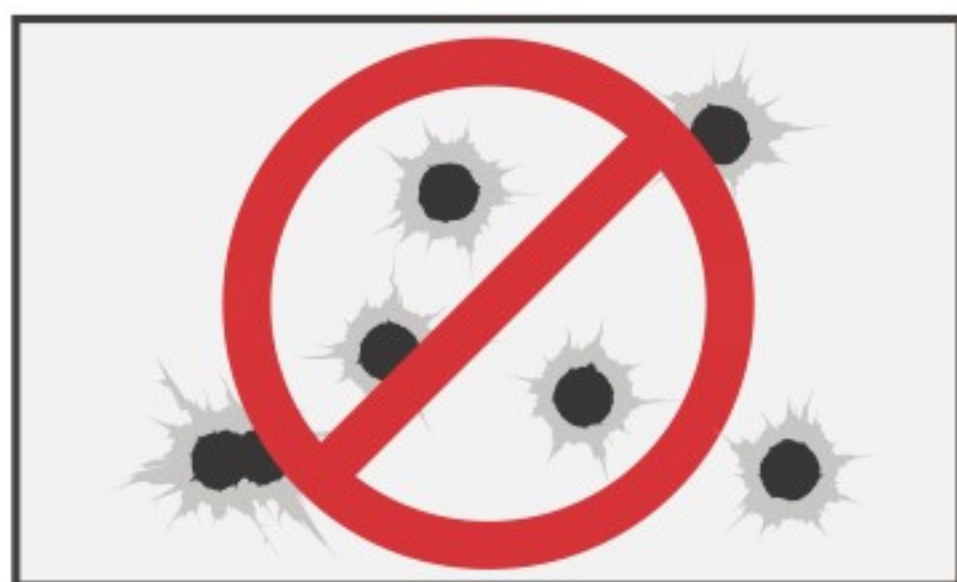

09 Якщо іншої великої кровотечі немає, ПЕРЕМІСТИТЬСЯ В УКРИТТЯ.

ПРИМІТКА. НЕ документуйте час накладення джгута до етапу польової медицини.