
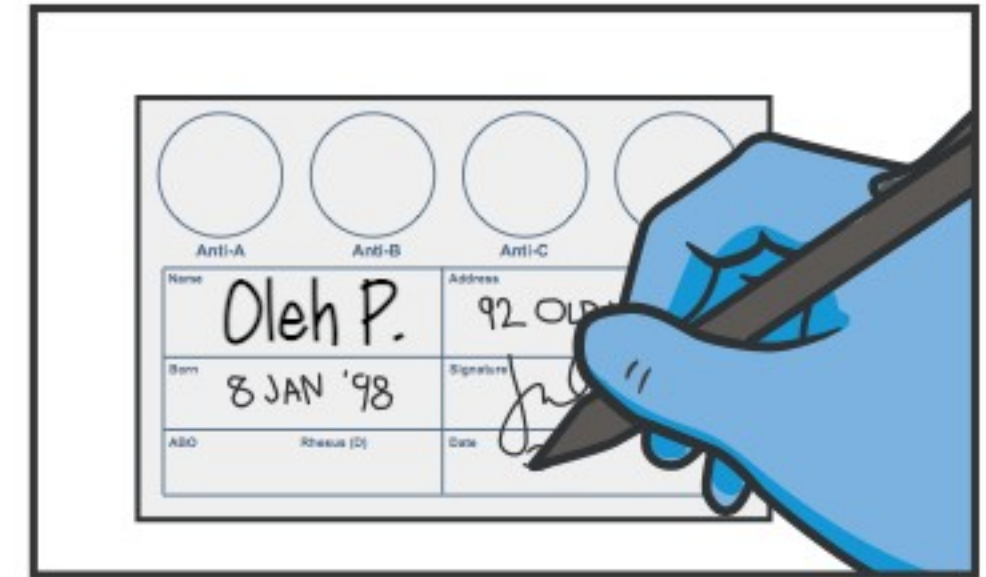


ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ -
EldonCard®Інструкція з визначення групи
крові при наданні допомоги в
польових умовах



Розгляньте можливість використання
медичних рукавичок для захисту. Якщо є
МЕДИК, попросіть його допомоги.

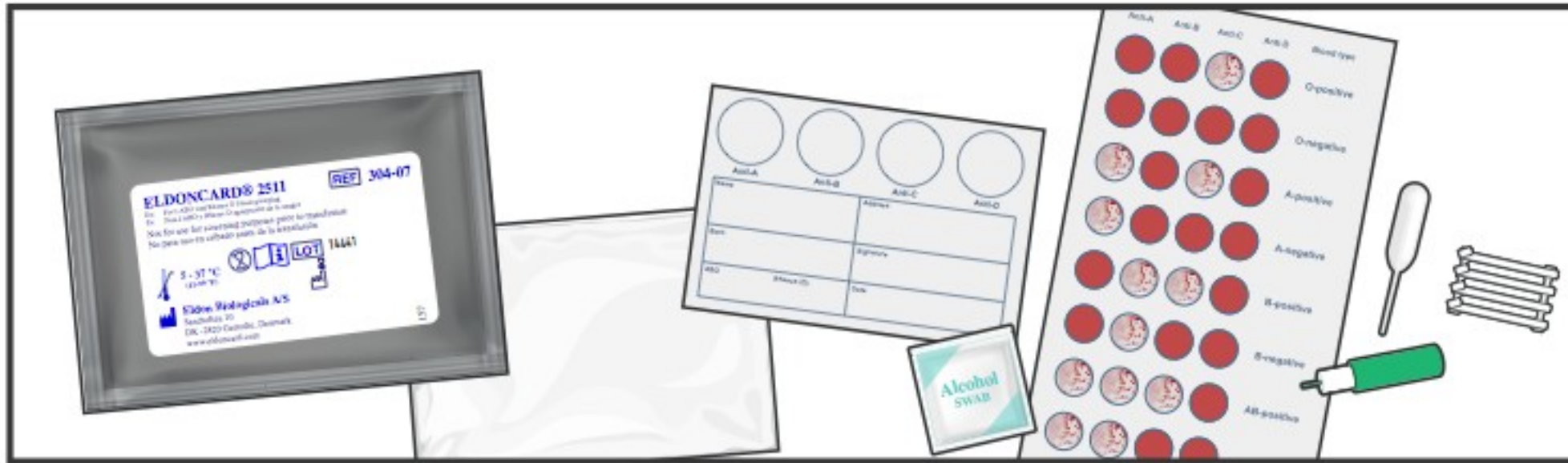

- 01** Зберіть необхідні припаси.
1. Чиста вода (з їдальні) 2. Набір для визначення групи крові - EldonCard®, ланцет, спиртовий диск, крапельниця для води, картка з інструкціями - Eldon®, Eldon Sticks® (4 або більше), пластикова кришка
 3. Для захисту використовуйте медичні рукавички.

- 02** Перевірте набір груп крові - EldonCard® на наступне -
1. Зовнішній вигляд
 2. Термін придатності
 3. Вміст завершено.




- 03** Задokumentуйте особисту інформацію донора або реципієнта на EldonCard® -
1. ПІБ 2. Адреса
 3. Дата НАРОДЖЕННЯ
 4. Дата ТЕСТУ
 5. Підпис донора/реципієнта

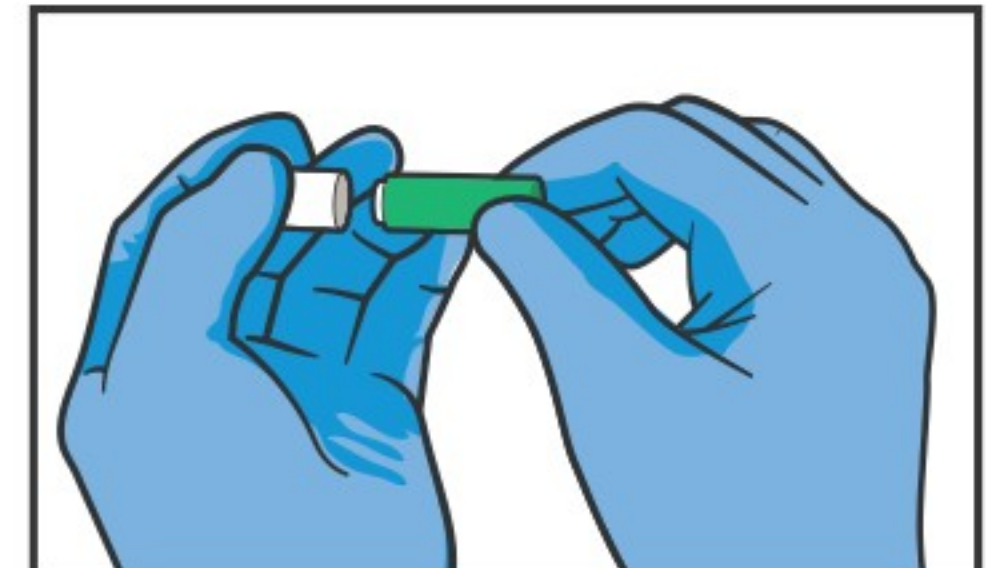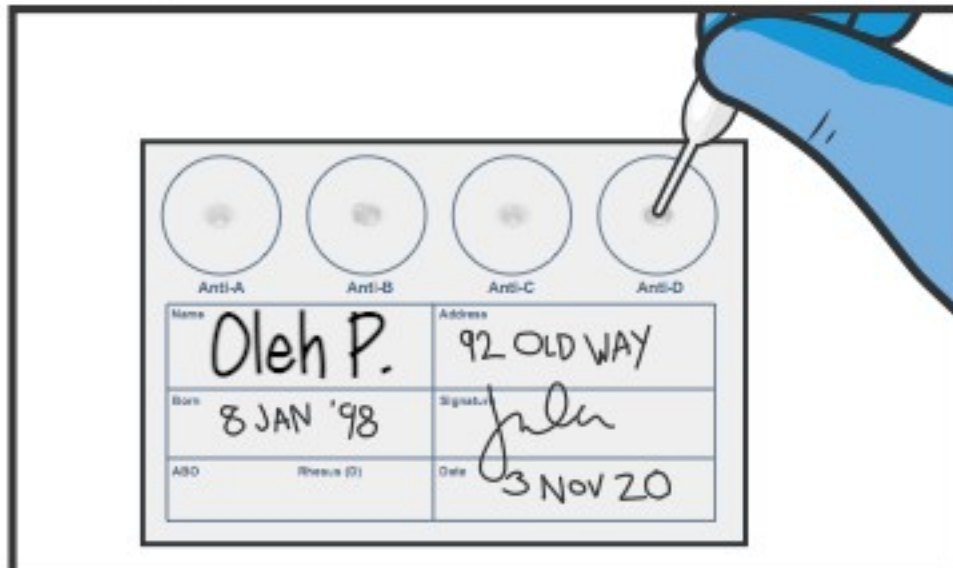

- 04** Наповніть крапельницю чистою водою.
- 05** Помістіть ОДНУ (1) краплю води на кожне коло EldonCard®.

- 06** Використовуйте спиртову серветку, щоб продезінфікувати кінчик пальця донора/реципієнта. Бажано недомінуючу руку.

- 07** Знайдіть і відкрийте ланцет, повернувши верхню частину.

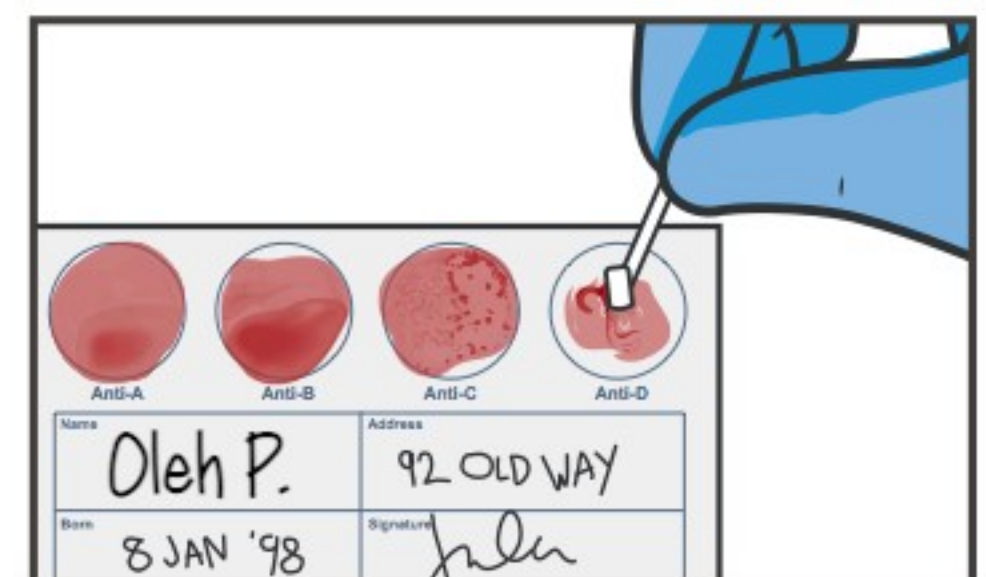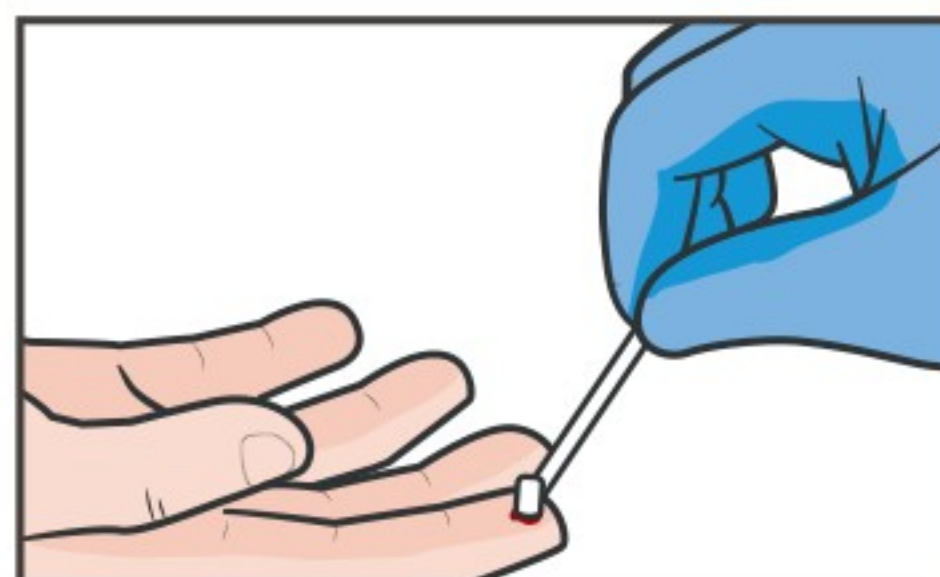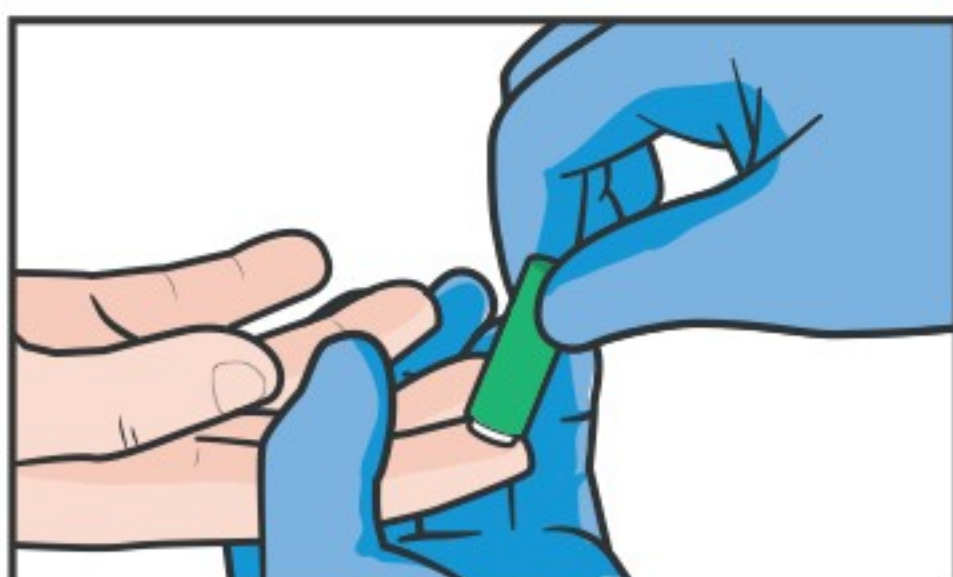

- 08** Щільно притисніть ланцет до подушечки пальця донора/реципієнта, щоб взяти кров. Утилізуйте ланцет у тому ж контейнері, що й гострі предмети.

- 09** Стисніть кінчик пальця донора в місці проколу, використовуйте один (1) EldonStick®, щоб взяти невелику кількість донорської крові.

- 10** Помістіть кров із EldonStick® у перше коло на EldonCard®. Змішайте краплю з водою, розподіливши її до краю кола.

ПРИМІТКА - Перемішуйте приблизно 10 секунд.

КРОК 10 ПРИМІТКА - Повторіть кроки 9 і 10 ще три рази, по одному разу для кожного кола, що залишилося на EldonCard®.

КРОК 10 ПРИМІТКА - Використовуйте новий EldonStick® для кожного кола на EldonCard®. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ жодного EldonStick®. Це призведе до недійсності тесту через змішування реагентів, які повинні залишатися окремо в кожному колі.