













НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТА З ЗУБЧАСТИМ МЕХАНІЗМОМ ДВОМА РУКАМИ ДОПОМОГА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (TFC)



РОЗКРИЙТЕ та ОГЛЯНЬТЕ місце поранення




ВИЙМІТЬ турнікет з тактичної індивідуальної аптечки пораненого та/або з його підсумка




ПРОСУНЬТЕ поранену кінцівку крізь петлю ременя турнікета (турнікет у вигляді замкнутої петлі).




ОБГОРНІТЬ турнікет навколо кінцівки, протягніть вільний кінець через пряжку.

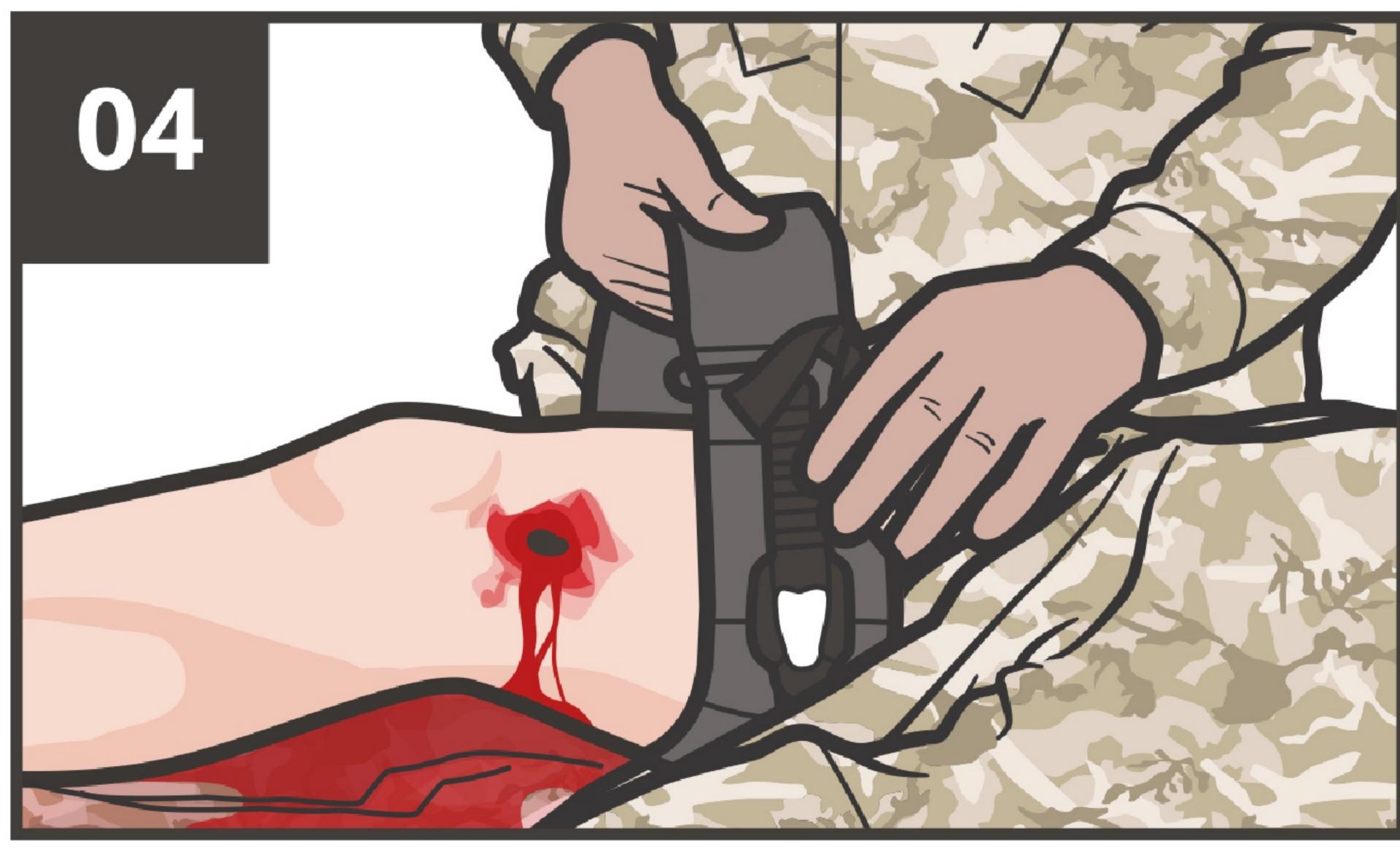


РОЗМІСТІТЬ турнікет на 5-8 см вище рани безпосередньо на шкіру.

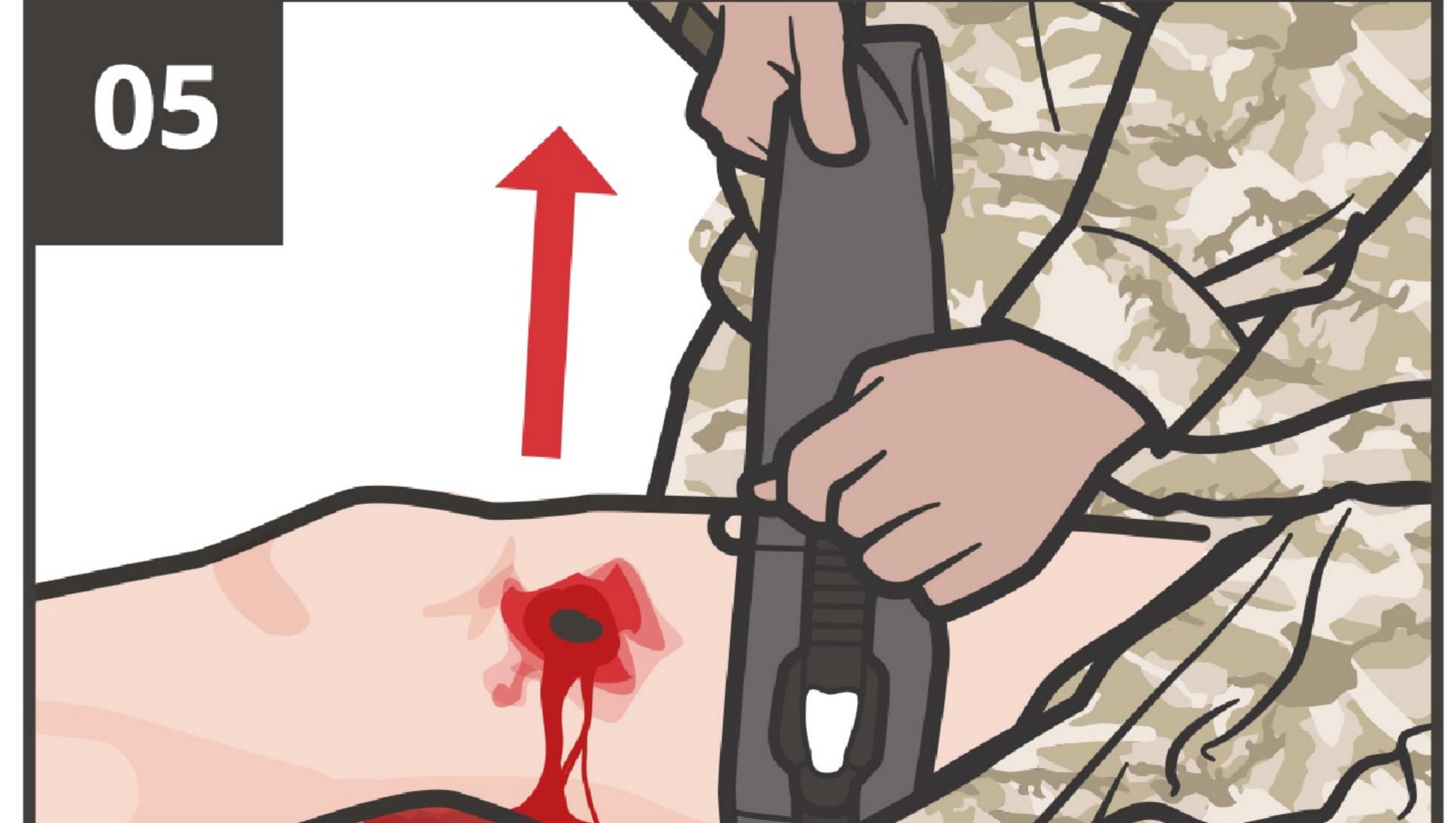


ЗАТЯГНІТЬ ремінь якомога СИЛЬНІШЕ, аби уникнути його провисання.

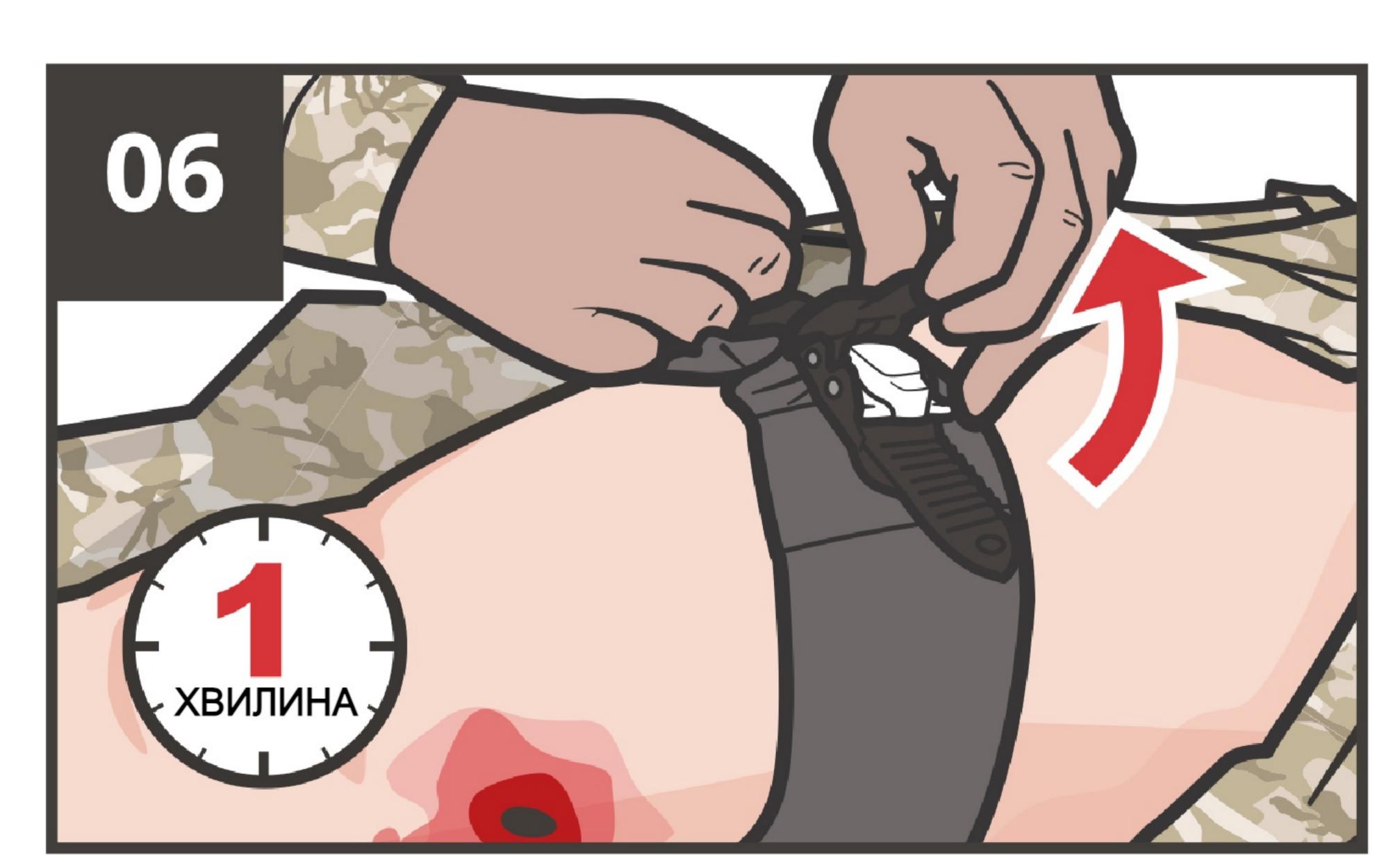

ЗАТЯГНІТЬ зубчастий механізм якомога щільніше до зупинки кровотечі (виконайте кроки 1-6 менш, ніж за 1 хвилину).

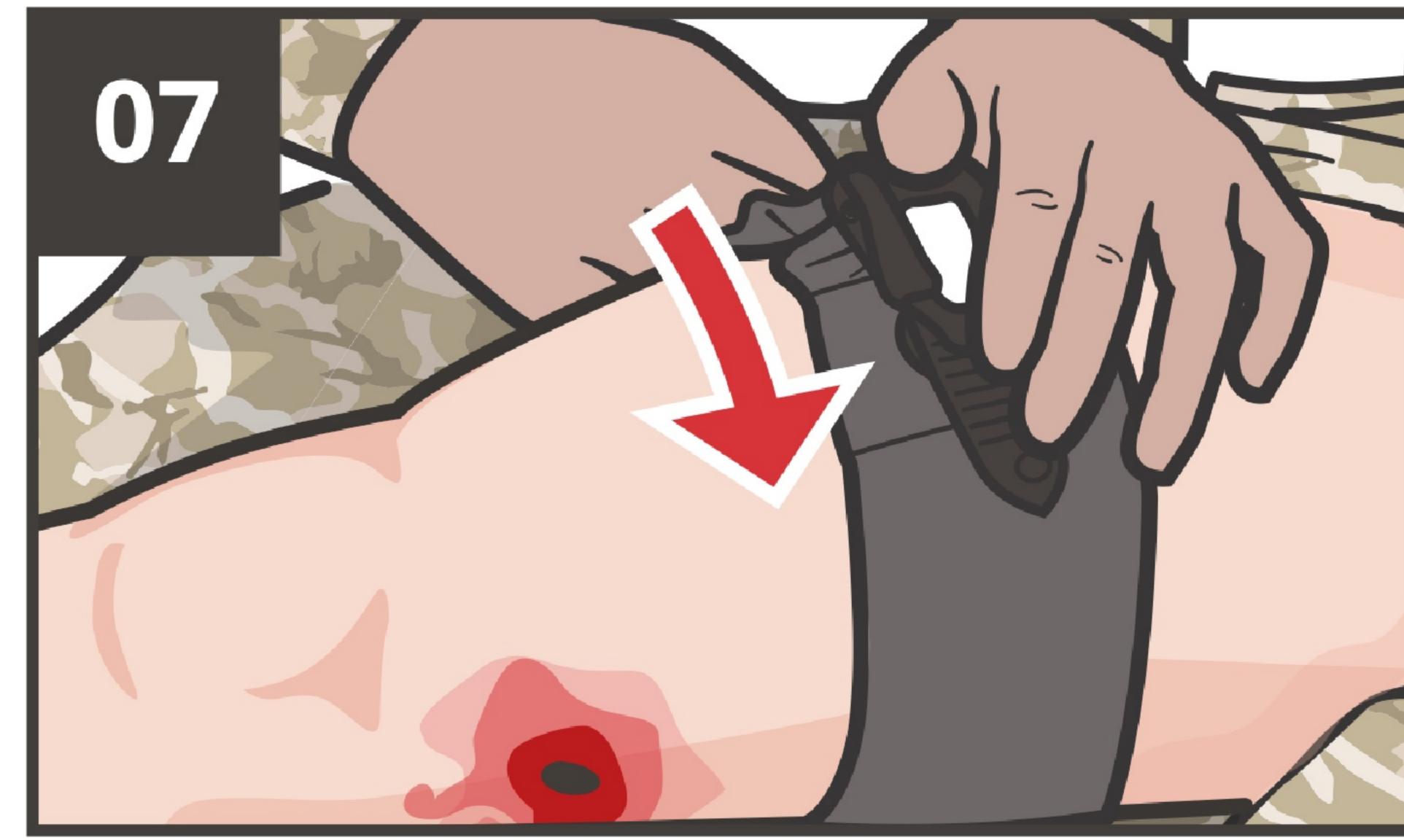


ЗАФІКСУЙТЕ зубчастий механізм (він стане на місце з характерним клацанням).

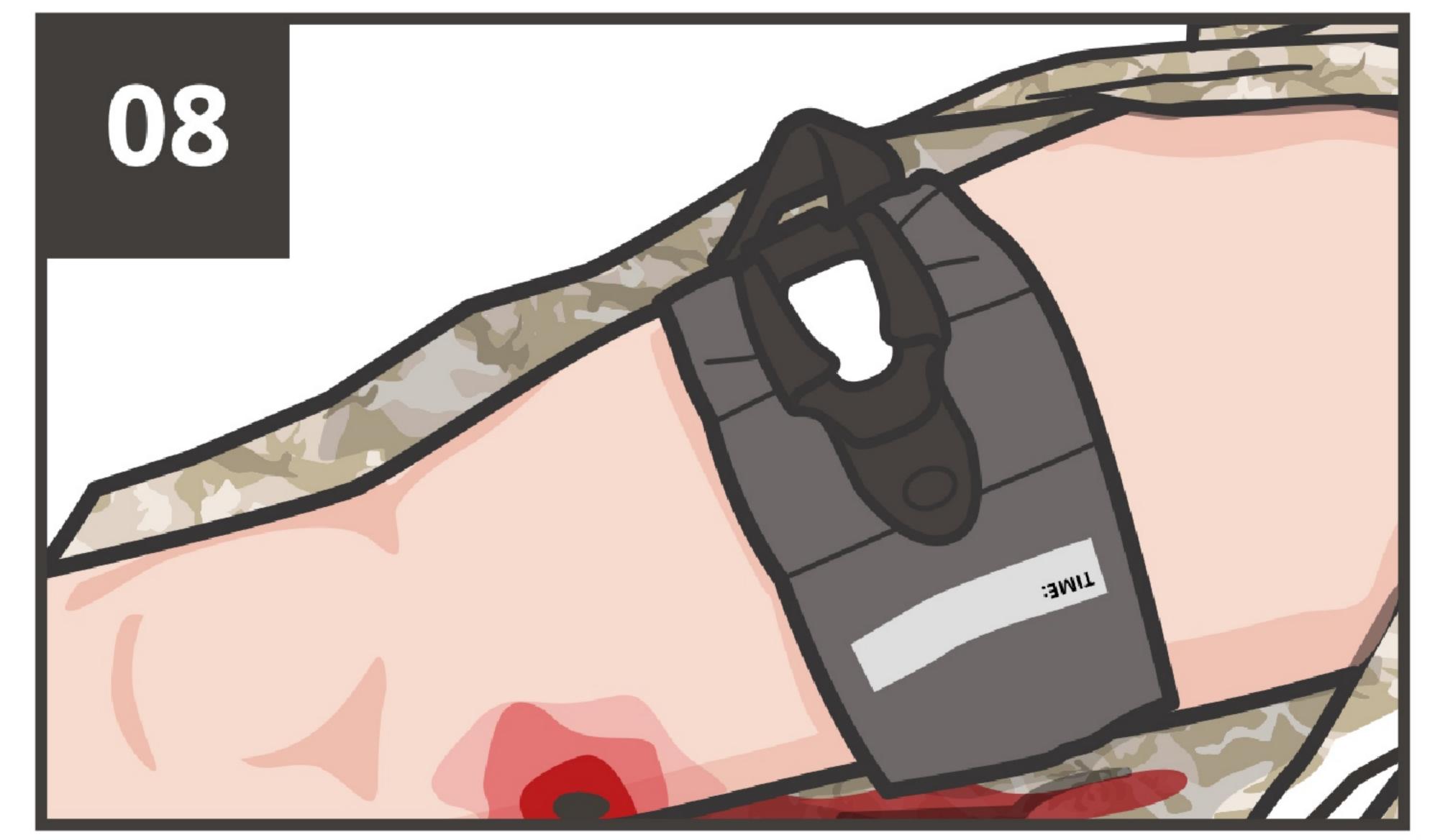

Вільний кінець ременя ОБГОРНІТЬ навколо зубчастого механізму і зафіксуйте.



ЗАПИШІТЬ час накладання турнікета на білій стрічці.

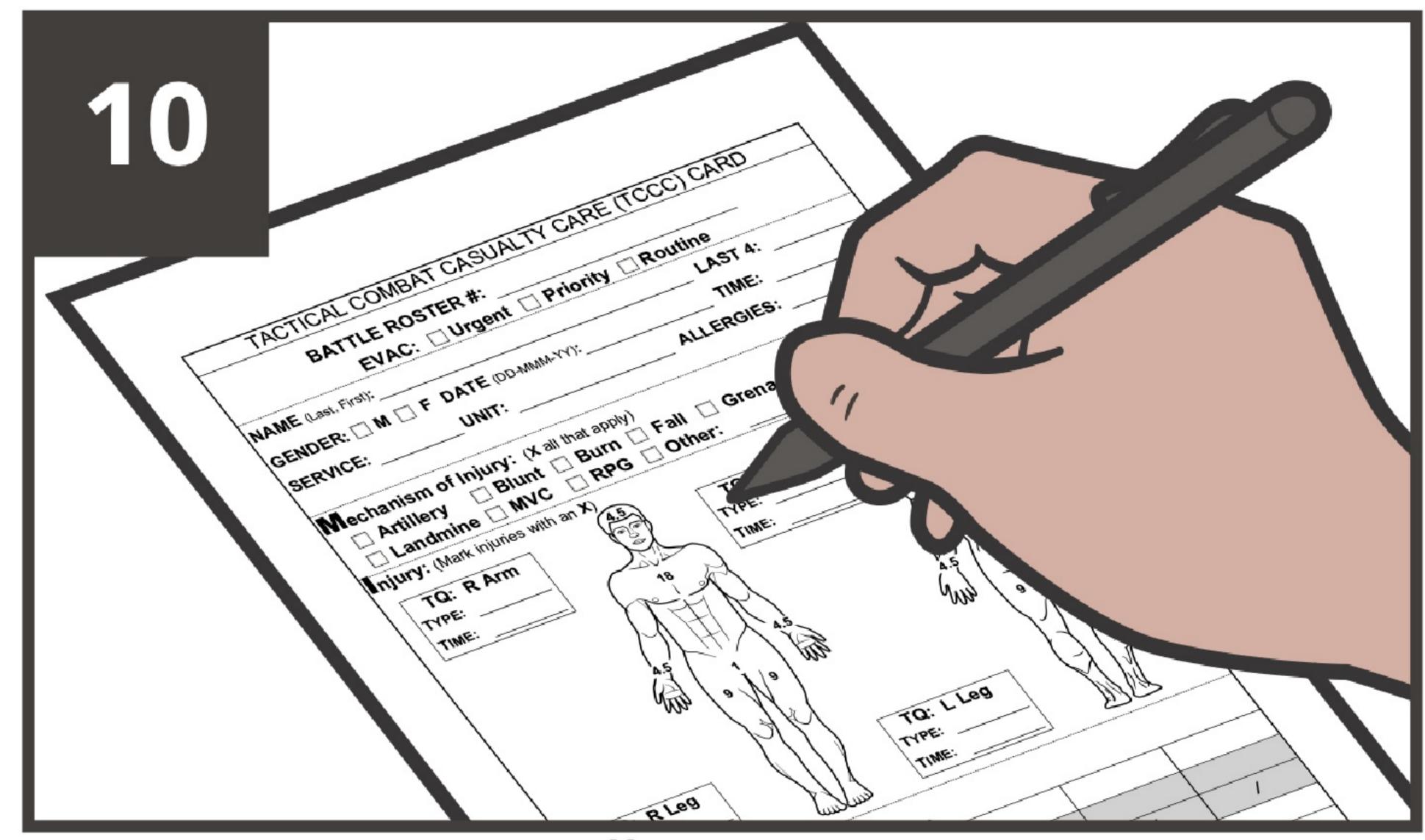

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 і прикріпіть до її до постраждалого.