


Стернальний внутрішньокістковий


FAST1 IO - Sternal Intraosseous




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

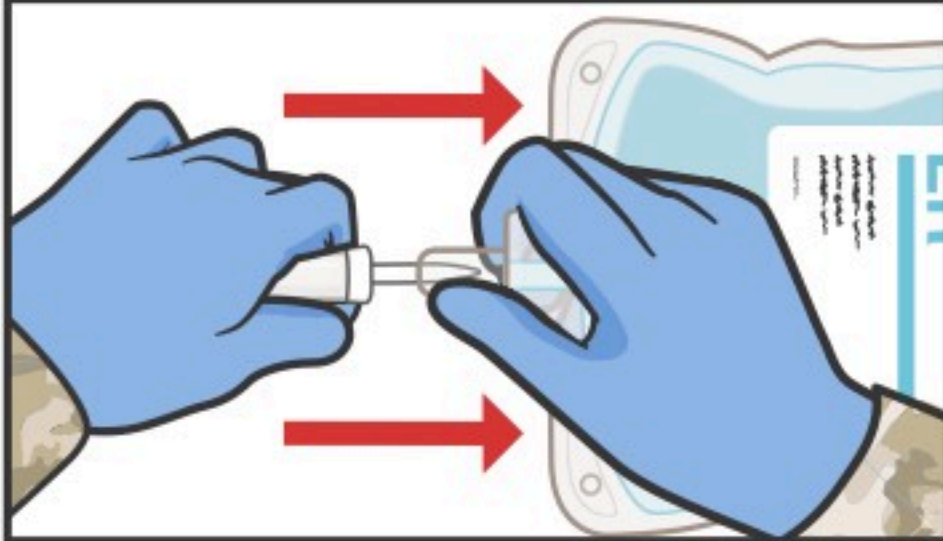

02 Підготуйте трубку, прикріпіть до пакета для внутрішньовенної інфузії.

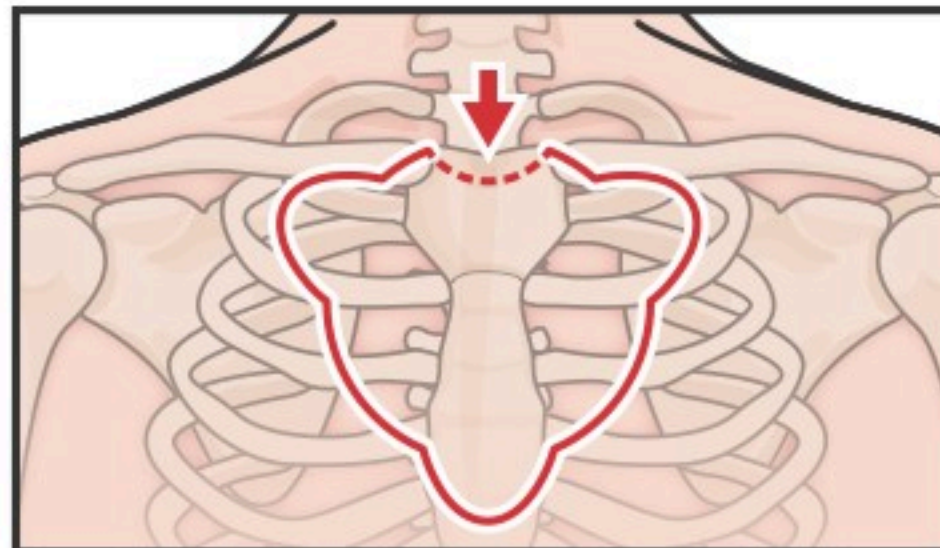


03 Знайдіть надгруднинну виїмку.

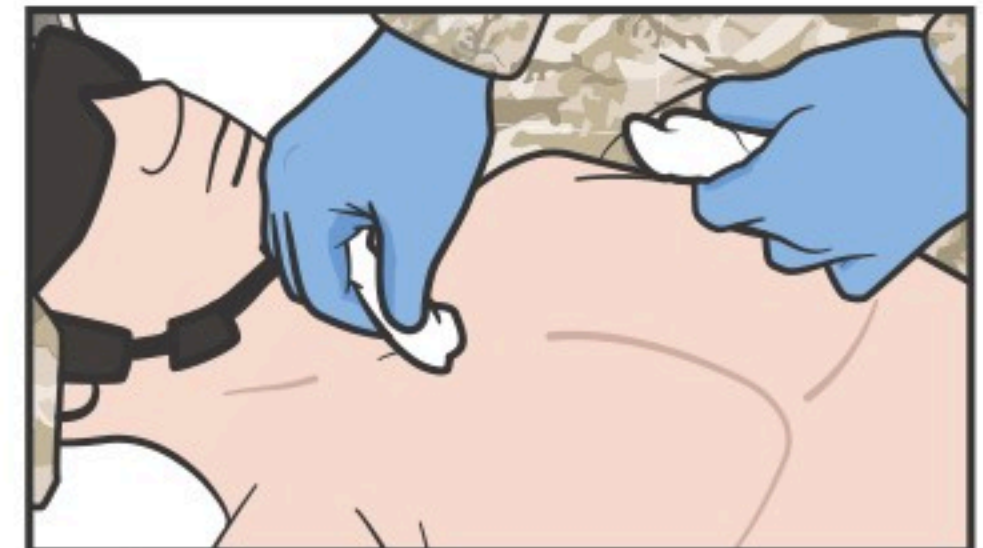

04 Очистіть місце спиртом або повідон-йодом.



05 Зніміть верхню половину клейкої основи цільового пластиру. Розташуйте пластр на надгруднинній вирізці, потім зніміть нижню половину підкладки.

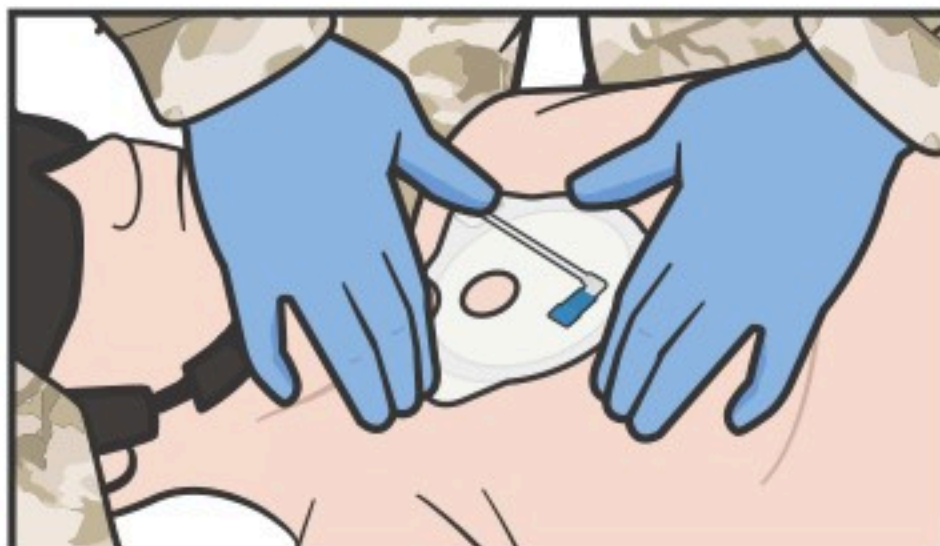


06 ПЕРЕВІРТЕ цільову ділянку, переконавшись, що цільова зона знаходиться по середній лінії над манубрієм.




07 Зніміть кришку з пристрою FAST1 і помістіть кластер голки в цільову зону пластиру.




08 Зберігайте кут 90 градусів до грудей, застосовуючи пучок голок (інтродьюсер).

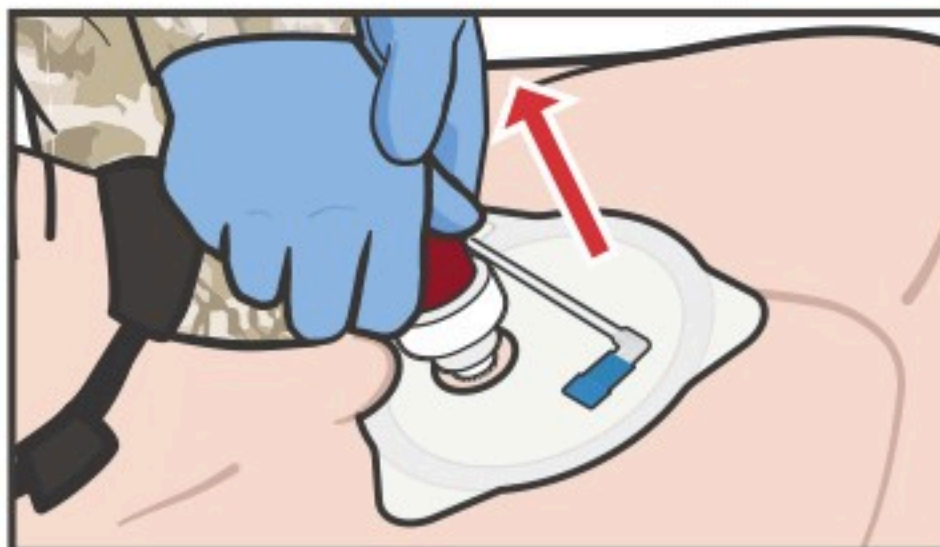

09 Збільшуйте тиск на інтродьюсер пучка голок прямо вниз, доки не відчуєте та не почуєте відпуск.

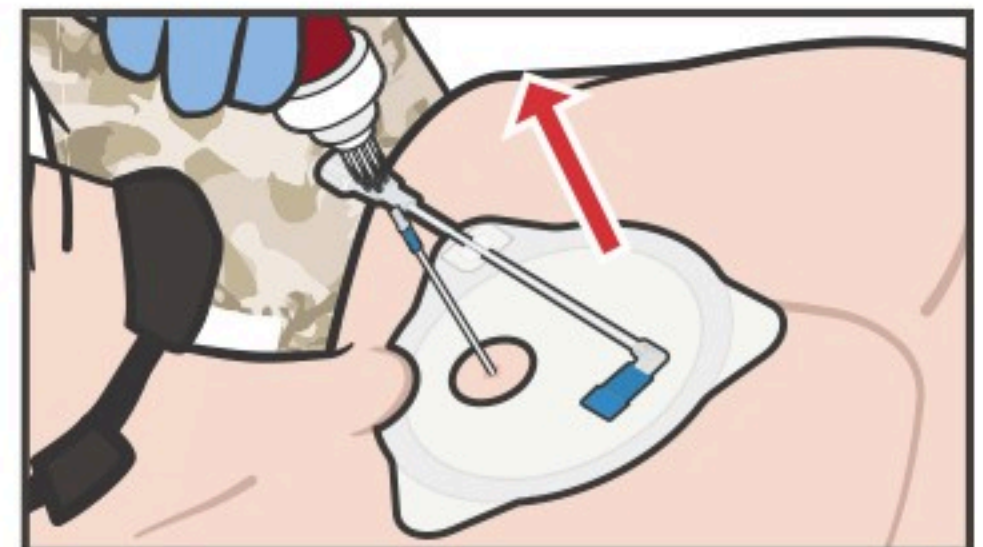

10 Обережно вийміть інтродьюсер, потягнувши прямо назад.

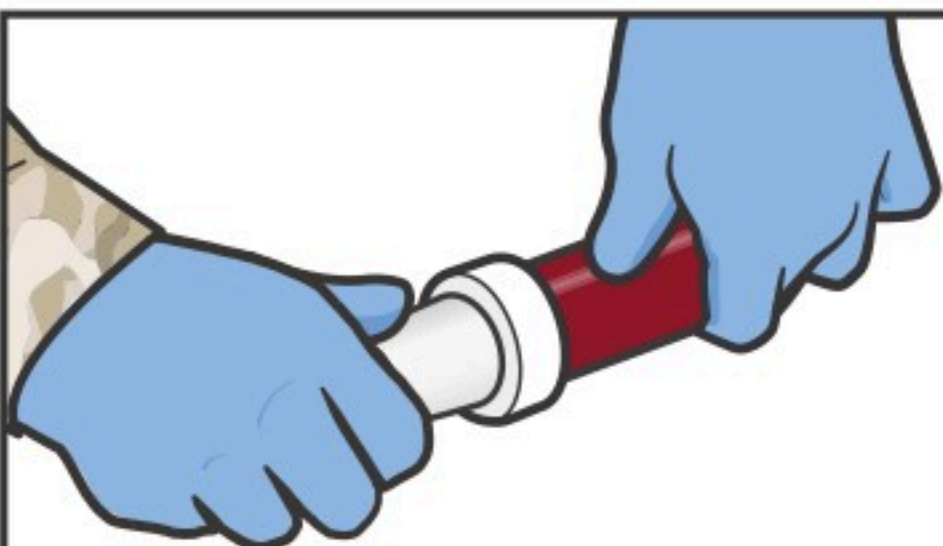

11 Вставте голки інтродьюсера в поролонову пробку, яка входить в комплект поставки. Утилізуйте, як і гострі предмети, у відповідний контейнер.




12 Під'єднайте інфузійну трубку до кутового роз'єму на патчі.

продовження на наступній сторінці...


Стернальний внутрішньокістковий

FAST1 IO - Sternal Intraosseous

Продовження зі сторінки 1

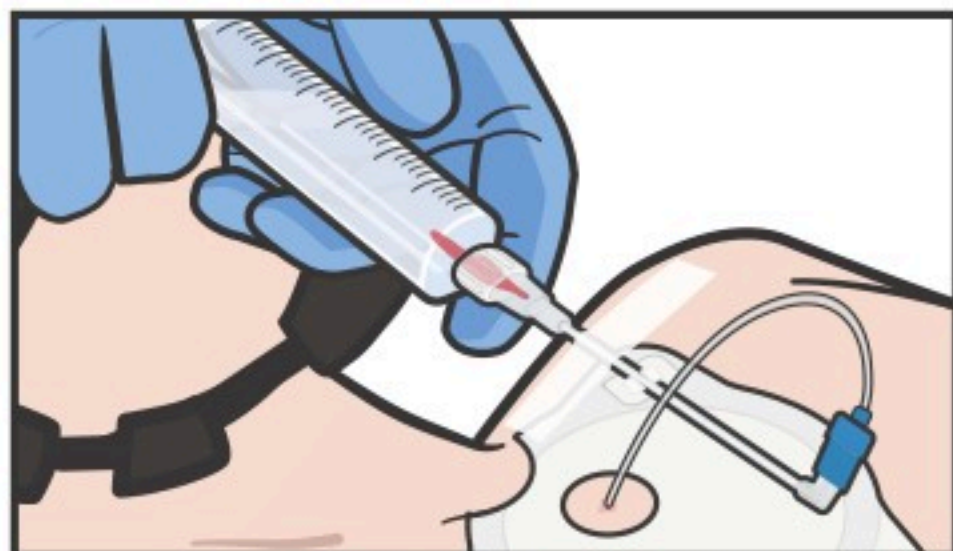

- 13** Під'єднайте шприц і аспіруйте, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку – має бути спалах матеріалу з відтинком крові.

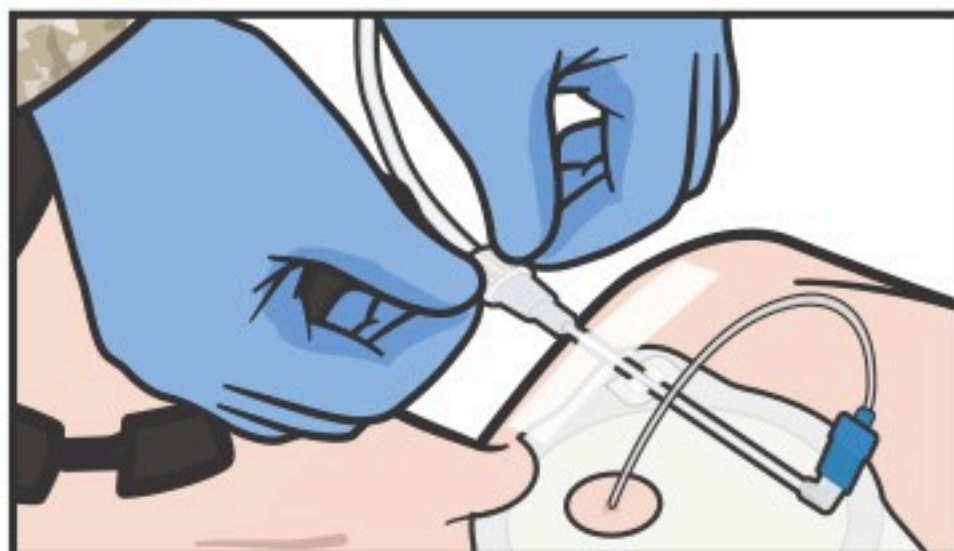


- 14** Підключіть внутрішньовенну трубку та запустіть потік рідини.




- 15** Прикріпіть захисний купол до цільової накладки та закріпіть скотчем.

Промийте інфузійну трубку 5 мл стерильного розчину для внутрішньовенного введення. Необхідно очистити будь-яку закупорку кістки або тканини.

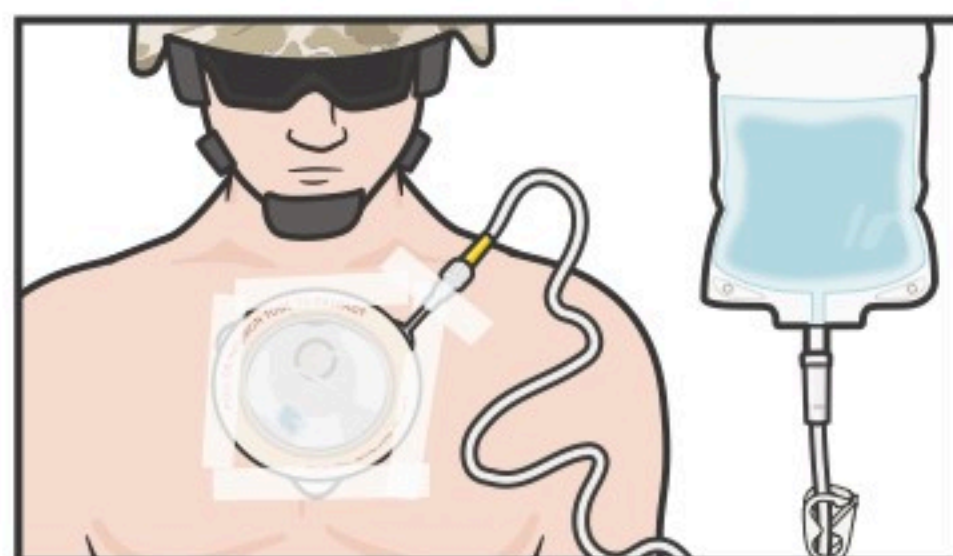

- 16** За потреби забезпечте рідиною або ліками.

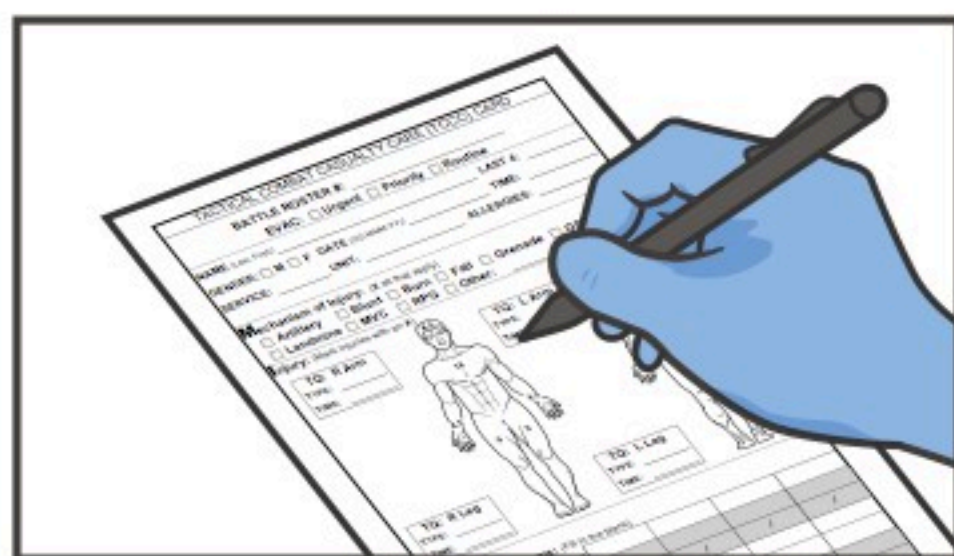

- 17** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.