



# Стернальний внутрішньокістковий

## FAST1 IO - Sternal Intraosseous

Продовження зі сторінки 1

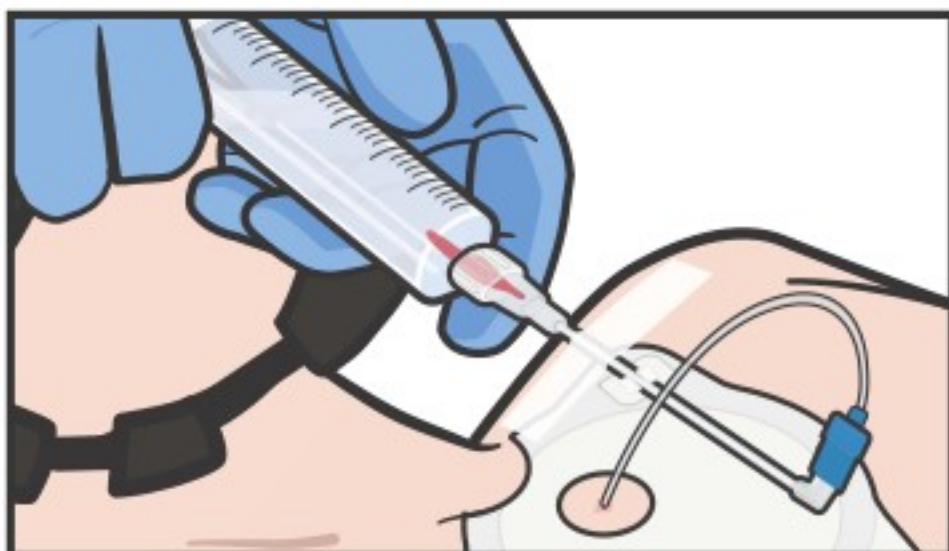

- 13** Під'єднайте шприц і аспіруйте, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку – має бути спалах матеріалу з відтинком крові.

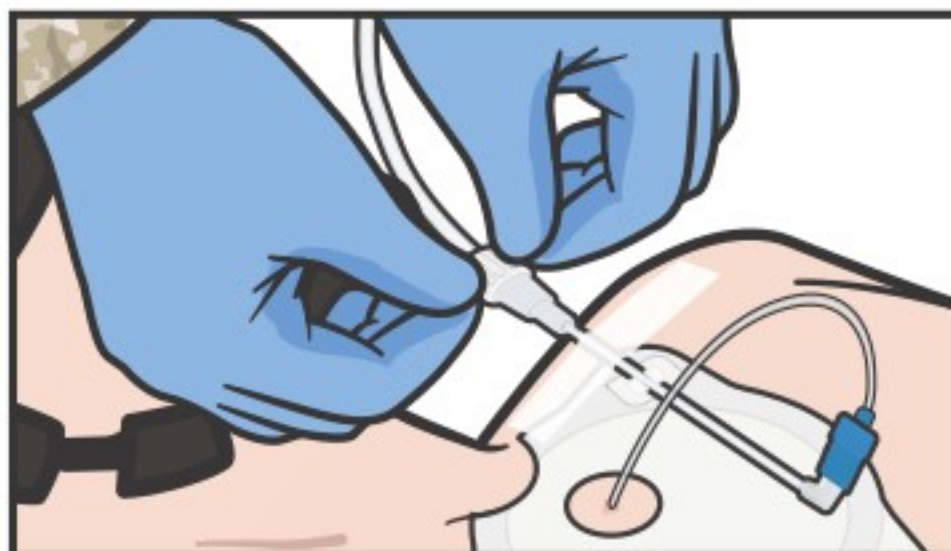


- 14** Підключіть внутрішньовенну трубку та запустіть потік рідини.




- 15** Прикріпіть захисний купол до цільової накладки та закріпіть скотчем.

**Промийте інфузійну трубку 5 мл стерильного розчину для внутрішньовенного введення. Необхідно очистити будь-яку закупорку кістки або тканини.**

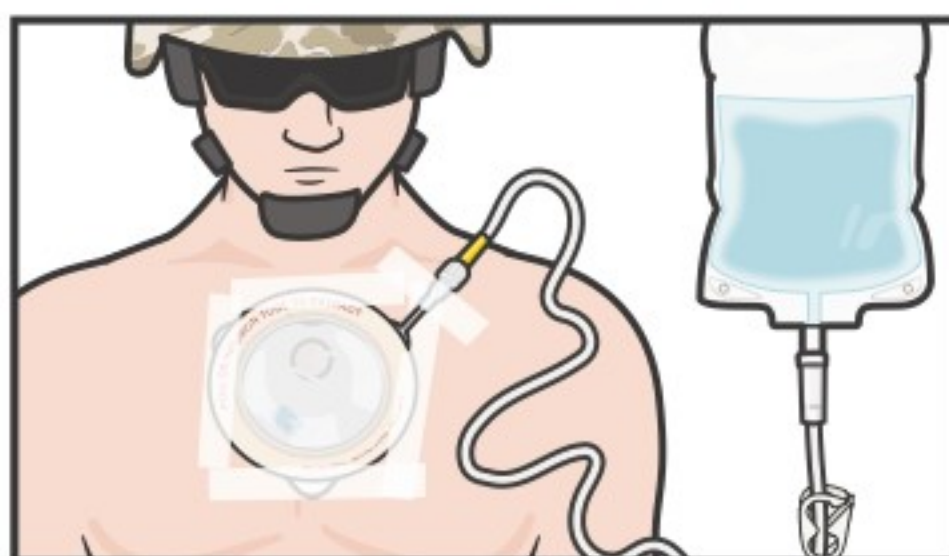

- 16** За потреби забезпечте рідиною або ліками.

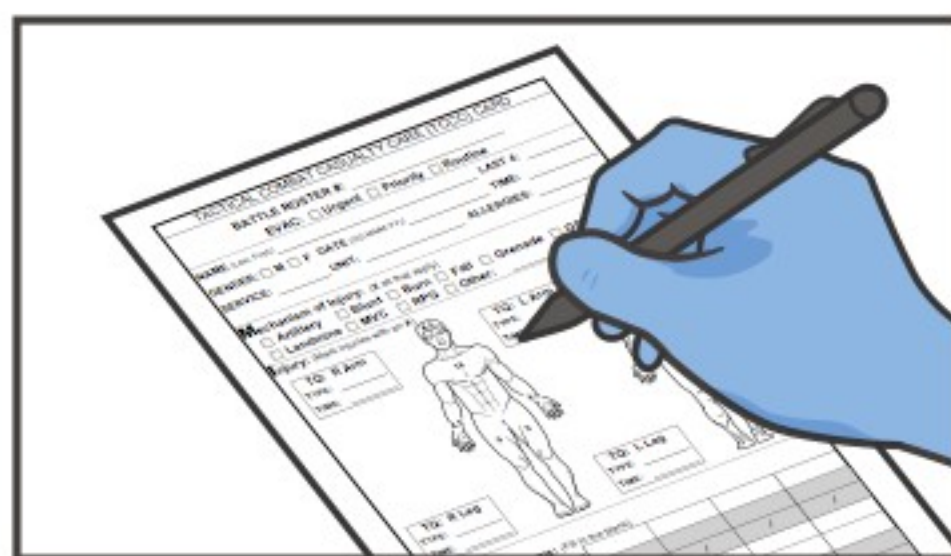

- 17** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.