


iTClamp - гемостатичного затискача

Як видалити пристрій - Продовження зі сторінки 1




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

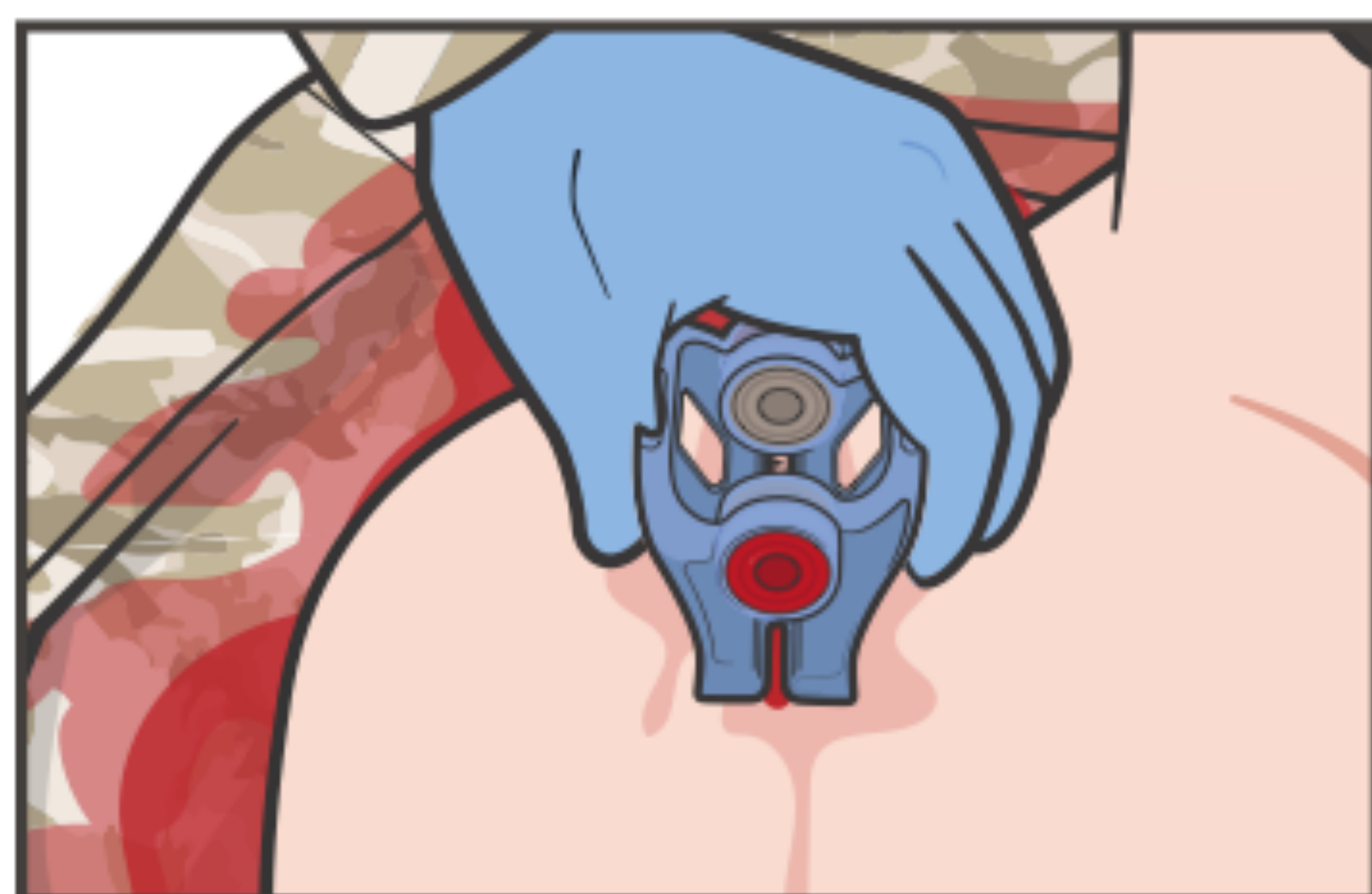

01 Візьміться за верхні кронштейни пристрою однією рукою.


ПРИМІТКА, щоб відкрити пристрій можна використовувати кнопки розблокування з обох боків пристрою.

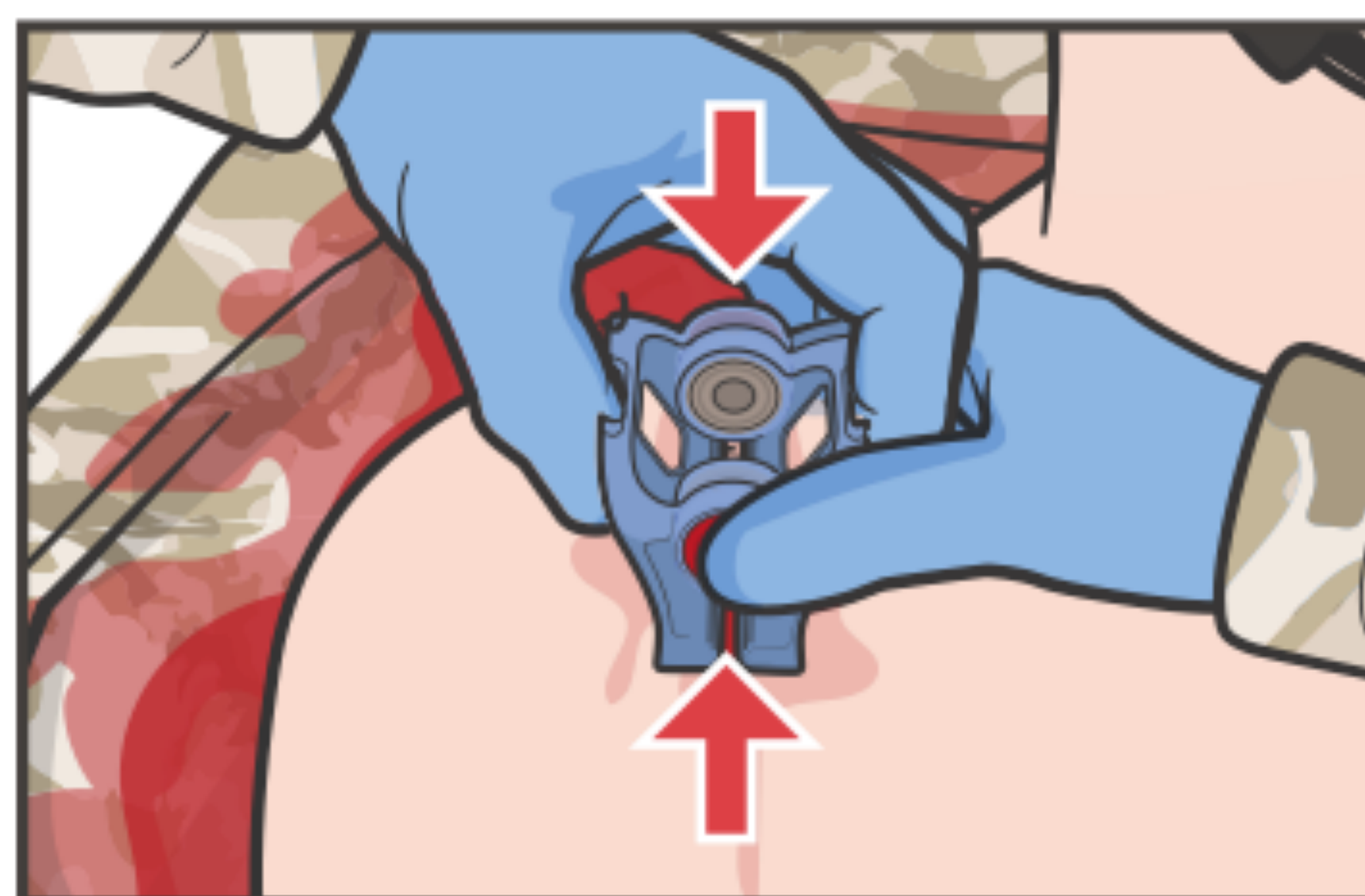


02 Натисніть червоні кнопки збоку пристрою, щоб розблокувати механізм блокування. Щоб відкрити пристрій, стисніть верхні плечі разом.

ПРИМІТКА. Це процес двома руками.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що утримування пристрою за кнопки під час виймання зменшує ризик випадкового контакту з голками.

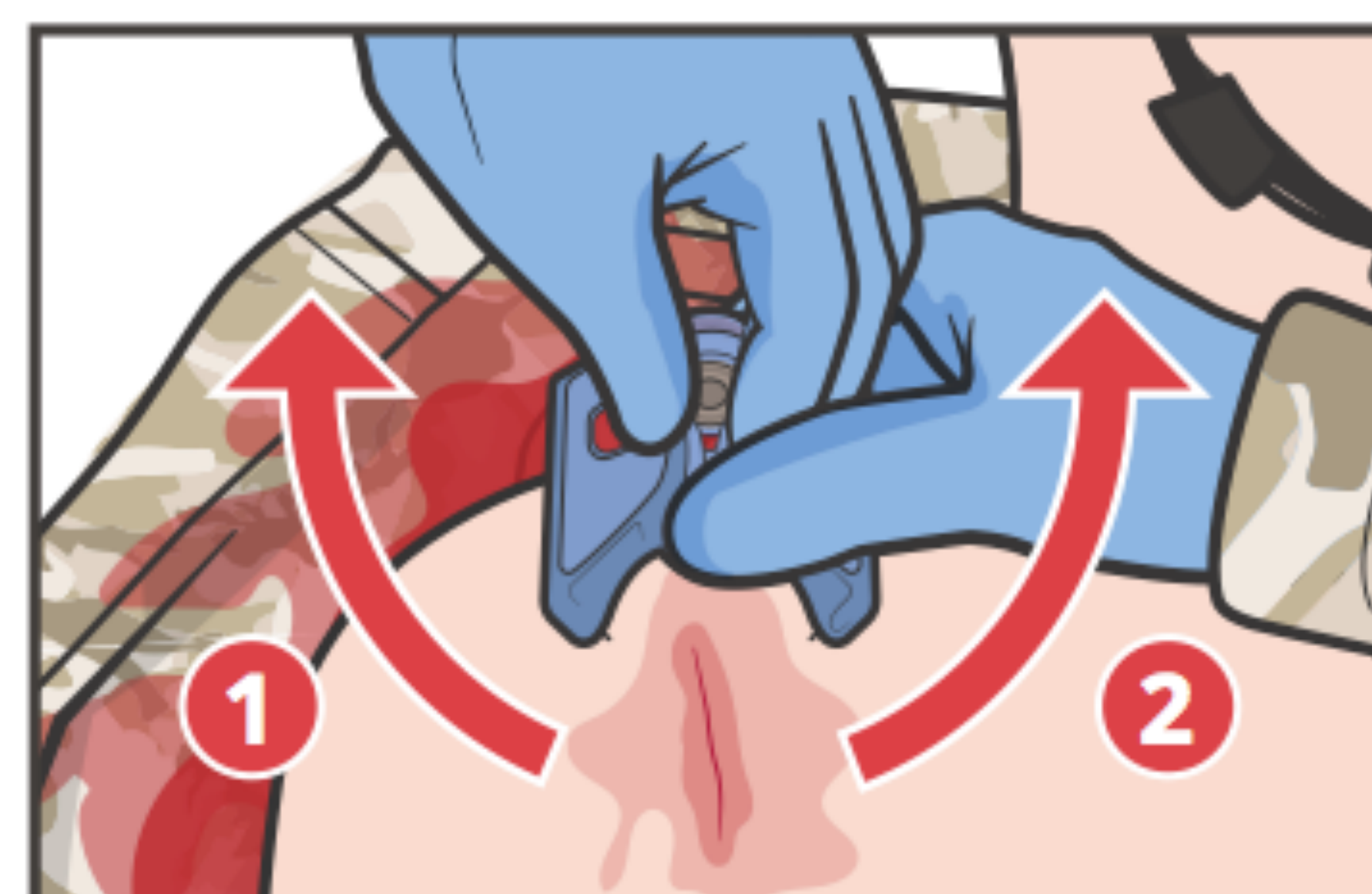


03 Потягніть одну з ручок, продовжуючи натискати кнопки, і вийміть голки з рани, обертаючи. Далі обертальними рухами вийміть голки з іншого боку. Одночасно вільно обертається лише одна рука.

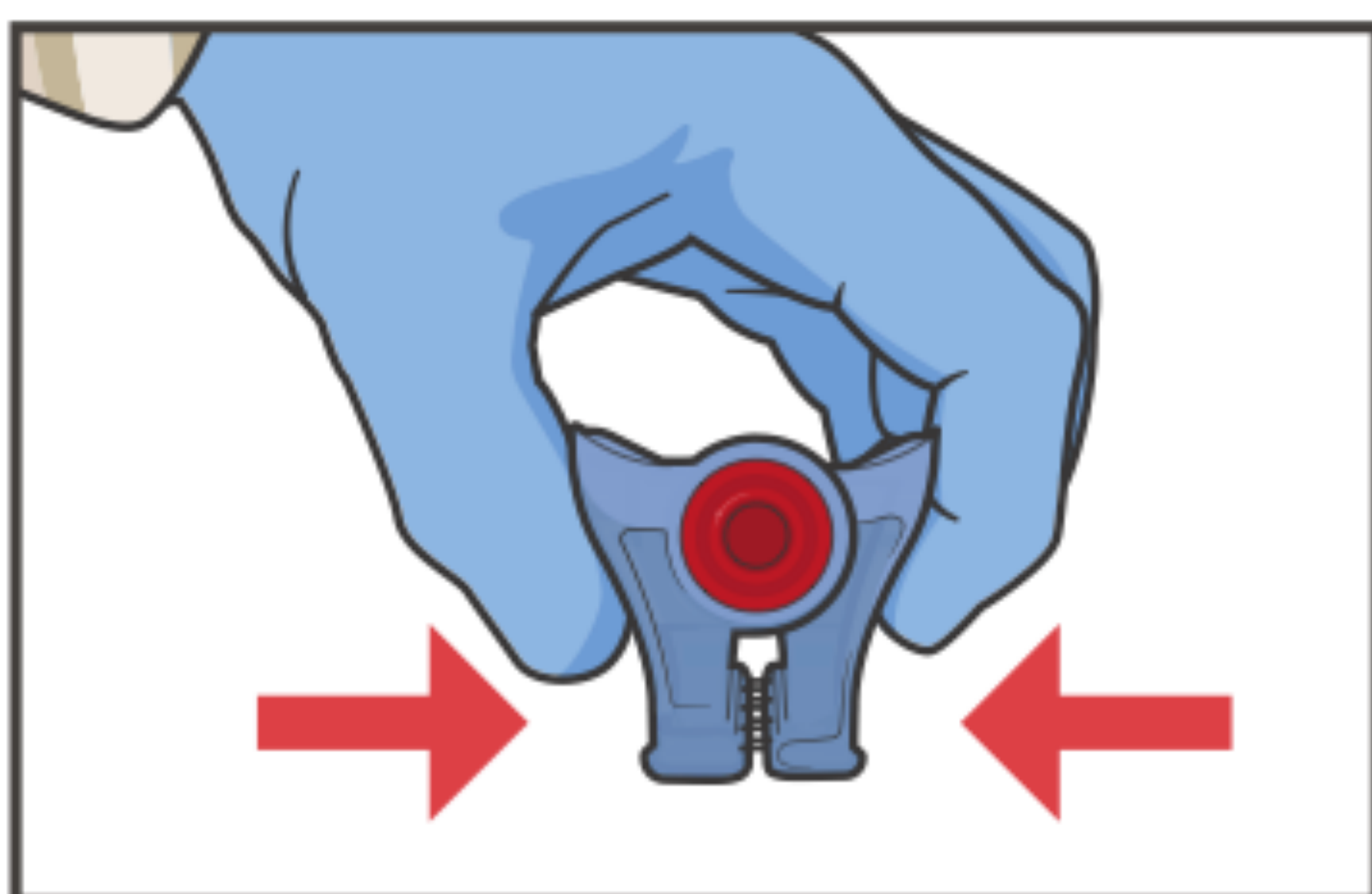

04 Закрийте пристрій, щоб запобігти випадковому уколу голкою, повністю закривши нижні ручки.

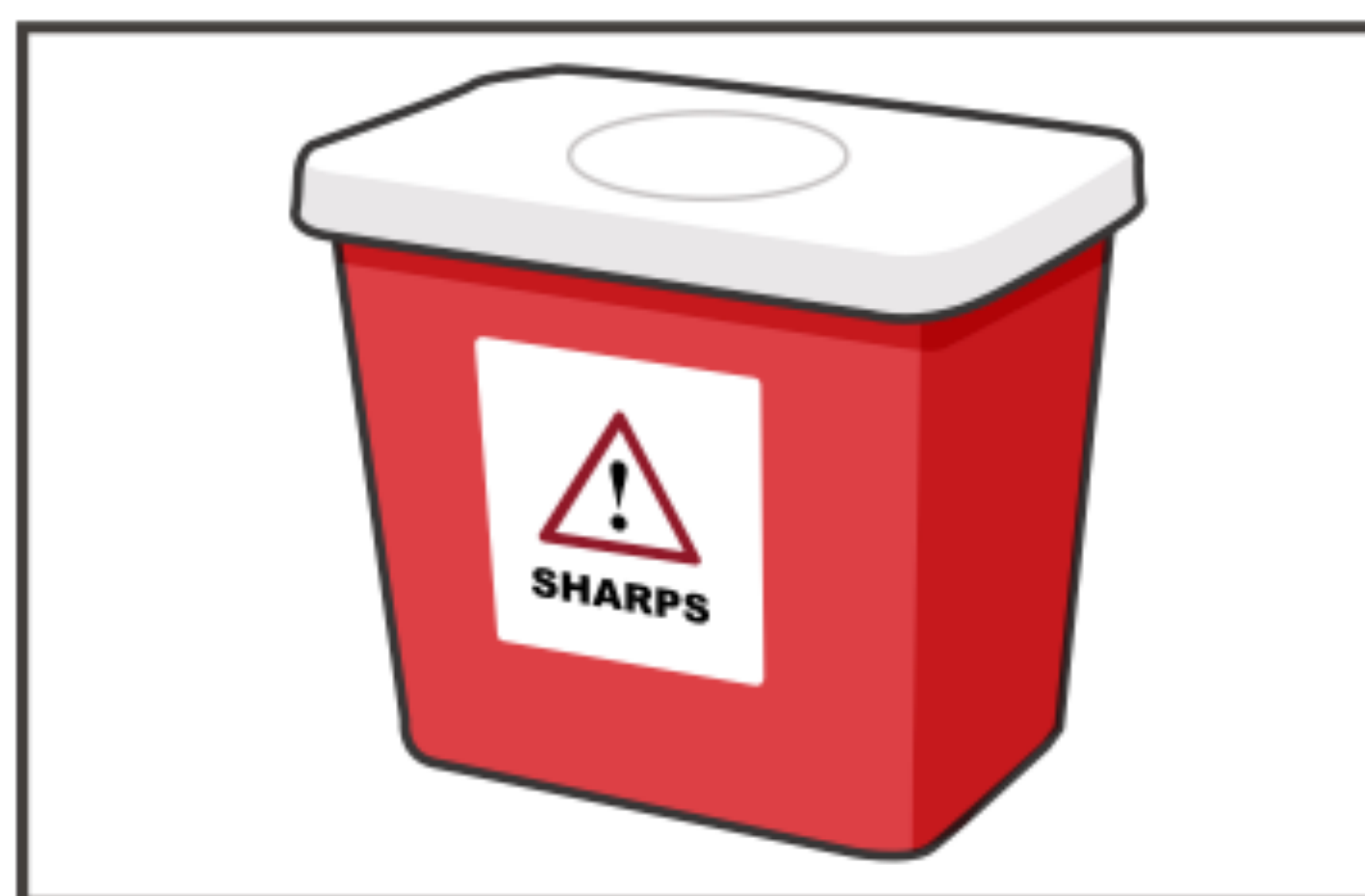

05 Утилізуйте аплікатор у тому ж контейнері, що й гострі предмети.

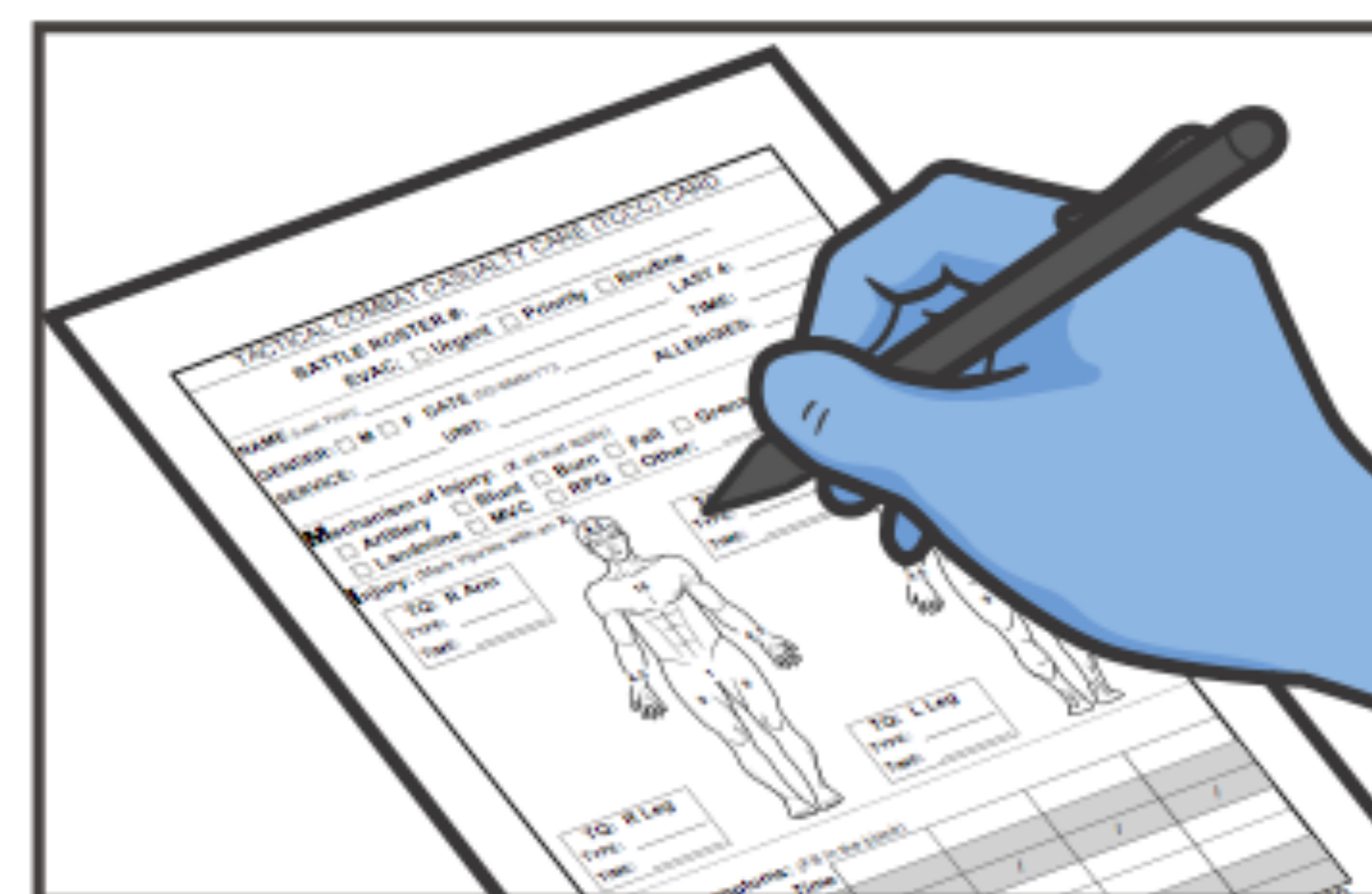

06 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.



УВАГА - небезпека гострих предметів, небезпека уколу голкою. Обережно поведіться з пристроєм під час зняття.