



Жорсткий щиток для очей



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.



- 01** РОЗМІСТІТЕ пораненого в зручне положення, яке дозволить легко перевірити око.

ПРИМІТКА. Якщо необхідно, зніміть головний убір.



- 02** ОГЛЯДІТЬ око на предмет деформації, подряпин, синців, розривів або набряку.

ВАЖЛИВО. Навіть якщо немає ознак проникаючого поранення ока, розглядайте подряпини та набряки як цей тип травми.



- 03** Проведіть швидкий тест на гостроту зору.

ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ГОСТРОТУ

На відстані витягнутої руки...
Потерпілий МОЖЕ чи НЕ МОЖЕ -
1. Читати друковану продукцію.
2. Порахувати пальці.
3. Визначити рух руки.
4. Визначте світлий чи темний.



- 04** ЗАКРИЙТЕ травмоване око жорстким щитком для очей.

ПРИМІТКА. Не закривайте інше око, якщо воно також не травмоване.




КРОК 4 ВАЖЛИВО -
Жорсткий щиток для очей НЕ ПОВИНЕН контактувати з оком або предметом, що застряг в оці.


Якщо стандартна жорстка накладка на очі не підійде, використовуйте імпровізовану, наприклад, пластиковий стакан.



- 05** ЗАКРІПНІТЬ жорсткий щиток для очей на місці за допомогою стрічки під кутом 45 градусів на обличчі.

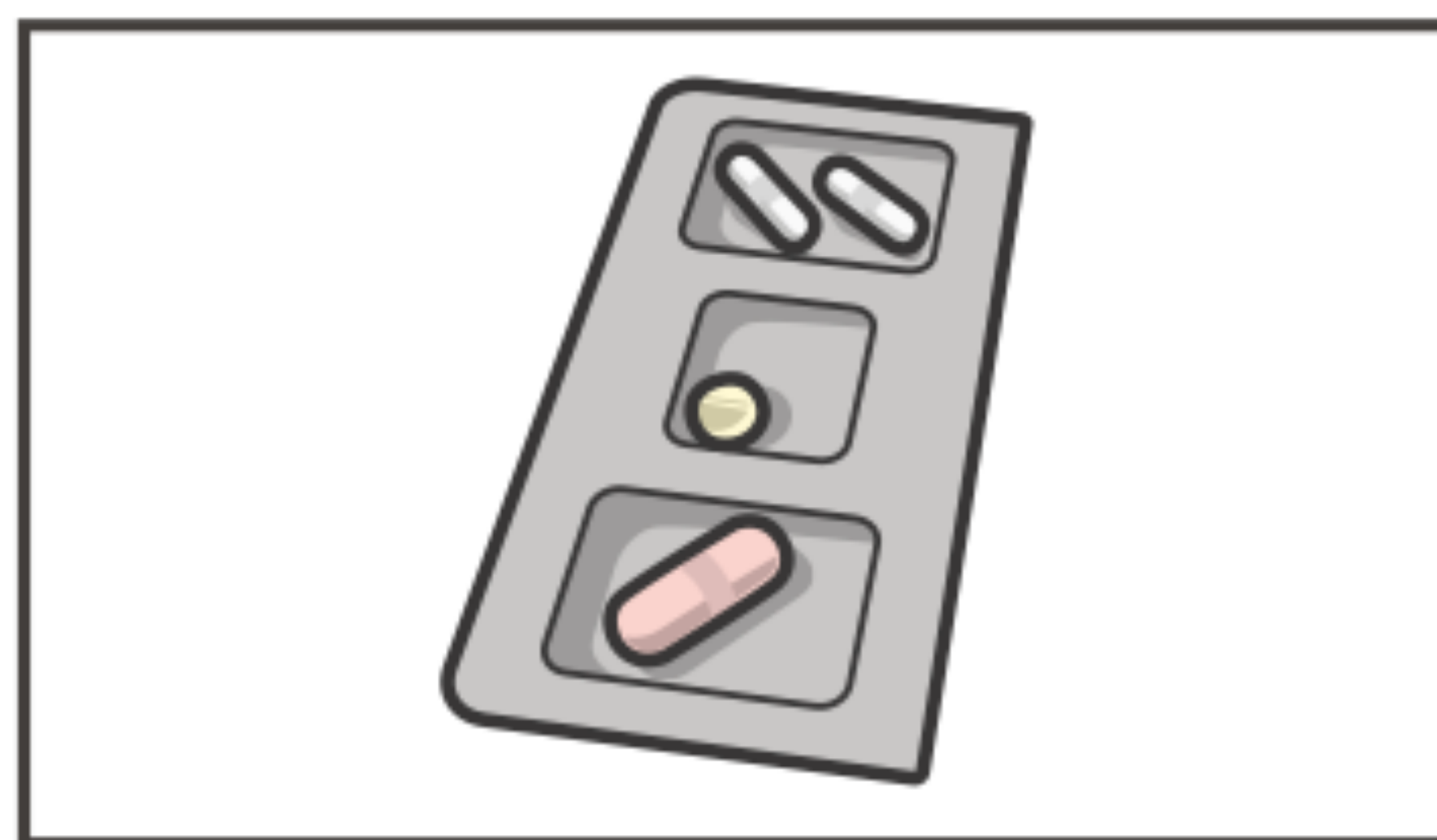

- 06** При цьому виді травми рекомендуються антибіотики. Зверніться до місцевого протоколу або навченого медичного персоналу.

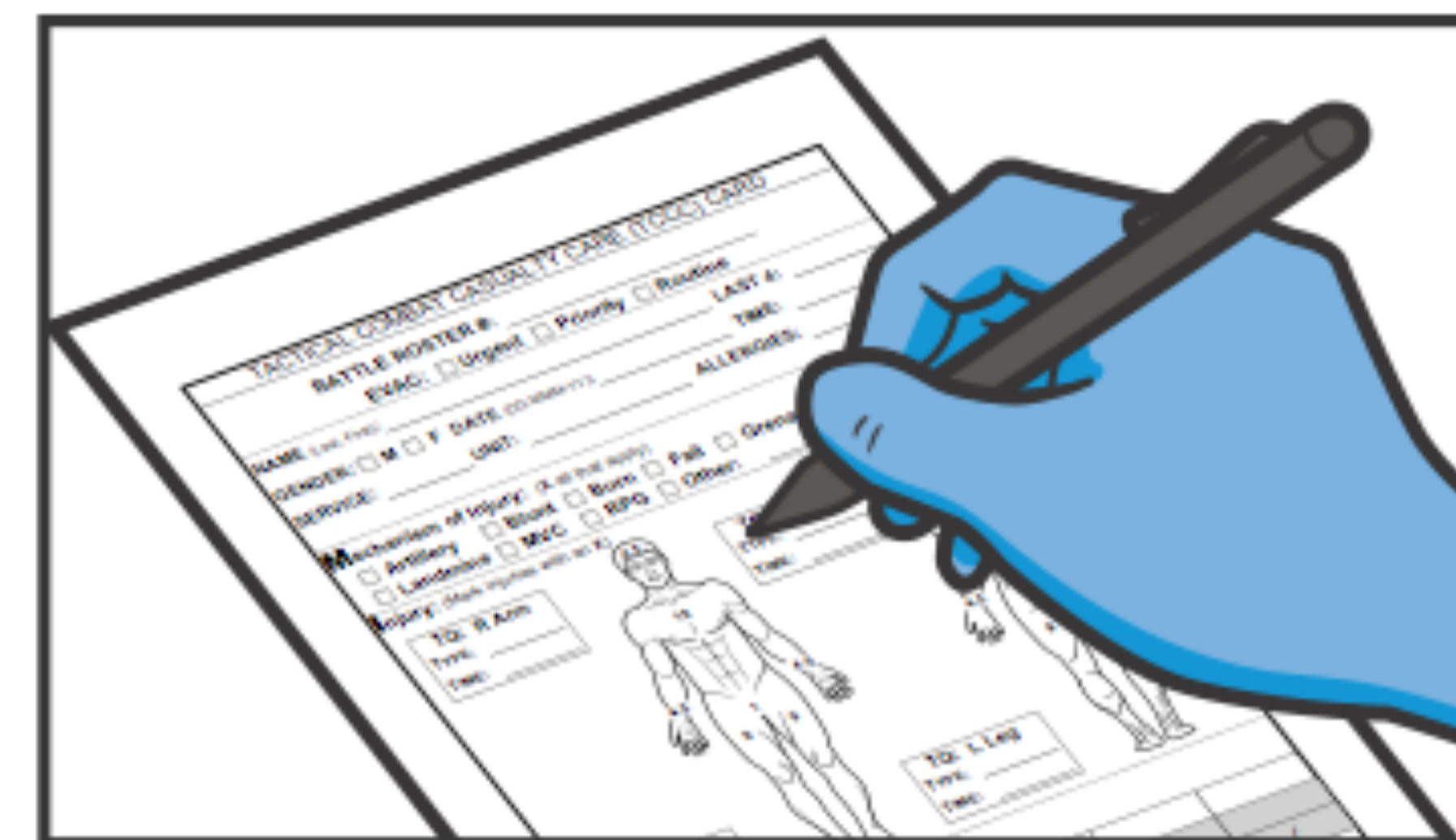

- 07** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.