









ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ


Продовження...

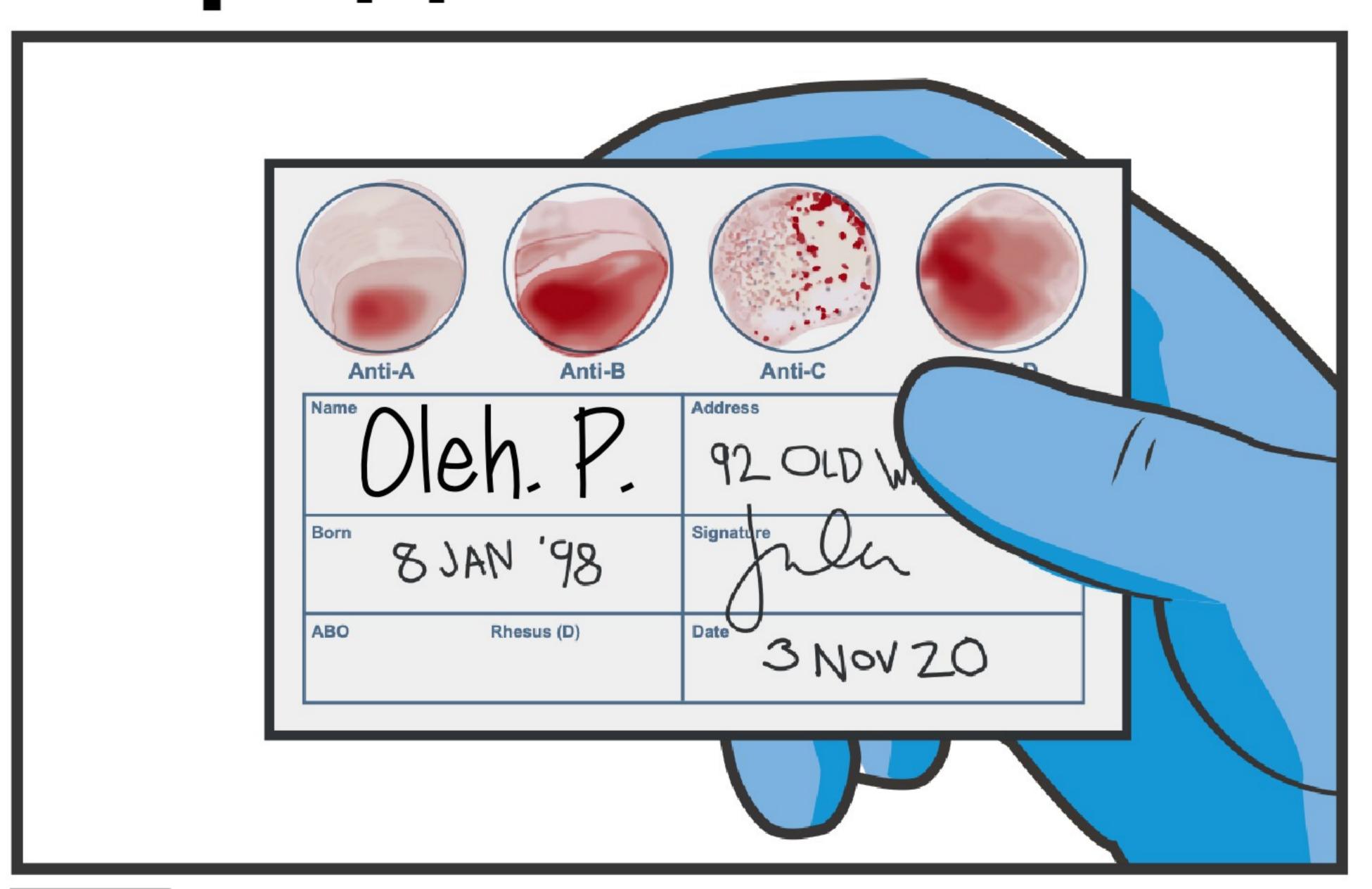

11 ОБЕРЕЖНО НАХИЛЯЙТЕ КАРТКУ на 4 сторони, тримаючи впродовж 10 секунд на кожній стороні (в загальному – 40 с), щоб стимулювати процеси змішування/ аглютинації.

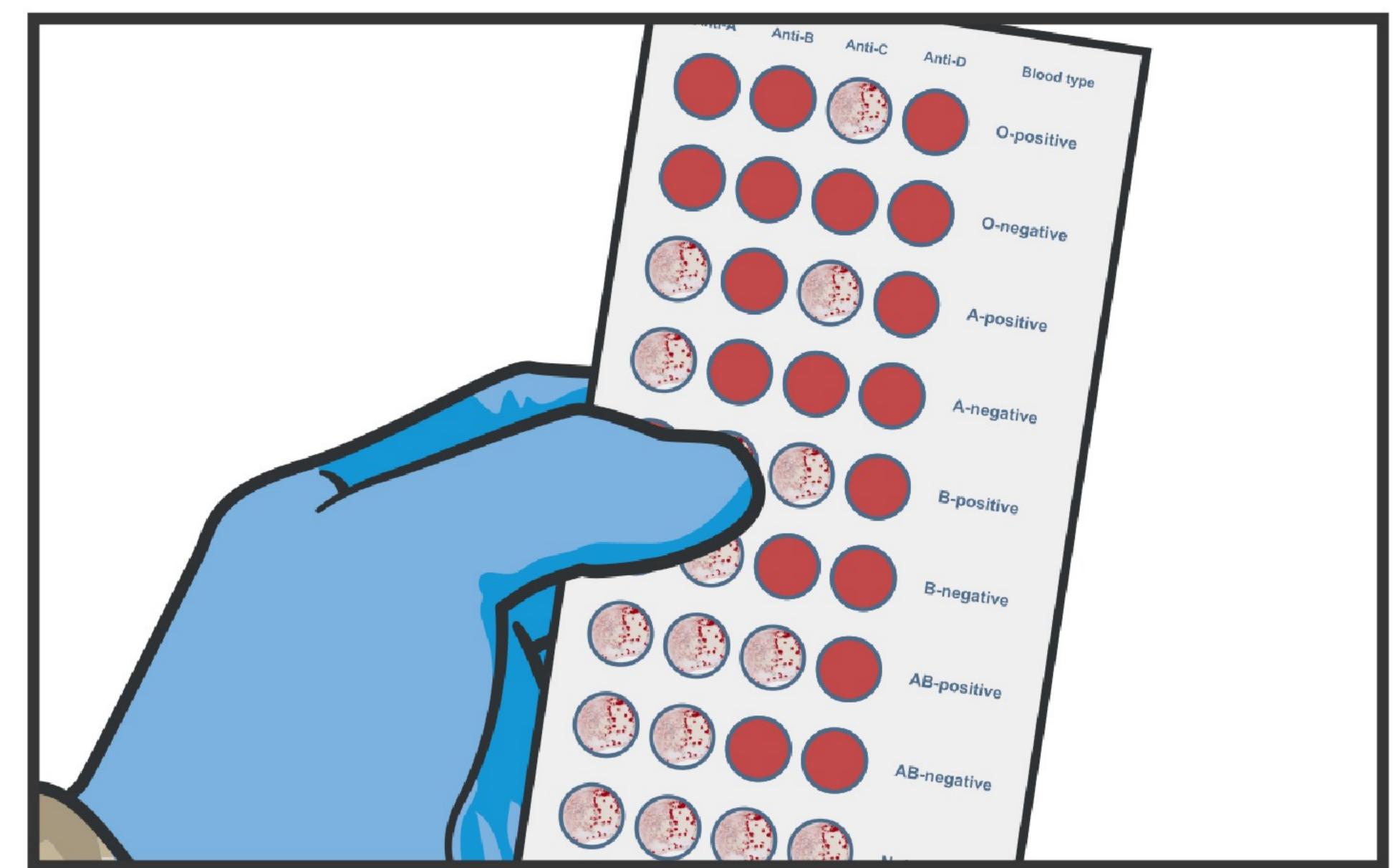


Після використання усіх чотирьох паличок та змішування крові з реагентами на картці, ВІЗЬМІТЬ таблицю відповідності груп крові.

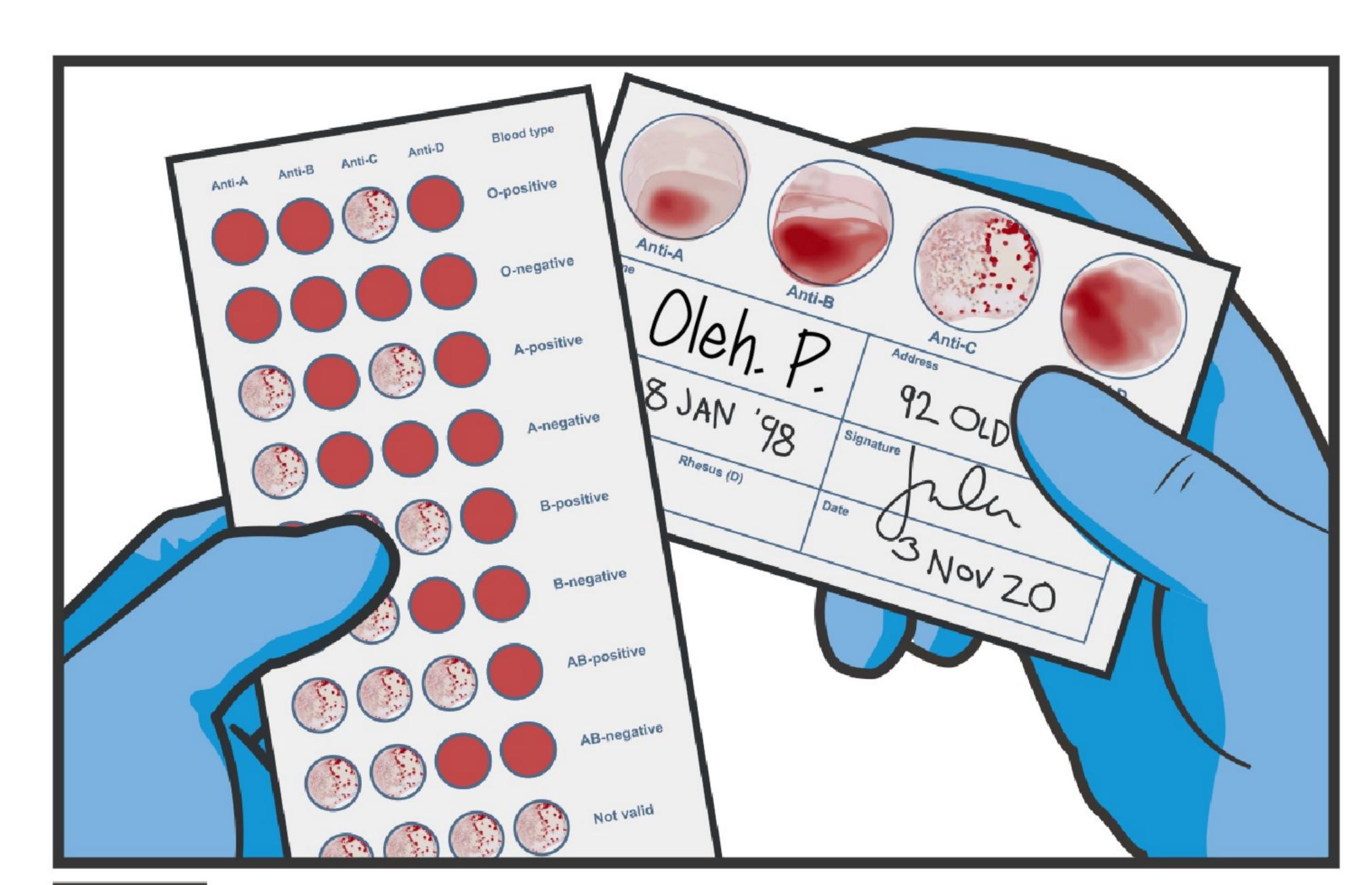


ПОРІВНЯЙТЕ усі чотири лунки (анти-А, анти-В, анти- D та контрольну лунку) з таблицею, що входить до складу набору, оцінюючи наявність або відсутність аглютинації.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Намагайтеся оцінити результати, поки картка все ще волога.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Аглютинація має бути завжди відсутня в контрольній лунці, інакше тест є недійсним. Якщо аглютинація в лунках на картці співпадає зі зразком недійсного результату, тест необхідно провести повторно, використовуючи новий набір.

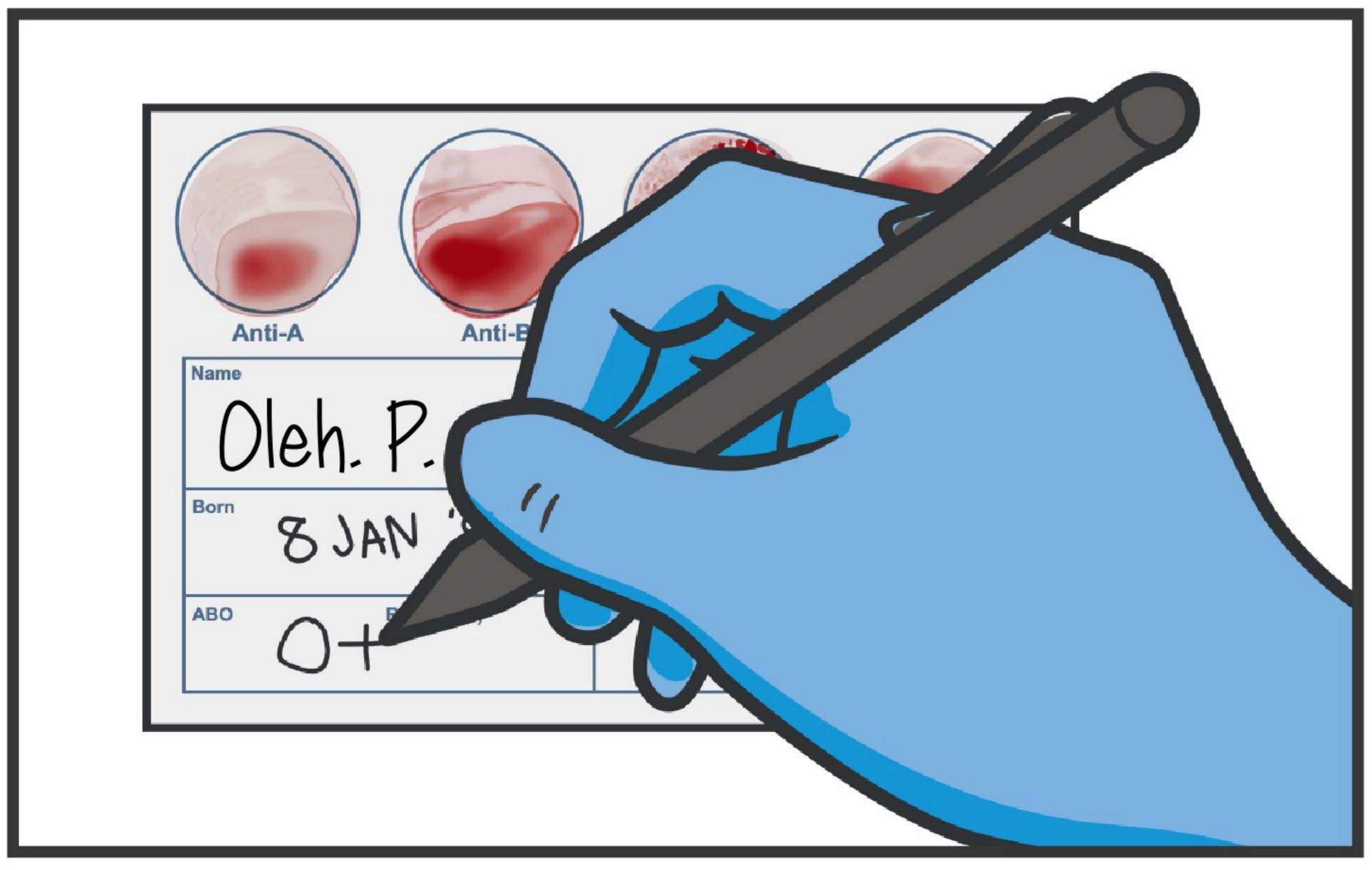

3АПИШІТЬ на картці групу крові за системою ABO та резус фактор.

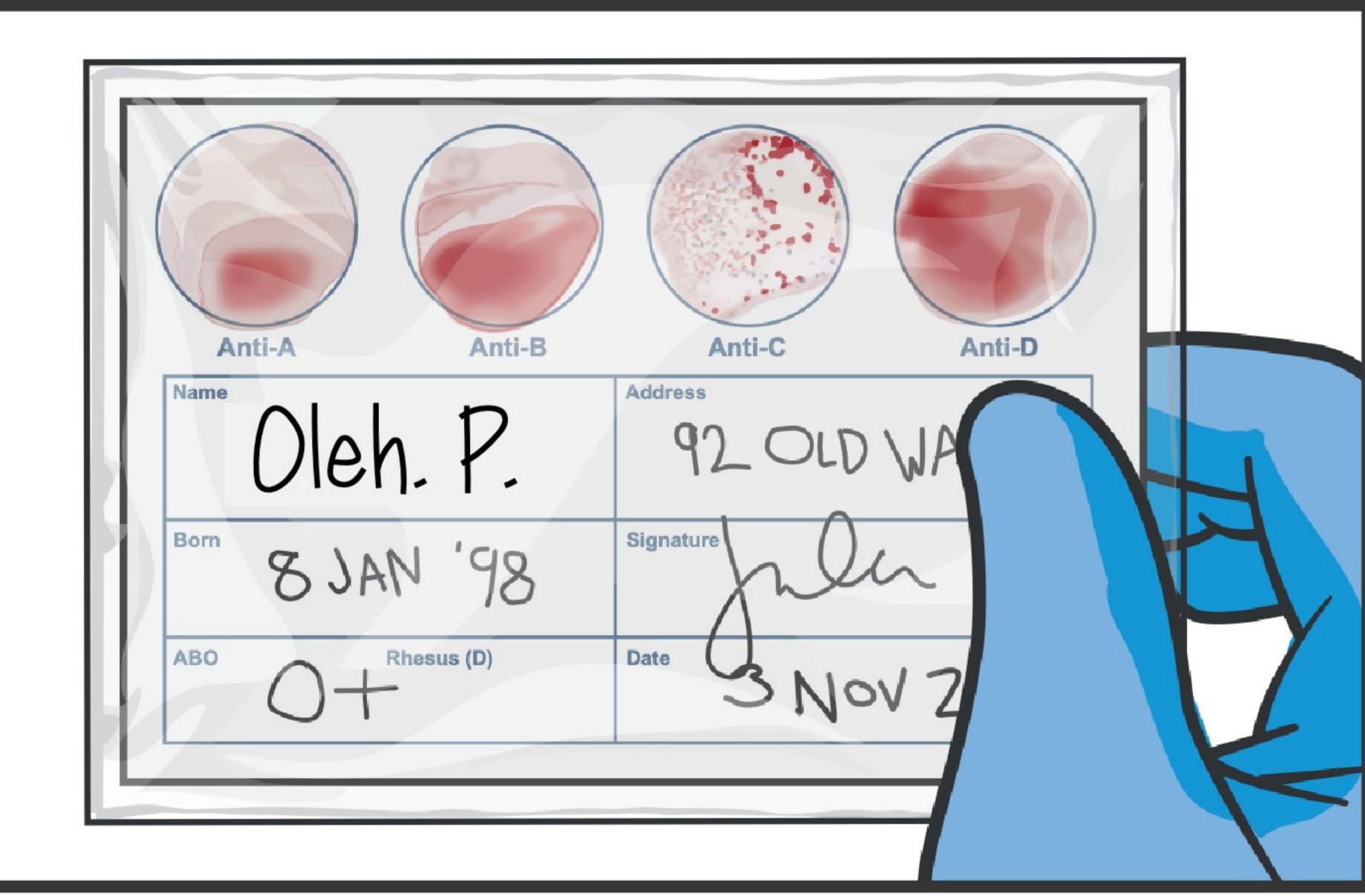

РОЗМІСТІТЬ захисну плівку поверх використаної картки та переконайтеся, що її прикріплено до Картки пораненого Форма DD 1380.

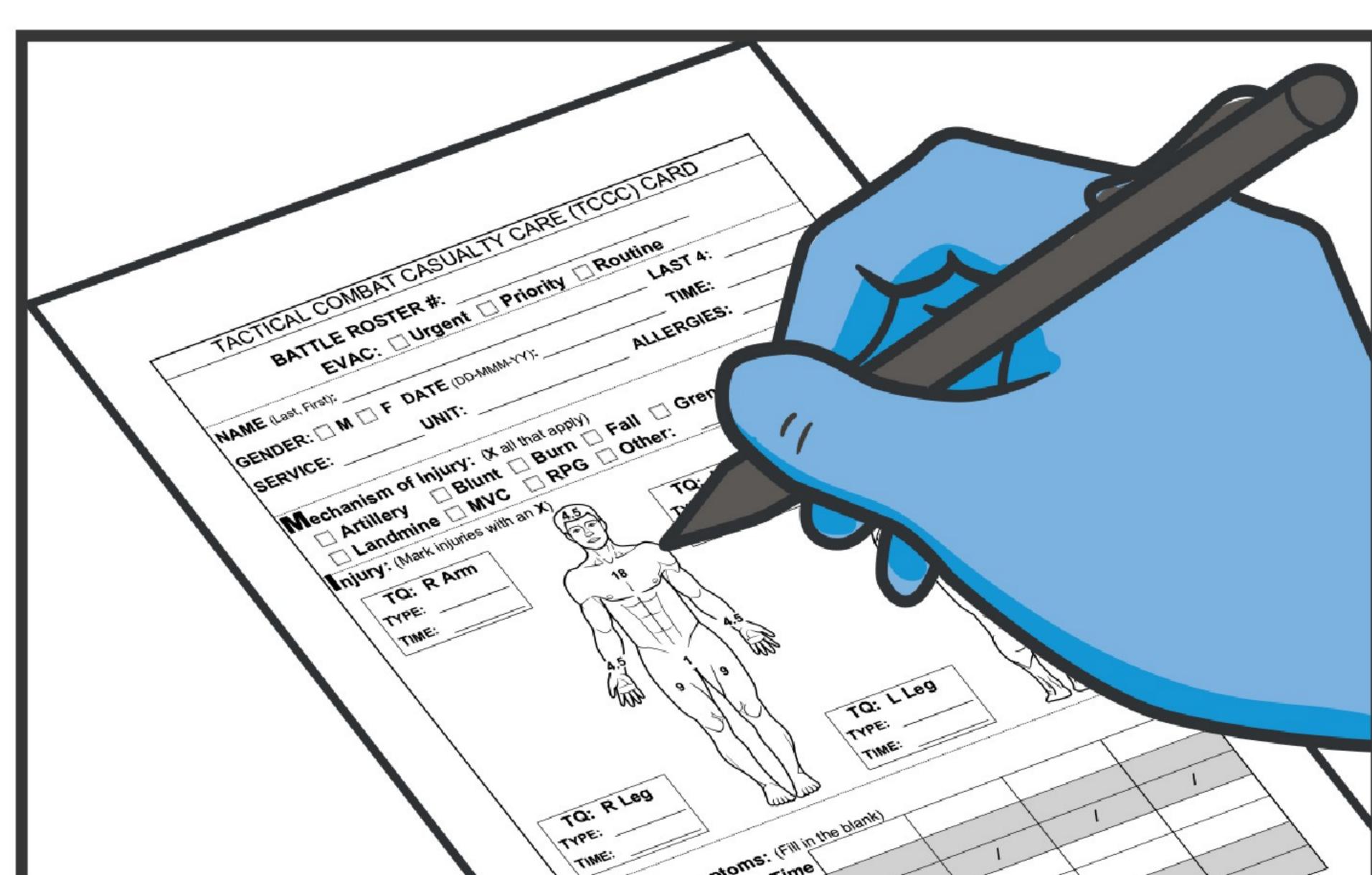

3АДОКУМЕНТУЙТЕ результати у Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого (якщо це можливо).