





## СИСТЕМА FAST1®IO ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ В ГРУДНИНУ


## Продовження...

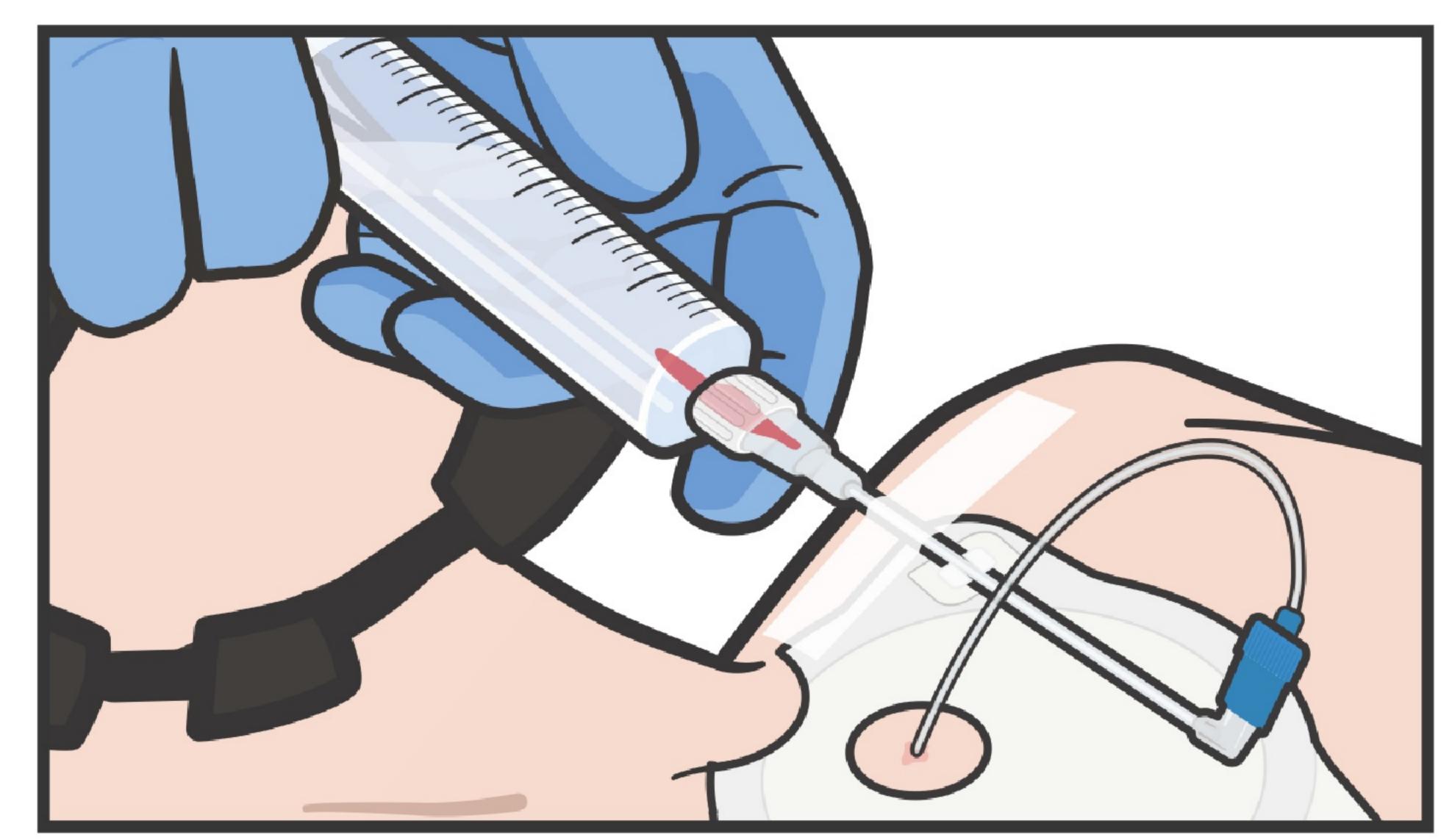

ПІД'ЄДНАЙТЕ шприц, виконайте аспіраційну пробу, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку (повинен аспіруватися кров'янистий вміст); промийте інфузійну трубку, ввівши 5 мл стерильного розчину для ВВ інфузії.

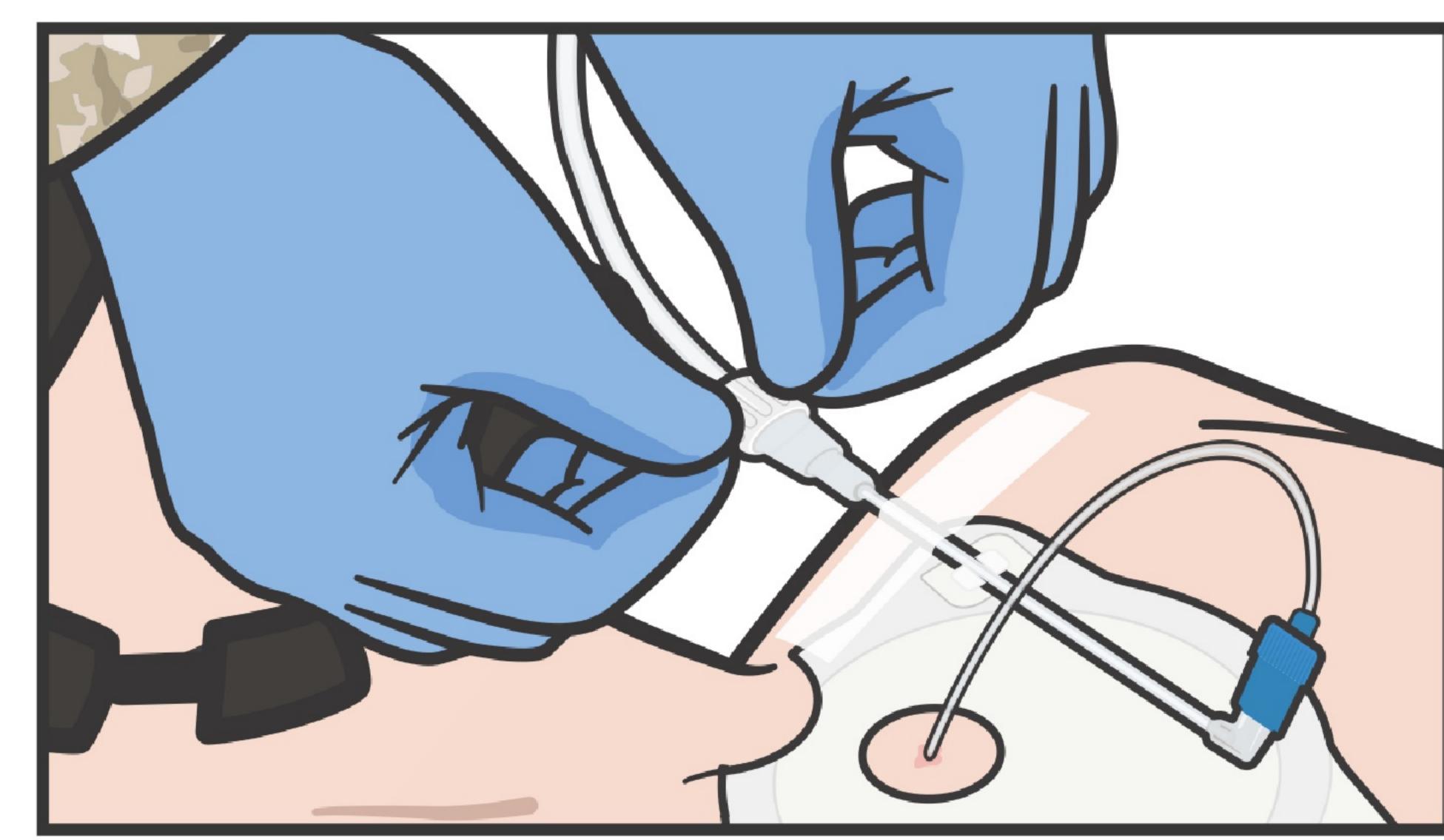


14 ПД'ЄДНАЙТЕ систему для ВВ інфузій та розпочніть введення розчинів.

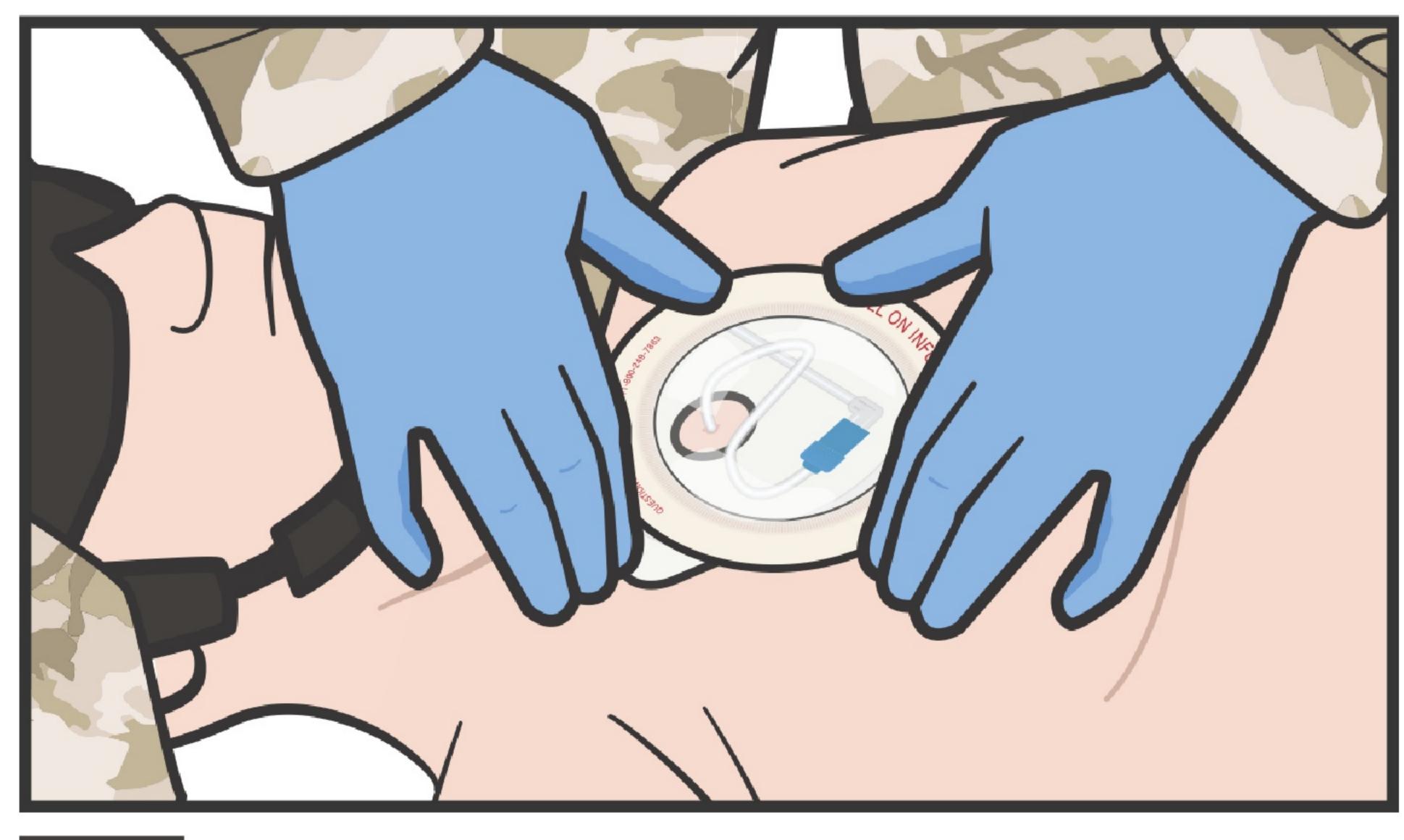


ПРИКРІПІТЬ захисну куполоподібну кришку до наліпки-орієнтира та зафіксуйте пластиром.

**ПРИМІТКА:** Це необхідно для вимивання кісткової пробки або інших тканин, які перешкоджають введенню розчину.

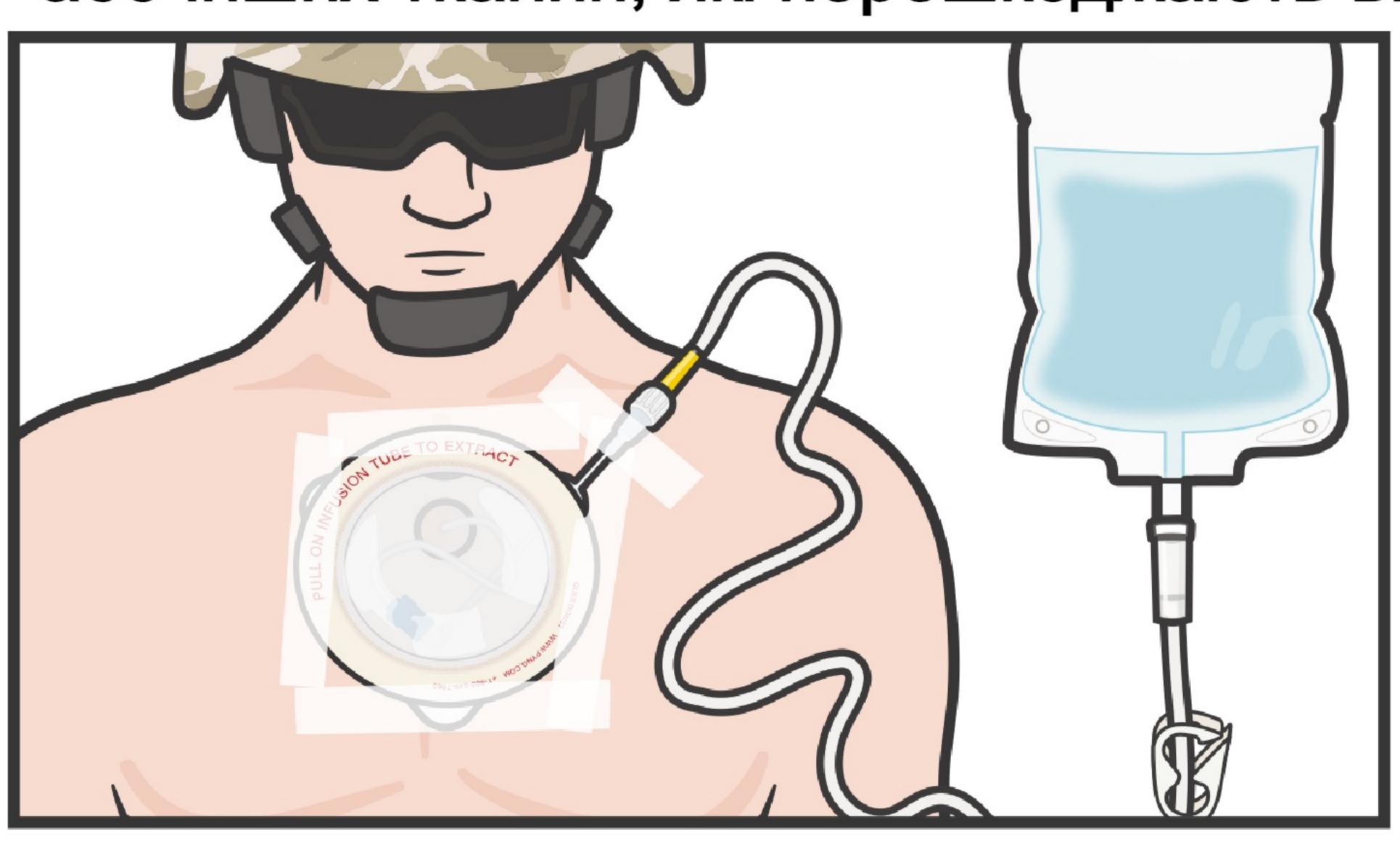

16 ВВОДЬТЕ ВВ розчини та/або ліки за потребою.

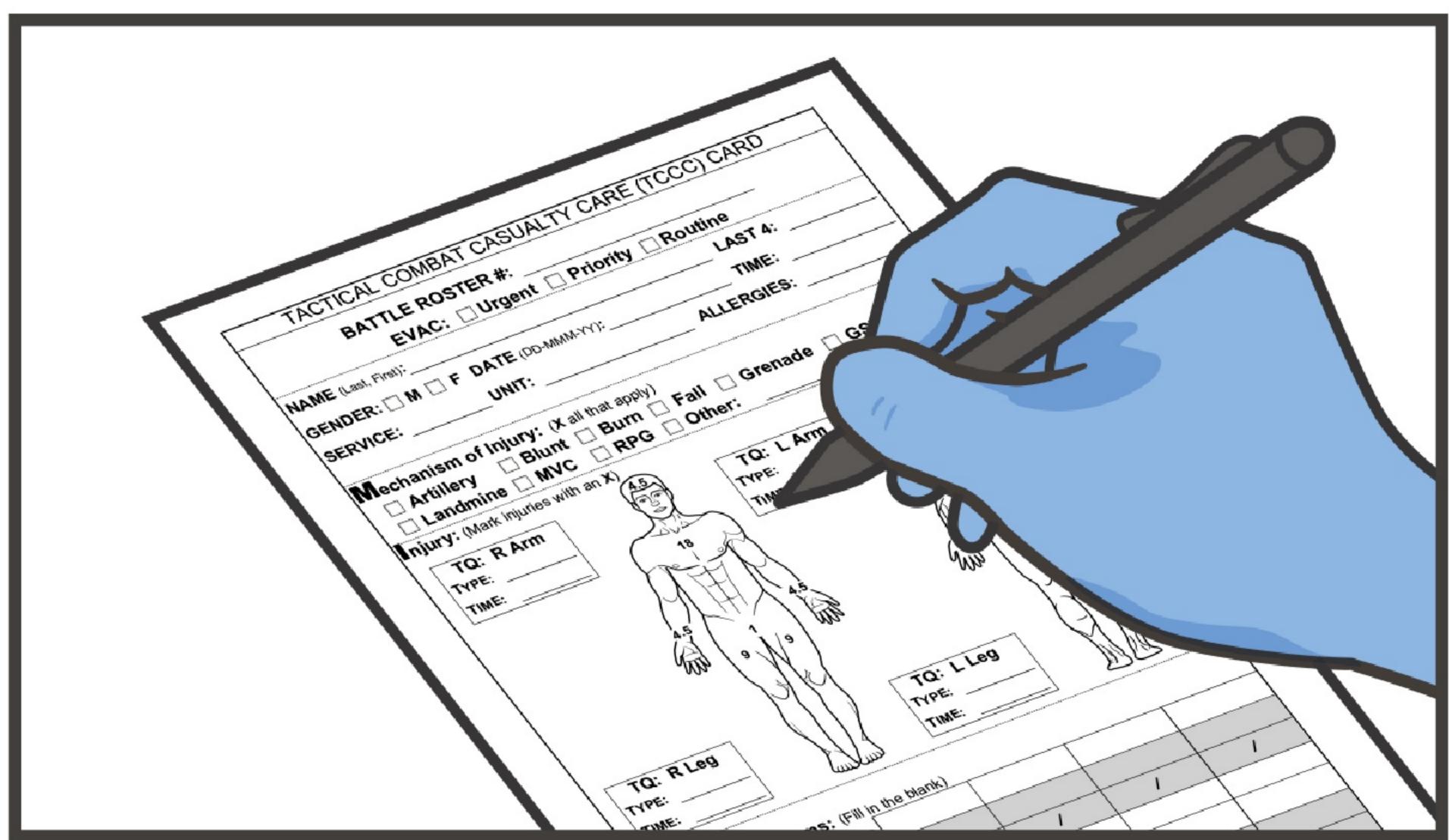

3АДОКУМЕНТУЙТЕ всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.