












## Плечова внутрішньокісткова ЕZ-ІО

## EZ-IO Humeral Intraosseous



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

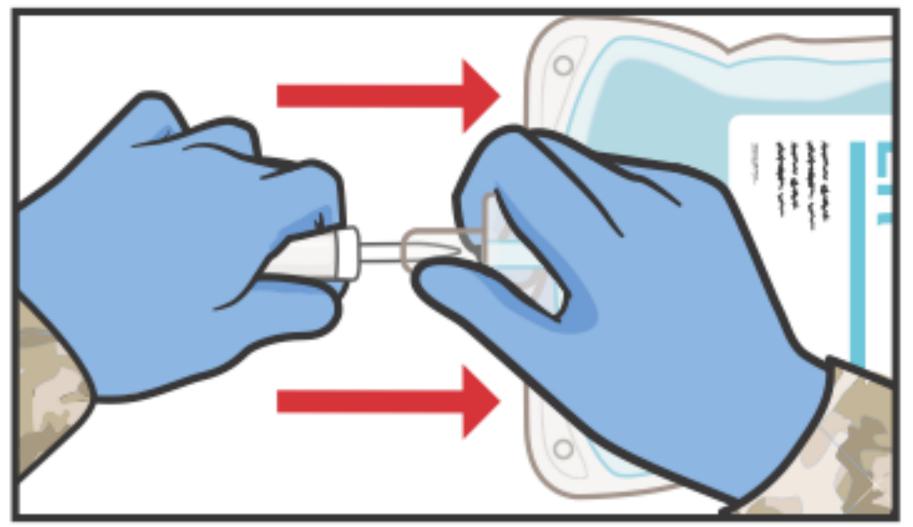


Підготуйте трубку, прикріпіть до пакета для внутрішньовенної інфузії.




ОЗ Заповніть подовжувальну трубку стерильним розчином для внутрішньовенного введення. Замініть фізіологічний розчин стерильним розчином.

3беріть і підготуйте обладнання. Огляньте його на недоліки.

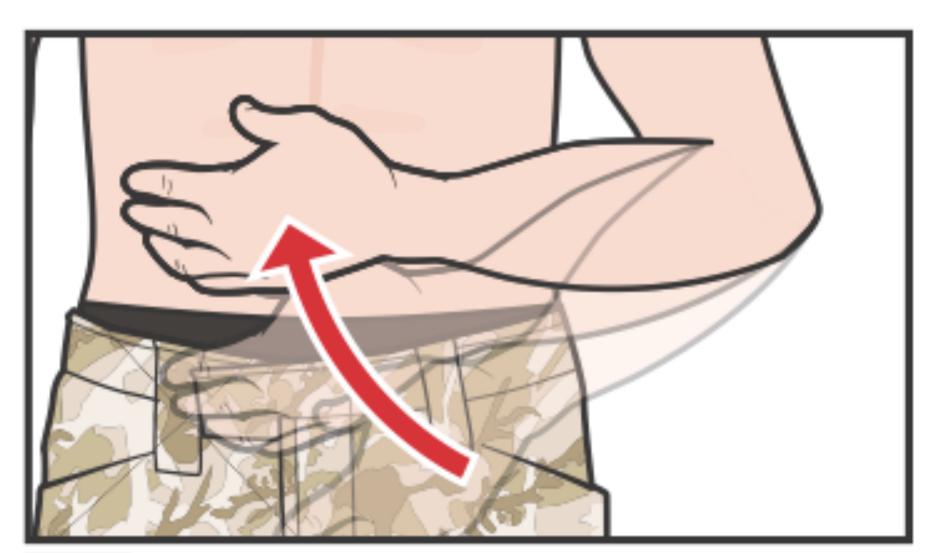


Попросіть потерпілого покласти руку на живіт і аддукт, підняти лікоть, щоб плечова кістка була більш виразною.

## КРОК 4. Медіальна ротація ліктя допоможе поставити спицю плечової кістки.

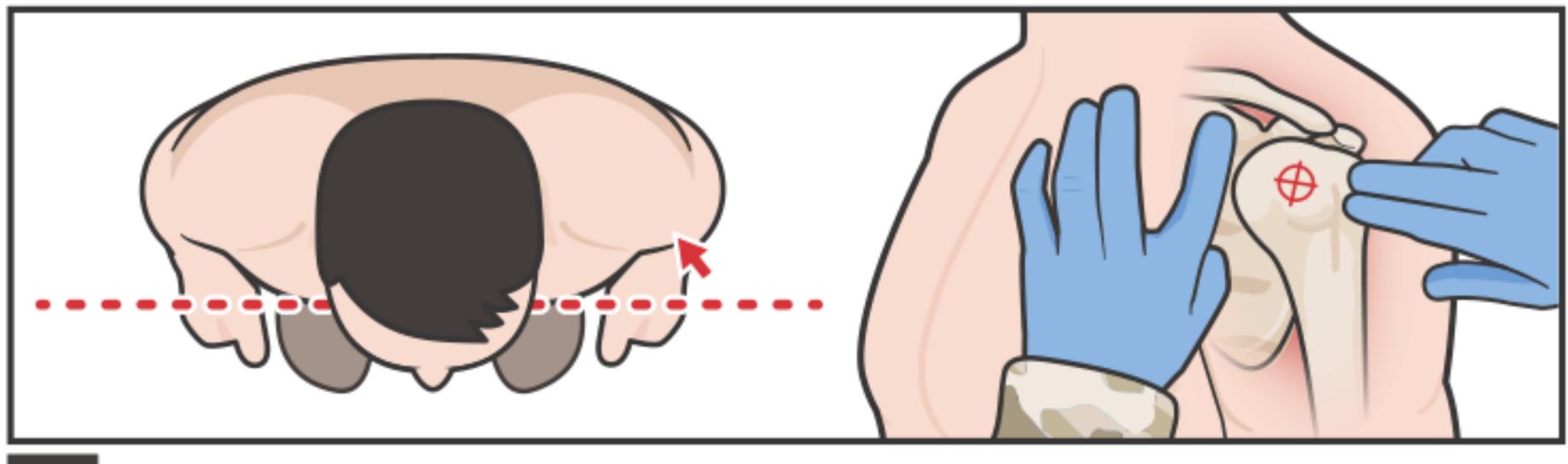


Знайдіть більший горбок проксимального відділу плечової кістки та хірургічну шийку під ним. Ідеальне місце введення – 1 см вище хірургічної шийки.

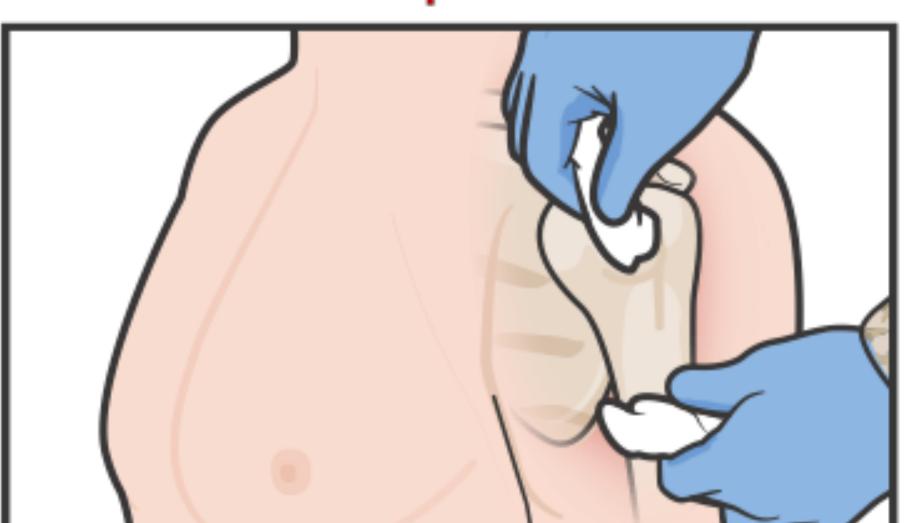


Очистіть місце спиртом або повідон-йодом.

ПРИМІТКА. Хірургічна шийка знаходиться трохи нижче великого горбка, зовнішньої частини передньої частини плечової кістки. Великий горбок схожий на м'яч для гольфу на трійнику.

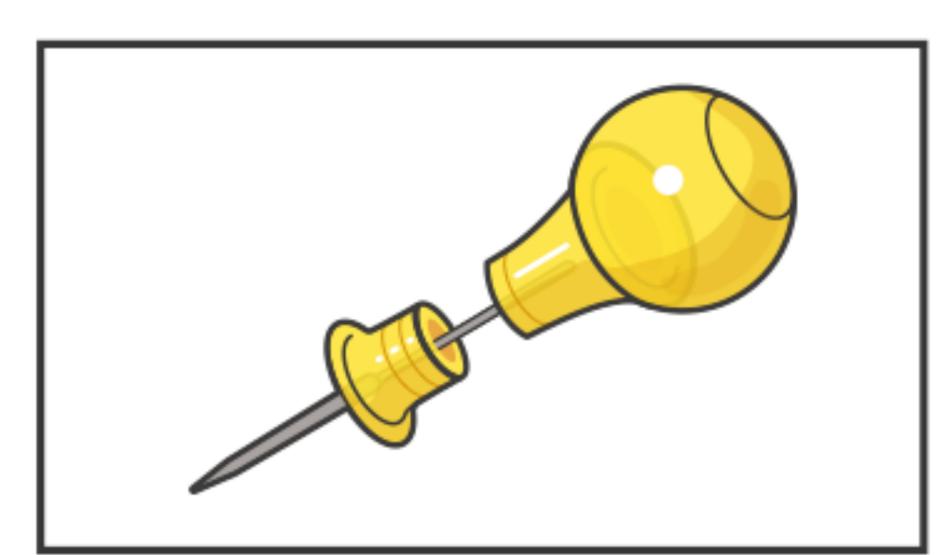

Знайдіть відповідну Внутрішньокісткова голка EZ-IO. Якщо використовується механічний драйвер, буде клацання від магнітного кріплення.


ПРИМІТКА. Жовтий - це дорослий розмір EZ-IO. Пройдіть подальше навчання щодо правильного вибору внутрішньокісткової голки EZ-IO. Успіх може визначатися багатьма факторами.

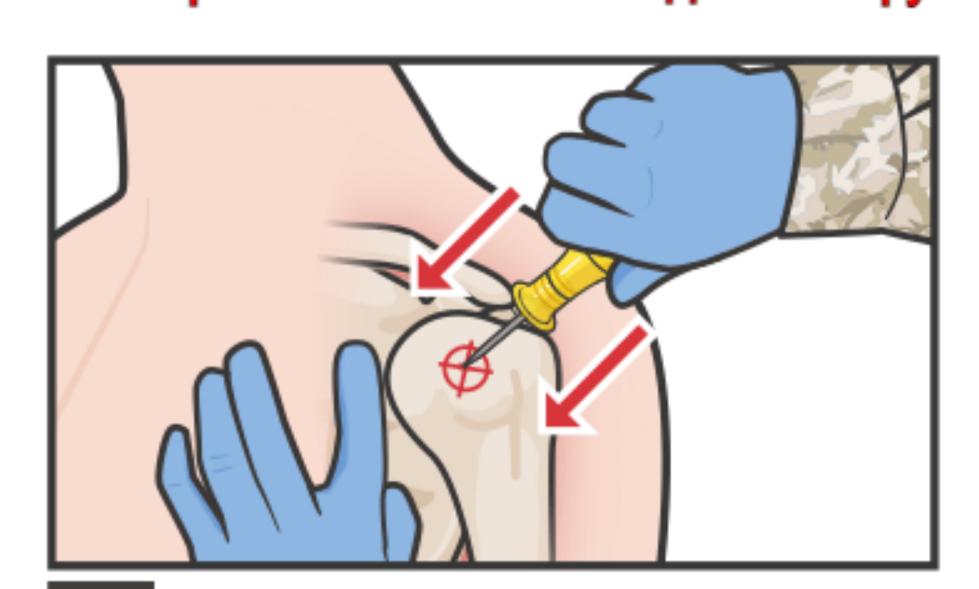

Підготуйте ручну внутрішньокісткову голку ЕZ-IO, знявши запобіжний ковпачок.

Якщо ви використовуєте електродриль, увімкніть її на короткий час, міцно тримаючи запобіжний ковпачок.

ВАЖЛИВО - Тримайте пальці подалі від голки.

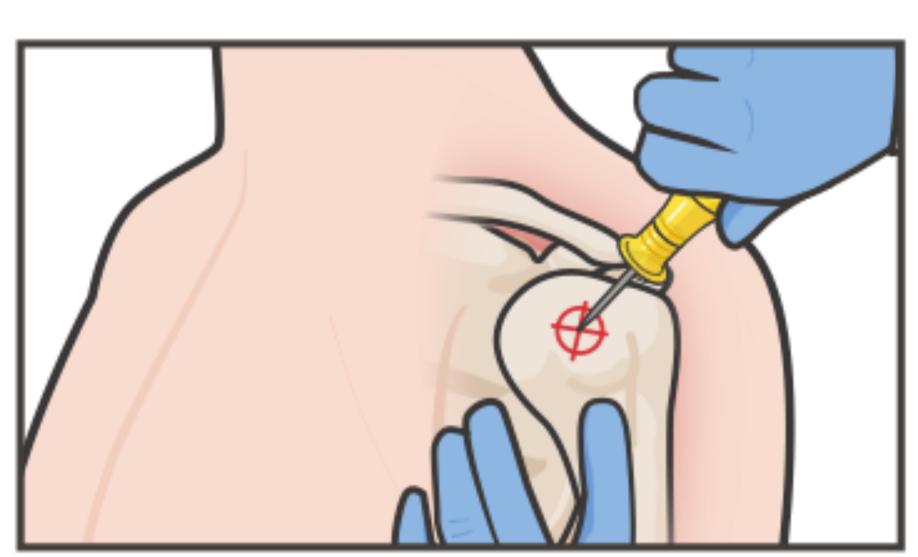

Тримайте механічний драйвер або голку в домінуючій руці, тримаючи іншу руку непорушно біля місця розміщення.

Внутрішньокісткова голка EZ-IO драйвер або голка повинні бути під кутом 45 градусів до площини кінцівки.

ПРИМІТКА. Тримайте кінцівку пораненого нерухомо під час процедури не домінуючою рукою.

продовження на наступній сторінці...