



# iTClamp - гемостатичного затискача

## Як видалити пристрій - Продовження зі сторінки 1


**ПРИМІТКА, щоб відкрити пристрій можна використовувати кнопки розблокування з обох боків пристрою.**

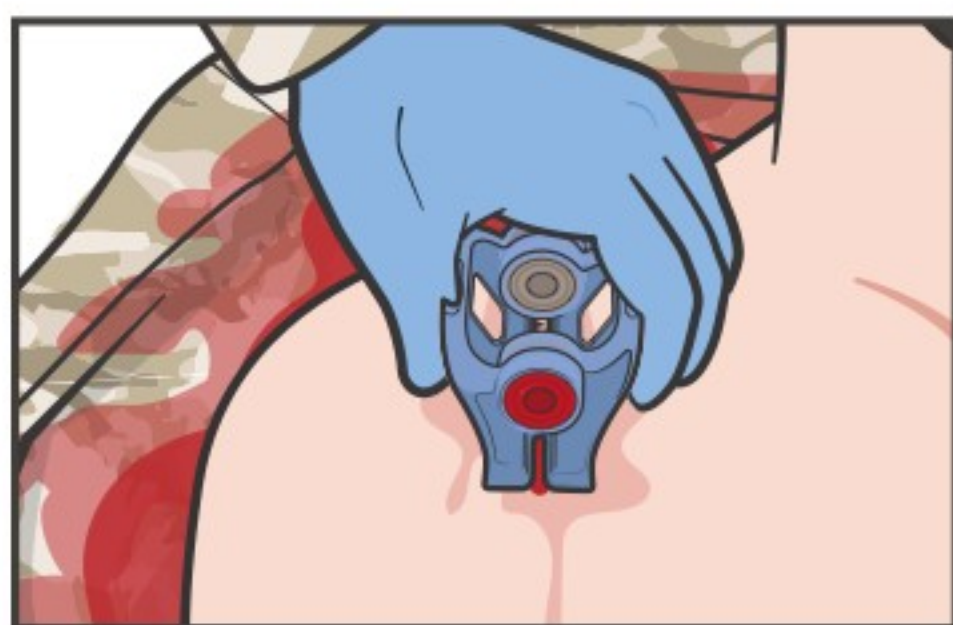

**01** Візьміться за верхні кронштейни пристрою однією рукою.

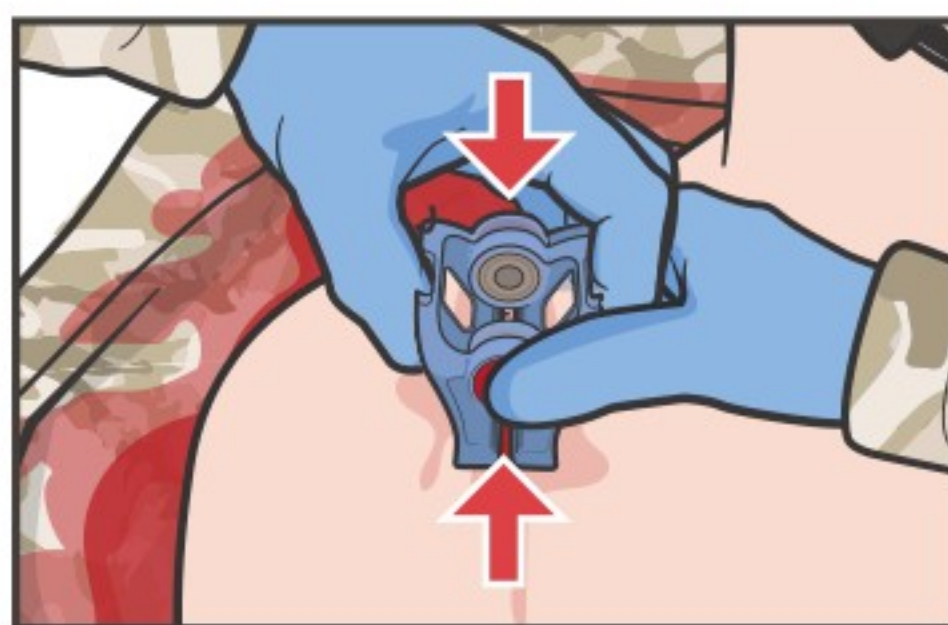


**02** Натисніть червоні кнопки збоку пристрою, щоб розблокувати механізм блокування. Щоб відкрити пристрій, стисніть верхні плечі разом.

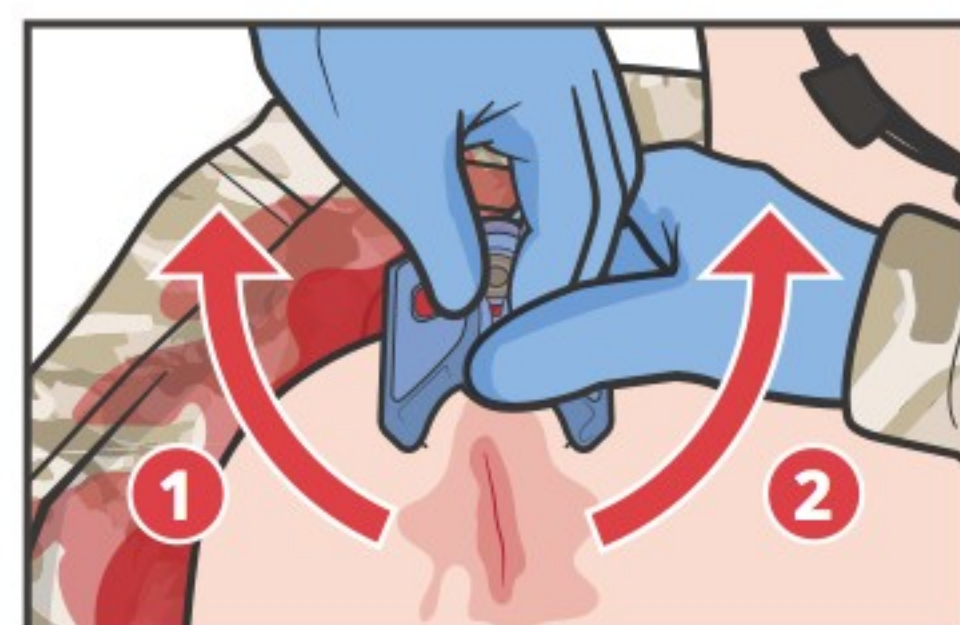


**03** Потягніть одну з ручок, продовжуючи натискати кнопки, і вийміть голки з рани, обертаючи. Далі обертальними рухами вийміть голки з іншого боку. Одночасно вільно обертається лише одна рука.

**ПРИМІТКА. Це процес двома руками.**


**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що утримування пристрою за кнопки під час виймання зменшує ризик випадкового контакту з голками.**

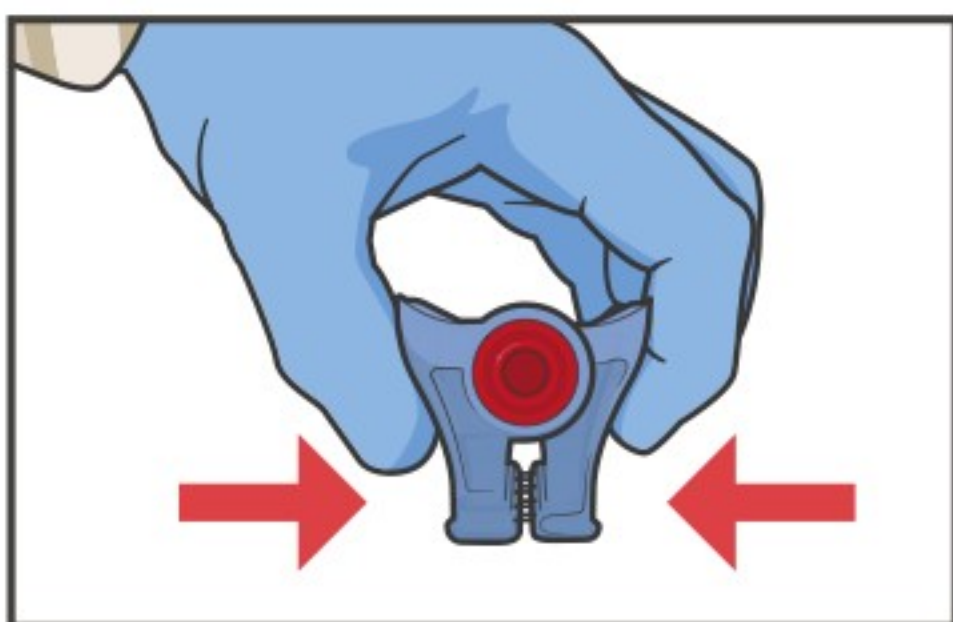

**04** Закрийте пристрій, щоб запобігти випадковому уколу голкою, повністю закривши нижні ручки.

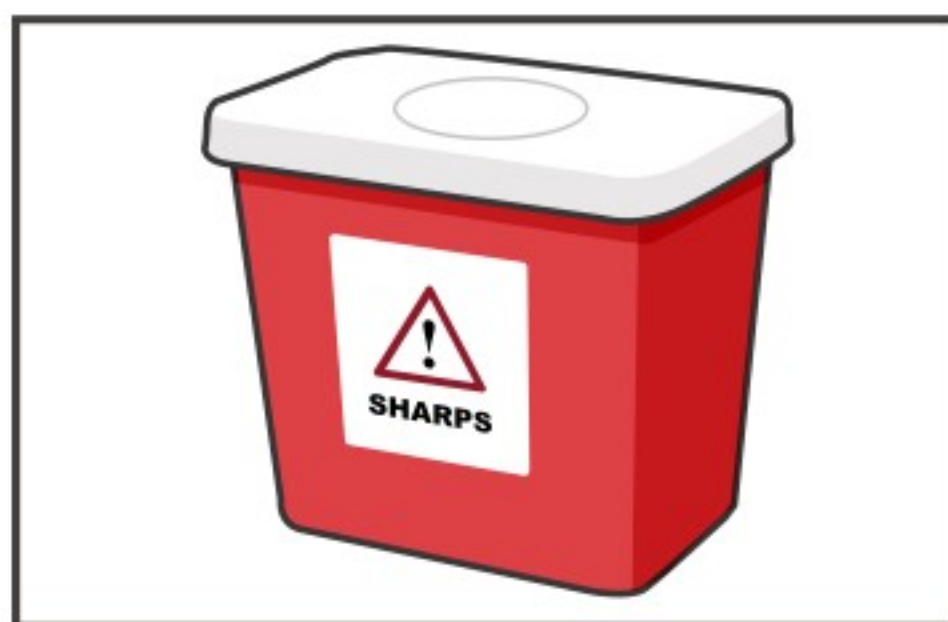

**05** Утилізуйте аплікатор у тому ж контейнері, що й гострі предмети.

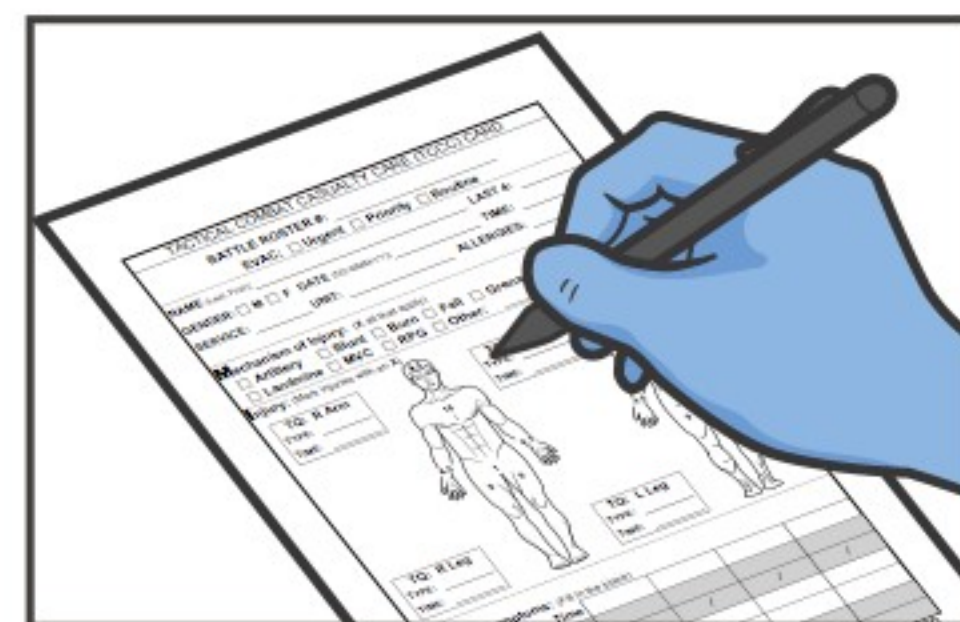

**06** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.



**УВАГА - небезпека гострих предметів, небезпека уколу голкою. Обережно поведіться з пристроєм під час зняття.**