

Заміна джгута (брашпила) - Windlass




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.



01 ВИКРИТИ травму та знайти джерело кровотечі.



02 ОЦІНЬТЕ будь-які раніше накладені джгути на ефективність і близькість до місця кровотечі.

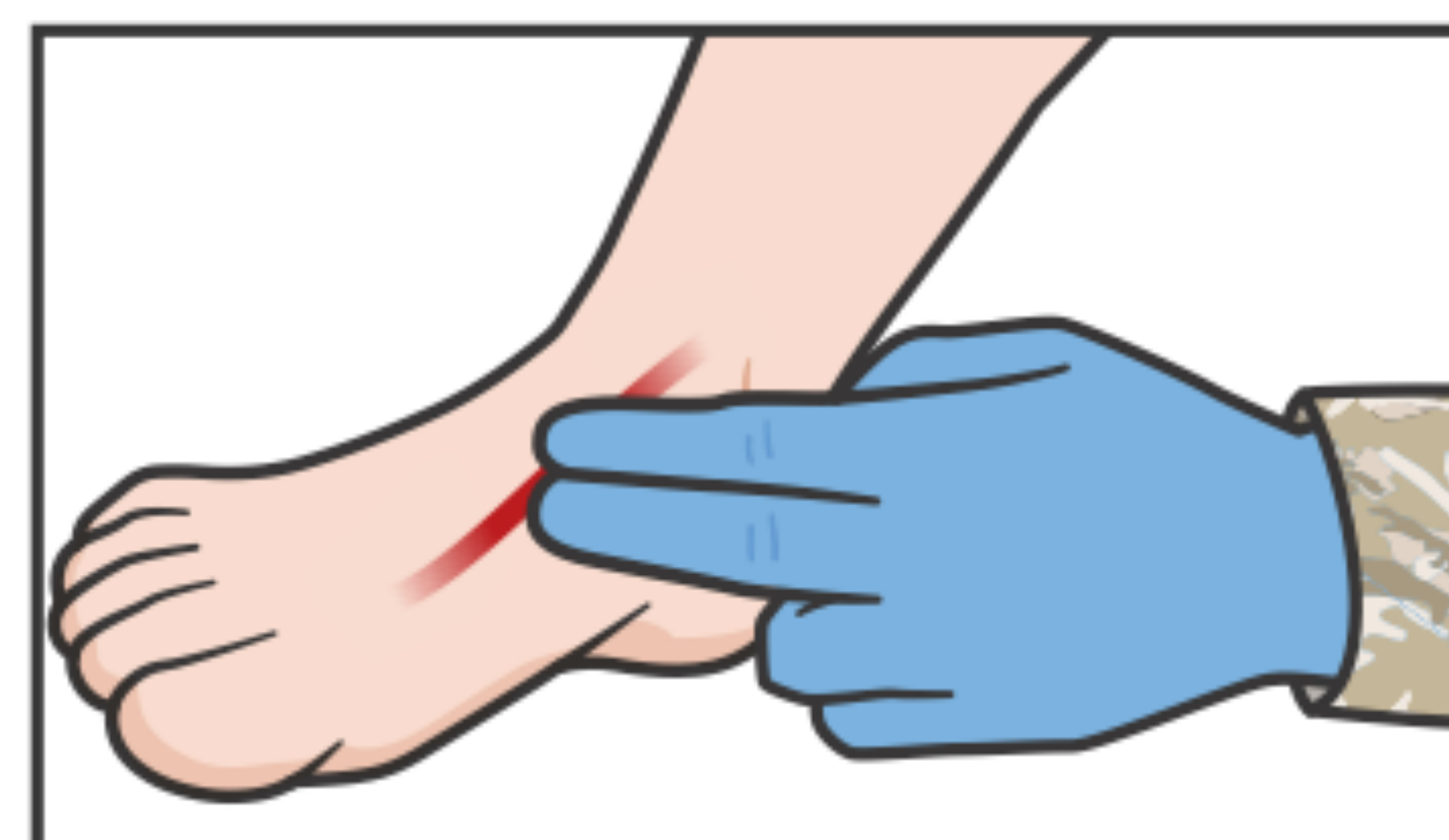

03 ПЕРЕВІРТЕ дистальний пульс. Якщо відчувається пульс, затягніть джгут. Якщо пульс усе ще відчувається, ПЕРЕХОДІТЬ ДО КРОКУ 4.



04 НАКЛАДІТЬ рекомендований джгут на 5-8 см вище рани, безпосередньо на шкіру.



05 ПОВІЛЬНО звільніть перший джгут, займіть 1 хвилину.



06 Слідкуйте за областю кровотечі, щоб переконатися, що вона не почалася знову.



07 ОЦІНЬТЕ, щоб переконатися, що дистальний пульс відсутній і кровотеча не відновилася.




08 Перемістіть перший джгут вниз, але залиште його над новим джгутом.

КРОК 6 ВАЖЛИВИЙ. Якщо кровотеча почнеться знову, негайно затягніть перший джгут і затягніть новий джгут. Повторюйте КРОКИ 5 і 6, доки кровотеча не зупиниться.

КРОК 8 ПРИМІТКА. Перший джгут не затягнтий, але слабину ще усунуто, тому його можна швидко затягнути.



09 ДОКУМЕНТУЙТЕ час накладання нового джгута на обличчя потерпілого.

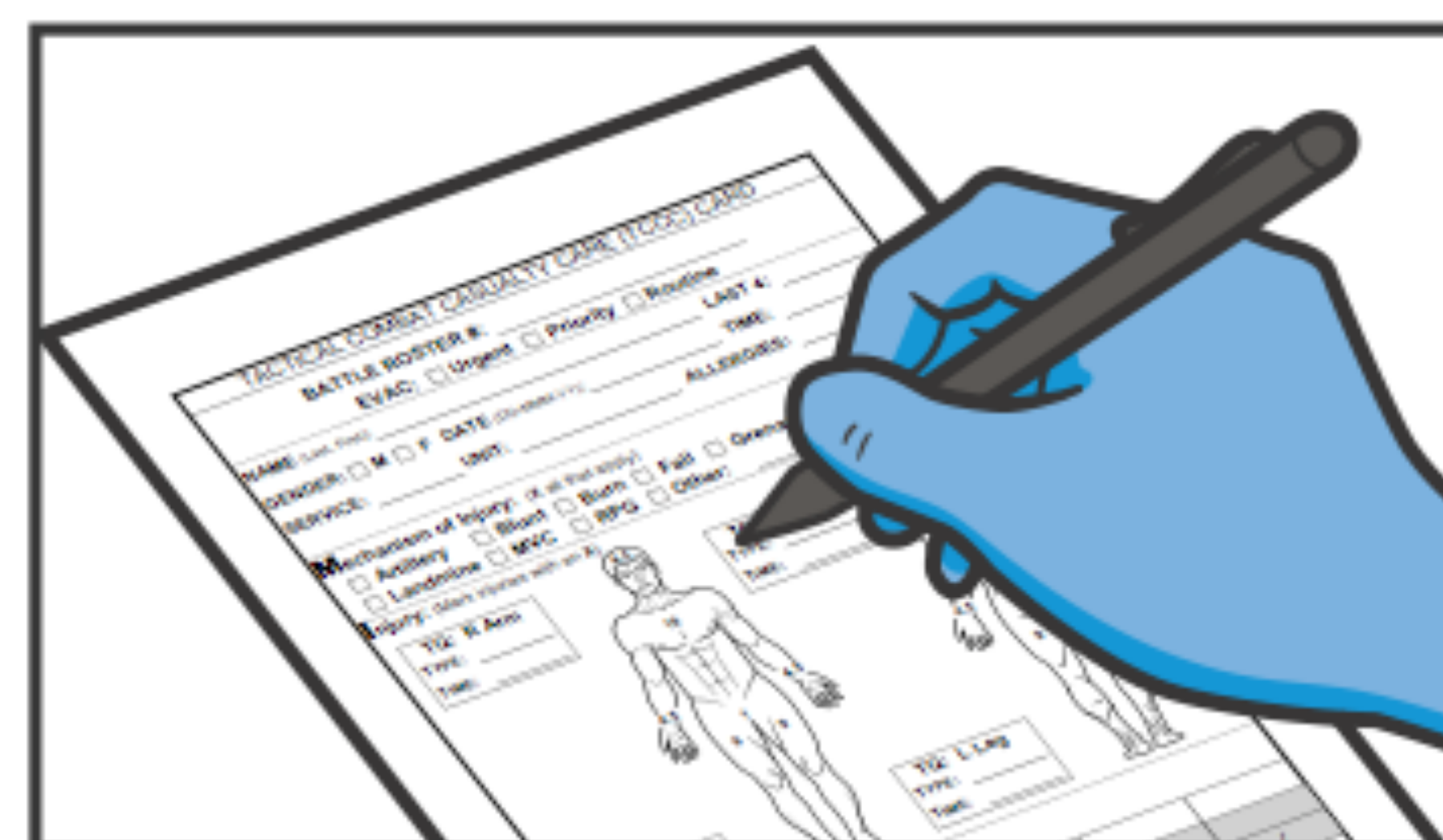

10 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.