


Гнучка шина для переломів кісток



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

SAM Splint

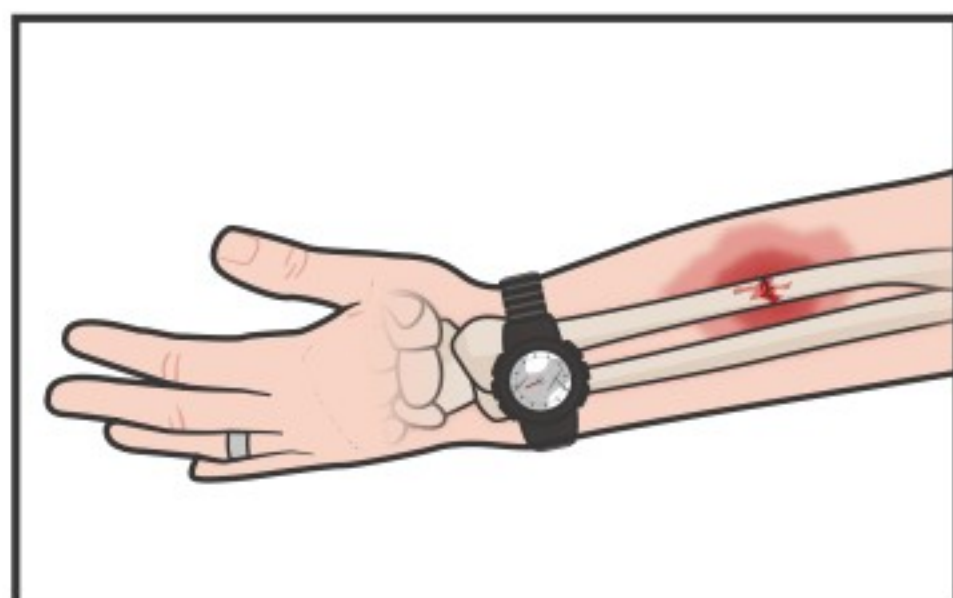

01 ВИЗНАЧІТЬ місце перелому та покладіть руку в нейтральне положення.

КРОК 1. За потреби попросіть асистента вручну стабілізувати перелом, уникайте великих рухів.



02 ОЦІНЬТЕ пульс, рухливість і відчуття дотику, дистально, нижче перелому.




03 ЗНЯТИ, наручний годинник, прикраси, одяг і черевики (перелом ноги), якщо потрібно.


ПОМІЩІТЬ ці предмети в кишеню пораненого для безпечного зберігання.



04 ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що будь-які відкриті травми перев'язані, а будь-яка кровотеча контрольована.

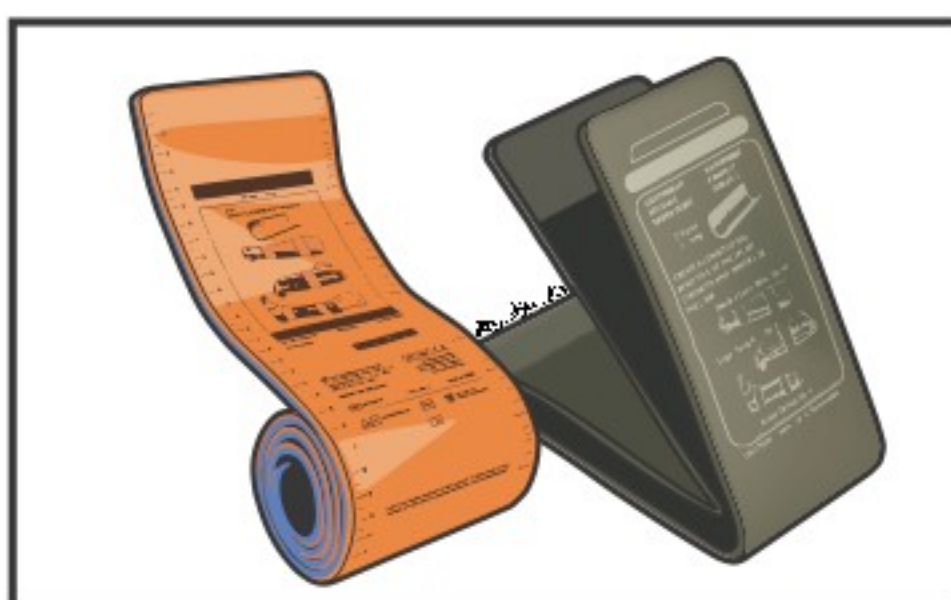


05 ОБЕРІТЬ відповідний армуючий матеріал, шину SAM або інший пінопласт/алюмінієвий армуючий продукт.

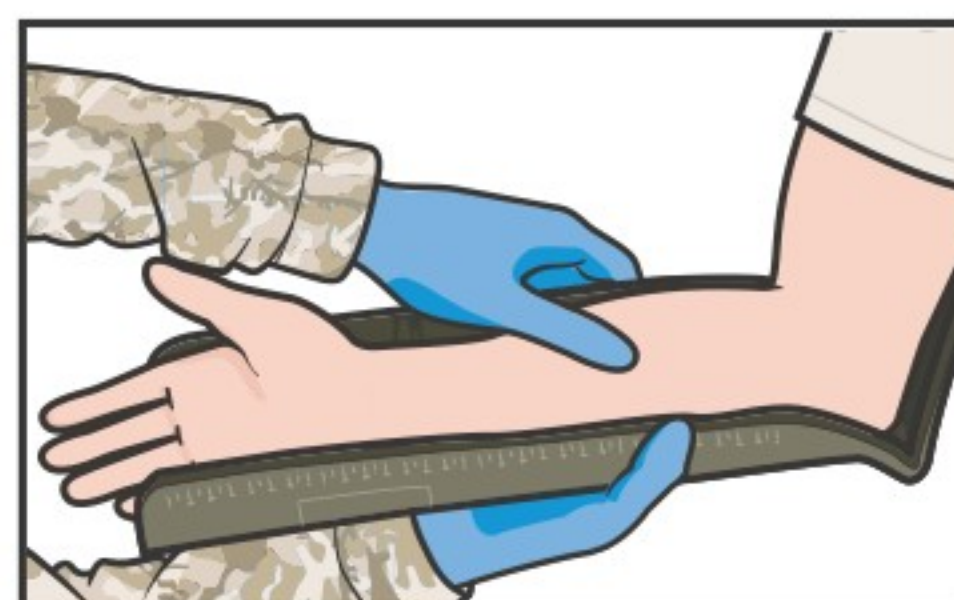


06 На неушкодженому боці пораненого виміряйте та складіть гнучку прокладку, щоб закрити суглоби над і під переломом.

ПРИМІТКА - Шина SAM є радіопрозорою, що означає, що вона не заважає рентгенівським променям.

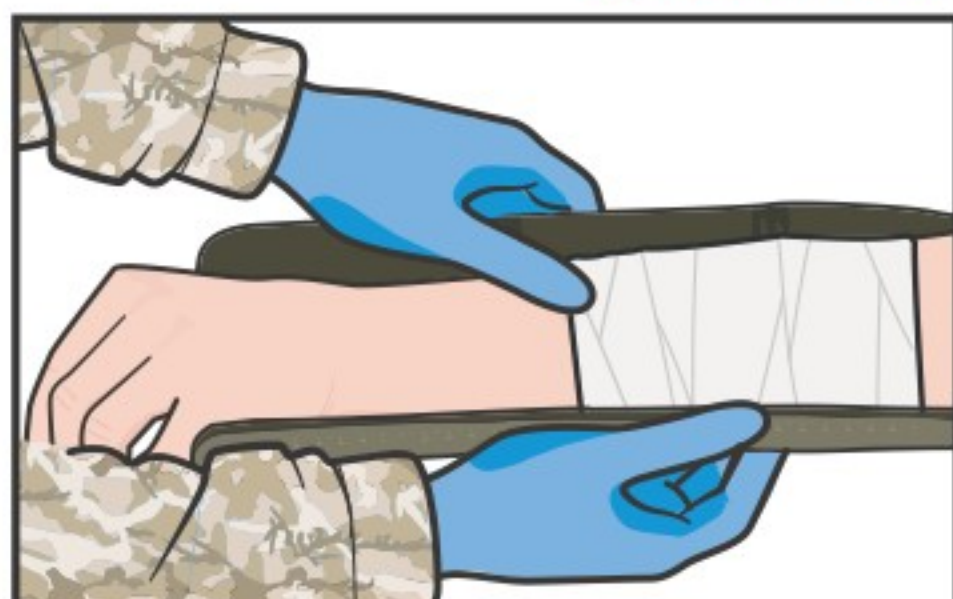

07 НАКЛАДІТЬ шину SAM на пошкоджену кінцівку в нормальному положенні спокою. Уникайте будь-яких великих рухів.

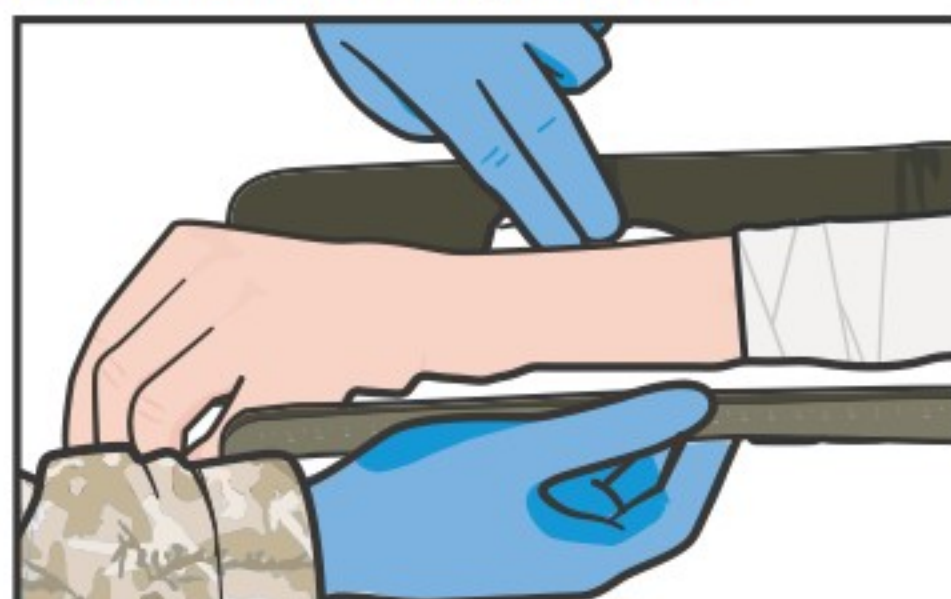

08 Ділянки злегка підбиті, заповнюючи будь-які порожнечі для захисту кісткових виступів. Зробіть це максимально комфортним.

КРОК 6. Гнучкі шини робляться жорсткими шляхом введення кривих уздовж довгої осі, форми жолоба.

За потреби використовуйте дві зчеплені колодки.

продовження на наступній сторінці...