



НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТА




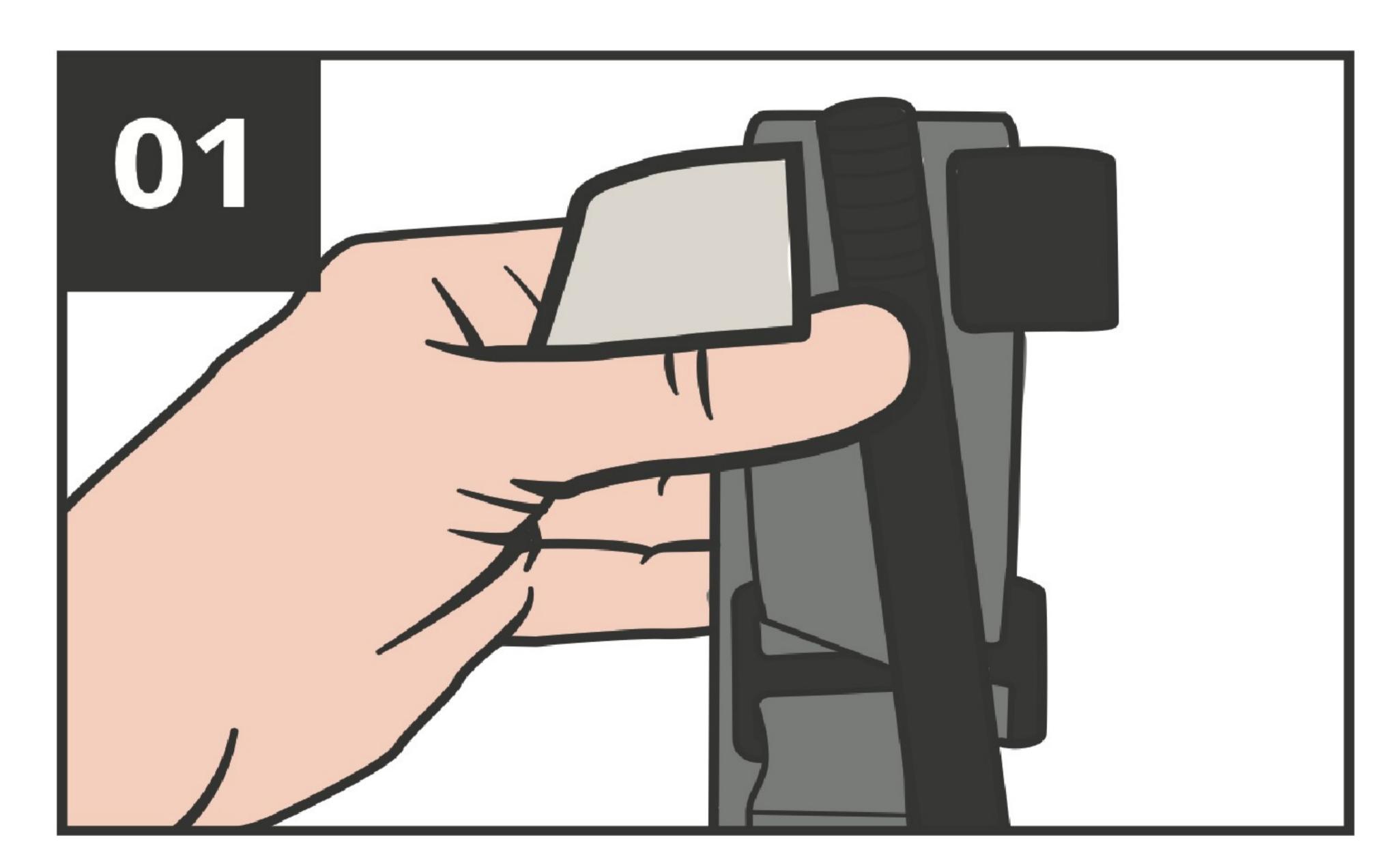


ДІСТАНЬТЕ турнікет «САТ» з індивідуальної аптечки або підсумку.

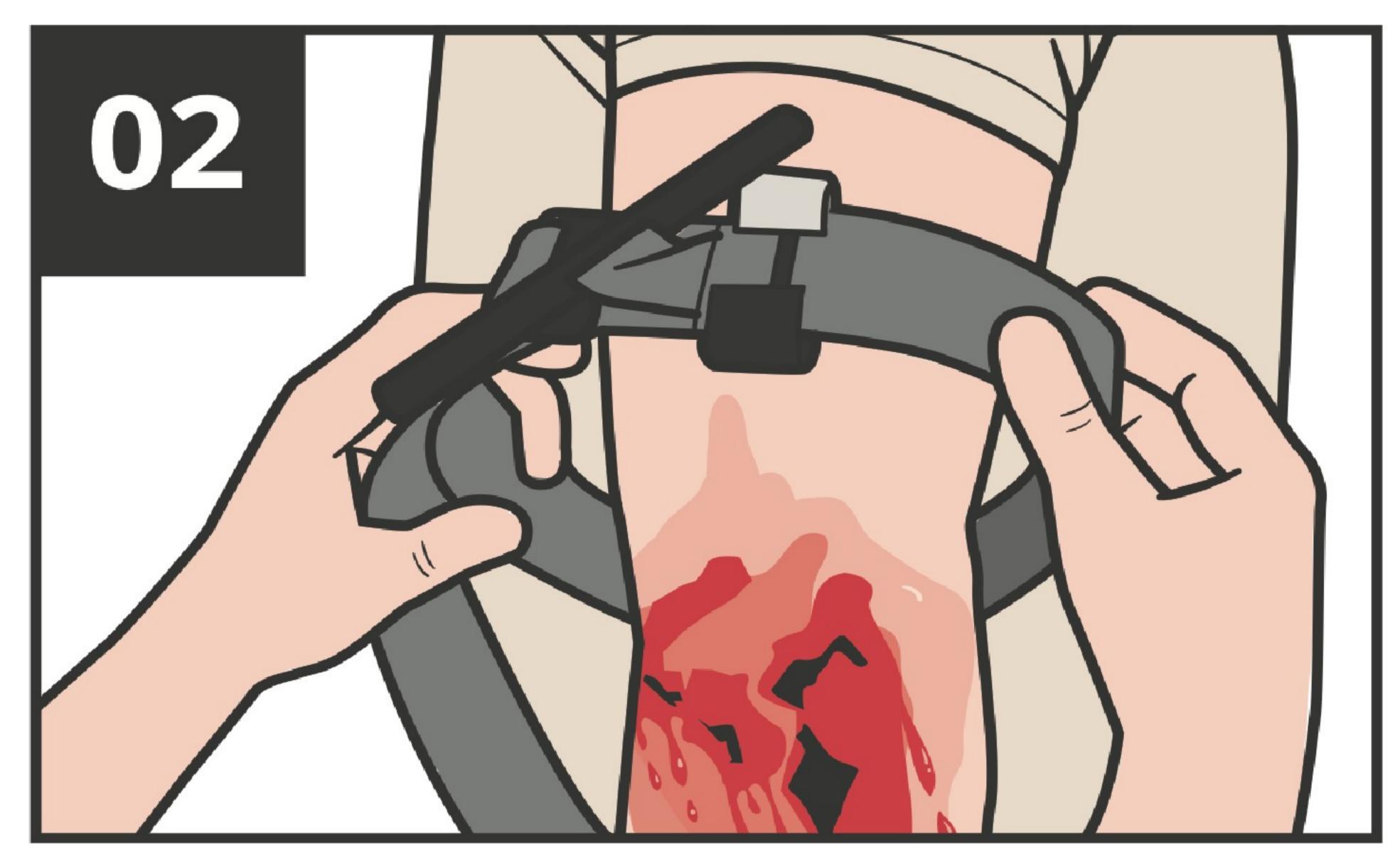


ПРОТЯГНІТЬ уражену кінцівку крізь петлю, утворену ременем турнікета.

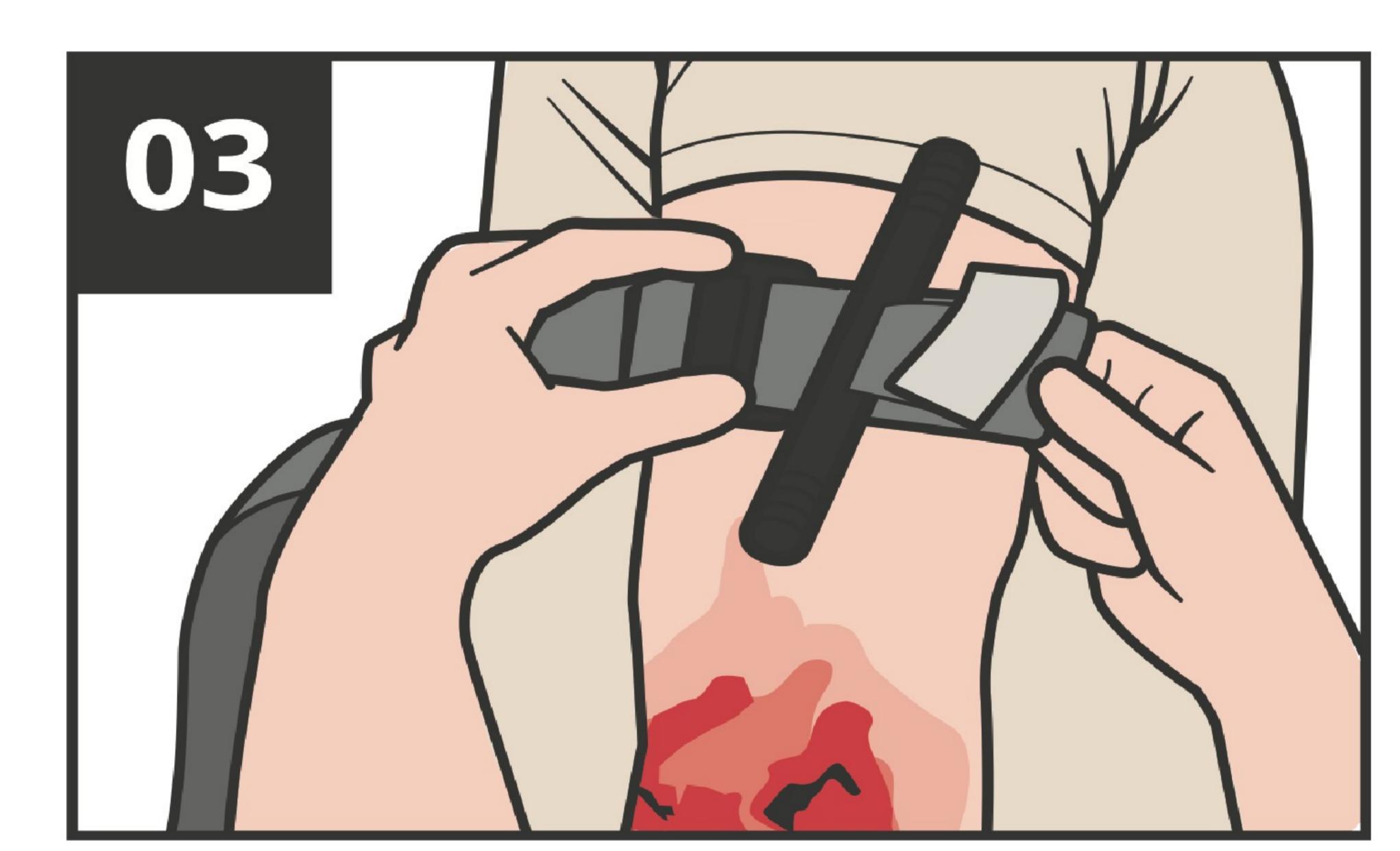


РОЗМІСТІТЬ турнікет не менше, ніж на 5-8 см вище від рани.

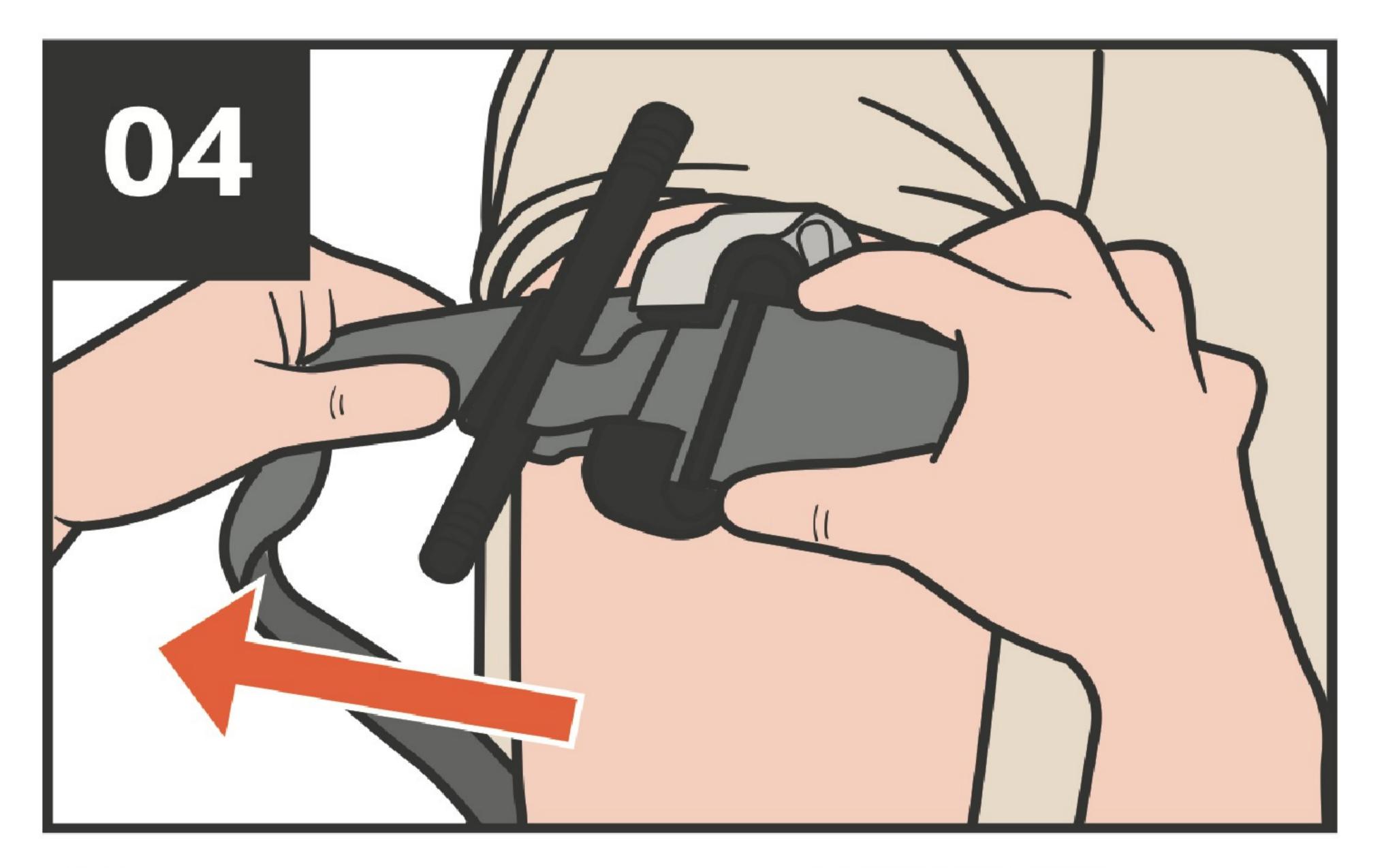


Максимально сильно НАТЯГНІТЬ ремінь турнікета, не залишаючи зазорів.

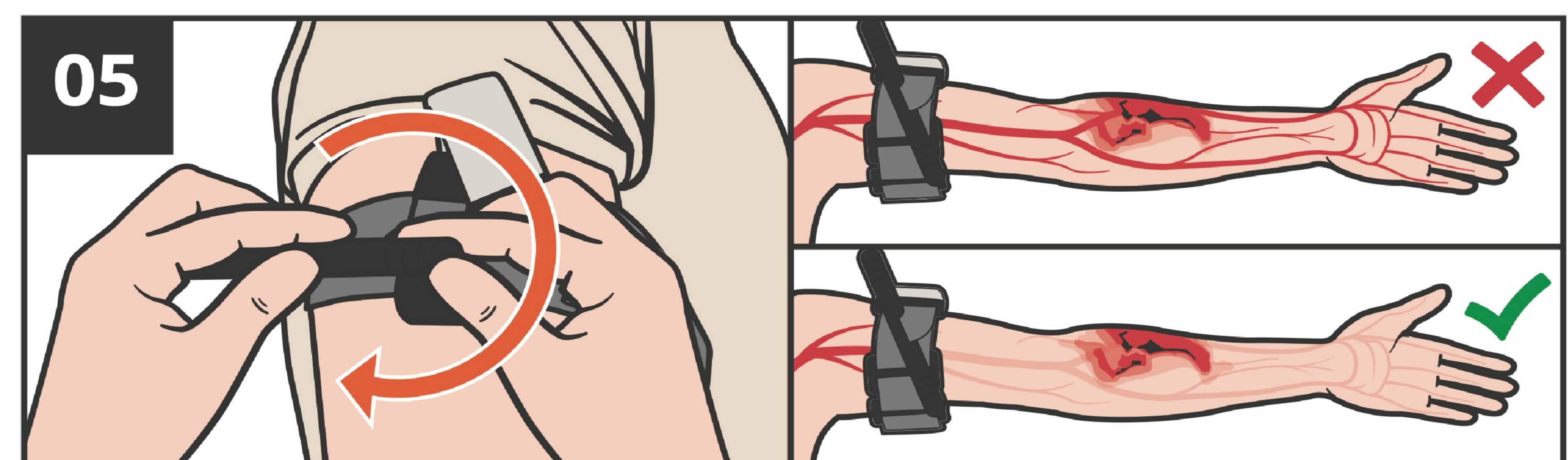


ЗАКРУЧУЙТЕ вороток для затягування стропи турнікета до моменту зупинки кровотечі.

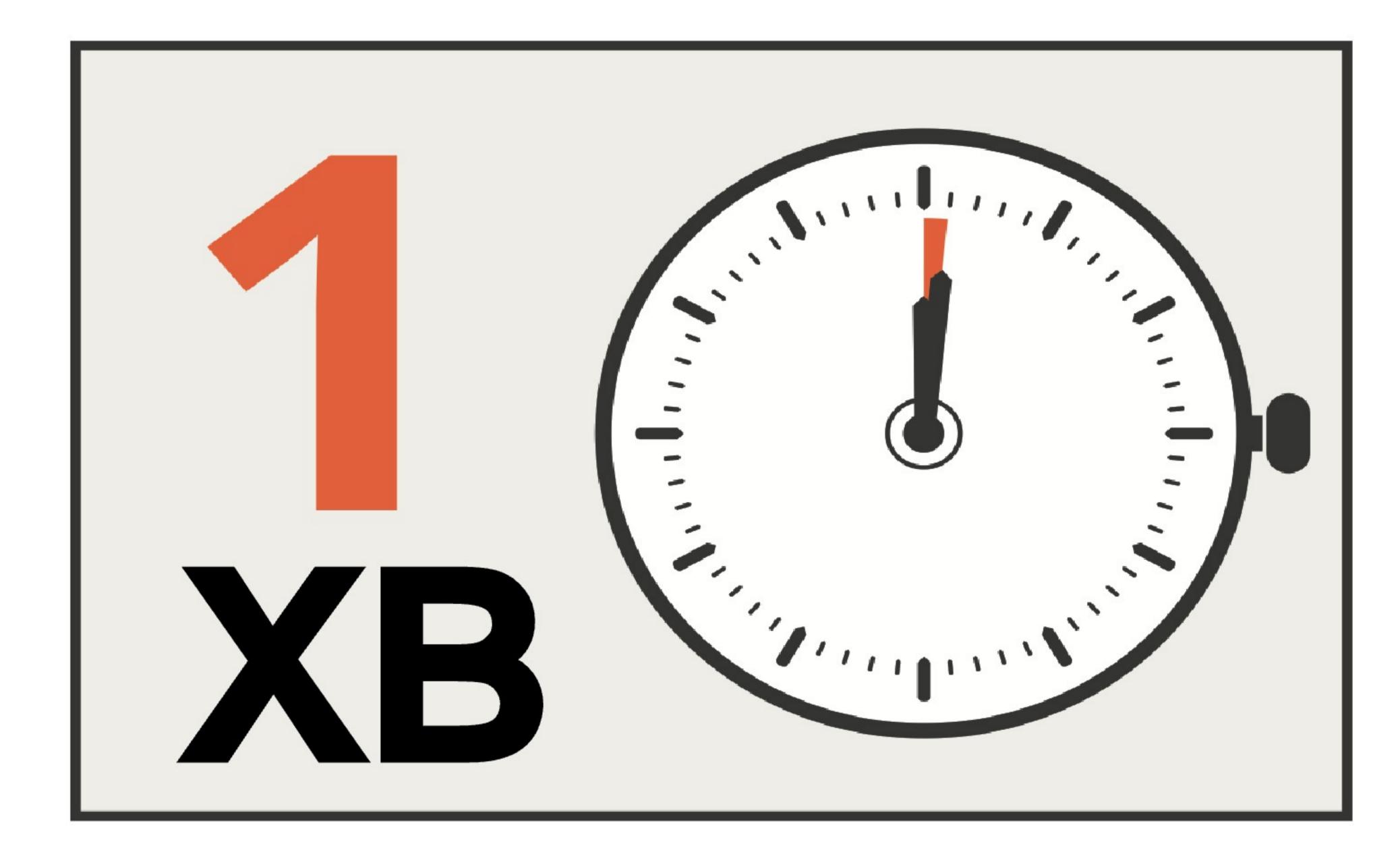


Завершіть НАКЛАДАННЯ джгута для зупинки кровотечі впродовж 1 хв.

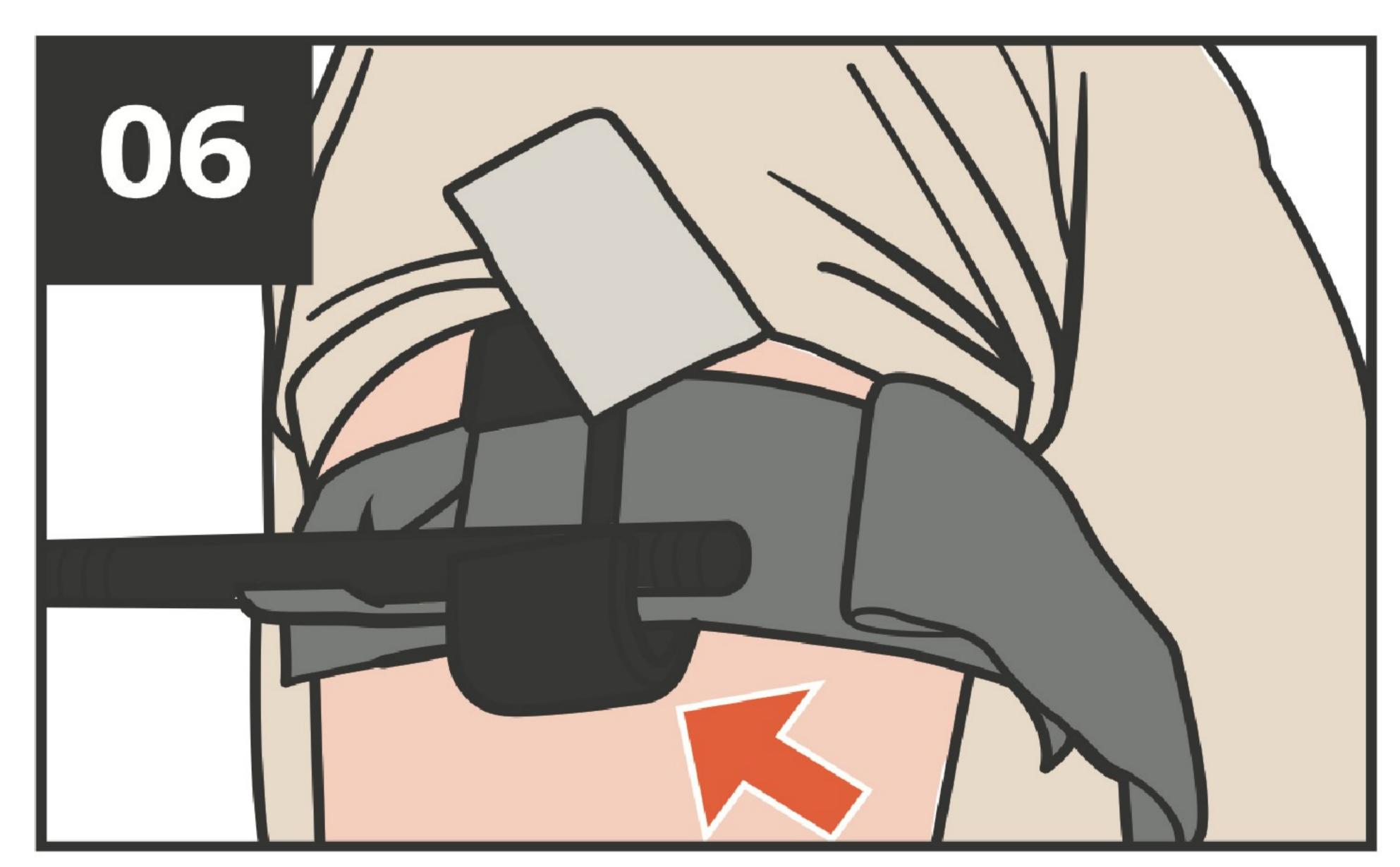


Закріпіть вороток, розмістивши його під однією зі скоб фіксатора.

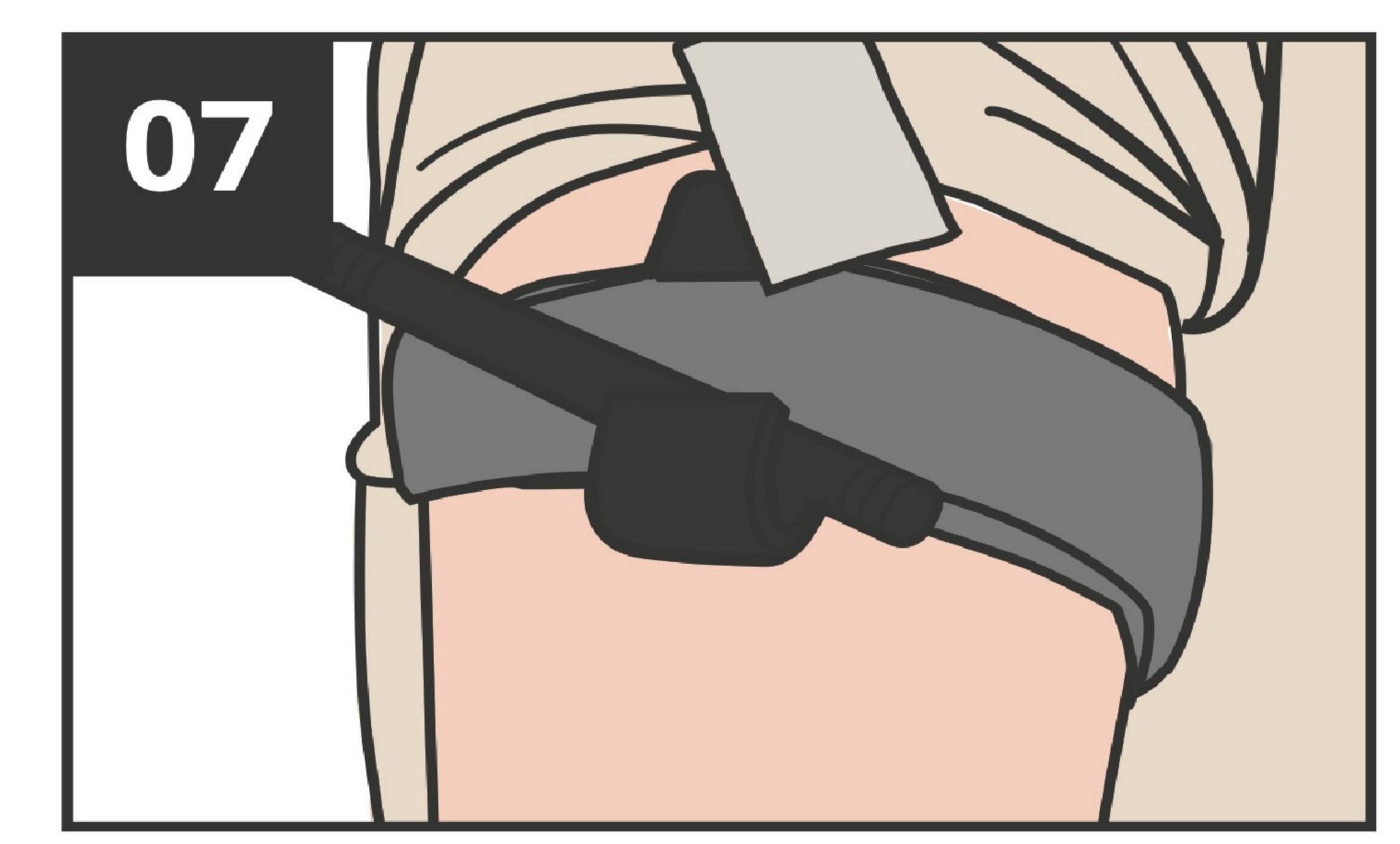

ПРОВЕДІТЬ самоклеючу стрічку між скобами фіксатора та навколо воротка.

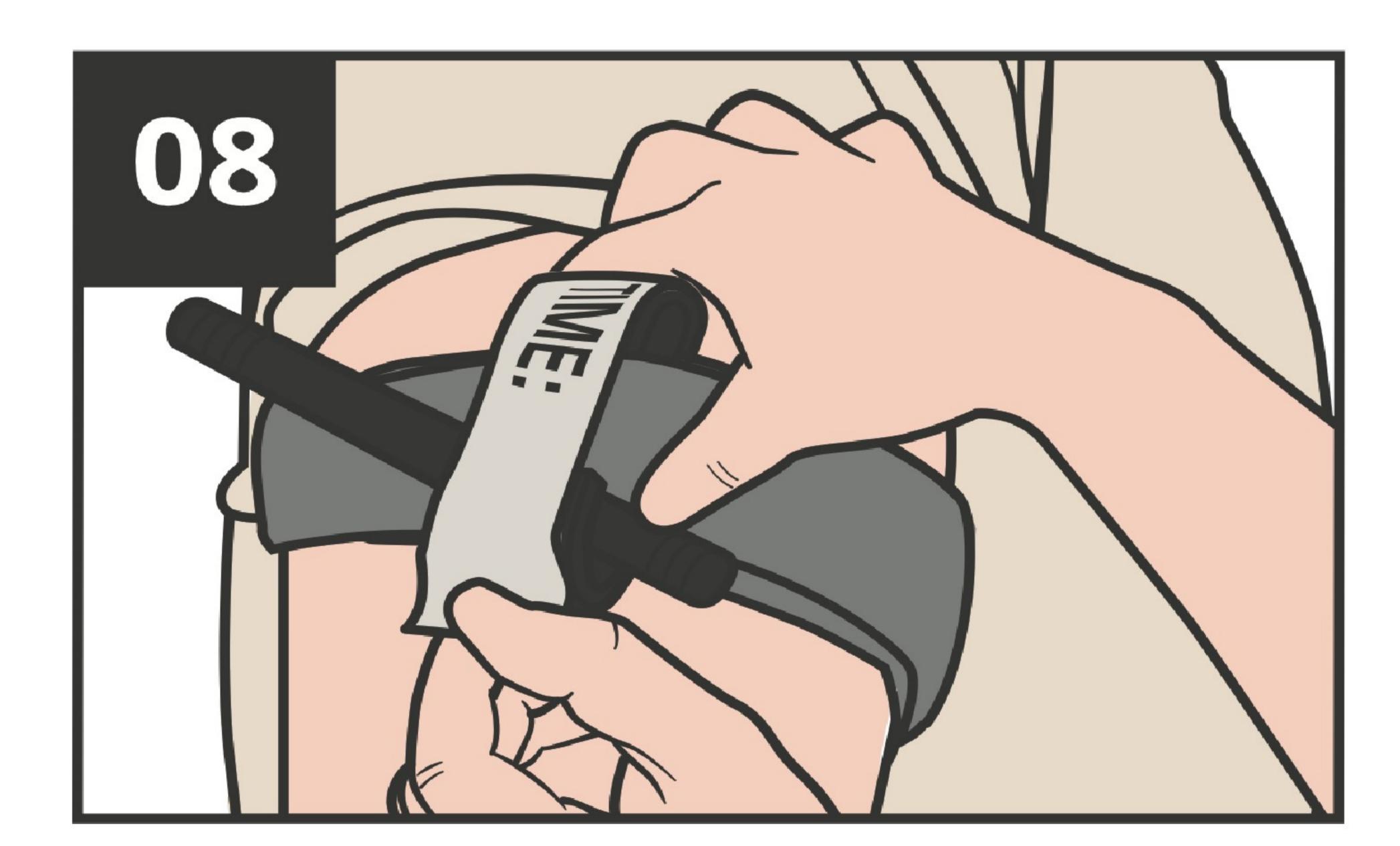

ЗАКРІПІТЬ вороток та ремінь турнікета під фіксуючою стрічкою.

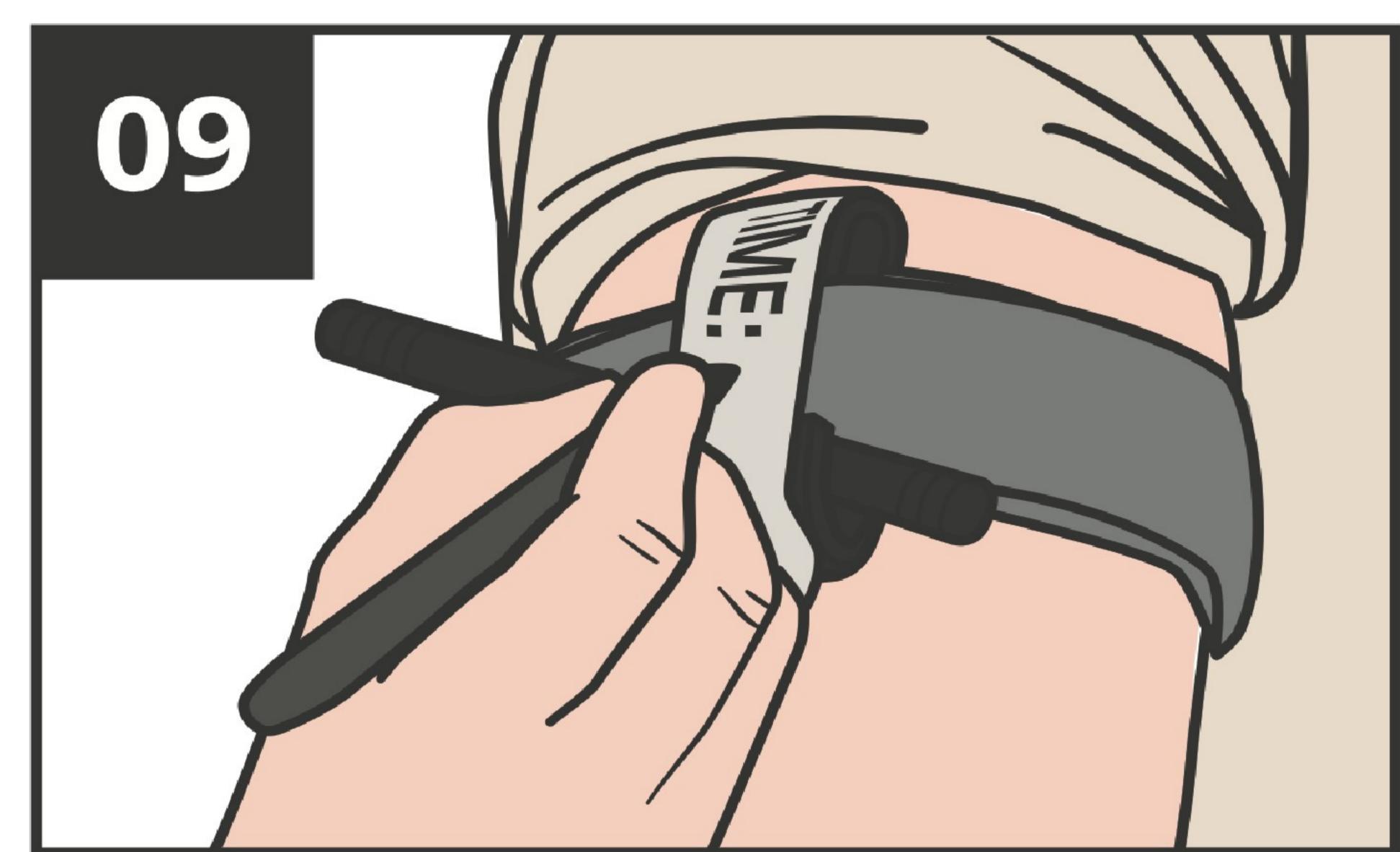

ЗАПИШІТЬ час накладання турнікета на фіксуючій стрічці та у Картці пораненого ТССС, або ж на чолі постраждалого.



ПОВІДОМТЕ медичним працівникам інформацію, про надану допомогу.