



АЅМ НАКЛАДАННЯ КОМПРЕСІЙНОГО БАНДАЖА




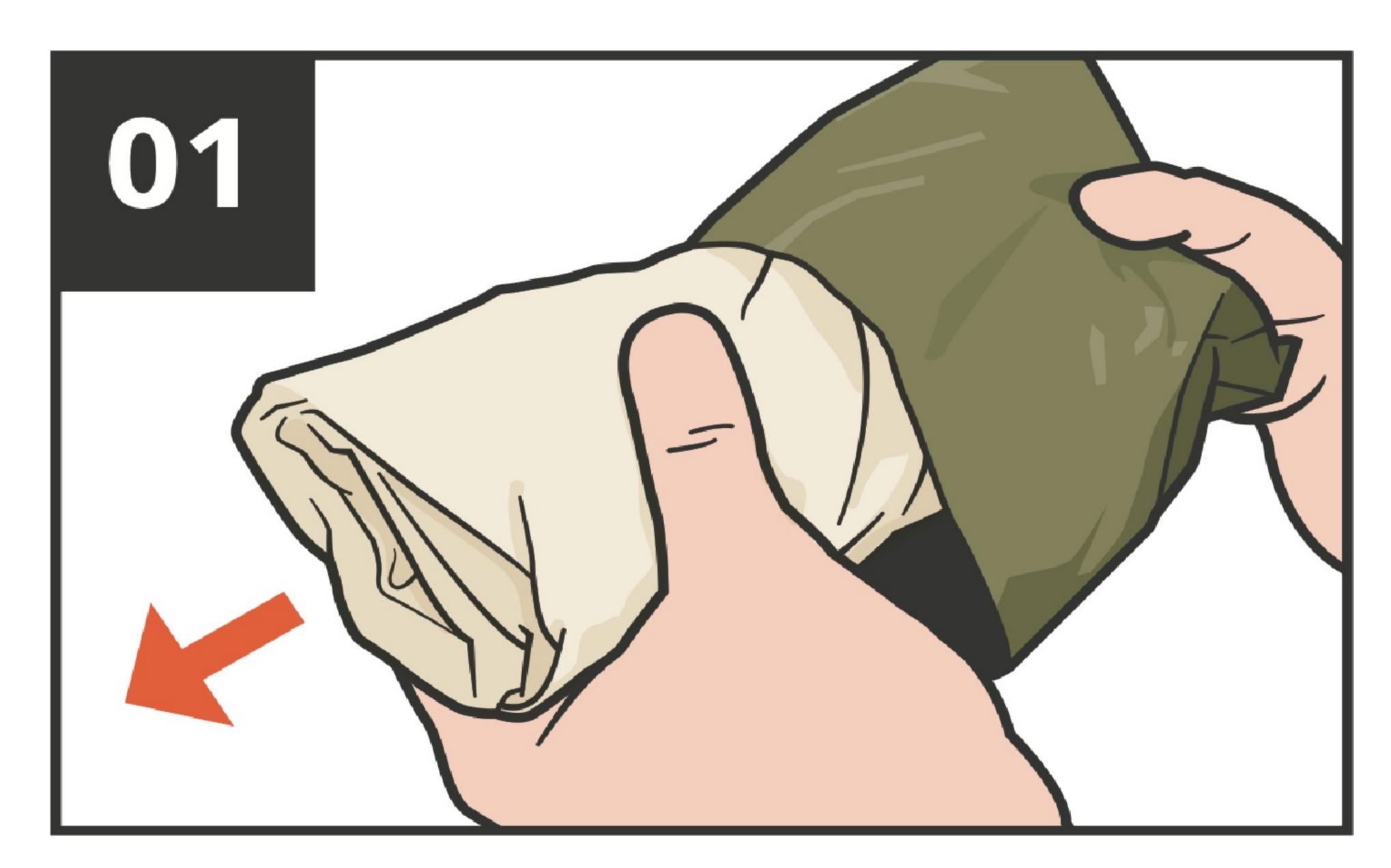


ВИЙМІТЬ бандаж з обгортки та упаковки

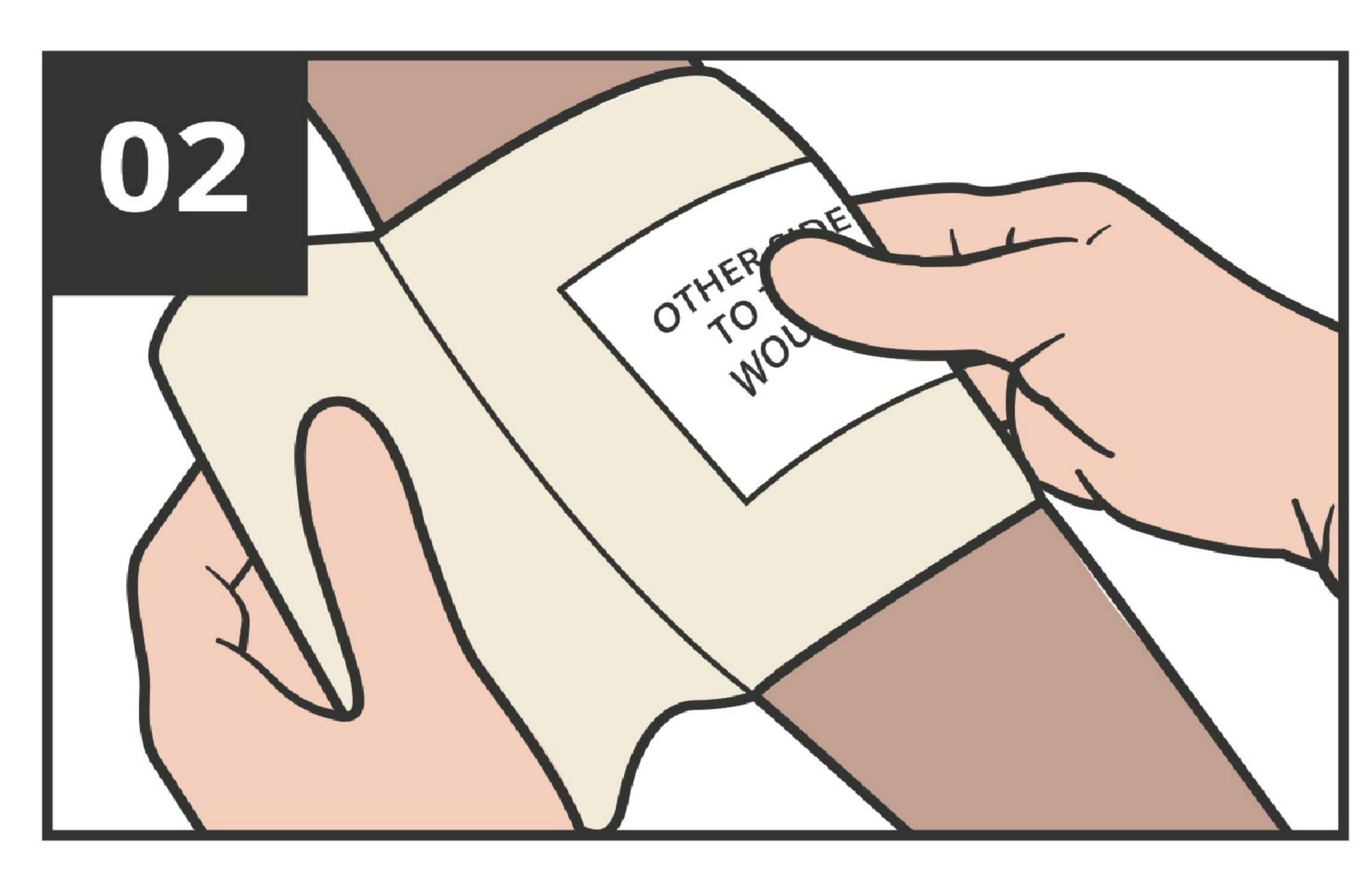


РОЗМІСТІТЬ подушечку бандажа безпосередньо над раною, застосовуючи тиск

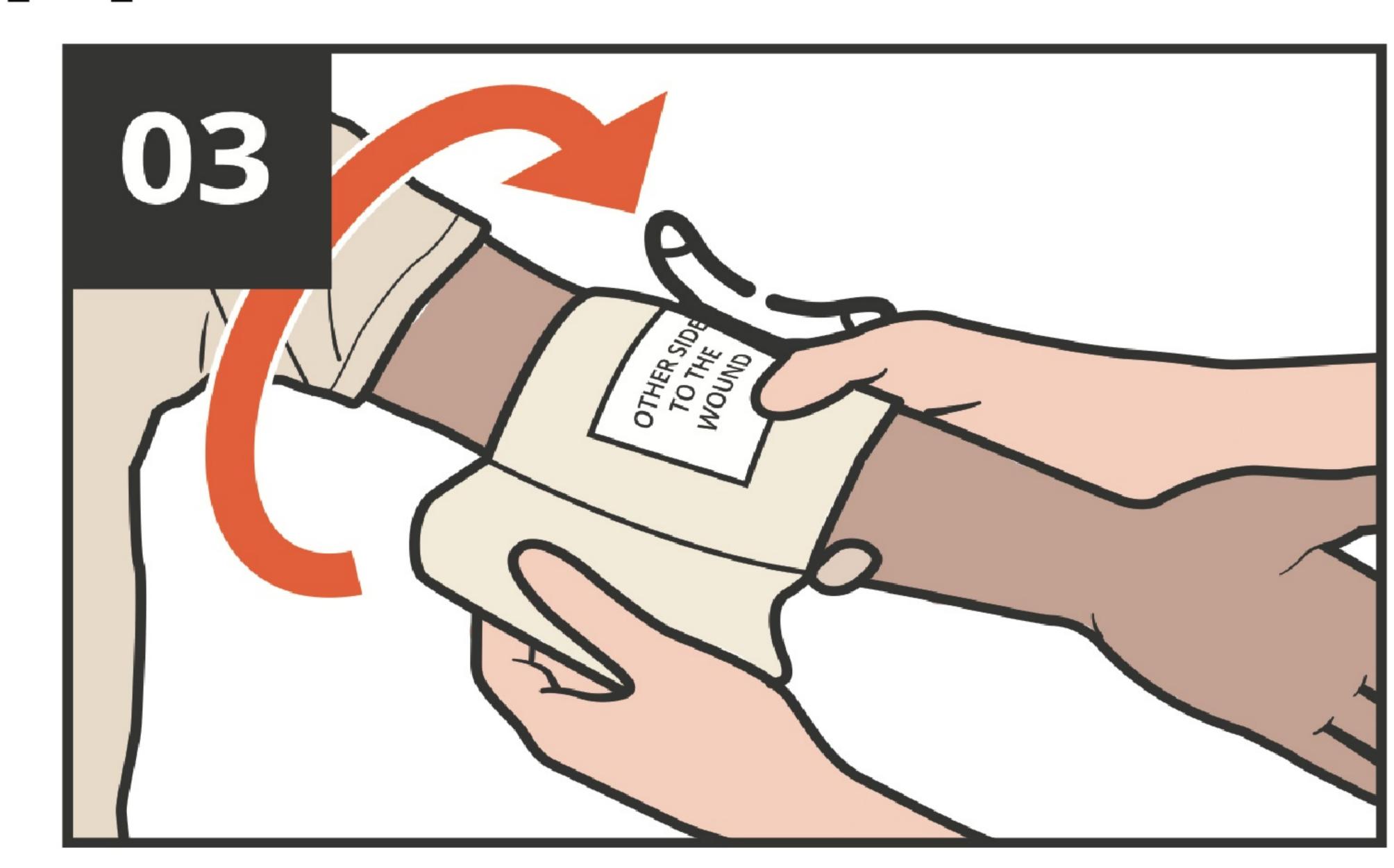


ОБГОРНІТЬ еластичний бандаж навколо кінцівки, утримуючи тиск

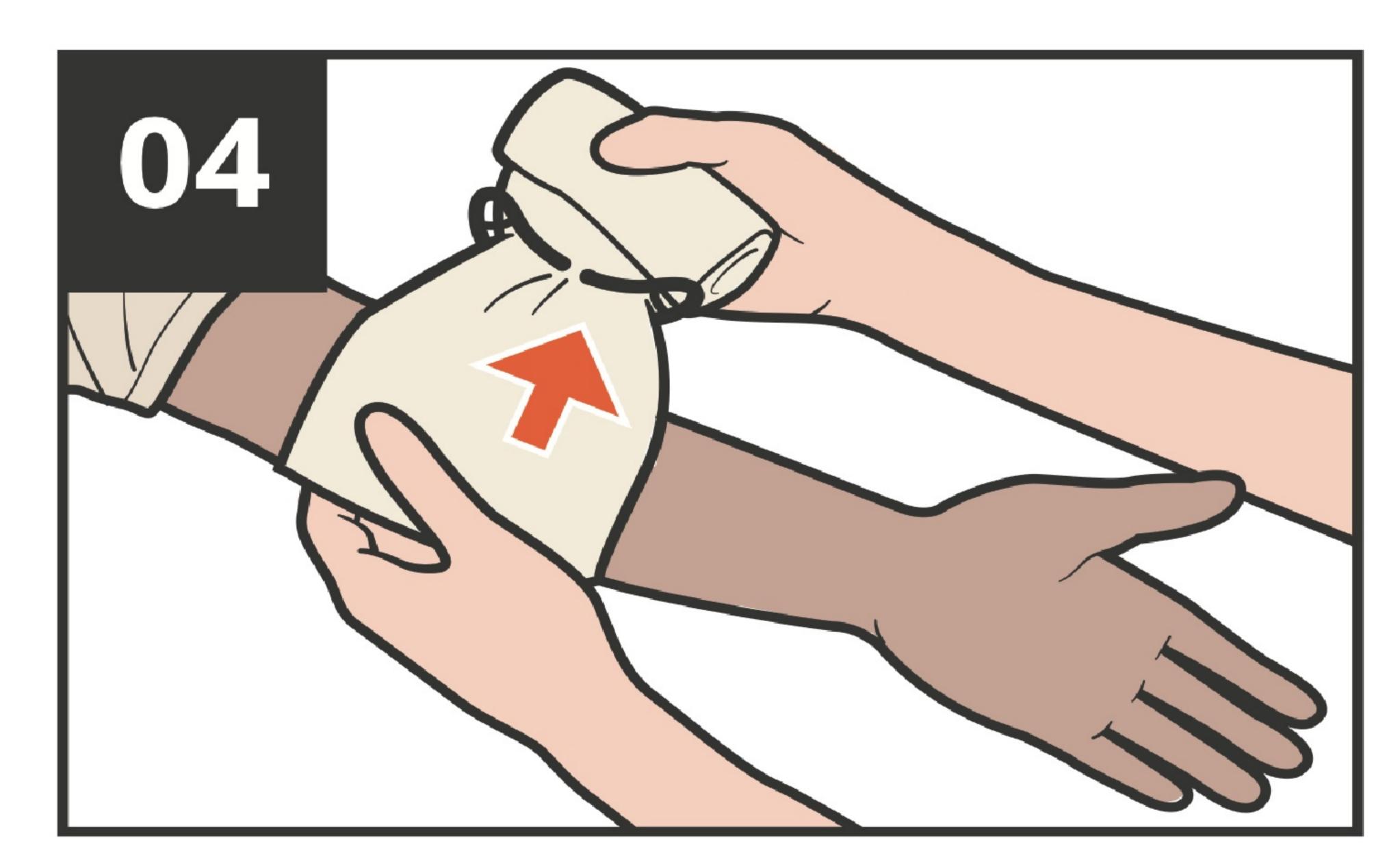

ПРОТЯГНІТЬ бинт крізь пластиковий елемент тиску

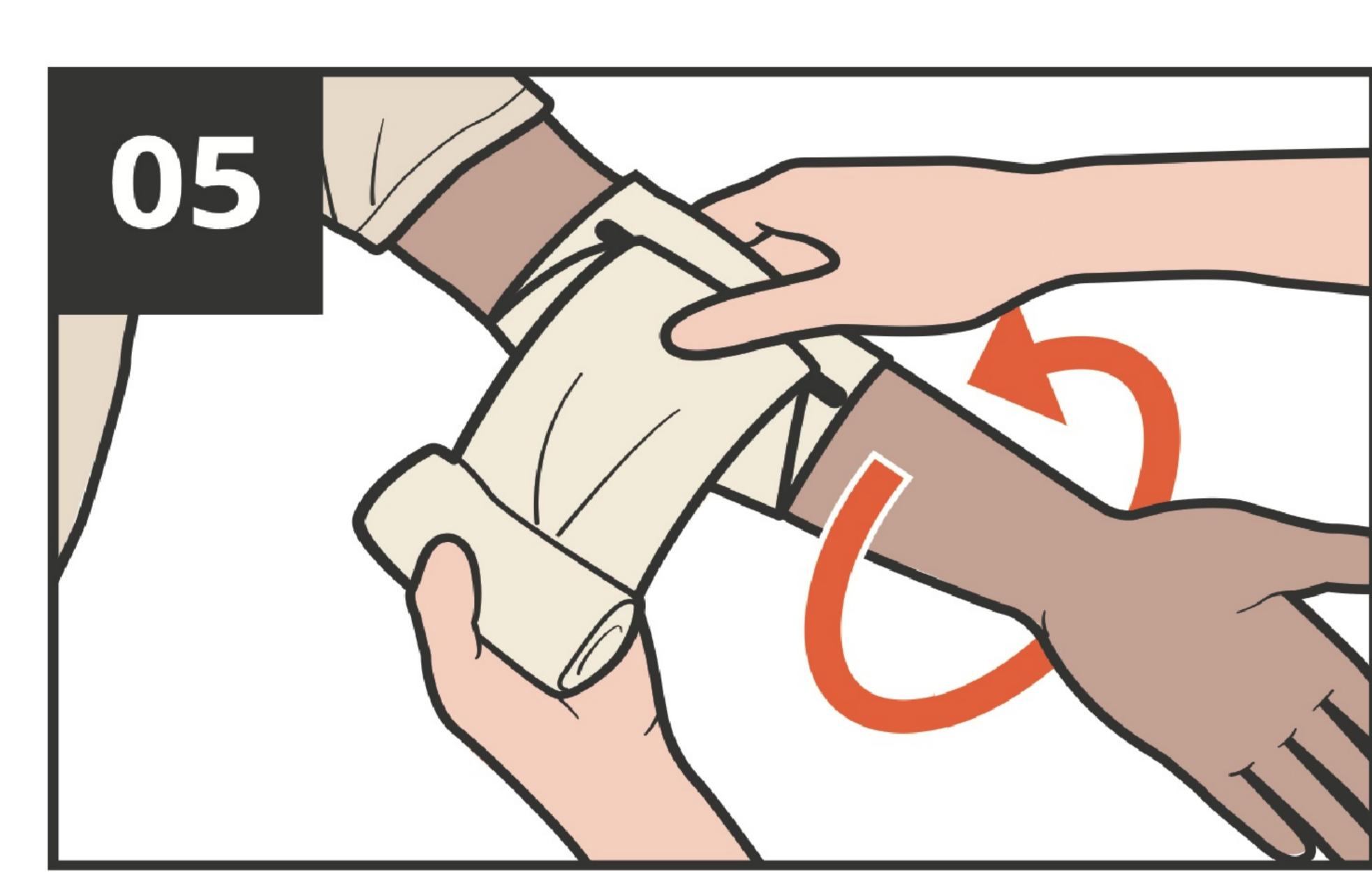


Почніть обгортати бандаж навколо кінцівки у ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ поверх пластикового елемента тиску

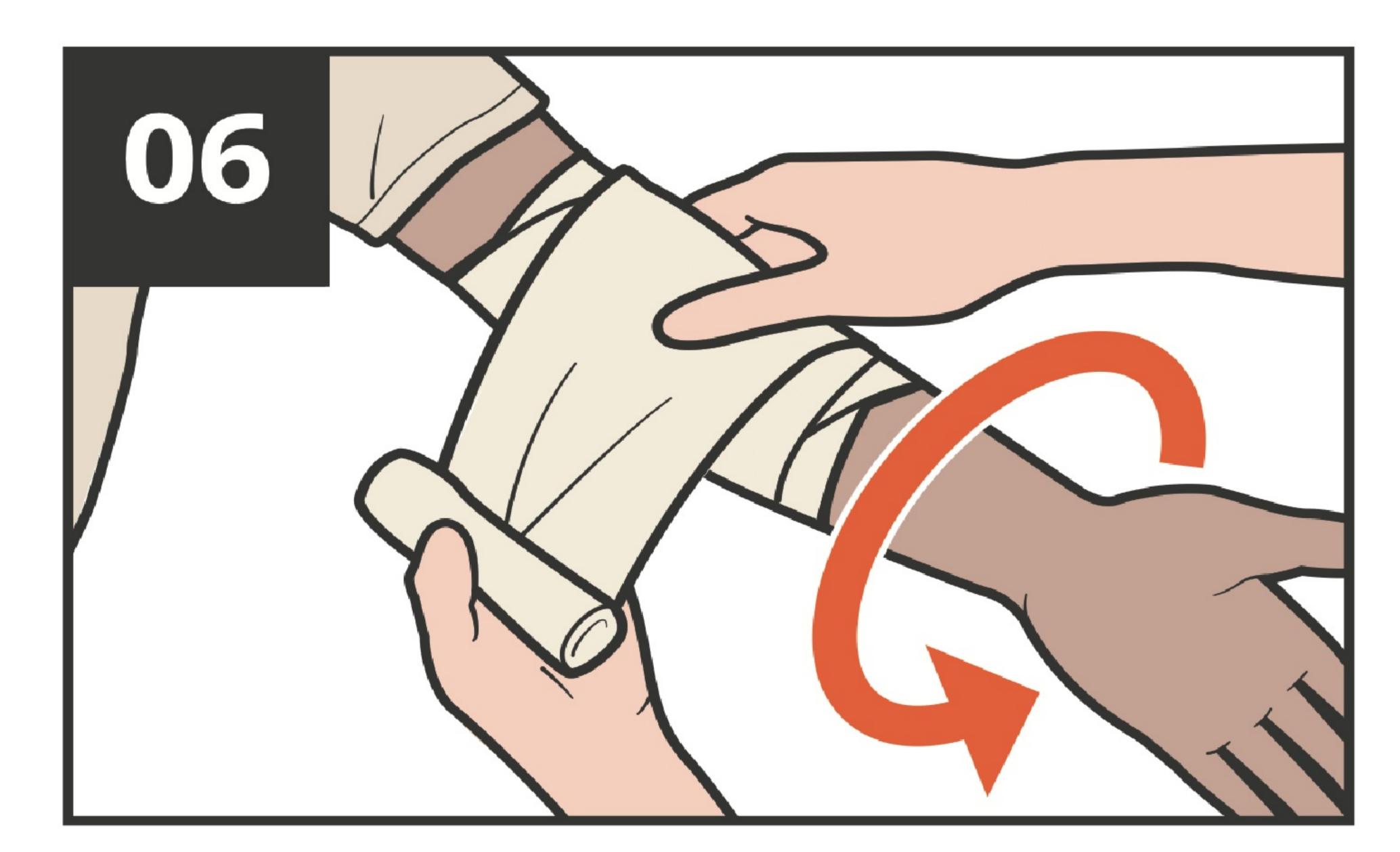


Щільно ОБГОРТАЙТЕ бандаж навколо пластикового елемента тиску, допоки повністю не закриєте краї подушечки



ЗАКРІПІТЬ гачок пластикового елемента тиску за один з обертів бандажа

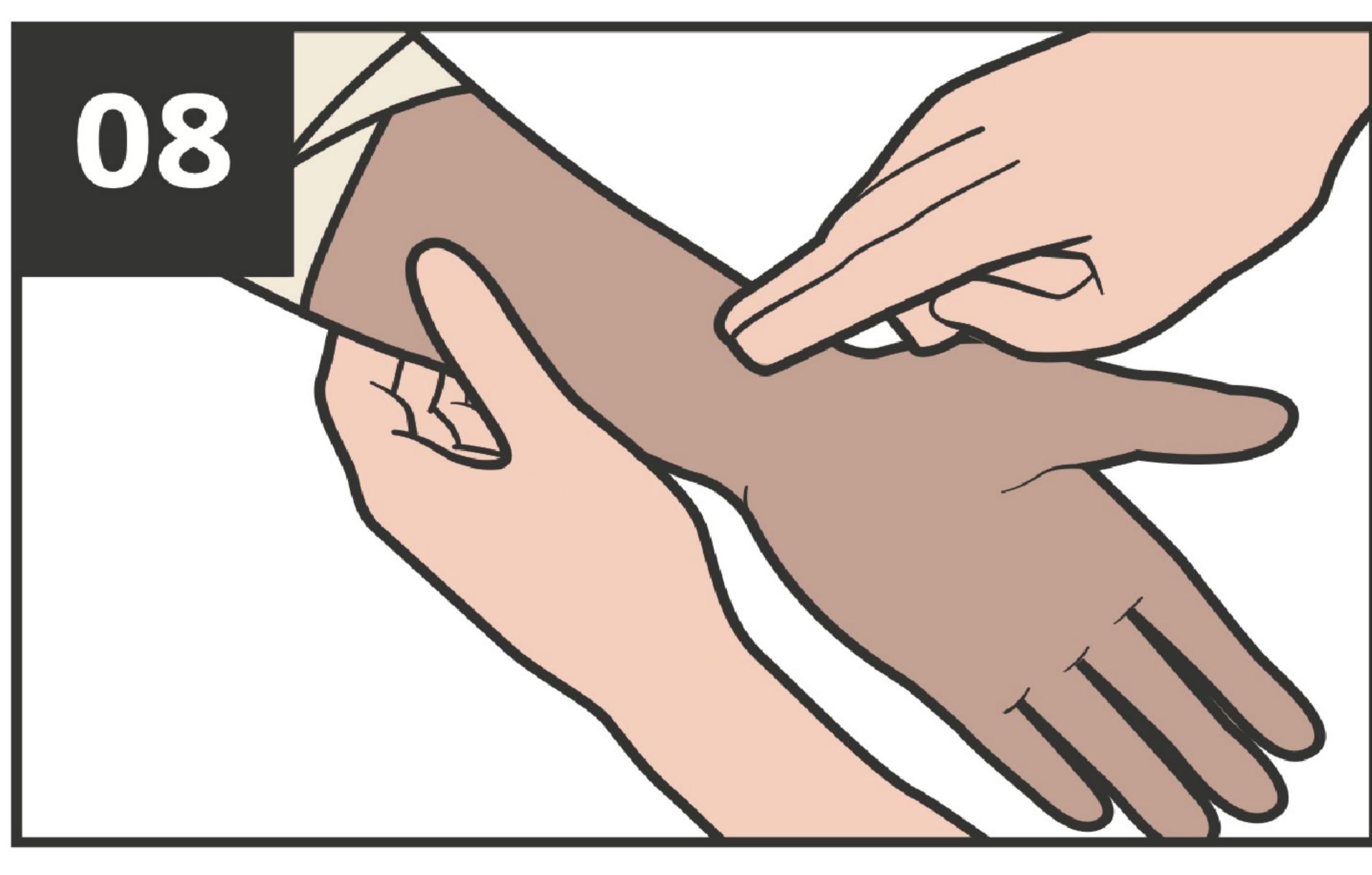

ОЦІНІТЬ кровообіг нижче місця накладання пов'язки, перевіривши пульс; за потреби – послабте бандаж

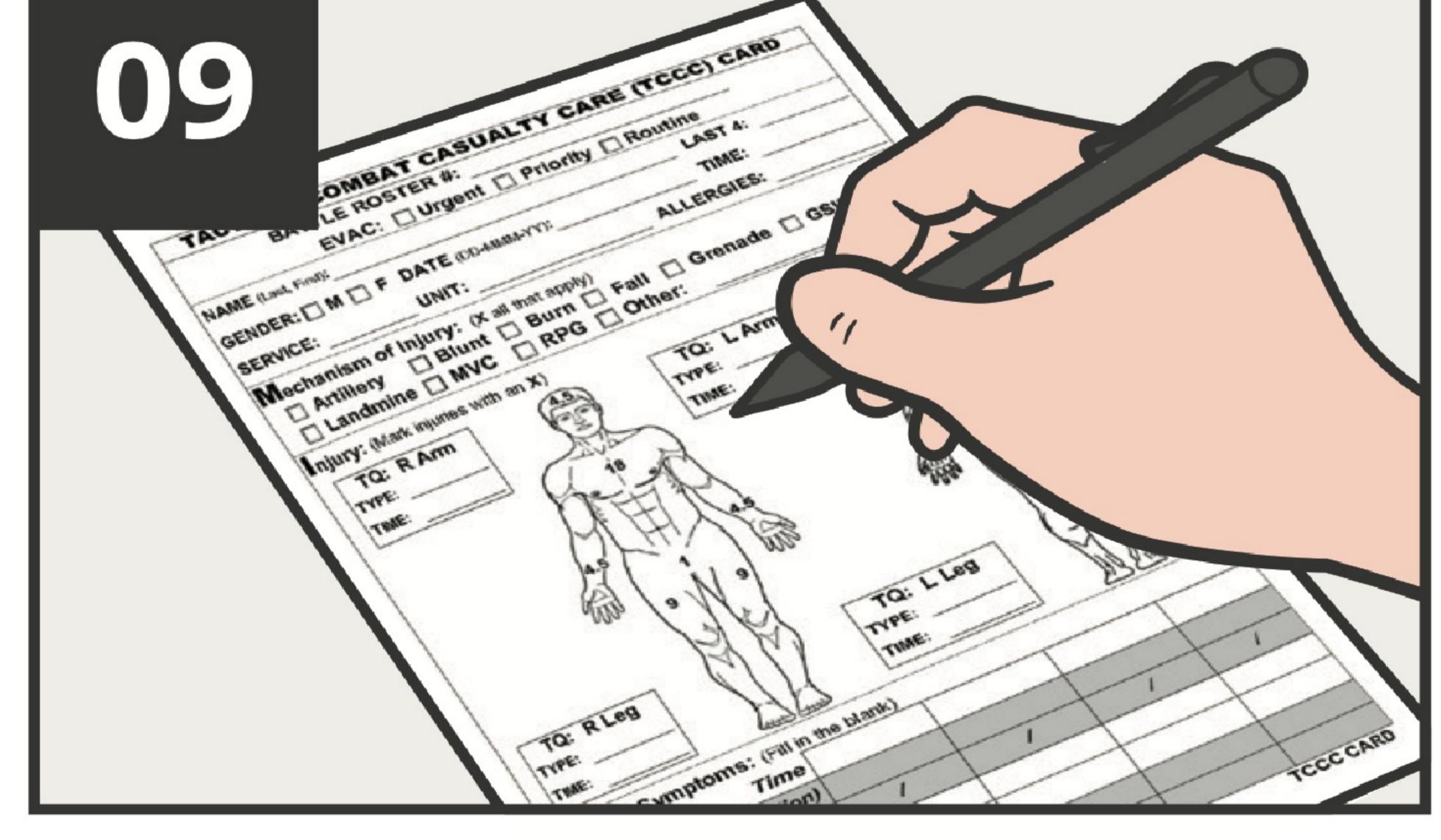

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ надану допомогу у Картці пораненого TCCC



ПОВІДОМТЕ медичний персонал про надану допомогу