











ЕНДОТРАХЕАЛЬНА ІНТУБАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЯМОЇ ЛАРИНГОСКОПІЇ

(Ендотрахеальна трубка зі стилетом)

...ПРОДОВЖЕННЯ

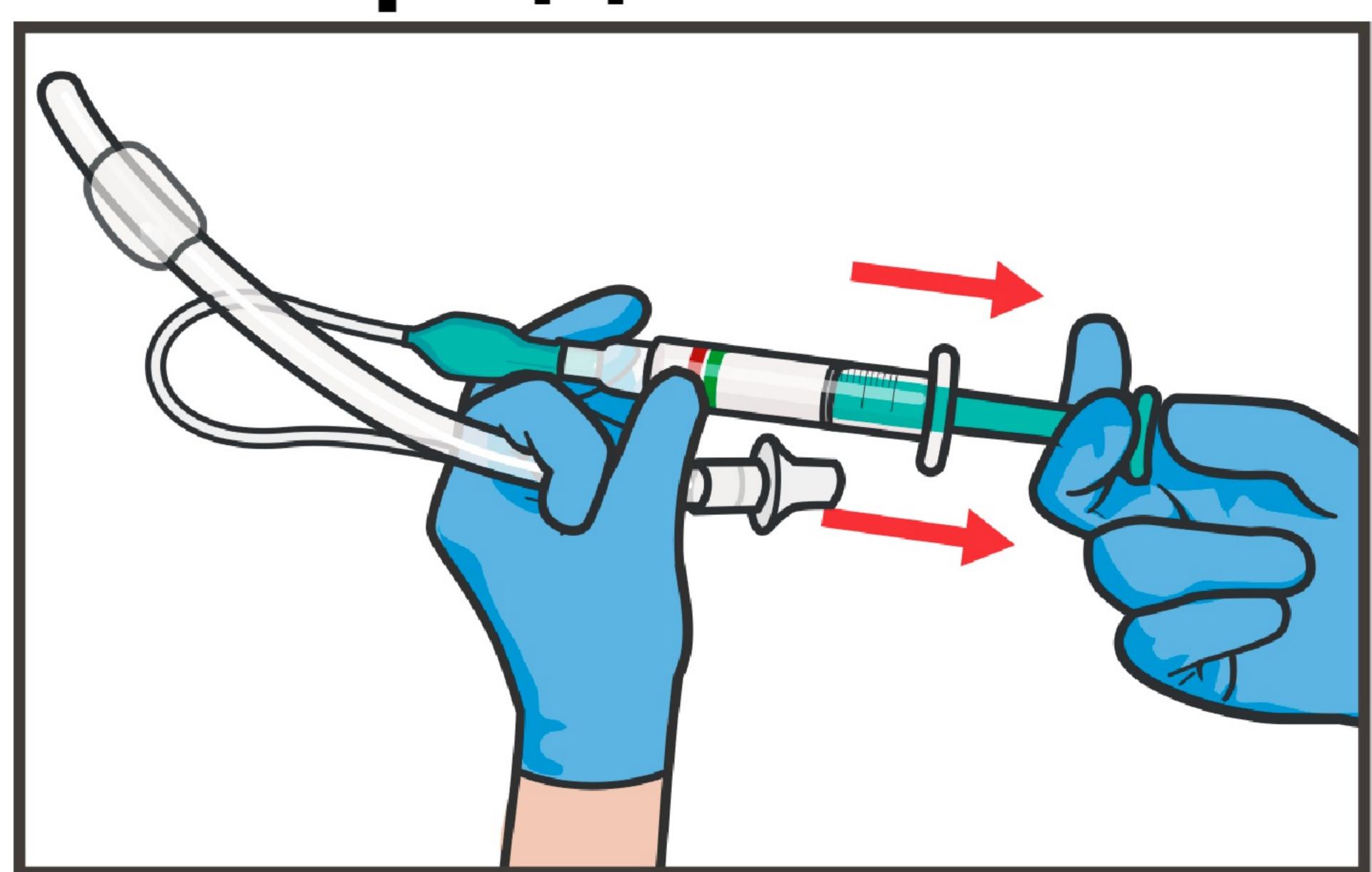


3ДУЙТЕ манжету, потягнувши поршень шприца назад до повного усунення повітря з манжети.

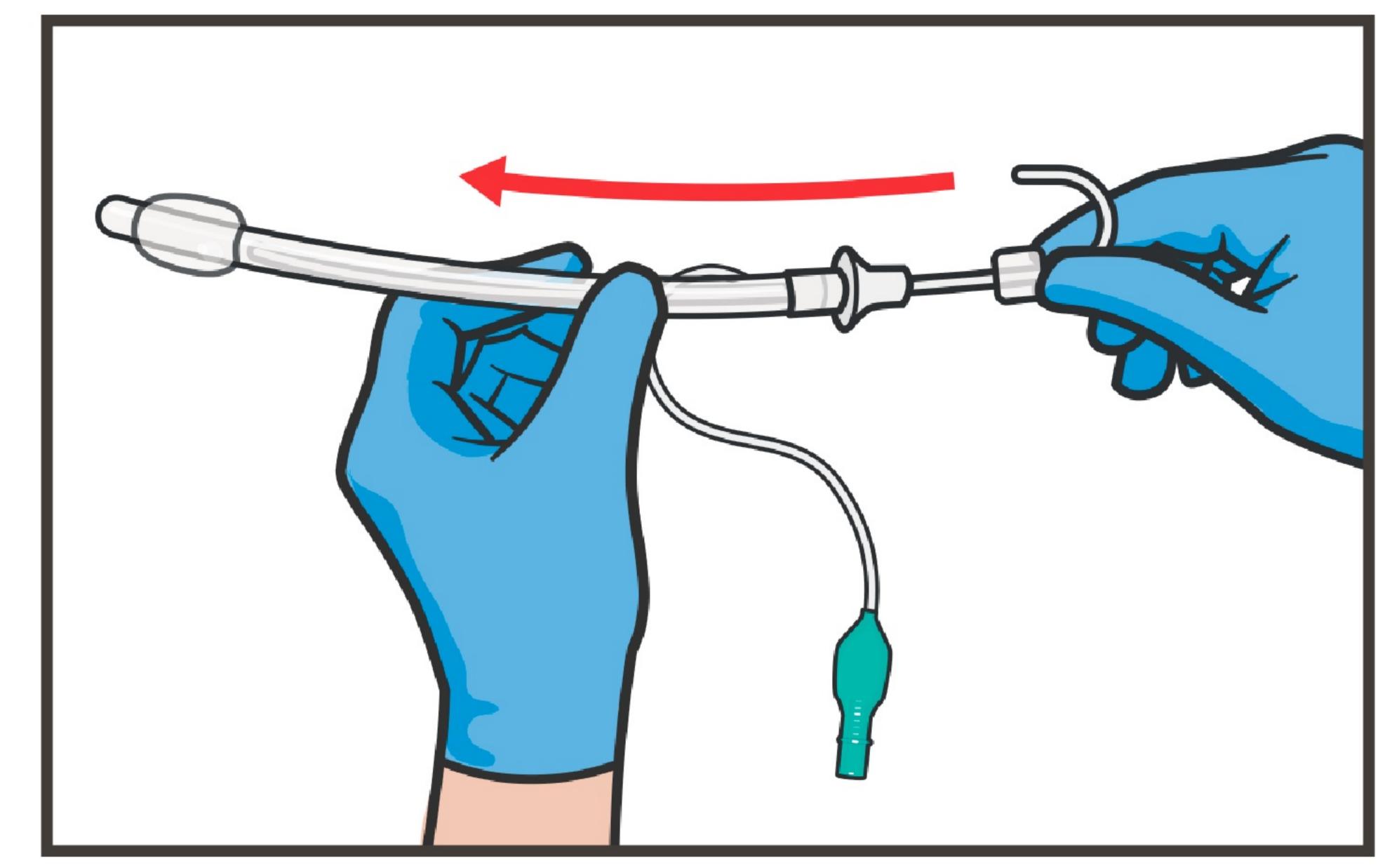


вставте стилет у ЕТТ.


(а) Стилет слід ввести в ЕТТ так, щоб його дистальний кінець не досягав до кінця ЕТТ приблизно на 1,5 см.

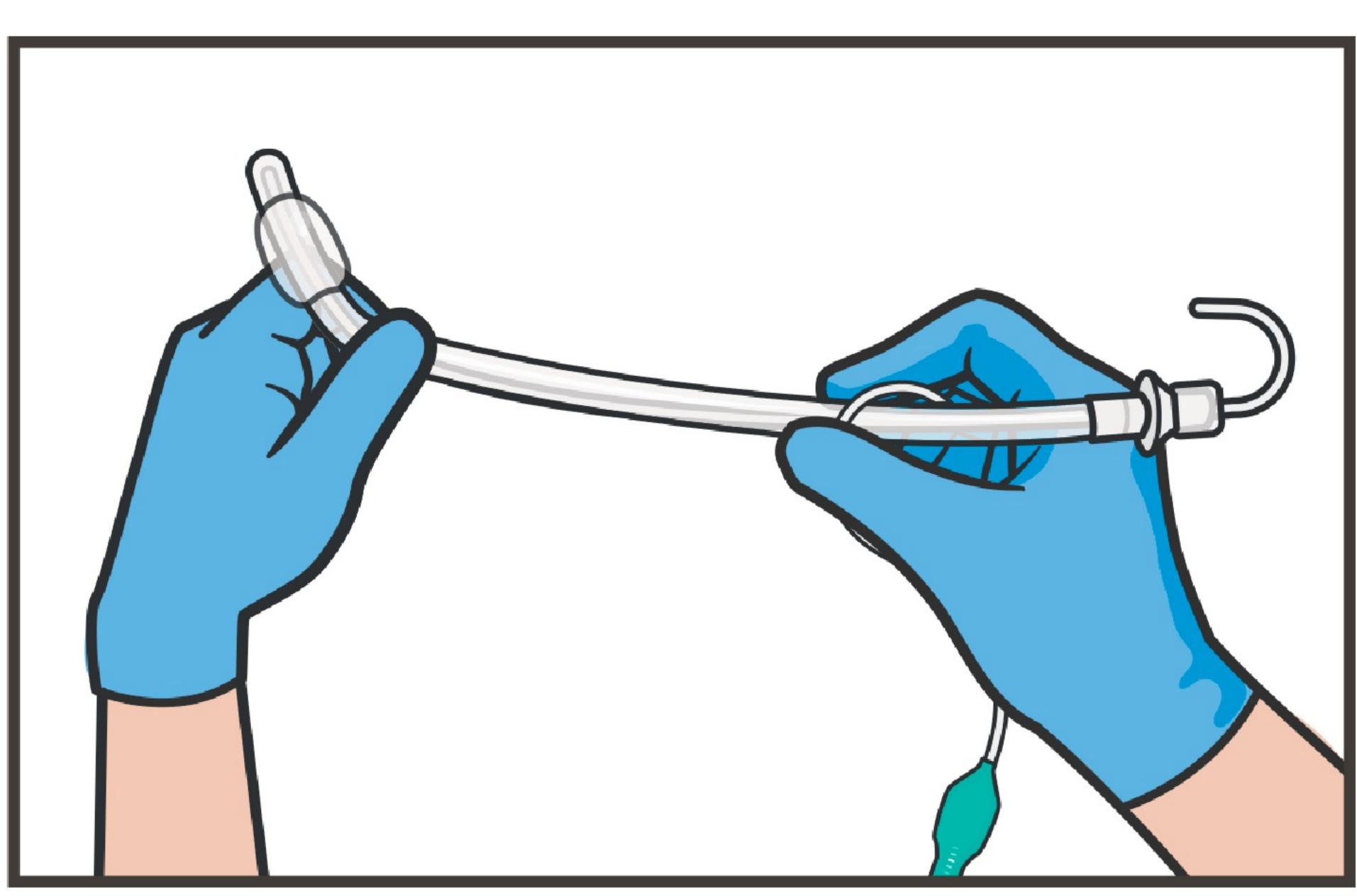


(b) Зігніть інший (проксимальний) кінець стилета під кутом 90 градусів, щоб перешкодити подальшому просуванню всередині ЕТТ.

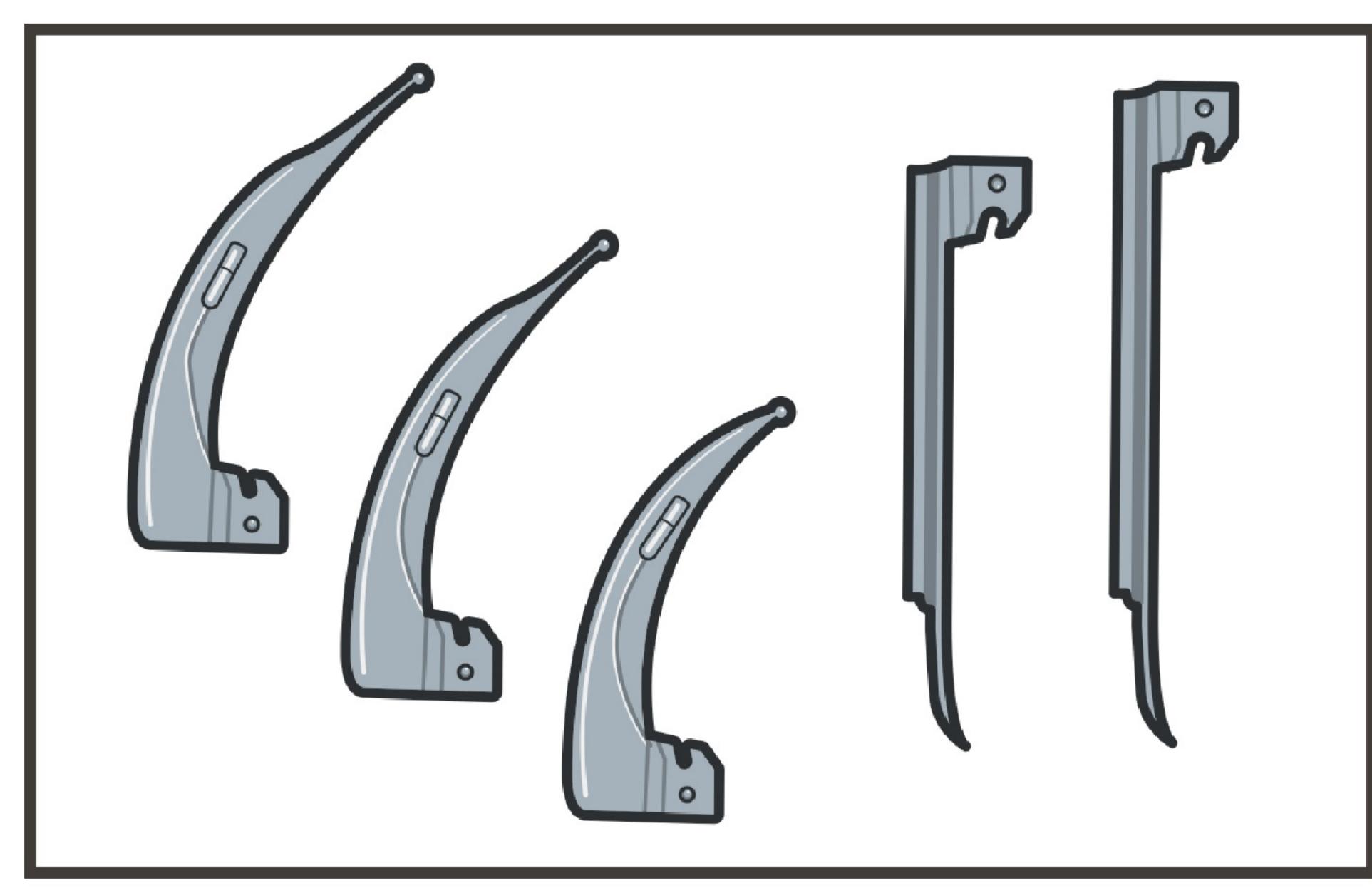


ОБЕРІТЬ відповідний клинок ларингоскопа, приєднайте його до ручки та впевніться у тому, що ліхтарик працює.

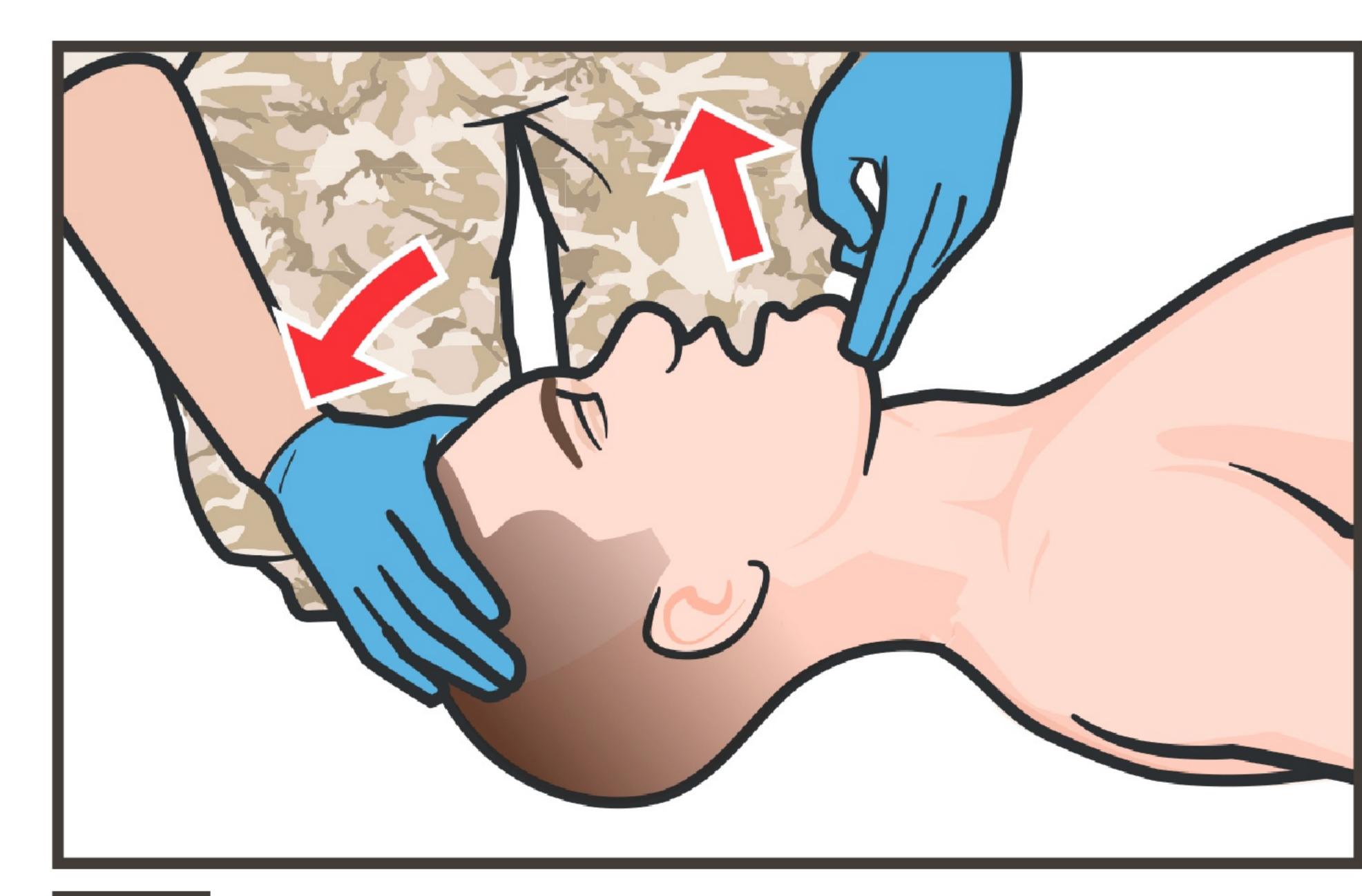


РОЗМІСТІТЬ голову постраждалого, перерозігнувши шию.

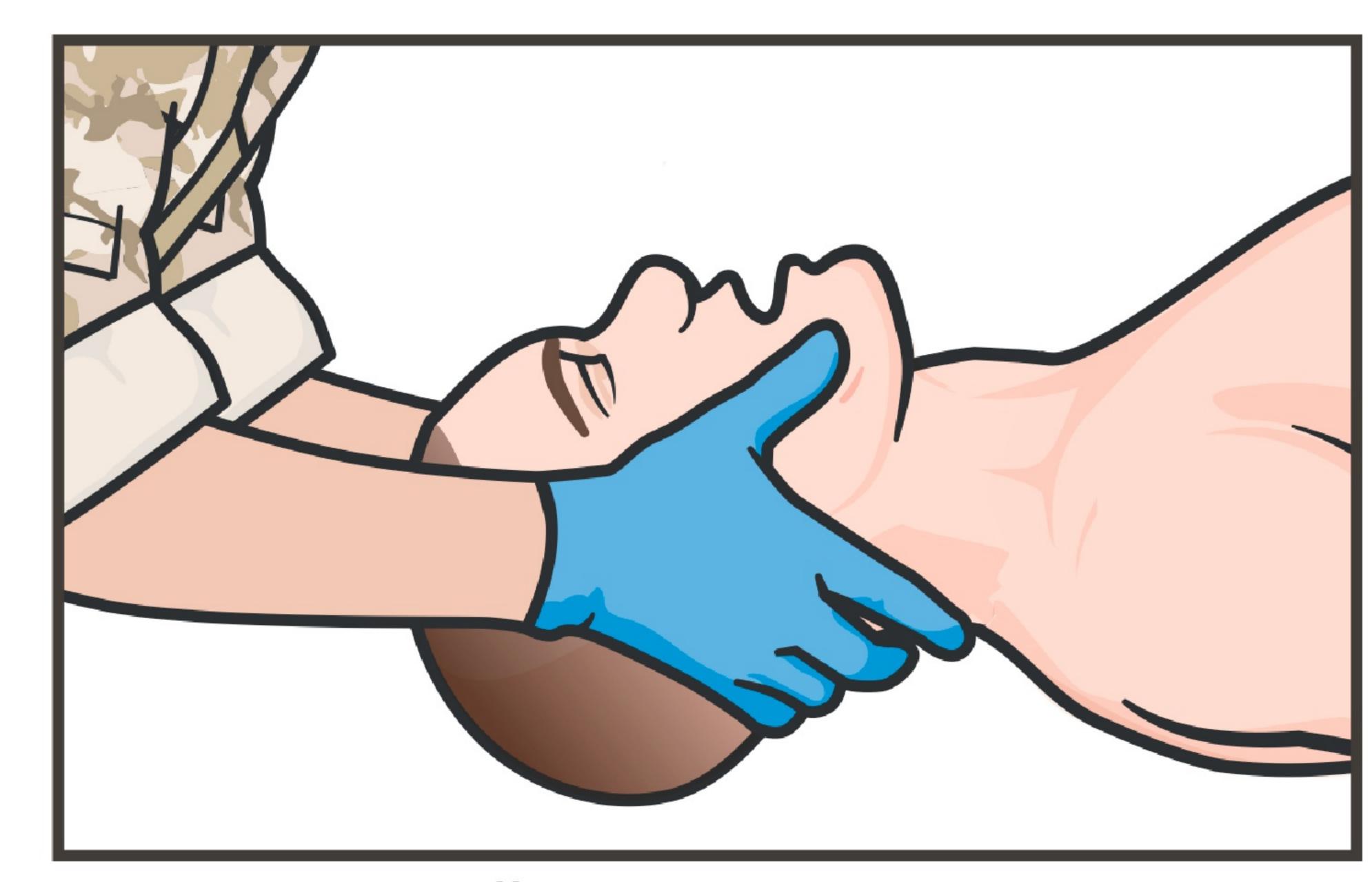


ВІДКРИЙТЕ рот постраждалому та тримайте його відкритим, тиснучи на нижню щелепу.

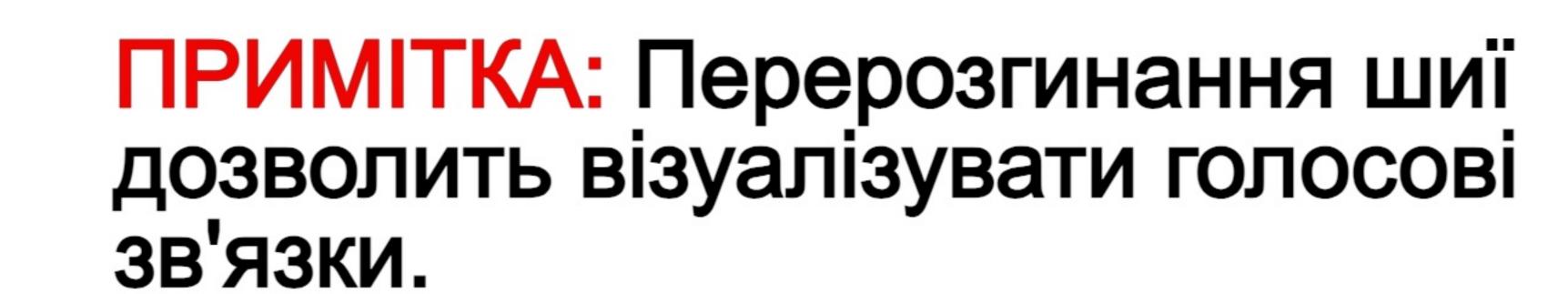


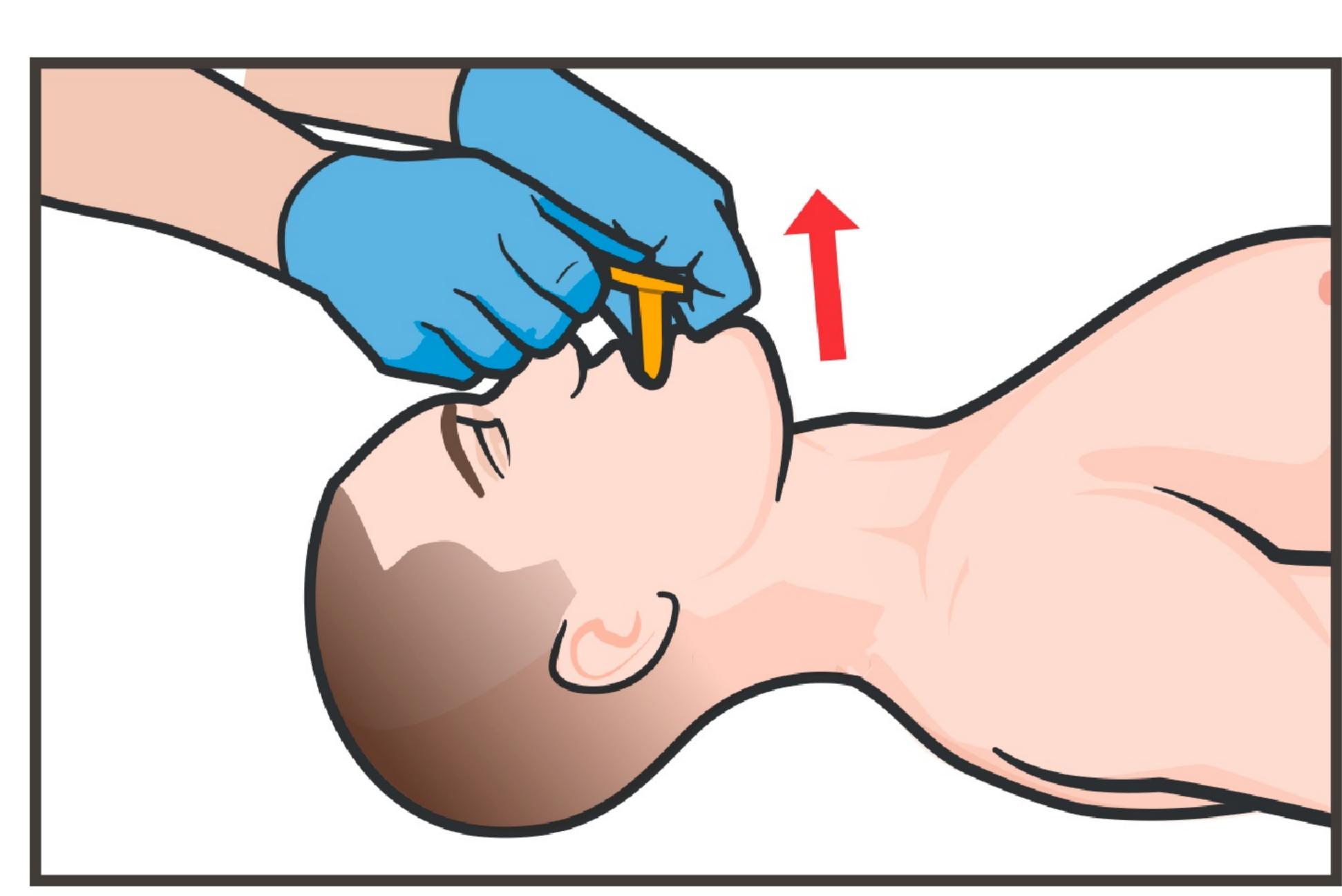

12 ВИЙМІТЬ орофарингеальний повітровід, якщо його було встановлено.

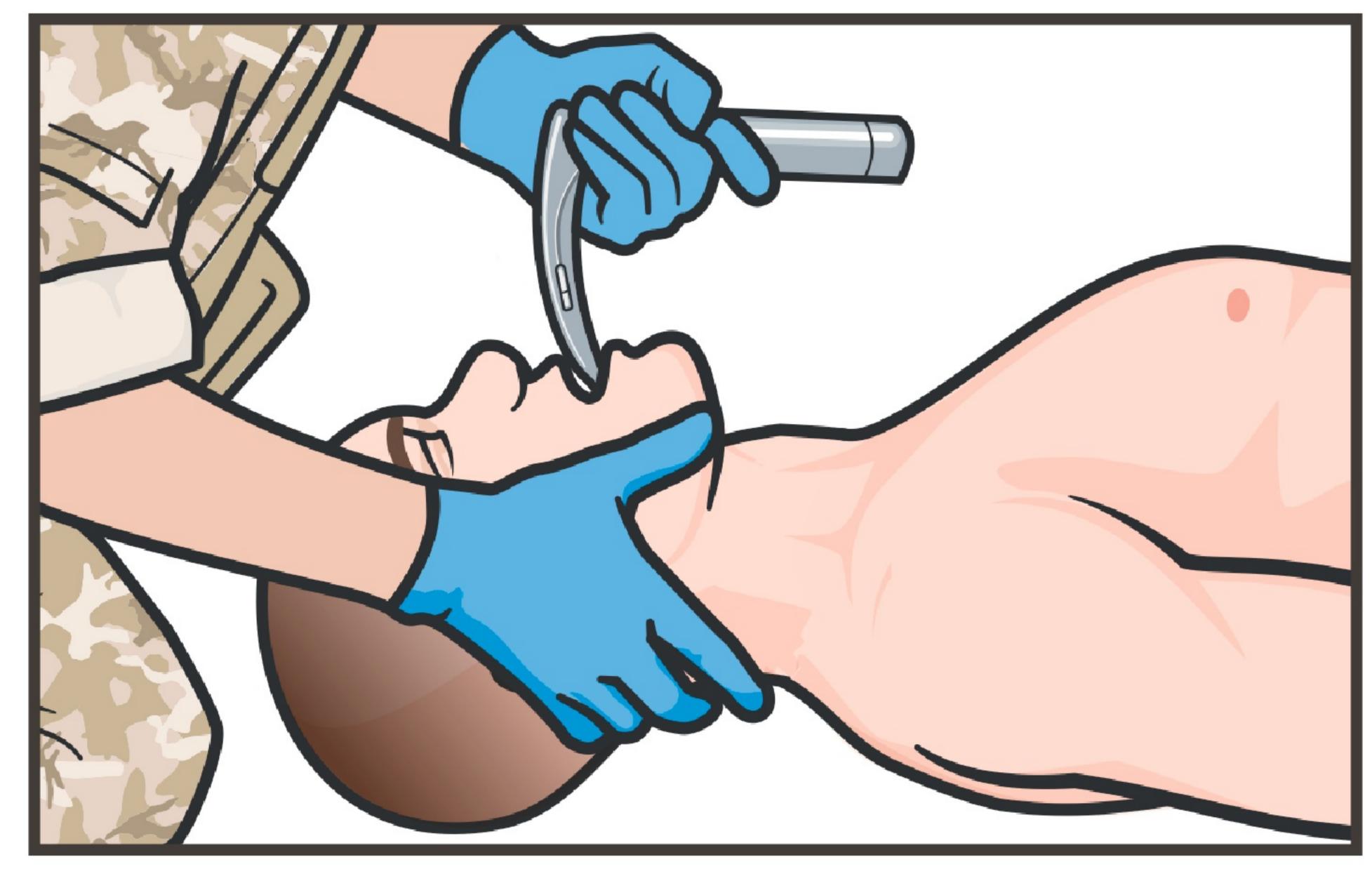

- РОЗМІСТІТЬСЯ за головою постраждалого.
- (а) Тримайте ларингоскоп лівою рукою.
- (b) Відкрийте та зафіксуйте ларингоскоп з обраним клинком під кутом 90 градусів.

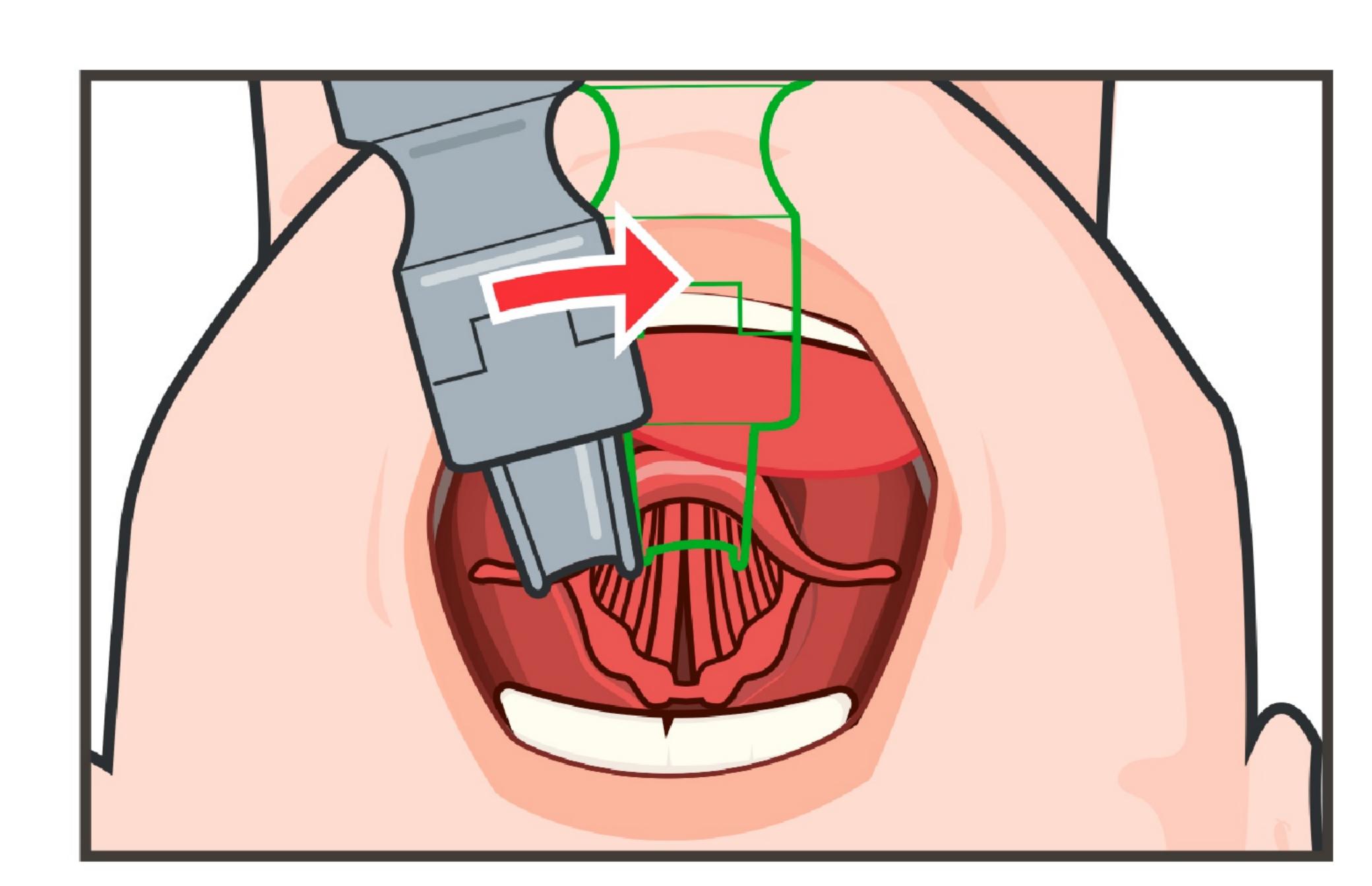

- (с) Розмістіть клинок з правої сторони у ротовій порожнині постраждалого.
- (d) Вводьте ларингоскоп у напрямку до центра ротової порожнини, злегка зміщуючись вліво; таким чином ви заберете язик з вашого шляху.