














ЖОРСТКИЙ ЩИТОК ДЛЯ ОКА



НАДАЙТЕ пораненому зручного положення, яке дозволить вам мати доступ до його ока (голови).




Зніміть шолом з пораненого, якщо це необхідно.

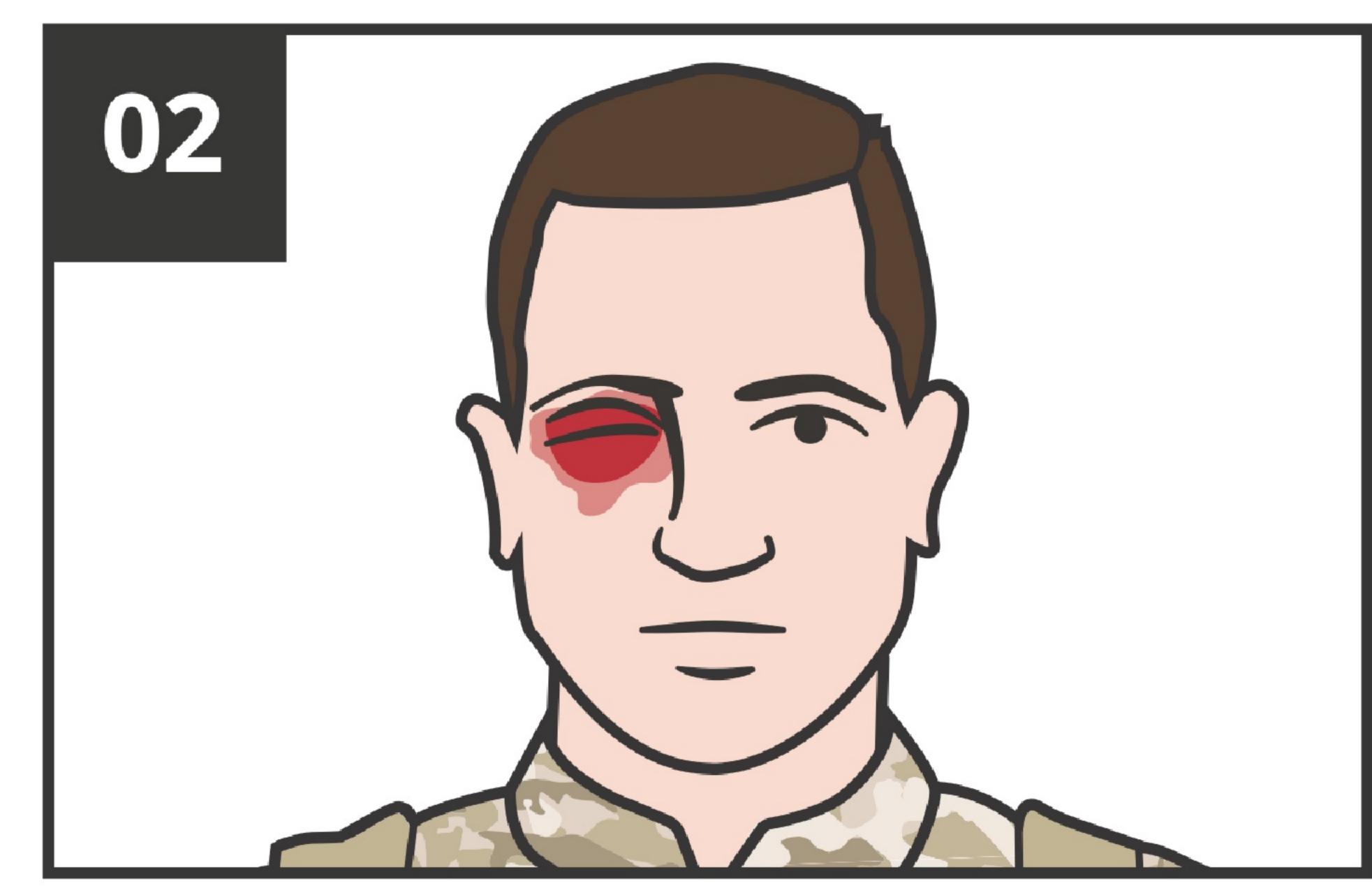


ОГЛЯНЬТЕ очі на наявність будь-яких деформацій, забоїв, саден, сторонніх тіл, синців, рваних ран або набряків.


ПРИМІТКА: ПРОВЕДІТЬ швидкий польовий тест гостроти зору.

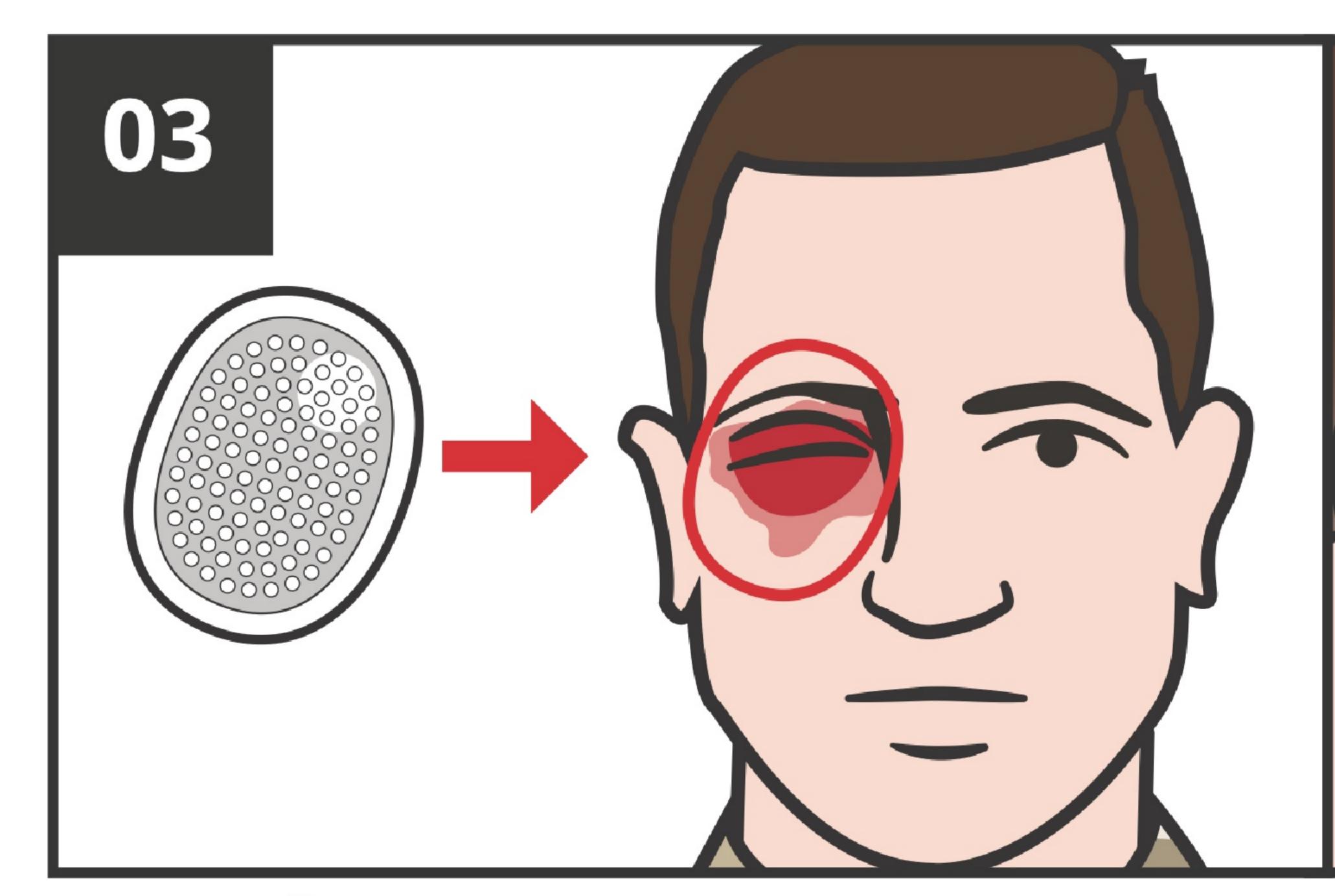

НАКРИЙТЕ ушкоджене око жорстким щитком для ока (не використовуйте компресійну пов'язку).

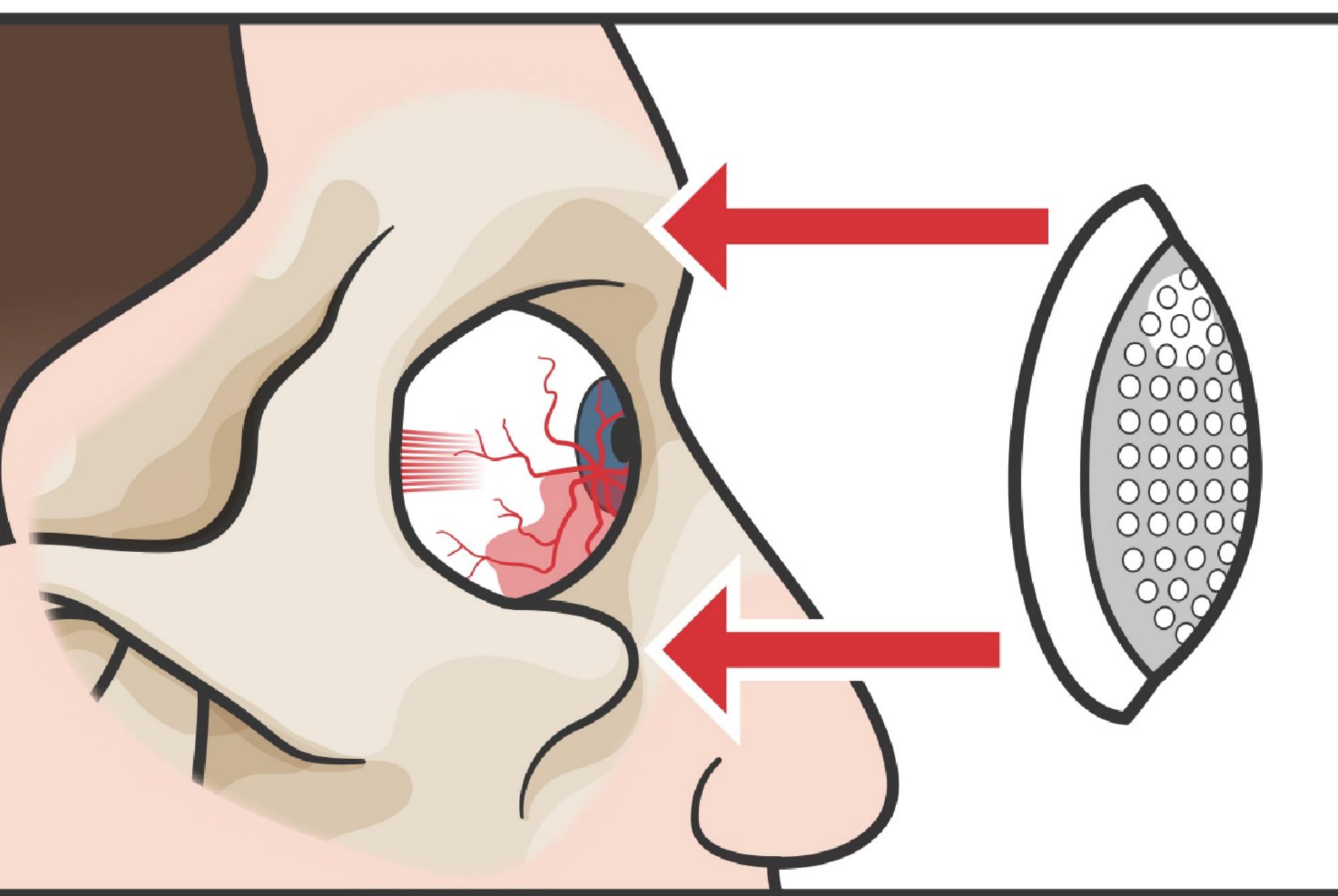

ПРИМІТКА: Щиток для ока створений так, що він спирається на кісткові виступи довкола орбіти, піднімаючись, як купол, над структурами ока.

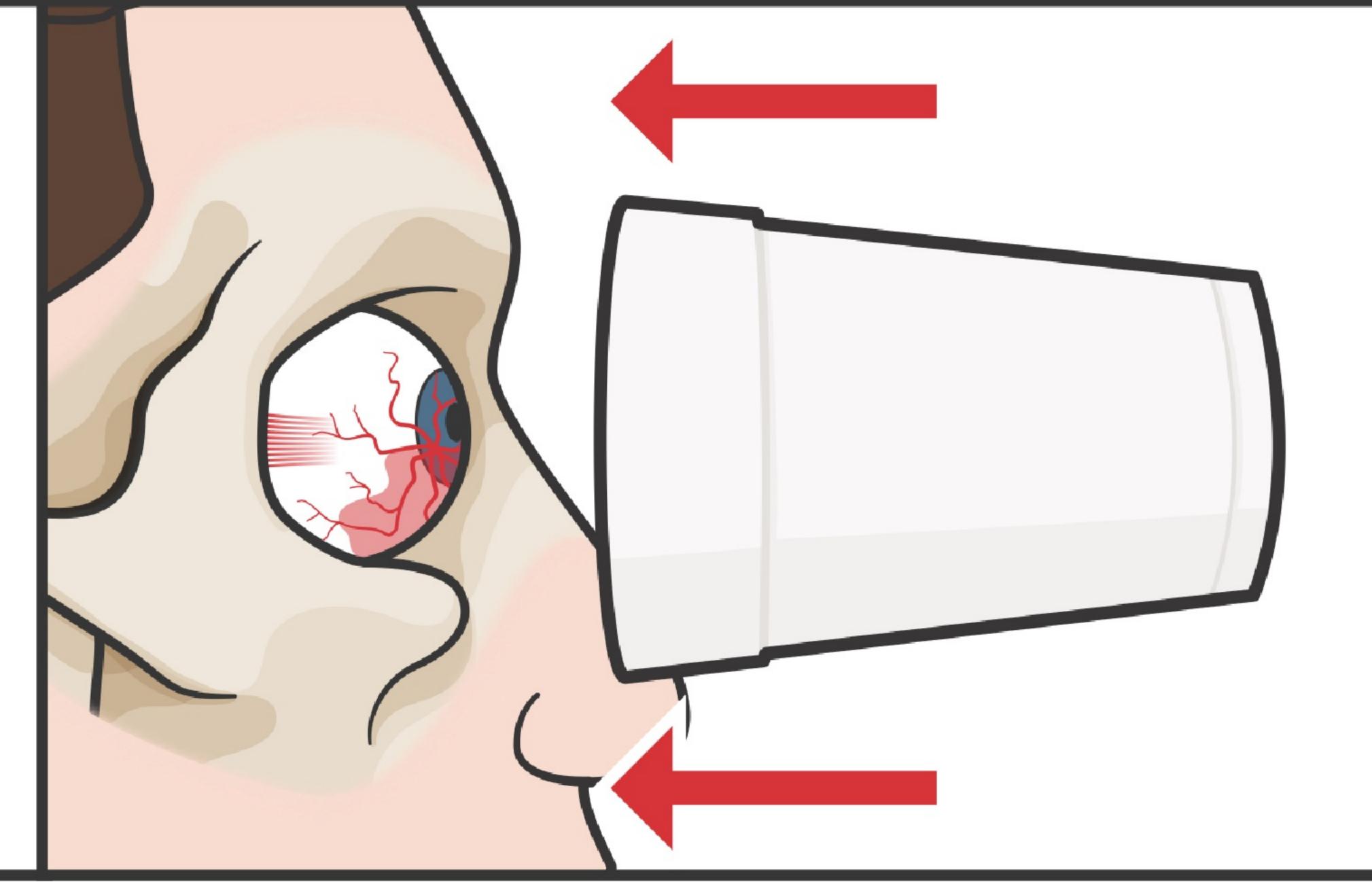

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає щитка для ока, ту ж саму функцію ефективно можуть виконувати шини SAM, полістирол чи пластиковий стаканчик.


ПРИМІТКА: Не закривайте друге око, якщо воно не пошкоджене.

ПРИМІТКА: Якщо в оці є стороннє тіло, яке стирчить з рани, виріжте в щитку отвір, щоб одягнути щиток на цей предмет, після чого зафіксуйте щиток на обличчі. Якщо ви не можете вирізати отвір у щитку, то обкладіть стороннє тіло об'ємною марлевою тканиною.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Переконайтеся, що жорсткий щиток для ока (чи імпровізований щиток) не контактує зі вмістом очної ямки та не тисне на око. Якщо щиток тисне на око, використайте імпровізований щиток для ока.



ЗАФІКСУЙТЕ щиток поверх ока клейкою стрічкою під кутом 45 градусів через лоб і щоку.

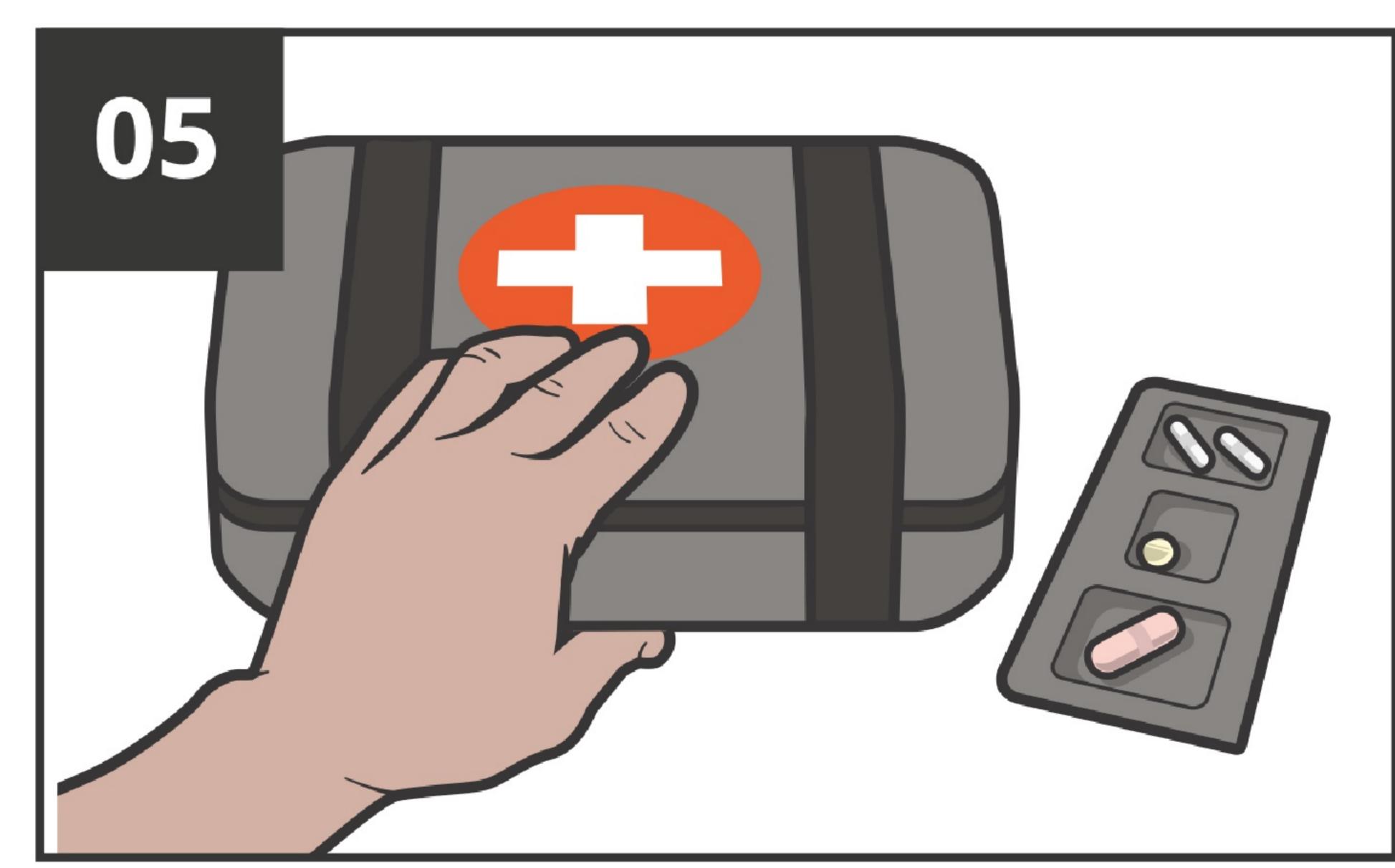

Якщо поранений притомний, ПРИЗНАЧТЕ йому ліки з Військового набору таблеток для лікування ран.

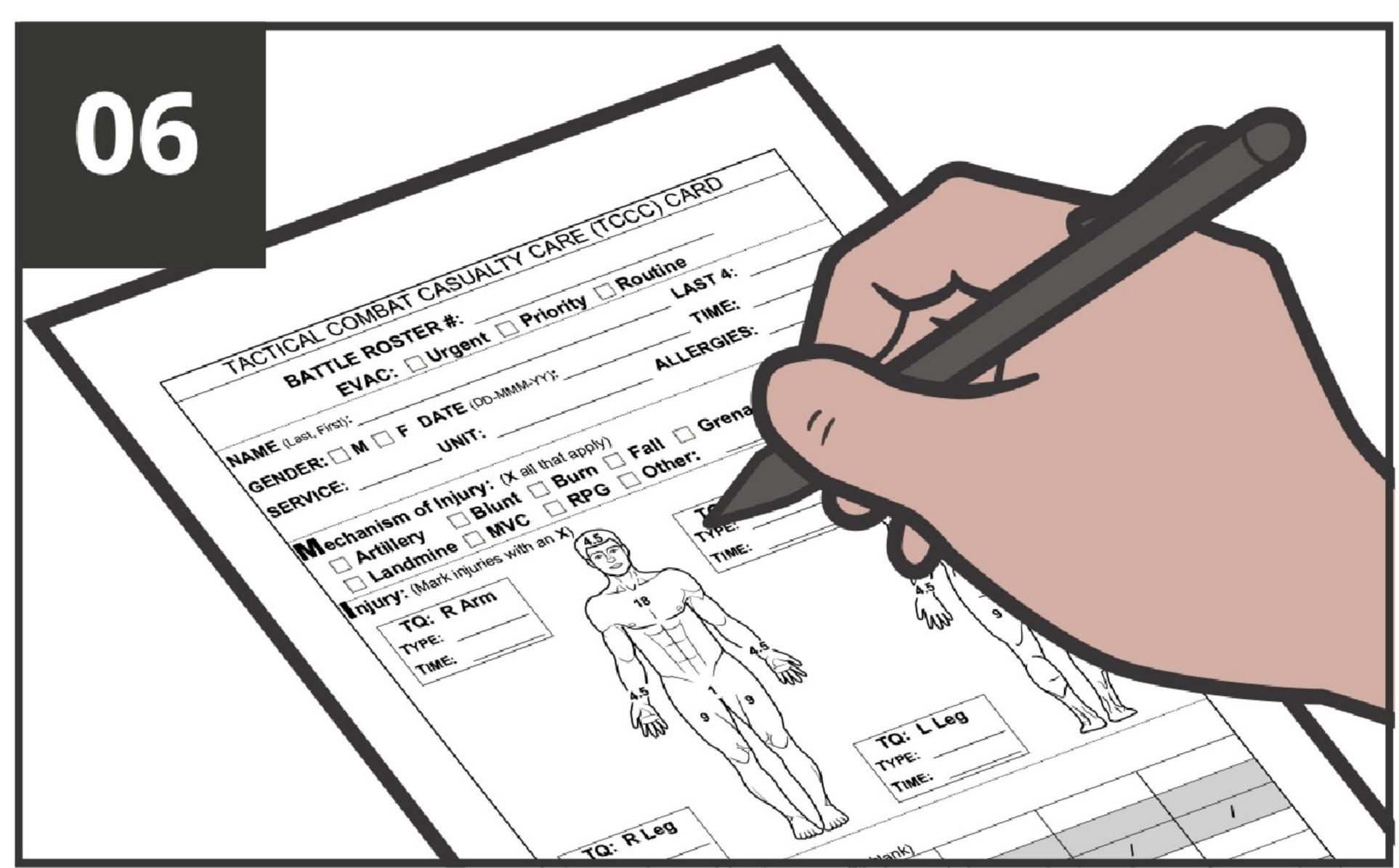

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.