


Внутрішньокістковий великогомілковий EZ-IO

Tibia Intraosseous EZ-IO



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

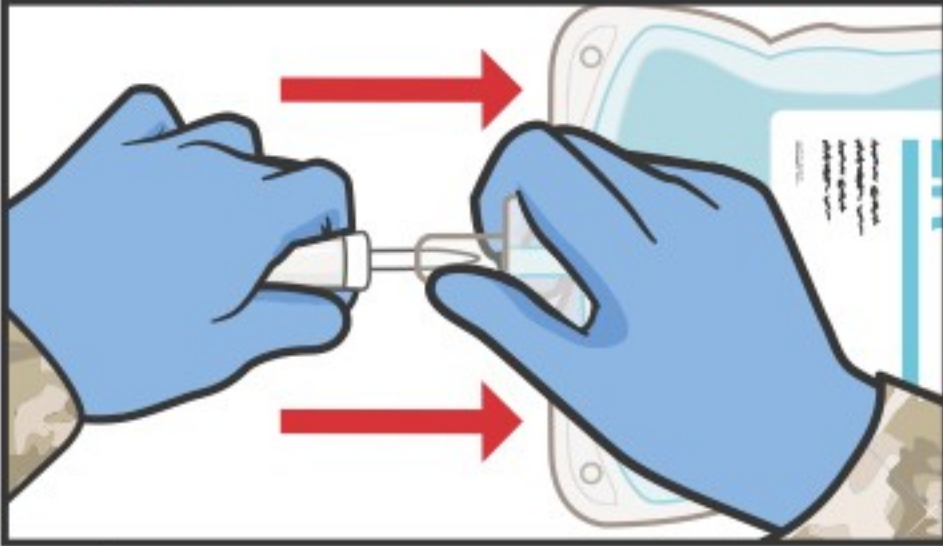


02 Підготуйте трубку, прикріпіть до пакета для внутрішньовенної інфузії.




03 Заповніть подовжувальну трубку стерильним розчином для внутрішньовенного введення. Замініть фізіологічний розчин стерильним розчином.


01 Зберіть і підготуйте обладнання. Огляньте його на недоліки.

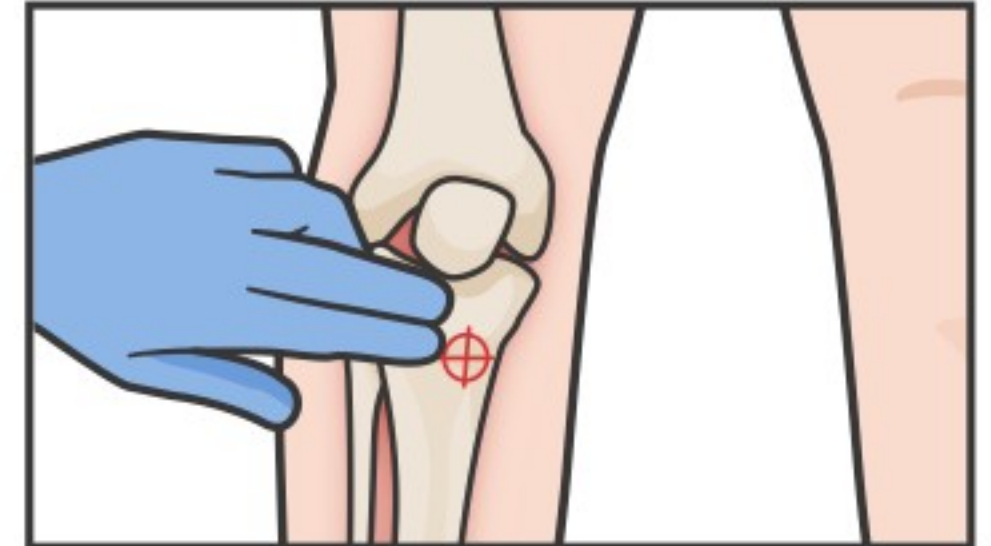


04 Знайдіть правильне місце введення EZ-IO на ширину одного пальця медіально від проксимального горбка великогомілкової кістки. Зазвичай приблизно на 3 см нижче колінної чашечки.

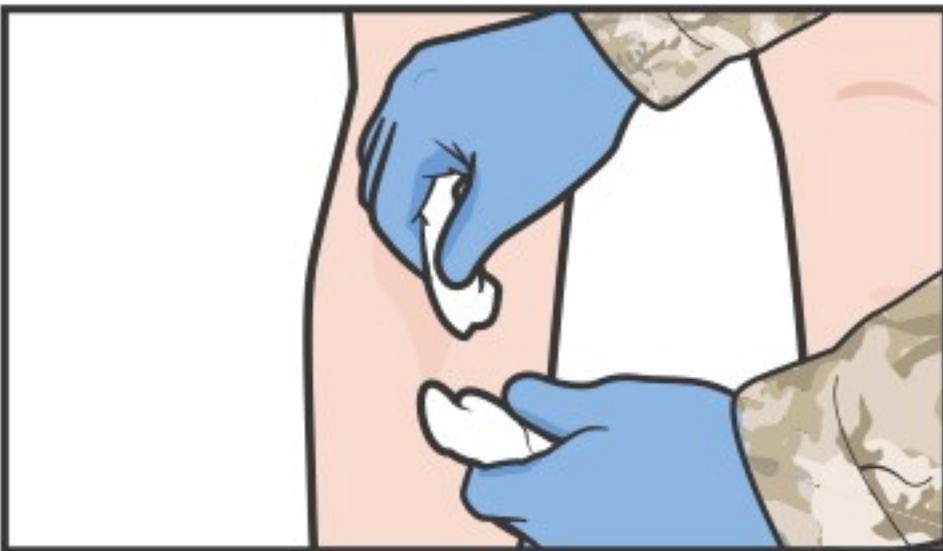

05 Очистіть місце спиртом або повідон-йодом.

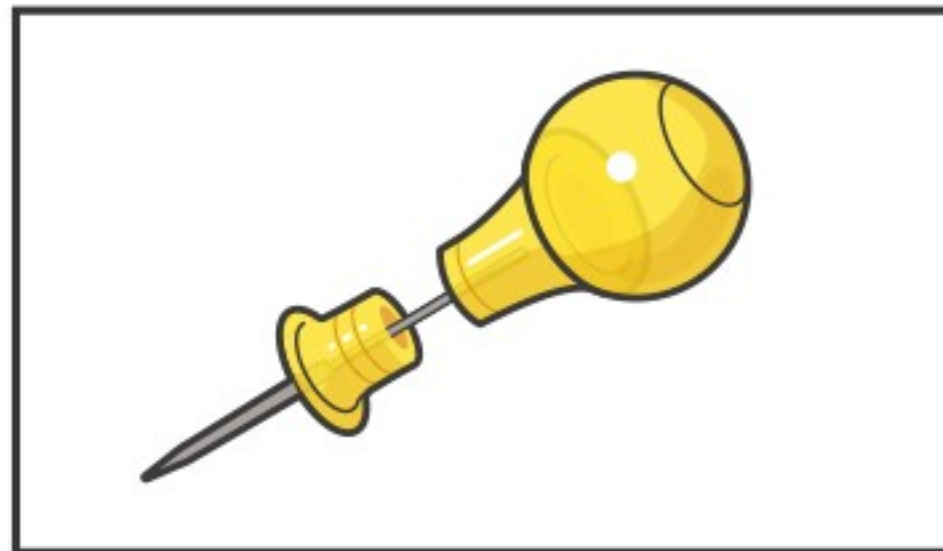


06 Знайдіть відповідну Внутрішньокісткова голка EZ-IO. Якщо використовується механічний драйвер, буде клацання від магнітного кріплення.

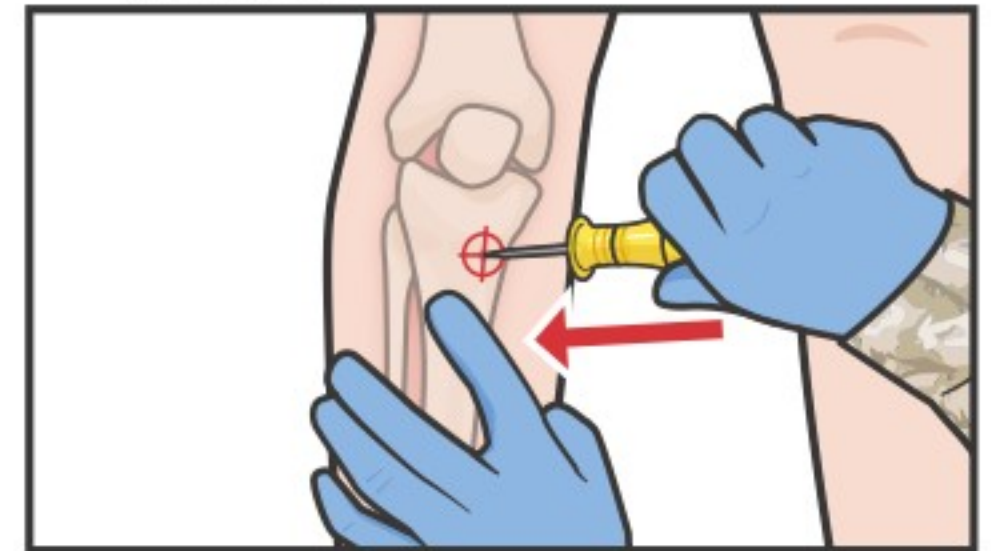


07 Підготуйте ручну внутрішньокісткову голку EZ-IO, знявши запобіжний ковпачок. Якщо ви використовуєте електродріль, увімкніть її на короткий час, міцно тримаючи запобіжний ковпачок.

ВАЖЛИВО - Тримайте пальці подалі від голки.

ПРИМІТКА КРОК 6. Жовтий - це дорослий розмір EZ-IO. Пройдіть подальше навчання щодо правильного вибору внутрішньокісткової голки EZ-IO. Успіх може визначатися багатьма факторами.

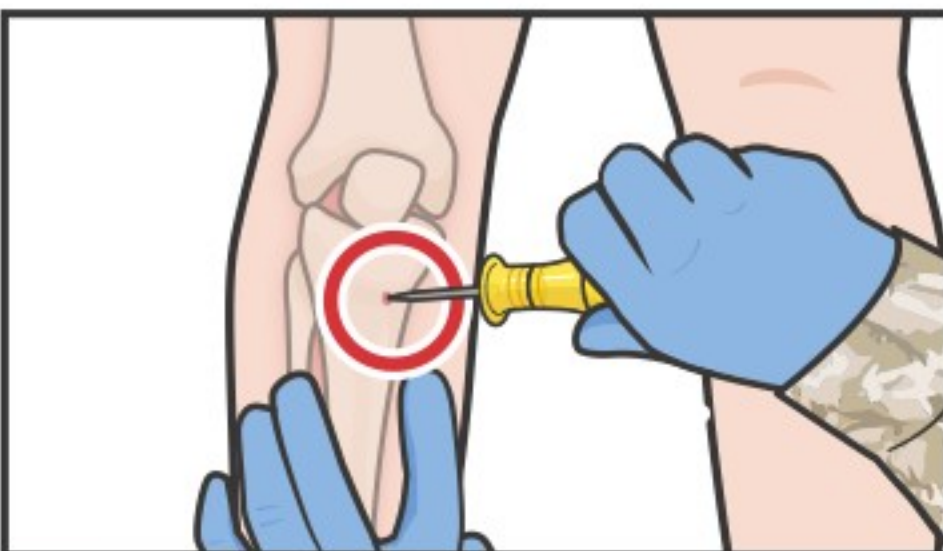

08 Тримайте механічний драйвер або голку в домінуючій руці, тримаючи іншу руку непорушно біля місця розміщення.

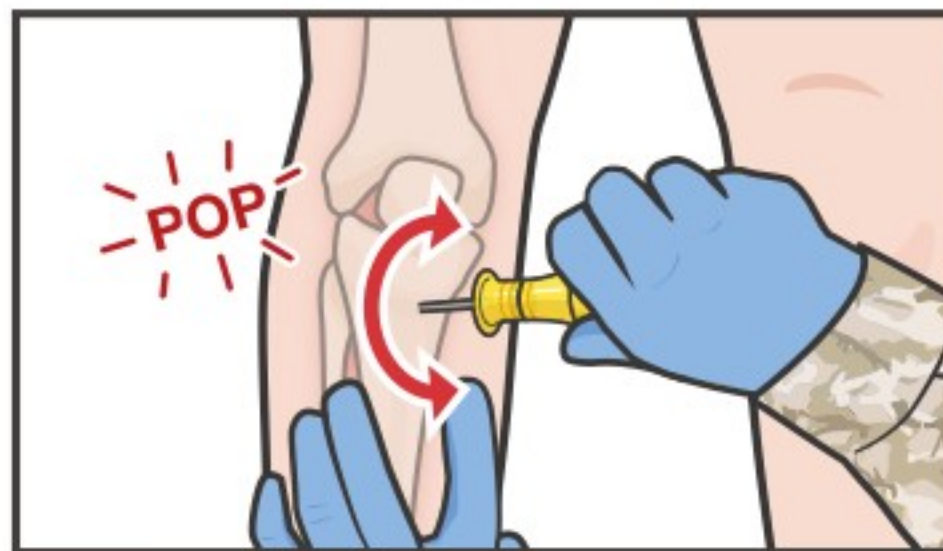


10 Обережно проколите шкіру, рухаючи рукою або електроінструментом, поки кінчик голки не торкнеться кістки.

09 Внутрішньокісткова голка EZ-IO драйвер або голка повинні знаходитися під кутом 90 градусів до поверхні кістки.

ПРИМІТКА. Тримайте кінцівку пораненого нерухомо під час процедури не домінуючою рукою.

11 Постійно натискаючи вниз, рухайте голкою вперед і назад (або використовуйте електроінструмент), доки не проникнете в кортекс кістки.

КРОК 11. Коли досягнуто бажаної глибини, відчувається очевидний стрибок.

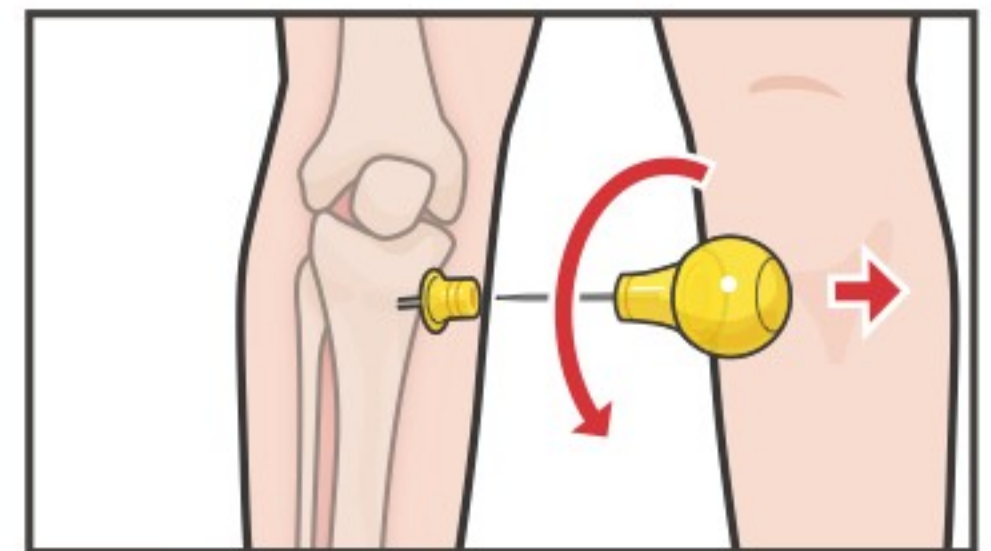

12 Відкрутіть округлий аплікатор, обертаючи проти годинникової стрілки, і вийміть його з катетера - або обережно зніміть свердло з голки.

продовження на наступній сторінці...