

# Заміна джгута (брашпила) - Windlass




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.



**01** ВИКРИТИ травму та знайти джерело кровотечі.



**02** ОЦІНЬТЕ будь-які раніше накладені джгути на ефективність і близькість до місця кровотечі.

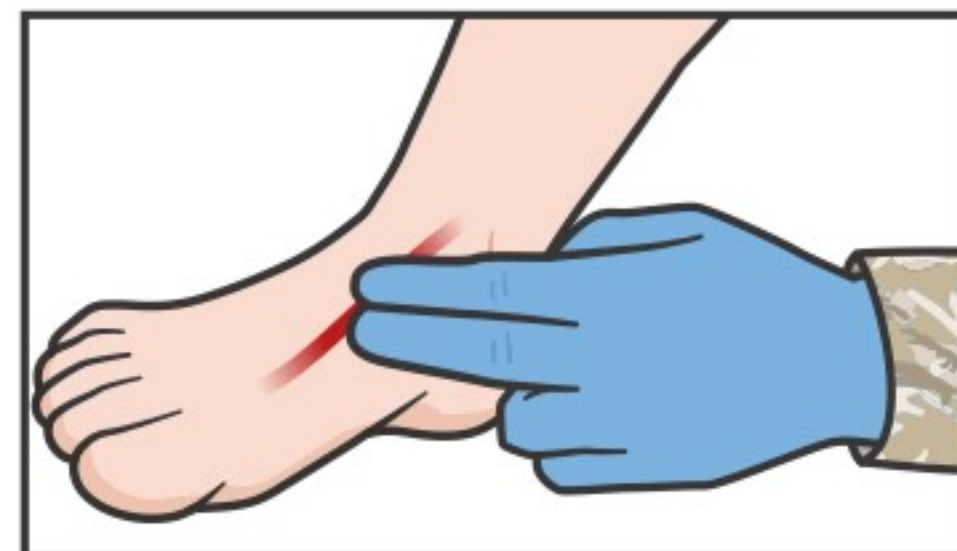

**03** ПЕРЕВІРТЕ дистальний пульс. Якщо відчувається пульс, затягніть джгут. Якщо пульс усе ще відчувається, ПЕРЕХОДІТЬ ДО КРОКУ 4.



**04** НАКЛАДІТЬ рекомендований джгут на 5-8 см вище рани, безпосередньо на шкіру.



**05** ПОВІЛЬНО звільніть перший джгут, займіть 1 хвилину.



**06** Слідкуйте за областю кровотечі, щоб переконатися, що вона не почалася знову.



**07** ОЦІНЬТЕ, щоб переконатися, що дистальний пульс відсутній і кровотеча не відновилася.




**08** Перемістіть перший джгут вниз, але залиште його над новим джгутом.

**КРОК 6 ВАЖЛИВИЙ.** Якщо кровотеча почнеться знову, негайно затягніть перший джгут і затягніть новий джгут. Повторюйте КРОКІ 5 і 6, доки кровотеча не зупиниться.

**КРОК 8 ПРИМІТКА.** Перший джгут не затягнений, але слабину ще усунено, тому його можна швидко затягнути.



**09** ДОКУМЕНТУЙТЕ час накладання нового джгута на обличчя потерпілого.

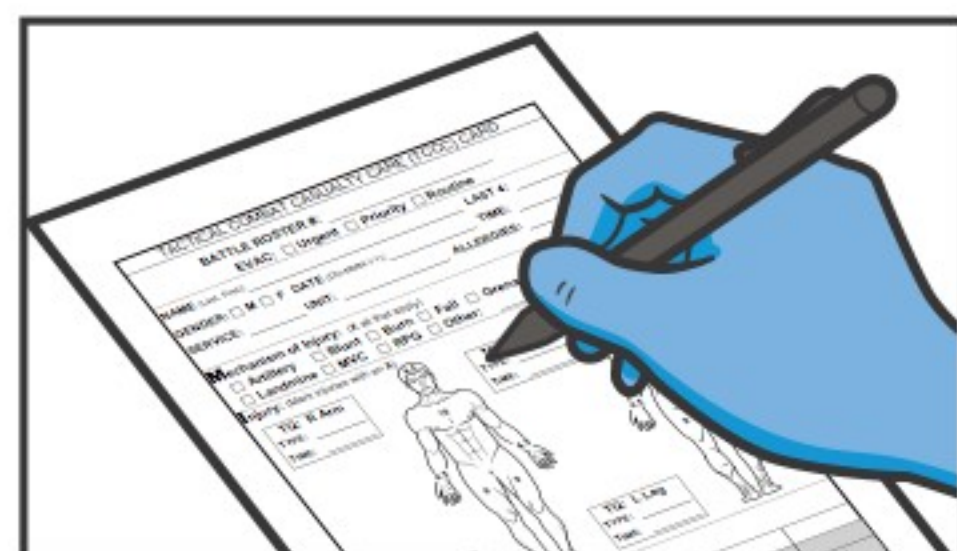

**10** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.