









ІНСТРУКЦІЯ З НАКЛАДАННЯ ГНУЧКОЇ ШИНИ




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

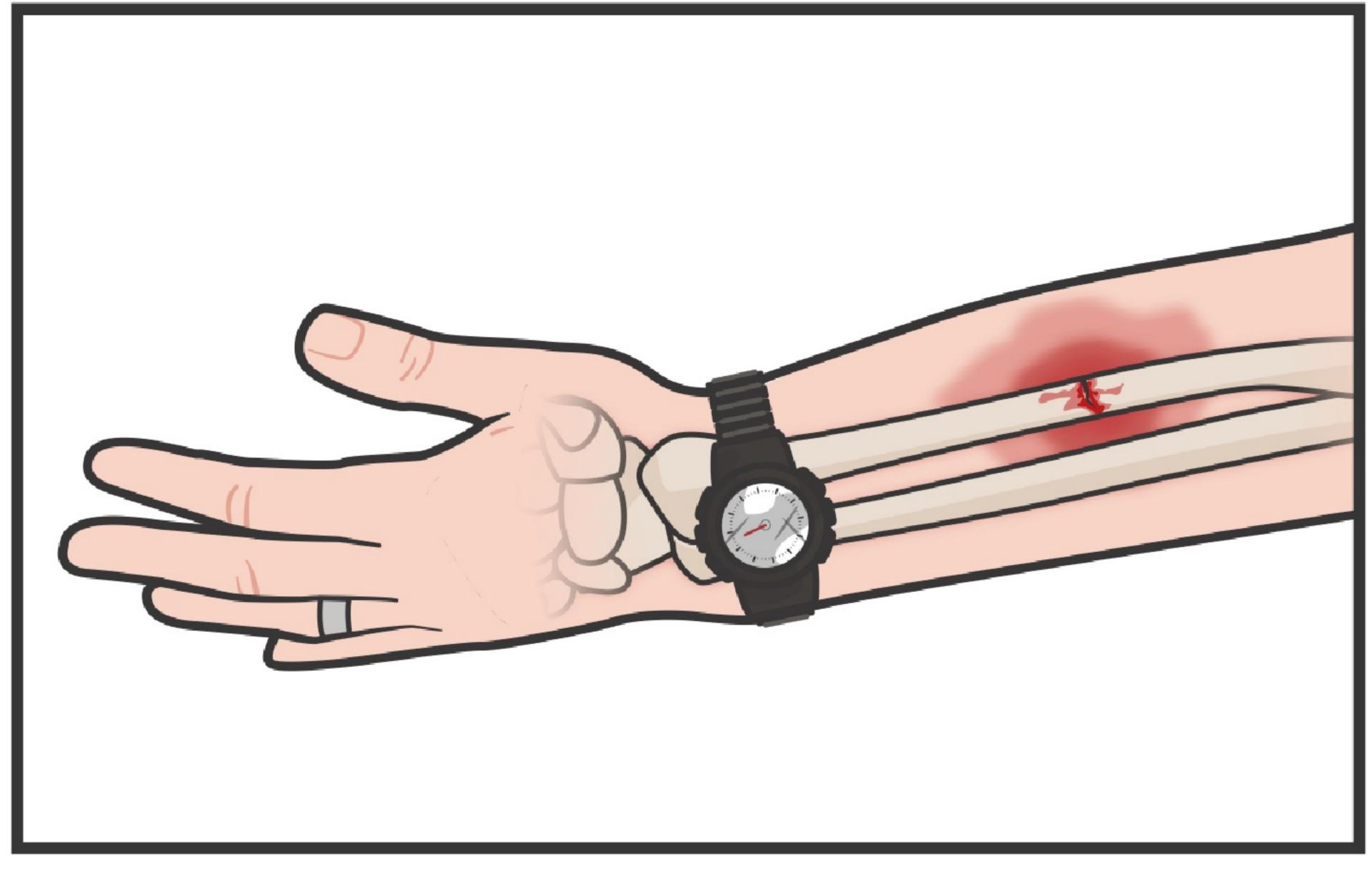

ВИЗНАЧТЕ місце перелому та надайте кінцівці нейтрального або функціонального положення.

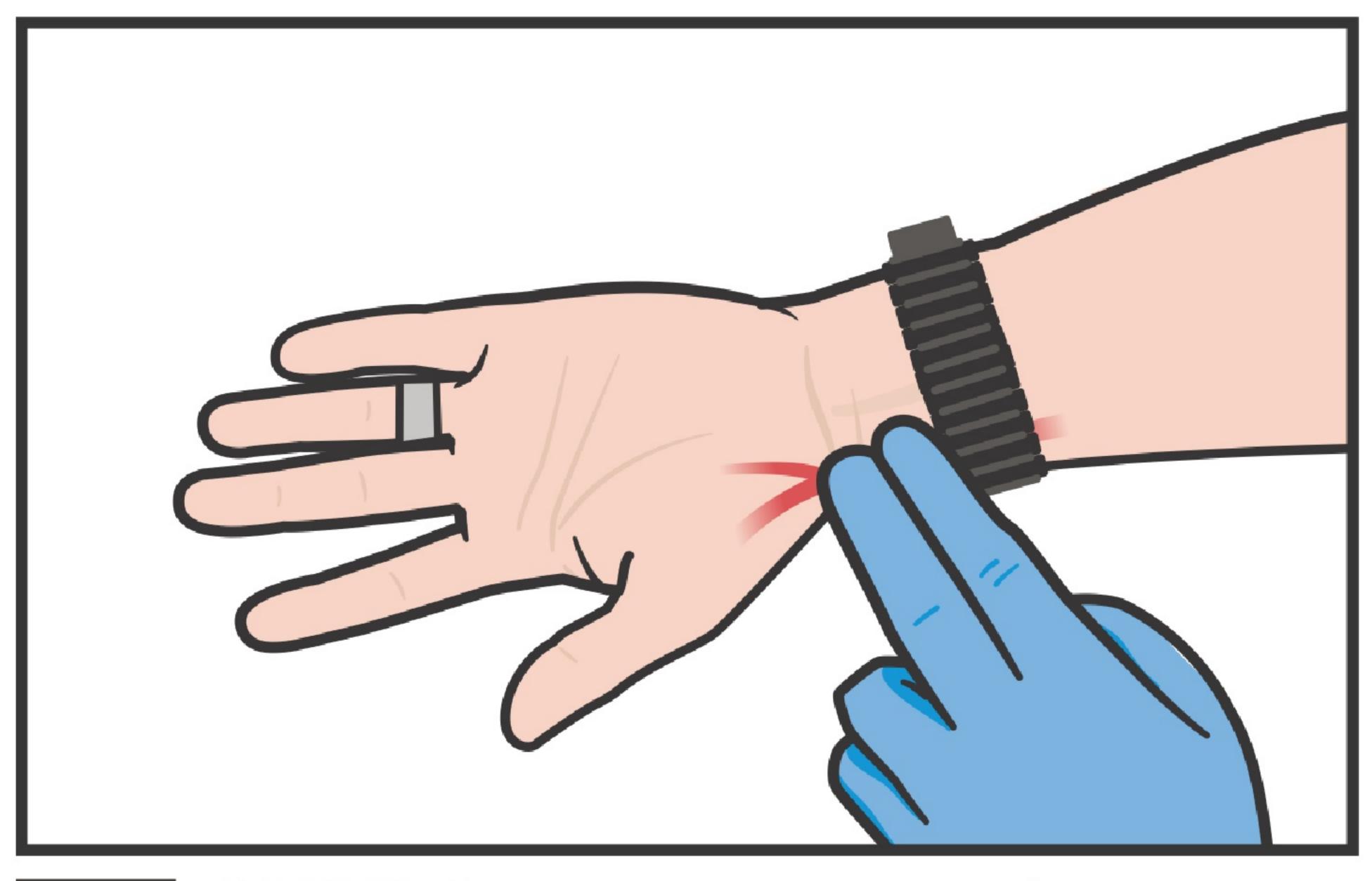


ОЦІНІТЬ пульс, моторну/рухову та сенсорну/чутливу (ПМС) функції дистальніше від місця перелому.

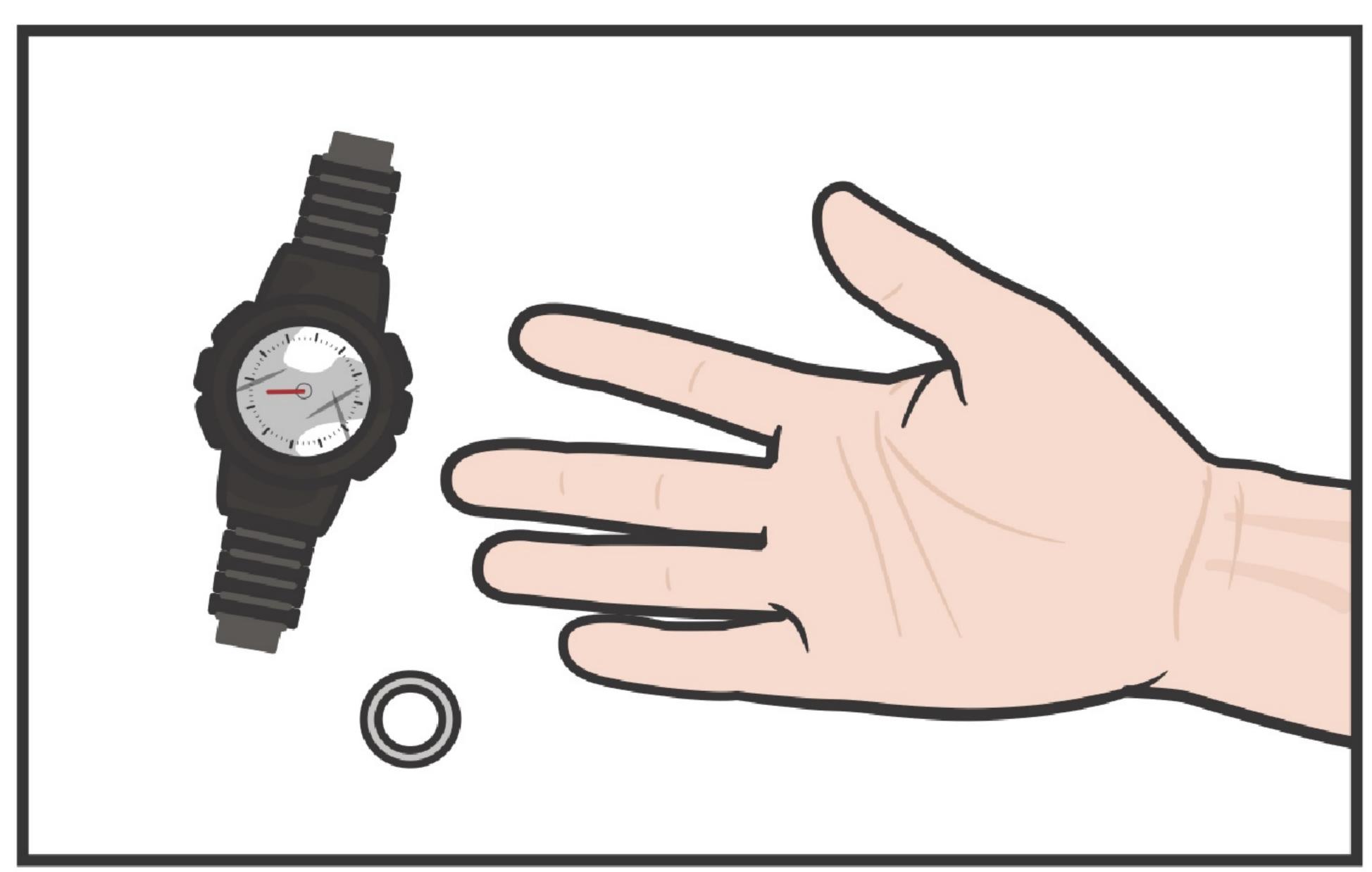


3HIMIТЬ прикраси, годинник, одяг та/або черевики залежно від ситуації.


ПРИМІТКА до КРОКУ 1: За необхідності накажіть бійцю-рятувальнику або іншому рятувальнику за допомогою рук зафіксувати місце перелому (уникаючи різких рухів).

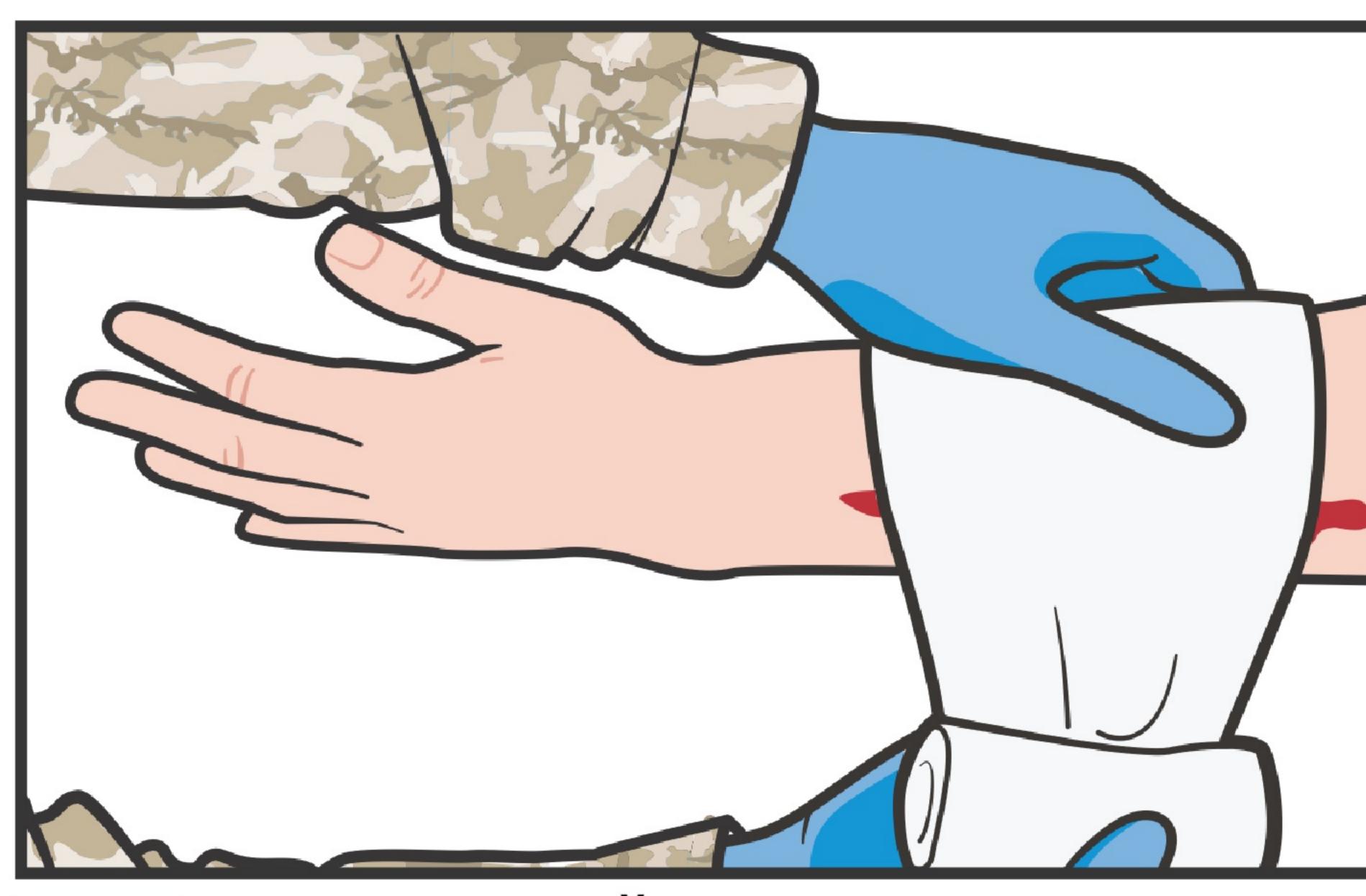


О4 ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що на будь-яку відкриту травму накладено пов'язку, а кровотечу зупинено.

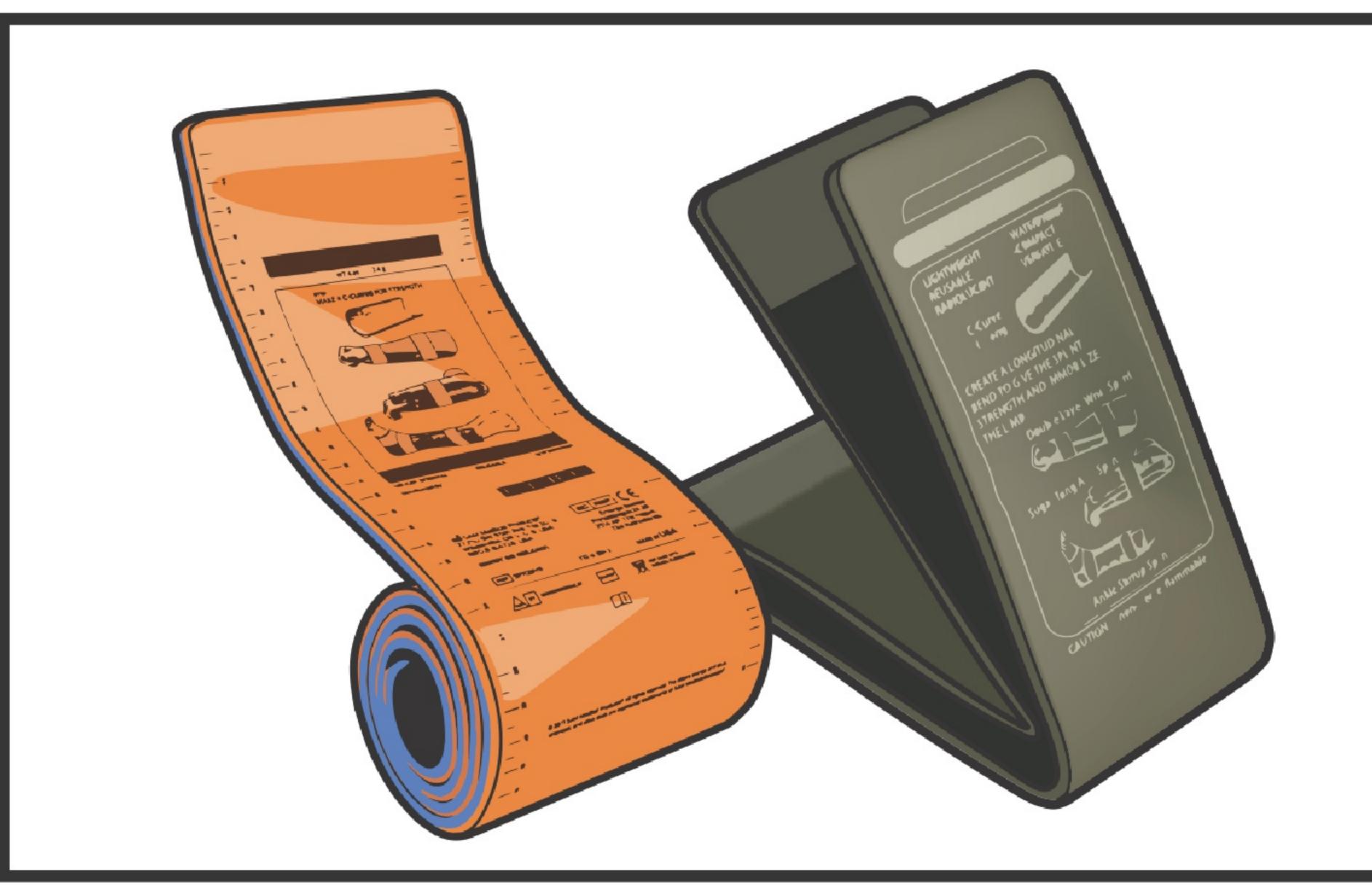


ВИБЕРІТЬ відповідний матеріал для шинування (наприклад, шину SAM® або іншу гнучку алюмінієву шину, покриту пінополіуретаном, підкладку та матеріали для фіксації шини на кінцівці).

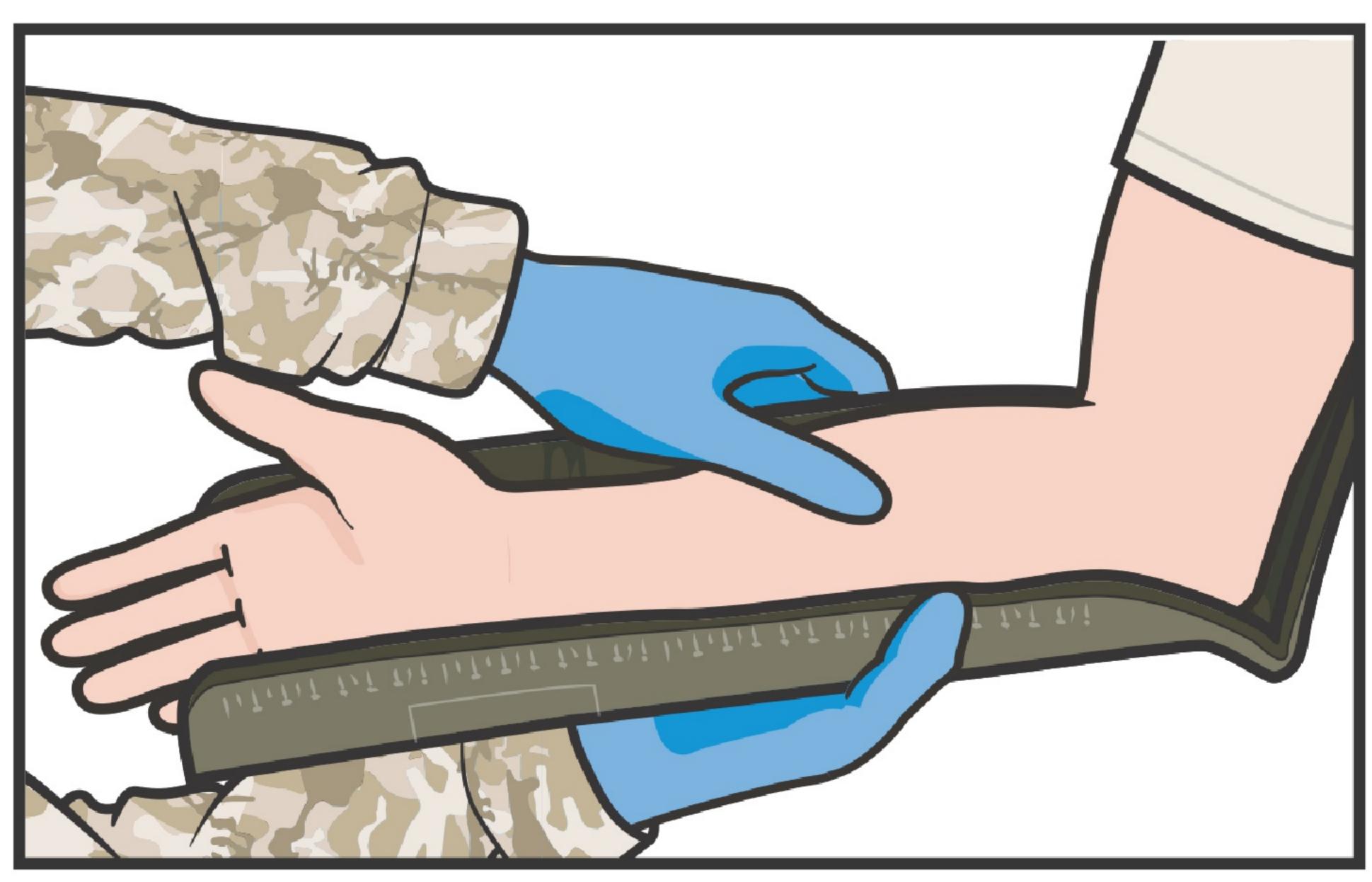


Використовуючи неушкоджену кінцівку з протилежного боку, ВИМІРЯЙТЕ ТА СКЛАДІТЬ гнучку шину так, щоб вона охоплювала суглоби вище та нижче місця перелому.

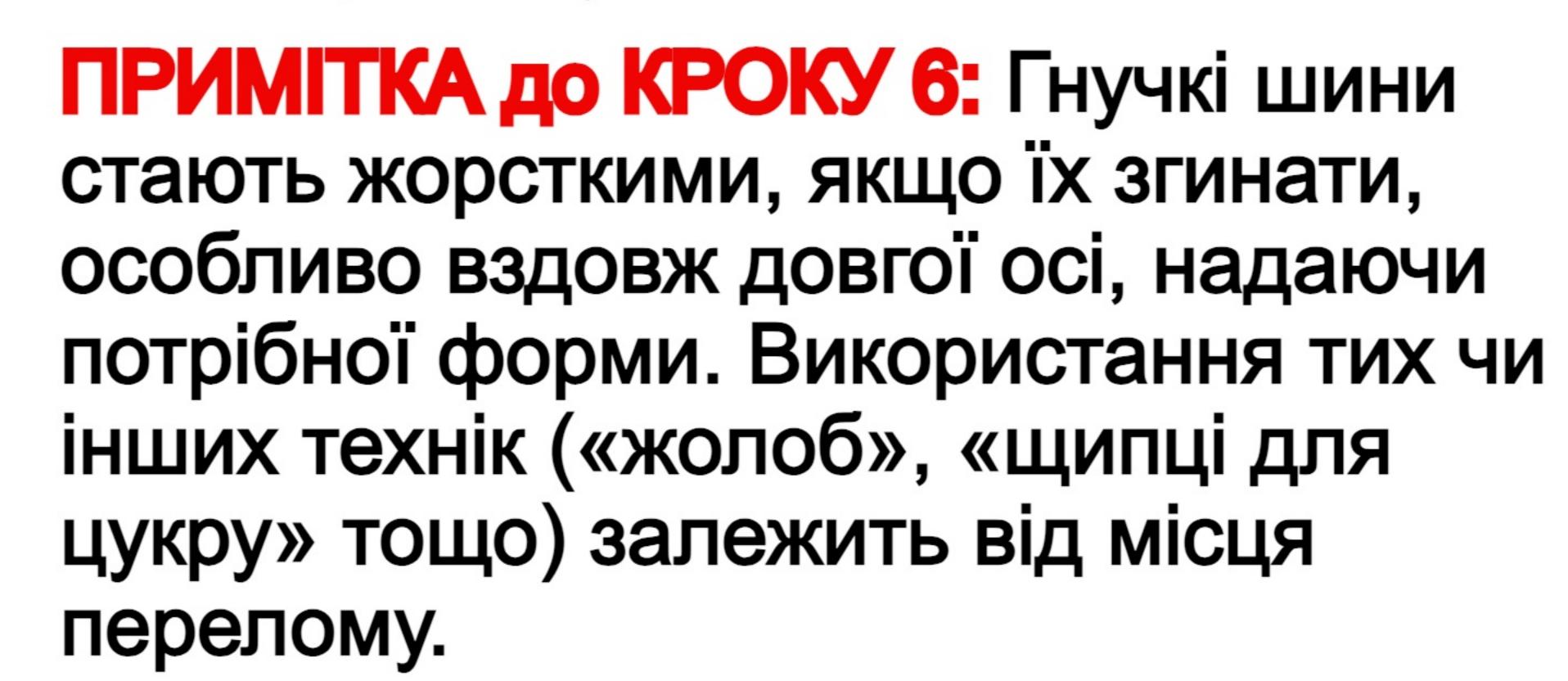

ПРИМІТКА до КРОКУ 6: У деяких ситуаціях можуть знадобитися дві гнучкі шини, з'єднані між собою для стабільності.

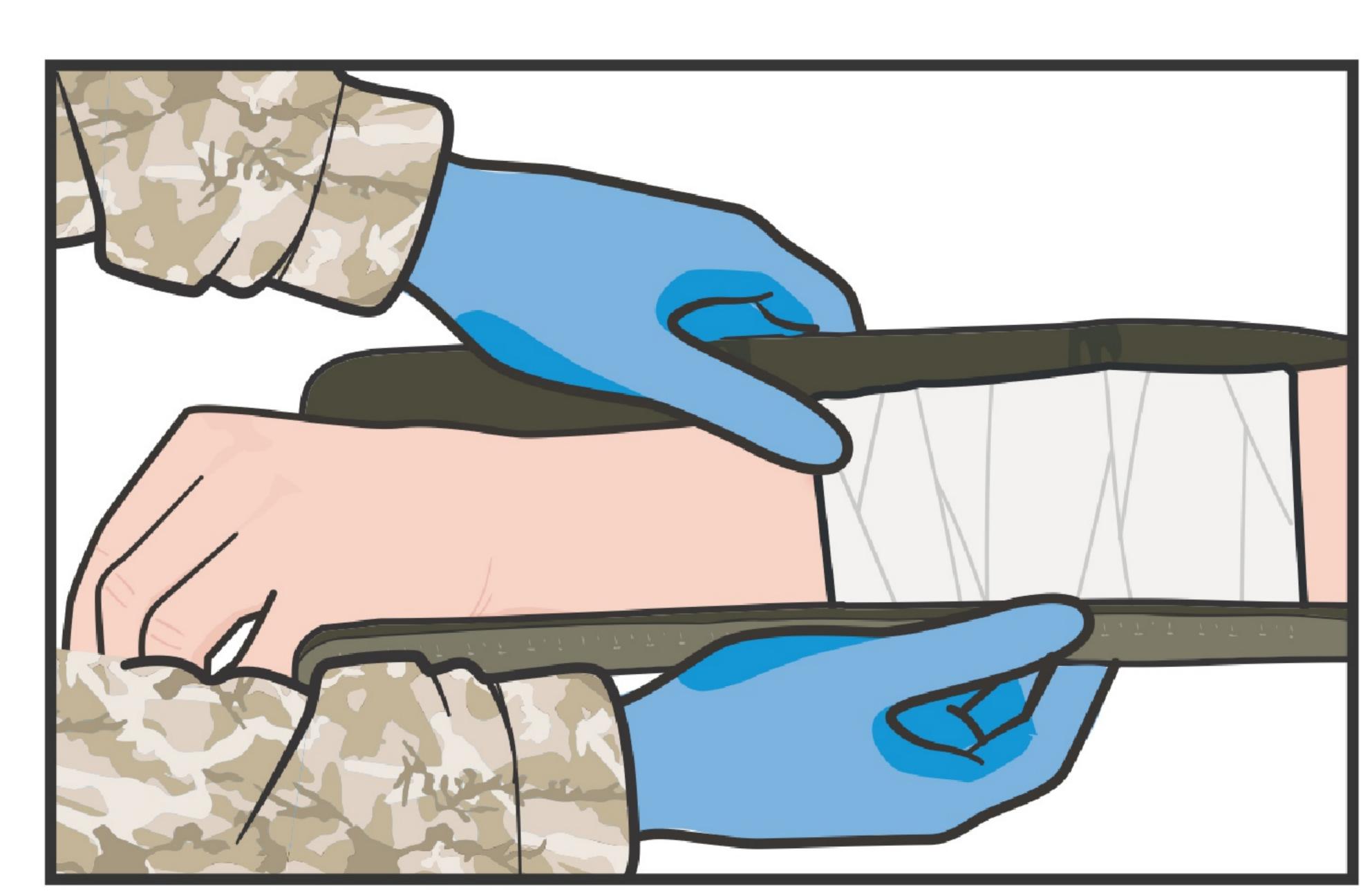

НАКЛАДІТЬ сформовану гнучку шину(и) на травмовану кінцівку, тримаючи кінцівку у функціональному положенні (природне зручне положення), уникаючи за можливості різких рухів.

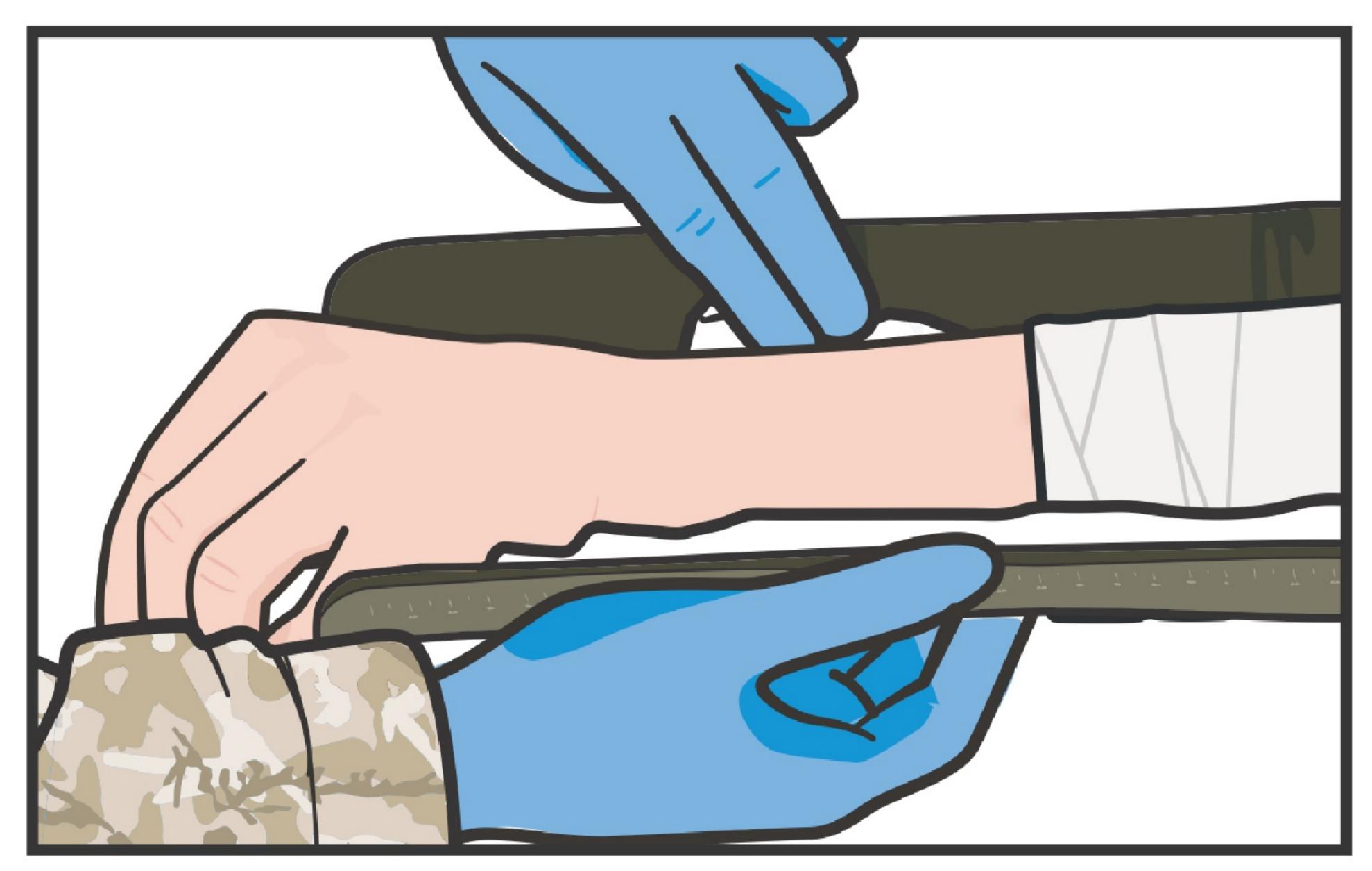

РОЗМІСТІТЬ ПІДКЛАДКИ всередині шини, заповнюючи порожнини та захищаючи кісткові виступи, щоб зробити її більш зручною.

Продовження на наступній сторінці...