





## ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ


## Продовження...

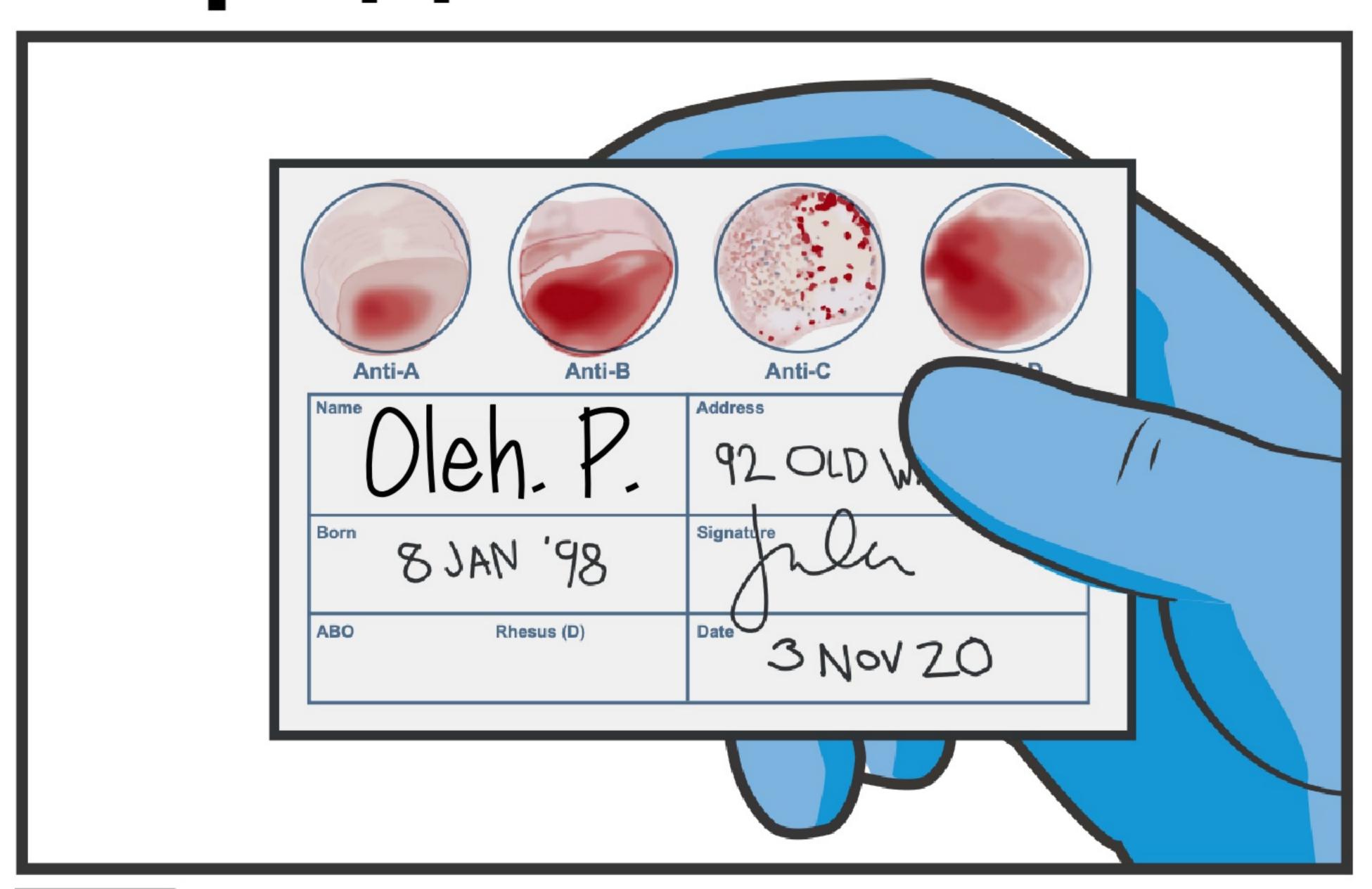

11 ОБЕРЕЖНО НАХИЛЯЙТЕ КАРТКУ на 4 сторони, тримаючи впродовж 10 секунд на кожній стороні (в загальному – 40 с), щоб стимулювати процеси змішування/аглютинації.

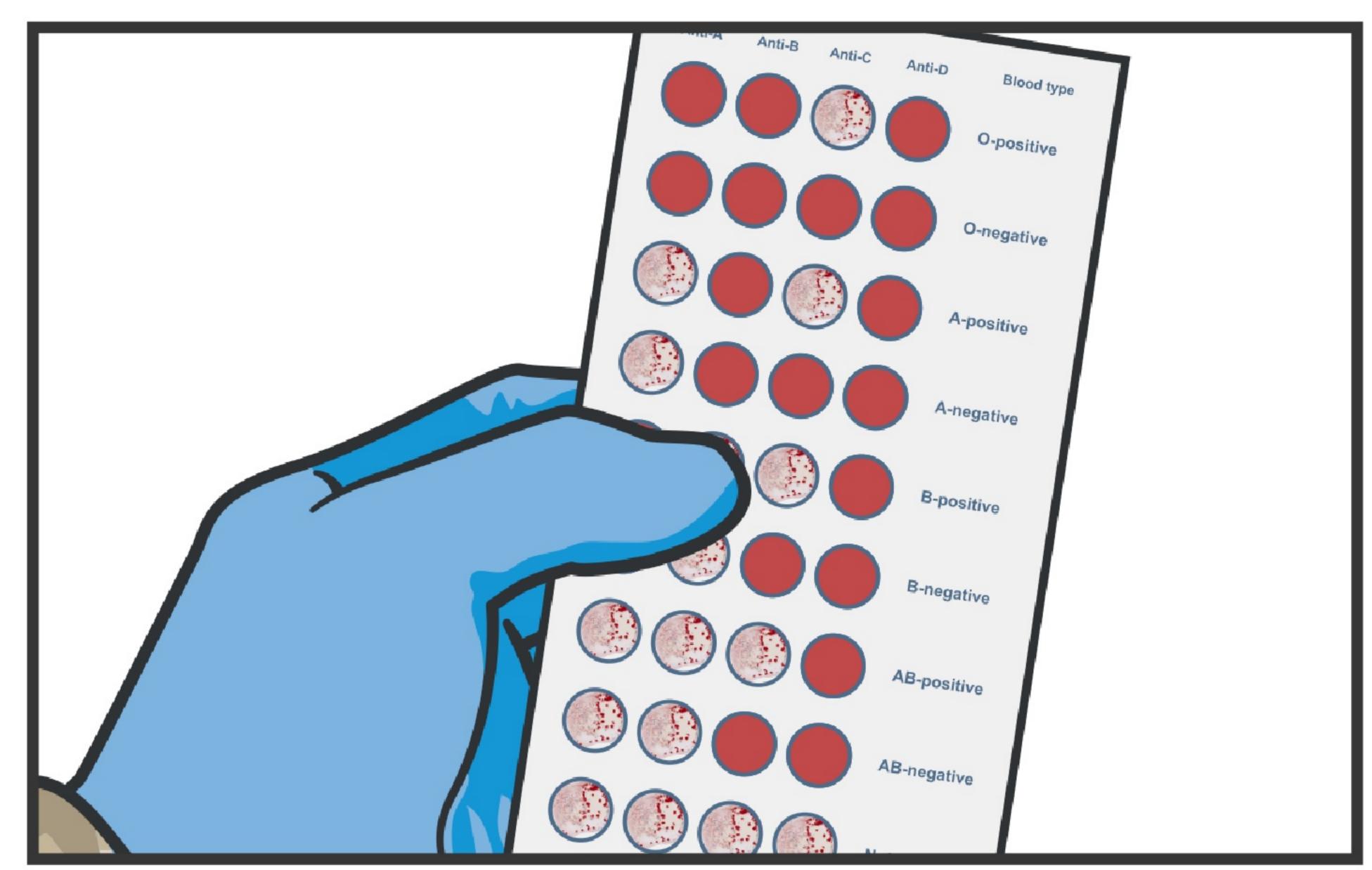


Після використання усіх чотирьох паличок та змішування крові з реагентами на картці, ВІЗЬМІТЬ таблицю відповідності груп крові.

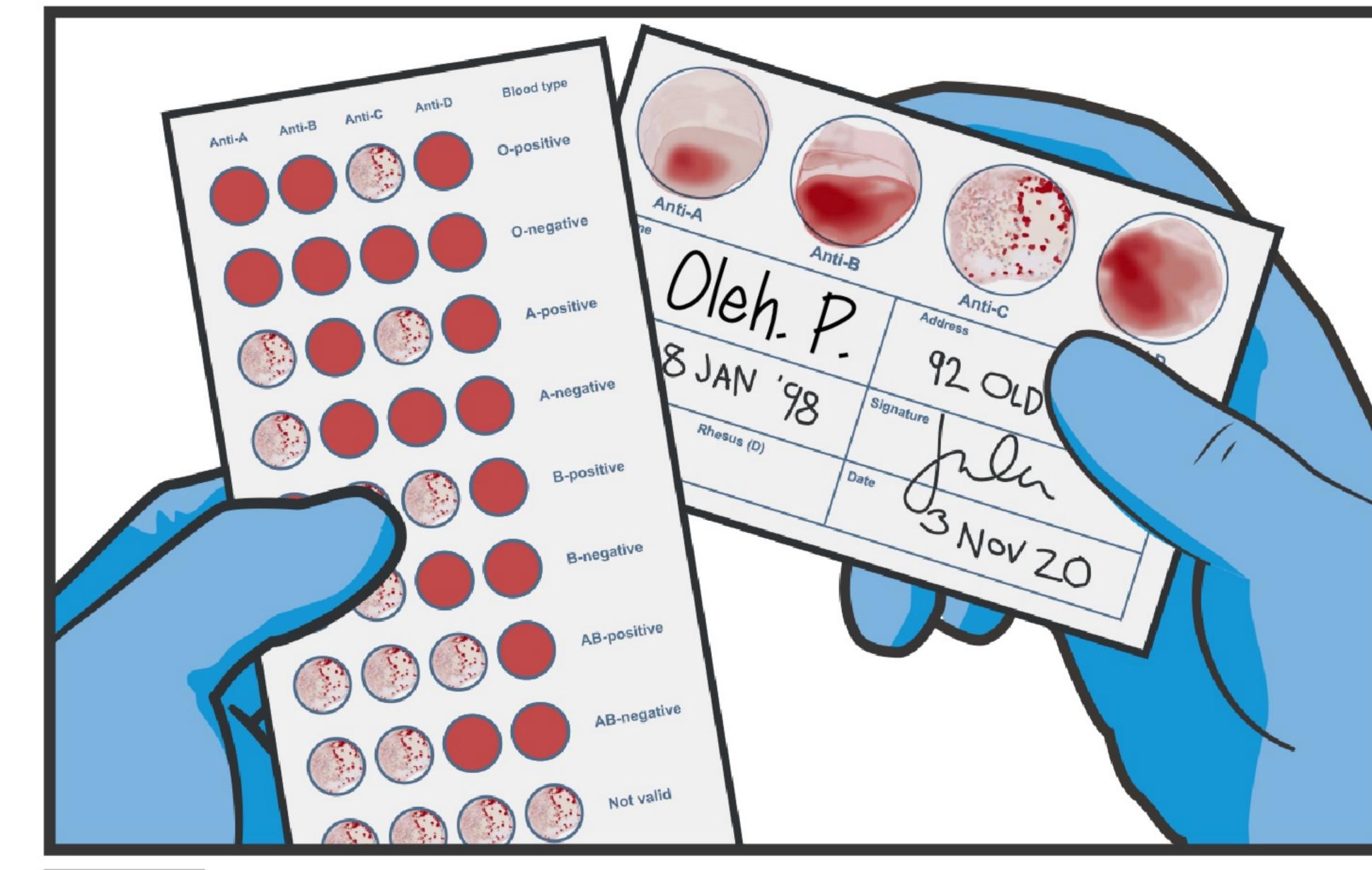


ПОРІВНЯЙТЕ усі чотири лунки (анти-А, анти-В, анти-D та контрольну лунку) з таблицею, що входить до складу набору, оцінюючи наявність або відсутність аглютинації.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Намагайтеся оцінити результати, поки картка все ще волога.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Аглютинація має бути завжди відсутня в контрольній лунці, інакше тест є недійсним. Якщо аглютинація в лунках на картці співпадає зі зразком недійсного результату, тест необхідно провести повторно, використовуючи новий набір.

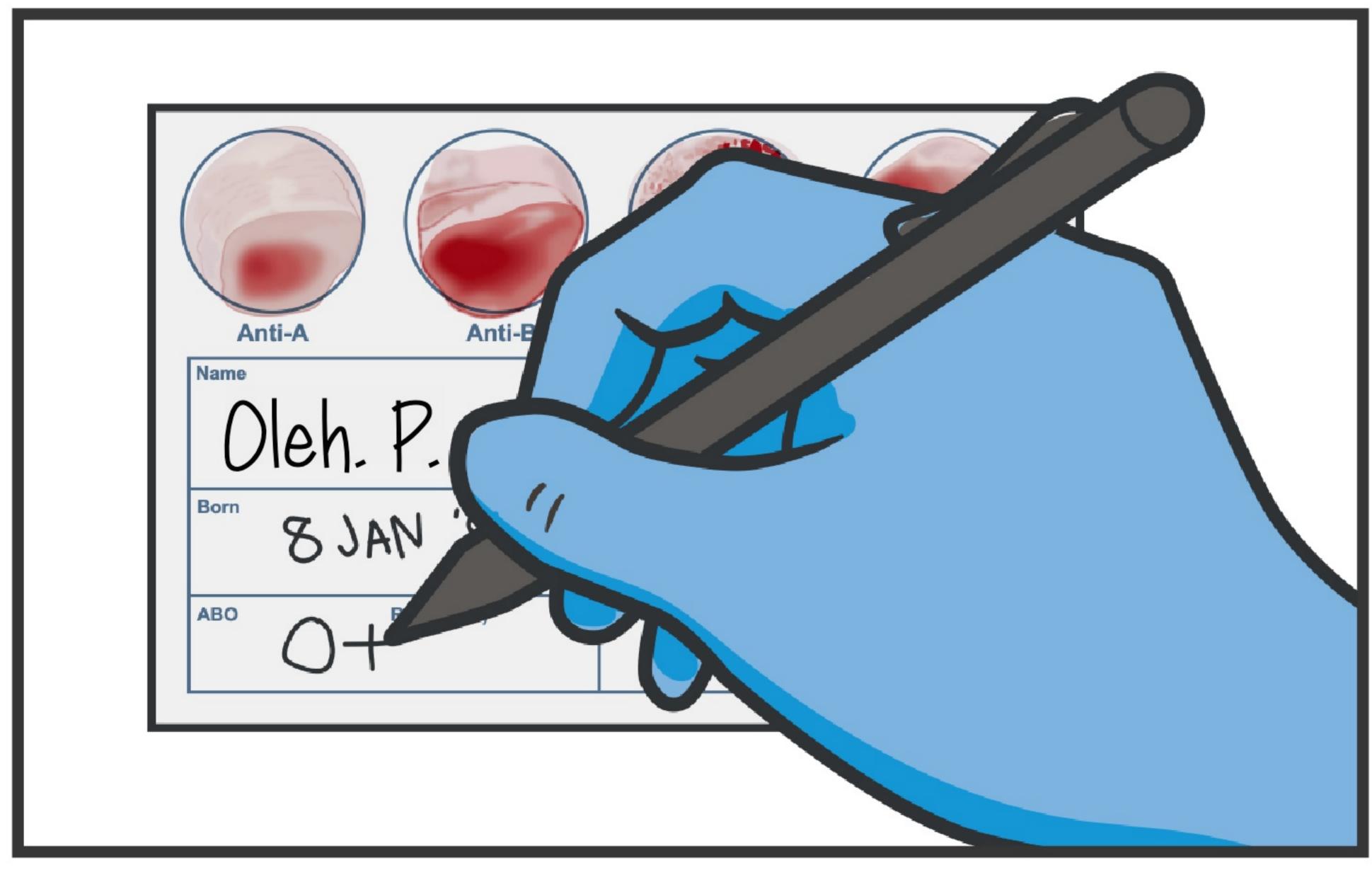

3АПИШІТЬ на картці групу крові за системою А-В-О та резус-фактор.

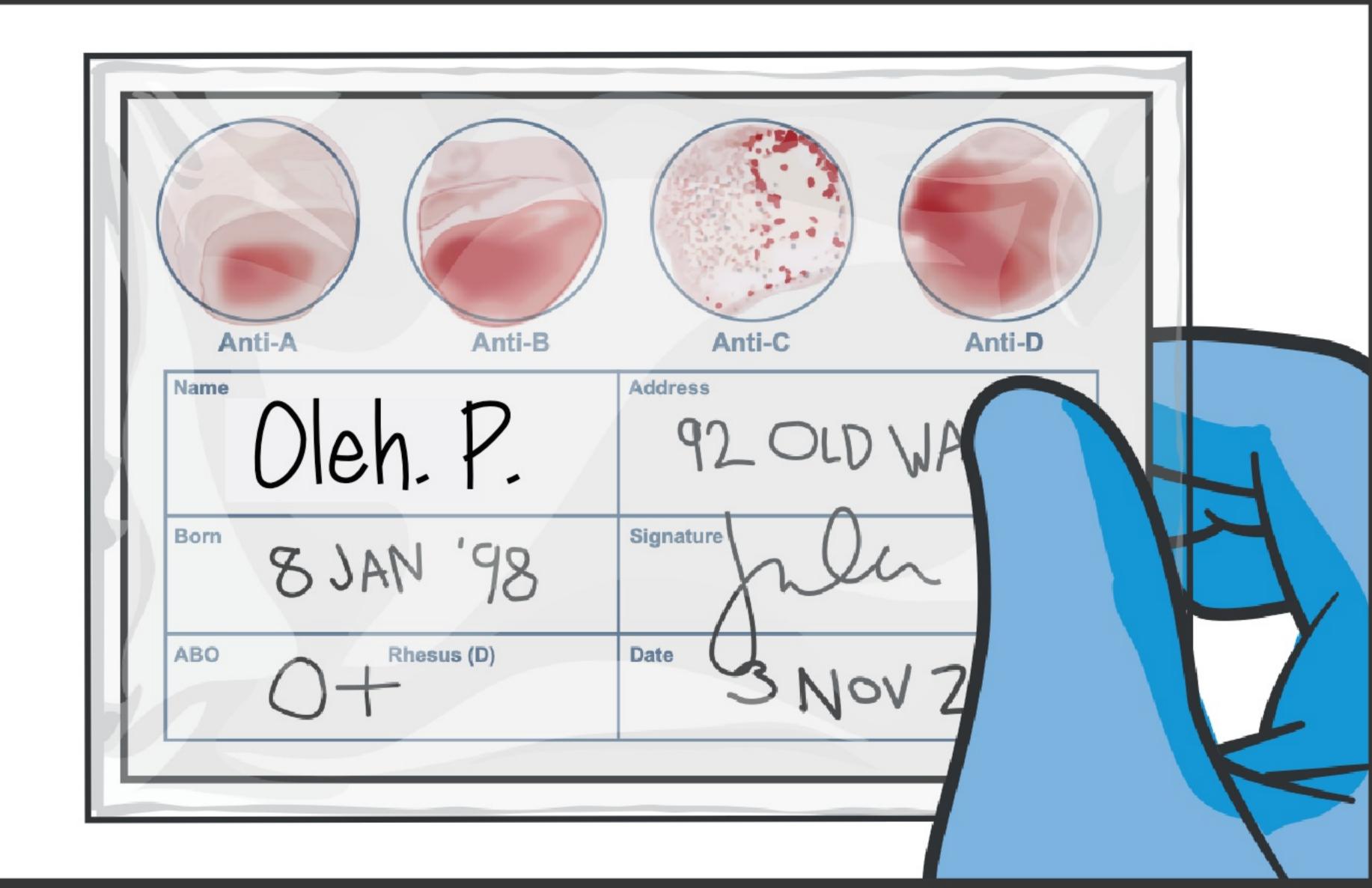

РОЗМІСТІТЬ захисну плівку поверх використаної картки та переконайтеся, що її прикріплено до картки пораненого форми DD 1380.

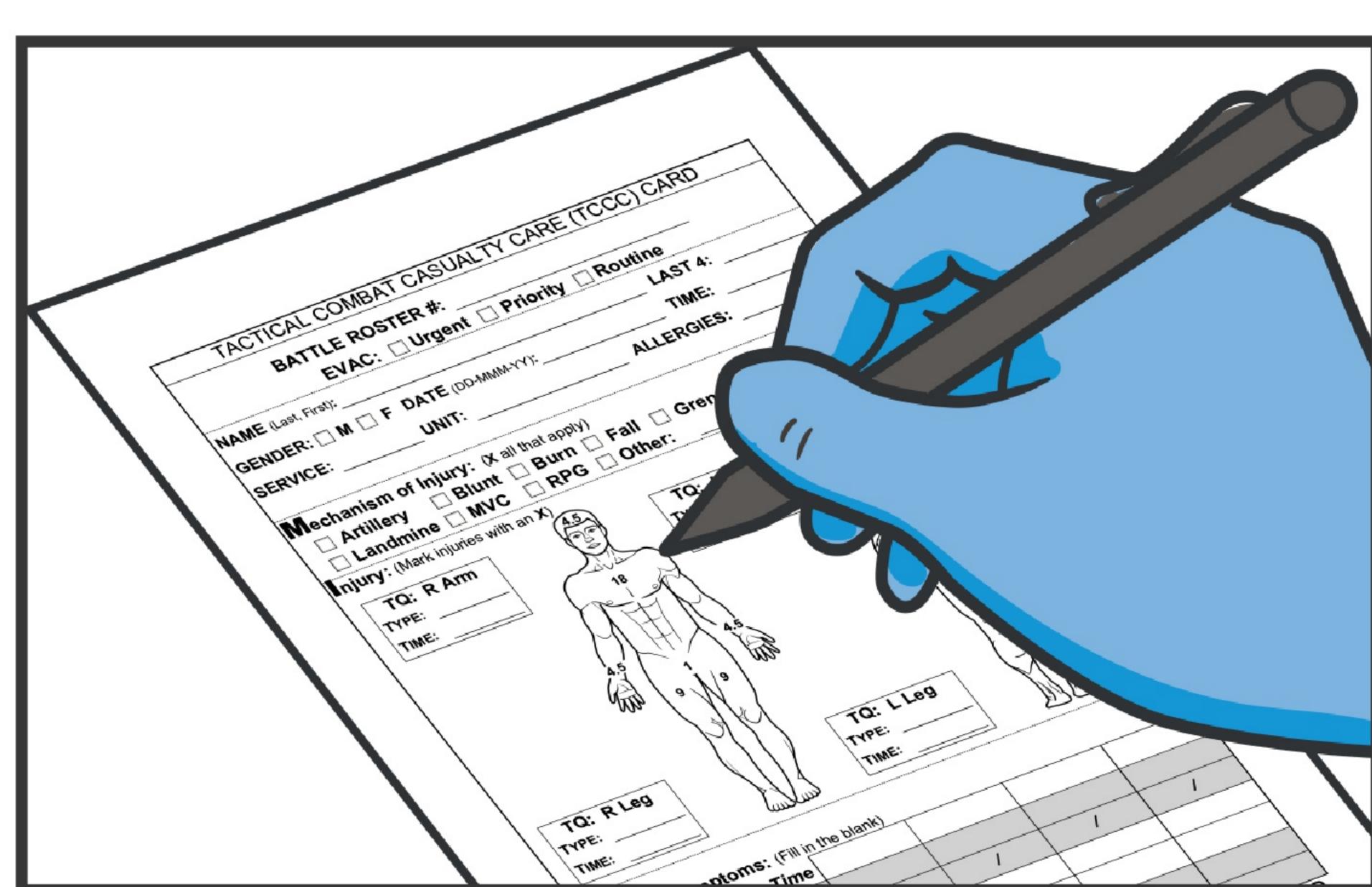

3АДОКУМЕНТУЙТЕ результати у картці пораненого форми DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого (якщо це можливо).