


# мішок Амбу - один чоловік



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

## Bag Valve Mask (BVM)

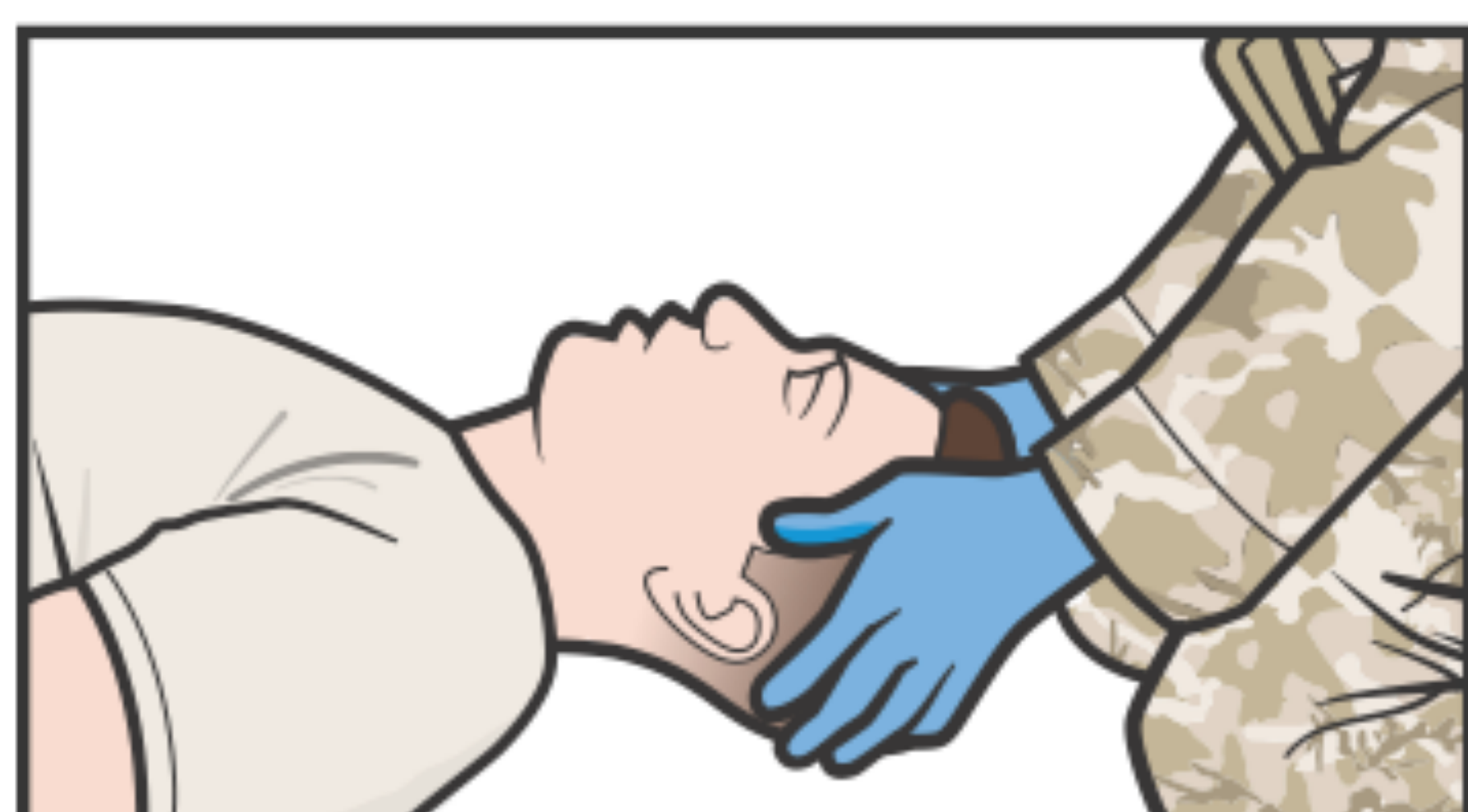


**01** Розмістіть себе над головою пораненого.



**02** ВСТАВТЕ назофарингеальний дихальний шлях.



**03** З'єднайте частини мішок Амбу. Підключіть маску до мішок Амбу.

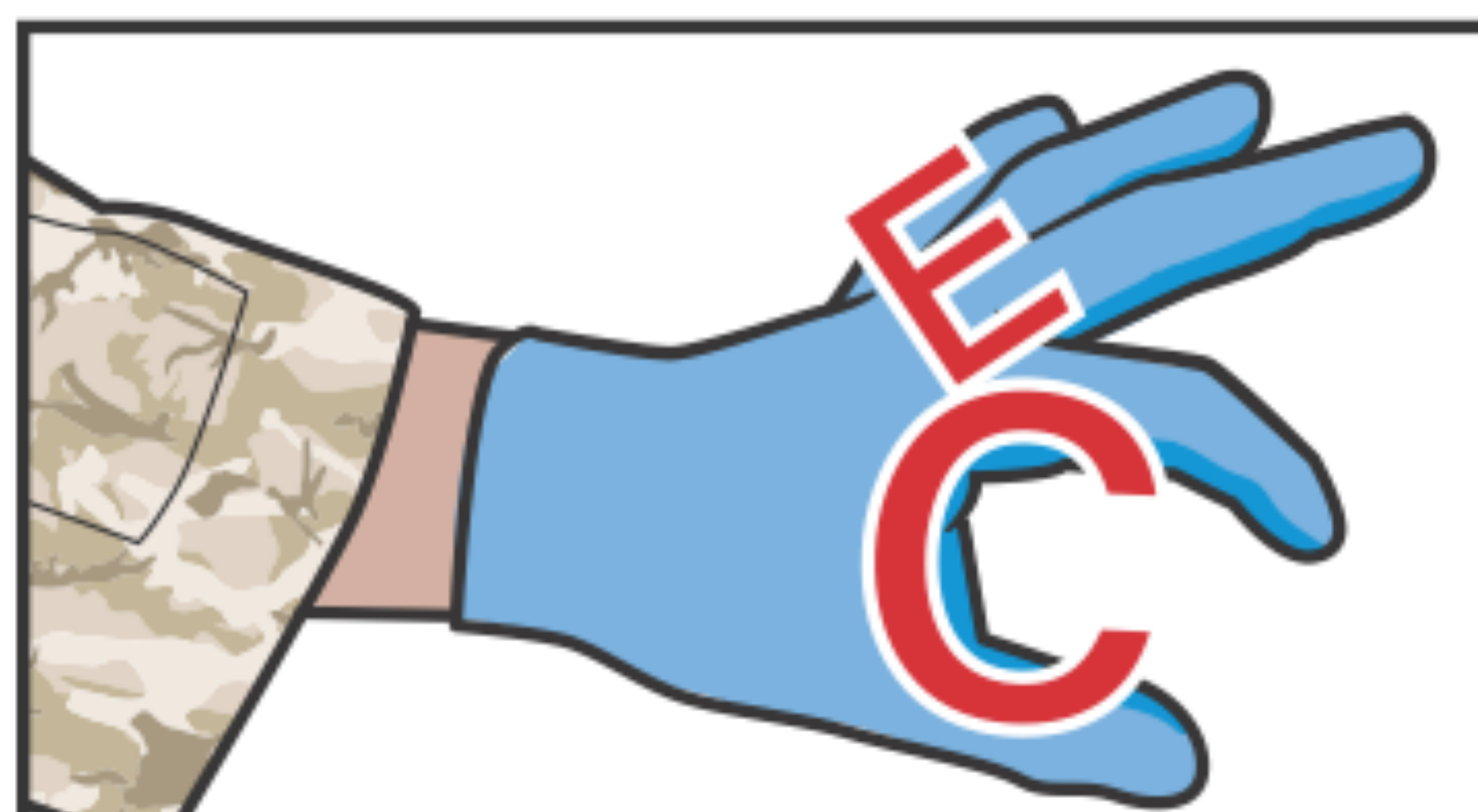

**04** ВИКОРИСТОВУЙТЕ форму "Е" і "С", щоб тримати маску на роті пораненого.

**ПРИМІТКА** - "Е" і "С", одна рука.



ФОРМА "С" великим і верхнім пальцями навколо стрижня маски.



Маска утворює щільне прилягання, натискаючи вниз великим і верхнім пальцями.

Форма букви «Е» утримує щелепи та дихальні шляхи відкритими з нахилом голови та підняттям підборіддя.



**05** ПІДТРИМУЙТЕ герметичного ущільнення обличчя пораненого за допомогою тиску.



**06** СТИСНІТЬ мішок іншою рукою протягом 1-2 секунд, спостерігайте за грудною кліткою пораненого, щоб переконаватися, що легені надуваються.



**07** ПРОДОВЖУЙТЕ СТИСНУТИ мішок кожні 5-6 секунд, частота 10-12 вдихів на хвилину.

**ПРИМІТКА.** мішок Амбу може бути стиснута до вашої ноги, щоб збільшити кількість доставленої суми або зменшити втому.



**08** ПРОДОВЖУЙТЕ вентиляцію, стежте за спонтанним диханням, періодично перевіряйте пульс.



**09** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.