



COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE









НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТА З ВОРОТКОМ І ПРЯЖКОЮ ДВОМА РУКАМИ

(ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ, CUF)

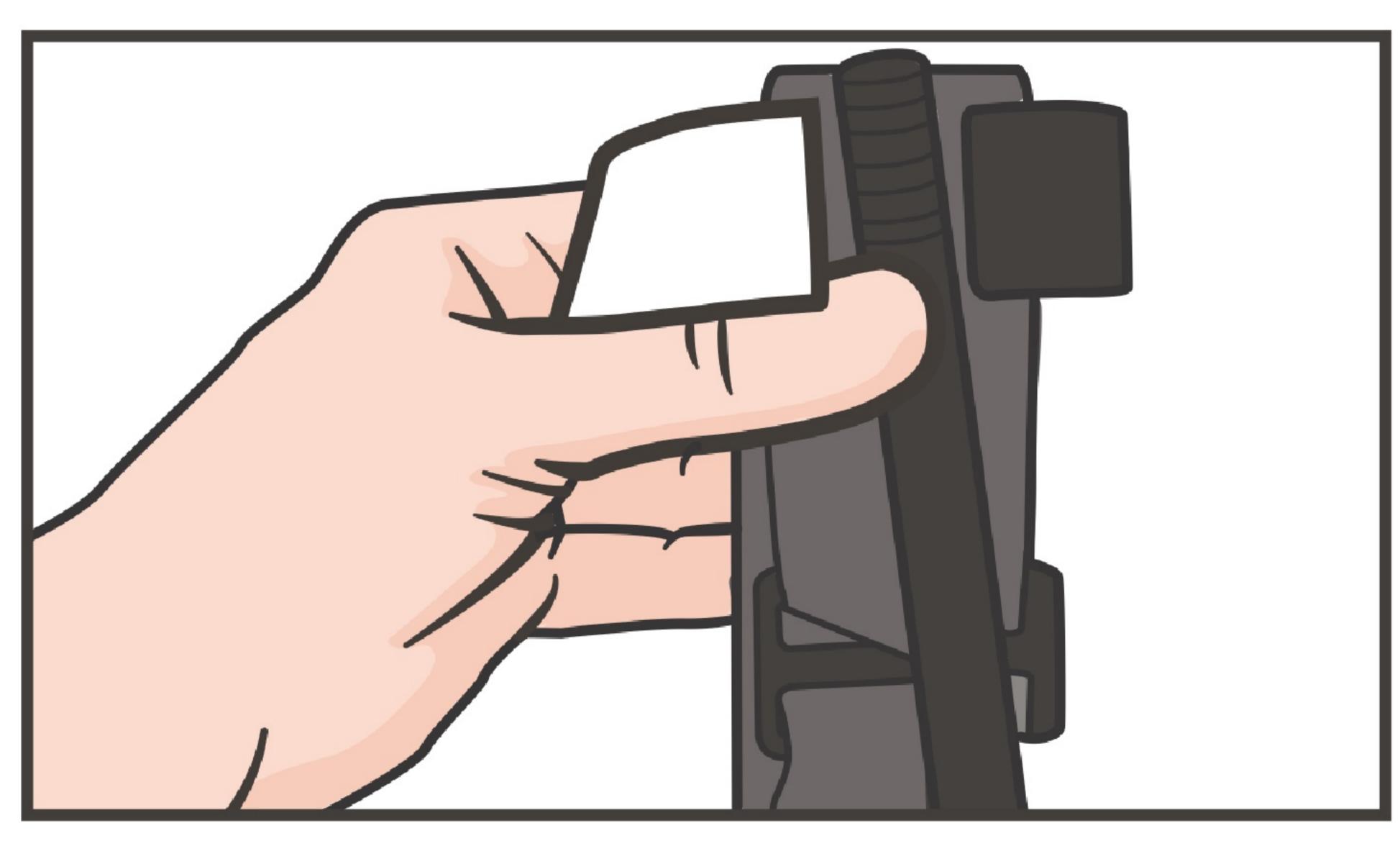


Дістаньте турнікет з тактичної індивідуальної аптечки (JFAK) та/або підсумка.

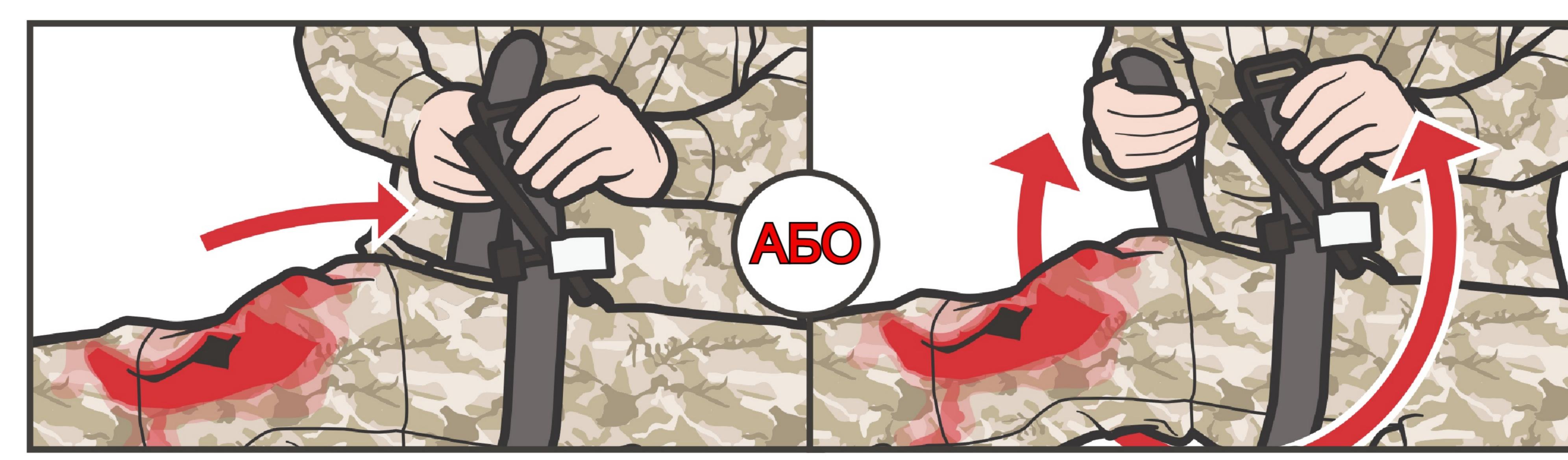

Просуньте поранену кінцівку крізь петлю, яку утворює самоклеюча стрічка (турнікет у вигляді замкнутої петлі).

Обгорніть ремінь навколо кінцівки; просуньте його кінець крізь отвір пряжки.

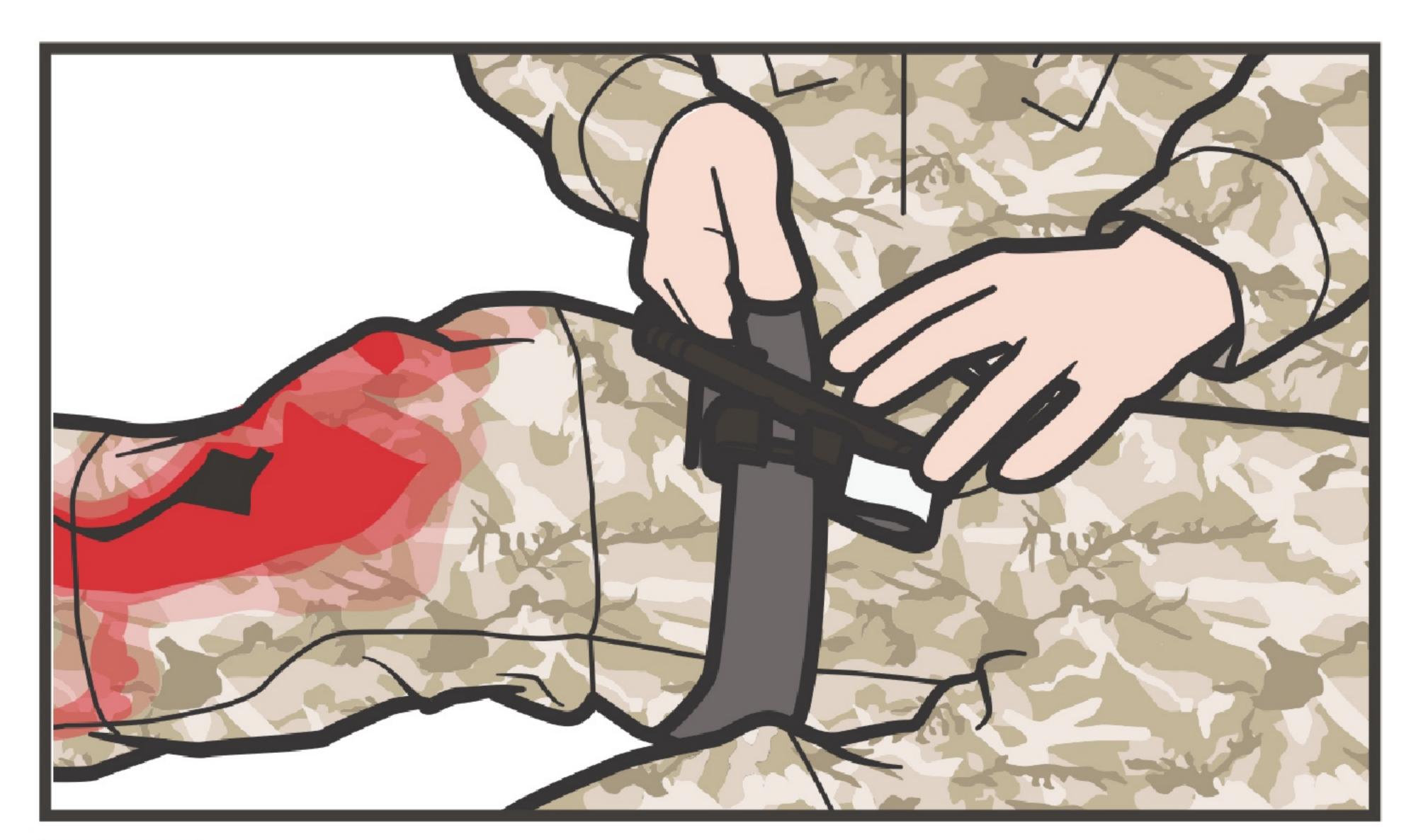

Розмістіть турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці поверх одягу/уніформи.




О4.1 Перед затягуванням турнікета та закручуванням воротка переконайтеся, що стрічка протягнута крізь пряжку без провисань.



3афіксуйте самоклеючу стрічку по всій довжині навколо кінцівки, але не над скобами, які фіксують вороток.




3акручуйте вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться (кроки 1-5 слід виконати менш, ніж за 1 хв).

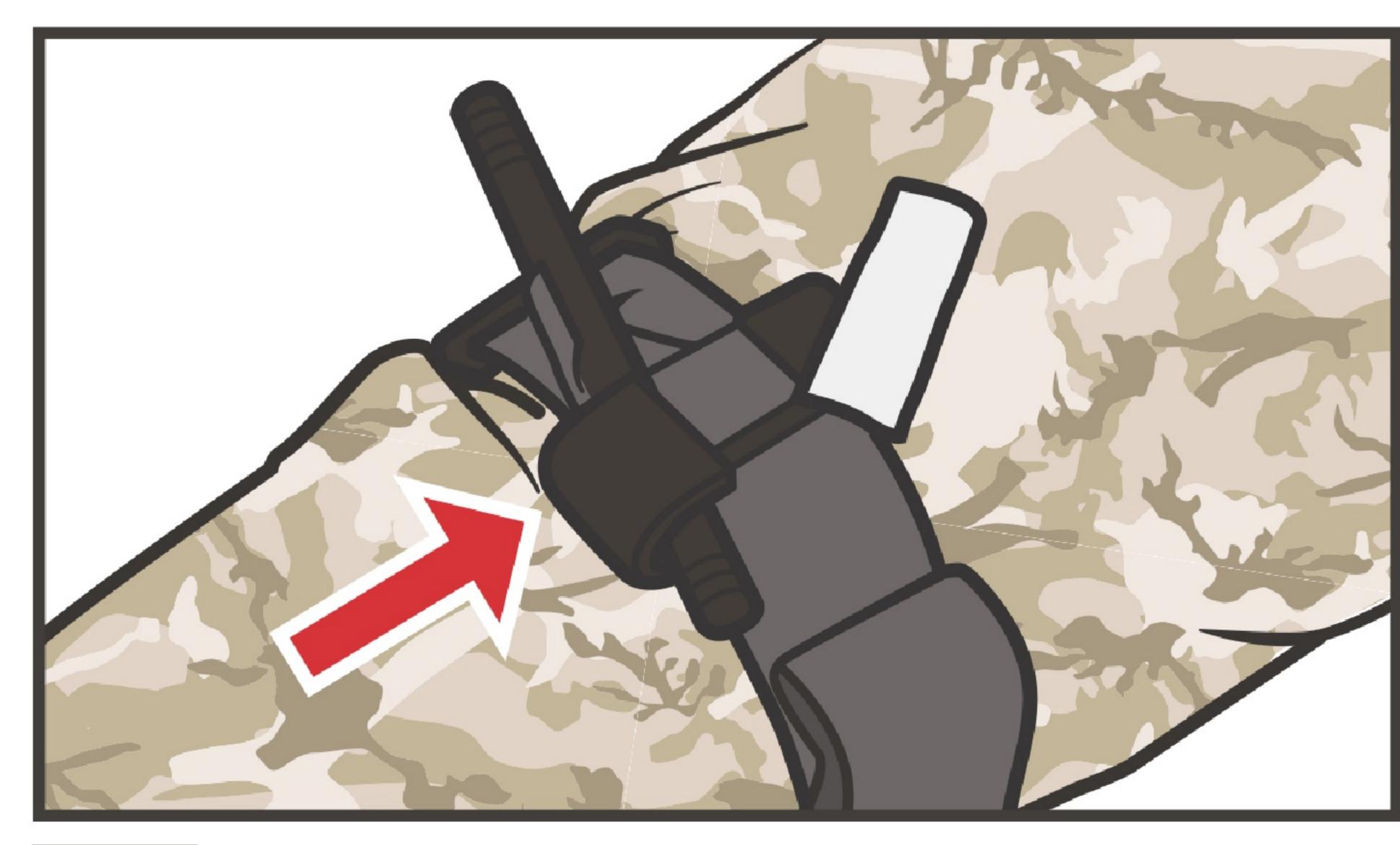


Закріпіть вороток за допомогою фіксатора.



Проведіть самоклеючу стрічку навколо воротка та між фіксуючими скобами.

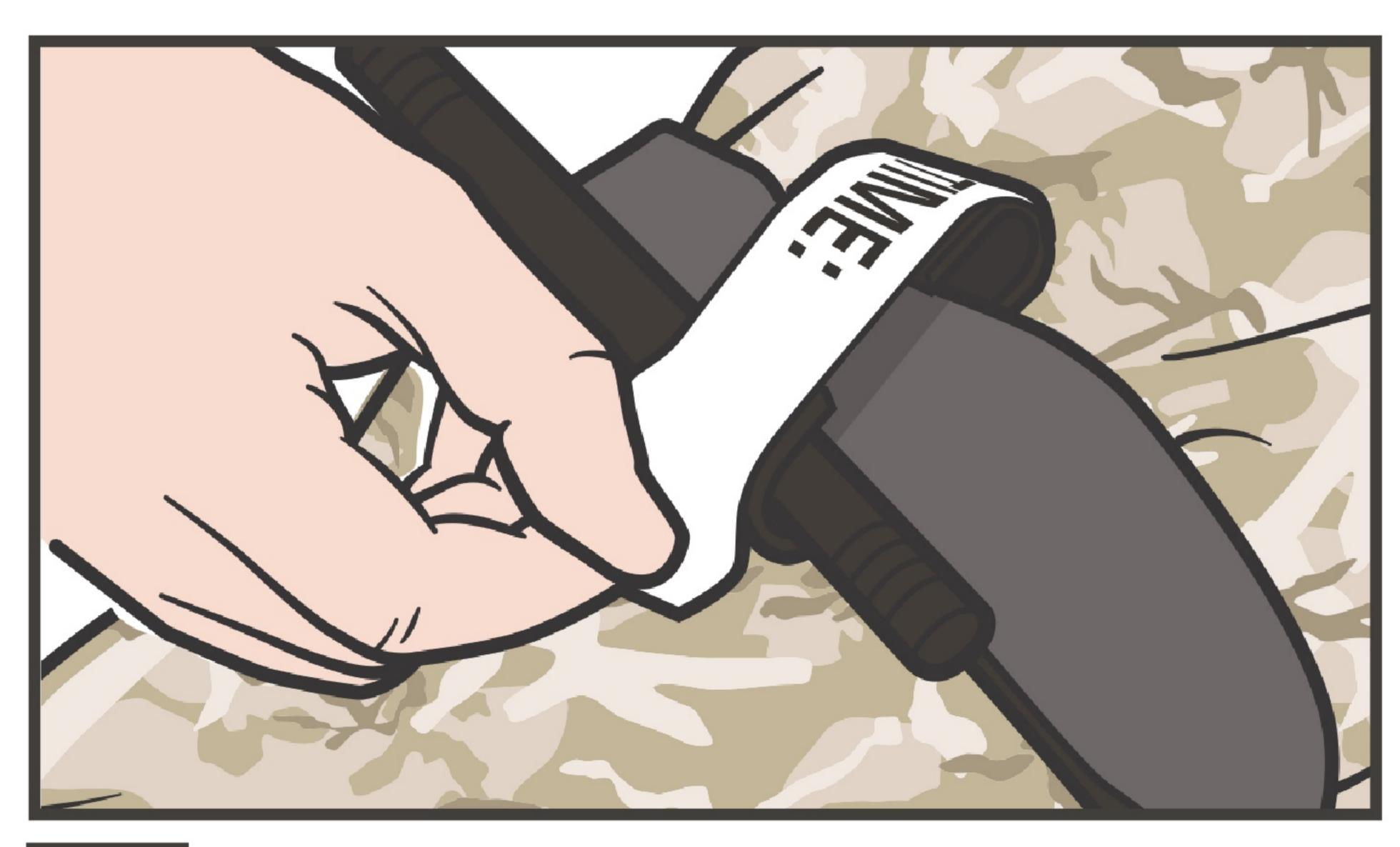

3акріпіть усе фіксуючою стрічкою.

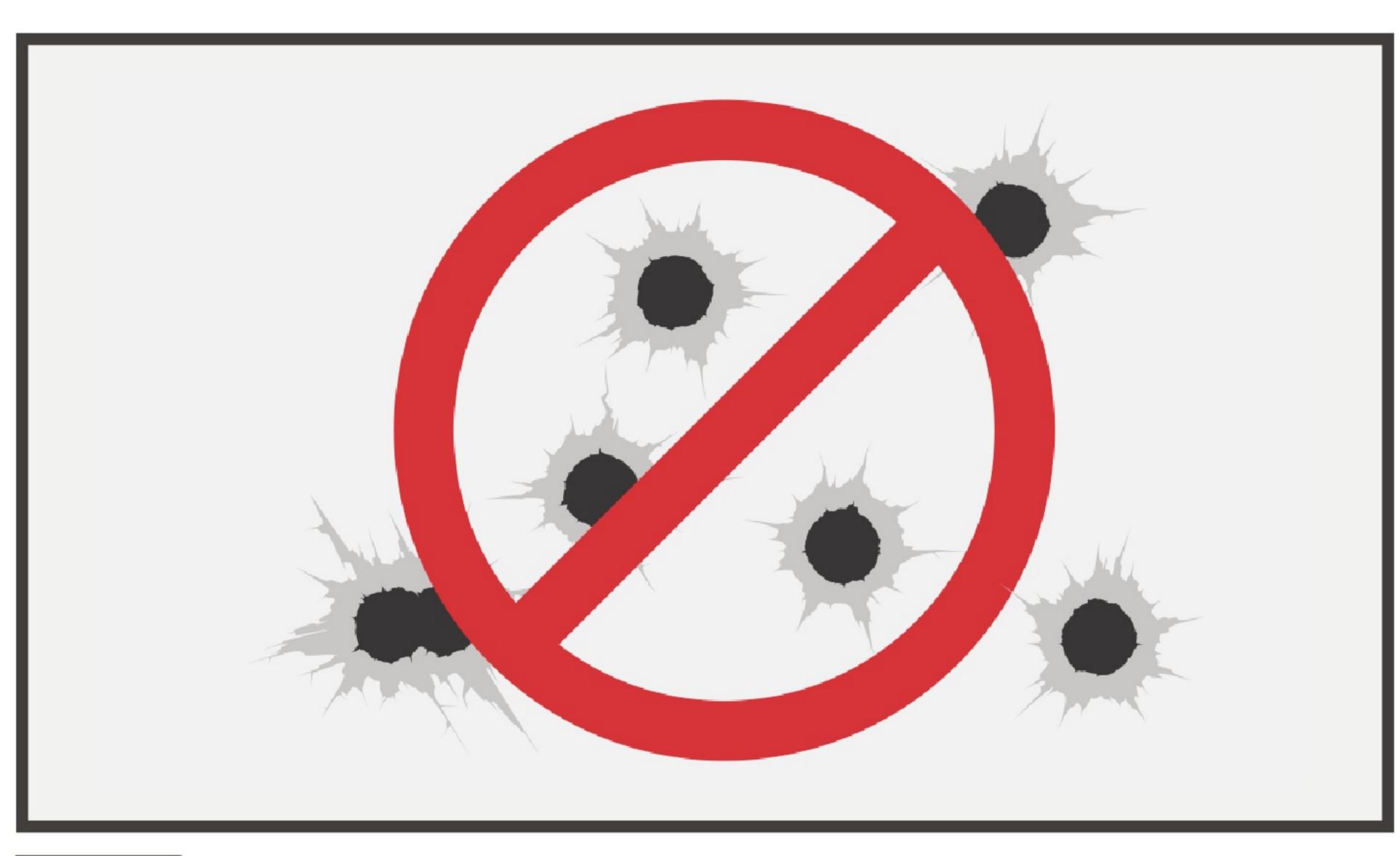

Якщо відсутні ознаки інших масивних кровотеч, перемістіть пораненого в укриття.