








## Накладання турнікета з зубчастим механізмом двома руками

## (ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ, CUF)

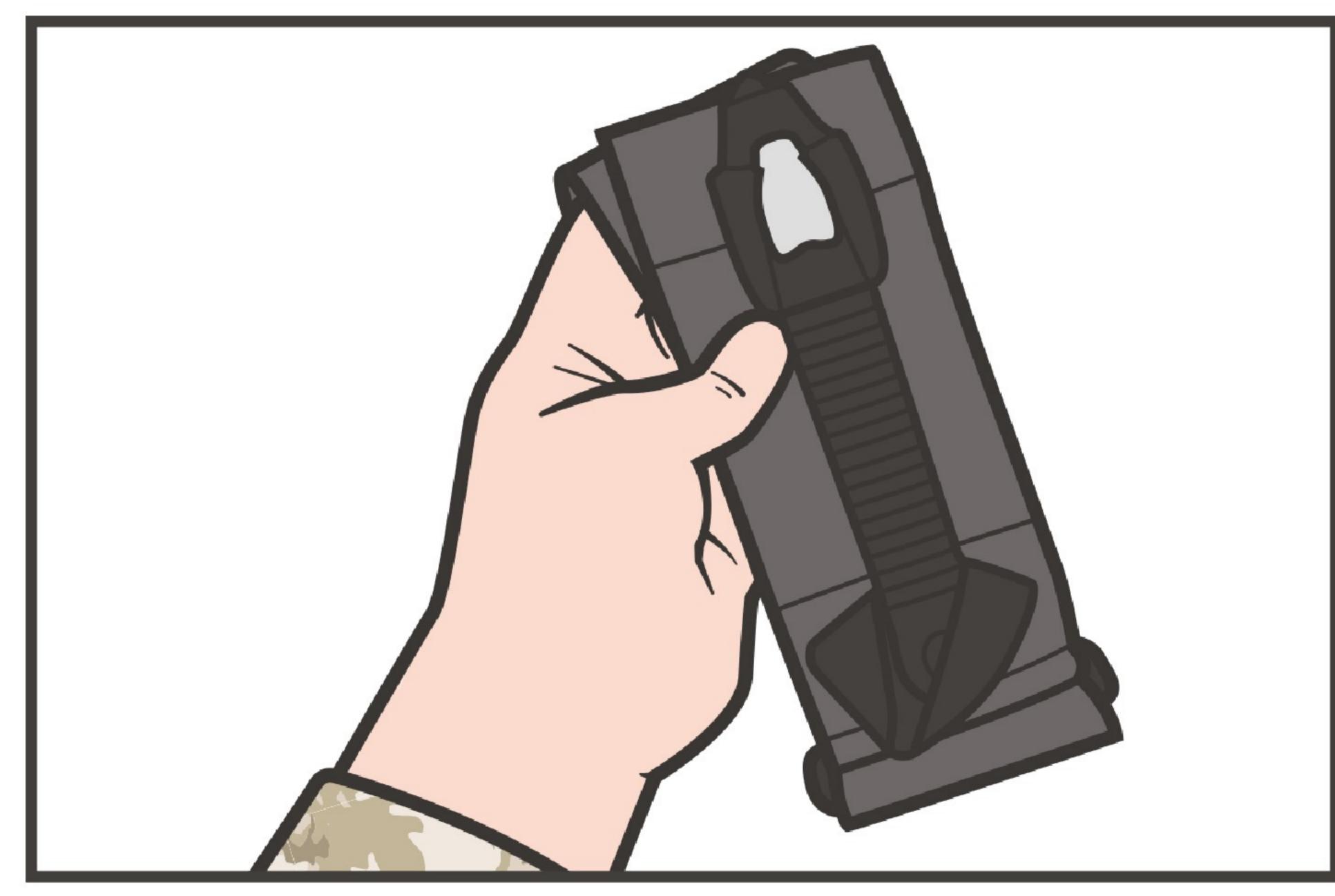


**О1** Дістаньте турнікет із тактичної індивідуальної аптечки пораненого та/або з підсумка.




02.1 Просуньте поранену кінцівку крізь петлю, яку утворює самоклеюча стрічка (турнікет у вигляді замкнутої петлі).

02.2 Обгорніть ремінь навколо кінцівки; просуньте його кінець крізь отвір пряжки.

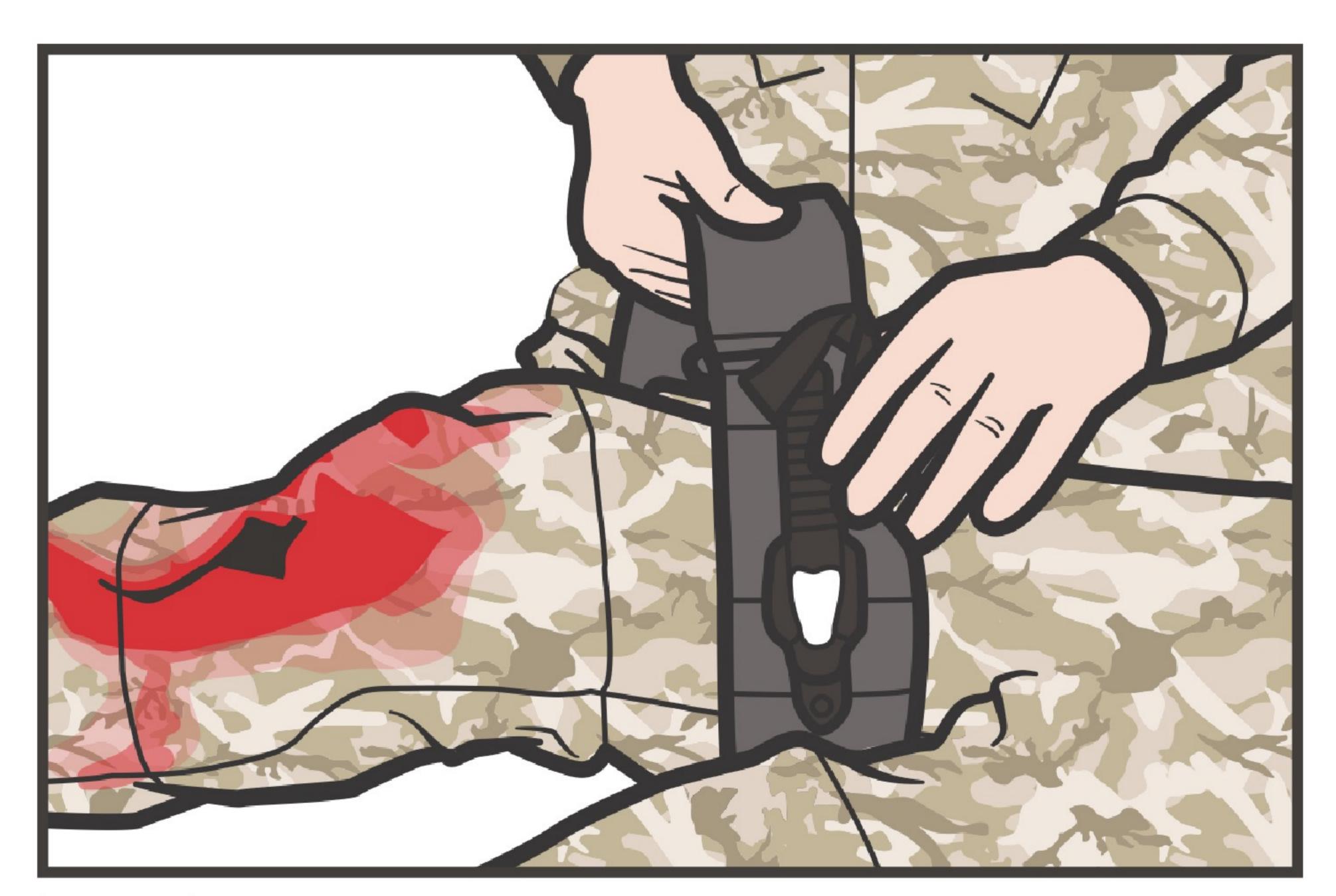

Розмістіть турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці поверх одягу/уніформи.

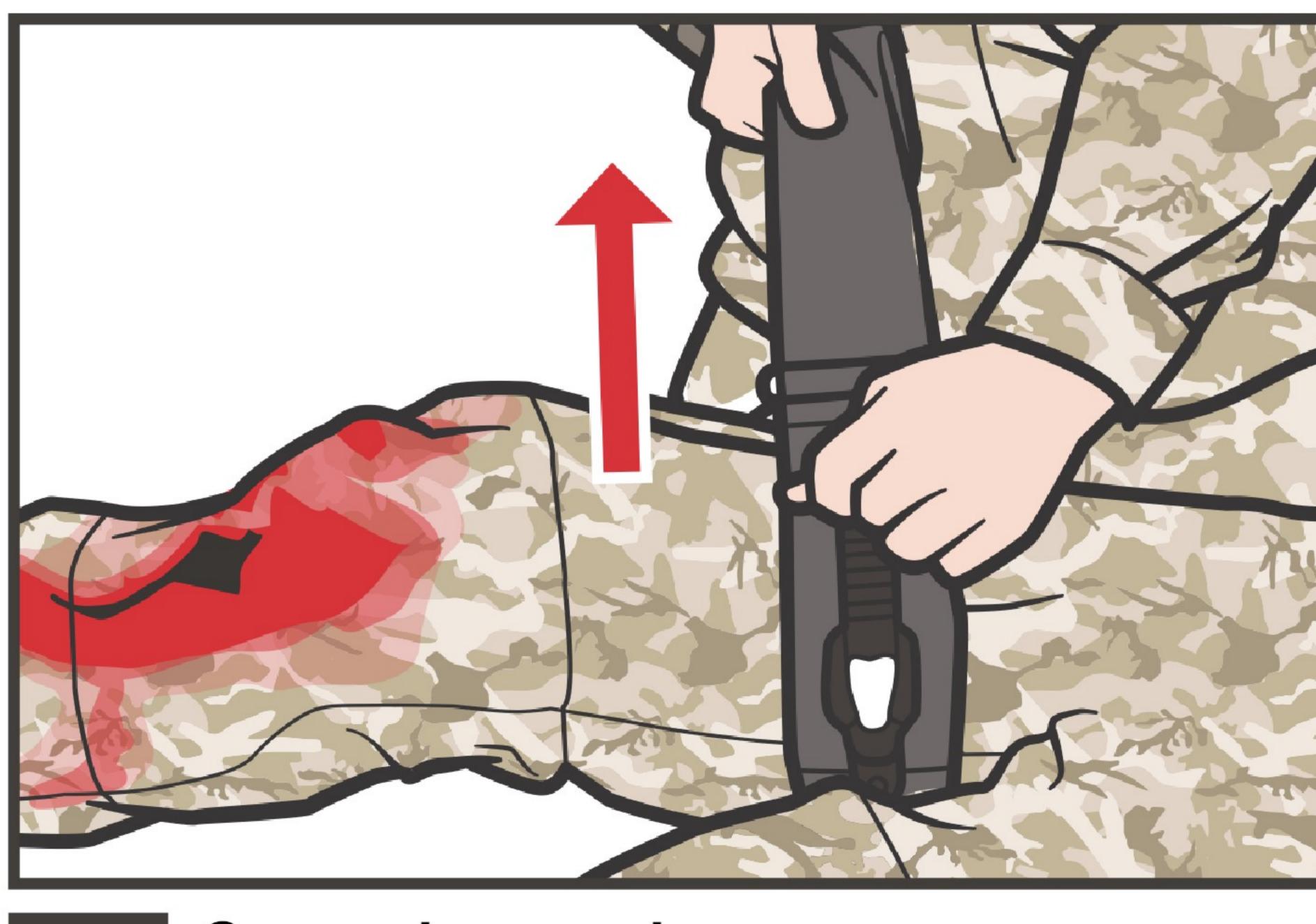

Затягніть ремінь якомога сильніше, усуваючи будь-які провисання.



Затягніть зубчастий механізм якомога щільніше до зупинки кровотечі

(виконайте кроки 1-5 менш, ньж за 1 хвилину).



Зафіксуйте зубчастий механізм (він стане на місце з характерним клацанням).

Примітка: Не документуйте час накладання турнікета до переходу в фазу Допомоги в польових умовах.



Якщо відсутня інша значна кровотеча, перемістіть пораненого в укриття.